

ÜRÜN KILAVUZU VE KULLANICI EL KİTABI

RT-4546, RT-4546MRI, RT-4546-01 ve RT-4546-02

Access™ Supine Göğüs ve Akciğer

Access™ Supine MR Göğüs ve Akciğer

Access™ Supine Göğüs

Access™ Supine Göğüs ve Akciğer, Kafessiz





EC REP		Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 A.B.D.'de üreten Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 484-720-6053 www.Qfix.com
------------------------------	--	--	--

Exact®, Varian Medical Systems şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Access, MR Secure, kVue, VacQfix ve ArmShuttle Elite, Qfix şirketinin ticari markalarıdır.

Cidex®, Johnson & Johnson şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Clorox®, The Clorox Company şirketinin tescilli ticari markasıdır.

! NOT ! Bu kılavuz boyunca “Access Supine”, aksi belirtilmedikçe, Access™ Supine Göğüs ve Akciğer, Access Supine MR Göğüs ve Akciğer ve Access™ Supine Göğüs dahil olmak üzere tüm Access™ Supine Cihazları belirtir.

İÇİNDEKİLER

GENEL ÖNLEMLER	4
UYARI İFADELERİ	4
CİDDİ OLAYLAR.....	4
İZLEME BÖLGELERİ.....	4
TEDAVİ İŞİNİN ZAYIFLAMASI.....	4
MRI GÜVENLİK BİLGİSİ	5
UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI	6
KULLANIM AMACI.....	7
ÖZELLİKLER.....	8
TANIM.....	8
BİLEŞENLER	8
ÇALIŞTIRMA TALİMATI	10
MONTAJ	10
AYAR.....	11
ÇIKARMA	16
BAKIM.....	17
SİSTEMİN TEMİZLENMESİ	17
SİSTEMİN DEZENFEKTE EDİLMESİ	17
YAN İŞARET YERLEŞİMİ	18
SPESİFİKASYONLAR	19
BOYUTLAR	19
PARÇA LİSTESİ.....	20
KURULUM SAYFASI.....	21
RT-4546: ACCESS SUPİNE GÖĞÜS VE AKCİĞER, RT-4546MRI: ACCESS SUPİNE MR GÖĞÜS VE AKCİĞER, RT-4546-01: ACCESS SUPİNE GÖĞÜS VEYA RT-4546-02: ACCESS SUPİNE GÖĞÜS VE AKCİĞER, KAFESSİZ	21
RT-4546: ACCESS SUPİNE GÖĞÜS VE AKCİĞER, RT-4546MRI: ACCESS SUPİNE MR GÖĞÜS VE AKCİĞER, RT-4546-01: ACCESS SUPİNE GÖĞÜS VEYA RT-4546-02: ACCESS SUPİNE GÖĞÜS VE AKCİĞER, KAFESSİZ	22

GENEL ÖNLEMLER

UYARI İFADELERİ

! UYARI ! BU EKİPMANDA MODİFİKASYON YAPILMASINA İZİN VERİLMEZ. CİHAZIN HERHANGİ BİR KISMI ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE BİR YÜKE MARUZ KALIR, HASARLI GÖRÜNÜR VEYA UYGUN OLMAYAN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIRSA KULLANIMI HEMEN KESİN VE +1 484-720-6053 VEYA TECHSUPPORT@QFIX.COM KANALIYLA QFIX İLE İRTİBAT KURUN.

! UYARI ! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE, AÇI MERDİVENLERİNİN, MENTEŞE BOYUNCA OLUK İÇİNDE SABİTLENDİĞİNDEN EMİN OLUN. BUNUN YAPILMAMASI HALİNDE CİHAZ HASAR GÖREBİLİR YA DA YARALANMA MEYDANA GELEBİLİR.


! UYARI ! BİR HASTA CİHAZIN ÜZERİNDEYKEN MERDİVENLERİ ASLA YÜKSELTMEYİN YA DA ALÇALTMAYIN.

! UYARI ! CİHAZI ASLA KOL YA DA BİLEK DESTEKLERİNİ TUTARAK KALDIRMAYIN YA DA TAŞIMAYIN.

! UYARI ! HASTANIN ARMSHUTTLE SAPLARINI KULLANARAK POZİSYONU AYARLAMASINA İZİN VERMEYİN.

! UYARI ! HASTANIN KOL VE BİLEK DESTEKLERİNİ KULLANARAK POZİSYONU AYARLAMASINA İZİN VERMEYİN.

! UYARI ! ARMSHUTTLE'İ HASTA YÜZEYİNİN AÇISINI AYARLAMAK İÇİN KULLANMAYIN.

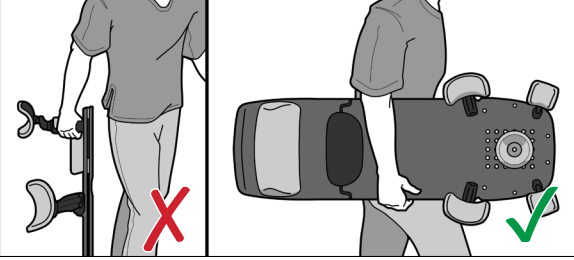

CİDDİ OLAYLAR

Ciddi olayları lütfen (ör. ölüm ya da ciddi yaralanmaya yol açan veya yol açma potansiyeli bulunan olaylar) hem Qfix firmasına hem de ülkenizde yetkili makama bildirin.

İZLEME BÖLGELERİ

- Kol Desteği veya Bilek Desteği yüksekliği ayarlanırken izleme bölgeleri oluşabilir.
- Kol Desteği veya Bilek Desteği açısı ayarlanırken izleme bölgeleri oluşabilir.
- Hasta Yüzeği ve Taban Plakası arasındaki menteşe içinde izleme bölgeleri oluşabilir.

TEDAVİ İŞİNİN ZAYIFLAMASI

Access Supine, çoğu posteroanterior (PA) tedavi alanının, ışın cihazın akciğer kesimlerinden geçecek şekilde ayarlanabileceği biçimde hasta konumlandırması yapılacak şekilde tasarlanmıştır. Access Supine'in yapısal bölgelerinde, 6 MV'de su eşdeğerliği 5 mm'dir. Tedavi yatağından tedavi, bu zayıflamayı artıracaktır. Kurulumu göre fiili zayıflama, kullandığınız ekipmanlara göre teyit edilmelidir. Herhangi bir cihaz içinden yapılacak tedavi, cihaz kompozit malzemelerden yapılmış olsa dahi, cildin maruz kaldığı dozda bir artışa yol açacaktır.

GENEL ÖNLEMLER

MRI GÜVENLİK BİLGİSİ

 **20 derece ve 25 derece isteğe bağlı aksesuar merdivenler MR için güvenlidir.**

Klinik dışı testlerde, **20 derece ve 25 derece isteğe bağlı aksesuar merdivenlerin**, aşağıdaki koşullara uyan bir MR sisteminde kullanılabileceği ortaya konmuştur:

- Merdivenler, MR taraması öncesinde, aşağıdaki sembolle açıkça etiketlenmiş olan, Access Supine'in MR Güvenli versiyonuyla (RT-4546MRI) kullanılmalıdır:



 **Kol ve Bilek Destekleri MR Koşulludur.**

Klinik dışı testlerde, **Kol ve Bilek Desteklerinin**, aşağıdaki koşullara uyan bir MR sisteminde kullanılabileceği ortaya konmuştur:

- **Kol ve Bilek Destekleri**, statik Manyetik alanı 1,5 T veya daha düşük olan bir MR sisteminin deliğine konabilir.
- **Kol ve Bilek Destekleri**, tarama öncesinde, Access Supine'in MR Güvenli versiyonuyla (RT-4546MRI), kullanım amacına uygun şekilde kullanılmalıdır.
- Access Supine'in MR Güvenli versiyonu (RT-4546MRI), aşağıdaki sembol ile açıkça etiketlenmiştir:



 **Alt Stoper MR Koşulludur.**

Klinik dışı testlerde, **Alt Stoperin**, aşağıdaki koşullara uyan bir MR sisteminde kullanılabileceği ortaya konmuştur:

- **Alt Stoper**, statik Manyetik alanı 1,5 T veya daha düşük olan bir MR sisteminin deliğine konabilir.
- **Alt Stoper**, tarama öncesinde, Access Supine'in MR Güvenli versiyonuyla (RT-4546MRI), kullanım amacına uygun şekilde kullanılmalıdır.
- Access Supine'in MR Güvenli versiyonu (RT-4546MRI), aşağıdaki sembol ile açıkça etiketlenmiştir:



GENEL ÖNLEMLER


UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI

Sembollerin listesi ve tanımları için Qfix.com sitesine bakın.



YÜK ANMA DEĞERİ

249 kg'lık (550 pound) eşit dağılımlı yükü veya kVue Insert cihazının ya da yatak tabanının azami çalışma yükünü (hangisi daha düşükse) AŞMAYIN.

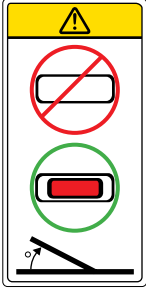

MERDİVEN UYARISI

Access Supine açılı bir biçimde kullanılırken, merdivenin güvenli biçimde yerine kilitlendiğinden ve merdivenin kırmızı uçlarının cihazın üst kısmından görüldüğünden emin olun.

Merdiven yerine düzgün biçimde sabitlenmeden Access Supine açılır bir biçimde kullanıldığında, cihaz zarar görebilir veya yaralanma meydana gelebilir.



MR GÜVENLİ

Herhangi bir MR ortamına maruz kalma nedeniyle bilinen tehlikeler oluşturmayan öğeyi belirtir. MR Güvenli öğeler elektriği iletmeyen, metalik olmayan ve manyetik özelliği bulunmayan malzemelerden oluşur.

! NOT ! SADECE RT-4546MRI İÇİNDİR.

KULLANIM AMACI

Bu cihazın kullanım amacı, radyasyon tedavisi olan hastaları hareketsiz hale getirmek, konumlandırmak ve yeniden konumlandırmaktır.

! NOT ! Bu cihazın satışı, ABD federal yasalarına göre sadece hekimler tarafından veya onların siparişi üzerine yapılabilir.

HASTA HEDEF GRUPLARI

Radyasyon tedavisi ya da diyagnostik görüntüleme prosedürleri uygulanmakta olan hastalar.

HEDEF KULLANICILAR

Ürünlerin hedef kullanıcısı, düzenleyici bölgedeki gerekliliklere uygun şekilde vasıflı kişidir.




ÖZELLİKLER

TANIM

Access Supine, simülasyona ya da tedavi yatağı üst kısmına güvenli iliştime sağlamak üzere, RT-4551BAR gibi, 2 adet, iki pimli Yerleştirme Çubuğuyla kullanılmalıdır. Bu Yerleştirme Çubukları Access Supine ile birlikte gelmez ve yatak üreticisinden ayrı olarak sipariş verilmelidir.

Access Supine, üst kolları ve bilekleri tekrarlanabilir bir pozisyonda tutmak üzere Kol Destekleri (RT-4546AA-01) ve Bilek Destekleri (RT-4546AW-01) kullanır. Kol ve Bilek Desteği yerine, isteğe bağlı bir ArmShuttle™ (RT-4546C) kullanılabilir.

BİLEŞENLER

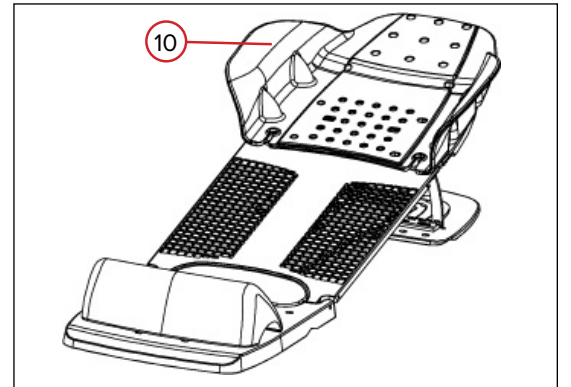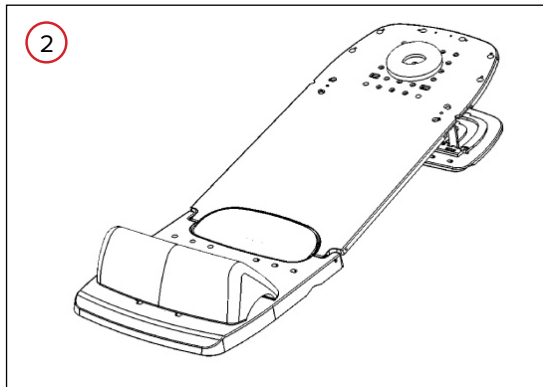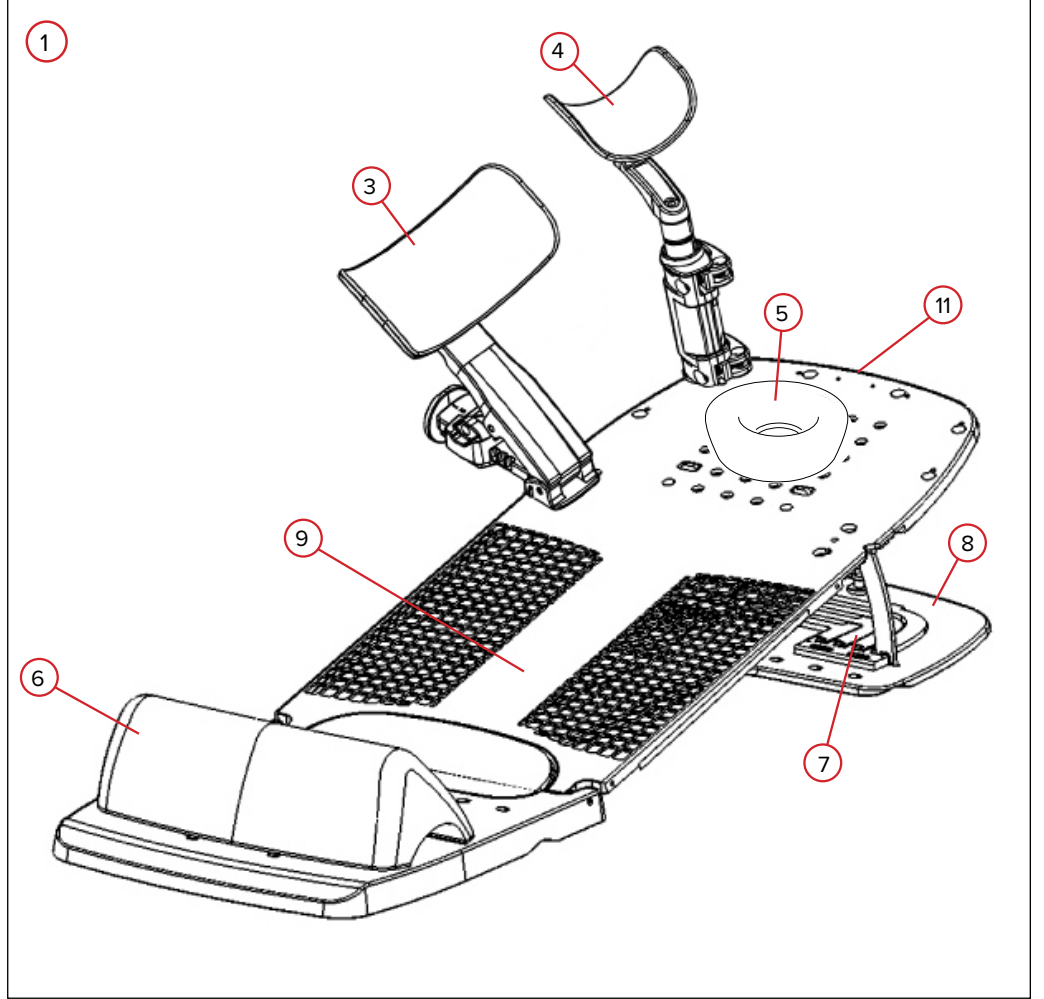

ÖZELLİKLER

BİLEŞENLER

1. ACCESS SUPINE GÖĞÜS VE AKCİĞER, ACCESS SUPINE GÖĞÜS VE ACCESS SUPINE GÖĞÜS VE AKCİĞER, KAFESSİZ

Access Supine, göğüs ve akciğer radyoterapisi uygulanmakta olan hastaların konumlandırma ve kurulum işlemlerinde yardımcı olarak kullanılır.

2. ACCESS SUPINE MR GÖĞÜS VE AKCİĞER

Access Supine MR (beyaz renklidir), Access Supine ile aynı şekilde çalışır ancak MRI ile kullanılabilir.

3. KOL DESTEĞİ

Kol Desteklerinin, simülasyon ve tedavi esnasında hasta kollarının üst kısmının doğru bir biçimde konumlandırılması için tam bir ayar aralığı vardır.

4. BİLEK DESTEĞİ

Bilek Destekleri, simülasyon ve tedavi esnasında hastanın bileklerini desteklemek üzere ayarlanır.

5. BAŞ DAYANAĞI

Birlikte gelen baş dayanağı, Access Supine’de çeşitli konumlara (1 ila 28 yazılı) yerleştirilebilir. Büyük ve küçük Jel Baş Dayanakları ile TIMO B Baş Dayanağı gibi isteğe bağlı baş dayanakları mevcuttur.

6. ALT STOPER

Birlikte gelen, indekslenebilir Alt Stoper, hastanın Access Supine ’den aşağı kaymasını önlemeye yardımcı olarak, hastanın düzgün konumlandırılmasını sağlar.

7. AÇILI MERDİVENLER

Açılı Merdivenler, hasta başı ve gövdesinin, 0, 5, 7,5, 10, 12,5, 15 derece açılarda dikey olarak açılmasını sağlar. İsteğe bağlı aksesuar merdivenler, hasta başı ve gövdesinin, 20 veya 25 derece açılarda dikey olarak açılmasını sağlar.

8. TABAN PLAKASI

Taban Plakası, Açılır Merdivenler ve Alt Stoper için iliştime noktaları sağlar ve simülasyona ya da tedavi yatağına güvenli şekilde iliştime yapılmasına olanak tanır.

9. HASTA YÜZEYİ

Hasta Yüzeyi, cihazın, tedavi için 0 ila 15 derece arasında ayarlandığı bölümdür.

10. ARMSHUTTLE ELITE

ArmShuttle Elite, simülasyon ve tedavi esnasında hasta kollarının konumlandırılması için, Kol Desteklerinin yerine kullanılabilir. Normalde bu, bir VacQfix™ Minder ile birlikte kullanılır.

11. KİLİT AÇMA ÖĞESİ

Kilit açma ögesi, hasta yüzeyini taban plakasına sabitler.


ÇALIŞTIRMA TALİMATI

MONTAJ


ACCESS SUPINE MONTAJI

1. Yerleştirme Çubuklarının uçlarını, hasta yatağının üst kısmı veya cihaz üzerindeki Varian Exact® uyumlu indeks dişlerine, 700 mm (tipik olarak 5 diş) arayla yerleştirin ve Yerleştirme Çubuklarını yerlerine takın. (Şekil 1)
2. Access Supine'i, Taban Plakadaki delikler, Yerleştirme Çubuklarındaki iki pimle hizalanacak biçimde, Yerleştirme Çubuğunun üzerine konumlandırın. (Şekil 2)
3. Access Supine'i yerine kilitlemek için, Access Supine'i aşağı, Yerleştirme Çubuğu üzerine itin. (Şekil 3)


! NOT ! Access Supine, istendiği şekilde tümörün izomerkeze daha yakın konumlandırılması için herhangi bir yana dengelenebilir.

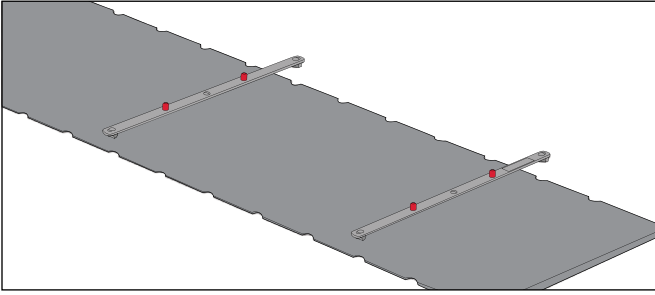

ŞEKİL 1

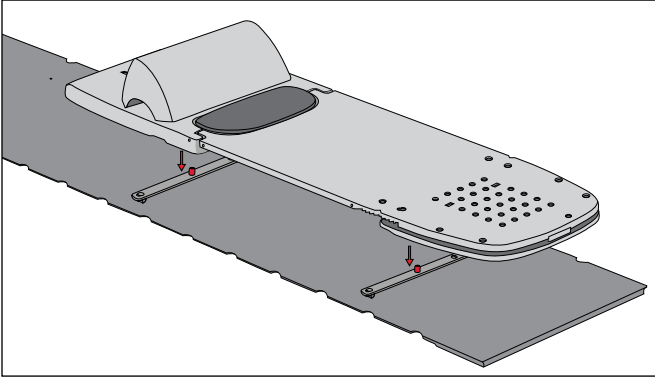

ŞEKİL 2

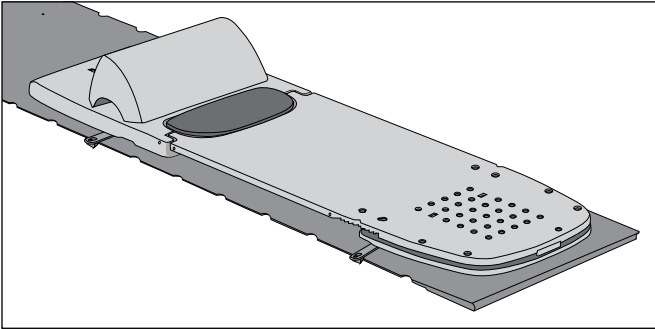

ŞEKİL 3


ÇALIŞTIRMA TALİMATI

AYAR


HASTA AÇISI

! DİKKAT ! ACCESS SUPİNE AÇILI BİR ŞEKİLDE KULLANILIRKEN, AÇI MERDİVENLERİNİN ÜST PANELE SABİTLENDİĞİNDEN VE KIRMIZI UÇLARIN CİHAZIN ÜST KISMINDAN GÖRÜLDÜĞÜNDEN EMİN OLUN. AÇILIR MERDİVENLER DÜZGÜN SABİTLENMEZSE, HASTADA YARALANMA VE/VEYA CİHAZDA HASAR MEYDANA GELEBİLİR.


1. Kilidi açmak için, Kilit Açma öğesine basın. (Şekil 4)
2. Hasta Yüzeyini kaldırın ve Açılı Merdiveni yerine yükseltin. (Şekil 5 ve 6)
3. Açılı Merdiven, yuvaların içine kilitlenene kadar, Hasta Yüzeyini alçaltın. Kilitlendiğinde, Açılı Merdivenlerin kırmızı uçları, Hasta Yüzeyinden görülebilecektir. (Şekil 7)

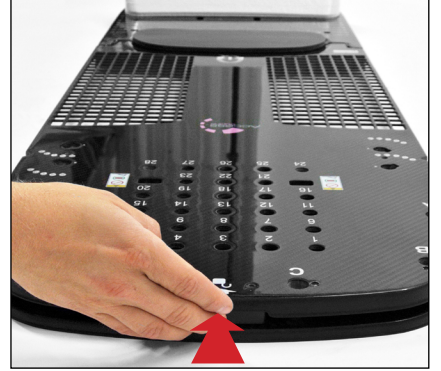


ŞEKİL 4

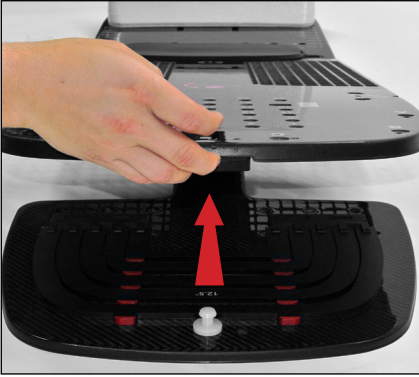

ŞEKİL 5

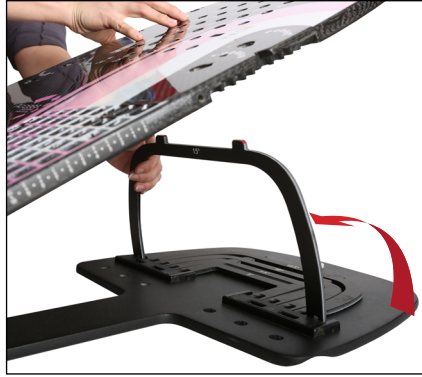

ŞEKİL 6

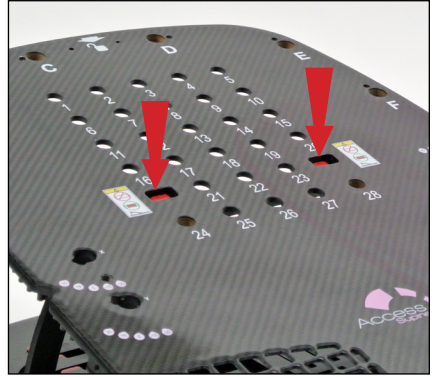

ŞEKİL 7


! NOT ! 20 veya 25 derece İSTEĞE BAĞLI AKSESUAR merdivenleri takmak için, bir tanesini Açılı Merdiven Menteşesinin açık yuvalarının içine yerleştirin. (Şekil 8)




ŞEKİL 8

BAŞ DAYANAĞI

Baş Dayanağını, Hasta Yüzeyinin üst ucundaki kullanılabılır konumların birine (1-28) takın. (Şekil 9 ve 10)

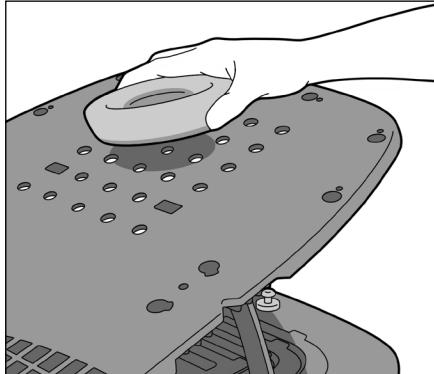

ŞEKİL 9

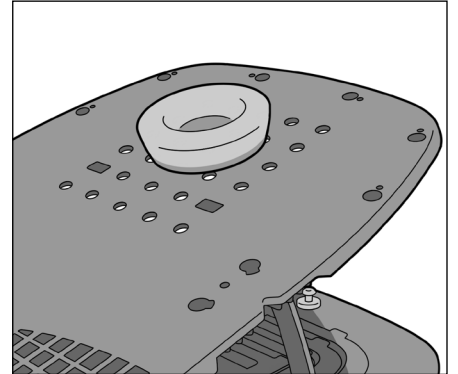

ŞEKİL 10

ÇALIŞTIRMA TALİMATI


AYAR

KOL DESTEĞİ


1. Kola Desteğini takmak için, düğmeyi gevşetin ve iki konumun birine yerleştirin ("X" ve "Y" işaretli). Kol Desteğini Hasta Yüzeyi üzerine kilitlemek için, düğmeyi sıkın. (Şekil 11)
2. Kol Desteğinin dönüşünü ayarlamak için, düğmeyi gevşetin ve Kola Desteğini istenen konuma döndürün ve düğmeyi sıkın. (Şekil 12)

! DİKKAT ! GEREĞİNDEN FAZLA SIKMAYIN.


3. Yüksekliği ayarlamak için, yükseklik kaydırıcıda bulunan düğmeye basın ve kol boyunca kaydırın, istenen konuma geldiğinde düğmeyi bırakın. (Şekil 13)
4. Kolun uzunluğunu ayarlamak için, uzunluk kaydırıcıda bulunan düğmeye basın ve kol boyunca kaydırın, istenen konuma geldiğinde düğmeyi bırakın. (Şekil 14)

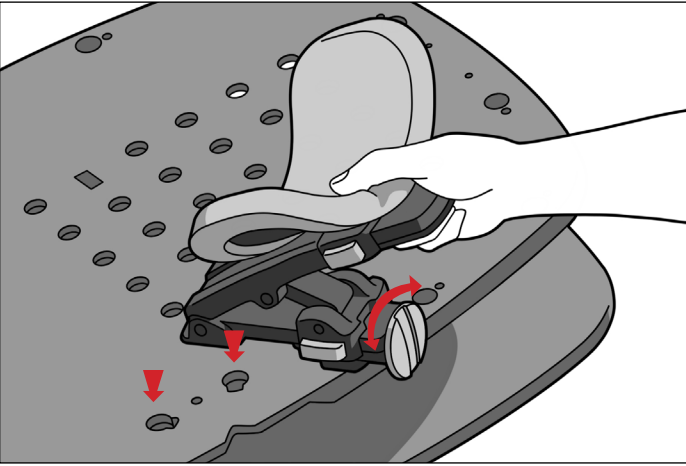


ŞEKİL 11

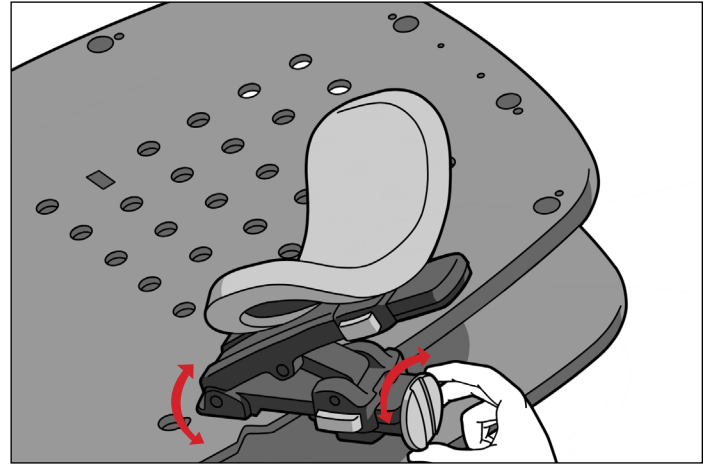

ŞEKİL 12

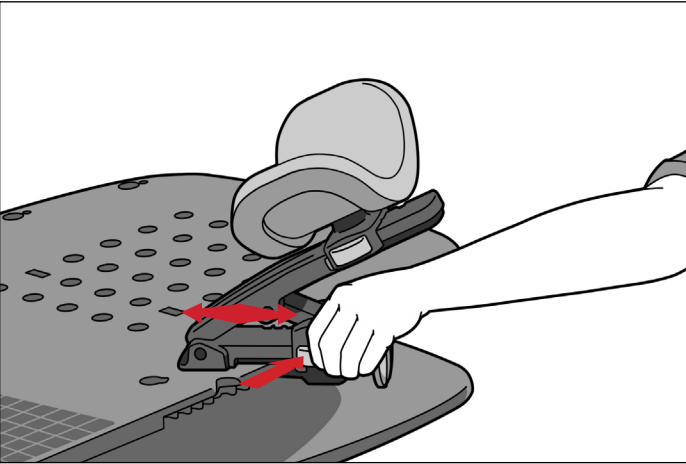

ŞEKİL 13

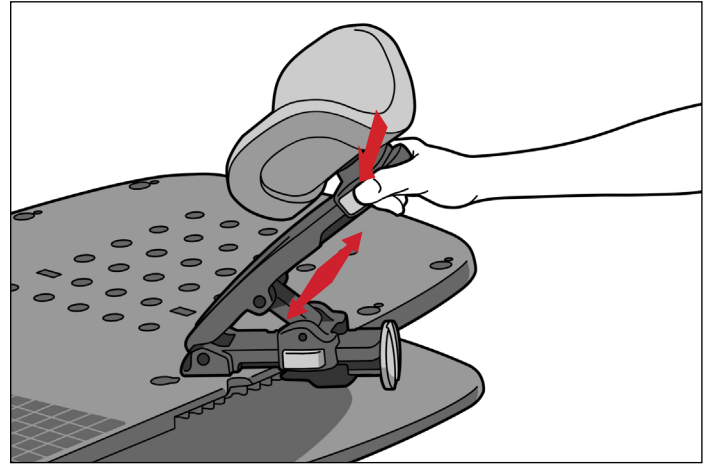


ŞEKİL 14

ÇALIŞTIRMA TALİMATI


AYAR

BİLEK DESTEĞİ


1. Bilek Desteğini takmak için, Bilek Desteğinin alt kısmındaki her iki mandalı, Hasta Yüzeyindeki karşılık gelen iki delikle hizalayın. (Şekil 15)
2. Alt kolu kapatarak yerine kilitleyin. (Şekil 16)
3. Bilek Desteğinin üst destek parçasını yükseltmek ya da alçaltmak için, üst kolu açın. Üst destek parçasını istediğiniz konuma yükseltin, alçaltın ya da döndürün ve üst kolu kapatın. (Şekil 17 ve 18)

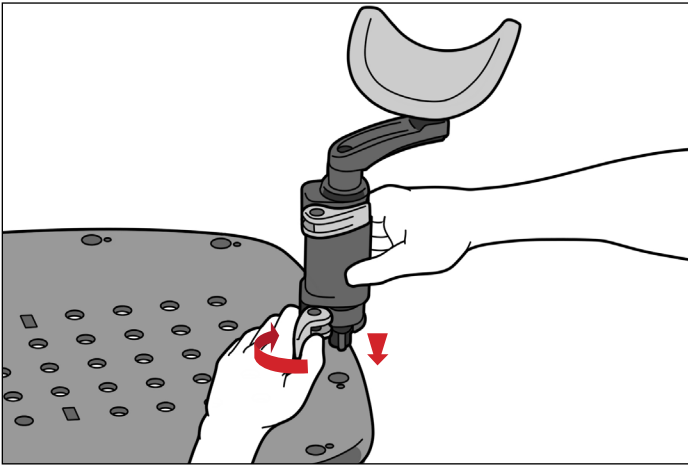


ŞEKİL 15

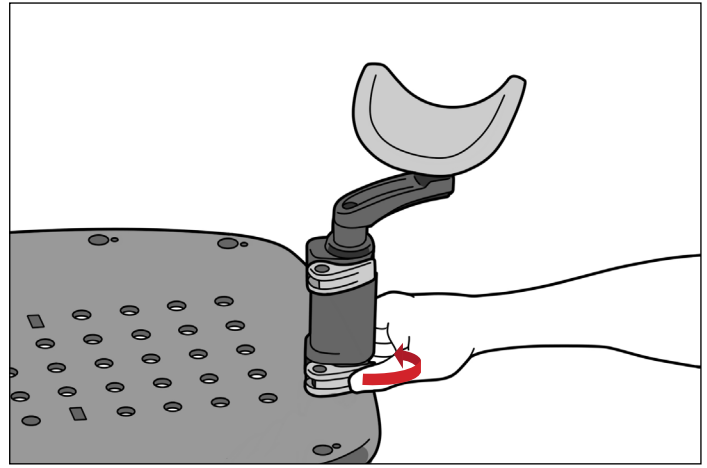

ŞEKİL 16

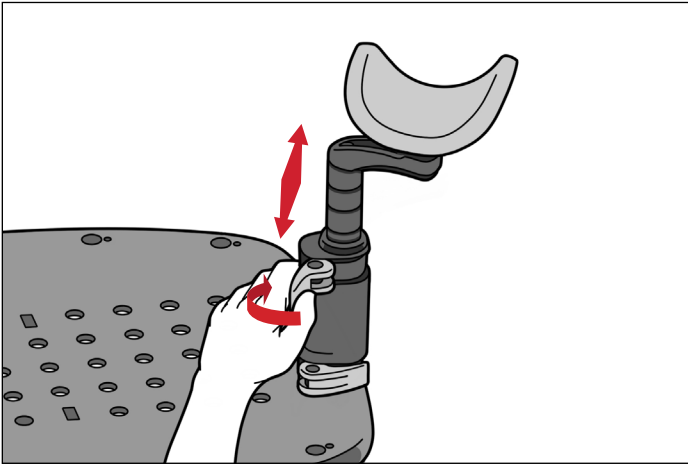

ŞEKİL 17

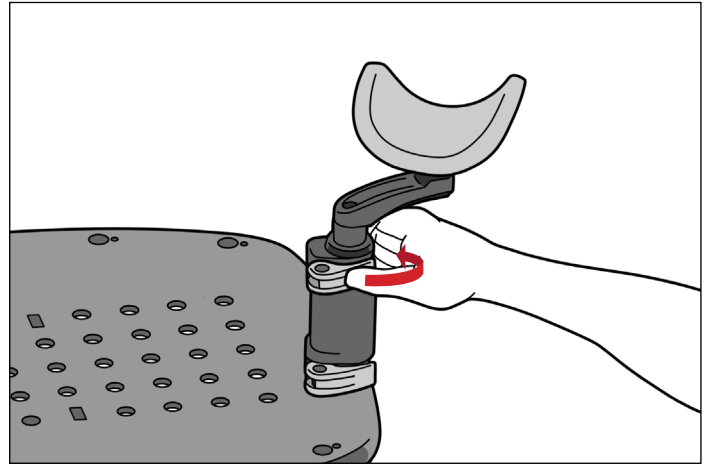

ŞEKİL 18


ÇALIŞTIRMA TALİMATI

AYAR

ALT STOPER

1. Alt Stoperi, kıvrık tarafı Hasta Yüzeyine bakacak şekilde konumlandırın ve yuvaların alt kısmındaki ağzın içine yerleştirin. (Şekil 19)
2. Taban Plakasına takıldıktan sonra, Alt Stoper, yukarı doğru itilerek konumlandırılabilir (Alt Stoper bu yönde işletilir). (Şekil 20)
3. Alt Stoperi aşağı götürmek için, hafifçe yukarı kaldırın ve istediğiniz konuma geri kaydırın. (Şekil 21)

! NOT ! Şekil 22’de, Alt Stoper ve Yerleştirme Çubuğu için indeksleme konumları gösterilmektedir.

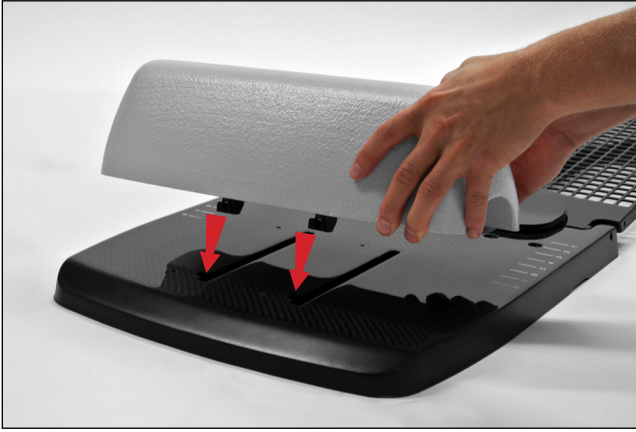


ŞEKİL 19



ŞEKİL 20



ŞEKİL 21

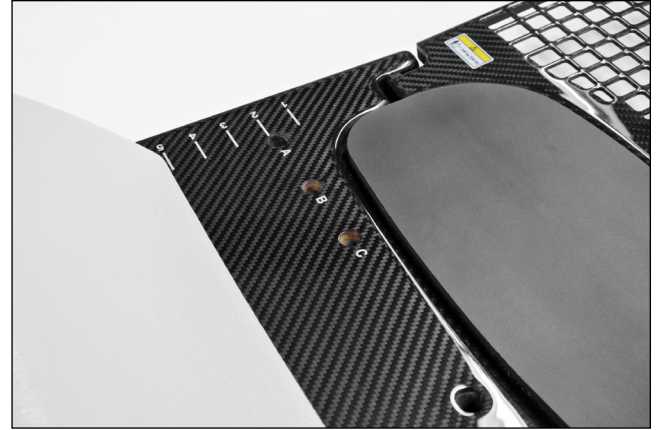

ŞEKİL 22

ÇALIŞTIRMA TALİMATI


AYAR

ARMSHUTTLE ELITE


! NOT ! ArmShuttle, Kol ve Bilek Desteklerinin bir alternatifidir. Çalıştırma talimatları, ürün özellikleri, spesifikasyonlar, uyarılar, dikkat ifadeleri ve Armshuttle'ın kullanımı ile ilgili diğer genel önlemler için Armshuttle (P/N 2004227) Ürün Kılavuzu ve Kullanıcı El Kitabına bakın.

1. Düğmeyi gevşeterek Kol Desteklerini çıkarın, Kol Desteğini, Hasta Yüzeyinin yan tarafındaki dişle hizalanacak şekilde döndürün ve Kol Desteğini Hasta Yüzeyindeki deliklerden çekerek çıkarın. (Şekil 23)
2. Alt kolu açarak Bilek Desteklerini çıkarın ve Bilek Desteğini Hasta Yüzeyindeki deliklerden çekerek çıkarın. (Şekil 24)
3. ArmShuttle'ı, Access Supine'in üst kısmına koyun, ilişirme düğmesi deliklerini, Access Supine'deki Kol Desteği konumları arasında bulunan dişli deliklerle hizalayın. (Şekil 25)
4. İlişirme düğmelerini sıkı olana kadar saat yönüne çevirerek, ArmShuttle'ı, ilişirme düğmeleriyle sabitleyin. (Şekil 25)


! NOT ! Şekil 26'da tam ayar gösterilmektedir.

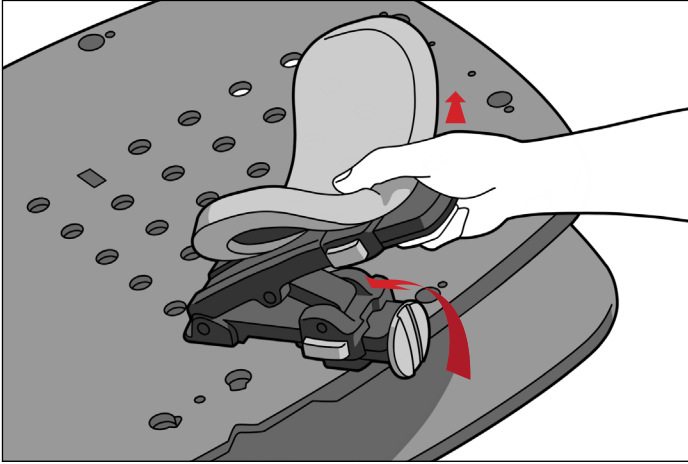

ŞEKİL 23

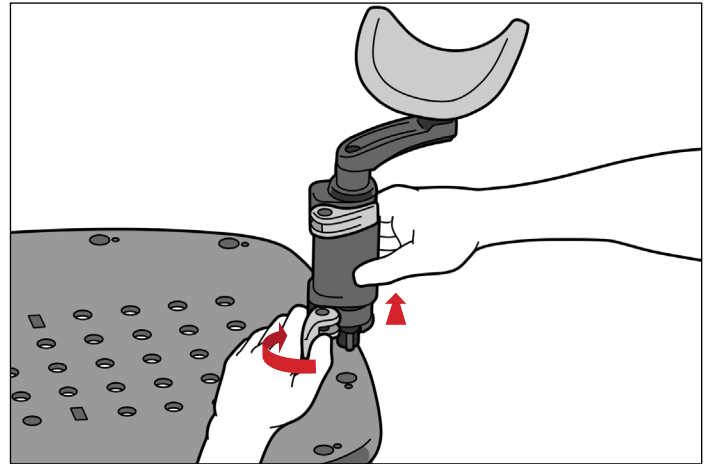

ŞEKİL 24

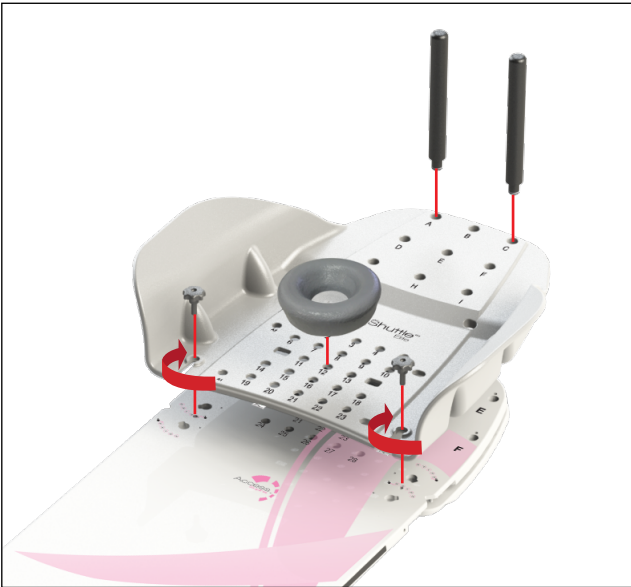

ŞEKİL 25



ŞEKİL 26

ÜRÜN KILAVUZU VE KULLANICI EL KİTABI – 2004394_IFU, Access Supine_TR

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | ☎ +1 484-720-6053 | 📠 +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

ÇALIŞTIRMA TALİMATI

ÇIKARMA

ARMSHUTTLE ELITE

1. ArmShuttle'ı sabitleyen düğmeleri, saat yönüne döndürerek çıkarın.
2. Karşı taraf için, adım 1'i tekrarlayın.
3. ArmShuttle'ı Hasta Yüzeyinden kaldırın.

ALT STOPER

1. Alt Stoperi aşağı götürmek, hafifçe yukarı kaldırın ve çıkarma konumuna geri kaydırın.
2. Alt Stoperi, Tabna Plakadan kaldırarak çıkarın.

KOL DESTEĞİ

Düğmeyi gevşeterek Kol Desteğini, Hasta Yüzeyinin yan tarafındaki dişle hizalanacak şekilde döndürün ve Kol Desteğini Hasta Yüzeyindeki deliklerden çekerek çıkarın.

BİLEK DESTEĞİ

Alt kolu açın ve Bilek Desteğini Hasta Yüzeyindeki deliklerden çekerek çıkarın.

BAŞ DAYANAĞI

Baş dayanağını, yerleştirme deliğinden çıkana kadar yukarı kaldırın.

ACCESS SUPINE

1. Hasta Yüzeyini kaldırın ve Açılı Merdiveni, Tabna Plaka üzerinde düz olana kadar indirin.
2. Hasta Yüzeyini, geçme sesini duyana kadar indirin ve Taban Plaka içine kilitleyin.
3. Access Supine'i, Yerleştirme Çubuklarından kaldırarak çıkarın.
4. Hasta yatağı üst kısmından çıkarmak için, Yerleştirme Çubuklarının her bir ucundan kaldırın.

BAKIM

SİSTEMİN TEMİZLENMESİ

Cihaz yumuşak, aşındırıcı olmayan bir temizleyici veya dezenfektan solüsyonla temizlenebilir. Temizlemek için solüsyonu temiz bir beze uygulayın ve yüzeyi bezle silin. Cihazı görsel olarak inceleyin, eğer temiz değilse temiz görüne kadar önceki temizleme adımlarını tekrarlayın. Herhangi bir temizlik maddesi kalıntısını gidermek üzere cihazı silmek için suyla nemlendirilmiş temiz bir bez kullanın. Kurulamak için cihazı temiz, kuru bir bezle silin. Aşağıdaki temizlik malzemeleri test edilmiş ve cihazın temizlenmesi için uygun bulunmuştur.

- Su
- Sabunlu su

SİSTEMİN DEZENFEKTE EDİLMESİ

Cihaz yüzeyinin dezenfekte edilmesi için temizlik maddesi üreticisinin özel talimatlarına başvurun.

- %10 Clorox® marka çamaşır suyu solüsyonu
- İzopropil Alkol
- Cidex® marka %2,4 Aktive Dialdehid Solüsyonu


Tüm tutturucuları sıklık açısından düzenli olarak kontrol edin.

BAKIM


YAN İŞARET YERLEŞİMİ

1. Mevcut yan işaret etiketini, tüm yapışkan kalıntısı dahil olmak üzere tamamen çıkarın.
2. Yeni etiketin arka kağıt kısmını soyun.
3. Yan ölçeğin ortasındaki hizalama işaretini, hasta yüzeyindeki kayıt işaretiyle hizalayın ve etiketin alt kenarını, Hasta Yüzeyi alt kenarının hemen üstüyle hizalayın. Cihazın baş kısmı sıfıra ayarlanmalıdır. (Şekil 27 ve 28)
4. Bütün etiketi, cihazın yan tarafı üzerine sıkıca bastırın.
5. Gerekirse, diğer tarafla tekrarlayın.

! NOT ! Etiket, Hasta Yüzeyinin yarıçapına UYGULAMAYIN, bunun yapılması halinde etiket soyulabilir.

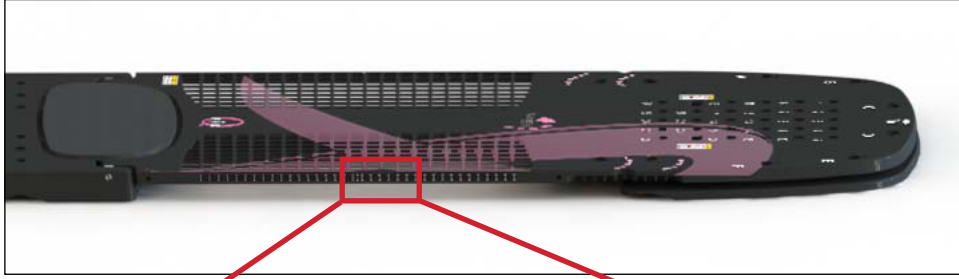

ŞEKİL 27

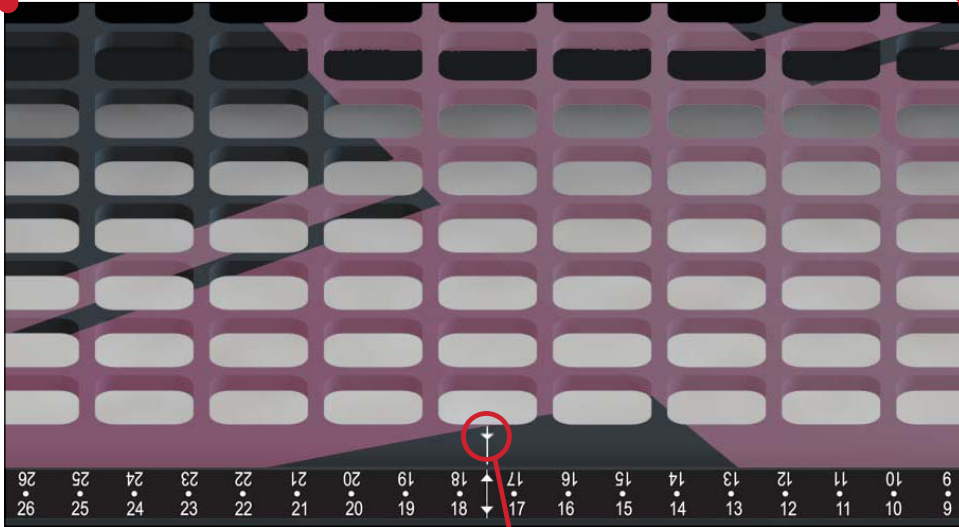

ŞEKİL 28

kayıt işareti


SPESİFİKASYONLAR

BOYUTLAR


Uzunluk (L): 1374 mm

Ağırlık Sınırı: 249 kg (550 pound) Eşit Dağılımlı Yük

Su Eşdeğerliği: Not: Yalnızca RT-4546 – Access™ Supine Göğüs ve Akciğer için geçerlidir:
tedavi bölgelerinde 6 MV'de yaklaşık 3 mm

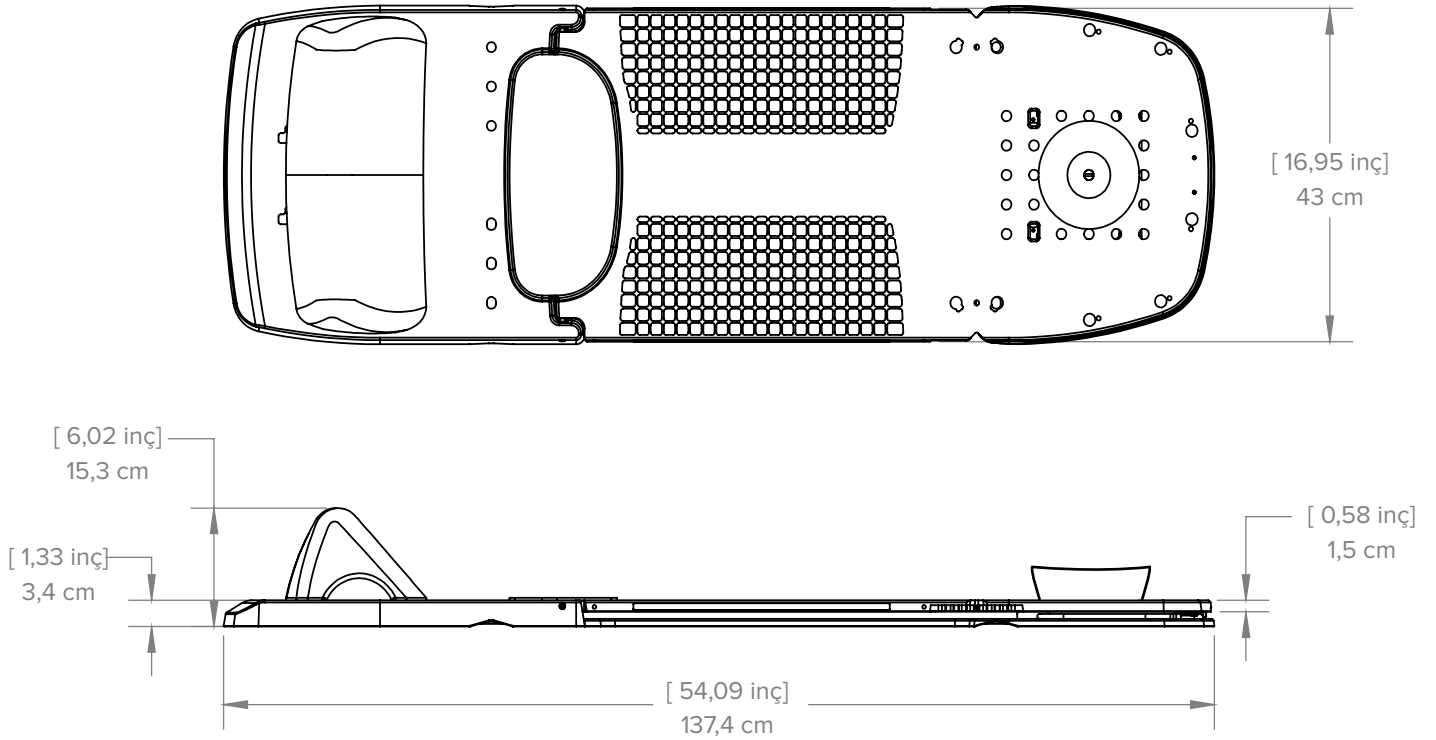

PARA LİSTESİ

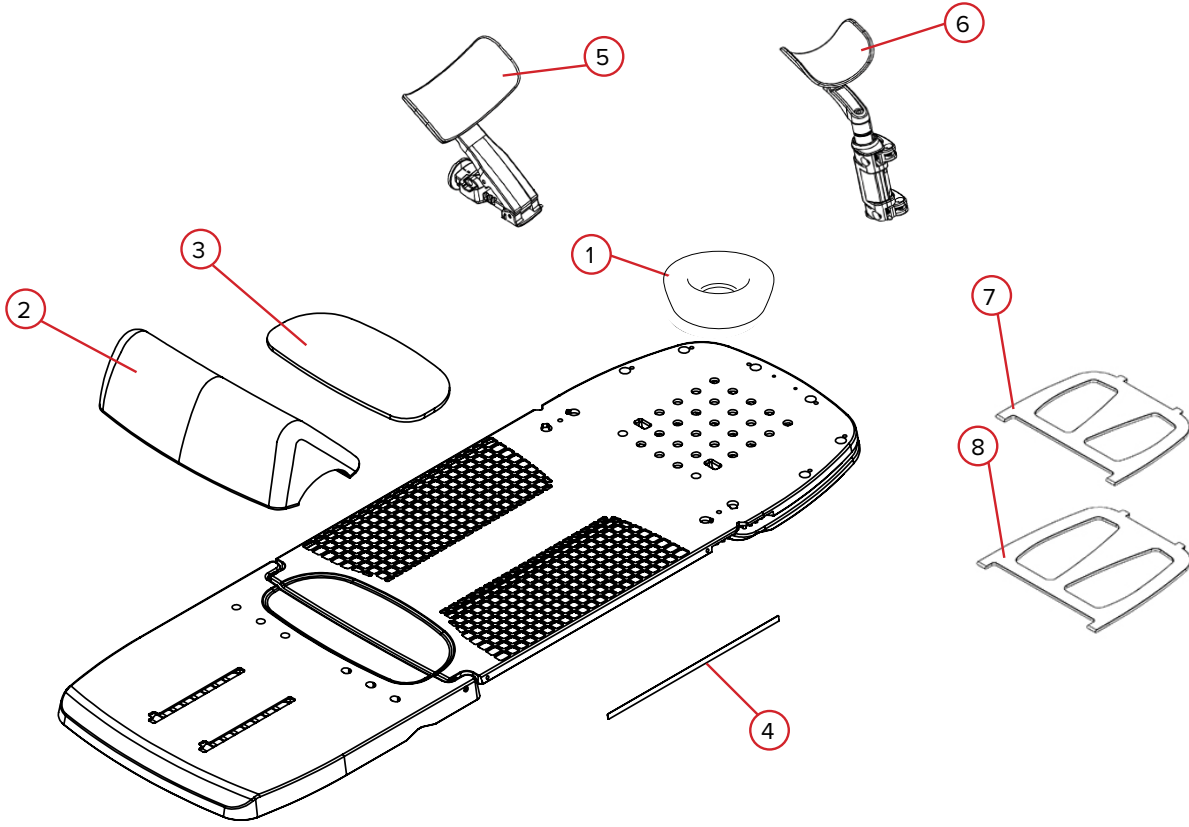

RT-4546, RT-4545MRI, RT-4546-01, ve RT-4546-02

1. RT-4546H – Köpük Baş Dayanağı
2. 2004034 – Köpük Alt Stoper Düzeneđi
3. 2004047 – Kuyruk Sokumu Desteđi
4. 2004392 – Yan İşaret Etiketleri (1'er adet)

RT-4546AA-01

5. 2005353 – Köpük Kol Dayanağı Pedi, sarılı

RT-4546AW-01

6. 2005386 – Köpük Bilek Dayanağı Pedi, sarılı

RT-4546L

7. 2004121 – Aksesuar Basamak, 20 derece
8. 2004122 – Aksesuar Basamak, 25 derece

KURULUM SAYFASI

RT-4546: Access Supine Göğüs ve Akciğer, RT-4546MRI: Access Supine MR Göğüs ve Akciğer,
RT-4546-01: Access Supine Göğüs veya RT-4546-02: Access Supine Göğüs ve Akciğer, Kafessiz

Hastanın Adı Soyadı:


Hasta ID #:

Kurulumu yapan:

Hekim:

Tarih:

Yorumlar:

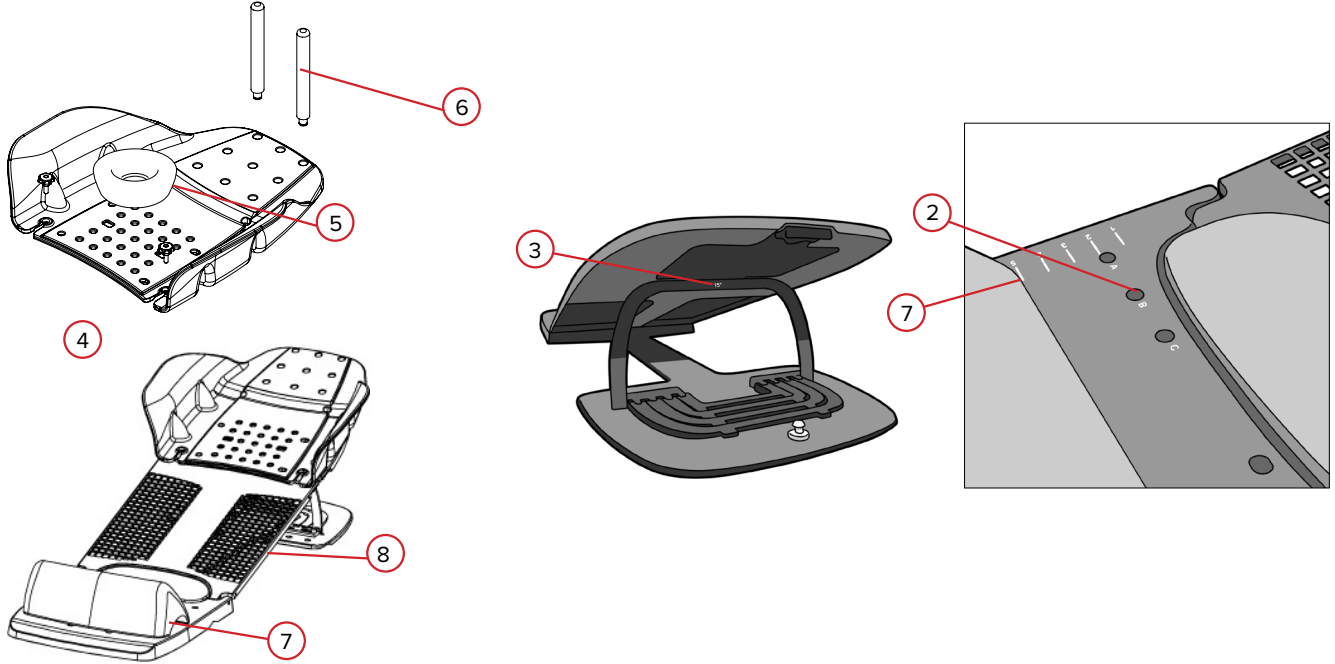

1. Simülasyona veya tedavi masasına indekslenir mi? **Evet** **Hayır** Evet ise, İndeks dışı ayarı
2. Yerleştirme çubuğu pim konumu (bir tane seçin): **A** **B** **C**
3. Hasta Yüzeyinin açısı (bir tane seçin): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
4. ArmShuttle ile kullanılır: **Evet** **Hayır**
5. Baş dayanağının yeri (no. 1-28):
6. El Direklerinin yeri (kullanılanları seçin)
A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **KULLANILMAZ**
7. Alt Stoper kullanılır mı? **Evet** **Hayır** Evet ise, hangi ayar? (no. 1-8)
8. Yan işaret lazer konumu:

KURULUM SAYFASI

RT-4546: Access Supine Göğüs ve Akciğer, RT-4546MRI: Access Supine MR Göğüs ve Akciğer,
RT-4546-01: Access Supine Göğüs veya RT-4546-02: Access Supine Göğüs ve Akciğer, Kafessiz

Hastanın Adı Soyadı:

Hasta ID #:

Kurulumu yapan:

Hekim:

Tarih:

Yorumlar:



- Simülasyona veya tedavi masasına indekslenir mi? **Evet** **Hayır** Evet ise, İndeks dışı ayarı
- Yerleştirme çubuğu pim konumu (bir tane seçin): **A** **B** **C**
- Hasta Yüzeyinin açısı (bir tane seçin): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- Kol Desteklerinin yeri ve açısı (bir tane seçin)—
Hastanın Sol Tarafı: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
Hastanın Sağ Tarafı: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
- Kol Desteklerinin Yüksekliği (no. 1-8): Hastanın Sol Tarafı Hastanın Sağ Tarafı
- Kol Desteklerinin Uzunluğu (bir tane seçin): Hastanın Sol Tarafı: **A** **B** **C**
Hastanın Sağ Tarafı: **A** **B** **C**
- Bilek Desteklerinin Yeri (A-H arası harf): Hastanın Sol Tarafı Hastanın Sağ Tarafı
- Bilek Desteklerinin Açısı:
Hastanın Sol Tarafı: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
Hastanın Sağ Tarafı: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
- Bilek Desteklerinin Yüksekliği (W-Z harfleri): Hastanın Sol Tarafı Hastanın Sağ Tarafı



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 484.720.6053 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com