



IZSTRĀDĀJUMA CEĻVEDIS UN LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

RT-4544-01 un RT-4544

Access™ Prone G2 un

Access™ Prone krūšu ierīces



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Access, Access 360, kVue un OneTouch ir Qfix preču zīmes.

Exact® ir Varian Medical Systems reģistrēta preču zīme.

Cidex® ir Johnson & Johnson reģistrēta preču zīme.

Clorox® ir The Clorox Company reģistrēta preču zīme.

VISPĀRĒJIE PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

BRĪDINĀJUMU PAZIŅOJUMI

! BRĪDINĀJUMS ! NAV PIEĻAUJAMA NEKĀDA VEIDA APRĪKOJUMA PĀRVEIDOŠANA. JA JEBKURA ŠIS IERĪCES DAĻA IR TIKUSI KĀTASTROFĀLI PĀRSLOGOTA, IZSKATĀS BOJĀTA VAI DARBOJAS NEPAREIZI, NEKAVĒJOTIES PĀRTRAUCIET TĀS LIETOŠANU UN SAZINIETIES AR UZŅĒMUMU CQ MEDICAL PA TĀLRUNI +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 VAI E-PASTĀ SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

! BRĪDINĀJUMS ! SKALAS UZ ACCESS PRONE UN ACCESS PRONE G2 KRŪŠU IERĪCĒM IR TIKAI ATSAUCEI.

PAPILDU BRĪDINĀJUMI

- Dubultie rokturi un ipsilaterālie rokturi nav paredzēti pacienta svara balstīšanai
 - NELIETOJIET rokturus, lai pacientu pozicionētu
 - NELIETOJIET rokturus, lai uzkāptu uz ierīces vai nokāptu no tās
- Pacienti var būt nepieciešama palīdzība, lai uzkāptu uz ierīces vai nokāptu no tās
- Ierīces garuma dēļ ieteicams, lai uzstādīšanas un noņemšanas laikā ar ierīci rīkotos divi cilvēki
- NELIETOJIET vienā reizē vairāk par 3 CT starplikām, saliekot tās vienu uz otras. To darot, ierīce var kļūt nestabila
- NELIETOJIET ierīci pār kādu malu bez balsta
- Terapijas komplektā ir iespējams gūt fizisku traumu starp kušetes virsmas ieliktni un citu aprīkojumu. Ievērojiet piesardzību, pārvietojot kušetes virsmu, lai izvairītos no fiziskas traumas.

TERAPIJAS STARU KŪĻA VĀJINĀŠANA

kVue Access™ Prone kušetes virsmas ierīces strukturālie reģioni vājinās fotonu staru kūlī. Faktiskā vājināšana atkarībā no iestatīšanas ir jāpārbauda, izmantojot konkrēto aprīkojumu. Terapija caur jebkādu ierīci, pat tādu, kas izgatavota no kompozītmateriāla, izraisīs palielinātu ādas saņemto dozu.

NOPIETNI NEGADĪJUMI

Par nopietniem negadījumiem (piem., negadījumiem, kas izraisījuši vai iespējami varēja izraisīt nāvi vai nopietnu ievainojumu), lūdzu, ziņojiet gan uzņēmumam CQ Medical, gan savas valsts atbildīgajai varas iestādei.

NOMINĀLĀ SLODZE


NEPĀRSNIEDZIET 225 kg (500 mārciņas) vienmērīgi sadalītu slodzi vai maksimālo kušetes pamatnes darba slodzi atkarībā no tā, kura vērtība ir mazāka.

! PIEZĪME ! Apvienojumā ar OEM kušetes pamatni nominālā slodze ir zemākā no abām drošajām darba slodzēm. kVue kušetes virsmas slodze NEDRĪKST pārsniegt sākotnējās kušetes pamatnes ražotāja specifikācijas. Lūdzu, skatiet izstrādājuma literatūru, ko nodrošinājis sākotnējais ražotājs.

VISPĀRĒJIE PIESARDZĪBAS PASĀKUMI


BRĪDINĀJUMA MARKĒJUMI UN APRAKSTI

Simbolu un to skaidrojumu sarakstu skatiet vietnē CQmedical.com.

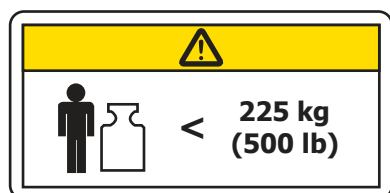

NOMINĀLĀ SLODZE

NEPĀRSNIEDZIET 225 kg (500 lb) vienmērīgi izkliedētu slodzi vai kušetes virsmas ieliktna maksimālo drošo darba slodzi, vai kušetes pamatnes slodzi, atkarībā no tā, kurš no šiem lielumiem ir mazāks.

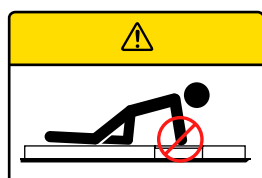

VAI




IELIKTŅA SLODZE

NEĻĀUJIET pacientam izmantot ieliktni kā balstu, uzkāpjot uz ierīces vai nokāpjot no tās. To darot, pacients var gūt fizisku traumu.



DROŠS MR VIDĒ

Vienums nerada zināmus apdraudējumus nevienā no magnētiskās rezonanses (MR) vidēm. Vienumi, kas ir droši MR vidē, ir izgatavoti no materiāliem, kas nevada elektrību, nesatur metālu un nav magnētiski.

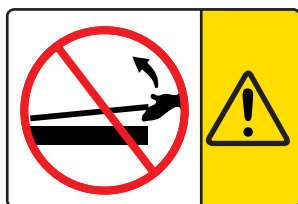

NECELIET

! NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NECELIET KUŠETES VIRSMAS IELIKTNI !

Savienojuma tapas var saliekties vai salūzt, padarot kušetes virsmu nederīgu.

VISPĀRĒJIE PIESARDZĪBAS PASĀKUMI


BRĪDINĀJUMA MARKĒJUMI UN APRAKSTI



NESEĎDIET


Laukums aiz krūšu izgriezuma ir konstruēts un testēts, lai balstītu pacienta rumpja augšdaļu; tas NAV paredzēts, lai balstītu visu pacienta slodzi.

Stāvēt vai sēžot uz Access Prone G2 vai Access Prone ārpus krūšu izgriezuma, var sabojāt ierīci vai radīt fizisku traumu.

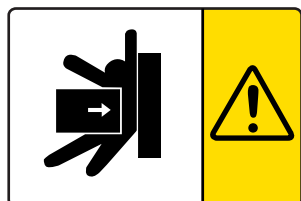

IESPĒJAMA FIZISKA TRAUMA

Pastāv iespēja gūt fizisku traumu starp Access Prone G2 vai Access Prone un citu aprīkojumu terapijas komplektā. Lai izvairītos no fiziskas traumas, pārvietojot Access Prone, ievērojiet piesardzību.

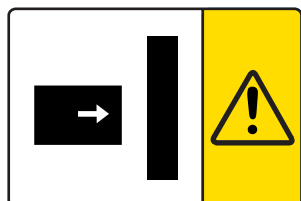

SADURSME AR GENTRIJU

Plašā kustību dažādība, kādu var iegūt ar kušetes pamatnēm un terapijas galvām, var radīt situācijas, kad kušetes virsmas ieliktnis var sadurties ar citiem priekšmetiem, tostarp ar gentriju. Pārvietojot kušeti vai gentriju, ievērojiet piesardzību, lai izvairītos no aprīkojuma sabojāšanas vai traumas pacientam.

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

Šī ierīce ir paredzēta, lai imobilizētu, pozicionētu un pārpozicionētu pacientus, kuriem tiek veikta staru terapija.

! PIEZĪME ! Amerikas Savienoto Valstu Federālā likumdošana ierobežo šīs ierīces pārdošanu tikai pēc ārsta norādījuma.

PACIENTU MĒRĶGRUPAS

Pacienti, kuriem tiek veikta staru terapija vai diagnostikas attēlveidošanas procedūras.

PAREDZĒTIE LIETOTĀJI

Šo izstrādājumu paredzētais lietotājs ir persona, kura ir atbilstoši kvalificēta saskaņā ar reģiona noteikumos minētajām prasībām.

FUNKCIJAS

APRAKSTS


Access Prone G2 un Access Prone ir paredzētas, lai nodrošinātu krūts vēža terapijas iespēju gan kreisajai, gan labajai krūtij. Pacientes pozicionēšana guļus uz vēdera palīdz palielināt krūts atstatumu no apdraudētiem kritiskiem orgāniem.

Access Prone G2 (RT-4544-01) var izmantot kā CT/MR simulācijas ierīci Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10).

! UZMANĪBU ! ACCESS PRONE (RT-4544) NEVAR IZMANTOT KĀ SIMULĀCIJAS IERĪCI NEVIENAM CITAM IZSTRĀDĀJUMAM, IZŅEMOT PAŠU ACCESS PRONE VAI CITAS ACCESS PRONE (RT-4544) IERĪCES.


FUNKCIJAS

ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01) KOMPONENTI

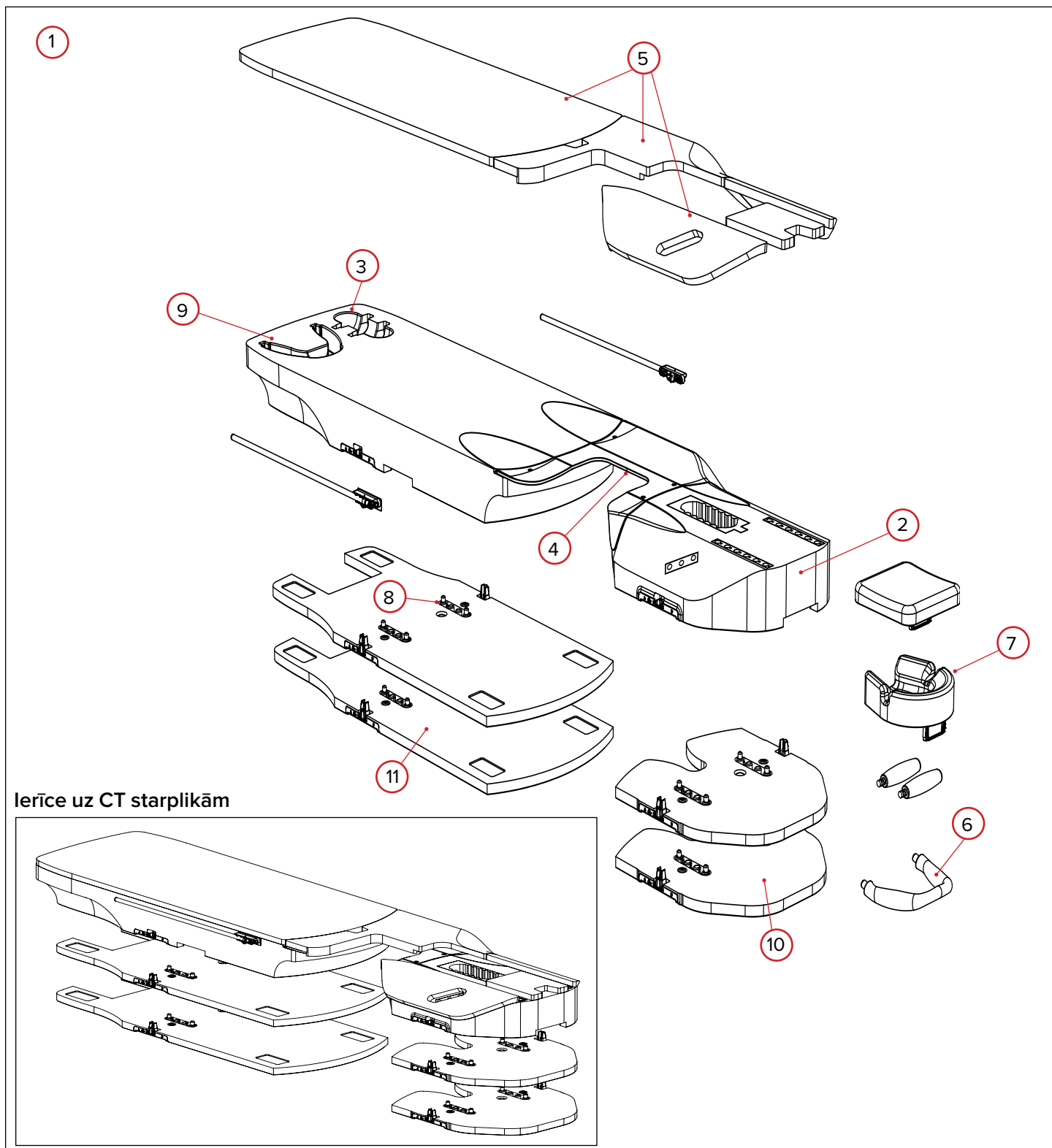

FUNKCIJAS

ACCESS PRONE (RT-4544) KOMPONENTI

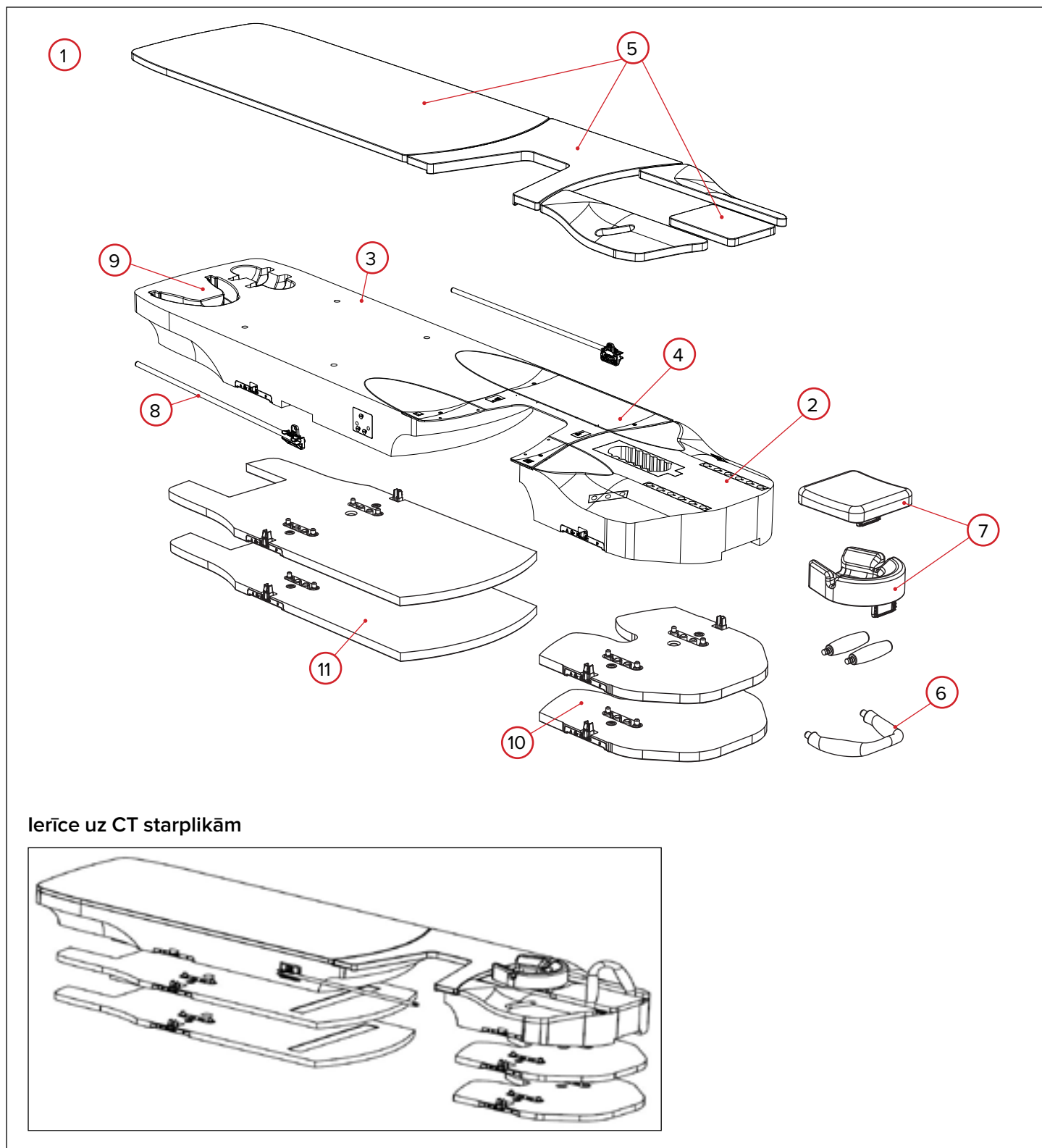

FUNKCIJAS

KOMPONENTI

1. ACCESS PRONE G2 UN ACCESS PRONE KRŪŠU IERĪCES

Access Prone G2 un Access Prone izmanto, lai palīdzētu pozicionēt un iestatīt pacientus, kuriem tiek veikta krūts un atslēgas kaula reģiona staru terapija pozīcijā guļus uz vēdera.

2. ROKAS UN GALVAS KOMPONENTS

3. KĀJAS KOMPONENTS

4. IELIKTNIS

Apvēršams vidusdaļas ieliktnis sniedz iespēju ierīci ātri konfigurēt kreisās vai labās krūts terapijai.

5. PALIKTŅI

Paliktņi ir paredzēti pacienta komfortam, tomēr tos var noņemt un izmantot vakuuma spilvenus. Šie paliktņi nodrošina arī papildu pacienta pozicionēšanas iespējas.

6. DUBULTAIS ROKTURIS

Dubultais rokturis ir ergonomiski izstrādāts, lai samazinātu slodzi uz pacienta plaukstas locītavu, atšķirībā no standarta balsta, ko izmanto ar citām ierīcēm.

7. GALVAS BALSTI

Sistēma ir aprīkota ar Prone un Contour galvas balstu. Atkarībā no iestatīšanas izvēles var izmantot jebkuru. Tos var indeksēt pie Access Prone vairākos novietojumos atkarībā no pacienta auguma garuma.

8. IPSILATERĀLĀ SKALA

Ipsilaterālā skala vēršas uz augšu un nofiksējas vietā iestatīšanas nolūkā un vēršas uz leju terapijas un uzglabāšanas nolūkā. Skalu var izmantot kā palīgu salāgošanā. Tās precizitāte ir ± 1 mm, abās ierīces pusēs ir pa skalai kreisās vai labās krūts terapijai.

9. UZGLABĀŠANA

Iekšēji rokturu piederumu nodalījumi ērtai uzglabāšanai.

10. ROKAS UN GALVAS KOMPONENTA CT STARPLIKA

CT starpliķa indeksējas pret pozicionēšanas stieni un paceļ rokas un galvas komponentu pakāpeniski ar 2,5 mm pieauguma soli. Šo starpliķu var nofiksēt pie cita rokas un galvas komponenta CT starpliķas.

11. KĀJAS KOMPONENTA CT STARPLIKA


CT starpliķa indeksējas pret pozicionēšanas stieni un paceļ kājas komponentu pakāpeniski ar 2,5 mm pieauguma soli. Šo starpliķu var nofiksēt pie cita kājas komponenta CT starpliķas.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

UZSTĀDĪŠANA

POZICIONĒŠANAS STIENIS

1. Pozicionēšanas stienim ir divas pozicionēšanas tapas, kas atbilst lielākajai daļai standarta pozicionēšanas piederumu. Lai piestiprinātu, ievietojiet abus pozicionēšanas stieņa galus attiecīgajos ar Varian Exact® sadērīgajos indeksa ierobos un nofiksējiet vietā. Lai noņemtu vai pārpozicionētu, velciet vienu vai otru stieņa galu uz augšu.

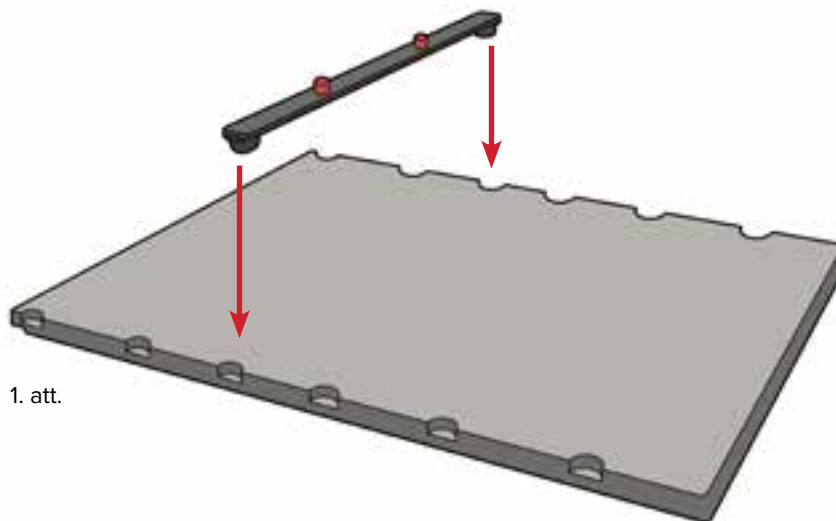


1. att.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS


UZSTĀDĪŠANA

POZICIONĒŠANAS STIENIS

2. Ievietojiet 2 pozicionēšanas stieņu galus ar Varian Exact® saderīgos indeksa ierobos CT pārklājplāksnē 1260 mm (parasti 9 indeksa ierobi) un nofiksējiet pozicionēšanas stieņus vietā. (2. un 3. att.)

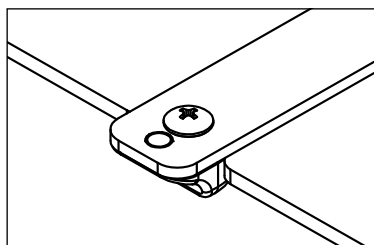

2. att.

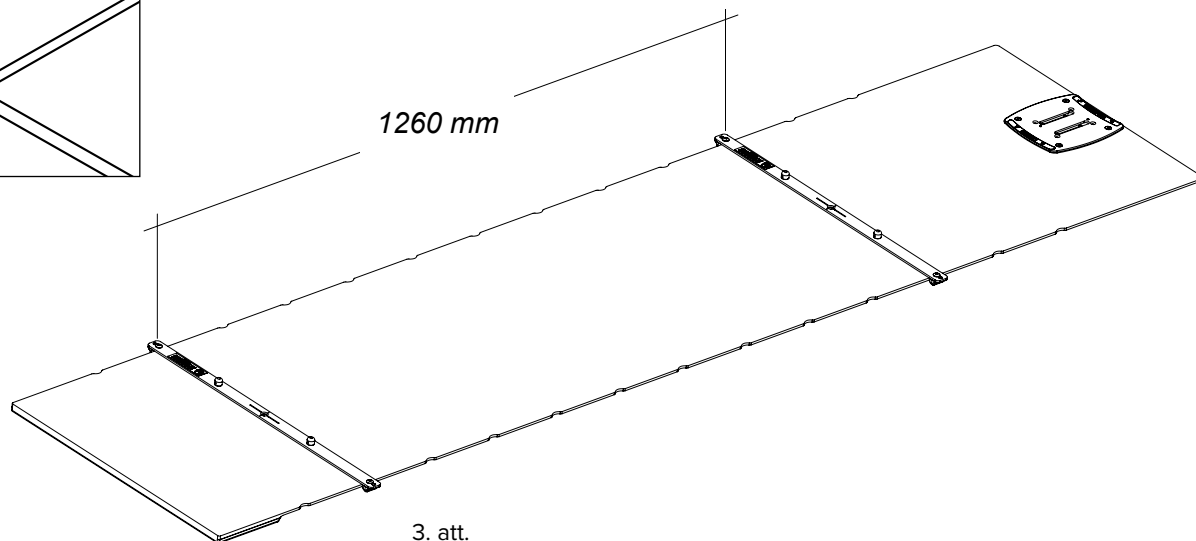

3. att.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

IESTATĪŠANA

ROKAS UN GALVAS UN KĀJAS KOMPONENTA PIESTIPRINĀŠANA PIE PĀRKLĀJPLĀKSNES

Novietojiet uz CT pārklājplāksnes Access Prone G2 un Access Prone rokas un galvas un pēdas komponentus, indeksējot pret pozicionēšanas stieņiem. Noteikti indeksējiet Access Prone G2 un Access Prone komponentus, izmantojot tos pašus novietojumus gan galvas, gan pēdas komponentiem. (4., 5. un 6. att.)



4. att.



5. att.

IELIKTŅA PIESTIPRINĀŠANA PIE ROKAS UN GALVAS UN KĀJAS KOMPONENTA

Piestipriniet ieliktni pie rokas un galvas un kājas komponentiem, izmantojot pozicionēšanas tapas ieliktna apakšā. (6. att.) Šo ieliktni var pagriezt, lai veiktu terapiju vienam vai otram sānam.




6. att.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

IESTATĪŠANA

VIZUĀLĀ SALĀGOJUMA PĀRBAUDE

Vizuāli pārbaudiet, vai Access™ Prone komponenti ir pareizi centrēti uz pārklājplāksnes. (7. att.)

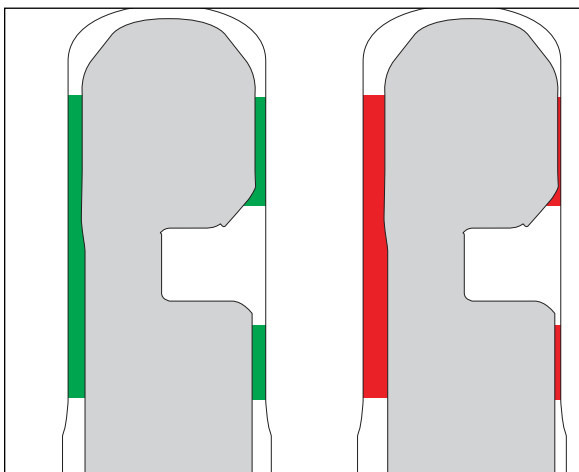

7. att.

CT STARPLIKAS

1. Lai uzstādītu CT starplikas, vispirms noņemiet Access Prone.
2. Novietojiet CT starplikas tajā pašā indeksēšanas vietā, kur pēdas un galvas komponentus. CT starplikas var salikt vienu uz otras, lai palielinātu augstumu pakāpeniski ar 2,5 cm pieauguma soli. (8. att.)



8. att.

! UZMANĪBU ! NELIETOJIET VIENĀ REIZĒ VAIRĀK PAR 3 CT STARPLIKĀM, SALIEKOT TĀS VIENU UZ OTRAS. TO DAROT, IERĪCE VAR KĻŪT NESTABILA.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

IESTATĪŠANA

CT STARPLIKAS, turpinājums

3. Novietojiet Access Prone G2 vai Access Prone uz CT starplikām. (9. att.)



9. att.

4. Lai samazinātu ierīces augstumu, noņemiet Access Prone G2 vai Access Prone krūšu ierīci. Katrā indeksēšanas plāksnes pusē nospiediet atbrīvošanas pogu. (10. att.)



10. att.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

IESTATĪŠANA

GALVAS BALSTS

1. Izvēlieties vai nu Prone galvas balstu, vai Contour galvas balstu, ko lietot pacientam.
2. Ievietojiet plastmasas salāgojuma gabalu atbilstošajā slotā ierīces augšgalā. (11. att.)

! PIEZĪME ! Galvas balstus var uzstādīt pirms pacienta novietošanas uz ierīces, bet, kad pacients atrodas vietā, var būt nepieciešama pārpozicionēšana.



11. att.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

IESTATĪŠANA

PACIENTA POZICIONĒŠANA


! PIEZĪME ! Pacienti var būt nepieciešama palīdzība, lai uzkāptu uz ierīces vai nokāptu no tās. Turpmākie norādījumi ir mūsu ieteiktā metode, tomēr katrā klīnikā tā var būt atšķirīga.

KĀ UZKĀPT UZ ACCESS PRONE G2 VAI ACCESS PRONE UN NOKĀPT NO TĀS


1. Nolaidiet kušeti vai izmantojiet pakāpiena soliņu, lai palīdzētu pacientam nokļūt uz ieliktna.
2. Kad pacients atrodas uz ieliktna, pozicionējiet viņa ceļgalus vienā līnijā ar attiecīgajiem marķējumiem uz putu materiāla. (12. att.)
3. Lūdziet pacientu izmantot rokas vai elkoņus, lai pārvietotu sava ķermeņa augšdaļu vajadzīgajā pozīcijā. (13. att.)
4. Lūdziet pacientu lēnām nolaisties šajā pozīcijā.
5. Kad pacients atrodas pozīcijā, novietojiet pacienta galvu uz galvas balsta un lieciet pacientam satvert attiecīgos rokturus. (14. att.)

! UZMANĪBU ! DUBULTAIS ROKTURIS UN IPSILATERĀLAIS ROKTURIS NAV PAREDZĒTS PACIENTA SVARA BALSTĪŠANAI:

- NEIZMANTOJIET rokturus pacienta pozicionēšanai.
- NEIZMANTOJIET rokturus, lai uzkāptu uz ierīces vai nokāptu no tās.

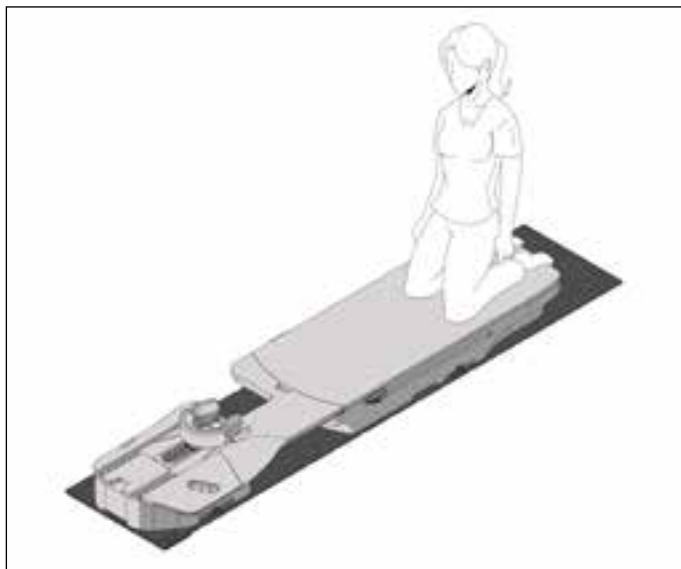

12. att.

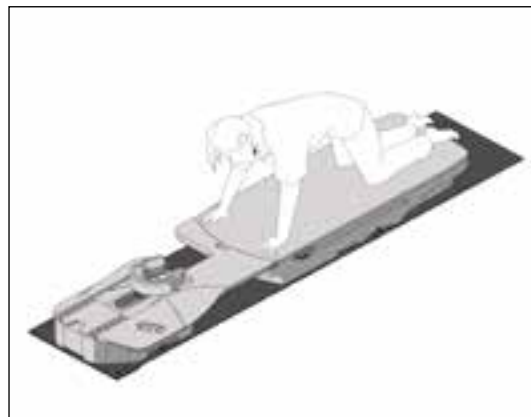

13. att.



14. att.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

IESTATĪŠANA


DUBULTAIS ROKTURIS

! UZMANĪBU ! DUBULTAIS ROKTURIS UN IPSILATERĀLAIS ROKTURIS NAV PAREDZĒTS PACIENTU SVARA BALSTĪŠANAI:

- **NEIZMANTOJIET** rokturus pacienta pozicionēšanai.
- **NEIZMANTOJIET** rokturus, lai uzkāptu uz ierīces vai nokāptu no tās.

1. Salāgojiet roktura galus ar attiecīgajām atverēm ieliktna augšgalā.
2. Spiediet rokturi uz leju, līdz tas nofiksējas atverēs. (15. att.)

! PIEZĪME ! Rokturim jābūt atliektam atpakaļ pret pacientu, kā parādīts attēlā zemāk. (16. att.)

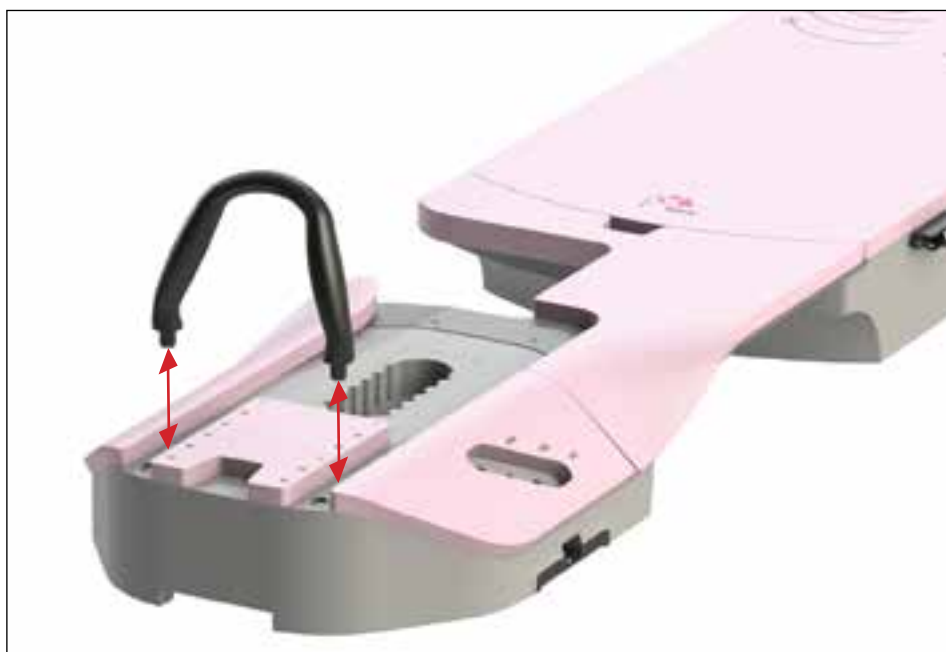

15. att.



16. att.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

IESTATĪŠANA

IPSILATERĀLAIS ROKTURIS

1. Ievietojiet rokturi attiecīgajā atverē ieliktna augšgalā. (17. att.)
2. Grieziet rokturi vienā vai otrā virzienā, līdz rokturis stingri turas atverē un nofiksējas vietā. (17. att.)



17. att.

UZGLABĀŠANA

Dubulto rokturi un ipsilaterālo rokturi var uzglabāt uzglabāšanas zonā, kas atrodas kājas komponenta pēdas galā. (18. att.)



18. att.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

IESTATĪŠANA

IPSILATERĀLĀ SKALA

! UZMANĪBU ! IPSILATERĀLĀ SKALA NAV PAREDZĒTA PACIENTA SVARA BALSTĪŠANAI.

! UZMANĪBU ! NEIZMANTOJIET ROKTURUS, LAI UZKĀPTU UZ IERĪCES VAI NOKĀPTU NO TĀS.

1. Salāgojiet pacienta pozīciju.
2. Kad pacients ir vietā, vērējiet ipsilaterālo skalu uz augšu, līdz tā nofiksējas vietā. (19. att.)

! PIEZĪME! Skalas tiek izmantotas kā salāgošanas palīg līdzeklis; par pacienta pozīcijas apstiprināšanu ir atbildīgs lietotājs.

! PIEZĪME! Skalu precizitāte ir pārbaudīta līdz ± 1 mm

3. Pirms terapijas un/vai uzglabāšanas vērējiet ipsilaterālo skalu uz leju uzglabāšanas pozīcijā. (19. att.)

19. att.



LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

NOŅEMŠANA

IPSILATERĀLAIS ROKTURIS

Pagrieziet pretēji uzstādīšanas virzienam, līdz rokturis kļūst vaļīgs, tad izvelciet taisnā virzienā. Ipsilaterālo rokturi var uzglabāt pēdas komponenta pamatnē zem spilvena.

DUBULTAIS ROKTURIS

Velciet uz augšu, līdz tas atdalās no atverēm. Dubulto rokturi var uzglabāt pēdas komponenta pamatnē zem spilvena.

PACIENTS

Izpildiet pozicionēšanas norādījumus pretējā secībā.

! PIEZĪME ! Pacienti var būt nepieciešama palīdzība, lai uzkāptu uz ierīces vai nokāptu no tās.

KRŪŠU IELIKTNIS

Velciet krūšu ieliktni uz augšu prom no galvas un kājas komponentiem.

GALVAS BALSTS

Velciet galvas balstu uz augšu prom no ieliktna.

ROKAS UN GALVAS UN PĒDAS KOMPONENTS

Celiet rokas un galvas un pēdas komponentus augšup prom no pārklājpłāksnes. Ja nepieciešams, starplikas var noņemt no rokas un galvas un pēdas komponentiem, iespiežot uz iekšu atbrīvošanas pogas katrā zilās indeksēšanas plāksnes pusē.

POZICIONĒŠANAS STIEŅA NOŅEMŠANA

Velciet uz augšu jebkuru no pozicionēšanas stieņa galiem.

APKOPE

SISTĒMAS TĪRĪŠANA

Šo ierīci var tīrīt, izmantojot saudzīgas iedarbības neabrazīvu tīrīšanas vai dezinficēšanas šķīdumu. Nesmidziniet vai neļaujiet šķīdumus uz virsmas, jo tie var ieplūst OneTouch™ fiksatora vai mehānismos ierīces iekšpusē. Lai tīrītu ierīci, samitriniet tīru drānu šķīdumā un noslaukiet virsmu.

SISTĒMAS DEZINFICĒŠANA

Šādi tīrīšanas materiāli ir testēti un atzīti par piemērotiem, lai tīrītu Access Prone G2, Access Prone un kušetes virsmas ieliktna virsmas. Lai dezinficētu kušetes virsmu, skatiet konkrētos tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.

- Ūdens
- 10 % Clorox® balinātāja šķīdums
- Izopropilspirts
- Cidex® 2,4 % aktivizēts dialdehīda šķīdums
- Ziepes un ūdens.


NESMIDZINIET tieši uz Access Prone G2, Access Prone vai kušetes virsmas ieliktna vai neļaujiet šķīdumam ieplūst pamata rāmī.

NENOVĪETOJIET asus priekšmetus uz Access Prone G2, Access Prone vai kušetes virsmas ieliktna.

SPECIFIKĀCIJAS

ACCESS PRONE G2

Svara ierobežojums: 225 kg (500 lb) vienmērīgi sadalīta slodze

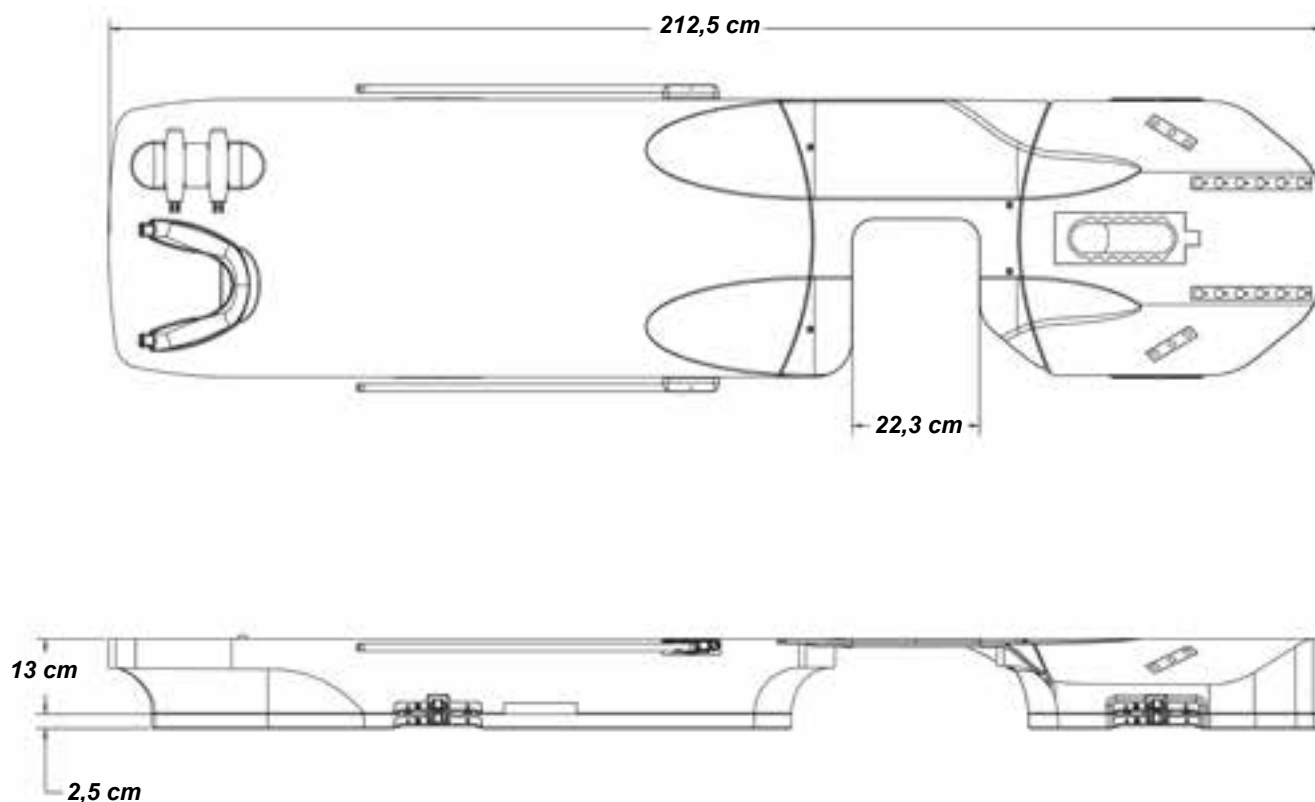

PACIENTA IESTATĪŠANA

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) – LABĀ UN KREISĀ KRŪTS

Pacientavārds:


Pacienta ID Nr.:

Iestatīja:

Ārsts:

Datums:

Komentāri:

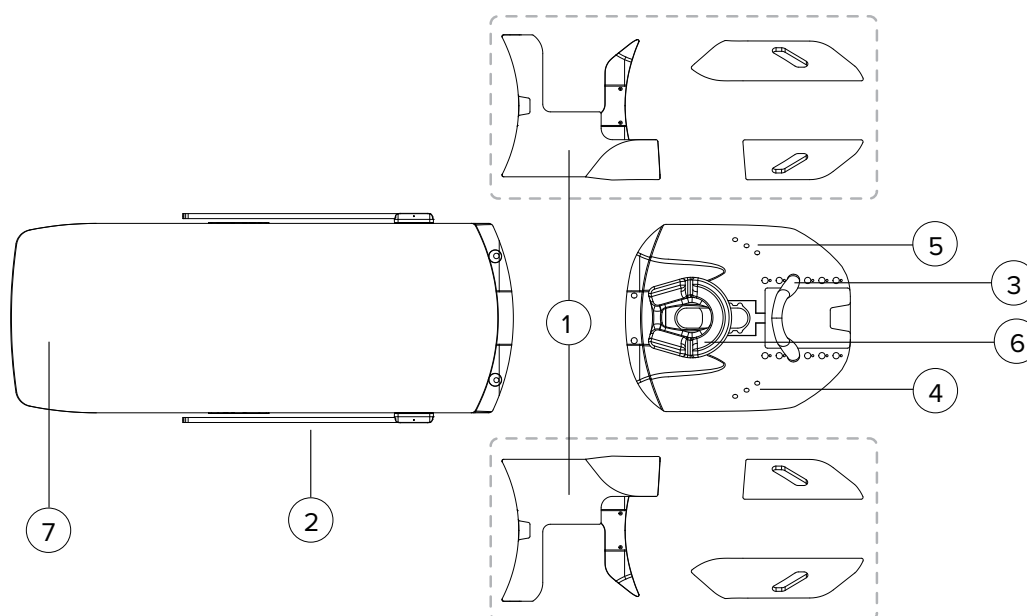

1. Ieliktnis: **Kreisā puse**

Labā puse

2. Ipsilaterālā skala:

3. Dubultā roktura novietojums (atlasiet vienu): **1 2 3 4 5 6 N/A**

4. Rokturis, *pacienta labā puse* (atlasiet vienu): **A1 A2 A3 N/A**

5. Rokturis, *pacienta kreisā puse* (atlasiet vienu): **A1 A2 A3 N/A**

6. Izmantotais galvas balsts: **Nav Prone Contour**

Novietojums (atlasiet vienu): **A B C D E F**


7. Ceļgala novietojums (atlasiet vienu): **V W X Y Z**

Piezīmes.

(Turpinājums aizmugurē)

PACIENTA IESTATĪŠANA

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) (TURPINĀJUMS)

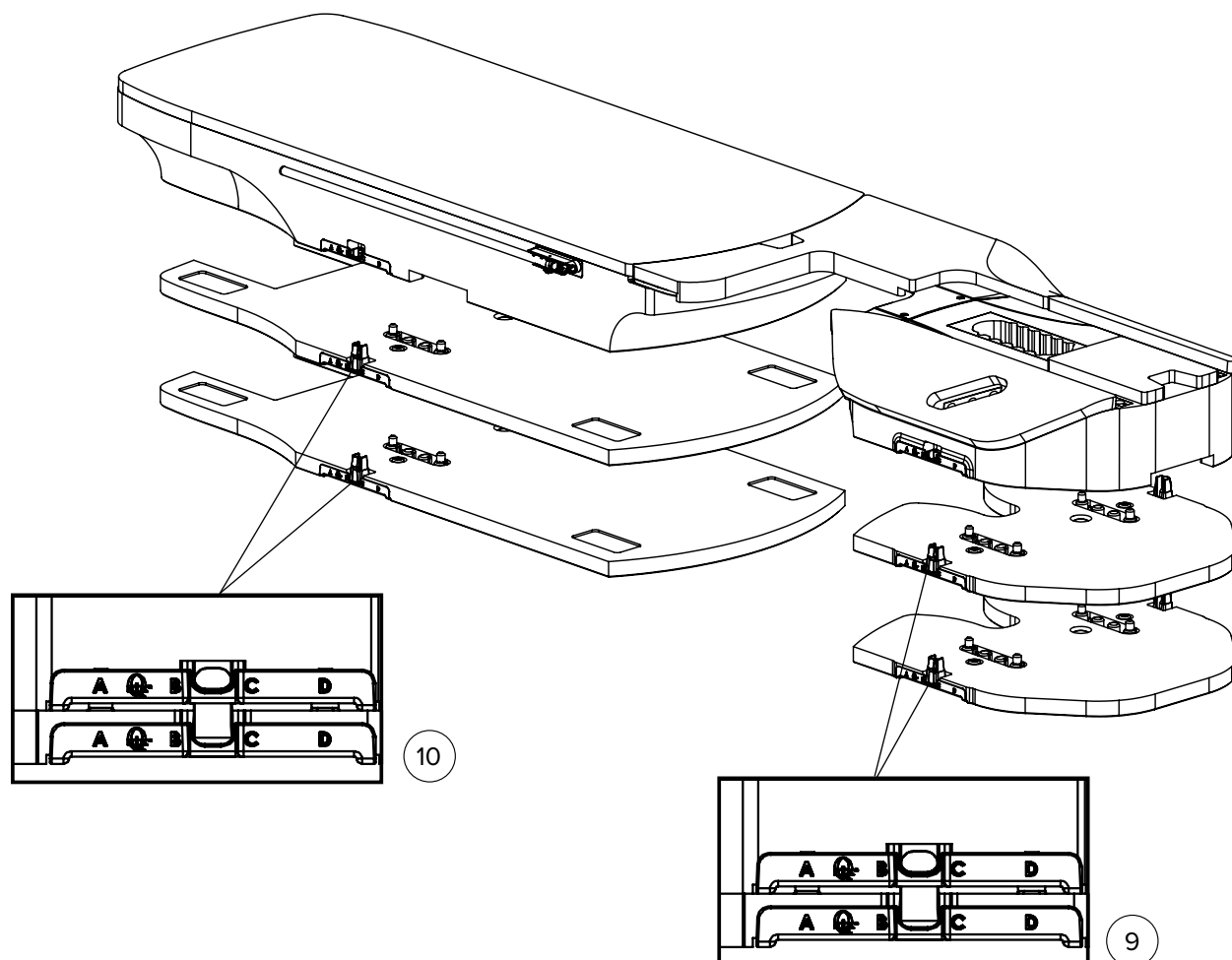

CT pacēlāji un starplikas

8. Cik daudz CT pacēlāju starpliku komplektu tiek izmantots (atlasiet vienu): **0** **1** **2**

9. Augšgala CT pacēlājs – novietojums uz pozicionēšanas stieņa **A** **B** **C** **D**

- Pozicionēšanas stieņa novietojums uz kušetes virsmas:

10. Apakšgala CT pacēlājs – novietojums uz pozicionēšanas stieņa **A** **B** **C** **D**

- Pozicionēšanas stieņa novietojums uz kušetes virsmas:

Piezīmes.

PACIENTA IESTATĪŠANA

ACCESS PRONE (RT-4544) – LABĀ UN KREISĀ KRŪTS

Pacientavārds:


Pacienta ID Nr.:

Iestatīja:

Ārsts:

Datums:

Komentāri:

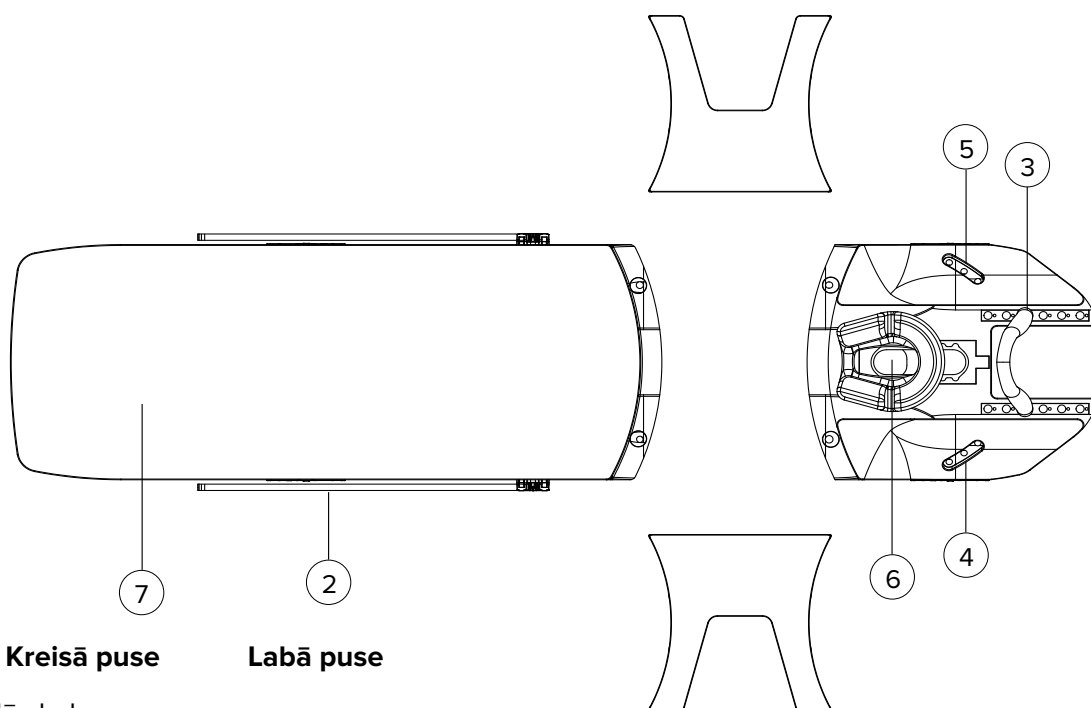

1. Ieliktnis: **Kreisā puse**

Labā puse

2. Ipsilaterālā skala:

3. Dubultā roktura novietojums (atlasiet vienu): **1 2 3 4 5 6 N/A**

4. Rokturis, *pacienta labā puse* (atlasiet vienu): **A1 A2 A3 N/A**

5. Rokturis, *pacienta kreisā puse* (atlasiet vienu): **A1 A2 A3 N/A**

6. Izmantotais galvas balsts: **Nav Prone Contour**

Novietojums (atlasiet vienu): **A B C D E F**


7. Ceļgala novietojums (atlasiet vienu): **V W X Y Z**

Piezīmes.

(Turpinājums aizmugurē)

PACIENTA IESTATĪŠANA

ACCESS PRONE (RT-4544) (TURPINĀJUMS)

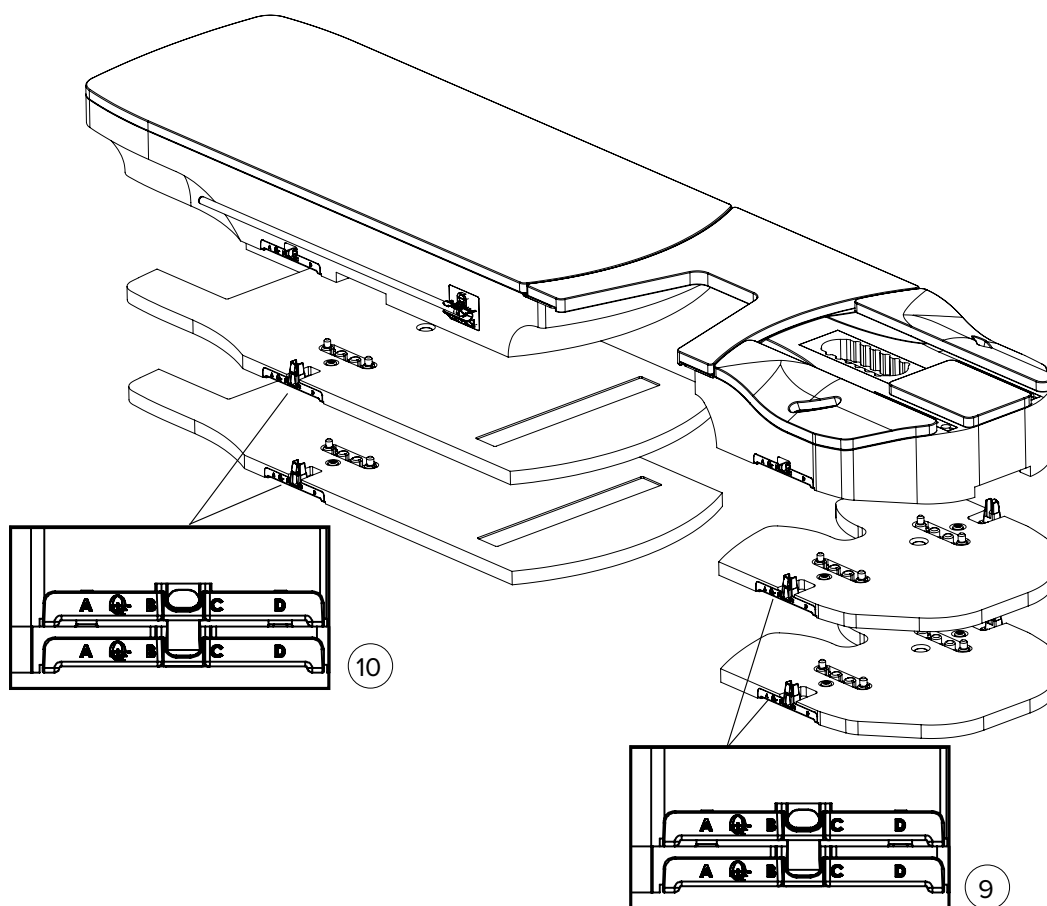

CT pacēlāji un starplikas

8. Cik daudz CT pacēlāju starpliku komplektu tiek izmantots (atlasiet vienu): **0** **1** **2**

9. Augšgala CT pacēlājs – novietojums uz pozicionēšanas stieņa **A** **B** **C** **D**

- Pozicionēšanas stieņa novietojums uz kušetes virsmas:


10. Apakšgala CT pacēlājs – novietojums uz pozicionēšanas stieņa **A** **B** **C** **D**

- Pozicionēšanas stieņa novietojums uz kušetes virsmas:

Piezīmes.

DALU SARAKSTS


ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)

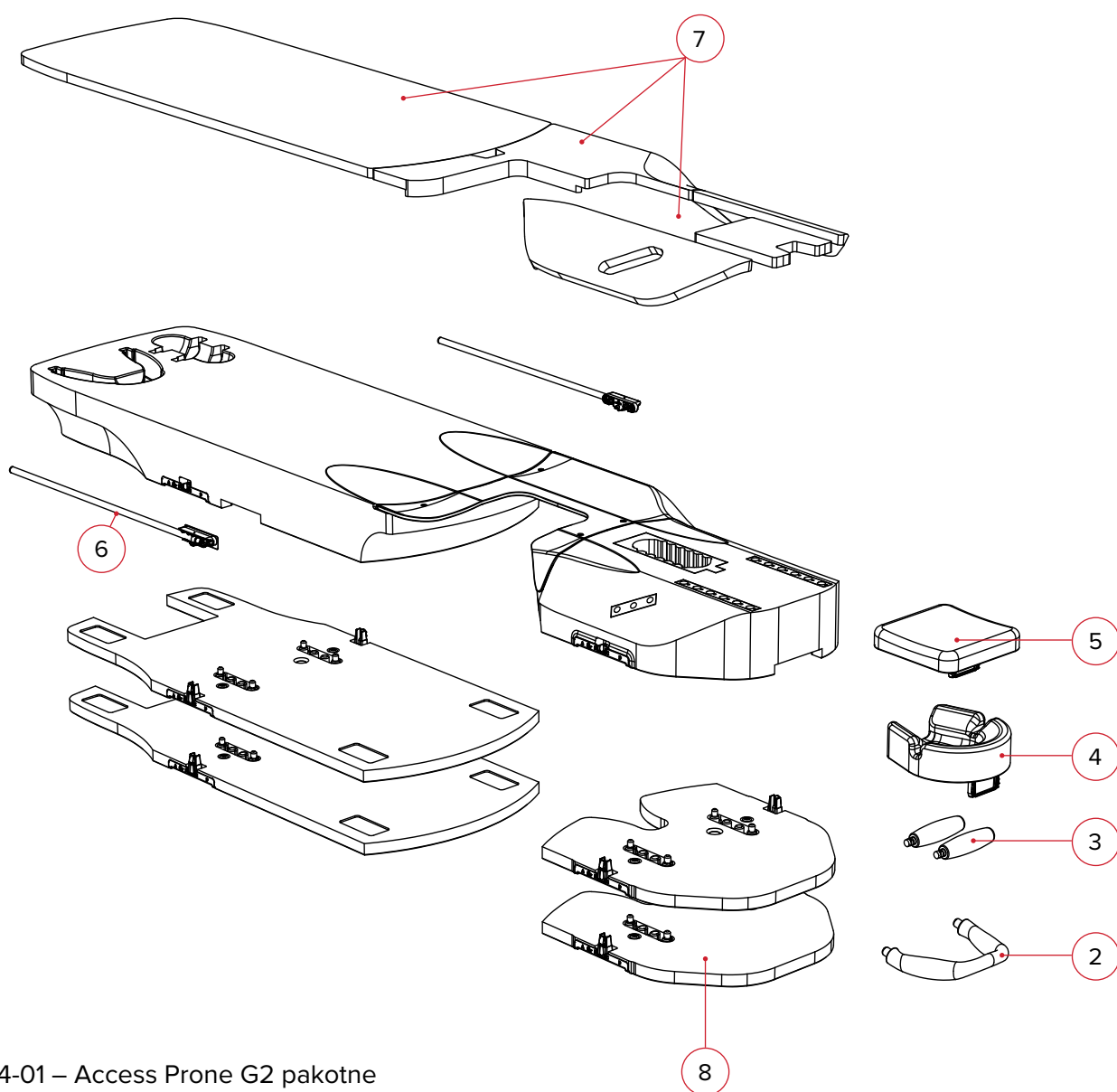

1. RT-4544-01 – Access Prone G2 pakotne
 - 2005408 Access Prone G2 labās puses ieliktņa bloks
 - 2005424 Access Prone G2 kreisās puses ieliktņa bloks
2. RT-4544KV-04 – dubultais rokturis
3. RT-4544KV-05 – roktura balsts
4. RT-4544KV-06 – Prone galvas balsts
5. RT-4544KV-07 – Contour galvas balsts
6. Ipsilaterālā skala, zems profils
 - 8002601 – 40 cm (maiņas skala)
 - 8002602 – 48 cm (piederumu skala)
7. 2006813 – AP-2 paliktņu komplekts
8. 8002580 – AP-2 starplikļu komplekts

DALU SARAKSTS

ACCESS PRONE (RT-4544)

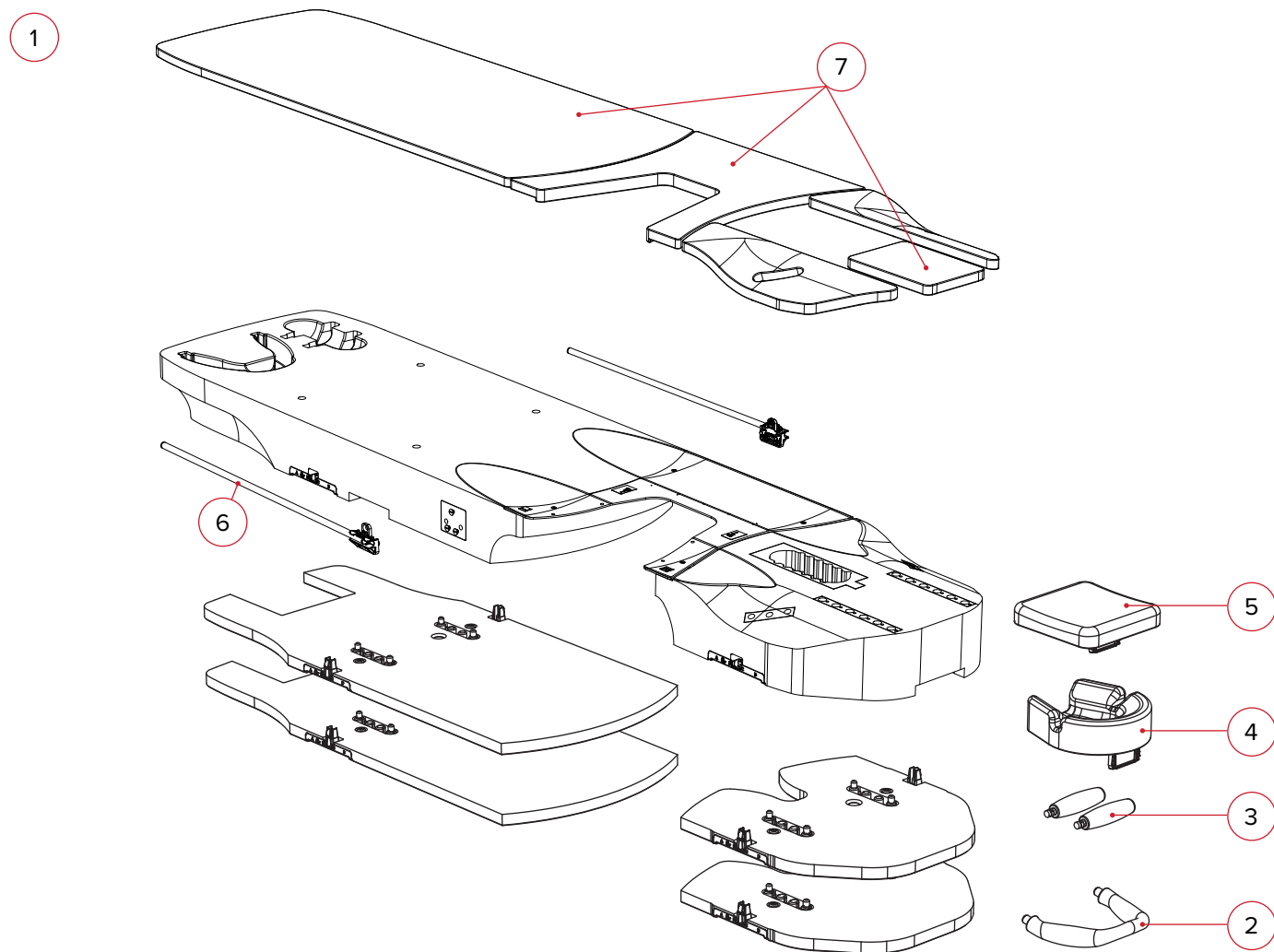

1. RT-4544 – Access™ Prone pakotne
 - 2004257 Access Prone G1 krūšu ieliktņa bloks
2. RT-4544KV-04 – dubultais rokturis
3. RT-4544KV-05 – roktura balsts
4. RT-4544KV-06 – Prone galvas balsts
5. RT-4544KV-07 – Contour galvas balsts
6. 8001846 – ipsilaterālā skala
7. 8002215 – Access™ Prone paliktņu komplekts



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com