



positioning
patients for life.®

PRODUCTHANDLEIDING EN GEBRUIKSAANWIJZING

RT-4544-01 en RT-4544

Access™ Prone-G2 en

Access™ Prone-borsttoestellen





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Vervaardigd in de VS door Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---

Access, Access 360, kVue en OneTouch zijn handelsmerken van Qfix.

Exact® is een gedeponeerd handelsmerk van Varian Medical Systems.

Cidex® is een gedeponeerd handelsmerk van Johnson & Johnson.

Clorox® is een gedeponeerd handelsmerk van The Clorox Company.

INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN	4
WAARSCHUWINGEN	4
AANVULLENDE WAARSCHUWINGEN	4
VERZWAKKING VAN DE BEHANDELINGSBUNDEL	4
ERNSTIGE INCIDENTEN	4
NOMINALE BELASTING	4
WAARSCHUWINGSLABELS EN BESCHRIJVINGEN	5
BEOOGD GEBRUIK	7
FUNCTIES	8
BESCHRIJVING	8
COMPONENTEN VAN ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)	9
COMPONENTEN VAN ACCESS PRONE (RT-4544)	10
COMPONENTEN	11
BEDIENINGSINSTRUCTIES	12
INSTALLATIE	12
OPSTELLING	14
VERWIJDEREN	22
ONDERHOUD	23
HET SYSTEEM REINIGEN	23
HET SYSTEEM DESINFECTEREN	23
SPECIFICATIES	24
ACCESS PRONE G2	24
PATIËNTOPSTELLING	25
ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) - RECHTER- EN LINKERBORST	25
ACCESS PRONE (RT-4544) - RECHTER- EN LINKERBORST	27
ONDERDELENLIJST	29
ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)	29
ACCESS PRONE (RT-4544)	30

ALGEMENE VOORZORGS- MAATREGELEN

WAARSCHUWINGEN

! WAARSCHUWING ! AANPASSING VAN DEZE APPARATUUR IS NIET TOEGESTAAN. ALS EEN ONDERDEEL VAN DIT HULPMIDDEL EEN TE GROTE BELASTING ONDERVINDT, BESCHADIGD LIJKT OF NIET GOED FUNCTIONEERT, DIENT U HET HULPMIDDEL NIET LANGER TE GEBRUIKEN EN CONTACT OP TE NEMEN MET QFIX VIA +1 484-720-6054 OF TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! WAARSCHUWING ! SCHALEN OP DE ACCESS PRONE EN ACCESS PRONE G2-BORSTTOESTELLEN DIENEN UITSLUITEND TER REFERENTIE.

AANVULLENDE WAARSCHUWINGEN

- De dubbele handgrepen en ipsilaterale grepen zijn niet ontworpen om het gewicht van de patiënt te ondersteunen
 - Gebruik de handgrepen NIET om de patiënt te positioneren
 - Gebruik de handvatten NIET om op of van het toestel te komen
- Patiënten hebben mogelijk hulp nodig om op of van het toestel te komen
- Vanwege de lengte van het toestel is het raadzaam om het toestel door twee personen te laten hanteren tijdens het plaatsen en verwijderen
- Gebruik NIET meer dan 3 gestapelde CT-vulstukken tegelijk. Hierdoor kan het toestel instabiel worden
- Het toestel NIET kantelen
- Er bestaat kans op letsel tussen het inzetstuk voor het tafelblad en andere apparatuur in de behandelruimte. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het tafelblad om letsel te voorkomen.

VERZWAKKING VAN DE BEHANDELINGSBUNDEL

De structurele gebieden van het kVue Access™ Prone-tafelbladtoestel verzwakken een fotonbundel. De werkelijke verzwakking op basis van de opstelling moet worden gecontroleerd met uw specifieke apparatuur. Behandeling via een apparaat, zelfs een apparaat dat is gemaakt van samengesteld materiaal, leidt tot een verhoogde huiddosis.

ERNSTIGE INCIDENTEN

Meld ernstige incidenten (bijvoorbeeld incidenten die dodelijk of ernstig letsel als gevolg (kunnen) hebben) bij zowel Qfix als de bevoegde autoriteit van uw land.

NOMINALE BELASTING

Overschrijd NIET de gelijkmatig verdeelde belasting van 225 kg (500 lb.) of de maximale werklust van de tafelbasis, afhankelijk van welke minder is.

! OPMERKING ! In combinatie met het OEM-tafelonderstel is de nominale belasting de laagste van de twee veilige werkbelasting. De belasting van het kVue-tafelblad mag NIET hoger zijn dan de specificaties van de fabrikant van het oorspronkelijke tafelonderstel. Raadpleeg de productdocumentatie van de fabrikant.

ALGEMENE VOORZORGS- MAATREGELEN


WAARSCHUWINGSLABELS EN BESCHRIJVINGEN

Ga naar Qfix.com voor een lijst met symbolen en de bijbehorende definities.



NOMINALE BELASTING

Overschrijd NIET het evenredig verdeelde gewicht van 225 kg (500 lb.) of de maximale veilige werklast van het tafelinzetstuk of het tafelonderstel, afhankelijk van welke minder is.

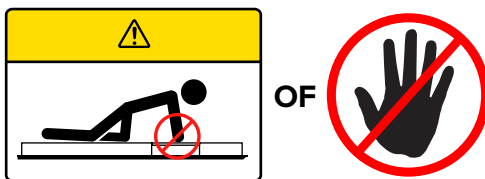


BELASTING INZETSTUK

Laat de patiënt het inzetstuk NIET gebruiken ter ondersteuning wanneer hij of zij op of van het toestel stapt. Dit kan letsel bij de patiënt veroorzaken.



MRI-VEILIG

Hiermee wordt aangeduid dat een voorwerp geen bekende gevaren vormt door blootstelling aan een MRI-omgeving. Producten die MRI-veilig zijn, bestaan uit materialen die niet-geleidend, niet-metaal en niet-magnetisch zijn.

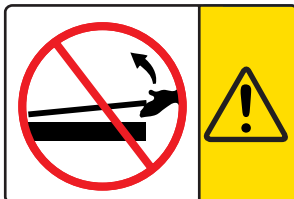

NIET OPTILLEN

! TIL NOOIT HET UITEINDE VAN HET INZETSTUKVOOR HET TAFELBLAD OP !

De bijbehorende pinnen kunnen buigen of breken, waardoor het tafelblad onbruikbaar wordt.

ALGEMENE VOORZORGS- MAATREGELEN


WAARSCHUWINGSLABELS EN BESCHRIJVINGEN



NIET ZITTEN


Het gebied achter de borstuitsparing is ontworpen en getest om het bovenlichaam van de patiënt te dragen; het is **NIET** ontworpen om de volledige belasting van de patiënt te dragen.

Staan of zitten op de Access Prone G2 of Access Prone voorbij de borstuitsparing kan het hulpmiddel beschadigen of letsel veroorzaken.

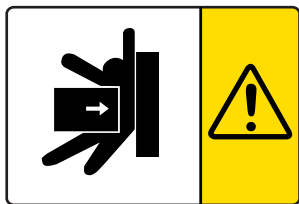

MOGELIJK LETSEL

Er bestaat kans op letsel tussen de Access Prone G2 of Access Prone en andere apparatuur in de behandelruimte. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de Access Prone om letsel te voorkomen.

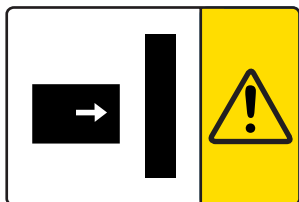

BOTSING MET GANTRY

De grote verscheidenheid aan bewegingen die door de tafelonderstellen en behandelkoppen kunnen worden verkregen, kan situaties veroorzaken waarin het inzetstuk voor het tafelblad in botsing kan komen met andere voorwerpen, waaronder de gantry. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de tafel of gantry om schade aan de apparatuur of letsel bij de patiënt te voorkomen.

BEOOGD GEBRUIK

Dit hulpmiddel is bedoeld voor het immobiliseren, positioneren en herpositioneren van patiënten die bestralingstherapie ondergaan.

! OPMERKING ! Volgens de federale wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika mag dit hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden gekocht.

PATIËTENDOELGROEPEN

Patiënten die bestralingstherapie of diagnostische beeldvormingsprocedures ondergaan.

BEOOGDE GEBRUIKERS

De beoogde gebruiker van de producten is iemand die in aanmerking komt volgens de eisen van het regelgevingsgebied.

FUNCTIES

BESCHRIJVING


Access Prone G2 en Access Prone zijn ontworpen voor behandeling van borstkanker voor zowel de linker- als de rechterborst. Door de patiënt in buikligging te plaatsen, wordt de scheiding van de borst en belangrijke organen die risico lopen vergroot.

De Access Prone G2 (RT-4544-01) kan worden gebruikt als een CT/MR-simulatietoestel voor de Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10).

! WAARSCHUWING ! DE ACCESS PRONE (RT-4544) KAN NIET WORDEN GEBRUIKT ALS SIMULATIETOESTEL VOOR ANDERE PRODUCTEN DAN ZICHZELF OF ANDERE ACCESS PRONE (RT-4544)-APPARATEN.


FUNCTIES

COMPONENTEN VAN ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)

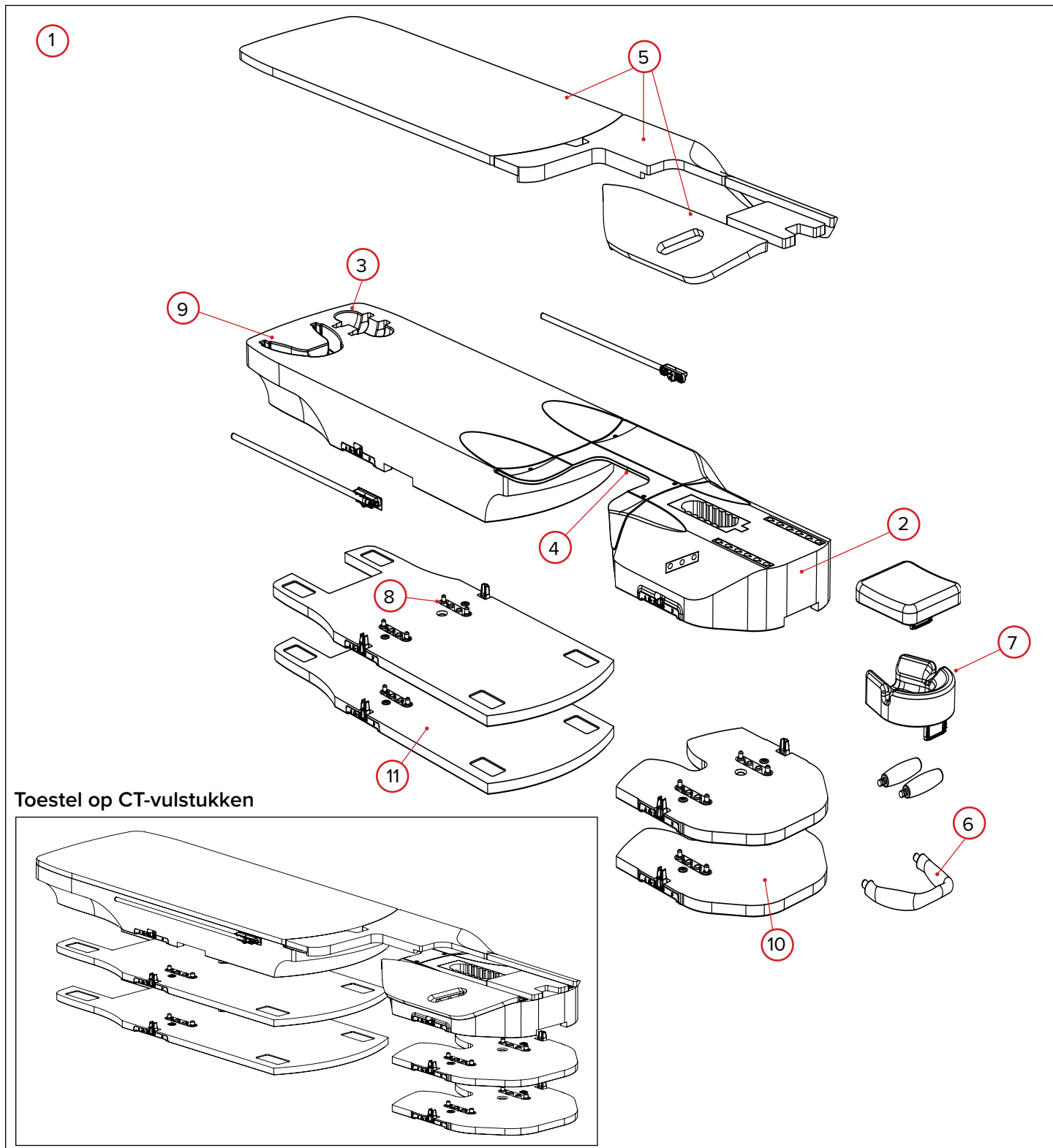

FUNCTIES

COMPONENTEN VAN ACCESS PRONE (RT-4544)

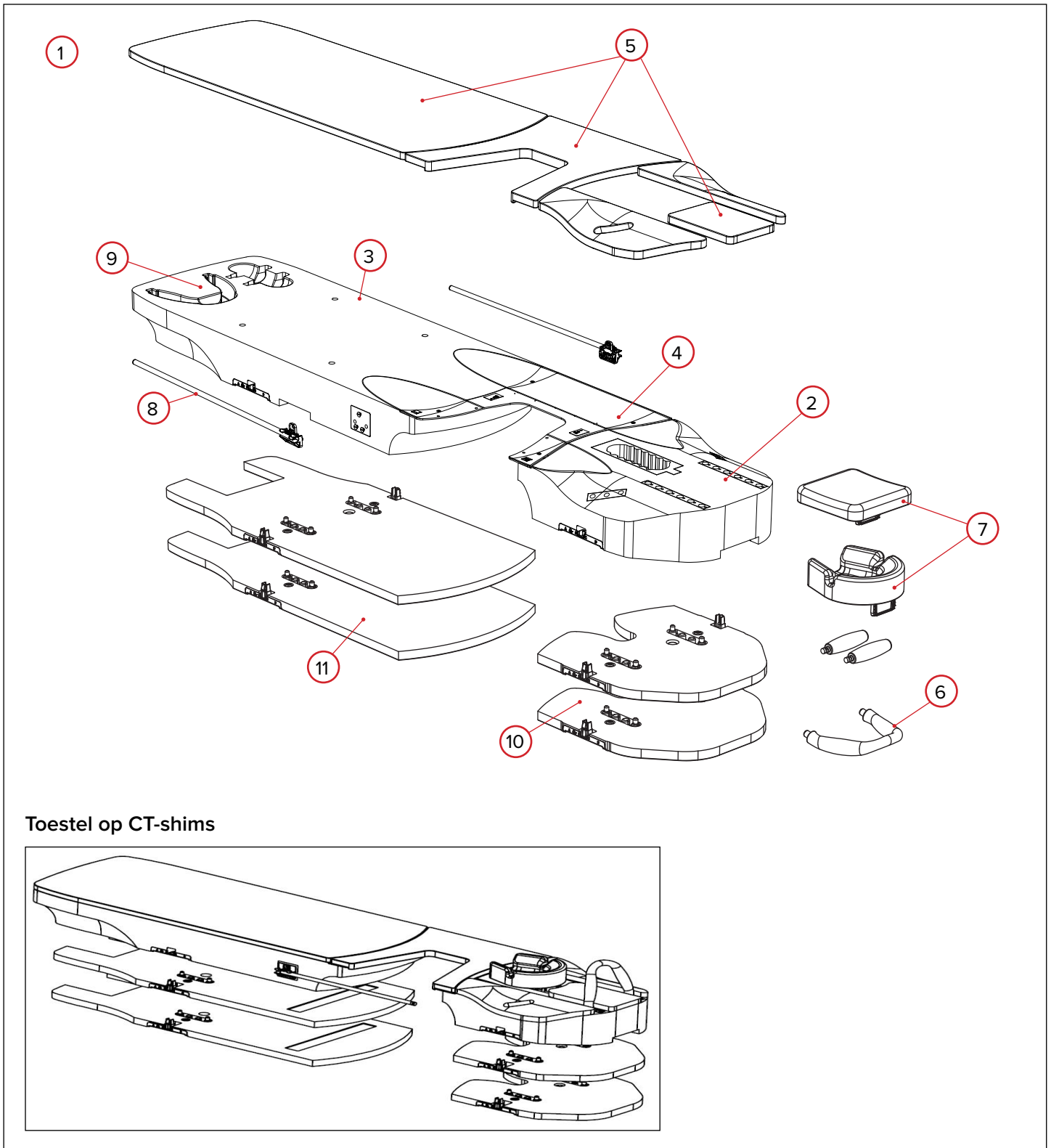

FUNCTIES

COMPONENTEN

1. ACCESS PRONE G2 EN ACCESS PRONE BORSTTOESTELLEN

De Access Prone G2 en Access Prone worden gebruikt als hulpmiddel bij het positioneren en opstellen van patiënten die radiotherapie van de borst en het sleutelbeengebied in buikligging ondergaan.

2. ARM- EN HOOFDCOMPONENT

3. BEENCOMPONENT

4. INZETSTUK

Dankzij het omkeerbare middengedeelte kan het toestel snel worden geconfigureerd voor behandeling van de linker- of rechterborst.

5. PADS

De pads zijn voor het comfort van de patiënt, maar ze kunnen worden verwijderd en er kunnen vacuümkussens worden gebruikt. Deze pads bieden ook extra grafische informatie over de positionering van de patiënt.

6. DUBBELE HANDGREEP

De dubbele handgreep is ergonomisch ontworpen om belasting op de pols van de patiënt te verminderen, in tegenstelling tot een standaard greep die met andere hulpmiddelen wordt gebruikt.

7. HOOFDSTEUNEN

Het systeem wordt geleverd met een hoofdsteen voor buikligging en contourligging. Beide kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de voorkeur van de opstelling. Ze kunnen op meerdere locaties worden geïndexeerd op de Access Prone, afhankelijk van de lengte van de patiënt.

8. IPSILATERALE SCHAAL

De ipsilaterale schaal zwenkt en klikt boven op zijn plaats voor opstelling en zwaait naar achteren voor behandeling en opslag. De schaal kan worden gebruikt als uitlijn hulpmiddel. De nauwkeurigheid is ± 1 mm. Aan beide zijden van het toestel bevindt zich een schaal voor behandeling van de linker- of rechterborst.

9. OPSLAG

Handige opbergvakken voor handgrepen aan de binnenkant.

10. CT-VULSTUK VOOR ARM- EN HOOFDCOMPONENT

Het CT-vulstuk kan worden bevestigd op een schuifstang en verhoogt de arm- en hoofdcomponent in stappen van 2,5 mm. Dit vulstuk kan vastklikken op een ander CT-vulstuk voor arm- en hoofdcomponenten.

11. CT-vulstuk VOOR BEENCOMPONENT


Het CT-vulstuk kan worden bevestigd op een schuifstang en verhoogt de beencomponent in stappen van 2,5 mm. Dit vulstuk kan vastklikken op een ander CT-vulstuk van de beencomponent.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

INSTALLATIE

SCHUIFSTANG

1. De schuifstang heeft twee positioneringspennen die passen bij de meeste standaardaccessoires voor positionering. Plaats om te bevestigen een van de uiteinden van de positioneringsstang in de juiste verdelersleuven die compatibel zijn met Varian Exact® en klik deze vast. Om de stang te verwijderen of te verplaatsen, trekt u een van beide uiteinden van de stang omhoog.

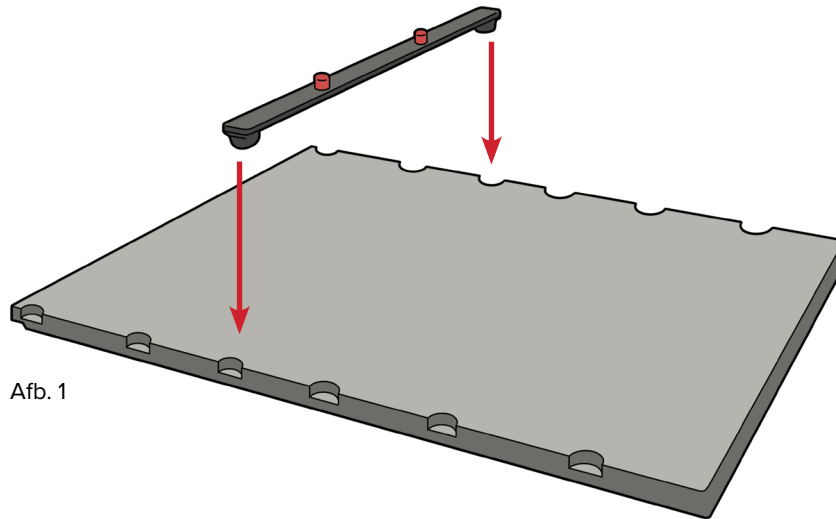


Afb. 1

BEDIENINGSINSTRUCTIES


INSTALLATIE

SCHUIFSTANG

- Plaats de uiteinden van 2 schuifstangen in de met Varian Exact® compatibele indexinkepingen op de CT-overlay 1260 mm (gewoonlijk 9 indexinkepingen) uit elkaar, en klik de schuifstangen op hun plaats. (Afb. 2 en 3)

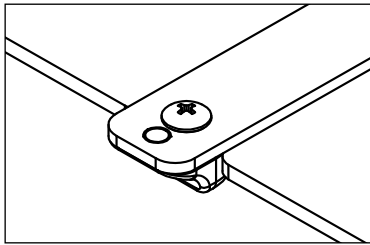

Afb. 2

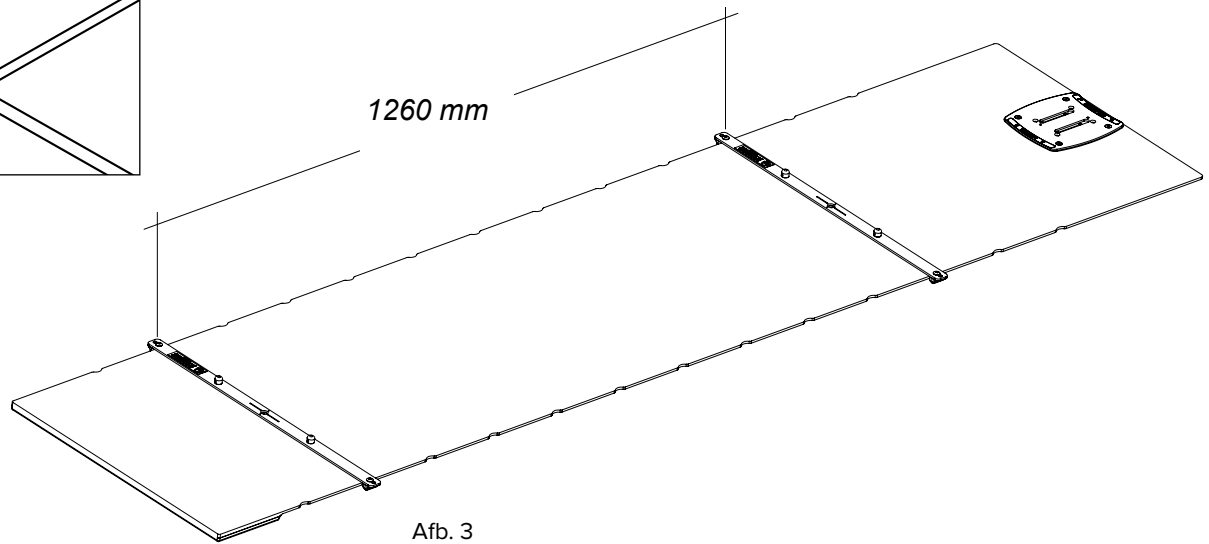


Afb. 3

BEDIENINGSINSTRUCTIES

OPSTELLING

DE ARMCOMPONENT EN HOOFD- EN BEENCOMPONENT AAN DE OVERLAY BEVESTIGEN

Plaats de armcomponent en hoofd- en voetcomponenten van de Access Prone G2 en Access Prone op de CT-overlay, die aansluiten op de schuifstangen. Zorg ervoor dat u de Access Prone-G2 en Access Prone-componenten indexeert op dezelfde locaties op zowel de hoofd- als voetcomponent. (Afb. 4, 5 en 6)

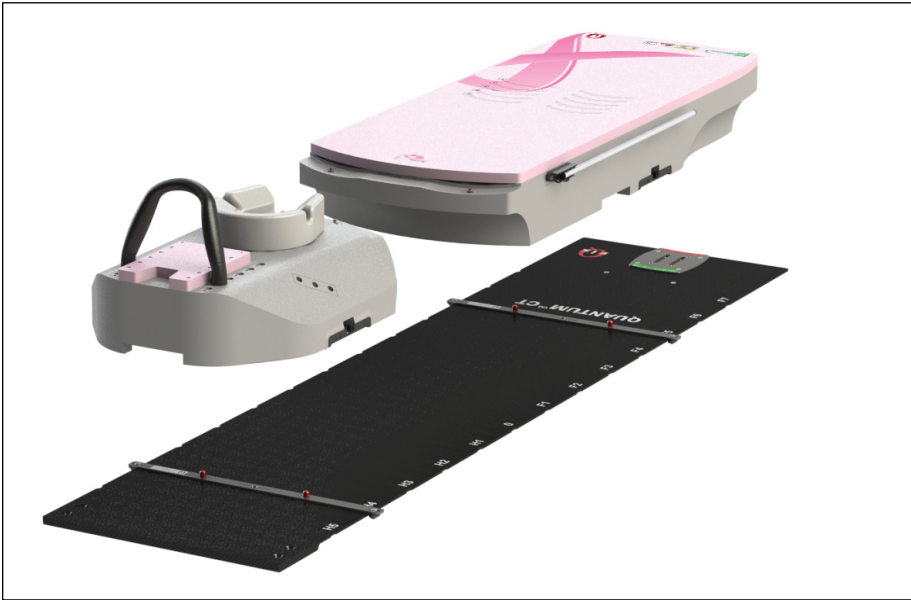


Afb. 4



Afb. 5

HET INZETSTUK BEVESTIGEN AAN DE ARM- EN HOOFD- EN BEENCOMPONENT

Bevestig het inzetstuk aan de arm- en hoofd- en beencomponenten met behulp van de paspennen aan de onderkant van het inzetstuk. (Afb. 6) Dit inzetstuk kan worden gedraaid om beide zijden te behandelen.

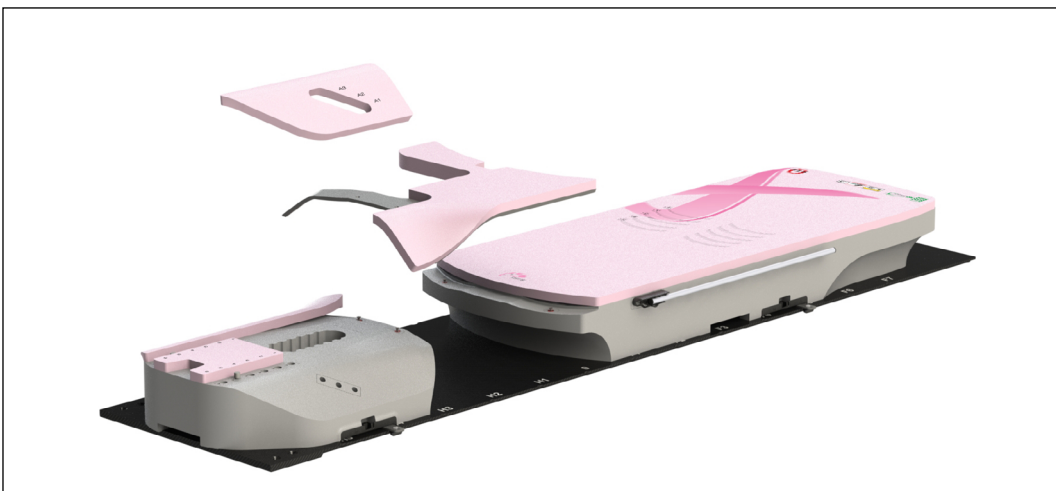


Afb. 6

BEDIENINGSINSTRUCTIES

OPSTELLING

VISUELE UITLIJNINGSCONTROLE


Controleer visueel of de Access™ Prone-onderdelen goed op de overlay zijn gecentreerd. (Afb. 7)

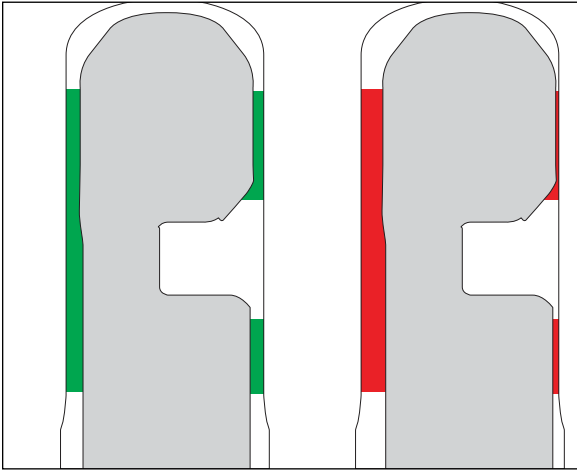

Afb. 7

CT-VULSTUKKEN

1. Om CT-vulstukken te plaatsen, moet eerst de Access Prone worden verwijderd.
2. Plaats CT-vulstukken op hetzelfde indexpunt als de voet- en hoofdcomponenten. CT-vulstukken kunnen op elkaar worden gestapeld om de hoogte met stappen van 2,5 cm te vergroten. (Afb. 8)

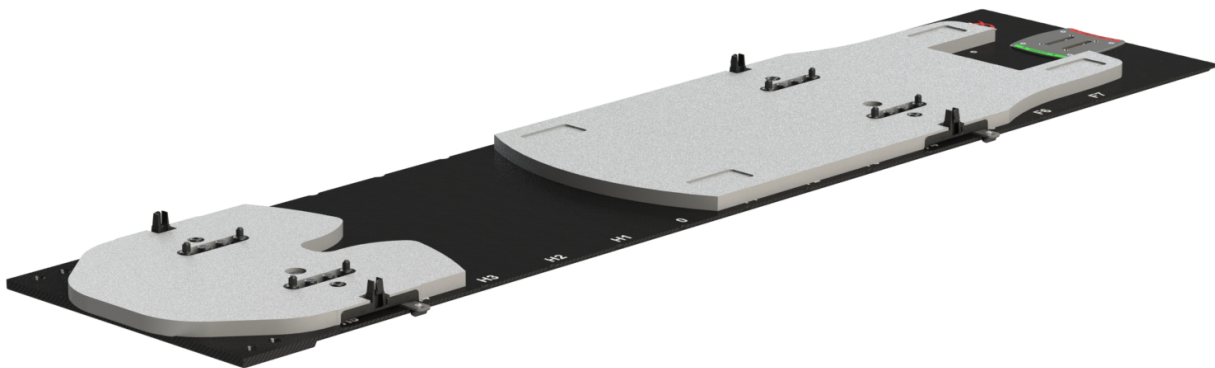

Afb. 8


! WAARSCHUWING ! GEBRUIK NIET MEER DAN 3 GESTAPELDE CT-VULSTUKKEN TEGELIJK. HIERDOOR KAN HET TOESTEL INSTABIEL WORDEN.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

OPSTELLING


CT-VULSTUKKEN, vervolg

3. Plaats Access Prone G2 of Access Prone op CT-vulstukken. (Afb. 9)

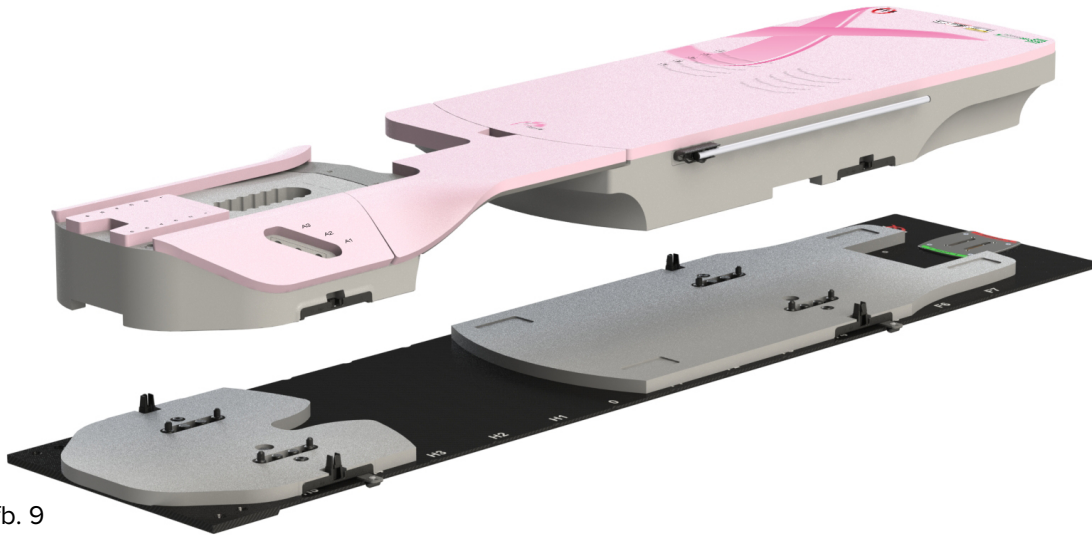

Afb. 9

4. Om de hoogte van het toestel te verlagen, verwijdt u het Access Prone G2- of Access Prone-borsttoestel. Druk op de ontgrendelingsknop aan beide zijden van de indexplaat. (Afb. 10)

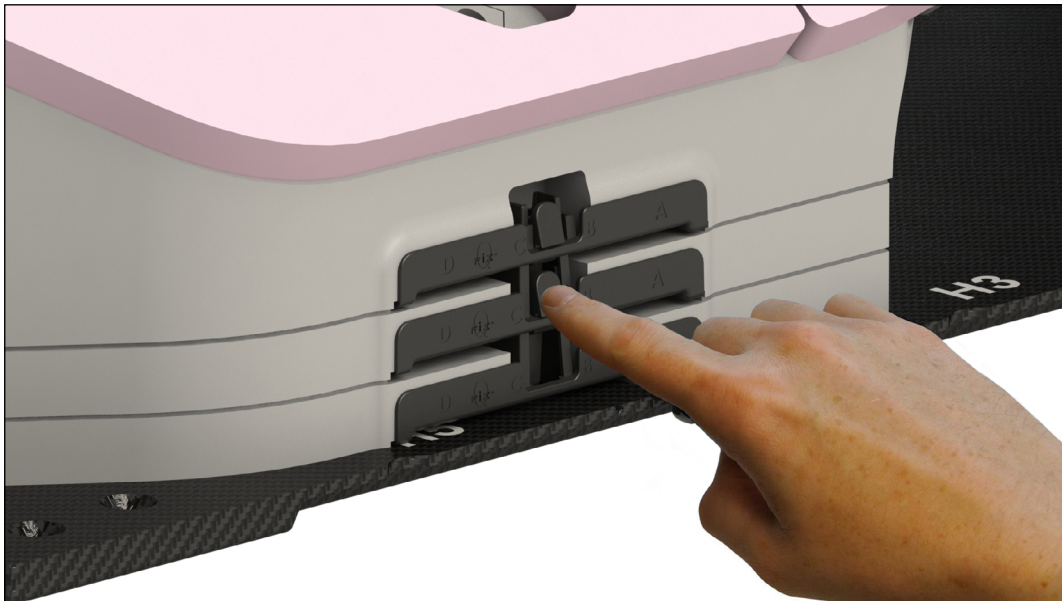

Afb. 10


BEDIENINGSINSTRUCTIES

OPSTELLING

HOOFDSTEUN

1. Kies de hoofdsteun voor buikligging of de contourhoofdsteun die u voor de patiënt wilt gebruiken.
2. Plaats het plastic uitlijnstuk in de juiste sleuf aan de bovenzijde van het toestel. (Afb. 11)

! OPMERKING ! De hoofdsteunen kunnen worden geïnstalleerd voordat de patiënt op het toestel plaatsneemt, maar moeten mogelijk opnieuw worden gepositioneerd zodra de patiënt op zijn plaats is.

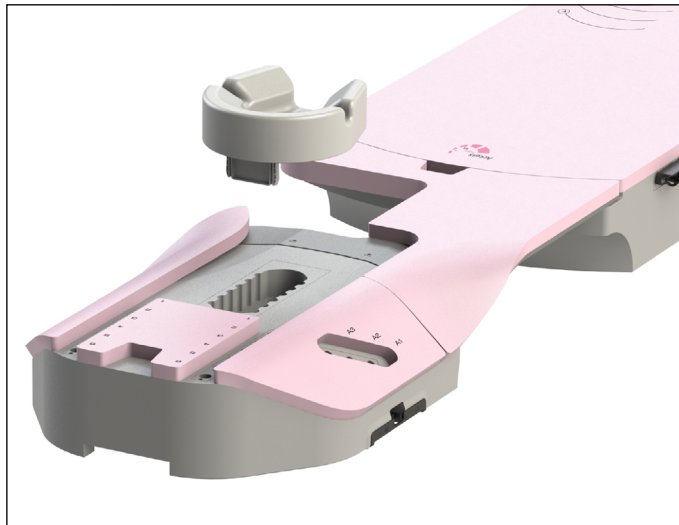

Afb. 11

BEDIENINGSINSTRUCTIES

OPSTELLING

POSITIONERING VAN DE PATIËNT


! OPMERKING ! Patiënten hebben mogelijk hulp nodig om op of van het toestel te komen. De onderstaande instructies zijn onze voorgestelde technieken, maar kunnen per kliniek verschillen.

OP EN VAN DE ACCESS PRONE G2 OF ACCESS PRONE KOMEN


1. Laat de tafel zakken of gebruik een opstapkrak om de patiënt te helpen op het inzetstuk te komen.
2. Zodra de patiënt op het inzetstuk is geplaatst, brengt u de knieën op één lijn met de juiste markeringen op het foam. (Afb. 12)
3. Laat de patiënt zijn/haar handen of ellebogen gebruiken om zijn/haar bovenlichaam in positie te brengen. (Afb. 13)
4. Laat de patiënt langzaam in de juiste positie zakken. (Afb. 14)
5. Zodra de patiënt in positie is gebracht, plaatst u het hoofd van de patiënt in de hoofddeun en laat u de patiënt de juiste handgrepen vastpakken. (Afb. 14)

! WAARSCHUWING ! DE DUBBELE HANDGREEP EN IPSILATERALE HANDGREEP ZIJN NIET ONTWERPEN OM HET GEWICHT VAN EEN PATIËNT TE ONDERSTEUNEN:


- Gebruik de handgrepen **NIET** om de patiënt te positioneren.
- Gebruik de handvatten **NIET** om op of van het toestel te komen.

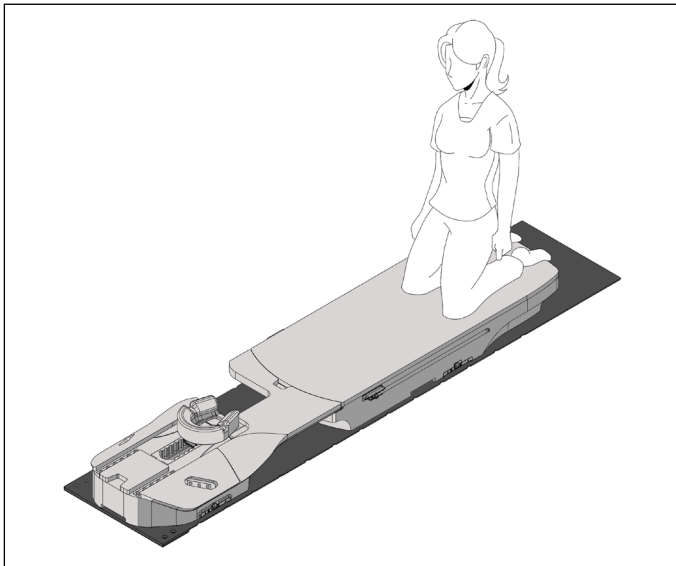

Afb. 12

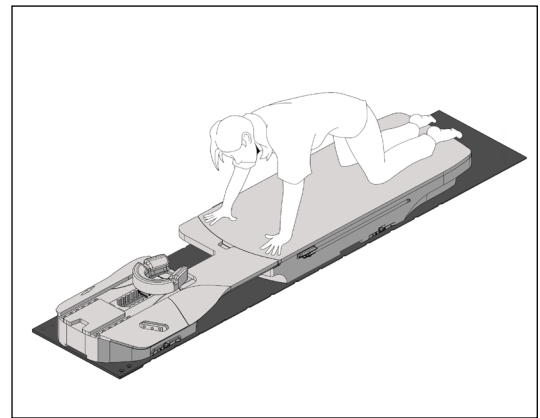

Afb. 13

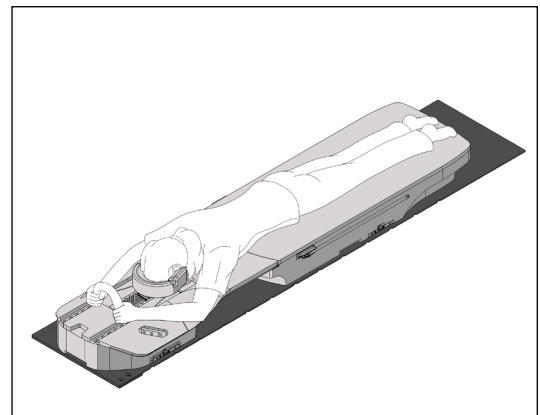

Afb. 14

BEDIENINGSINSTRUCTIES

OPSTELLING


DUBBELE HANDGREEP

! WAARSCHUWING ! DE DUBBELE HANDGREEP EN IPSILATERALE HANDGREEP ZIJN NIET ONTWORPEN OM HET GEWICHT VAN EEN PATIËNT TE ONDERSTEUNEN:


- Gebruik de handgrepen NIET om de patiënt te positioneren.
- Gebruik de handvatten NIET om op of van het toestel te komen.

1. Lijn de uiteinden van de handgreep uit met de bijbehorende gaten aan het bovenste uiteinde van het inzetstuk.
2. Duw de handgreep omlaag totdat deze in de gaten vastklikt. (Afb. 15)

! OPMERKING ! De handgreep moet in de richting van de patiënt zijn gebogen, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. (Afb. 16)

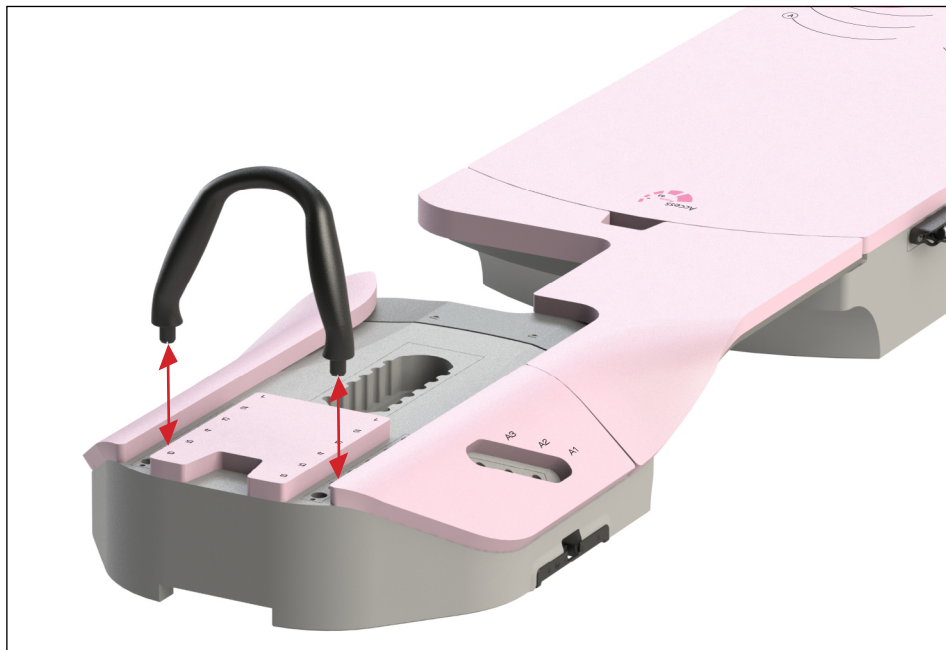

Afb. 15

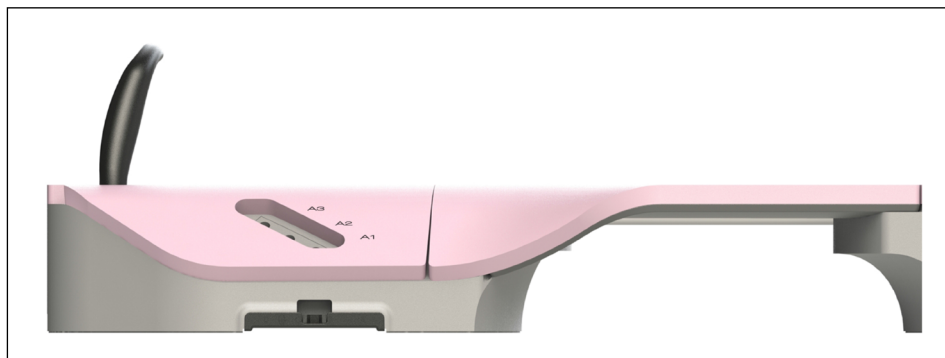

Afb. 16

BEDIENINGSINSTRUCTIES

OPSTELLING

IPSILATERALE HANDGREEP

1. Steek de handgreep in de juiste opening aan het bovenste uiteinde van het inzetstuk. (Afb. 17)
2. Draai de handgreep in een van beide richtingen totdat de handgreep vastzit in het gat en vastklikt. (Afb. 17)



Afb. 17

OPSLAG

De dubbele handgreep en ipsilaterale handgrepen kunnen worden opgeborgen in de opslagruimte aan het voeteneinde van de beencomponent. (Afb. 18)



Afb. 18

BEDIENINGSINSTRUCTIES

OPSTELLING

IPSILATERALE SCHAAL

! WAARSCHUWING ! DE IPSILATERALE SCHAAL IS NIET ONTWERPEN OM HET GEWICHT VAN EEN PATIËNT TE ONDERSTEUNEN.

! WAARSCHUWING ! GEBRUIK DE HANDVATTEN NIET OM OP OF VAN HET TOESTEL TE KOMEN.

1. Lijn de patiënt uit.
2. Zodra de patiënt op zijn plaats is, zwaait u de ipsilaterale schaal naar boven totdat deze op zijn plaats vastklikt. (Afb. 19)

! OPMERKING ! De schaal is aanwezig als uitlijn hulpmiddel; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de positie van de patiënt te bevestigen.

! OPMERKING ! De nauwkeurigheid van de schaal is getest tot ± 1 mm.

3. Zwenk de ipsilaterale schaal naar onderen, naar de opslagpositie, voorafgaand aan de behandeling en/of opslag. (Afb. 19)

Afb. 19



BEDIENINGSINSTRUCTIES

VERWIJDEREN

IPSILATERALE HANDGREEP

Draai de handgreep in de tegenovergestelde richting van de montage tot deze loskomt en trek de handgreep er vervolgens recht uit. De ipsilaterale handgreep kan worden opgeborgen in de voet van het voetcomponent onder het kussen.

DUBBELE HANDGREEP

Trek omhoog totdat deze uit de gaten klikt. De dubbele handgreep kan worden opgeborgen in de voet van het voetcomponent onder het kussen.

PATIËNT

Volg de plaatsingsinstructies in omgekeerde volgorde.

! OPMERKING ! Patiënten hebben mogelijk hulp nodig om op of van het toestel te komen.

BORSTINZETSTUK

Trek het borstinzetstuk omhoog, weg van de hoofd- en voetcomponenten.

HOOFDSTEUN

Trek de hoofdsteun omhoog weg van het inzetstuk.

ARM- EN HOOFD- EN VOETCOMPONENT

Til de arm- en hoofd- en voetcomponenten omhoog van de overlay af. Indien nodig kunnen de vulstukken worden gedemonteerd van de arm- en hoofd- en voetcomponenten door de ontgrendelknoppen aan weerszijden van de blauwe indexplaten in te drukken.

HET VERWIJDEREN VAN DE SCHUIFSTANG

Trek een van beide uiteinden van de schuifstang omhoog.

ONDERHOUD

HET SYSTEEM REINIGEN

Het apparaat kan worden gereinigd met een mild niet-schurend reinigings- of desinfectiemiddel. Spuit of giet geen vloeistoffen op het oppervlak, omdat deze in de OneTouch™-vergrendeling of mechanismen in het toestel kunnen stromen. Breng om te reinigen de oplossing aan op een schone doek en veeg het oppervlak af.

HET SYSTEEM DESINFECTEREN

De volgende reinigingsmaterialen zijn getest en geschikt bevonden voor het reinigen van de oppervlakken Access Prone G2, Access Prone en tafelbladinzetstuk. Raadpleeg de specifieke instructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel om het oppervlak van het tafelblad te desinfecteren.

- Water
- Oplossing van 10% Clorox®-bleekmiddel
- Isopropylalcohol
- Een met 2,4% Cidex® geactiveerde dialdehydeoplossing
- Zeep en water


Spuit NIET rechtstreeks op Access Prone G2, Access Prone of het tafelbladinzetstuk en laat het niet in het onderframe stromen.

Plaats GEEN scherpe voorwerpen op de Access Prone G2, de Access Prone of het tafelbladinzetstuk.

SPECIFICATIES

ACCESS PRONE G2

Gewichtslimiet: 225 kg (500 lb.) evenredig verdeelde belasting

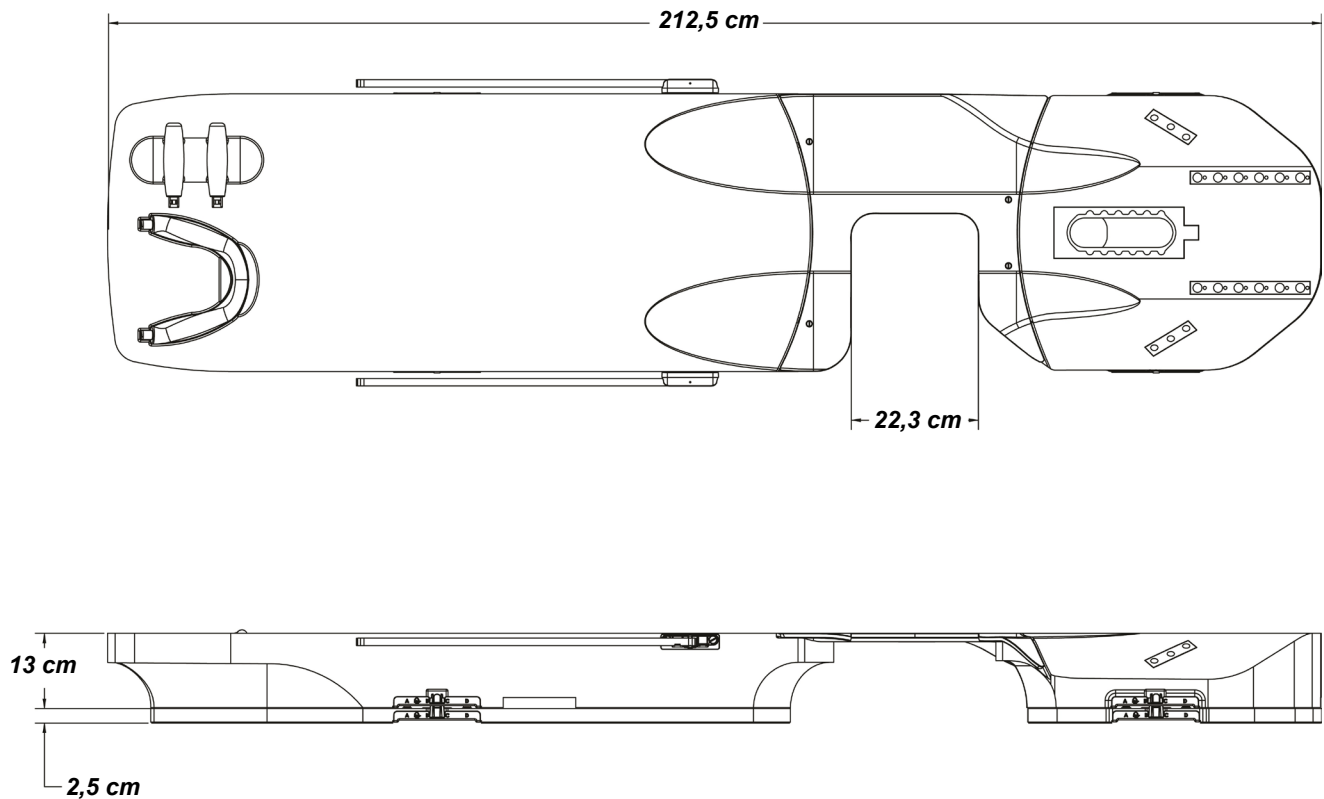

PATIËNTOPSTELLING

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) - RECHTER- EN LINKERBORST

Naam patiënt:


Patiënt-ID:

Opgesteld door:

Arts:

Datum:

Opmerkingen:

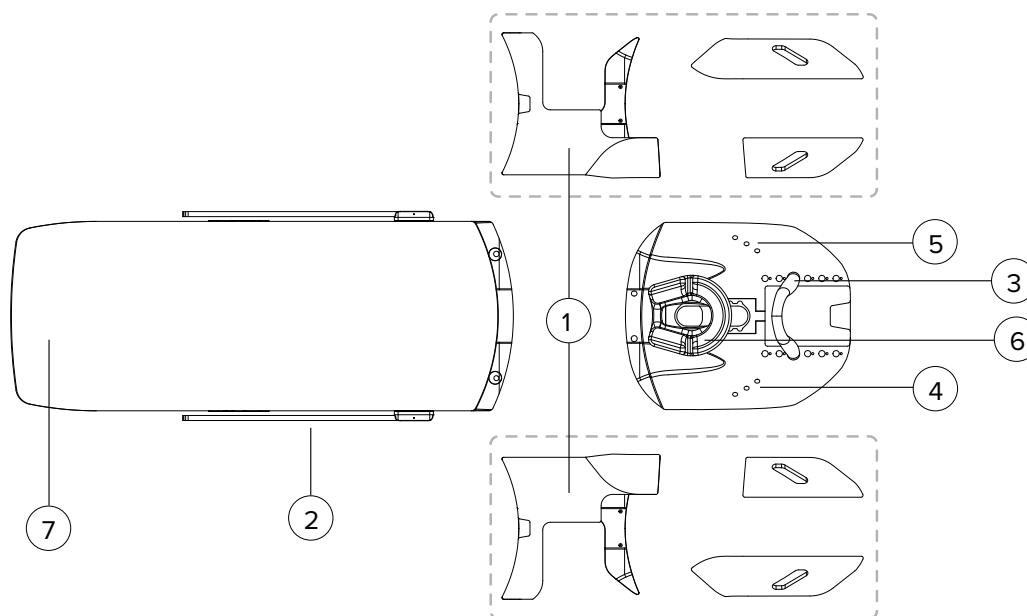

1. Inzetstuk: **Links** **Rechts**

2. Ipsilaterale schaal:

3. Locatie dubbele handgreep (selecteer één optie): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **N.v.t.**

4. Handgreep, *rechterzijde patiënt* (selecteer één optie): **A1** **A2** **A3** **N.v.t.**

5. Handgreep, *linkerzijde patiënt* (selecteer één optie): **A1** **A2** **A3** **N.v.t.**

6. Gebruikte hoofddeun: **Geen** **Buikligging** **Contour**
Locatie (selecteer één optie): **A** **B** **C** **D** **E** **V**


7. Knielocatie (selecteer één optie): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Opmerkingen:

(Vervolg op achterzijde)

PATIËNTOPSTELLING

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) (VERVOLG)

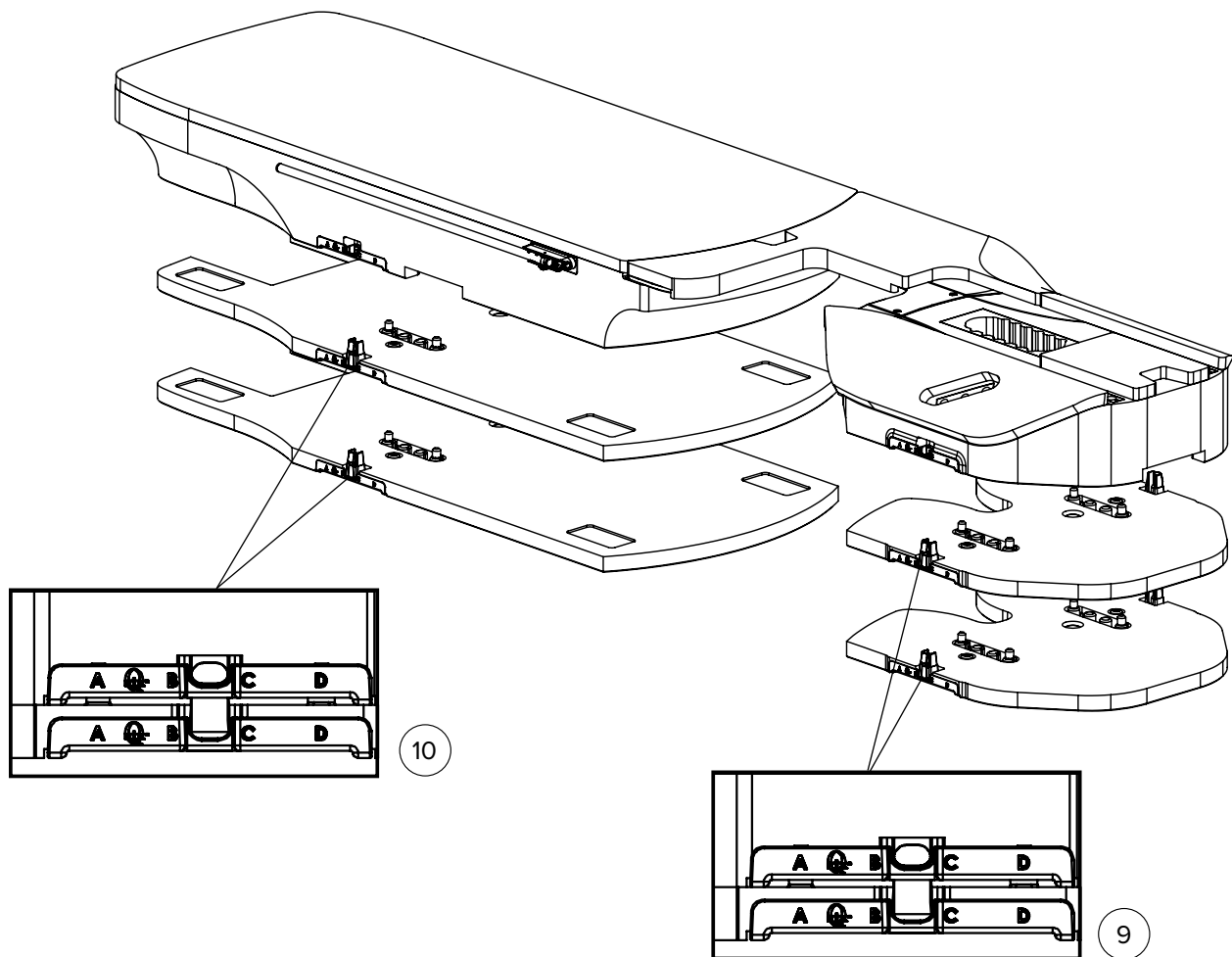

CT-ophogers en vulstukken

8. Hoeveel sets CT-ophoogvulstukken worden gebruikt (selecteer één optie): **0** **1** **2**

9. Bovenste CT-ophoger - Locatie op schuifstang **A** **B** **C** **D**

- Locatie van de schuifstang op het tafelblad:

10. Onderste CT-verhoger - Locatie op schuifstang **A** **B** **C** **D**

- Locatie van de schuifstang op het tafelblad:

Opmerkingen:

PATIËNTOPSTELLING

ACCESS PRONE (RT-4544) - RECHTER- EN LINKERBORST

Naam patiënt:


Patiënt-ID:

Opgesteld door:

Arts:

Datum:

Opmerkingen:

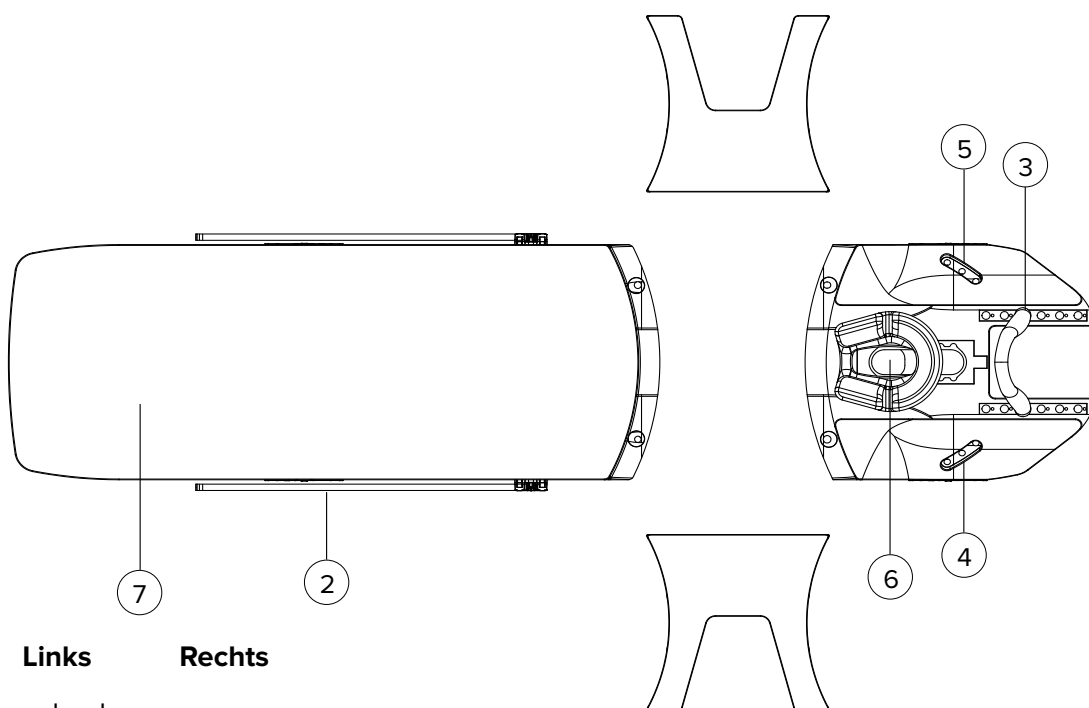

1. Inzetstuk: **Links** **Rechts**

2. Ipsilaterale schaal:

3. Locatie dubbele handgreep (selecteer één optie): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **N.v.t.**

4. Handgreep, *rechterzijde patiënt* (selecteer één optie): **A1** **A2** **A3** **N.v.t.**

5. Handgreep, *linkerzijde patiënt* (selecteer één optie): **A1** **A2** **A3** **N.v.t.**

6. Gebruikte hoofdsteen: **Geen** **Buikligging** **Contour**
Locatie (selecteer één optie): **A** **B** **C** **D** **E** **V**


7. Knielocatie (selecteer één optie): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Opmerkingen:

(Vervolg op achterzijde)

PATIËNTOPSTELLING

ACCESS PRONE (RT-4544) (VERVOLG)

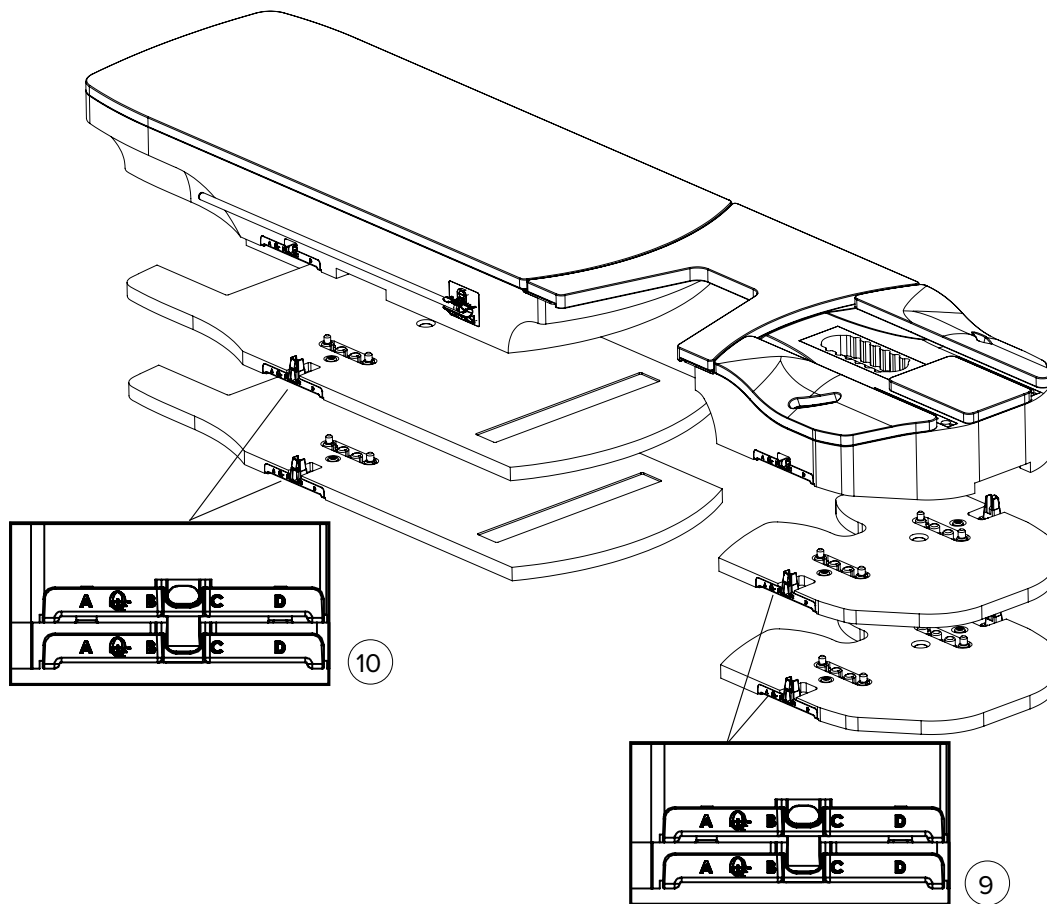

CT-ophogers en vulstukken

8. Hoeveel sets CT-ophoogvulstukken worden gebruikt (selecteer één optie): **0** **1** **2**

9. Bovenste CT-ophoger - Locatie op schuifstang **A** **B** **C** **D**

- Locatie van de schuifstang op het tafelblad:


10. Onderste CT-verhoger - Locatie op schuifstang **A** **B** **C** **D**

- Locatie van de schuifstang op het tafelblad:

Opmerkingen:

ONDERDELENLIJST


ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)

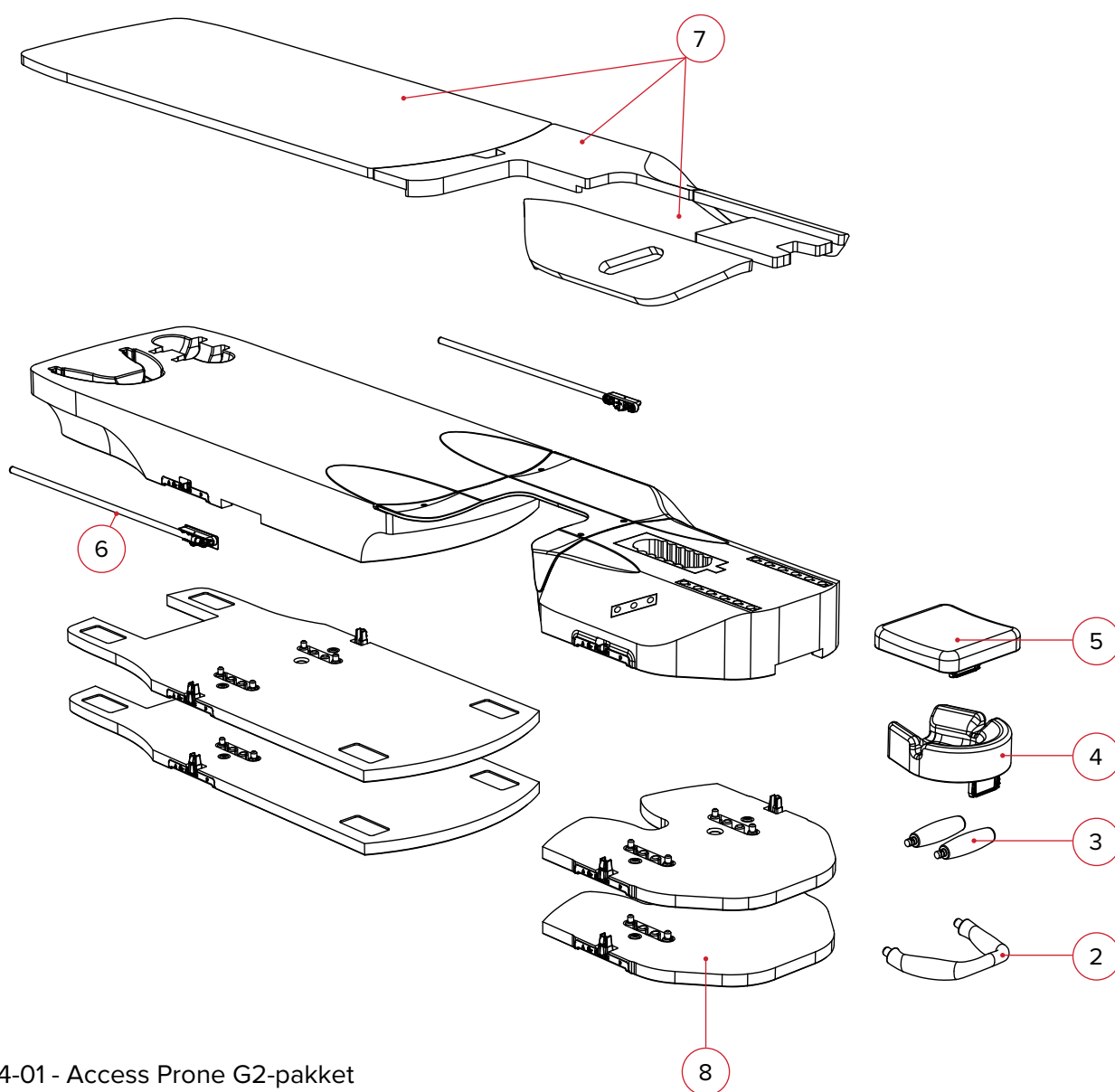

1. RT-4544-01 - Access Prone G2-pakket
 - 2005408 Access Prone G2 Rechter inzetstuk
 - 2005424 Access Prone G2 Linker inzetstuk
2. RT-4544KV-04 - Dubbele handgreep
3. RT-4544KV-05 - Handgreepstijl
4. RT-4544KV-06 - Hoofdsteun voor buikligging
5. RT-4544KV-07 - Hoofdsteun voor contourligging
6. Ipsilaterale schaal, laag profiel
 - 8002601 - 40 cm (vervangende schaal)
 - 8002602 - 48 cm (accessoireschaal)
7. 2006813 - AP-2 set pads
8. 8002580 - AP-2 set vulstukken

ONDERDELENLIJST

ACCESS PRONE (RT-4544)

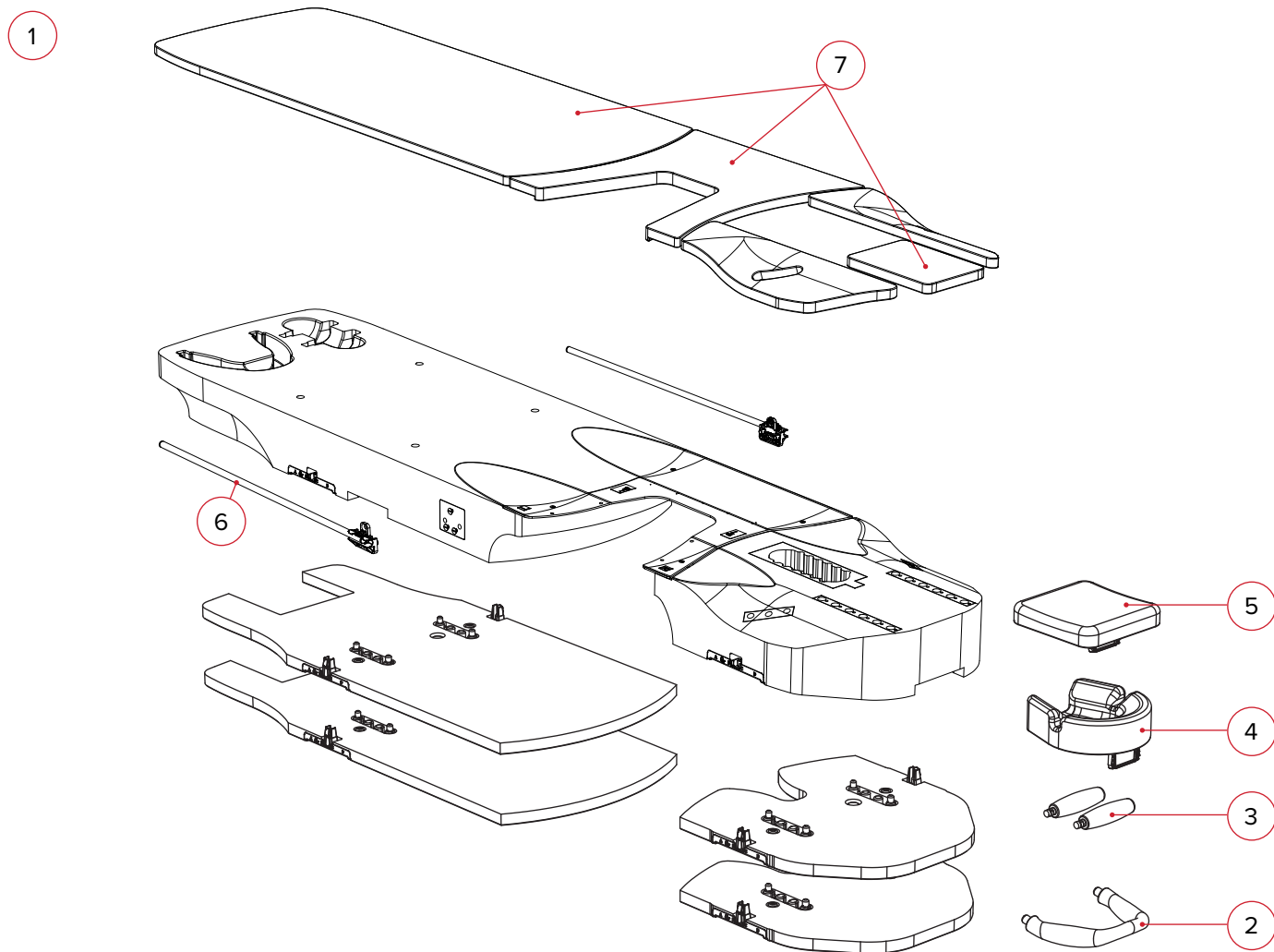

1. RT-4544 - Access™ Prone-pakket
 - 2004257 Access Prone G1 Borstinzetstuk
2. RT-4544KV-04 - Dubbele handgreep
3. RT-4544KV-05 - Handgreepstijl
4. RT-4544KV-06 - Hoofdsteun voor buikligging
5. RT-4544KV-07 - Hoofdsteun voor contourligging
6. 8001846 - Ipsilaterale schaal
7. 8002215 - Access™ Prone set pads



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004428_NL_A
2023-04