

GHIDUL PRODUSULUI ȘI MANUALUL DE UTILIZARE

RT-4544-01 și RT-4544

Dispozitive mamare Access[™] Prone G2 și
Access[™] Prone





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Fabricat în SUA de Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--

Access, Access 360, kVue și OneTouch sunt mărci comerciale ale Qfix.

Exact® este o marcă comercială înregistrată a Varian Medical Systems.

Cidex® este o marcă comercială înregistrată a Johnson & Johnson.

Clorox® este o marcă comercială înregistrată a The Clorox Company.

CUPRINS

MĂSURI DE PRECAUȚIE GENERALE	4
DECLARAȚII DE AVERTIZARE.....	4
AVERTISMENTE SUPLIMENTARE	4
ATENUAREA FASCICULULUI DE TRATAMENT	4
INCIDENTE GRAVE	4
SARCINĂ NOMINALĂ	4
ETICHETE DE AVERTIZARE ȘI DESCRIERI.....	5
DESTINAȚIA DE UTILIZARE	7
CARACTERISTICI.....	8
DESCRIERE	8
COMPONENTELE ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)	9
COMPONENTELE ACCESS PRONE (RT-4544).....	10
COMPONENTE	11
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	12
MONTARE	12
CONFIGURARE.....	14
DEMONTARE.....	22
ÎNTREȚINERE.....	23
CURĂȚAREA SISTEMULUI	23
DEZINFECTAREA SISTEMULUI	23
SPECIFICAȚII.....	24
ACCESS PRONE G2	24
CONFIGURAREA PACIENTULUI.....	25
ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) – SÂN DREPT ȘI STÂNG	25
ACCESS PRONE (RT-4544) – SÂN DREPT ȘI STÂNG.....	27
LISTA COMPONENTELOR	29
ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01).....	29
ACCESS PRONE (RT-4544).....	30

MĂSURI DE PRECAUȚIE GENERALE

DECLARAȚII DE AVERTIZARE

! AVERTISMENT ! NU SE PERMITE NICIO MODIFICARE A ACESTUI ECHIPAMENT. DACĂ ORICARE DINTRE COMPONENTELE ACESTUI DISPOZITIV ESTE SUPUSĂ LA O SARCINĂ EXTREM DE MARE, ESTE DETERIORATĂ SAU FUNCȚIONEAZĂ INADECVAT, ÎNTRERUPEȚI IMEDIAT UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ȘI CONTACTAȚI QFIX LA +1 484-720-6054 SAU LA TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! AVERTISMENT ! SCALELE DE PE DISPOZITIVELE MAMARE ACCESS PRONE ȘI ACCESS PRONE G2 SUNT DOAR PENTRU REFERINȚĂ.

AVERTISMENTE SUPLIMENTARE

- Mânerele duble și mânerul ipsilateral nu sunt concepute pentru a susține greutatea pacientului.
 - NU utilizați mânerul pentru a poziționa pacientul.
 - NU utilizați mânerul pentru urcarea pe dispozitiv sau coborârea de pe acesta.
- Pacienții pot avea nevoie de asistență la urcarea pe dispozitiv și la coborârea de pe acesta.
- Din cauza lungimii dispozitivului, se recomandă ca două persoane să manevreze dispozitivul în timpul instalării și al demontării.
- NU utilizați simultan mai mult de 3 garnituri de reglare CT suprapuse. În caz contrar, dispozitivul poate deveni instabil.
- NU utilizați dispozitivul în consolă.
- Există posibilitatea de rănire prin prinderea între insertul pentru blatul mesei și alte echipamente din zona de tratament. Procedați cu atenție când mutați blatul mesei, pentru a evita vătămarea.

ATENUAREA FASCICULULUI DE TRATAMENT

Regiunile structurale ale dispozitivului pentru blatul mesei kVue Access™ Prone vor atenua un fascicul de fotoni. În cazul echipamentului dvs. specific, trebuie să verificați atenuarea reală, în funcție de configurația disponibilă. Tratamentul prin orice dispozitiv, chiar și prin cel construit din material compozit, duce la o doză crescută la nivelul pielii.

INCIDENTE GRAVE

Raportați toate incidentele grave (de exemplu, incidente care au ca rezultat sau au potențialul de a provoca decesul sau vătămarea gravă) atât către Qfix, cât și către autoritatea competentă din țara dvs.

SARCINĂ NOMINALĂ

NU depășiți sarcina distribuită uniform de 225 kg (500 lb) sau sarcina nominală maximă a bazei mesei, oricare dintre acestea este mai mică.

! NOTĂ ! În combinație cu baza originală a mesei (OEM), sarcina nominală este valoarea mai mică dintre cele două sarcini de lucru în condiții de siguranță. Sarcina blatului mesei kVue NU trebuie să depășească specificațiile producătorului bazei mesei originale. Consultați documentația produsului, pusă la dispoziție de producătorul original.

MĂSURI DE PRECAUȚIE GENERALE


ETICHETE DE AVERTIZARE ȘI DESCRIERI

Pentru o listă a simbolurilor și definițiile aferente acestora, consultați Qfix.com.



SARCINĂ NOMINALĂ

NU depășiți sarcina distribuită uniform de 225 kg (500 lb) sau sarcina maximă sigură de lucru a insertului pentru blatul mesei ori a bazei mesei, oricare este mai mică.

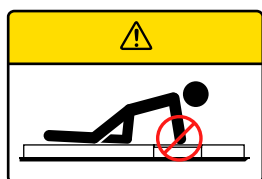

SAU




SARCINĂ INSERT

NU permiteți pacientului să utilizeze insertul ca sprijin când se urcă pe dispozitiv sau coboară de pe acesta. Acest lucru poate cauza rănirea pacientului.



PREZINTĂ SIGURANȚĂ ÎN MEDIUL RM

Un articol care nu prezintă riscuri cunoscute în urma expunerii la orice medii RM. Articolele care prezintă siguranță în mediul RM sunt alcătuite din materiale neconductive electric, nemetalice și nemagnetice.

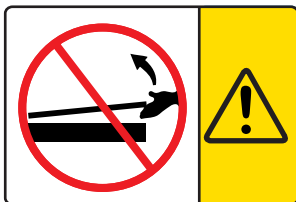

NU RIDICAȚI

! NU RIDICAȚI NICIODATĂ CAPĂTUL INSERTULUI PENTRU BLATUL MESEI !

Există riscul ca știfturile de îmbinare să se îndoaie sau să se rupă, blatul mesei devenind astfel inutilizabil.

MĂSURI DE PRECAUȚIE GENERALE


ETICHETE DE AVERTIZARE ȘI DESCRIERI



NU VĂ AȘEZAȚI


Zona de dincolo de decupajul pentru sâni a fost stabilită și testată ca fiind potrivită pentru susținerea părții superioare a trunchiului pacientului; aceasta NU a fost proiectată pentru a susține întreaga greutate a pacientului.

Staționarea sau așezarea pe Access Prone G2 sau Access Prone dincolo de decupajul pentru sâni poate deteriora dispozitivul sau poate cauza vătămări corporale.

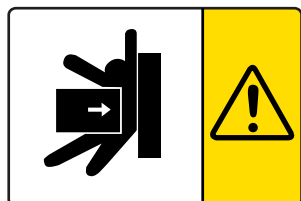

PERICOL DE RĂNIRE

Există posibilitatea de rănire prin prinderea între Access Prone G2 sau Access Prone și alte echipamente din zona de tratament. Procedați cu atenție când mutați Access Prone, pentru a evita vătămarea.

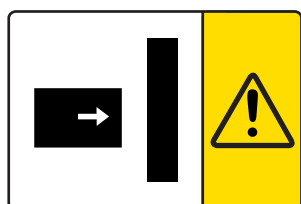

COLIZIUNE CU GANTRY-UL

Gama variată de mișcări care pot fi obținute cu ajutorul bazelor de masă și a capetelor de tratament poate duce la situații în care insertul pentru blatul mesei poate intra în coliziune cu alte obiecte, inclusiv cu gantry-ul. Procedați cu atenție când mutați masa sau gantry-ul, pentru a evita deteriorarea echipamentului sau vătămarea pacientului.

DESTINAȚIA DE UTILIZARE

Acest dispozitiv este destinat imobilizării, poziționării și repoziționării pacienților care sunt supuși radioterapiei.

! NOTĂ ! Legislația federală din Statele Unite impune ca vânzarea acestui dispozitiv să se efectueze numai de către sau la recomandarea unui medic.

GRUPURI ȚINTĂ DE PACIENȚI

Pacienții supuși radioterapiei sau procedurilor de diagnosticare prin imagistică.

UTILIZATORI ȚINTĂ

Utilizatorul țintă pentru produse este o persoană calificată în conformitate cu cerințele regiunii de reglementare.

CARACTERISTICI

DESCRIERE


Access Prone G2 și Access Prone sunt concepute pentru a permite tratamentul cancerului de sân atât pentru sânul stâng, cât și pentru cel drept. Plasarea pacientului în decubit ventral ajută la accentuarea separării sânelor de organele critice expuse riscului.

Access Prone G2 (RT-4544-01) poate fi utilizat ca dispozitiv de simulare CT/RM pentru Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10).

! ATENȚIE ! ACCESS PRONE (RT-4544) NU POATE FI UTILIZAT CA DISPOZITIV DE SIMULARE PENTRU NICIUN PRODUS, ALTUL DECÂT EL ÎNSUȘI SAU ALTE DISPOZITIVE ACCESS PRONE (RT-4544).


CARACTERISTICI

COMPONENTELE ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)

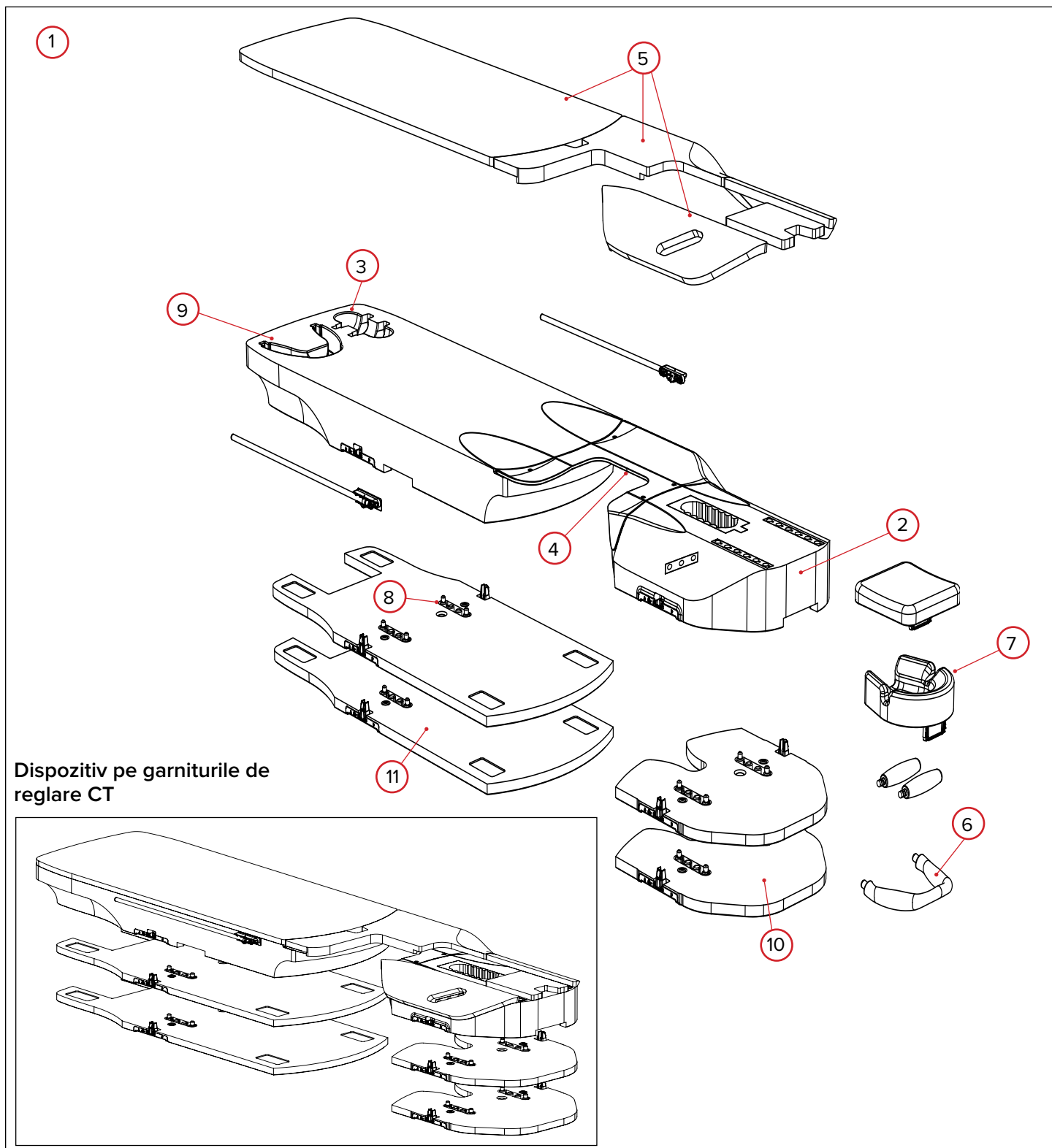

CARACTERISTICI

COMPONENTELE ACCESS PRONE (RT-4544)

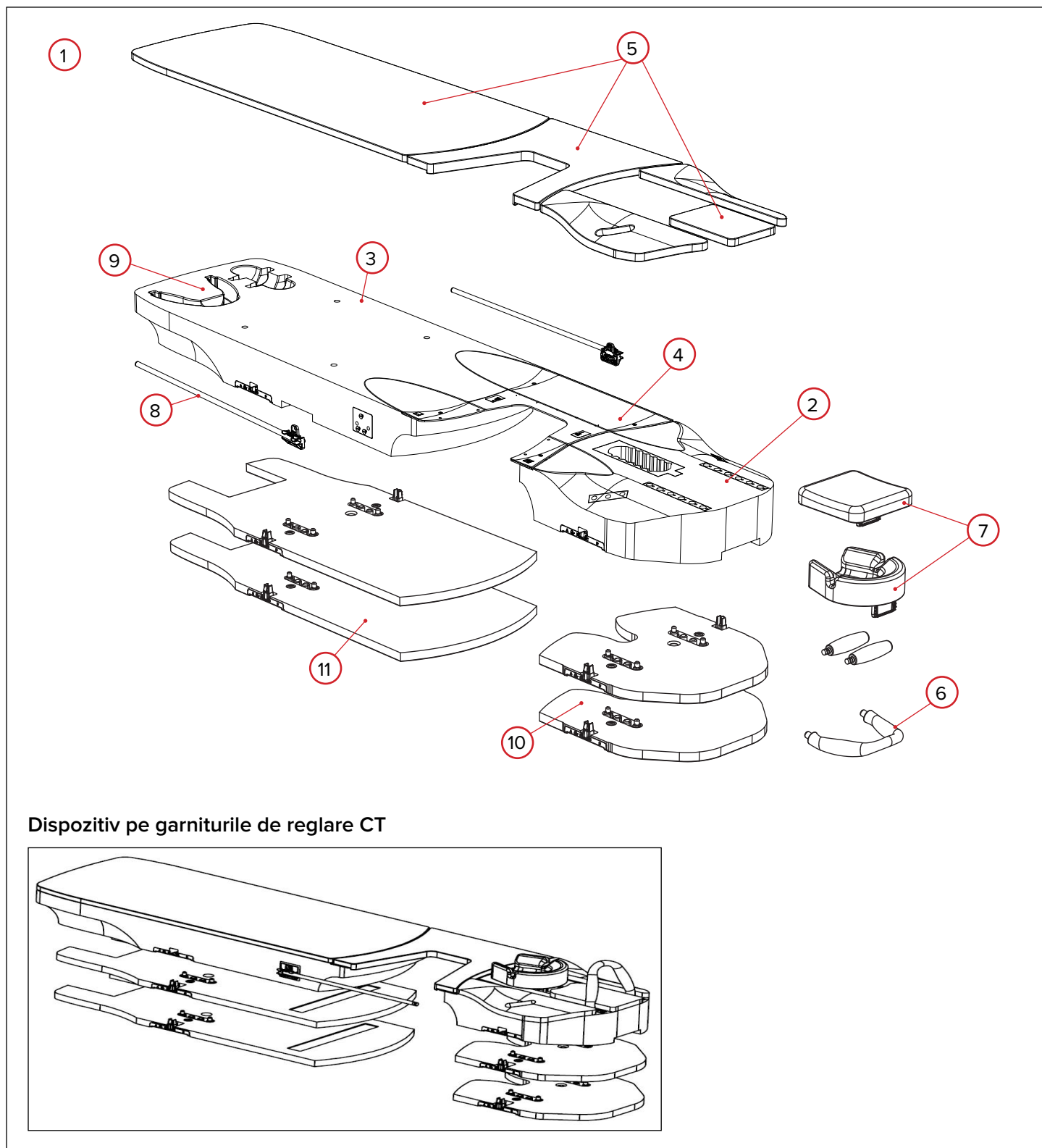

CARACTERISTICI

COMPONENTE

1. DISPOZITIVE MAMARE ACCESS PRONE G2 ȘI ACCESS PRONE

Access Prone G2 și Access Prone sunt utilizate pentru a ajuta la poziționarea și configurarea pacienților supuși radioterapiei în regiunea sânilor și a claviculei, în decubit ventral.

2. COMPONENTĂ PENTRU BRAȚ ȘI CAP

3. COMPONENTĂ PENTRU PICIOARE

4. INSERT

Insertul median reversibil permite configurarea rapidă a dispozitivului pentru tratamentul sânelui stâng sau drept.

5. PERNE

Pernele sunt pentru confortul pacientului, dar pot fi îndepărtate și pot fi utilizate perne cu vid. Aceste perne oferă, de asemenea, grafică suplimentară de poziționare a pacientului.

6. MÂNER DUBLU

Mânerul dublu este conceput ergonomic pentru a reduce presiunea pe încheietura pacientului, fiind diferit de suportul standard folosit la alte dispozitive.

7. SUPORTURI PENTRU CAP

Sistemul este livrat cu suport pentru cap pentru decubit ventral și pentru contur. Oricare dintre acestea poate fi utilizat în funcție de preferințele de configurare. Acestea pot fi indexate la Access Prone în mai multe locații, în funcție de înălțimea pacientului.

8. SCALĂ IPSILATERALĂ

Scala ipsilaterală se balansează și se fixează în partea superioară pentru configurare și se balansează înapoi în partea inferioară pentru tratament și depozitare. Scala poate fi utilizată ca element ajutător pentru aliniere. Precizia este de ± 1 mm. Există o scală pe ambele părți ale dispozitivului, pentru tratamentul sânelui stâng sau drept.

9. DEPOZITARE

Compartimente interne pentru accesorii de mâner, pentru depozitare comodă.

10. GARNITURĂ DE REGLARE CT PENTRU COMPONENTA PENTRU BRAȚ ȘI CAP

Garnitura de reglare CT se indexează la o bară de localizare și ridică componenta pentru braț și cap în trepte de 2,5 mm. Această garnitură se poate fixa pe o altă garnitură de reglare CT pentru componenta pentru braț și cap.

11. GARNITURĂ DE REGLARE CT PENTRU COMPONENTA PENTRU PICIOARE

Garnitura de reglare CT se indexează la o bară de localizare și ridică componenta pentru picioare în trepte de 2,5 mm. Garnitura se poate fixa pe o altă garnitură de reglare CT pentru componenta pentru picioare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MONTARE

BARĂ DE LOCALIZARE

1. Bara de localizare are două știfturi de localizare care corespund majorității accesoriilor standard de poziționare. Pentru montare, poziționați unul dintre capetele barei de localizare în canelurile de indexare Varian Exact® compatibile și fixați-o. Pentru demontare sau repositionare, trageți în sus de unul din capetele barei.

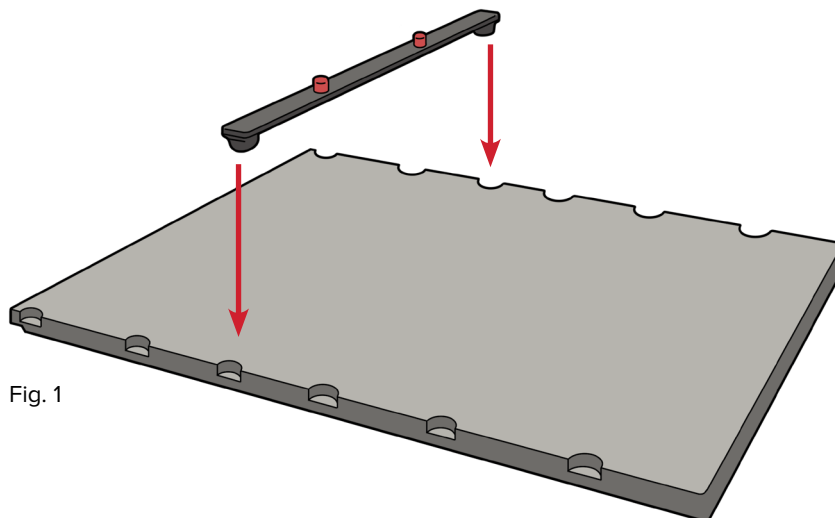


Fig. 1

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MONTARE

BARĂ DE LOCALIZARE

2. Introduceți capetele a 2 bare de localizare în canelurile de indexare compatibile Varian Exact® cu stratul de acoperire CT de 1260 mm (în mod tipic 9 caneluri de indexare), apoi fixați barele de localizare în poziție (Fig. 2 și 3).

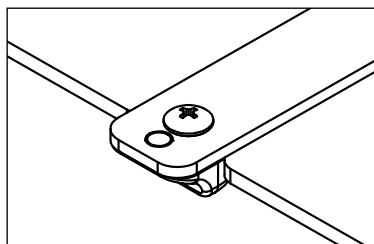


Fig. 2

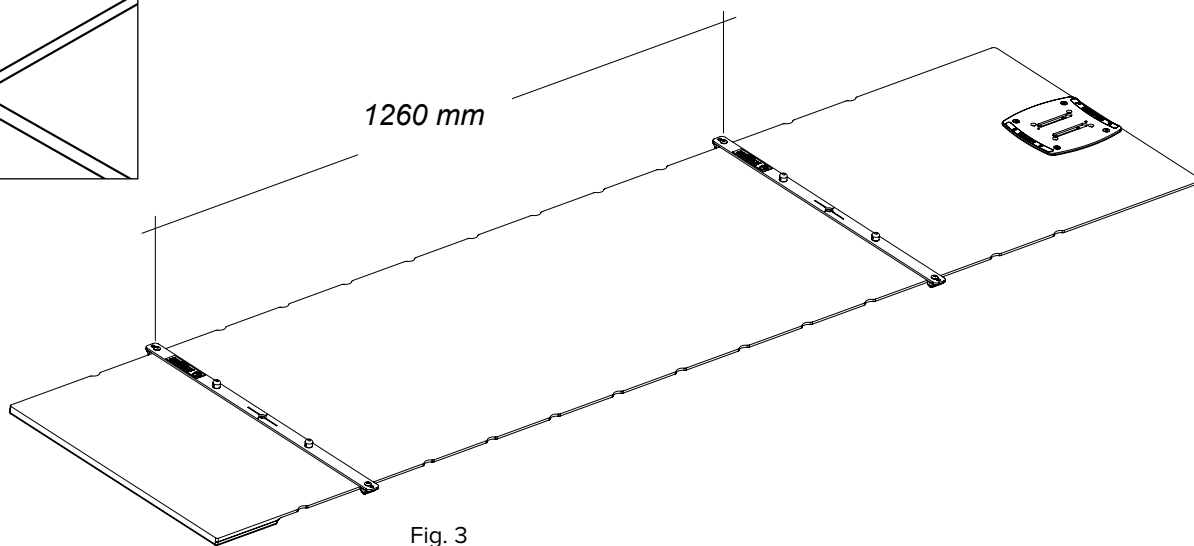


Fig. 3

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CONFIGURARE

ATAȘAREA COMPONENTEI PENTRU BRAȚ ȘI CAP ȘI A COMPONENTEI PENTRU PICIOARE LA STRATUL DE ACOPERIRE

Poziționați componenta pentru braț și cap și componenta pentru picioare de la Access Prone G2 și Access Prone pe stratul de acoperire CT, indexându-le la barele de localizare. Asigurați-vă că ați indexat componentele Access Prone G2 și Access Prone folosind aceleași locații, atât pe componentele pentru cap, cât și pe cele pentru picioare (Fig. 4, 5 și 6).



Fig. 4

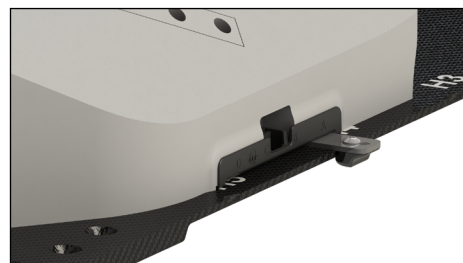


Fig. 5

ATAȘAREA INSERTULUI LA COMPONENTA PENTRU BRAȚ ȘI CAP ȘI LA CEA PENTRU PICIOARE

Atașați insertul la componenta pentru braț și cap și la cea pentru picioare utilizând știfturile de localizare de pe partea inferioară a insertului (Fig. 6). Acest insert poate fi rotit pentru tratarea fiecărei părți.



Fig. 6

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CONFIGURARE

VERIFICAREA VIZUALĂ A ALINIERII

Verificați vizual dacă componentele Access™ Prone sunt centrate corect pe stratul de acoperire (Fig. 7).

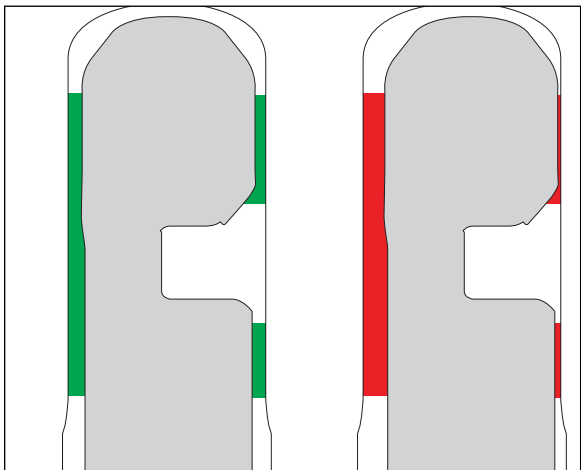


Fig. 7

GARNITURI DE REGLARE CT

1. Pentru a instala garniturile de reglare CT, mai întâi îndepărtați Access Prone.
2. Amplasați garniturile de reglare CT în același punct de indexare ca la componentele pentru picioare și cap. Garniturile de reglare CT pot fi suprapuse unele pe altele pentru a mări înălțimea în trepte de 2,5 cm (Fig. 8).

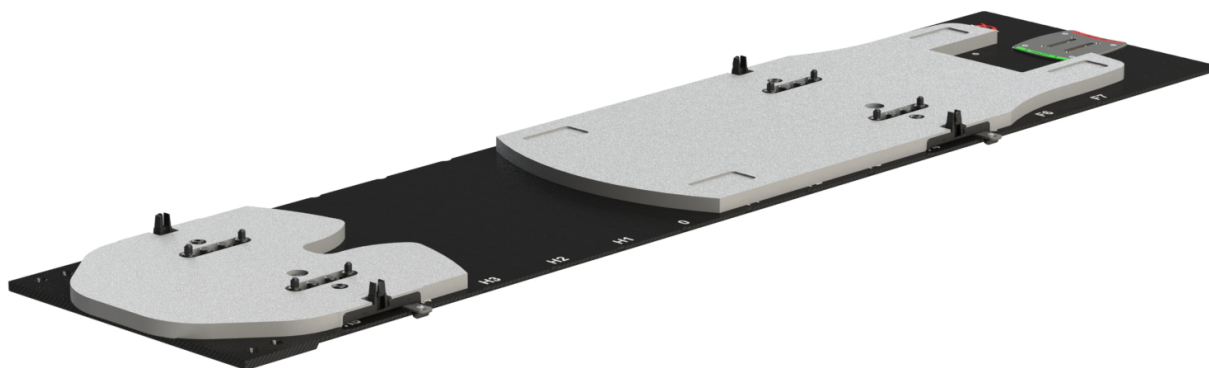


Fig. 8

! ATENȚIE ! NU UTILIZAȚI SIMULTAN MAI MULT DE 3 GARNITURI DE REGLARE CT SUPRAPUSE. ÎN CAZ CONTRAR, DISPOSITIVUL POATE DEVENI INSTABIL.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CONFIGURARE

GARNITURI DE REGLARE CT, continuare

3. Așezați Access Prone G2 sau Access Prone pe garniturile de reglare CT (Fig. 9).

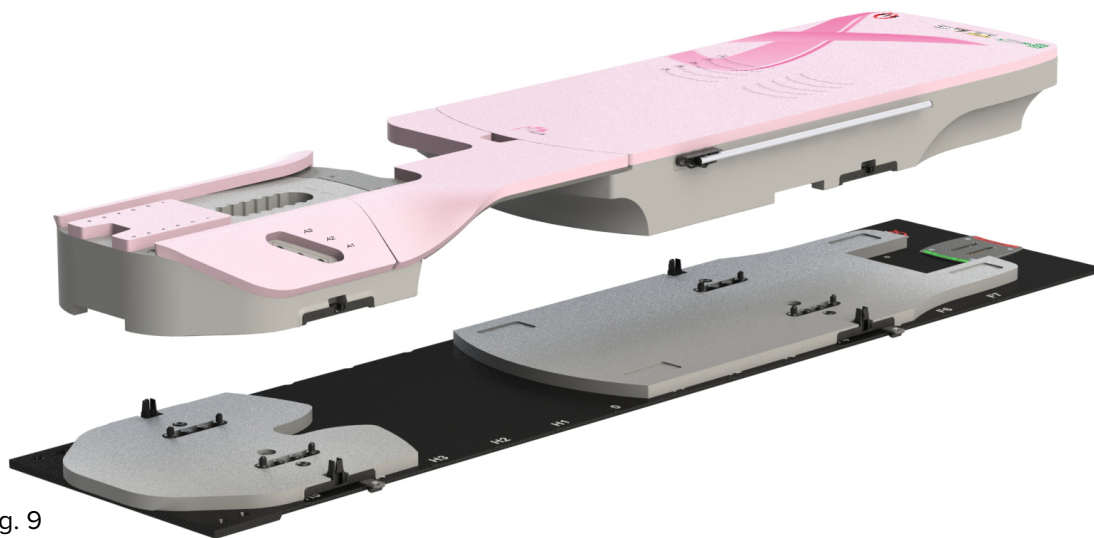


Fig. 9

4. Pentru a reduce înălțimea dispozitivului, îndepărtați dispozitivul mamar Access Prone G2 sau Access Prone. Apăsăți butonul de eliberare de pe fiecare parte a plăcii de indexare (Fig. 10).



Fig. 10

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CONFIGURARE

SUPORTUL PENTRU CAP

1. Alegeți fie suportul pentru cap pentru pacient în decubit ventral, fie suportul pentru cap pentru contur.
2. Introduceți piesa de aliniere din plastic în fanta corespunzătoare, la capătul superior al dispozitivului (Fig. 11).

! NOTĂ ! Suporturile pentru cap pot fi instalate înainte de așezarea pacientului pe dispozitiv, dar este posibil să fie necesară re poziționarea după ce pacientul este așezat.

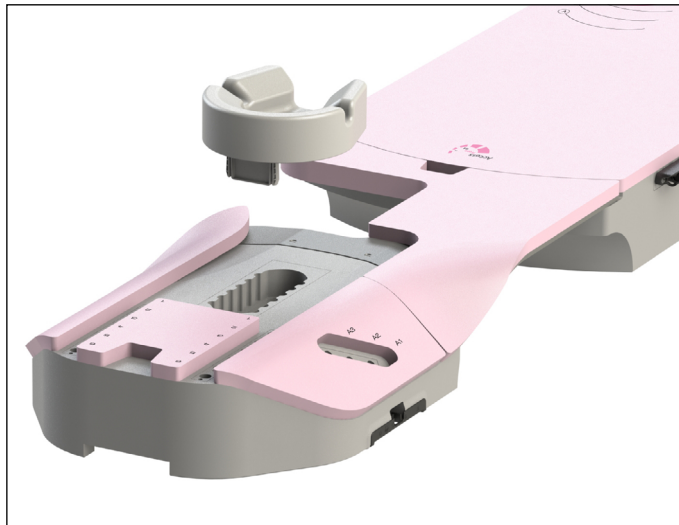


Fig. 11

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CONFIGURARE

POZIȚIONAREA PACIENTULUI

! NOTĂ ! Pacienții pot avea nevoie de asistență la urcarea pe dispozitiv și la coborârea de pe acesta. Instrucțiunile de mai jos reprezintă tehnica sugerată de noi, dar aceasta poate varia pentru fiecare clinică.

CUM SE URCĂ PE ACCESS PRONE G2 SAU ACCESS PRONE ȘI SE COBOARĂ DE PE ACESTA

1. Coborâți masa sau utilizați un scăunel pentru a ajuta pacientul să se urce pe insert.
2. După ce pacientul se află pe insert, aliniați-i genunchii cu marcasele corespunzătoare de pe spumă (Fig. 12).
3. Rugați pacientul să-și folosească mâinile sau coatele pentru a-și mișca partea superioară a corpului în poziție (Fig. 13).
4. Rugați pacientul să coboare încet în poziție.
5. Odată aflat în poziție, așezați capul pacientului în suportul pentru cap și cereți-i să apuce mânerul corespunzător (Fig. 14).

! ATENȚIE ! MÂNERUL DUBLU ȘI MÂNERUL IPSILATERAL NU SUNT CONCEPTE PENTRU A SUSȚINE GREUTĂȚEA PACIENTULUI:

- **NU utilizați mânerul pentru a poziționa pacientul.**
- **NU utilizați mânerul pentru urcarea pe dispozitiv sau coborârea de pe acesta.**

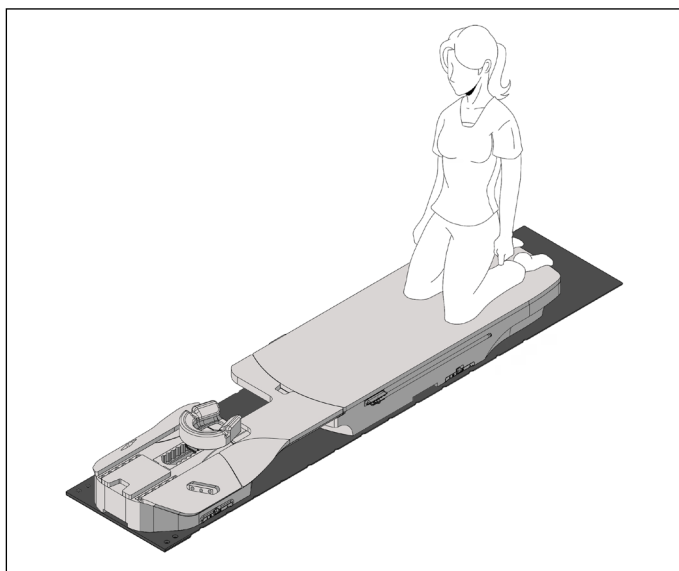


Fig. 12

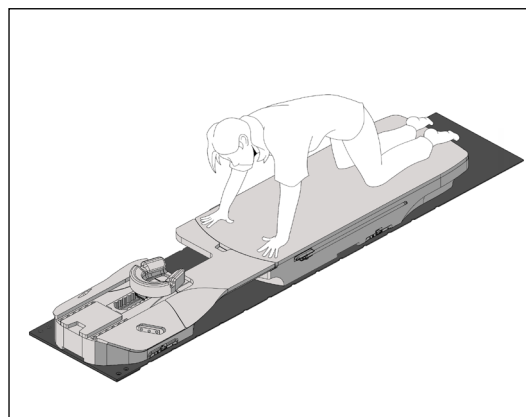


Fig. 13

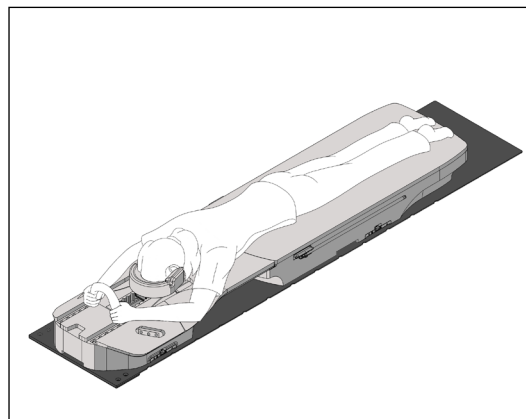


Fig. 14

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CONFIGURARE

MÂNER DUBLU

! ATENȚIE ! MÂNERUL DUBLU ȘI MÂNERUL IPSILATERAL NU SUNT CONCEPTE PENTRU A SUSȚINE GREUTATEA UNUI PACIENT:

- **NU utilizați mânerele pentru a poziționa pacientul.**
- **NU utilizați mânerele pentru urcarea pe dispozitiv sau coborârea de pe acesta.**

1. Aliniați capetele mânerului cu orificiile corespunzătoare din capătul superior al insertului.
2. Împingeți în jos mânerul până când se fixează în orificii (Fig. 15).

! NOTĂ ! Mânerul trebuie să fie arcuit înapoi spre pacient, așa cum se arată în imaginea de mai jos (Fig. 16).

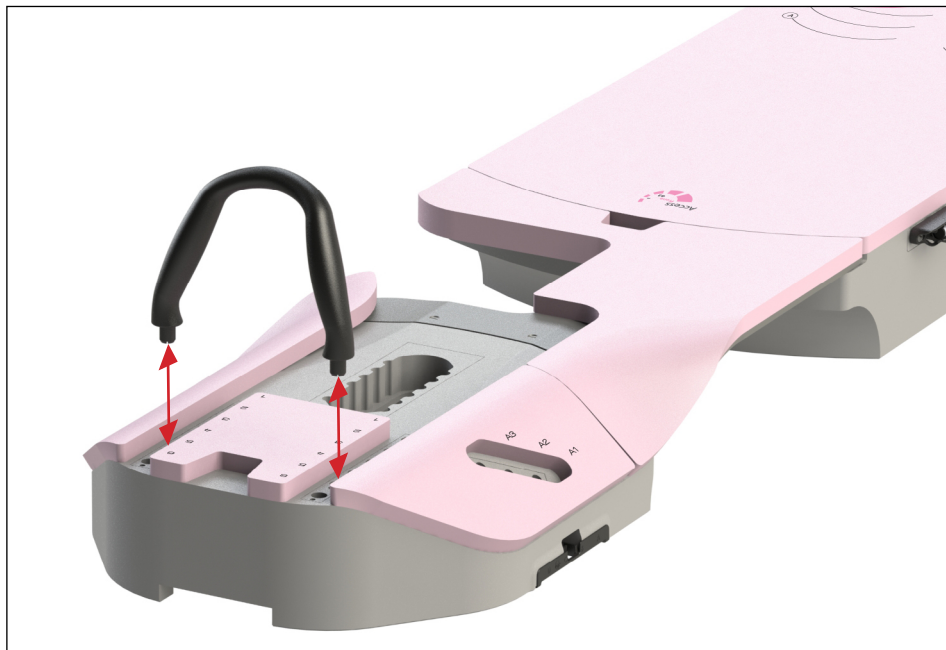


Fig. 15

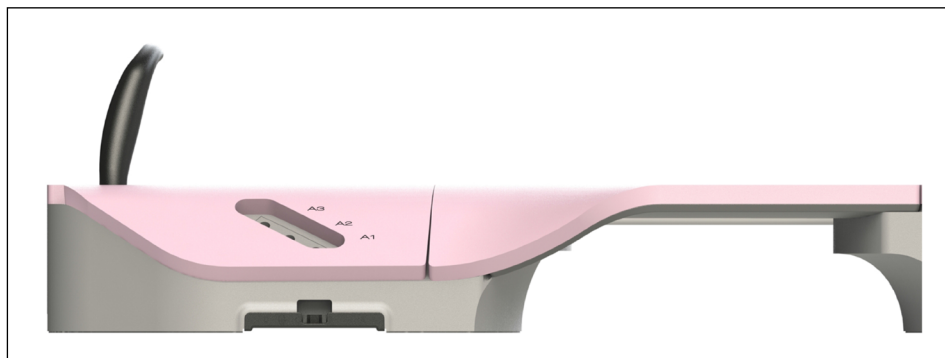


Fig. 16

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CONFIGURARE

MÂNER IPSILATERAL

1. Introduceți mânerul în orificiul corespunzător din capătul superior al insertului (Fig. 17).
2. Rotiți mânerul în orice direcție până când acesta se strânge în orificiu și se blochează în poziție (Fig. 17).



Fig. 17

DEPOZITARE

Mânerul dublu și mânerele ipsilaterale pot fi depozitate în zona de depozitare aflată la capătul de jos al componentei pentru picioare (Fig. 18).



Fig. 18

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CONFIGURARE

SCALĂ IPSILATERALĂ

**! ATENȚIE ! SCALA IPSILATERALĂ NU ESTE CONCEPUTĂ PENTRU A SUSȚINE GREUTATEA UNUI PACIENT.
! ATENȚIE ! NU UTILIZAȚI MÂNERELE PENTRU URCAREA PE DISPOZITIV SAU COBORÂREA DE PE ACESTA.**

1. Aliniați pacientul.
2. După ce pacientul este în poziție, balansați scala ipsilaterală în partea superioară până când se fixează în poziție (Fig. 19).

! NOTĂ ! Scalele sunt prezente ca ajutor pentru aliniere; este responsabilitatea utilizatorului să confirme poziția pacientului.

! NOTĂ ! Precizia scalelor este testată la ± 1 mm

3. Balansați scala ipsilaterală în jos, în poziția de depozitare, înainte de tratament și/sau depozitare (Fig. 19).

Fig. 19



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

DEMONTARE

MÂNER IPSILATERAL

Rotiți în direcția opusă montării până când mânerul se desface, apoi trageți drept în afară. Mânerul ipsilateral poate fi depozitat la baza componentei pentru picioare, sub pernă.

MÂNER DUBLU

Trageți în sus mânerul până când iese din orificii. Mânerul dublu poate fi depozitat la baza componentei pentru picioare, sub pernă.

PACIENT

Urmați instrucțiunile de poziționare în ordine inversă.

! NOTĂ ! Pacienții pot avea nevoie de asistență la urcarea pe dispozitiv și la coborârea de pe acesta.

INSERT PENTRU SÂN

Trageți insertul pentru sân în sus, în partea opusă componentelor pentru cap și picioare.

SUPORTUL PENTRU CAP

Trageți suportul pentru cap în sus, îndepărtându-l de insert.

COMPONENTA PENTRU BRAȚ ȘI CAP ȘI COMPONENTA PENTRU PICIOARE

Ridicați componenta pentru braț și cap și cea pentru picioare în sus, îndepărtându-le de stratul de acoperire. Dacă este necesar, garniturile de reglare pot fi dezamblate de la componenta pentru braț și cap și de la cea pentru picioare prin apăsarea butoanelor de eliberare de pe fiecare parte a plăcilor de indexare albastre.

DEMONTAREA BAREI DE LOCALIZARE

Trageți în sus de unul dintre capetele barei de localizare.

ÎNTREȚINERE

CURĂȚAREA SISTEMULUI

Dispozitivul poate fi curățat cu o soluție de curățare sau dezinfectare cu concentrație redusă, neabrazivă. Nu pulverizați și nu turnați lichide pe suprafață, deoarece acestea se pot scurge în încuietoarea OneTouch™ sau în mecanismele din interiorul dispozitivului. Pentru curățare, aplicați soluția pe o lavetă curată și ștergeți suprafața.

DEZINFECTAREA SISTEMULUI

Au fost testate materialele de curățare următoare și s-a constatat că acestea sunt adecvate pentru curățarea suprafețelor Access Prone G2, ale Access Prone și ale insertului pentru blatul mesei. Pentru a dezinfecta suprafața blatului mesei, consultați instrucțiunile specifice ale producătorului agentului de curățare.

- Apă
- O soluție Clorox® de înălbire, cu concentrație 10%
- Alcool izopropilic
- Soluție Cidex® de dialdehidă activată, cu concentrație 2,4%
- Apă și săpun


NU pulverizați direct pe Access Prone G2, Access Prone sau pe insertul pentru blatul mesei și nu permiteți scurgerea în cadrul bazei.

NU așezați obiecte ascuțite pe Access Prone G2, pe Access Prone sau pe insertul pentru blatul mesei.

SPECIFICAȚII

ACCESS PRONE G2

Limită de greutate: 225 kg (500 lb) sarcină distribuită uniform

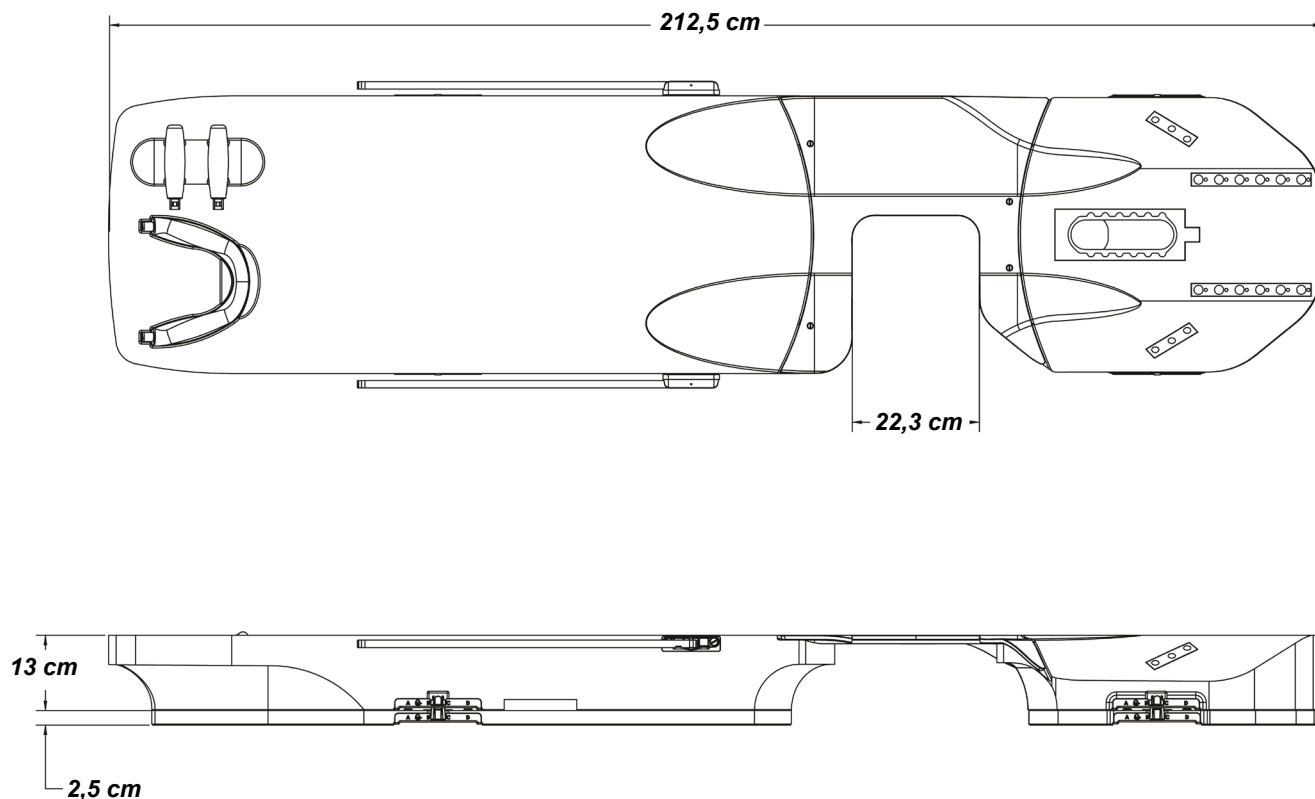

CONFIGURAREA PACIENTULUI

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) – SÂN DREPT ȘI STÂNG

Numele pacientului:


Numărul de identificare al pacientului:

Configurare realizată de:

Medic:

Data:

Comentarii:

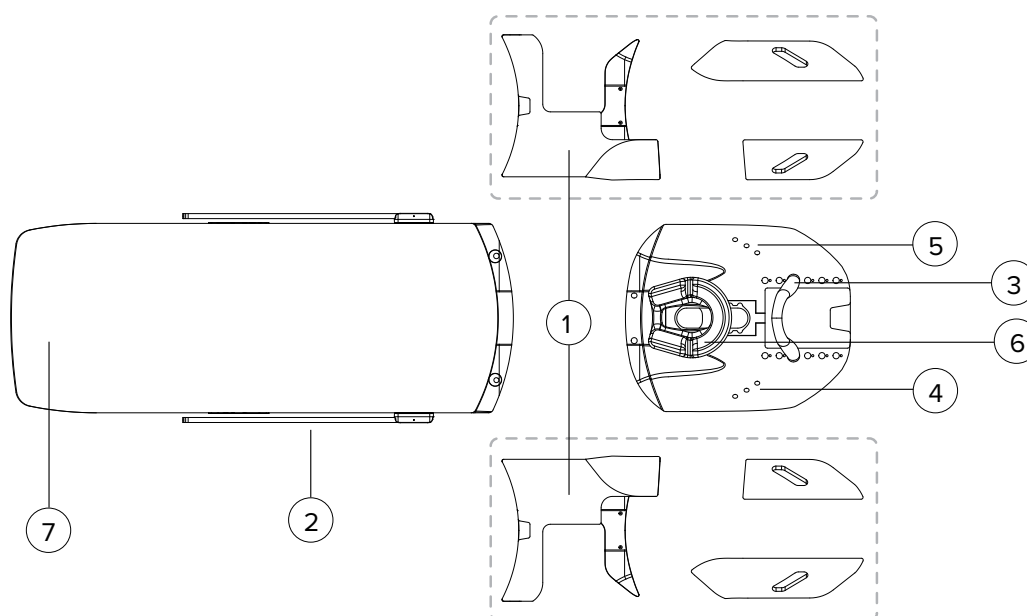

1. Insert: **Stânga** **Dreapta**

2. Scală ipsilaterală:

3. Poziția mânerului dublu (selecțați un răspuns): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **Nu se aplică**

4. Mâner, *dreapta pacientului* (selecțați un răspuns): **A1** **A2** **A3** **Nu se aplică**

5. Mâner, *stânga pacientului* (selecțați un răspuns): **A1** **A2** **A3** **Nu se aplică**

6. Suport pentru cap utilizat: **Niciunul** **Decubit ventral** **Contur**
Locație (selecțați un răspuns): **A** **B** **C** **D** **E** **F**


7. Locație genunchi (selecțați un răspuns): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Observații:

(Continuare pe verso)

CONFIGURAREA PACIENTULUI

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) (CONTINUARE)

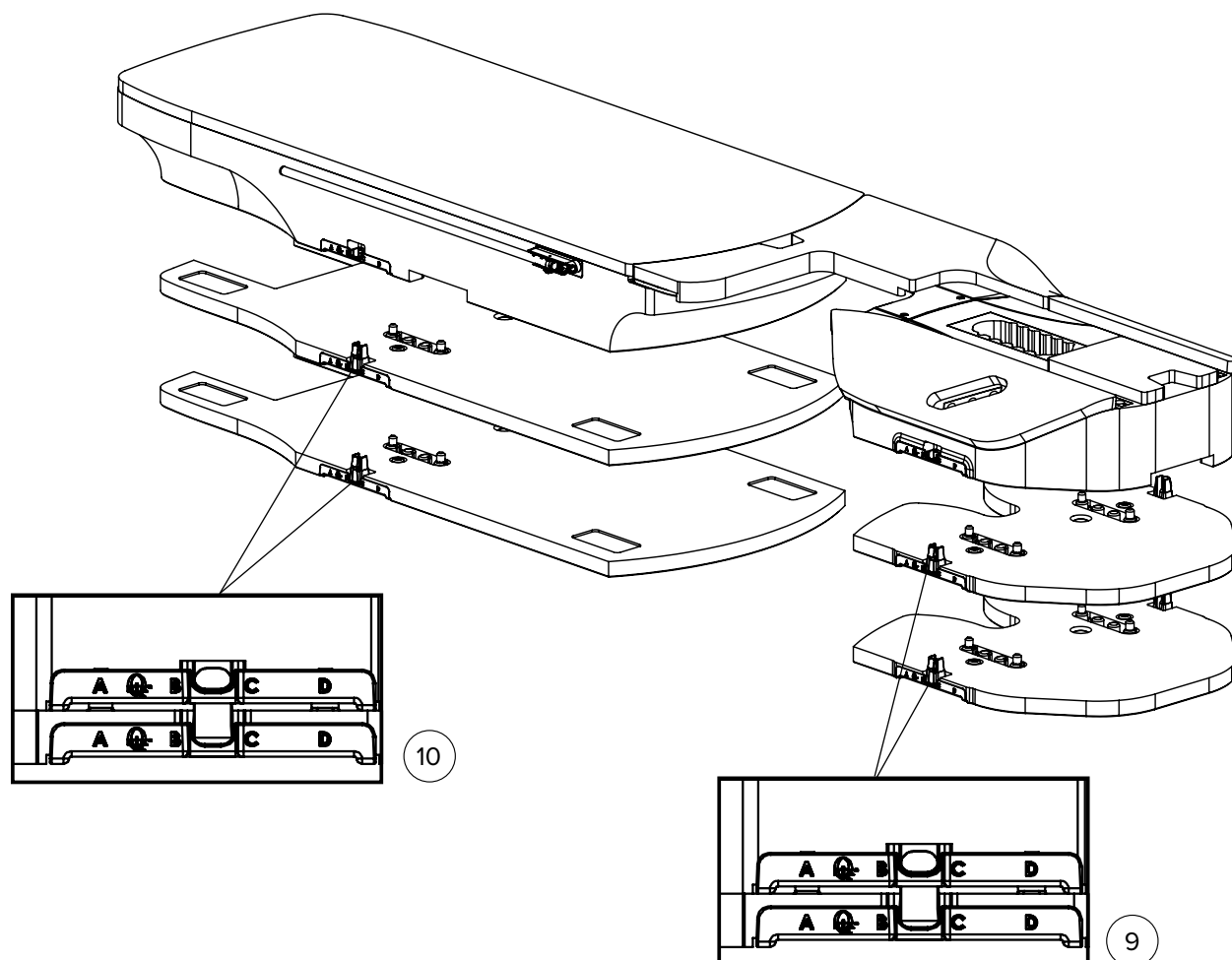

Sisteme de ridicare și garnituri de reglare CT

8. Câte seturi de garnituri de reglare pentru sistemul de ridicare CT sunt utilizate (selecționați un răspuns):
0 1 2

9. Sistem de ridicare CT superior – locație pe bara de localizare **A B C D**

- Locația barei de localizare pe blatul mesei:

10. Sistem de ridicare CT inferior – locație pe bara de localizare **A B C D**

- Locația barei de localizare pe blatul mesei:

Observații:

CONFIGURAREA PACIENTULUI

ACCESS PRONE (RT-4544) – SÂN DREPT ȘI STÂNG

Numele pacientului:


Numărul de identificare al pacientului:

Configurare realizată de:

Medic:

Data:

Comentarii:

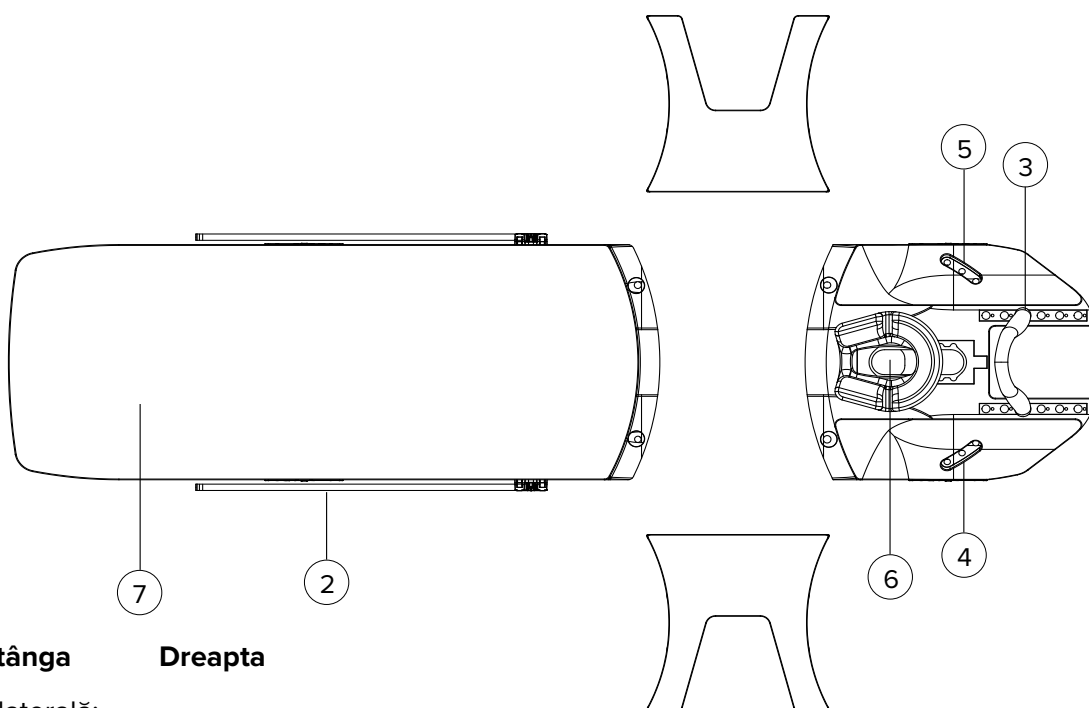

1. Insert: **Stânga** **Dreapta**

2. Scală ipsilaterală:

3. Poziția mânerului dublu (selecți un răspuns): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **Nu se aplică**

4. Mâner, *dreapta pacientului* (selecți un răspuns): **A1** **A2** **A3** **Nu se aplică**

5. Mâner, *stânga pacientului* (selecți un răspuns): **A1** **A2** **A3** **Nu se aplică**

6. Suport pentru cap utilizat: **Niciunul** **Decubit ventral** **Contur**
Locație (selecți un răspuns): **A** **B** **C** **D** **E** **F**


7. Locație genunchi (selecți un răspuns): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Observații:

(Continuare pe verso)

CONFIGURAREA PACIENTULUI

ACCESS PRONE (RT-4544) (CONTINUARE)

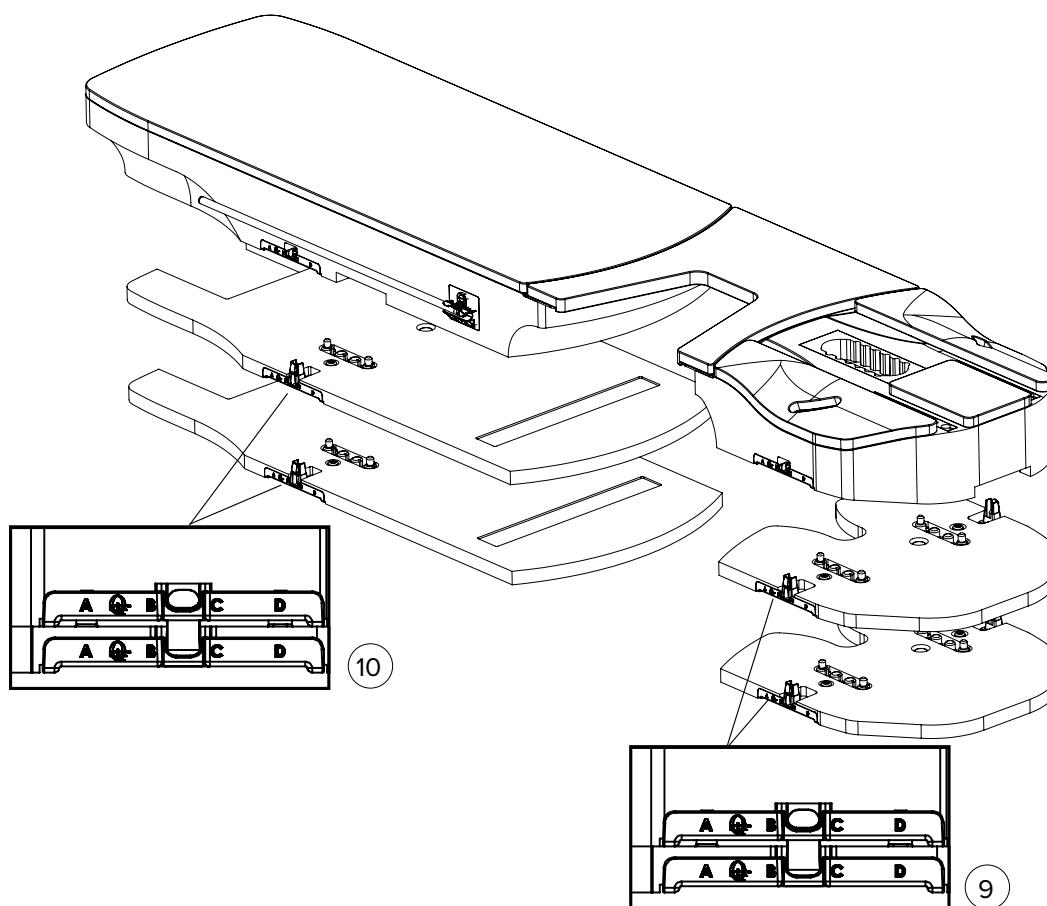

Sisteme de ridicare și garnituri de reglare CT

8. Câte seturi de garnituri de reglare pentru sistemul de ridicare CT sunt utilizate (selecționați un răspuns):
0 1 2

9. Sistem de ridicare CT superior – locație pe bara de localizare **A B C D**

- Locația barei de localizare pe blatul mesei:


10. Sistem de ridicare CT inferior – locație pe bara de localizare **A B C D**

- Locația barei de localizare pe blatul mesei:

Observații:

LISTA COMPONENTELOR


ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)

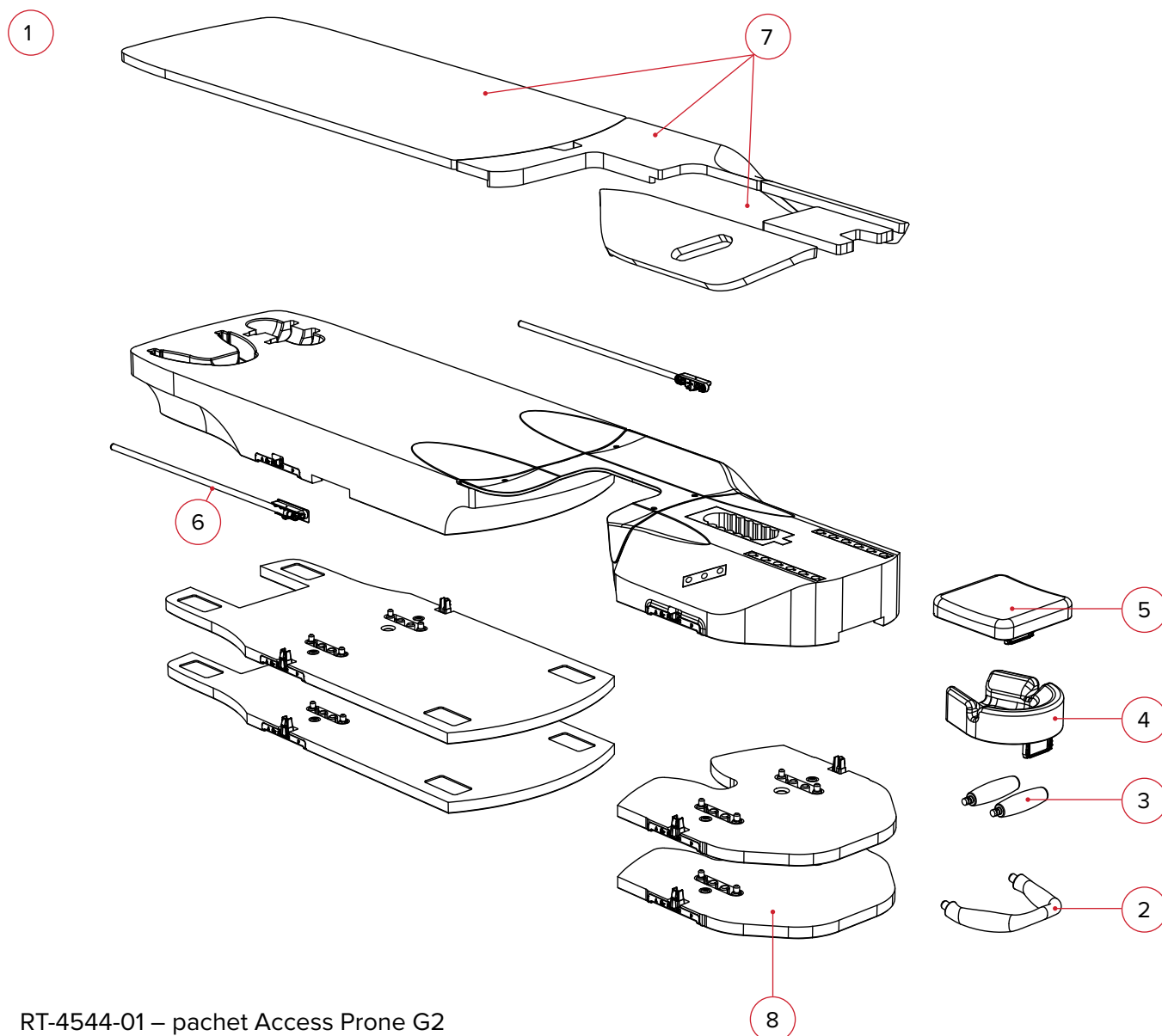

1. RT-4544-01 – pachet Access Prone G2
 - 2005408 ansamblu insert dreapta Access Prone G2
 - 2005424 ansamblu insert stânga Access Prone G2
2. RT-4544KV-04 – mâner dublu
3. RT-4544KV-05 – tijă pentru apucare cu mâna
4. RT-4544KV-06 – suport pentru cap pentru pacient în decubit ventral
5. RT-4544KV-07 – suport pentru cap pentru contur
6. Scală ipsilaterală, profil inferior
 - 8002601 – 40 cm (scală de schimb)
 - 8002602 – 48 cm (scală pentru accesorii)
7. 2006813 – set de perne AP-2
8. 8002580 – set de garnituri de reglare AP-2

LISTA COMPONENTELOR

ACCESS PRONE (RT-4544)

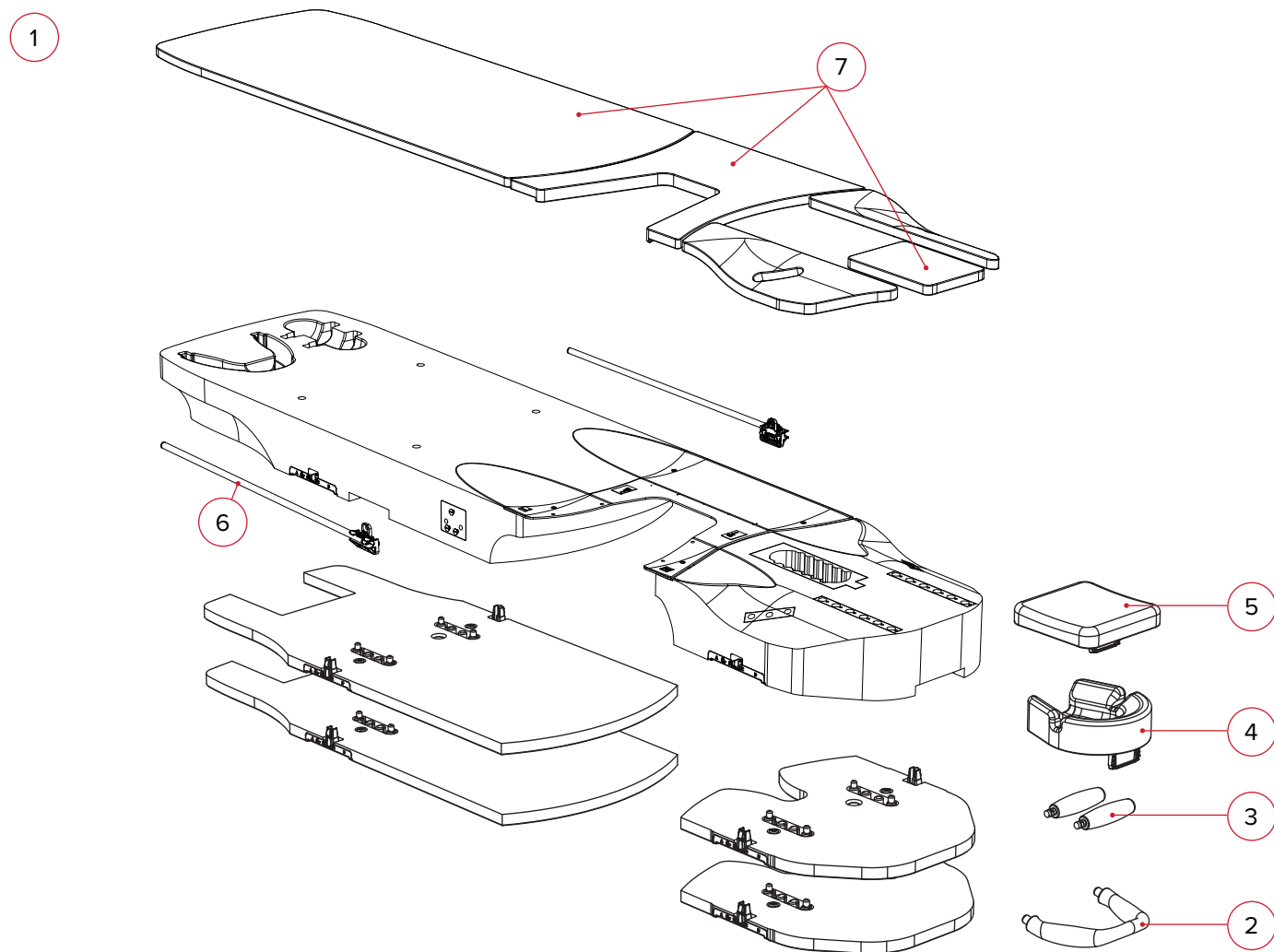

1. RT-4544 – pachet Access™ Prone
 - 2004257 ansamblu insert pentru sân Access Prone G1
2. RT-4544KV-04 – mâner dublu
3. RT-4544KV-05 – tijă pentru apucare cu mâna
4. RT-4544KV-06 – suport pentru cap pentru pacient în decubit ventral
5. RT-4544KV-07 – suport pentru cap pentru contur
6. 8001846 – scală ipsilaterală
7. 8002215 – set de perne Access™ Prone



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004428_RO_A
2023-04