

SPRIEVODCA PRODUKTOM A NÁVOD NA POUŽITIE

RT-4544-01 a RT-4544

Zariadenia Access™ Prone G2 a
Access™ Prone pre prsník



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Access, Access 360, kVue a OneTouch sú ochranné známky spoločnosti Qfix.

Exact® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Varian Medical Systems.

Cidex® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Johnson & Johnson.

Clorox® je registrovaná ochranná známka spoločnosti The Clorox Company.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

! VÝSTRAHA! AKÉKOL'VEK ÚPRAVY TOHTO POMÔCKY SÚ ZAKÁZANÉ. AK BUDE AKÁKOL'VEK ČASŤ TEJTO POMÔCKY NADMERNE ZAŤAŽENÁ, BUDE SA JAVIŤ AKO POŠKODENÁ ALEBO NEBUDE SPRÁVNE FUNGOVAŤ, IHNEĎ JU PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ A KONTAKTUJTE SPOLOČNOSŤ CQ MEDICAL NA ČÍSLE +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 ALEBO NA ADRESE SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

! VÝSTRAHA ! MIERKY NA ZARIADENIACH ACCESS PRONE A ACCESS PRONE G2 PRE PRSNÍK SLÚŽIA IBA NA REFERENČNÉ ÚČELY.

DODATOČNÉ VAROVANIA

- Dvojité ručné držadlá a ipsilaterálne ručné držadlá a nie sú určené na podporu hmotnosti pacienta
 - Na polohovanie pacienta NEPOUŽÍVAJTE ručné držadlá
 - Pri ukladaní pacienta na pomôcku alebo schádzaní z nej NEPOUŽÍVAJTE ručné držadlá
- Pacienti môžu potrebovať pomoc s ukladaním sa na pomôcku a schádzaním z nej
- Vzhľadom na dĺžku pomôcky sa odporúča, aby počas inštalácie a demontáže manipulovali s pomôckou dve osoby
- Naraz NEPOUŽÍVAJTE viac ako 3 na seba položené medzikusy na vyšetrenie CT. V prípade ich použitia môže byť pomôcka nestabilná
- Pomôcku NEPODOPIERAJTE konzolou
- Medzi vložkou uloženou na povrchu ležadla a inou pomôckou v ožarovacej miestnosti môže dôjsť k zraneniu. Pri presúvaní vložky na povrchu ležadla postupujte opatrne, aby ste sa vyhli poraneniam.

ZOSLABENIE OŽAROVACIEHO ZVÄZKU

Štrukturálne oblasti pomôcky kVue Access™ Prone určenej na polozenie na ležadlo utlmia fotónový lúč. Vlastné oslabenie založené na nastavení je nutné overiť pre tú pomôcku, ktorú používate. Ožarovanie vykonávané cez akúkoľvek pomôcku hoci aj vyrobenú z kompozitného materiálu povedie k zvýšenej dávke absorbovanej kožou.

ZÁVAŽNÉ UDALOSTI

Nahláste všetky závažné udalosti (napríklad udalosti, ktoré viedli k úmrtiu alebo závažnému zraneniu, prípadne k nim mohli viesť) spoločnosti CQ Medical aj kompetentnému úradu vo vašej krajine.

NOSNOSŤ

NEPRESIAHNITE 225 kg (500 libier) rovnomerne rozloženého zaťaženia alebo maximálne pracovné zaťaženie podkladového ležadla. Riadte sa nižšou z týchto hodnôt.

! POZNÁMKA ! Pri použití podkladového ležadla OEM je nosnosťou nižšia z dvoch uvedených pre bezpečné pracovné zaťaženie. Zaťaženie ležadla kVue NESMIE presiahnuť pôvodné špecifikácie výrobcu podkladového ležadla. Pozrite si dokumentáciu k produktu od pôvodného výrobcu.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA


VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY

Zoznam symbolov a ich definície nájdete na stránke CQmedical.com.



NOSNOSŤ

NEPRESIAHNITE 225 kg (500 libier) rovnomerne rozloženého zaťaženia alebo maximálne pracovné zaťaženie vložky určenej na polozenie na ležadlo alebo základne ležadla. Riadte sa nižšou z týchto hodnôt.

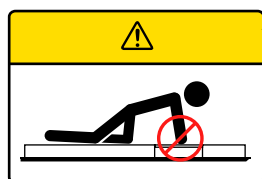

ALEBO




VLOŽKA – ZAŤAŽENIE

NEDOVOLTE pacientovi použiť vložku ako podporu pri ukladaní sa na pomôcku alebo schádzaní z nej. V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu pacienta.



BEZPEČNÉ V PROSTREDÍ MR

Predmet, ktorý nepredstavuje žiadne známe riziká pri vystavení akémukoľvek prostrediu MR. Predmety bezpečné V PROSTREDÍ MR sú zložené z materiálov, ktoré sú elektricky nevodivé, nekovové a nemagnetické.

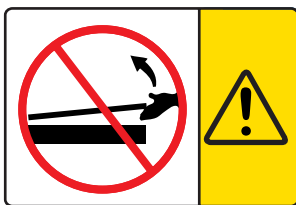

NEDVÍHAJTE

! NIKDY NEDVÍHAJTE KONIEC VLOŽKY ULOŽENEJ NA POVRCHU LEŽADLA!

Prepájací kolíky sa môžu ohnúť alebo zlomiť a ležadlo sa môže stať nepoužiteľným.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA


VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY



NESADAJTE SI


Oblasť za výrezom prsníka bola navrhnutá a testovaná tak, aby podopierala hornú časť trupu pacienta. NIE je určená na podoprenie celého tela pacienta.

Státie alebo sedenie na pomôcke Access Prone G2 alebo Access Prone mimo prsného výrezu môže pomôcku poškodiť alebo spôsobiť zranenie.

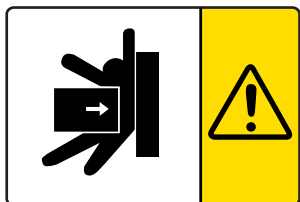

POTENCIÁLNE ZRANENIE

Medzi pomôckou Access Prone G2 alebo Access Prone a inou pomôckou v ožarovacej miestnosti existuje riziko poranenia. Pri presúvaní pomôcky Access Prone postupujte opatrne, aby ste sa vyhli poraneniám.

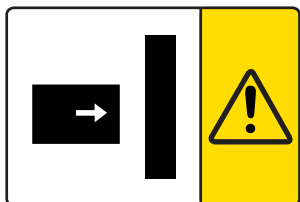

KOLÍZIA S OPORNOU KONŠTRUKCIOU

Pohyby, ktoré je možné vykonávať vzhľadom na základňu ležadla a terapeutické hlavice môžu viesť k situáciám, v ktorých môže vložka položená na ležadle kolidovať s inými položkami vrátane opornej konštrukcie. Pri presúvaní lôžka alebo opornej konštrukcie postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu pacienta.

URČENÉ POUŽITIE

Táto pomôcka je určená na znehybnenie, polohovanie a premiestňovanie pacientov podstupujúcich rádioterapiu.

! POZNÁMKA ! Federálne zákony USA obmedzujú predaj tohto zariadenia iba na pokyn alebo objednávku lekára.

CIEĽOVÉ SKUPINY PACIENTOV

Pacienti podstupujúci rádioterapiu alebo diagnostické zobrazovacie vyšetrenia.

CIEĽOVÍ POUŽÍVATELIA

Cieľový používateľ výrobkov je osoba kvalifikovaná v súlade s požiadavkami príslušnej regulačnej oblasti.

VLASTNOSTI

POPIS


Pomôcky Access Prone G2 a Access Prone boli navrhnuté na liečbu ľavého a pravého prsníka postihnutého rakovinou. Umiestnenie pacienta do polohy na bruchu pomáha zvýšiť oddelenie prsníka od rizikových kritických orgánov.

Pomôcku Access Prone G2 (RT-4544-01) je možné použiť pri simulácii CT/MR vyšetrenia s prístrojom Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10).

! UPOZORNENIE! POMÔCKU ACCESS PRONE (RT-4544) NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI SIMULÁCII SPOLU SO ŽIADNYM PRODUKTOM OKREM SAMEJ SEBE A ĎALŠÍMI POMÔCKAMI ACCESS PRONE (RT-4544).


VLASTNOSTI

KOMPONENTY POMÔCKY ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)

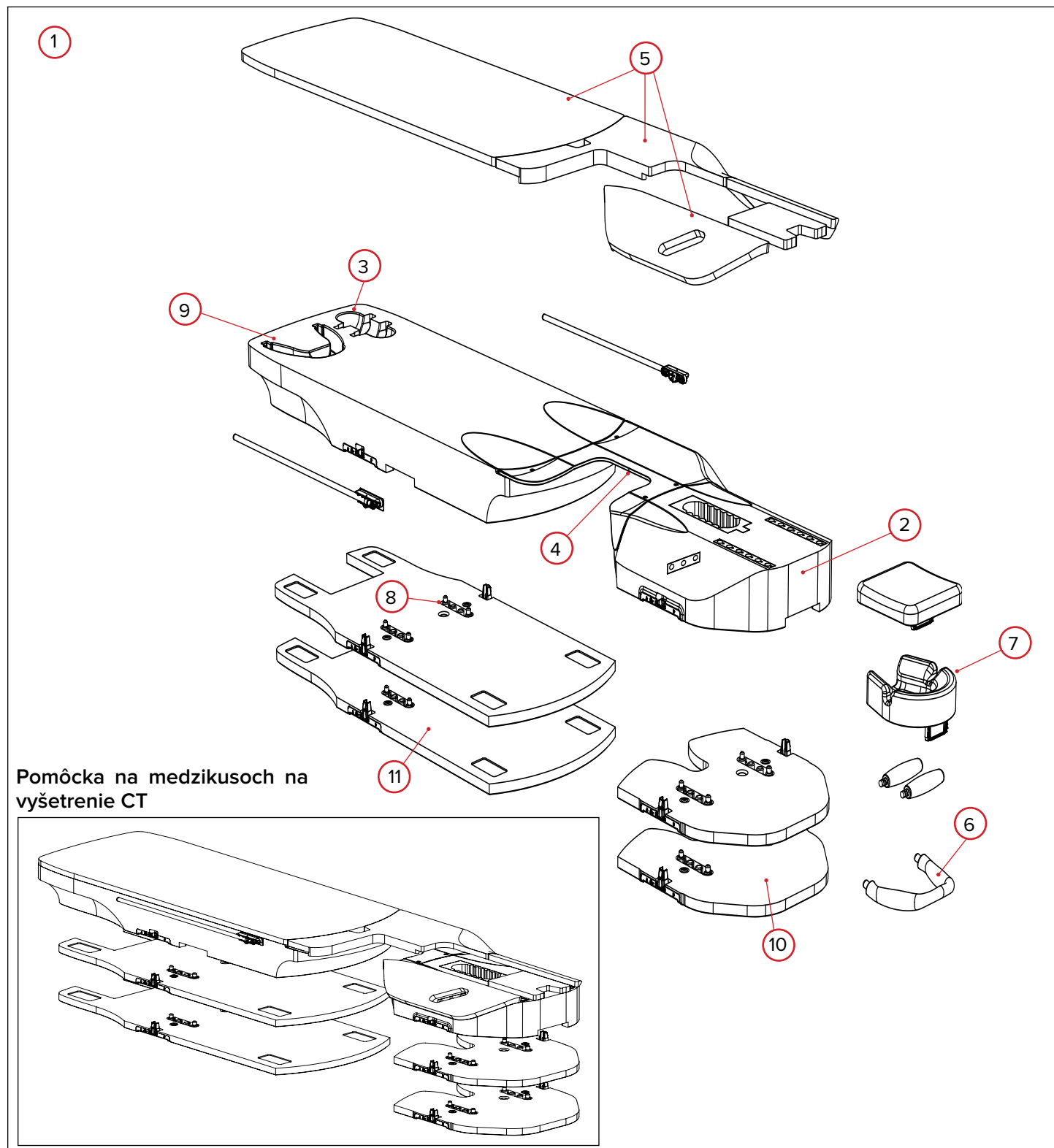

VLASTNOSTI

KOMPONENTY POMÔCKY ACCESS PRONE (RT-4544)

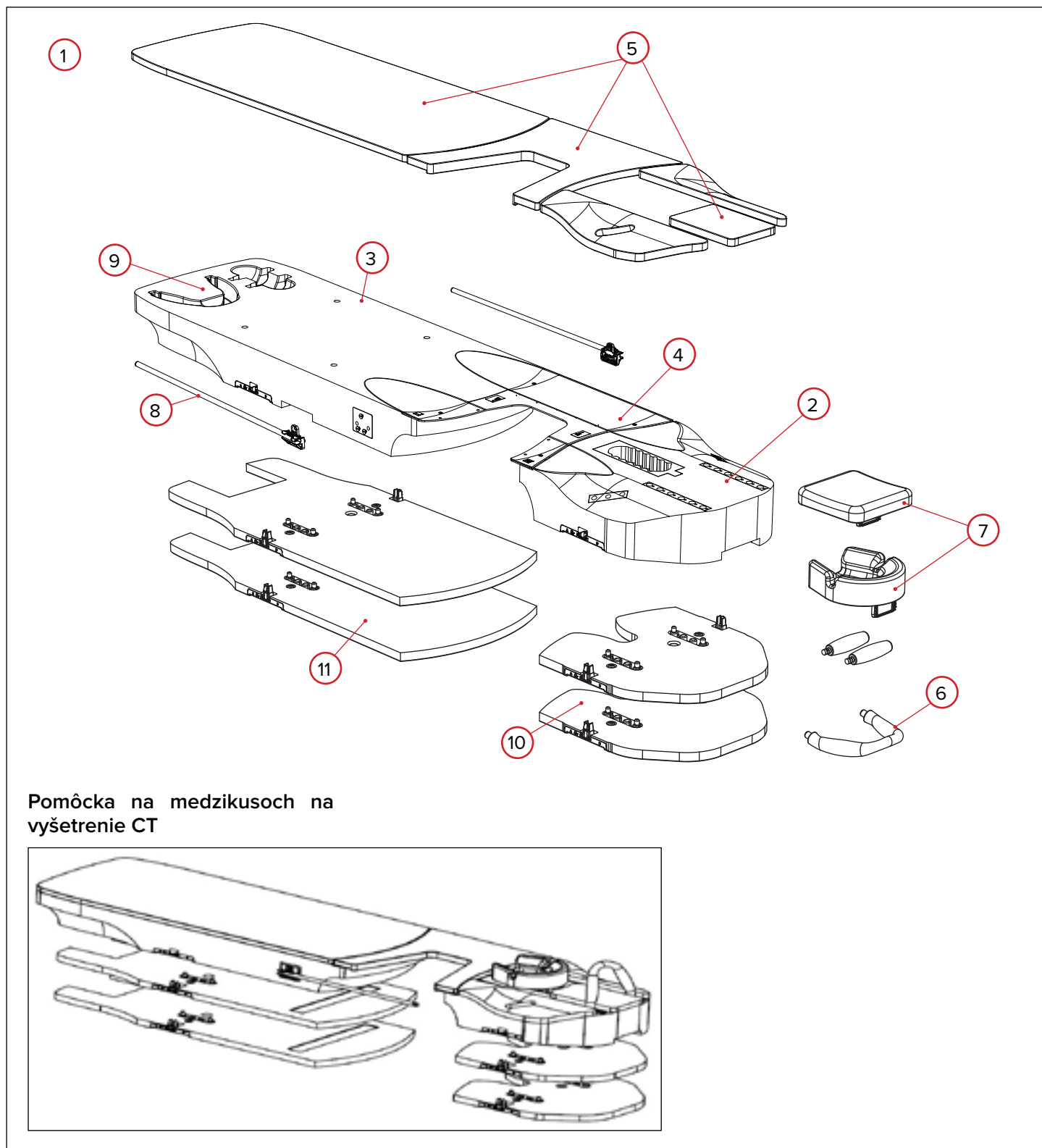

VLASTNOSTI

KOMPONENTY

1. POMÔCKY ACCESS PRONE G2 A ACCESS PRONE PRE PRSNÍK

Pomôcky Access Prone G2 a Access Prone sa používajú pri polohovaní a nastavovaní pacientov podstupujúcich rádioterapiu oblasti prsníka a kľúčnej kosti v polohe na bruchu.

2. KOMPONENT RAMENA A HLAVY

3. KOMPONENT NOHY

4. VLOŽKA

Reverzibilná vložka umiestniteľná do strednej časti umožňuje rýchlu konfiguráciu pomôcky na liečbu ľavého alebo pravého prsníka.

5. PODLOŽKY

Podložky zvyšujú pohodlie pacienta, možno ich však odstrániť a použiť podtlakové podušky. Tieto podložky prinášajú ďalšie možnosti polohovania pacienta.

6. DVOJITÉ RUČNÉ DRŽADLO

Dvojité ručné držadlo je ergonomicky navrhnuté tak, aby znížilo namáhanie zápästia pacienta na rozdiel od štandardného stĺpika, ktorý sa používa s inými pomôckami.

7. OPIERKY HLAVY

Systém sa dodáva s opierkou hlavy pre polohu na bruchu a obrysovou opierkou. V závislosti od preferencie nastavenia je možné použiť obe. V závislosti od výšky pacienta je možné ich polohovať na viacerých miestach na pomôcke Access Prone.

8. IPSILATERÁLNA MIERKA

Ipsilaterálna mierka sa pri nastavovaní otáča a zacvakne na miesto smerom nahor a pri liečbe a skladovaní sa vráti naspäť smerom nadol. Mierka sa môže použiť ako pomôcka na zosúladenie. Presnosť je ± 1 mm. Na oboch stranách pomôcky sa nachádza mierka, ktorá sa používa pri ožarovaní ľavého alebo pravého prsníka.

9. SKLADOVANIE

Vnútorne priehradky na príslušenstvo slúžiace slúžia na pohodlné odkladanie ručných držadiel.

10. MEDZIKUS NA VYŠETRENIE CT PRE KOMPONENT RAMENA A HLAVY

Medzikus na vyšetrenie CT sa polohuje podľa nastavovacej lišty a slúži na zdvíhanie komponentov ramena a hlavy po 2,5 mm prírastkoch. Tento medzikus je možné jednoducho pripojiť na iný medzikus na vyšetrenie CT pre komponent ramena a hlavy.

11. MEDZIKUS NA VYŠETRENIE CT PRE KOMPONENT NÔH


Medzikus na vyšetrenie CT sa polohuje podľa nastavovacej lišty a slúži na zdvíhanie komponenta nôh po 2,5 mm prírastkoch. Tento medzikus je možné jednoducho pripojiť na iný medzikus na vyšetrenie CT pre komponent nôh.

NÁVOD NA POUŽITIE

MONTÁŽ

NASTAVOVACIA LIŠTA

1. Nastavovacia lišta má dva nastavovacie kolíky, ktoré sú v súlade s väčšinou štandardného polohovacieho príslušenstva. Ak chcete lištu pripojiť, vložte oba konce nastavovacej lišty do vhodných polohovacích zárezov kompatibilných so zariadením Varian Exact® a zaistite ich na mieste. Ak chcete lištu odstrániť alebo premiestniť, potiahnite oba konce lišty nahor.

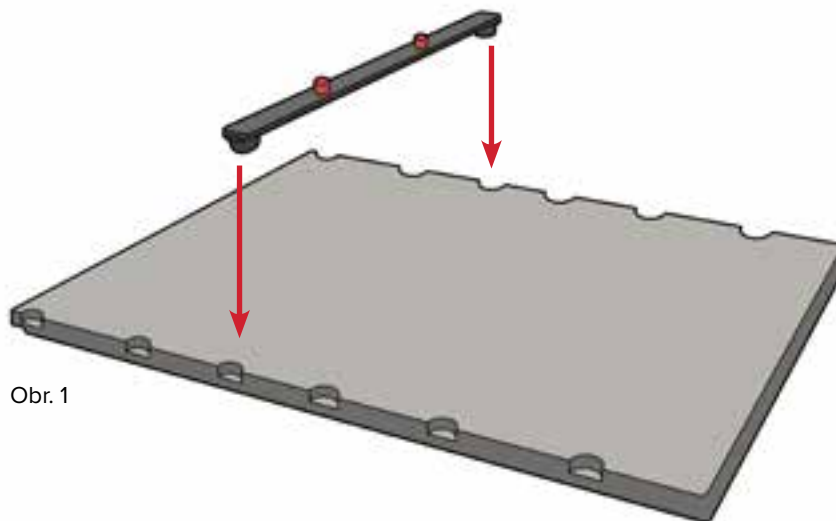


Obr. 1

NÁVOD NA POUŽITIE


MONTÁŽ

NASTAVOVACIA LIŠTA

2. Vložte konce 2 nastavovacích líšt do polohovacích zárezov kompatibilných s pomôckou Varian Exact® na prekrytí CT vo vzdialenosti 1260 mm (typicky 9 polohovacích zárezov) od seba a nastavovacie lišty zaistíte na mieste. (Obr. 2 a 3)

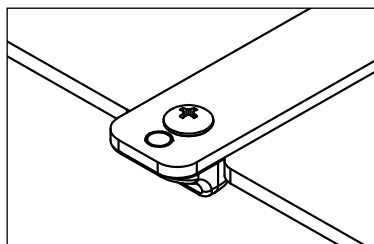

Obr. 2

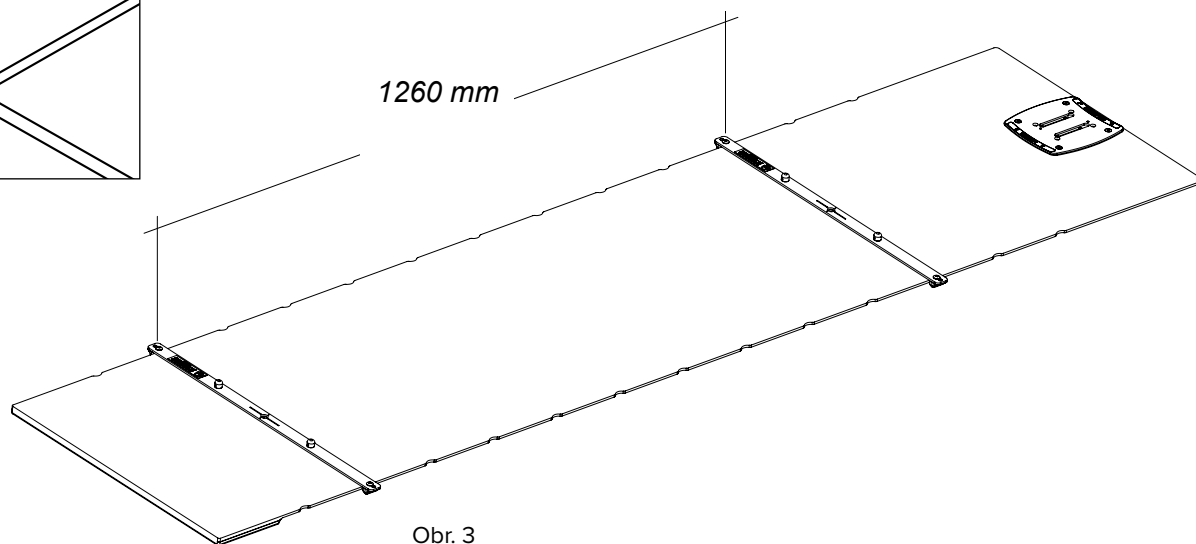

Obr. 3

NÁVOD NA POUŽITIE

NASTAVENIE

PRÍPEVNENIE KOMPONENTU RAMENA A HLAVY A KOMPONENTU NÔH K PREKRYTIU

Komponent ramena a hlavy a komponent nôh pre pomôcku Access Prone G2 a Access Prone umiestnite na prekrytie CT tak, aby poloha zodpovedala nastavovacím lištám. Komponenty pre Access Prone G2 a Access Prone polohujte pomocou tých istých miest na komponentoch hlavy a nôh. (Obr. 4, 5 a 6)



Obr. 4



Obr. 5

PRÍPEVNENIE VLOŽKY KU KOMPONENTU RAMENA A HLAVY A KOMPONENTU NÔH

Pripojte vložku ku komponentu ramena a hlavy a komponentu nôh pomocou nastavovacích kolíkov na spodnej strane vložky. (Obr. 6) Túto vložku je možné otáčať, aby sa umožnilo ožiarenie z oboch strán.




Obr. 6

NÁVOD NA POUŽITIE

NASTAVENIE

VIZUÁLNA KONTROLA ZAROVNANIA

Vizuálne skontrolujte, či sú komponenty Access™ Prone správne na prekrytí vycentrované. (Obr. 7)

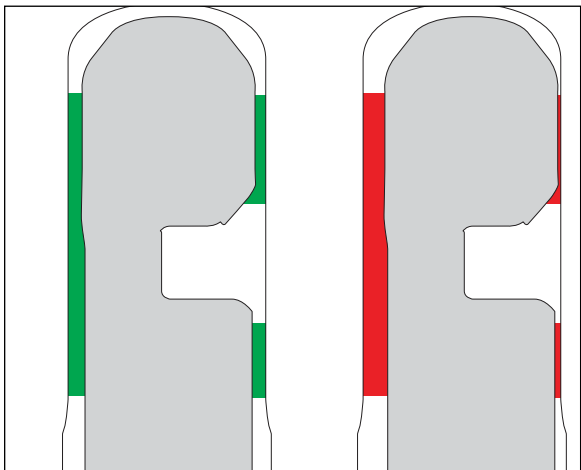

Obr. 7

MEDZIKUSY NA VYŠETRENIE CT

1. Ak chcete nainštalovať medzikusy na vyšetrenie CT, najprv odstráňte pomôcku Access Prone.
2. Medzikusy na vyšetrenie CT umiestnite do rovnakého polohovacieho bodu ako komponenty pre nohy a hlavu. Medzikusy na vyšetrenie CT je možné na seba stohovať, a tak zvyšovať výšku o prírastkoch 2,5 cm. (Obr. 8)



Obr. 8

! UPOZORNENIE ! NARAZ NEPOUŽÍVAJTE VIAC AKO 3 NA SEBA POLOŽENÉ MEDZIKUSY NA VYŠETRENIE CT. V OPAČNOM PRÍPADOU MÔŽE BYŤ POMÔCKA NESTABILNÁ.

NÁVOD NA POUŽITIE

NASTAVENIE

MEDZIKUSY NA VYŠETRENIE CT, pokračovanie

3. Pomôcku Access Prone G2 alebo Access Prone umiestnite na medzikusy na vyšetrenie CT. (Obr. 9)



Obr. 9

4. Ak chcete znížiť výšku pomôcky, pomôcku Access Prone G2 alebo Access Prone pre prsník odstráňte. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na každej strane polohovacej dosky. (Obr. 10)



Obr. 10

NÁVOD NA POUŽITIE

NASTAVENIE

OPIERKA HLAVY

1. Pre pacienta použite buď opierku hlavy pre polohu na bruchu alebo obrysovú opierku.
2. Vložte plastový zarovnávací diel do príslušného otvoru na hornom konci pomôcky. (Obr. 11)

! POZNÁMKA ! Opierky hlavy je možné nastaviť pred položením pacienta na pomôcku, ale po umiestnení pacienta môže byť potrebné ich premiestnenie.



Obr. 11

NÁVOD NA POUŽITIE

NASTAVENIE

POLOHOVANIE PACIENTA


! POZNÁMKA ! Pacienti môžu potrebovať pomoc s ukladaním sa na pomôcku a schádzaním z nej. Odporúčame použiť nižšie uvedené techniky, ktoré sa ale môžu u jednotlivých zdravotníckych zariadení líšiť.

AKO UMIESTNIŤ PACIENTA NA POMÔCKU ACCESS PRONE G2 ALEBO ACCESS PRONE


1. Pri umiestňovaní pacienta na vložku znížte lôžko alebo použite schodíky.
2. Keď sa pacient nachádza na vložke, zarovnajte jeho kolená so správnymi značkami na pene. (Obr. 12)
3. Požiadajte pacienta, aby na posunutie hornej časti svojho tela do požadovanej polohy použil ruky alebo lakty. (Obr. 13)
4. Pacienta nechajte pomaly ľahnúť si do správnej polohy.
5. Po jeho umiestnení vložte hlavu pacienta do opierky hlavy a požiadajte ho, aby uchoпил príslušné držadlá. (Obr. 14)

! UPOZORNENIE! DVOJITÉ RUČNÉ DRŽADLO ANI IPSILATERÁLNE RUČNÉ DRŽADLO NIE SÚ URČENÉ NA PODPORU HMOTNOSTI PACIENTA:

- **NEPOLOHUJTE** pacienta pomocou ručných držadiel.
- **NEPOUŽÍVAJTE** ručné držadlá pri pokladaní sa na pomôcku ani postavení sa späť.

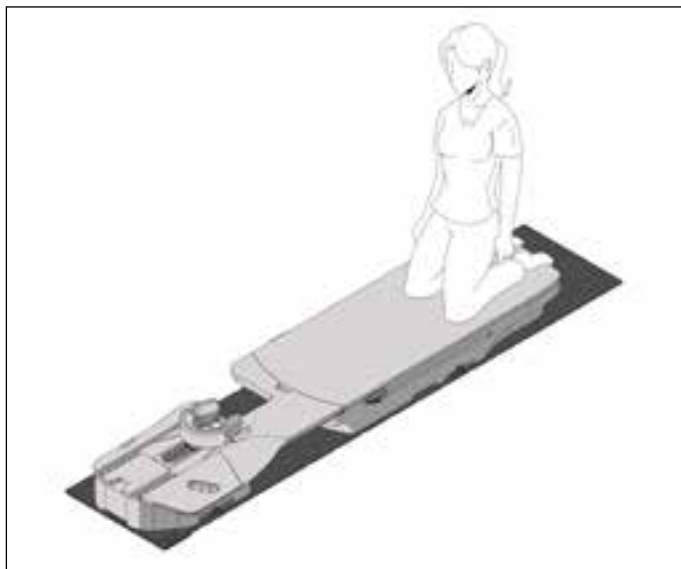

Obr. 12

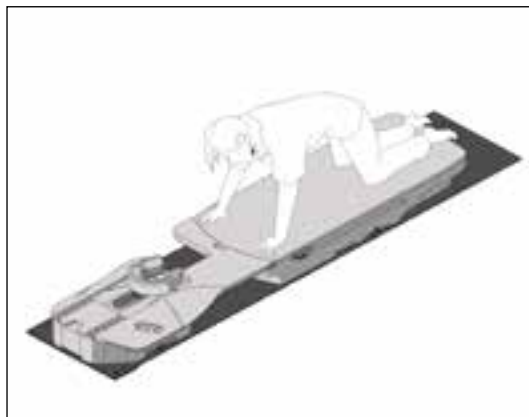

Obr. 13



Obr. 14

NÁVOD NA POUŽITIE

NASTAVENIE


DVOJITÉ RUČNÉ DRŽADLO

! UPOZORNENIE ! DVOJITÉ RUČNÉ DRŽADLO ANI IPSILATERÁLNE RUČNÉ DRŽADLO NIE SÚ URČENÉ NA PODPORU HMOTNOSTI PACIENTA:

- **NEPOLOHUJTE** pacienta pomocou ručných držiadiel.
- **NEPOUŽÍVAJTE** ručné držiadlá pri pokladaní sa na pomôcku ani postavení sa späť.

1. Konce ručných držiadiel zarovnajte s príslušnými otvormi na hornom konci vložky.
2. Zatlačte na držiadlo, aby zapadlo do otvorov. (Obr. 15)

! POZNÁMKA ! Ručné držiadlo by malo byť ohnuté dozadu smerom k pacientovi, ako vidíte na obrázku nižšie. (Obr. 16)

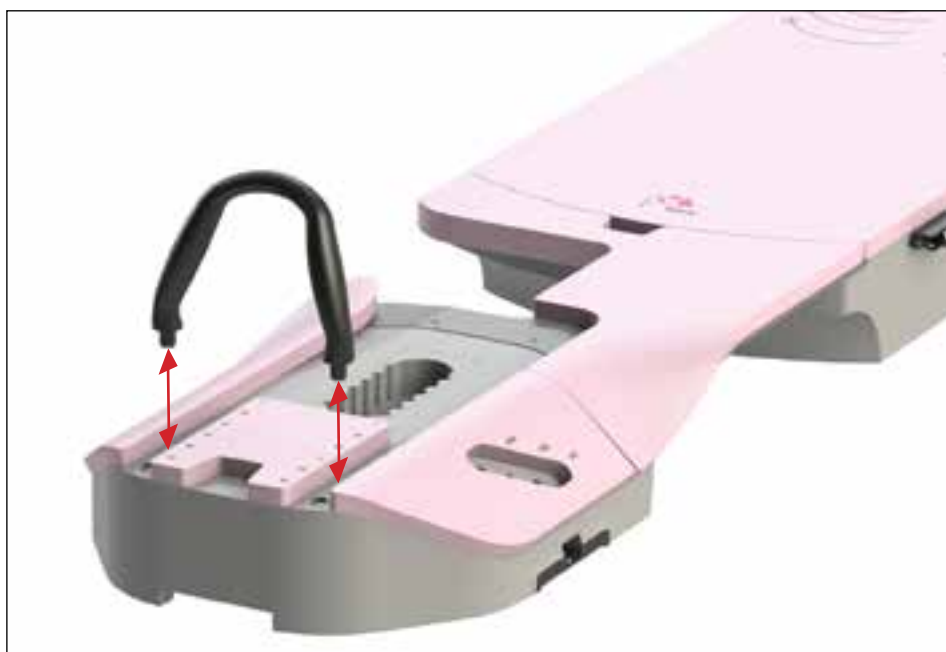

Obr. 15



Obr. 16

NÁVOD NA POUŽITIE

NASTAVENIE

IPSILATERÁLNE RUČNÉ DRŽADLO

1. Ručné držadlo vložte do príslušného otvoru na hornom konci vložky. (Obr. 17)
2. Ručné držadlo zasunúť do otvoru a zaistiť na mieste jeho otáčaním v ktoromkoľvek smere. (Obr. 17)



Obr. 17

SKLADOVANIE

Dvojité ručné držadlo a ipsilaterálne ručné držadlá možno uložiť do úložného priestoru, ktorý sa nachádza v komponente nôh. (Obr. 18)



Obr. 18

NÁVOD NA POUŽITIE

NASTAVENIE

IPSILATERÁLNA MIERKA

**! UPOZORNENIE ! IPSILATERÁLNA MIERKA NIE JE URČENÁ NA PODPORU HMOTNOSTI PACIENTA.
! UPOZORNENIE ! NEPOUŽÍVAJTE RUČNÉ DRŽADLÁ PRI POKLADANÍ SA NA POMÔCKU ANI POSTAVENÍ SA SPÄŤ.**

1. Zarovnajte pacienta.
2. Po umiestnení pacienta potiahnite Ipsilaterálnu mierku nahor, až kým sa nezaistí na mieste. (Obr. 19)

! POZNÁMKA! Mierky sú prítomné ako pomôcka na zarovnanie. Za potvrdenie polohy pacienta zodpovedá používateľ tejto pomôcky.

! POZNÁMKA! Mierky sa testujú na presnosť ± 1 mm

3. Pred ožarovaním a/alebo uskladnením zasunúť ipsilaterálnu mierku nadol do úložnej polohy. (Obr. 19)

Obr. 19



NÁVOD NA POUŽITIE

ODSTRÁNENIE

IPSILATERÁLNE RUČNÉ DRŽADLO

Otáčajte ním opačným smerom ako pri jeho inštalácii, kým sa držadlo neuvoľní a potom ho vytiahnite rovno von. Ipsilaterálne ručné držadlo sa môže uložiť v základni komponentu nôh pod poduškou.

DVOJITÉ RUČNÉ DRŽADLO

Ťahajte ním nahor, kým sa neuvoľní z otvorov. Dvojité ručné držadlo je možné uložiť v základni komponentu nôh pod poduškou.

PACIENT

V opačnom poradí postupujte podľa pokynov na nastavenie polohy.

! POZNÁMKA ! Pacienti môžu potrebovať pomoc s ukladaním sa na pomôcku a schádzaním z nej.

VLOŽKA NA PRSNÍK

Vložku na prsník potiahnite smerom priamo nahor od komponentov hlavy a nôh.

OPIERKA HLAVY

Opierku hlavy potiahnite smerom nahor od vložky.

KOMPONENT RAMENA a HLAVY A KOMPONENT NÔH

Zdvihnite komponenty ramena a hlavy a komponent nôh smerom nahor od prekrytia. V prípade potreby je možné medzikusy odobrať z komponentu ramena a hlavy a komponentu nôh zatlačením na uvoľňovacie tlačidlá na každej strane modrých polohovacích dosiek.

ODSTRÁNENIE NASTAVOVACÍCH LÍŠŤ

Potiahnite oba konce nastavovacej lišty nahor.

ÚDRŽBA

ČISTENIE SYSTÉMU

Pomôcku môžete čistiť jemným neabrazívnym čistiacim alebo dezinfekčným roztokom. Nestriekajte ani nevyliievajte tekutiny na jej povrch, lebo by mohli zatiecť do západky OneTouch™ alebo mechanizmov vnútri pomôcky. Ak chcete pomôcku vyčistiť, na čistú tkaninu naneste roztok a utrite ňou povrch pomôcky.

DEZINFEKCIA SYSTÉMU

Nasledujúce čistiace látky boli testované a uznané za vhodné na čistenie povrchov pomôcok Access Prone G2, Access Prone a vložky určenej na polozenie na ležadlo. Ak chcete dezinfikovať povrch vrchnej časti ležadla, naštudujte si konkrétne pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku.

- Voda
- 10 % bieliaci roztok Clorox®
- Izopropylalkohol
- 2,4 % aktivovaný roztok dialdehydu Cidex®
- Mydlo a voda


NESTRIEKAJTE ich priamo na pomôcku Access Prone G2, Access Prone ani na vložku položenú na ležadle a nenechajte vodu zatiecť do základného rámu.

Na pomôcku Access Prone G2, Access Prone ani na vložku určenú na polozenie na ležadlo NEUKLADAJTE ostré predmety.

ŠPECIFIKÁCIE

ACCESS PRONE G2

Váhový limit: 225 kg (500 libier) rovnomerne rozloženého zaťaženia

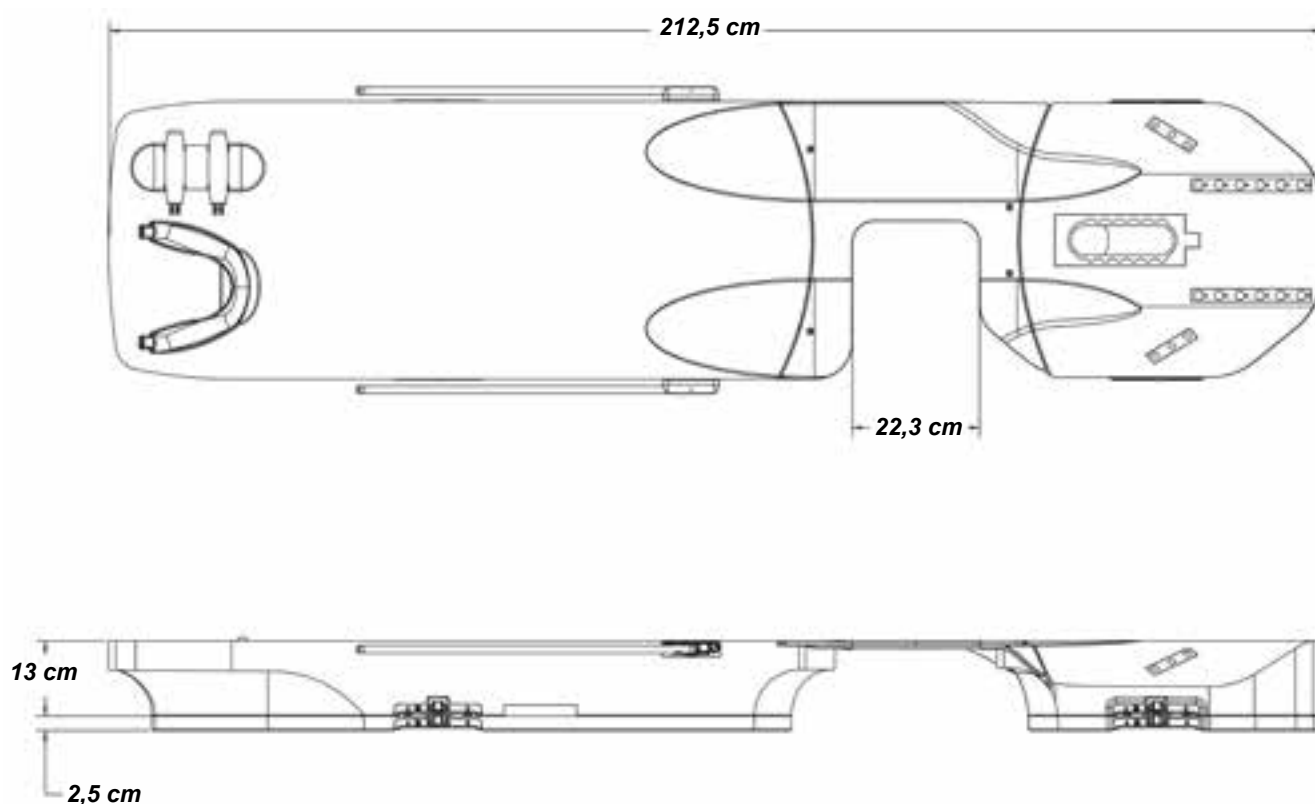

NASTAVENIE PACIENTA

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) – PRAVÝ A ĽAVÝ PRSNÍK

Menopacienta:


Č. ID pacienta:

Nastavil(a):

Lekár:

Dátum:

Poznámky:

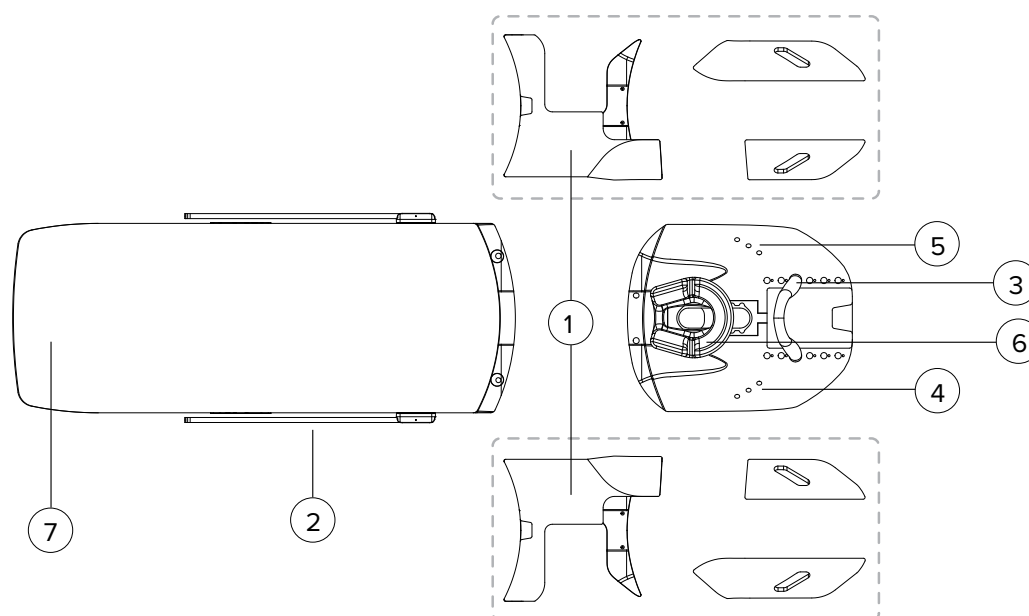

1. Vložka: **Ľavá** **Pravá**

2. Ipsilaterálna mierka:

3. Umiestnenie dvojitého držadla (vyberte jednu možnosť): **1** **2** **3** **4** **5** **6**

Neuvádza sa

4. Ručné držadlo, *pravá strana pacienta* (vyberte jednu možnosť): **A1** **A2** **A3** **Neuvádza sa**

5. Ručné držadlo, *ľavá strana pacienta* (vyberte jednu možnosť): **A1** **A2** **A3** **Neuvádza sa**

6. Použitá opierka hlavy: **Nie je** **Pri polohe na bruchu** **Obrysová**
Umiestnenie (vyberte jednu možnosť): **A** **B** **C** **D** **E** **F**


7. Umiestnenie kolena (vyberte jednu možnosť): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Poznámky:

(Pokračovanie na zadnej strane)

NASTAVENIE PACIENTA

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) (POKRAČOVANIE)

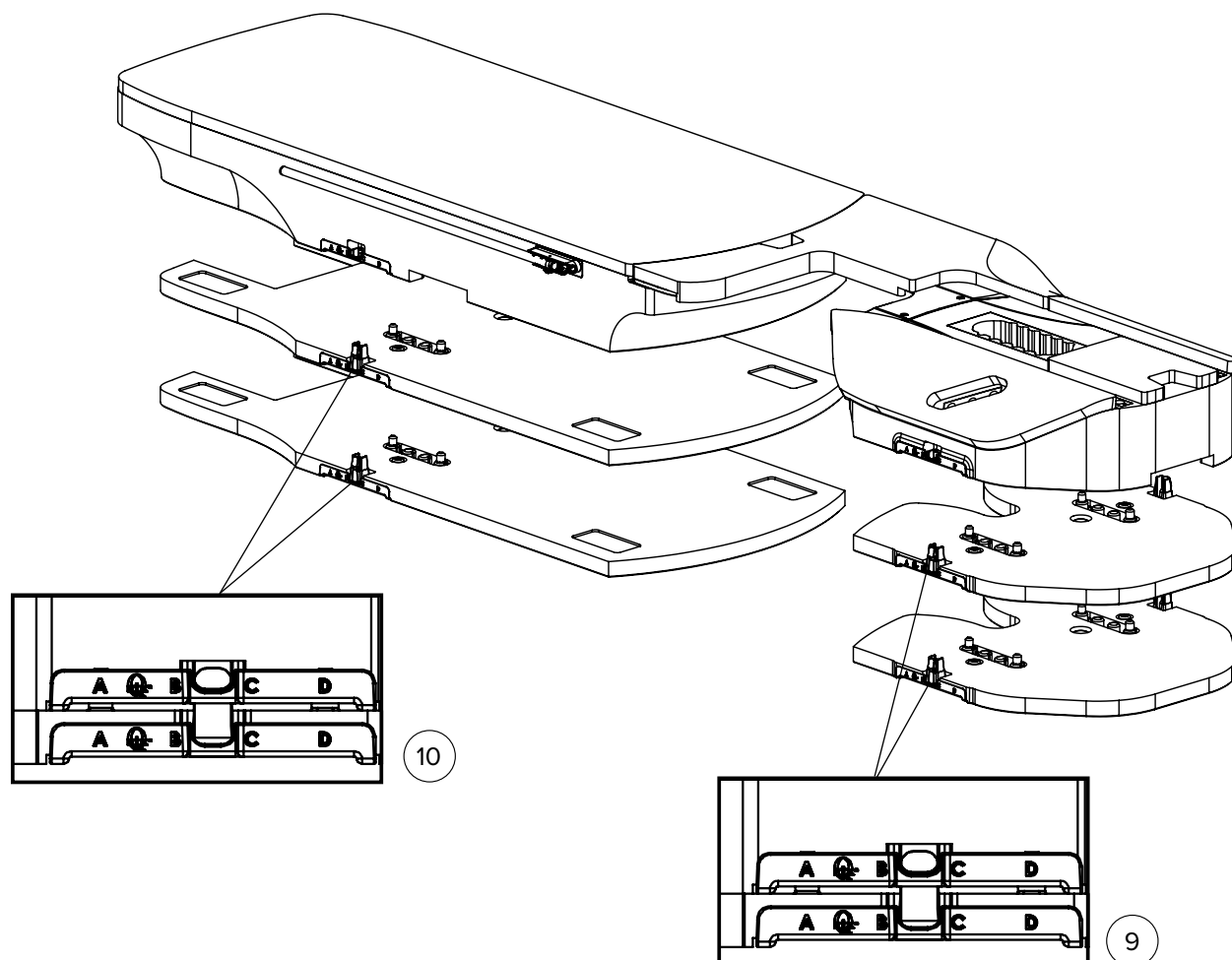

Zdvíhače a medzikusy na vyšetrenie CT

8. Koľko súprav medzikusov na zdvihnutie pri vyšetrení CT sa používa (vyberte jednu): **0** **1** **2**

9. Horný zdvíhač pri vyšetrení CT – umiestnenie na nastavovacej lište **A** **B** **C** **D**

- Umiestnenie nastavovacej lišty na ležadle:

10. Dolný zdvíhač pri vyšetrení CT – umiestnenie na nastavovacej lište **A** **B** **C** **D**

- Umiestnenie nastavovacej lišty na ležadle:

Poznámky:

NASTAVENIE PACIENTA

ACCESS PRONE (RT-4544) – PRAVÝ A ĽAVÝ PRSNÍK

Menopacienta:


Č. ID pacienta:

Nastavil(a):

Lekár:

Dátum:

Poznámky:

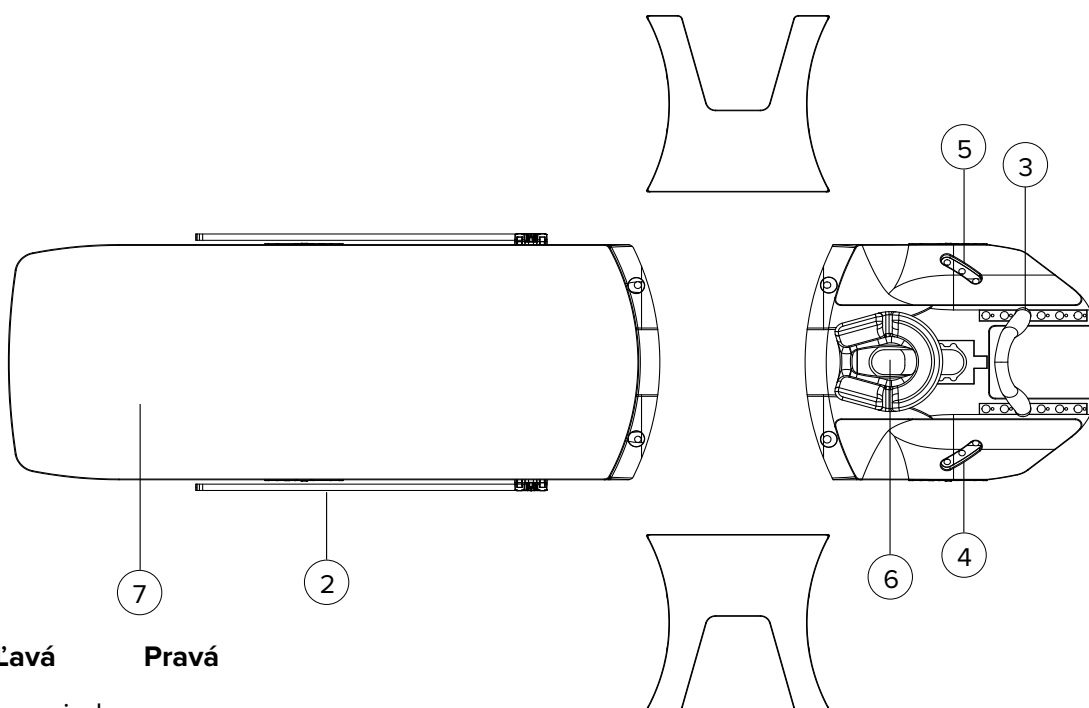

1. Vložka: **Ľavá** **Pravá**

2. Ipsilaterálna mierka:

3. Umiestnenie dvojitého držadla (vyberte jednu možnosť): **1** **2** **3** **4** **5** **6**

Neuvádza sa

4. Ručné držadlo, *pravá strana pacienta* (vyberte jednu): **A1** **A2** **A3** **Neuvádza sa**

5. Ručné držadlo, *ľavá strana pacienta* (vyberte jednu): **A1** **A2** **A3** **Neuvádza sa**

6. Použitá opierka hlavy: **Nie je** **Pri polohe na bruchu** **Obrysová**
Umiestnenie (vyberte jednu možnosť): **A** **B** **C** **D** **E** **F**


7. Umiestnenie kolena (vyberte jednu možnosť): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Poznámky:

(Pokračovanie na zadnej strane)

NASTAVENIE PACIENTA

ACCESS PRONE (RT-4544) (POKRAČOVANIE)

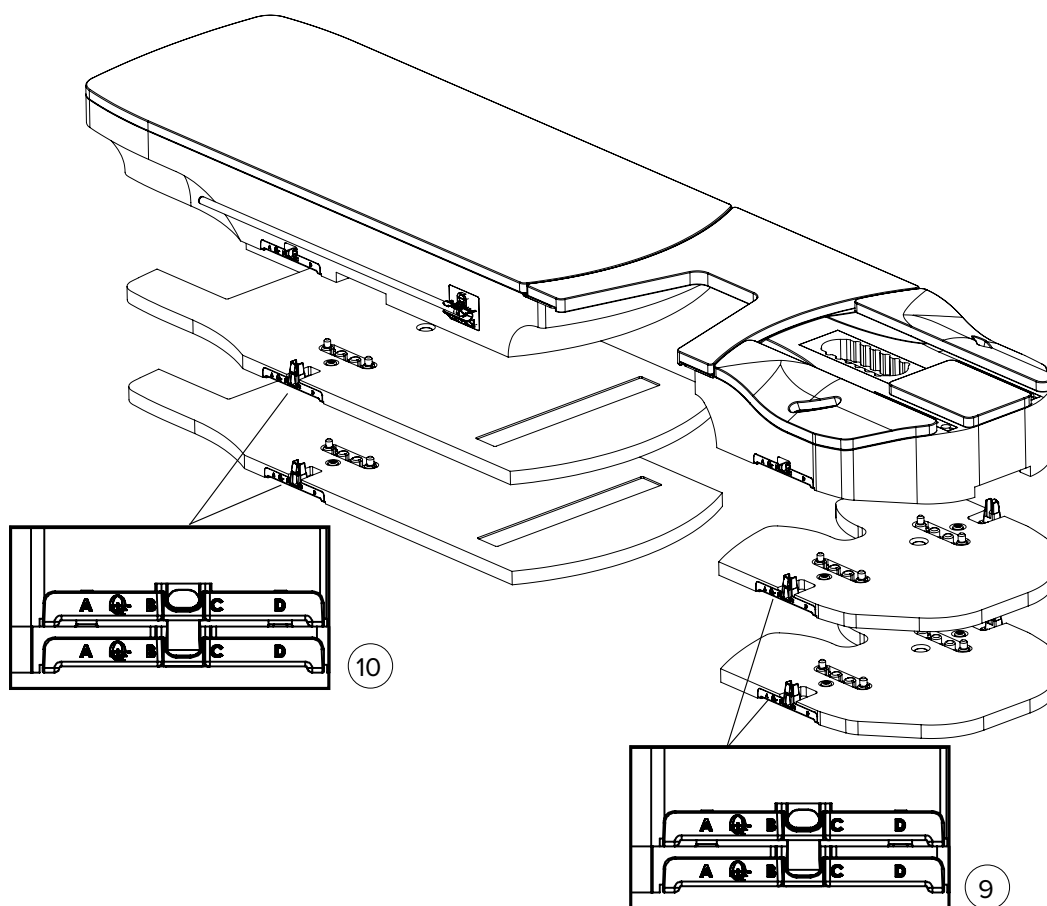


Zdvíhače a medzikusy na vyšetrenie CT

8. Koľko súprav medzikusov na zodvihnutie pri vyšetrení CT sa používa (vyberte jednu): **0** **1** **2**
9. Horný zdvíhač pri vyšetrení CT – umiestnenie na nastavovacej lište **A** **B** **C** **D**
- Umiestnenie nastavovacej lišty na ležadle:
10. Dolný zdvíhač pri vyšetrení CT – umiestnenie na nastavovacej lište **A** **B** **C** **D**
- Umiestnenie nastavovacej lišty na ležadle:

Poznámky:

ZOZNAM DIELOV


ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)

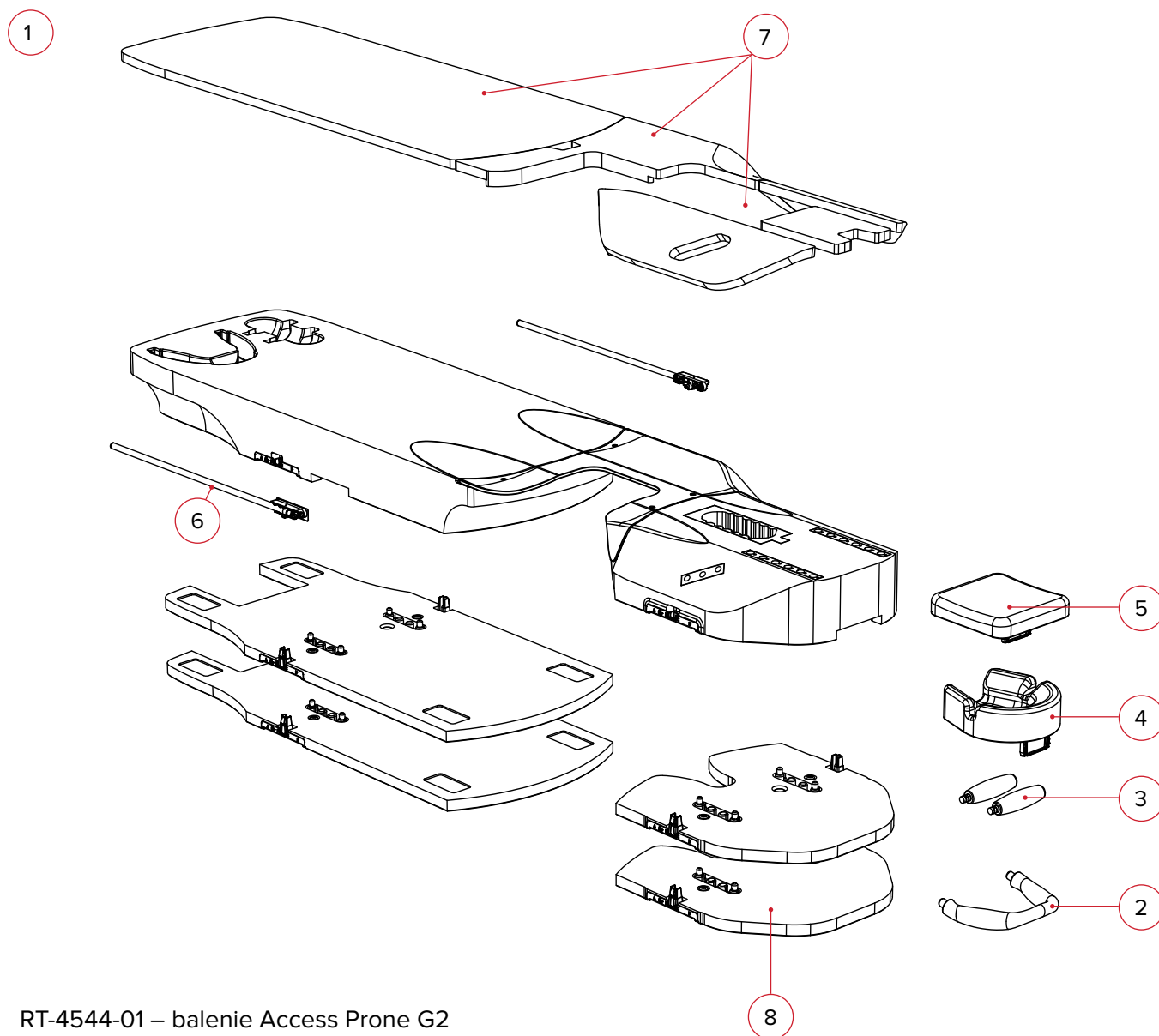

1. RT-4544-01 – balenie Access Prone G2
 - 2005408 Access Prone G2 – zostava pre pravú vložku
 - 2005424 Access Prone G2 – zostava pre ľavú vložku
2. RT-4544KV-04 – dvojité držadlo
3. RT-4544KV-05 – úchopový stípek
4. RT-4544KV-06 – opierka hlavy pre polohu na bruchu
5. RT-4544KV-07 – obrysová opierka hlavy
6. Ipsilaterálna mierka, nízky profil
 - 8002601 – 40 cm (náhradná mierka)
 - 8002602 – 48 cm (doplnková mierka)
7. 2006813 – súprava podložiek AP-2
8. 8002580 – súprava medzikusov AP-2

ZOZNAM DIELOV

ACCESS PRONE (RT-4544)

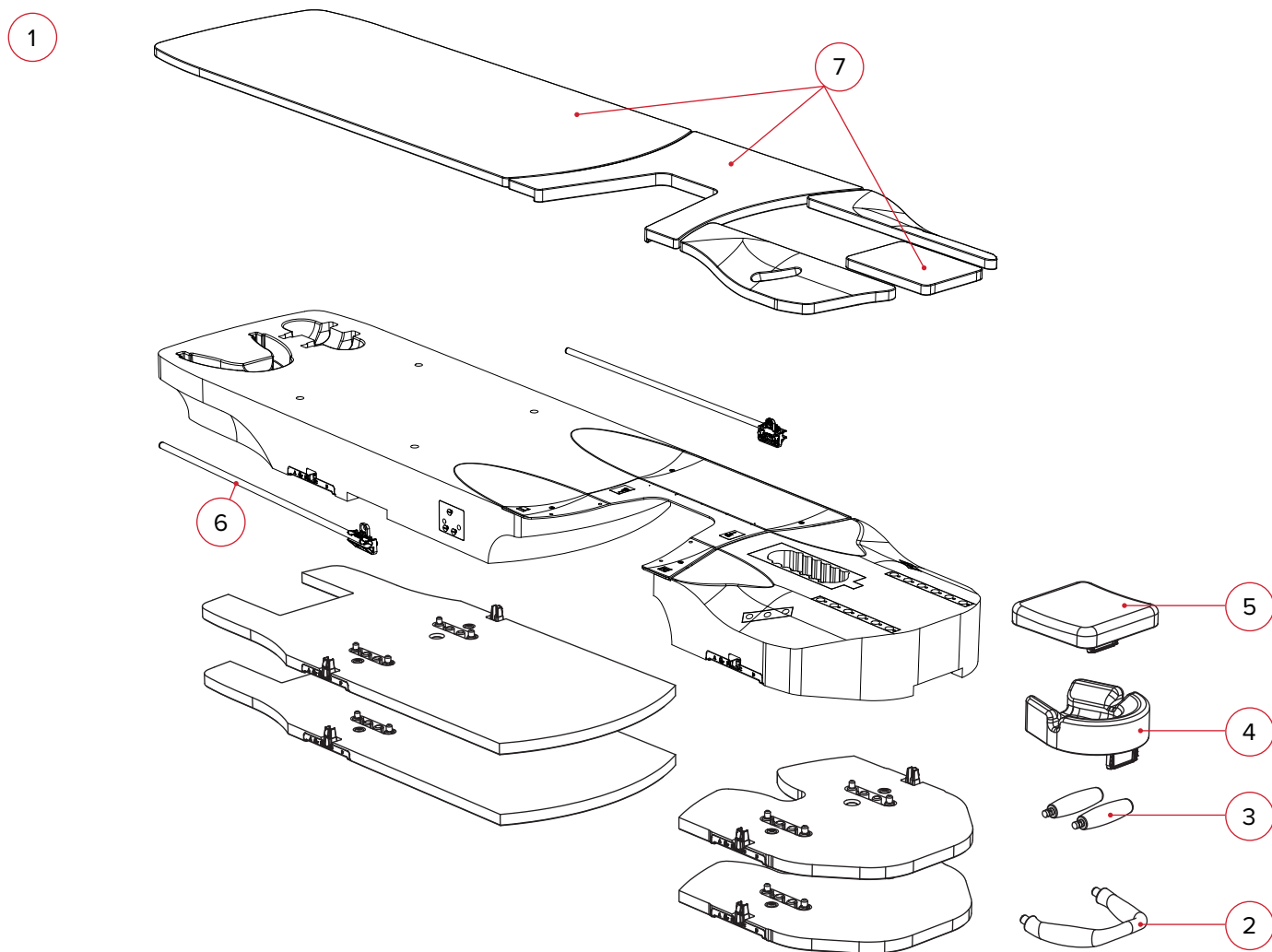

1. RT-4544 – balenie Access™ Prone
 - 2004257 Access Prone G1 – zostava vložky na ožarovanie prsníka
2. RT-4544KV-04 – dvojité držadlo
3. RT-4544KV-05 – úchopový stĺpik
4. RT-4544KV-06 – opierka hlavy pre polohu na bruchu
5. RT-4544KV-07 – obrysová opierka hlavy
6. 8001846 – ipsilaterálna mierka
7. 8002215 – súprava podložiek Access™ Prone



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com