


PRŮVODCE VÝROBKEM A PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

8002048 a 8002049

DSA-2Q a DSA-2T Držák hlavy
(Head Holder)



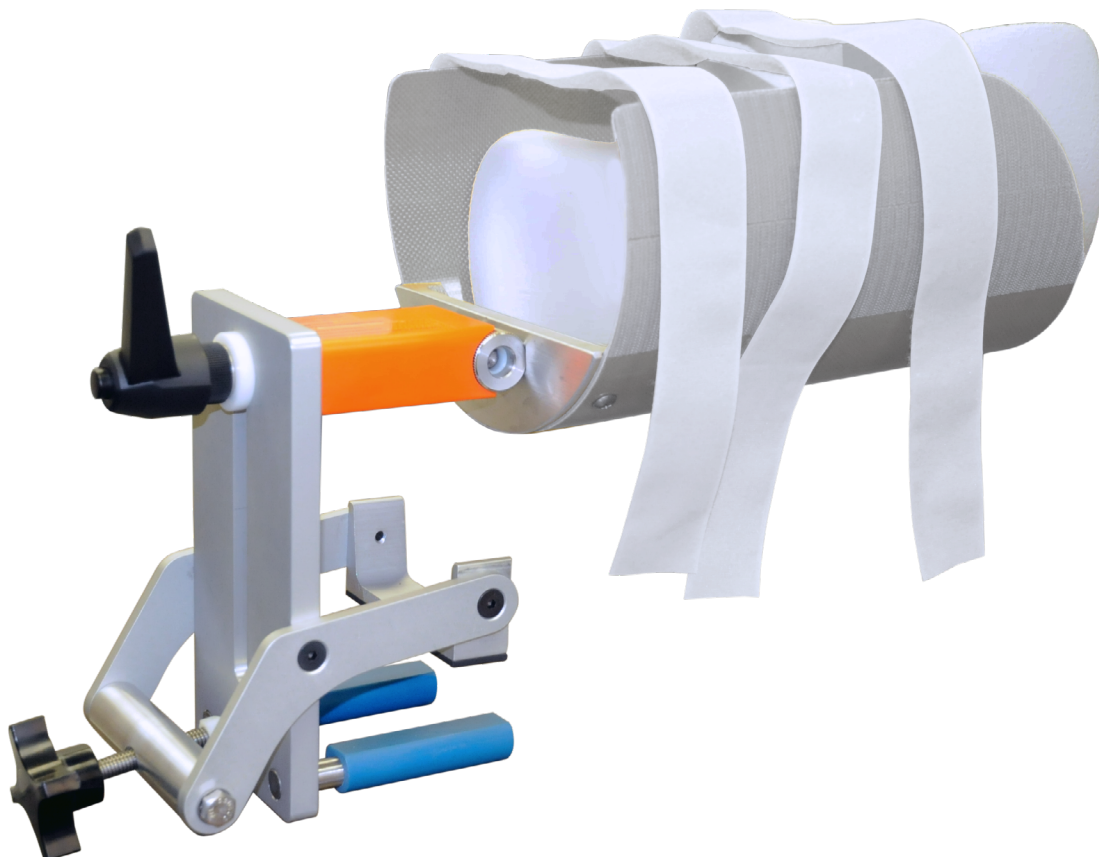

EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Vyrobeno v USA spoločností Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--

Cidex® je registrovaná ochranná známka společnosti Johnson & Johnson.

Clorox® je registrovaná ochranná známka společnosti The Clorox Company.

OBSAH

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ	4
VÝSTRAŽNÉ INFORMACE	4
ZÁVAŽNÉ UDÁLOSTI	4
JMENOVITÁ ZÁTĚŽ	4
VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY	4
URČENÉ POUŽITÍ	5
FUNKCE	6
POPIS	6
ÚDRŽBA	7
ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU	7
DEZINFEKCE SYSTÉMU	7
POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ	8
INSTALACE	8
SESTAVENÍ	9
ODSTRANĚNÍ	10

OBEČNÁ UPOZORNĚNÍ

VÝSTRAŽNÉ INFORMACE

! VÝSTRAHA ! NEJSOU DOVOLENY ŽÁDNÉ MODIFIKACE ZAŘÍZENÍ. POKUD BYLA JAKÁKOLIV ČÁST TOHOTO ZAŘÍZENÍ PODROBENA KATASTROFICKÉ ZÁTĚŽI, JEVÍ ZNÁMKY POŠKOZENÍ NEBO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ, OKAMŽITĚ ZAŘÍZENÍ PŘESTAŇTE POUŽÍVAT A KONTAKTUJTE SPOLEČNOST QFIX NA ČÍSLE +1 484-720-6054 NEBO NA ADRESE TECHSUPPORT@QFIX.COM.

ZÁVAŽNÉ UDÁLOSTI

Nahláste prosím jakékoli závažné události (např. události, které mají nebo by mohly mít za následek smrt či vážné zranění) společnosti Qfix i příslušnému úřadu své země.

JMENOVITÁ ZÁTĚŽ

NEPŘESAHOVTE rovnoměrně rozloženou zátěž 10 kg (22 lb).

! POZNÁMKA ! Po umístění pacienta může být nutné provést další malé úpravy polohy.

! POZNÁMKA ! Při polohování pacienta dbejte na to, aby nebyl v držáku hlavy příliš vysoko. Taková poloha je nepohodlná a může způsobit artefakty.

VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY

Seznam symbolů a jejich vysvětlení najdete na stránkách Qfix.com.

URČENÉ POUŽITÍ

Držák hlavy (Head Holder) je určen k polohování a imobilizaci hlavy. Toto zařízení je primárně určeno pro intervenční neurologicko-radiologické výkony. Je také určeno pro jakýkoliv intervenční zákrok k omezení pohybu hlavy pacienta.

Držák hlavy je určen k použití v klinickém prostředí školenými technikami a klinickými pracovníky.

! POZNÁMKA ! Federální zákon Spojených států omezuje toto zařízení na prodej lékařem nebo na jeho příkaz.

CÍLOVÉ SKUPINY PACIENTŮ

Pacienti podstupující běžné lékařské nebo chirurgické výkony zahrnující diagnostické zobrazování.

ZAMÝŠLENÍ UŽIVATELE

Zamýšleným uživatelem produktů je osoba kvalifikovaná v souladu s požadavky regulační oblasti.

FUNKCE

POPIS

Výrobek je určen k podpoře a posílení kvality snímku a výkonu a produktivity kardiovaskulárních rentgenových přístrojů. Výrobek podepírá hlavu pacienta, snižuje chyby při digitální subtrakci a zlepšuje 3-D obrazy. Jednoduchý design výrobku umožňuje snadnou instalaci, úpravu a odstranění a umožňuje, aby se uživatel soustředil na potřeby pacienta.

ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU

Držák pro paži (Armboard) lze čistit jemným neabrazivním čisticím nebo dezinfekčním roztokem. Při čištění navlhčete roztokem čistý hadřík a otřete povrch.

DEZINFEKCE SYSTÉMU

Následující čisticí prostředky byly testovány a bylo zjištěno, že jsou vhodné k čištění povrchu držáku pro paži. Před dezinfekcí povrchu držáku pro paži si přečtěte specifické pokyny výrobce čisticího prostředku.

- voda
- 10 % roztok bělidla Clorox®
- isopropyl alkohol
- 2,4 % aktivovaného dialdehydového roztoku Cidex®
- roztok mýdla ve vodě

NESTŘÍKEJTE přímo na držák hlavy.

NENAMÁČEJTE držák hlavy ve vodě přes noc.

NEPOUŽÍVEJTE k čištění držáku hlavy chlór.

Pravidelně kontrolujte, zda upevňovací prvky dobře drží.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

INSTALACE



1




2




3




4

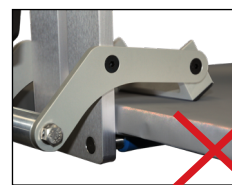

5

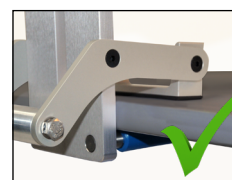


6

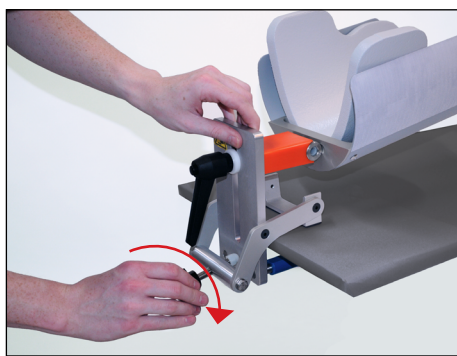


7

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ


SESTAVENÍ

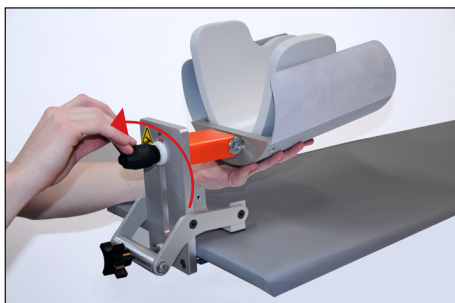

8

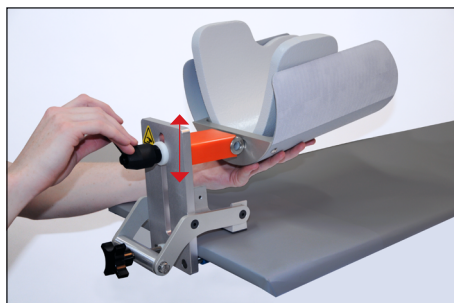

9

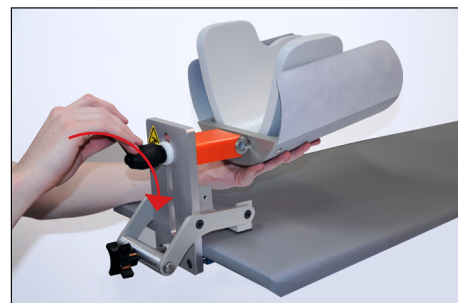

10



11




12




13




14

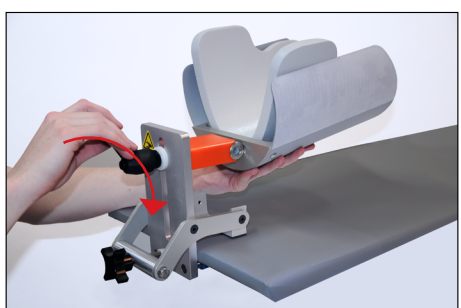


15

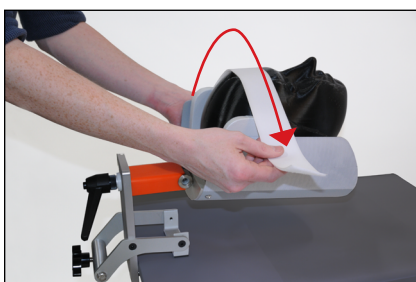

16

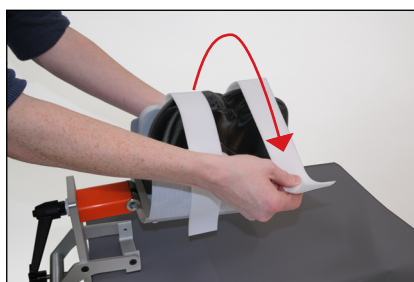


17

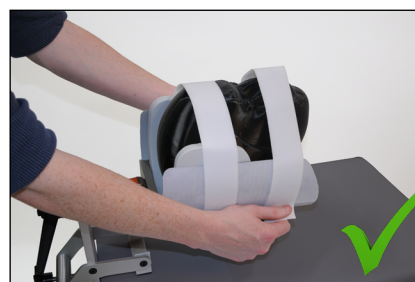

18




19

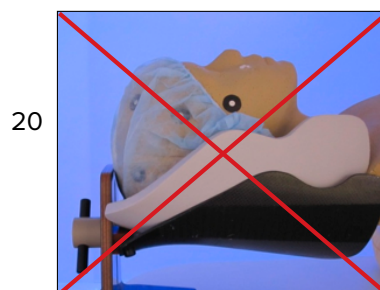


20

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ


ODSTRANĚNÍ

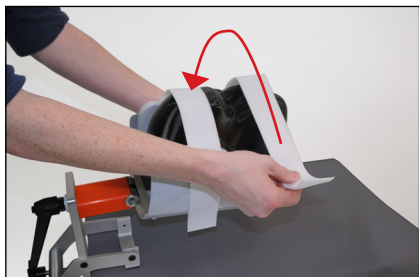


21

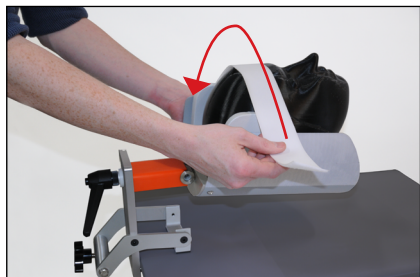

22

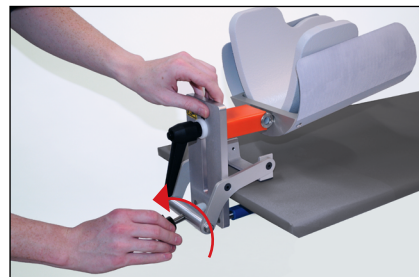

23

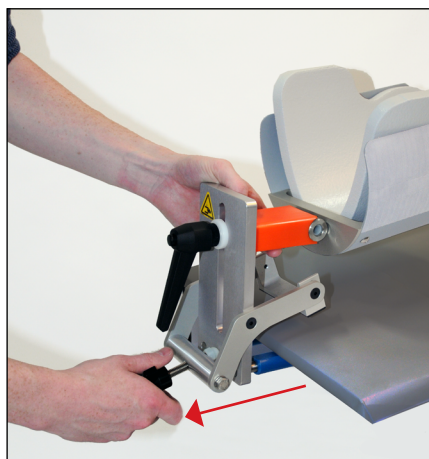

24



25



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com