


PRODUKTVEJLEDNING OG BRUGERMANUAL

8002048 og 8002049

DSA-2Q og DSA-2T Hovedholder
(Head Holder)



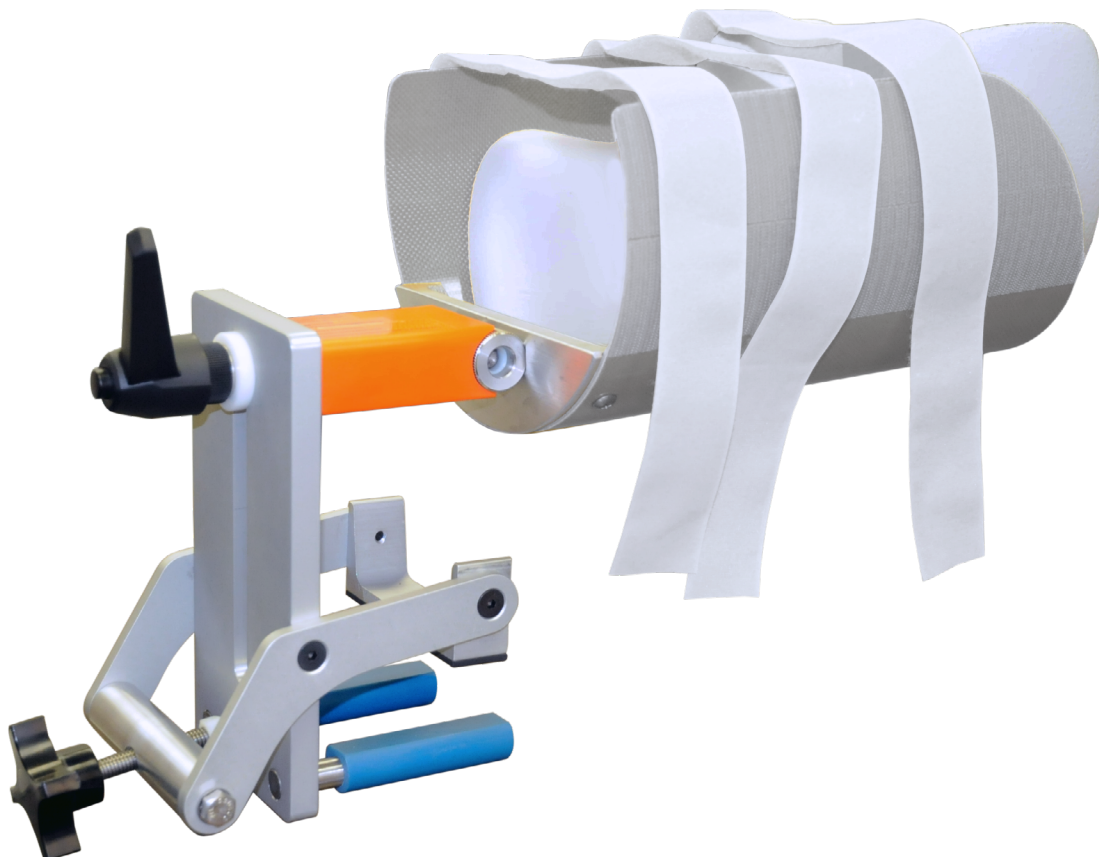

EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Fremstillet i USA af Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--

Cidex® er et registreret varemærke, der tilhører virksomheden Johnson & Johnson.

Clorox® er et registreret varemærke, der tilhører Clorox Company.

INDHOLDSFORTEGNELSE

ALMINDELIGE FORHOLDSREGLER	4
ADVARSLER	4
ALVORLIGE HÆNDELSER	4
BELASTNINGSKAPACITET	4
ADVARSELSMÆRKATER OG BESKRIVELSER.....	4
TILSIGTET ANVENDELSE	5
FUNKTIONER	6
BESKRIVELSE.....	6
VEDLIGEHOLDELSE	7
RENGØRING AF SYSTEMET	7
DESINFICERING AF SYSTEMET	7
BRUGSANVISNING	8
INSTALLATION.....	8
INDSTILLING	9
FJERNELSE	10

ALMINDELIGE FORHOLDSREGLER

ADVARSLER

! ADVARSEL ! DET ER IKKE TILLADT AT MODIFICERE DETTE UDSYR. HVIS EN DEL AF UDSYRET KOMMER UD FOR EN MEGET STOR BELASTNING UD OVER BELASTNINGSKAPACITETEN, SER UD TIL AT VÆRE BESKADIGET ELLER FUNGERER FORKERT, SKAL BRUG AF UDSYRET OMGÅENDE INDSTILLES OG QFIX KONTAKTES PÅ +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM.

ALVORLIGE HÆNDELSER

Rapportér alle alvorlige hændelser (f.eks. hændelser, der resulterer i eller har potentiale til at resultere i død eller alvorlig personskade) til både Qfix og den kompetente myndighed i dit land.

BELASTNINGSKAPACITET

Overstig IKKE en ensartet fordelt belastning på 10 kg (22 pund).

! BEMÆRK ! Det kan være nødvendigt at finjustere efter lejring af patienten.

! BEMÆRK ! Når patienten lejres, skal man være opmærksom på, at patienten ikke anbringes for højt i hovedholderen. Det vil være ubehageligt og kan forårsage artefakter.

ADVARSELSMÆRKATER OG BESKRIVELSER

Få en liste over symboler med definitioner på Qfix.com.

TILSIGTET ANVENDELSE

Hovedholderen (Head Holder) er designet til at lejre og immobilisere hovedet. Udstyret er primært beregnet til interventionelle neuroradiologiske procedurer. Det gælder også for alle interventionelle procedurer med henblik på at minimere patientens hovedbevægelse.

Hovedholderen er beregnet til anvendelse i et klinisk miljø af uddannede teknikere og læger.

! BEMÆRK ! Ifølge amerikansk lov må dette produkt kun sælges af eller på en læges anvisning.

PATIENTMÅLGRUPPER

Patienter, der gennemgår generelle medicinske eller kirurgiske procedurer, der involverer diagnostisk billeddannelse.

TILSIGTEDE BRUGERE

Den tilsigtede bruger til dette produkt er en person, som er kvalificeret i henhold til de lovgivningsmæssige krav i den respektive region.

FUNKTIONER

BESKRIVELSE

Produktet er designet til at komplementere og forbedre billedkvaliteten, ydelsen og produktiviteten af kardiovaskulært røntgenudstyr. Produktet støtter patientens hoved, hvorved forkert justering i forhold til det subtraherede billede reduceres og 3-D-billeder forbedres. Produktets enkle design gør det let at installere, justere og fjerne udstyret, og giver brugeren mulighed for at fokusere på patientens behov.

VEDLIGEHOELSE

RENGØRING AF SYSTEMET

Udstyret kan rengøres med et mildt, ikke-slibende rengørings- eller desinfektionsmiddel. Rengør udstyret ved at påføre midlet på en ren klud og tørre overfladen af.

DESINFICERING AF SYSTEMET

Følgende rengøringsmaterialer er blevet testet og er egnede til rengøring af overfladerne på enhederne. Se de specifikke anvisninger fra producenten af rengøringsmidlet vedrørende desinfektion af overfladen.

- Vand
- En 10 % Clorox®-blegeopløsning
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktiveret dialdehydmiddel
- Sæbe og vand

Sprøjt IKKE direkte på hovedholderen.

Hovedholderen må IKKE ligge i vand natten over.

Brug IKKE klorin til at rengøre hovedholderen.

Tjek regelmæssigt, at alle sikringer er fastspændte.

BRUGSANVISNING

INSTALLATION



1




2




3




4

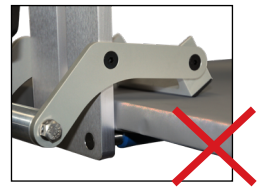

5

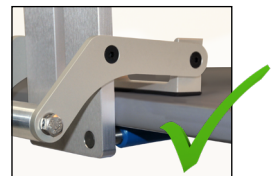


6

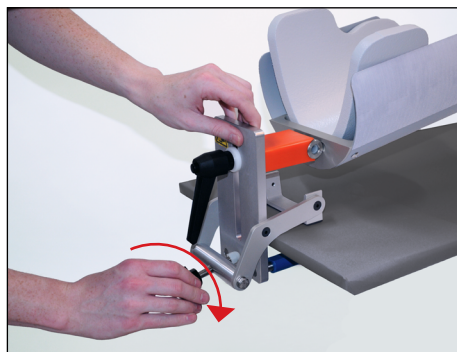


7

BRUGSANVISNING


INDSTILLING

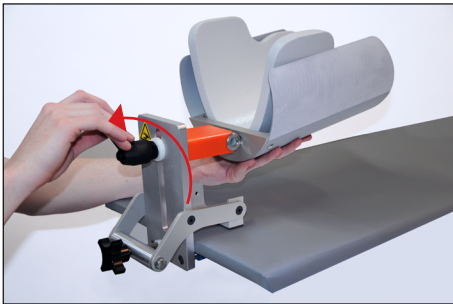

8

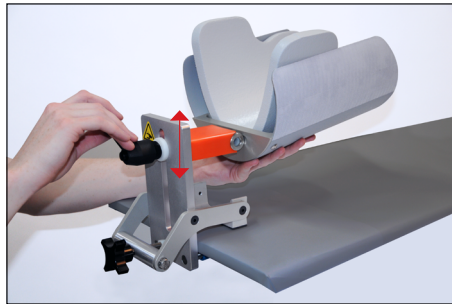

9

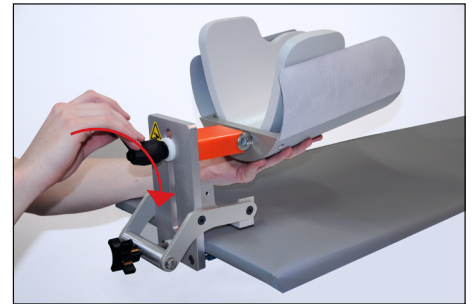


10



11




12

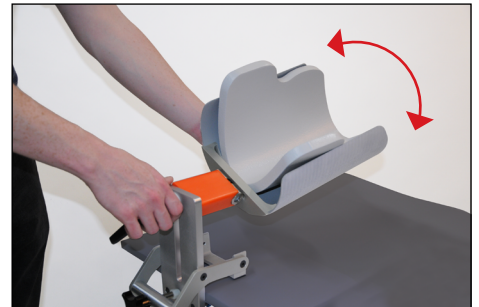


13




14

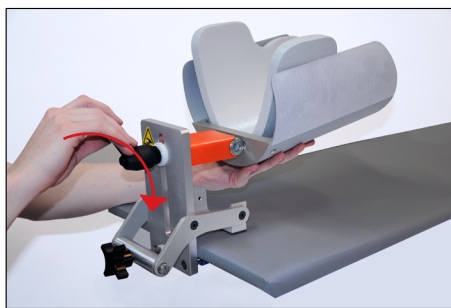


15

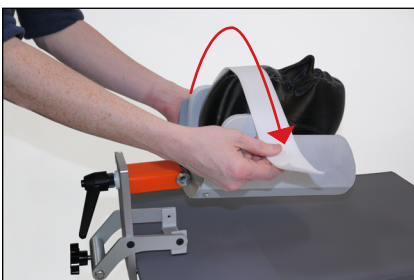

16

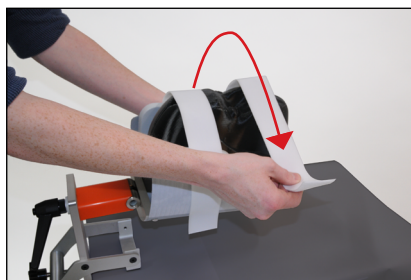


17

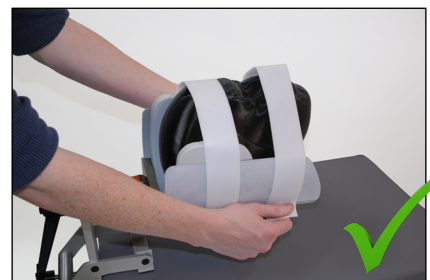

18




19

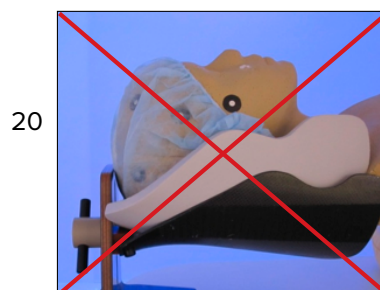


20

BRUGSANVISNING


FJERNELSE

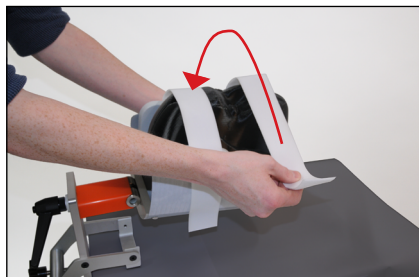


21

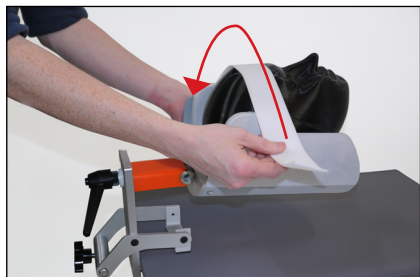

22

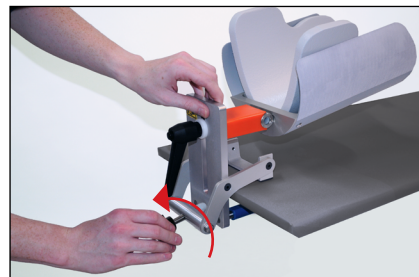

23

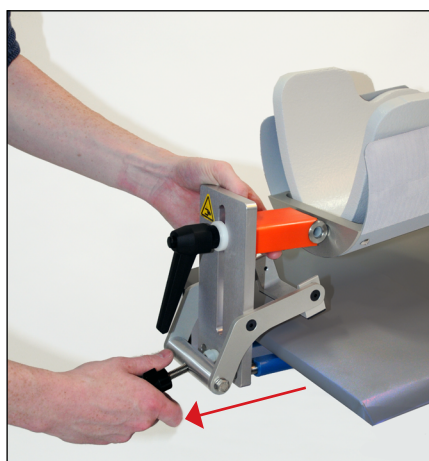

24



25



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

☎ +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004685_DA_E
2020-07