




positioning
patients for life.®

GUÍA DEL PRODUCTO Y MANUAL DEL USUARIO

8002048 y 8002049

Soportes de cabeza (Head Holder)
DSA-2Q y DSA-2T

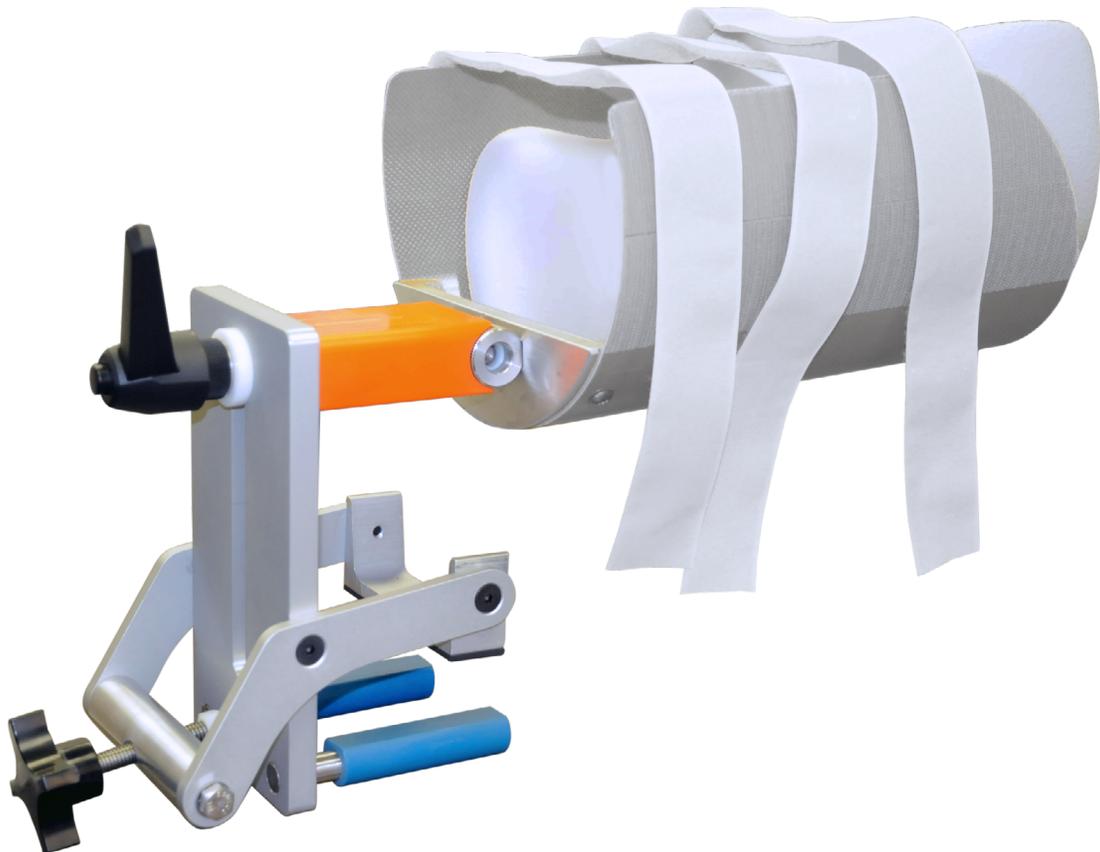



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Fabricado en EE. UU. por: Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---	---

Cidex® es una marca comercial registrada de Johnson & Johnson.

Clorox® es una marca comercial registrada de The Clorox Company.

ÍNDICE

PRECAUCIONES GENERALES.....	4
ENUNCIADOS DE ADVERTENCIA	4
INCIDENTES GRAVES.....	4
CAPACIDAD DE CARGA.....	4
ETIQUETAS Y DESCRIPCIONES DE ADVERTENCIAS	4
USO PREVISTO.....	5
CARACTERÍSTICAS.....	6
DESCRIPCIÓN.....	6
MANTENIMIENTO	7
LIMPIEZA DEL SISTEMA.....	7
DESINFECCIÓN DEL SISTEMA.....	7
INSTRUCCIONES DE USO.....	8
INSTALACIÓN	8
CONFIGURACIÓN.....	9
RETIRADA	10

PRECAUCIONES GENERALES

ENUNCIADOS DE ADVERTENCIA

¡ ADVERTENCIA ! NO SE PERMITE NINGUNA MODIFICACIÓN DE ESTE EQUIPO. SI CUALQUIER PIEZA DE ESTE DISPOSITIVO EXPERIMENTA UNA CARGA CATASTRÓFICA, PARECE DAÑADA O FUNCIONA INADECUADAMENTE, INTERRUMPA SU USO INMEDIATAMENTE Y PÓNGASE EN CONTACTO CON QFIX EN EL +1 484-720-6054 O EN TECHSUPPORT@QFIX.COM.

INCIDENTES GRAVES

Notifique cualquier incidente grave (por ejemplo, incidentes que hayan causado o hayan podido causar lesiones graves o la muerte) tanto a Qfix como al organismo competente de su país.

CAPACIDAD DE CARGA

NO supere los 10 kg (22 lb) de carga uniformemente distribuida.

¡ NOTA ! Una vez colocado el paciente, puede ser necesario realizar ajustes más finos.

¡ NOTA ! Al colocar al paciente, tenga cuidado de no ponerlo demasiado arriba en el soporte de cabeza. Esto podría resultarle incómodo y dar lugar a artefactos.

ETIQUETAS Y DESCRIPCIONES DE ADVERTENCIAS

Vaya a Qfix.com para consultar un listado de los símbolos y sus definiciones.

USO PREVISTO

El soporte de cabeza (Head Holder) está diseñado para posicionar e inmovilizar la cabeza. Este dispositivo está concebido principalmente para procedimientos intervencionistas de neurorradiología. También puede utilizarse en cualquier otro procedimiento intervencionista en el que sea necesario reducir al mínimo el movimiento de la cabeza del paciente.

El soporte de cabeza está indicado para ser utilizado por técnicos y médicos debidamente formados, en un entorno clínico.

¡ NOTA ! La ley federal de Estados Unidos permite la venta de este dispositivo únicamente a facultativos o bajo prescripción facultativa.

GRUPOS OBJETIVO DE PACIENTES

Pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos o médicos generales que impliquen la obtención de imágenes de diagnóstico.

USUARIOS PREVISTOS

El usuario previsto de los productos es una persona cualificada de acuerdo con los requisitos de la región reglamentaria.

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

El producto está diseñado para complementar y mejorar la calidad de las imágenes, el rendimiento y la productividad del equipo de radiología cardiovascular. El producto proporciona un soporte para la cabeza del paciente, y reduce así los errores de alineación que se producen durante la sustracción de imágenes y la mejora de las imágenes en 3D. El diseño sencillo del producto facilita la instalación, el ajuste y la retirada, permitiendo al usuario centrarse en las necesidades del paciente.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL SISTEMA

El dispositivo se puede limpiar con una solución limpiadora o desinfectante suave y no abrasiva. Para limpiar, aplique la solución en un paño limpio y frote la superficie.

DESINFECCIÓN DEL SISTEMA

A continuación se enumeran los materiales de limpieza que han sido evaluados y comprobados como adecuados para limpiar las superficies de los dispositivos. Para desinfectar la superficie, consulte las instrucciones específicas del fabricante del producto de limpieza.

- Agua
- Solución blanqueadora Clorox® al 10 %
- Alcohol isopropílico
- Solución de dialdehído activada al 2,4 % Cidex®
- Jabón y agua

NO pulverice líquidos directamente sobre el soporte de cabeza.

NO deje el soporte de cabeza sumergido en agua durante toda la noche.

NO utilice cloro para limpiar el soporte de cabeza.

Compruebe con regularidad todos los cierres para ver si están apretados.

INSTRUCCIONES DE USO

INSTALACIÓN



1




2




3




4

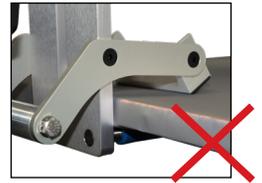

5

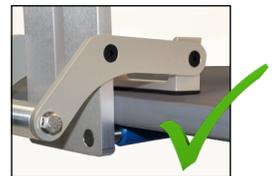


6

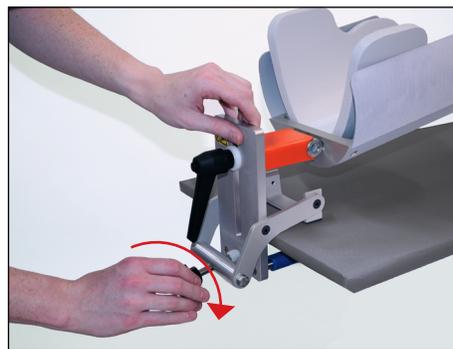


7

INSTRUCCIONES DE USO

CONFIGURACIÓN

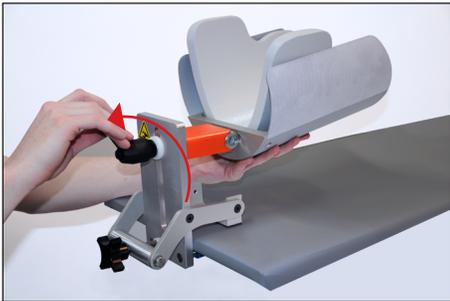

8

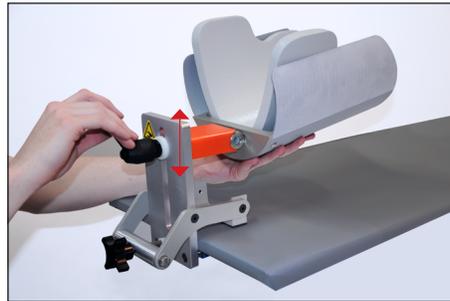

9




10



11



12

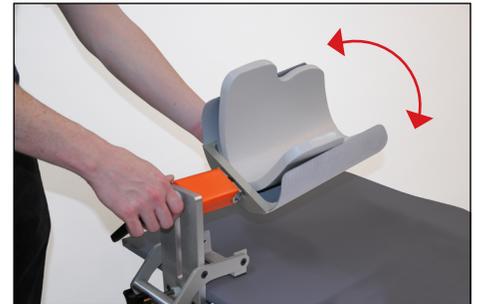

13




14



15



16

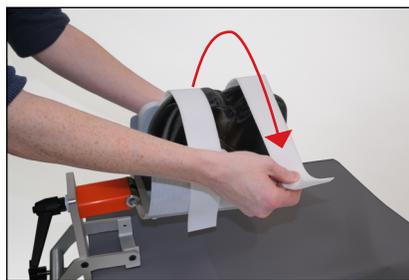

17



18




19



20

INSTRUCCIONES DE USO

RETIRADA

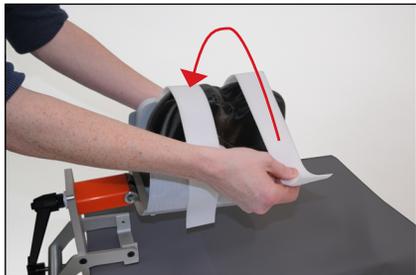

21



22



23



24



25



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com