




positioning
patients for life.®

electronic part number is
wrong

TOOTE- JA KASUTUSJUHEND

8002048 ja 8002049

DSA-2Q ja DSA-2T Peahoidja
(Head Holder)

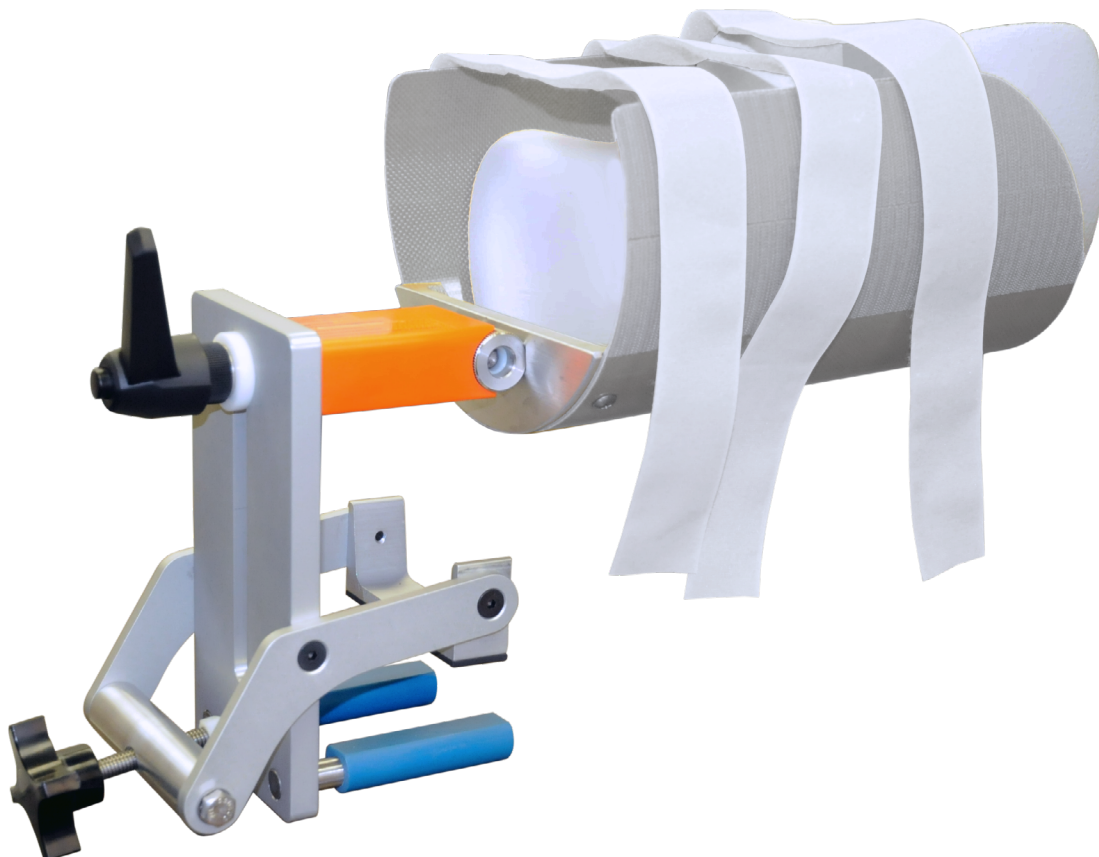



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Valmistatud USAs, tootja: Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---

Cidex® on ettevõtte Johnson & Johnson registreeritud kaubamärk.

Clorox® on ettevõtte The Clorox Company registreeritud kaubamärk.

SISUKORD

ÜLDISED ETTEVAATUSABINÕUD	4
HOIATUSLAUSED	4
RASKED JUHTUMID	4
NIMIKOORMUS	4
HOIATUSMÄRGID JA KIRJELDUSED	4
KAVANDATUD KASUTUS	5
ISELOOMUSTUS	6
KIRJELDUS	6
HOOLDUS	7
SÜSTEEMI PUHASTAMINE	7
SÜSTEEMI DESINFITSEERIMINE	7
KASUTUSJUHISED	8
PAIGALDAMINE	8
SEADISTUS	9
EEMALDAMINE	10

ÜLDISED ETTEVAATUSABINÕUD

HOIATUSLAUSED

! HOIATUS! SEADMESTIKUS EI OLE LUBATUD TEHA MISTAHES MUUDATUSI. KUI SEADME MISTAHES OSA ON KANNATANUD KATASTROOFILIST KOORMUST, NÄIB KAHJUSTATUD VÕI TÖÖTAB MITTENÕUETEKOHASELT, LÕPETAGE VIIVITAMATULT SELLE KASUTAMINE JA VÕTKE ÜHENDUST ETTEVÕTTEGA QFIX TELEFONIL +1 484-720-6054 VÕI MEILIAADRESSIL TECHSUPPORT@QFIX.COM.

RASKED JUHTUMID

Andke teada igasugustest rasketest juhtumitest (nt juhtumitest, mis lõppevad või millel on potentsiaal lõppeda surma või raske vigastusega) nii kaubamärgile Qfix kui ka oma riigi pädevale asutusele.

NIMIKOORMUS

ÄRGE ületage ühtlaselt jaotatud koormust 10 kg (22 naela).

! MÄRKUS ! Patsiendi kohale paigutamise järel võib osutuda vajalikuks täiendav peenreguleerimine.

! MÄRKUS ! Patsiendi kohale paigutamisel jälgige, et ta peahoidjasse liiga kõrgele ei asetuks. See põhjustab ebamugavust ja võimalikke artefakte.

HOIATUSMÄRGID JA KIRJELDUSED

Vt sümbolite ja nende definitisoonide nimekirja lehelt Qfix.com.

KAVANDATUD KASUTUS

Peahoidja (Head Holder) on ette nähtud pea fikseerimiseks. Seade on peamiselt ette nähtud kasutamiseks interventsionaalsetes neuroradioloogia protseduurides. Seadet võib samuti kasutada patsiendi pea liikumise minimeerimiseks kõikides interventsionaalsetes protseduurides.

Peahoidja on ette nähtud kasutamiseks haiglatingimustes vastava ettevalmistusega tehnikute ja arstide poolt.

! MÄRKUS ! Ameerika Ühendriikide föderaalne seadus piirab seda seadet müüa või et arst.

PATSIENTIDE SIHTGRUPID

Patsiendid, kellele tehakse üldiseid meditsiinilisi või kirurgilisi protseduure, mis hõlmavad diagnostilist kuvamist.

ETTENÄHTUD KASUTAJAD

Toodete kasutajaks on ette nähtud vastava piirkonna regulatiivsete nõuete kohaselt kvalifitseeritud isik.

ISELOOMUSTUS

KIRJELDUS

Toode on ette nähtud kardiovaskulaarse röntgeniaparatuuri täiendamiseks ja selle pildikvaliteedi, töönäitajate ja jõudluse parendamiseks. Toode toetab patsiendi pead, vähendades lahutatud kujutise joondamishälbeid ning parendades 3-D kujutisi. Toote lihtne konstruktsioon tagab selle kerge paigaldamise ja eemaldamise ning võimaldab kasutajal keskenduda patsiendi vajadustele.

HOOLDUS

SÜSTEEMI PUHASTAMINE

Käetoe (Armboard) puhastamiseks võib kasutada õrnatoimelist mitteabrasiivset puhastus- või desinfitseerimislahust. Puhastamiseks kandke lahus puhtale lapile ja pühkige seadme pinda.

SÜSTEEMI DESINFITSEERIMINE

Käetoe pindade puhastamiseks on testitud ja tunnustatud sobivaks järgmised puhastusmaterjalid. Käetoe pinna desinfitseerimise kohta vt vastavaid puhastusvahendi tootja juhiseid.

- Valgendi Clorox 10% lahus
- Isopropüülalkohol
- Aktiveeritud dialdehüüdi Cidex® 2,4% lahus
- Seep ja vesi

ÄRGE pihustage otse peahoidjale.

ÄRGE jätke peahoidjat ööseks vette.

ÄRGE kasutage peahoidja puhastamiseks kloori.


Kontrollige perioodiliselt kinnitite pingutust.

KASUTUSJUHISED

PAIGALDAMINE



1

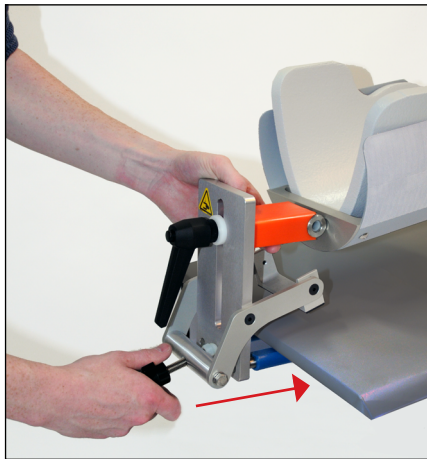


2




3




4

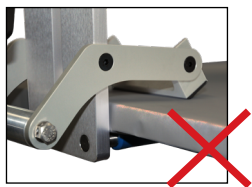

5

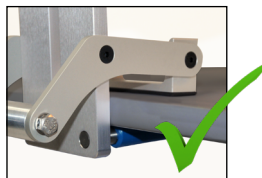


6

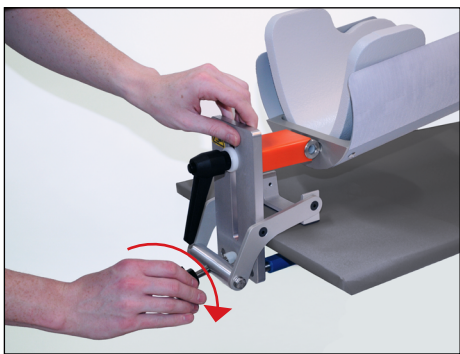


7

KASUTUSJUHISED


SEADISTUS

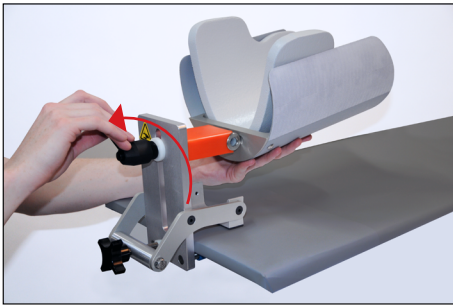

8

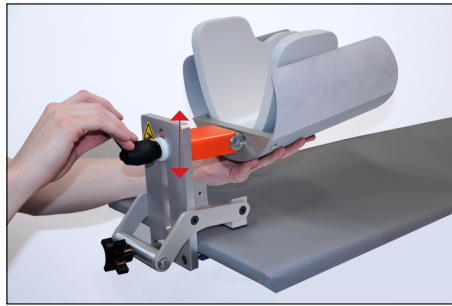

9

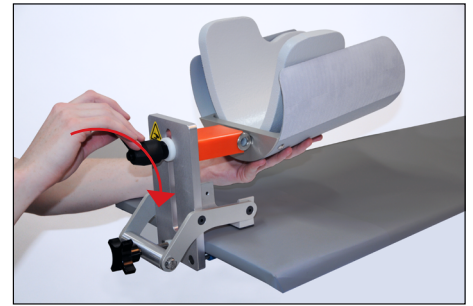


10



11




12

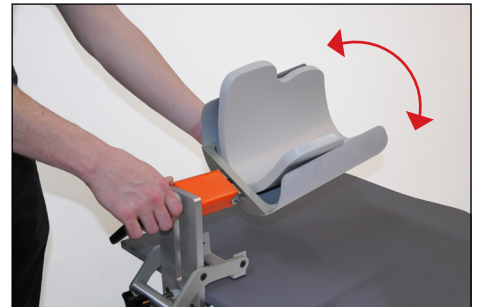


13




14

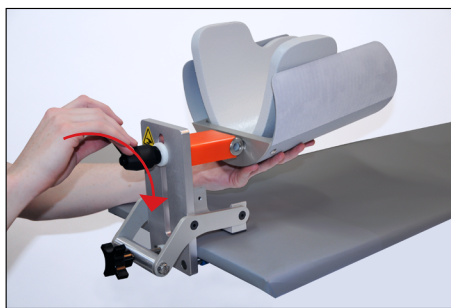


15

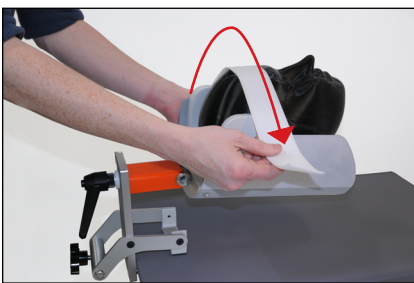

16

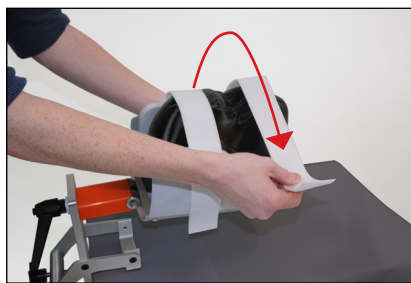


17

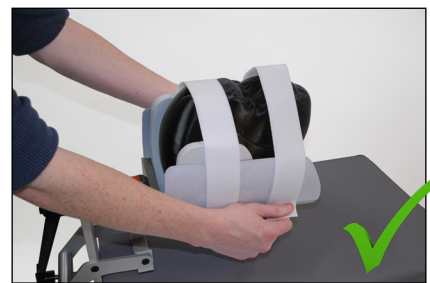

18




19

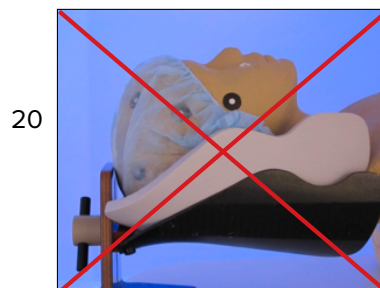


20

KASUTUSJUHISED


EEMALDAMINE

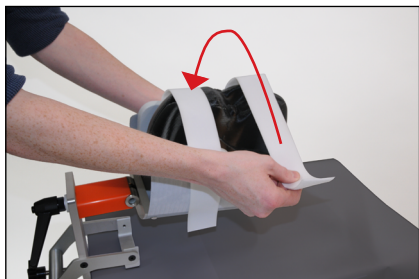


21

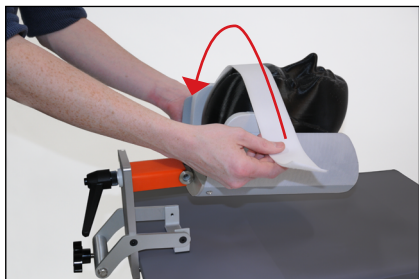

22

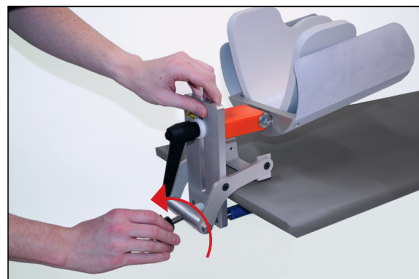

23

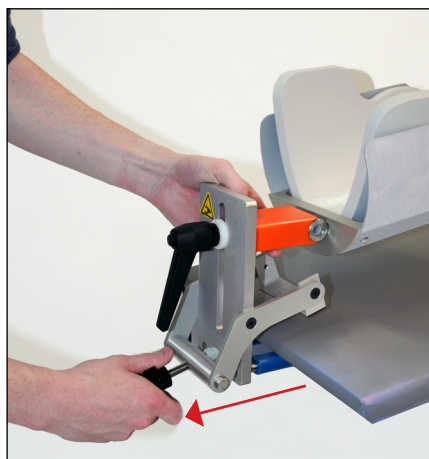

24



25



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com