




positioning
patients for life.®

TUOTEOHJE JA KÄYTTÖOPAS

8002048 ja 8002049

DSA-2Q ja DSA-2T Pään pidike
(Head Holder)

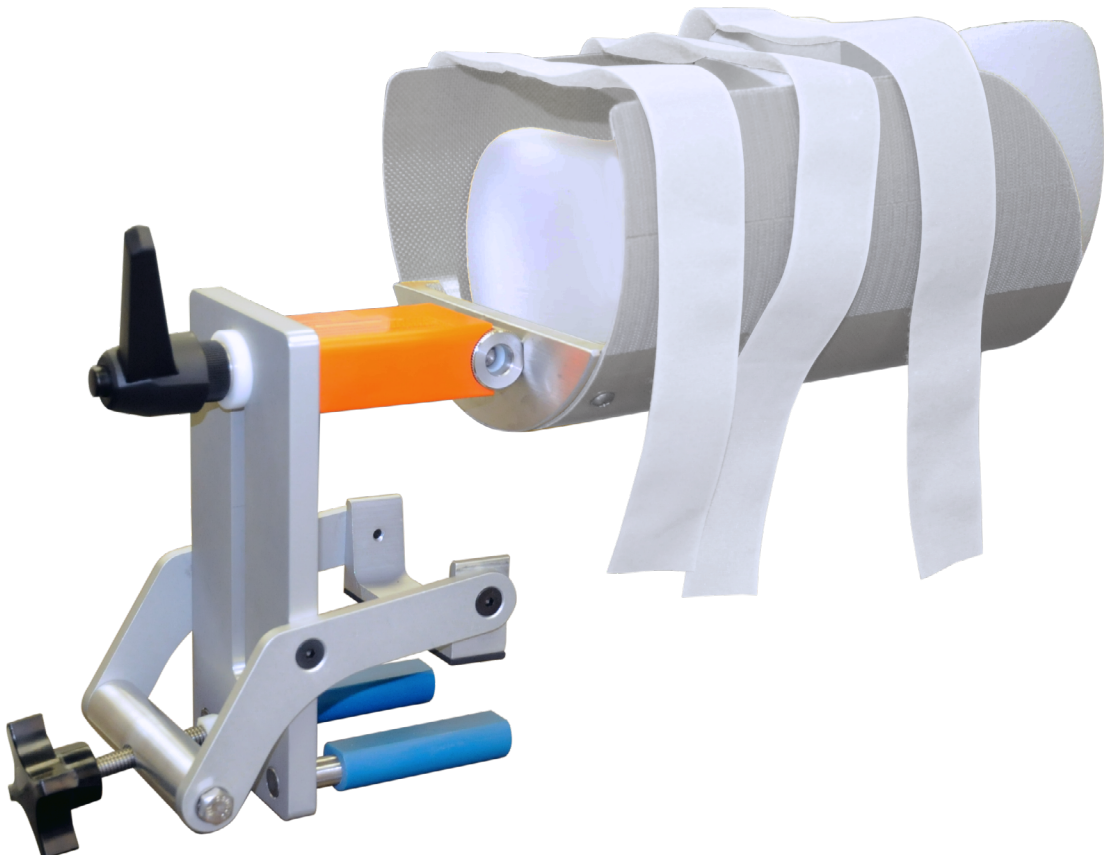



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Valmistaja USA:ssa Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--

Cidex® on Johnson & Johnsonin rekisteröity tavaramerkki.

Clorox® on The Clorox Companyn rekisteröity tavaramerkki.

SISÄLTÖ

YLEISET VAROTOIMET	4
VAROITUSLAUSEKKEET	4
VAKAVAT HAITTATAPAHTUMAT	4
KANTOKYKY	4
VAROITUSTARRAT JA KUVAUKSET	4
KÄYTTÖTARKOITUS	5
KUVAUS	6
KUVAUS	6
YLLÄPITO	7
JÄRJESTELMÄN PUHDISTAMINEN	7
JÄRJESTELMÄN DESINFIOIMINEN	7
KÄYTTÖOHJEET	8
ASENNUS	8
ALKUASETUKSET	9
POISTAMINEN	10

YLEISET VAROTOIMET

VAROITUSLAUSEKKEET

! VAROITUS ! TÄTÄ LAITTEISTOA EI SAA MUUNTA A MILLÄÄN TAVALLA. JOS TÄMÄN LAITTEEN MITÄÄN OSAA KUORMITETAAN LIIKAA, SE NÄYTTÄÄ VAURIOITUNEELTA TAI TOIMII VIRHEELLISESTI, LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI JA OTA YHTEYTTÄ QFIXIIN, PUH. +1 484-720-6054 TAI SÄHKÖPOSTITSE OSOITTEESEEN TECHSUPPORT@QFIX.COM.

VAKAVAT HAITTATA PAHTUMAT

Ilmoita kaikista vakavista haittatapahtumista (esim. tapahtumat, joista seuraa tai voi seurata kuolema tai vakava vamma) sekä Qfixille että oman maasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

KANTOKYKY

10 kg:n (22 paunan) yhtäläisesti jakautunutta kuormaa EI SAA ylittää.

! HUOMAA ! Tarkempia säätöjä on kenties tehtävä, kun potilas on paikallaan.

! HUOMAA ! Potilasta sijoitettaessa on oltava tarkkana, jotta potilasta ei aseteta liian korkealle pään pidikkeeseen. Tämä on epämukavaa ja voi aiheuttaa artefakteja.

VAROITUSTARRAT JA KUVAUKSET

Symboliluettelo ja symbolien määritelmät ovat osoitteessa Qfix.com.

KÄYTTÖTARKOITUS

Pään pidike (Head Holder) on suunniteltu pään asettelemiseen ja liikkumatta pitämiseen. Tämä laite on tarkoitettu ensisijaisesti interventionaalsiin neuroradiologiatoinenpiteisiin. Se soveltuu myös mihin tahansa interventionaaliseen toimenpiteeseen potilaan pään liikkumisen minimoimista varten.

Pään pidike on tarkoitettu kliniseen ympäristöön koulutettujen teknikoiden ja klinikoiden käytettäväksi.

! HUOMAA ! Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksellä.

POTILASKOHDERYHMÄT

Potilaat, joille tehdään diagnostista kuvantamista edellyttävä yleislääketieteellinen tai kirurginen toimenpide.

TARCOITETUT KÄYTTÄJÄT

Tuotteiden tarkoitettu käyttäjä on henkilö, jolla on kyseisellä lainkäyttöalueella edellytetty pätevyys.

KUVAUS

KUVAUS

Tuote on tarkoitettu täydentämään ja parantamaan kardiovaskulaarisen röntgenlaitteen kuvan laatua, suorituskykyä ja tuottavuutta. Tuote tukee potilaan päätä, vähentää kohdistusvirheitä subtraktiokuvan kanssa ja parantaa kolmiulotteisia kuvia. Tuotteen yksinkertaisen muotoilun ansiosta laite on helppo asentaa, säätää ja poistaa, jolloin käyttäjä voi keskittyä potilaan tarpeisiin.

YLLÄPITO

JÄRJESTELMÄN PUHDISTAMINEN

Laite voidaan puhdistaa miedolla, hankaamattomalla pesu- tai desinfiointiliuoksella. Puhdista kostuttamalla puhtas liina liuokseen ja pyyhkimällä pinta.

JÄRJESTELMÄN DESINFIOIMINEN

Seuraavat pesuaineet on testattu ja niiden on havaittu olevan asianmukaisia laitteiden pintojen puhdistamiseen. Pinnan desinfioinnissa on noudatettava pesuaineen valmistajan erityisohjeita.

- Vesi
- 10 % Clorox®-valkaisuaineliuos
- Isopropyylialkoholi
- Cidex® 2,4 % aktivoitu dialdehydiliuos
- Saippua ja vesi

Pään pidikkeeseen EI SAA suihkuttaa suoraan.

Pään pidikettä EI SAA jättää veteen yön yli.

Klooria EI SAA käyttää pään pidikkeen puhdistamiseen.

Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukkoja.

KÄYTTÖOHJEET

ASENNUS



1




2




3




4

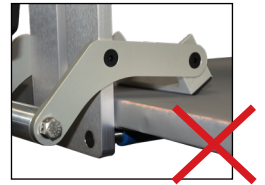

5

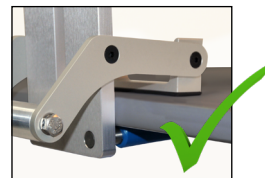


6

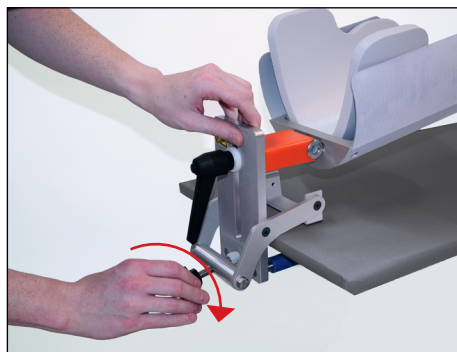


7

KÄYTTÖOHJEET


ALKUASETUKSET

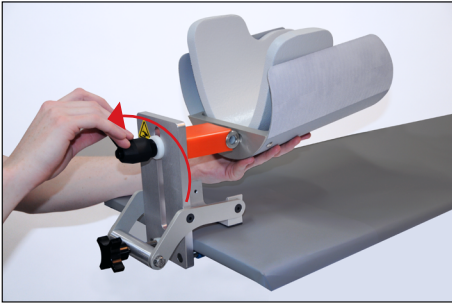

8

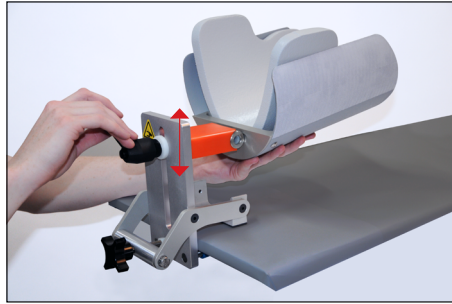

9

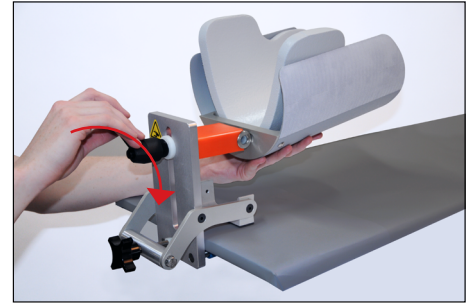


10



11




12

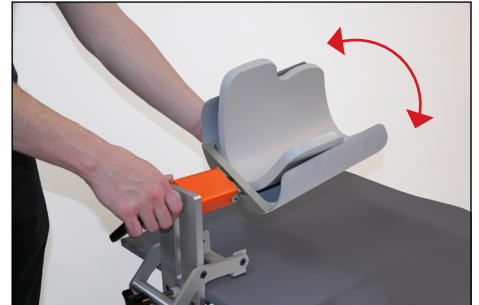


13




14

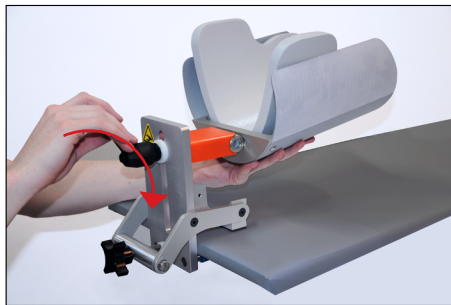


15

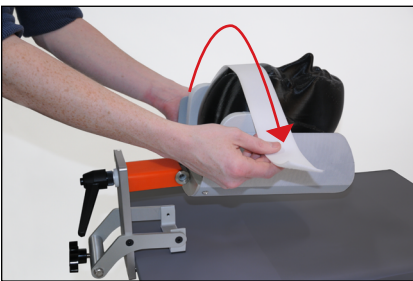

16

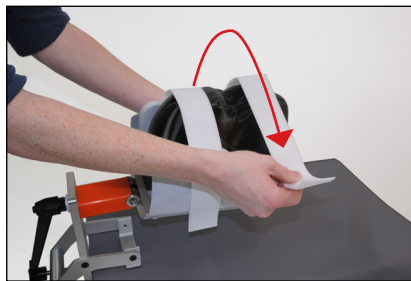

17

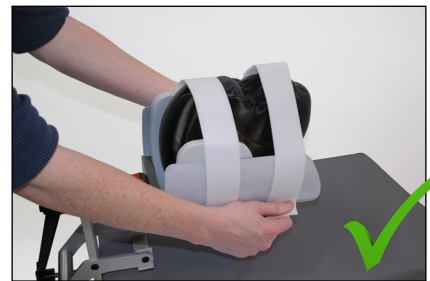

18




19




20

KÄYTTÖOHJEET


POISTAMINEN

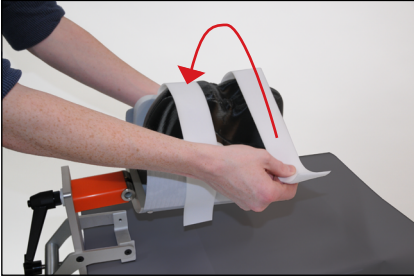


21

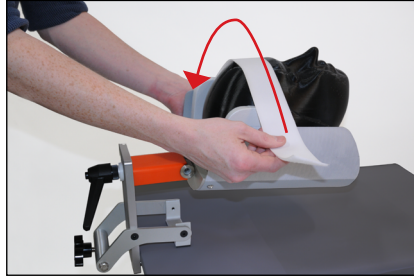

22

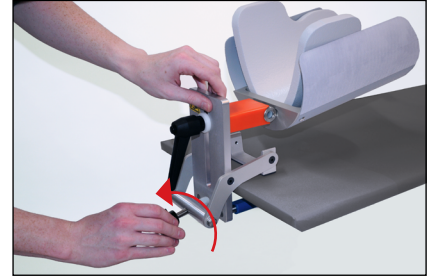

23

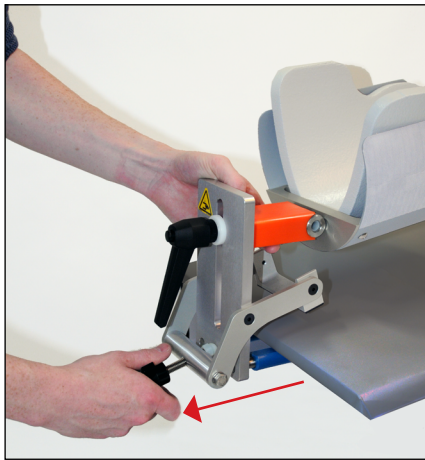

24



25



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com