


VODIČ I UPUTE ZA UPORABU PROIZVODA

8002048 i 8002049

Držać glave (Head Holder)
DSA-2Q i DSA-2T



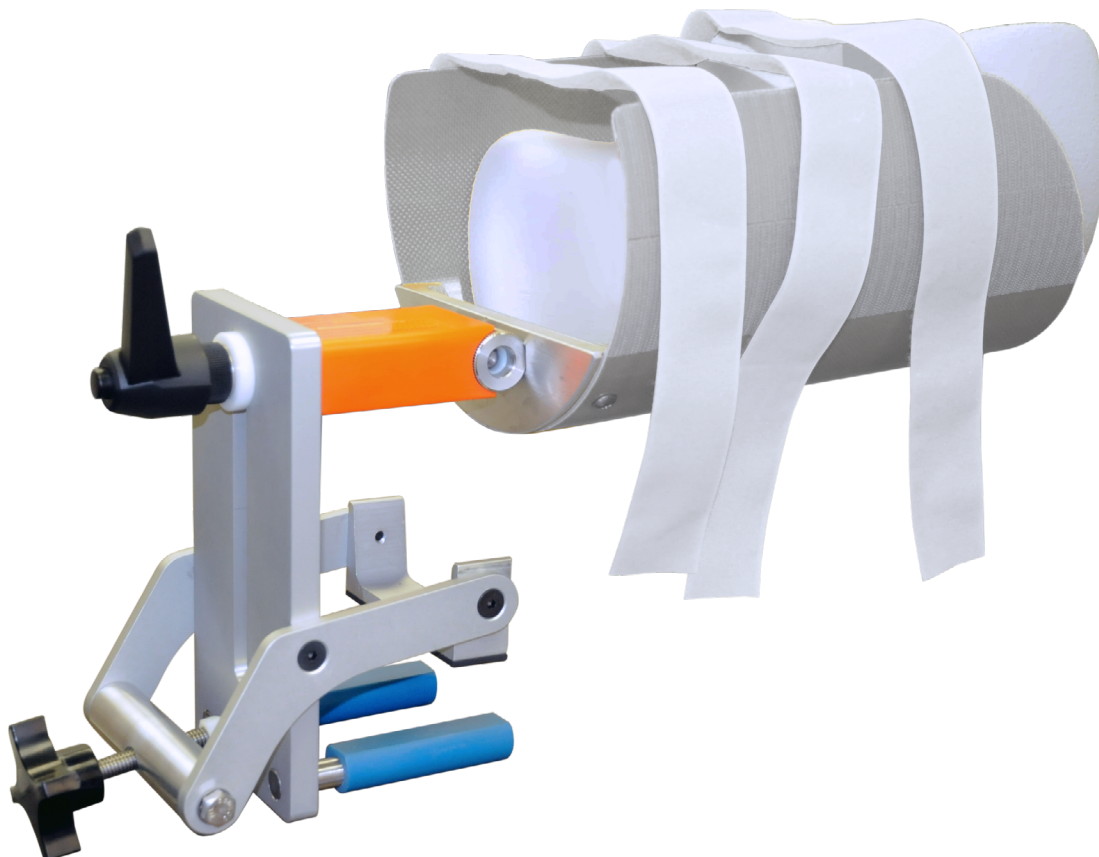

EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Proizvelo u SAD-u društvo Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--	---

Cidex® je registrirani zaštitni znak društva Johnson & Johnson.

Clorox® je registrirani zaštitni znak društva The Clorox Company.

SADRŽAJ

OPĆE MJERE OPREZA	4
UPOZORAVAJUĆE IZJAVE	4
OZBILJAN ŠTETNI DOGAĐAJI	4
DOPUŠTENO OPTEREĆENJE	4
OZNAKE I OPISI UPOZORENJA	4
NAMJENA	5
ZNAČAJKE	6
OPIS	6
ODRŽAVANJE	7
ČIŠĆENJE SUSTAVA	7
DEZINFEKCIJA SUSTAVA	7
UPUTE ZA RAD	8
INSTALACIJA	8
POSTAVLJANJE	9
UKLANJANJE	10

OPĆE MJERE OPREZA

UPOZORAVAJUĆE IZJAVE

! UPOZORENJE ! NISU DOPUŠTENE IZMJENE OVE OPREME. AKO BILO KOJI DIO OVOG UREĐAJA BUDE IZLOŽEN OPTEREĆENJU U SLUČAJU KATASTROFE, DOIMA SE OŠTEĆENIM ILI NEPRAVILNO RADI, SMJESTA GA PRESTANITE UPOTREBLJAVATI I KONTAKTIRAJTE S DRUŠTVOM QFIX NA BR. TEL. +1 484-720-6054 ILI POŠALJITE PORUKU E-POŠTE NA ADRESU TECHSUPPORT@QFIX.COM.

OZBILJAN ŠTETNI DOGAĐAJI

Sve štetne događaje (npr. štetne događaje koji dovode do ili mogu dovesti do smrti ili teške ozljede) prijavite tvrtki Qfix i nadležnom tijelu u vašoj zemlji.

DOPUŠTENO OPTEREĆENJE

NEMOJTE prekoračiti 10 kg (22 funte) ravnomjerno raspoređenog opterećenja.

! BILJEŠKA ! Možda budu potrebne manje prilagodbe nakon što se pacijent smjesti.

! BILJEŠKA ! Kada namještate pacijenta, obratite pažnju kako ga ne biste postavili suviše visoko u držaču glave. To će biti neudobno i može uzrokovati artefakte.

OZNAKE I OPISI UPOZORENJA

Popis simbola i njihovih definicija potražite na web-mjestu Qfix.com.

NAMJENA

Držalac glave (Head Holder) je predviđen za namještanje i imobilizaciju glave. Uređaj je prvenstveno namijenjen interventnim neuroradiološkim postupcima. To se također odnosi na bilo koji drugi interventni postupak kako bi se smanjili pacijentovi pokreti glave.

Držalac glave namijenjen je uporabi u kliničkom okruženju od strane osposobljenih tehničara i kliničara.

! BILJEŠKA ! Savezni zakon SAD-a ograničava prodaju ovog uređaja po narudžbi liječnika ili od strane samog liječnika.

CILJANA SKUPINA PACIJENATA

Pacijenti koji se podvrgavaju općim medicinskim ili kirurškim postupcima koji uključuju dijagnostičko snimanje.

PREDVIĐENI KORISNICI

Predviđeni korisnik proizvoda osoba je kvalificirana u skladu sa zahtjevima regulatornog područja.

ZNAČAJKE

OPIS

Proizvod je predviđen za upotpunjavanje i poboljšanje kvalitete slike, izvedbe i produktivnosti kardiovaskularne rendgenske opreme. Proizvod podupire pacijentovu glavu smanjujući odstupanje od suptrahirane slike te poboljšavajući 3D slike. Jednostavni dizajn proizvoda omogućuje laganu instalaciju, prilagodbu i uklanjanje te dopušta korisniku da se usredotoči na potrebe pacijenta.

ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE SUSTAVA

Uređaj se može čistiti blagom, neabrazivnom otopinom za čišćenje ili dezinfekciju. Uređaj ne prskajte i ne polijevajte tekućinama. Pri čišćenju, stavite otopinu za čišćenje na čistu krpu i obrišite površinu.

DEZINFEKCIJA SUSTAVA

Sljedeći su materijali za čišćenje testirani i odobreni za čišćenje površina uređaja. Za dezinfekciju površine proučite specifične upute proizvođača sredstva za čišćenje.

- Voda
- 10 %-tna otopina izbjeljivača Clorox®
- Izopropilni alkohol
- 2,4 %-tna otopina aktiviranog dialdehida Cidex®
- Sapun i voda

NEMOJTE prskati direktno po držaču glave.

NEMOJTE ostavljati držač glave u vodi preko noći.

NEMOJTE čistiti držač glave klorom.

Povremeno provjerite jesu li sve spona dobro pritegnute.

UPUTE ZA RAD

INSTALACIJA



1




2




3




4

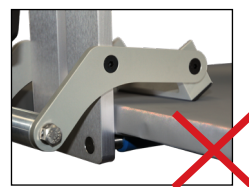

5

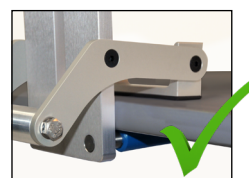


6

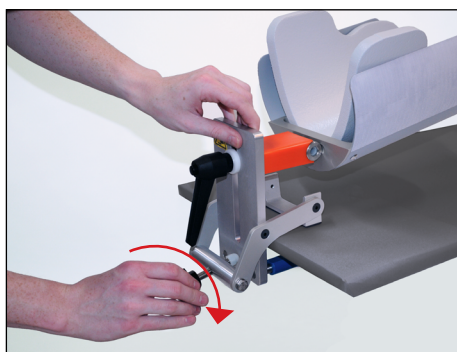


7

UPUTE ZA RAD


POSTAVLJANJE

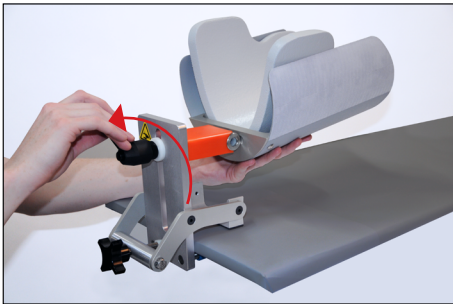


8

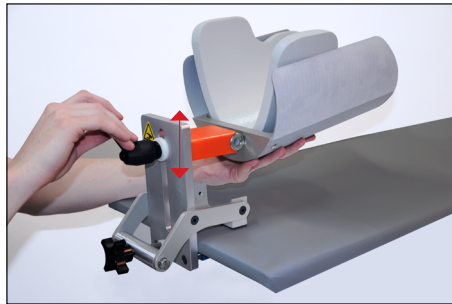

9

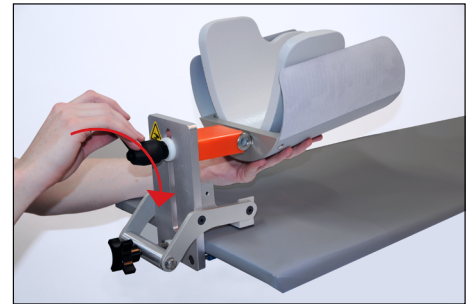

10

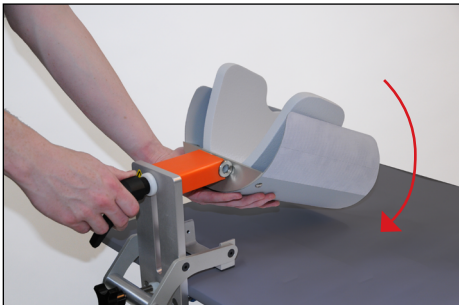

11




12




13




14

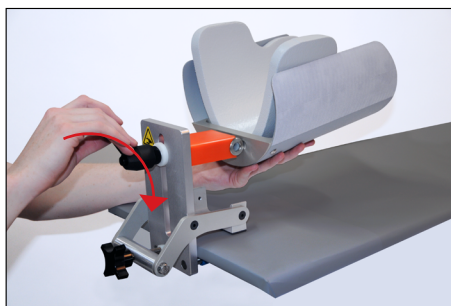


15

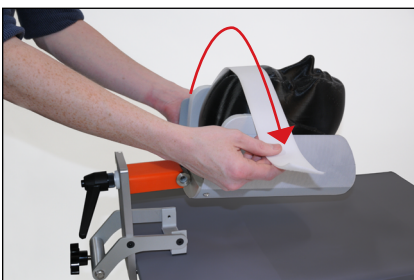

16

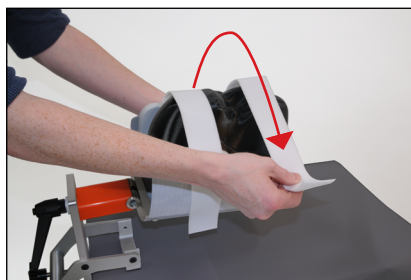


17

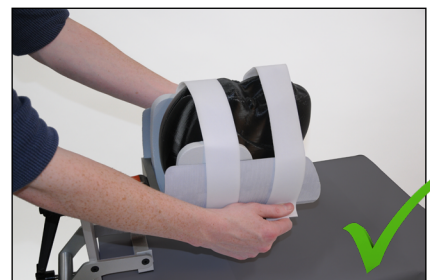

18




19

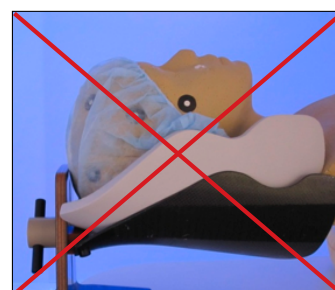


20

UPUTE ZA RAD


UKLANJANJE

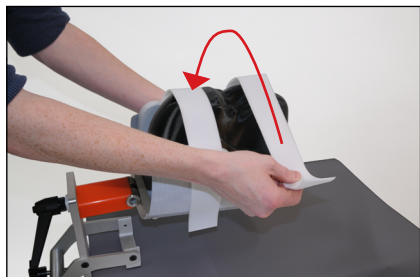


21

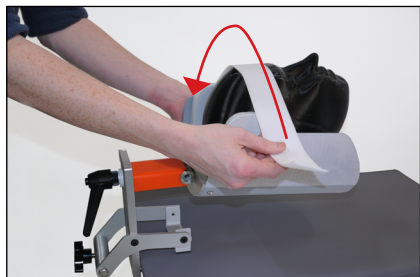

22

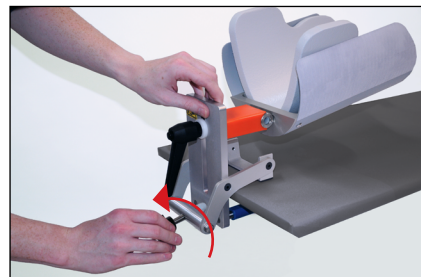

23

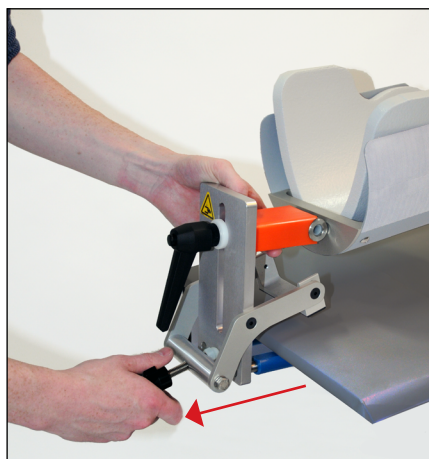

24



25



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004685_HR_E
2020-07