




positioning  
patients for life.®

# 제품 가이드 및 사용 설명서

8002048 및 8002049

DSA-2Q 및 DSA-2T 머리 받침대  
(Head Holder)

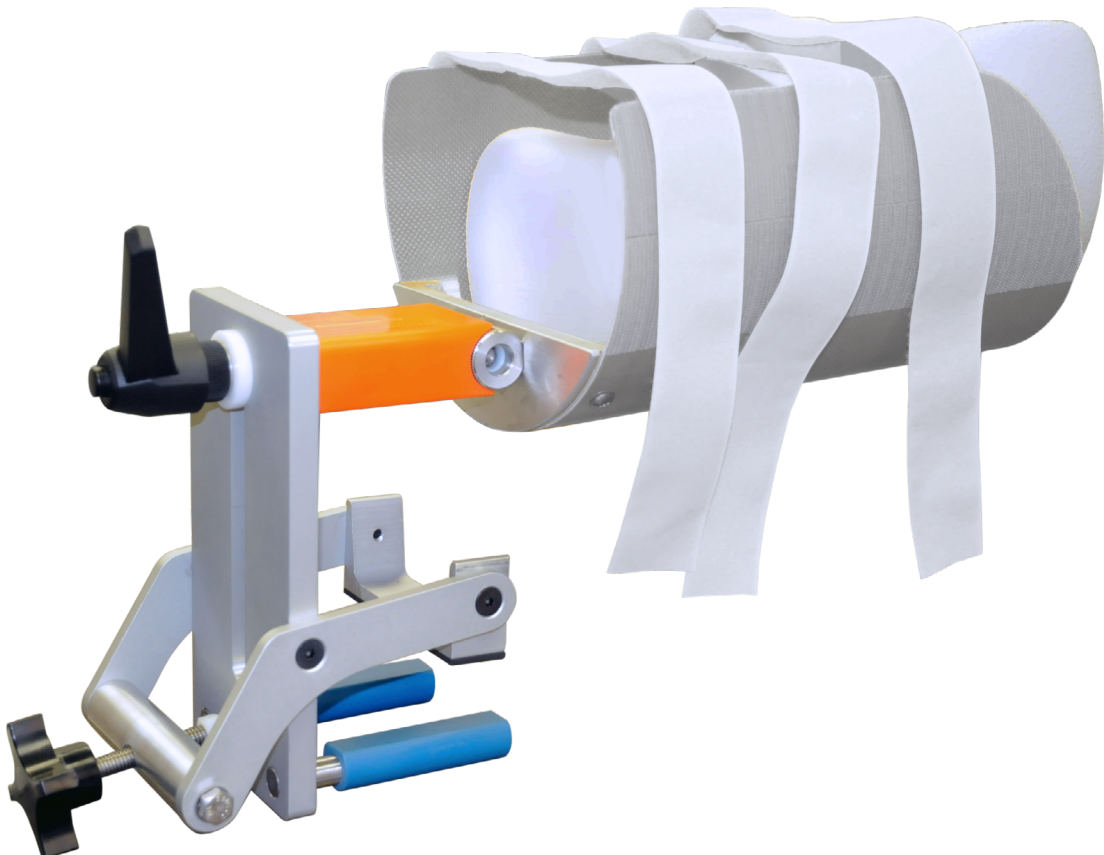



|                              |  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>EC</div> <div>REP</div> |  | <div>Advena Limited</div> <div>Tower Business Centre, 2nd Flr</div> <div>Tower Street, Swatar, BKR 4013</div> <div>Malta</div> | <div> 제작: 미국</div> <div>Qfix</div> <div>440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA</div> <div>+1 610-268-0585 <a href="http://www.Qfix.com">www.Qfix.com</a></div> |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cidex®는 Johnson & Johnson의 등록 상표입니다.  
Clorox®는 The Clorox Company의 등록 상표입니다.

# 목차

|                  |    |
|------------------|----|
| 일반 주의 사항 .....   | 4  |
| 경고문 .....        | 4  |
| 중대한 사고 .....     | 4  |
| 정격 하중 .....      | 4  |
| 경고 라벨 및 설명 ..... | 4  |
| 사용 용도 .....      | 5  |
| 기능 .....         | 6  |
| 설명 .....         | 6  |
| 유지보수 .....       | 7  |
| 시스템 청소 .....     | 7  |
| 시스템 소독 .....     | 7  |
| 작동 지침 .....      | 8  |
| 설치 .....         | 8  |
| 설정 .....         | 9  |
| 제거 .....         | 10 |

# 일반 주의 사항

## 경고문

**! 경고 !** 이 장비의 수정은 허용되지 않습니다. 이 장치에 치명적인 하중이 걸리거나 장치가 손상된 것으로 보이거나 제대로 작동하지 않을 경우 즉시 사용을 중단하고 QFIX에 전화(+1 484-720-6054) 또는 이메일 (TECHSUPPORT@ QFIX.COM)로 연락하십시오.

## 중대한 사고

모든 중대한 사고(예, 사망 또는 중대한 손상을 초래하거나 또는 이를 초래할 가능성이 있는 사고)에 대해서는 Qfix와 현지 관할당국에 보고하십시오.

## 정격 하중

10 kg (22 lb) 등분포 하중을 초과하지 마십시오.

**! 노트 !** 환자가 제 위치에 놓이면 미세 조정이 필요할 수 있습니다.

**! 노트 !** 환자의 위치를 잡을 때 환자를 머리 받침대에 너무 높게 배치하지 않도록 주의하십시오. 너무 높게 배치하면 불편하고 인공음영을 야기할 수 있습니다.

## 경고 라벨 및 설명

기호 및 정의 목록은 [Qfix.com](http://Qfix.com)을 참조하십시오.

# 사용 용도

머리 받침대(Head Holder)는 머리의 위치를 잡고 움직이지 않도록 고정하기 위해 설계되었습니다. 이 장치는 주로 중재적 신경 방사선 시술을 위한 용도입니다. 또한 환자의 머리 움직임을 최소화하기 위해 모든 중재적 시술에 사용할 수 있습니다.

머리 받침대는 교육을 받은 기술자 및 임상 의사가 임상 환경에서 사용하기 위한 용도입니다.

! 노트 ! 미국 연방법에 따라 이 장치는 의사의 지시에 따라 판매가 제한됩니다.

## 대상 환자군

영상 진단이 관여된 일반 의료 시술 또는 수술을 받는 환자.

## 사용자

본 제품의 사용자는 현지 지역 규정 요건에 따라 자격을 갖춘 사람입니다.

# 기능

## 설명

제품은 심혈관 X선 장비의 영상 품질, 성능 및 생산성을 보완 및 개선하기 위해 설계되었습니다. 제품은 환자의 머리를 지지하여 감소된 영상과의 오정렬을 줄이고 3D 영상을 향상합니다. 제품의 간단한 설계로 설치, 조정 및 제거하기가 용이하므로 사용자는 환자의 요구 사항에만 집중할 수 있습니다.

# 유지보수

## 시스템 청소

이 장치는 순한 비마모성 세정액 또는 소독액으로 세정할 수 있습니다. 장치에 대고 액체를 분무하거나 쏟지 마십시오. 세정하려면 깨끗한 천에 용액을 묻혀 표면을 닦으십시오.

## 시스템 소독

다음 세정제는 테스트를 거쳐 장치 표면을 세정하기에 적합한 것으로 확인되었습니다. 표면을 소독하려면 세정제 제조사의 구체적인 지침을 참조하십시오.

- 물
- 10% Clorox® 표백액
- 이소프로필 알코올
- Cidex® 2.4% 활성화된 디알데히드 용액
- 비누 및 물

머리 받침대에 대고 직접 분무하지 마십시오.

밤사이 머리 받침대를 물 속에 두지 마십시오.

염소를 사용하여 머리 받침대를 세정하지 마십시오.

모든 잠금장치가 단단하게 조여있는지 정기적으로 점검하십시오.

# 작동 지침

## 설치



1




2




3




4

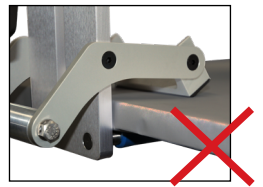

5

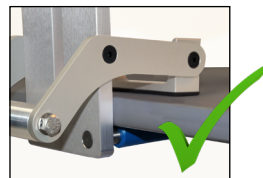

6

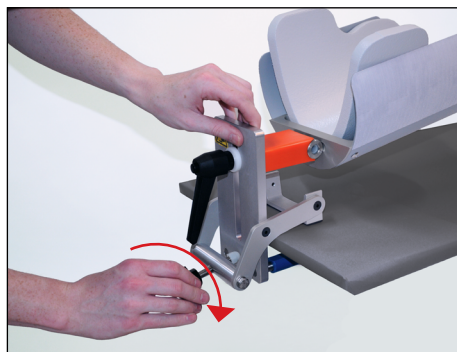


7




# 작동 지침


## 설정

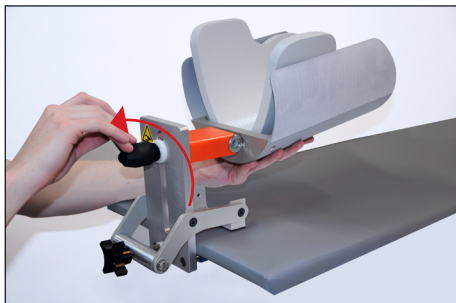

8

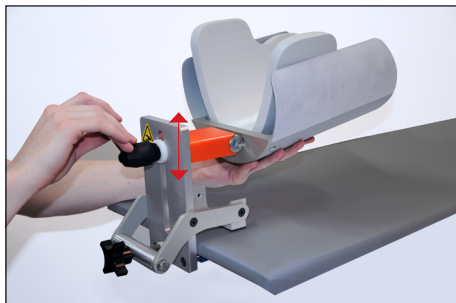

9

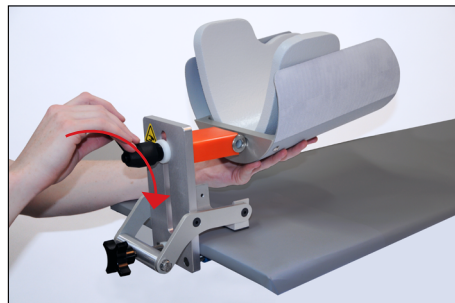

10



11




12




13




14

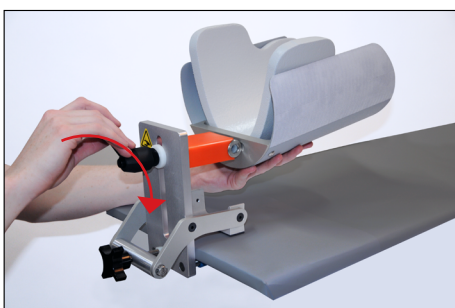


15

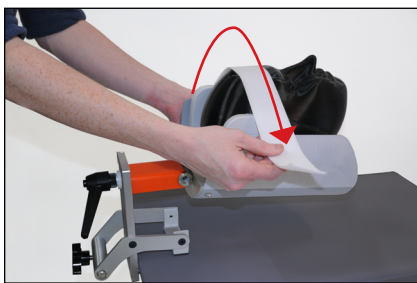

16

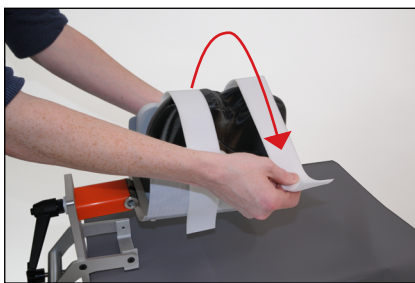

17

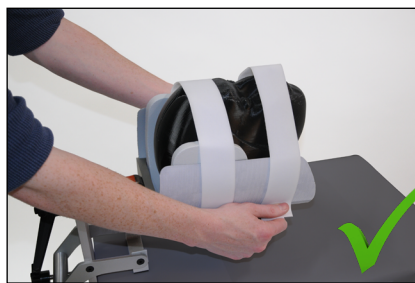

18




19




20

# 작동 지침


## 제거

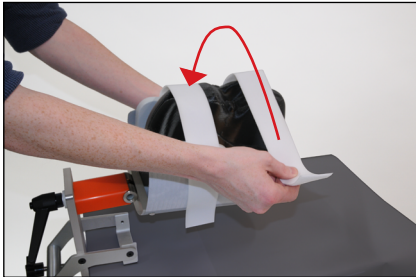


21

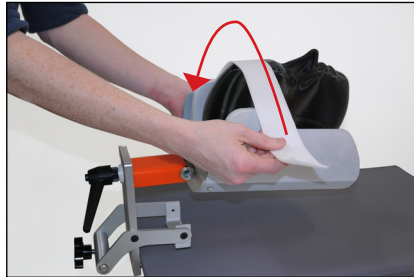

22

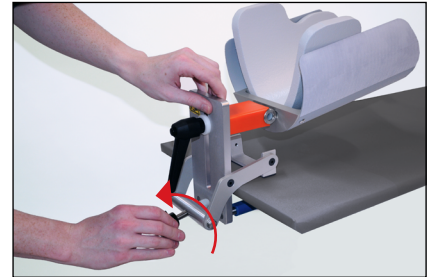

23

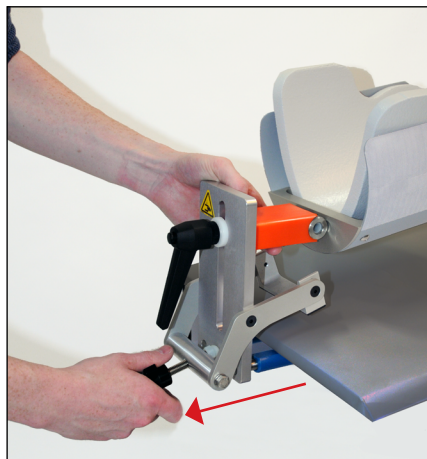

24



25





440 Church Road  
Avondale, PA 19311 USA  
[www.Qfix.com](http://www.Qfix.com)

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ [sales@Qfix.com](mailto:sales@Qfix.com)

2004685\_KO\_D  
2020-07