




positioning
patients for life.®

PRODUCTGIDS EN GEBRUIKSAANWIJZING

8002048 en 8002049

DSA-2Q en DSA-2T hoofdsteen
(Head Holder)

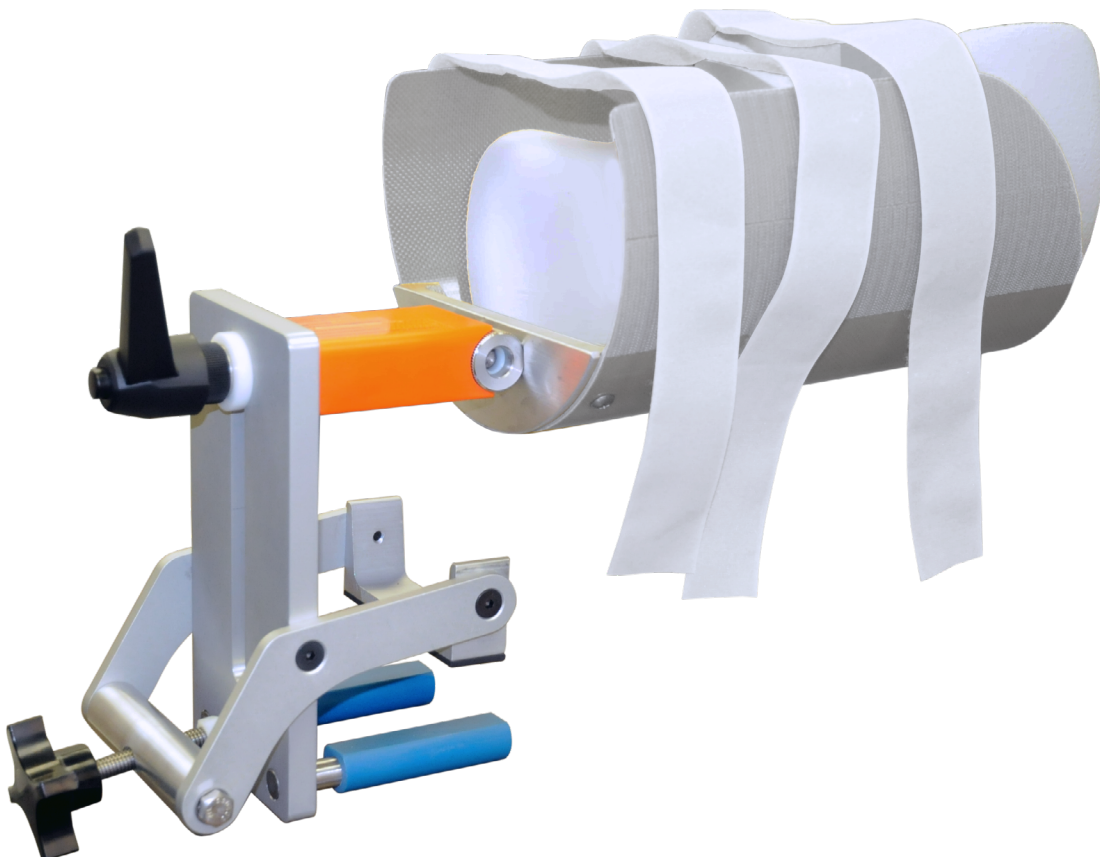



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Vervaardigd in de VS door Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---

Cidex® is een gedeponeerd handelsmerk van Johnson & Johnson.

Clorox® is een gedeponeerd handelsmerk van The Clorox Company.

INHOUD

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN.....	4
WAARSCHUWINGSVERKLARINGEN.....	4
ERNSTIGE INCIDENTEN.....	4
NOMINALE BELASTING.....	4
WAARSCHUWING ETIKETTEREN & BESCHRIJVINGEN.....	4
BEOOGD GEBRUIK.....	5
KENMERKEN.....	6
BESCHRIJVING.....	6
ONDERHOUD	7
HET REINIGEN VAN HET SYSTEEM.....	7
HET DESINFECTEREN VAN HET SYSTEEM	7
BEDIENINGSINSTRUCTIES.....	8
INSTALLEREN.....	8
OPSTELLEN.....	9
VERWIJDEREN.....	10

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN

WAARSCHUWINGSVERKLARINGEN

! WAARSCHUWING ! DEZE APPARATUUR MAG NIET WORDEN GEMODIFICEERD. ALS EEN ONDERDEEL VAN DIT HULPMIDDEL AAN EEN CATASTROFALE BELASTING IS BLOOTGESTELD, BESCHADIGD LIJKT OF NIET NAAR BEHOREN WERKT, STAAK DAN ONMIDDELLIJK HET GEBRUIK EN NEEM CONTACT OP MET QFIX OP +1 484-720-6054 OF TECHSUPPORT@QFIX.COM

ERNSTIGE INCIDENTEN

Meld ernstige incidenten (bijvoorbeeld incidenten die dodelijk of ernstig letsel als gevolg (kunnen) hebben) bij zowel Qfix als de bevoegde autoriteit van uw land.

NOMINALE BELASTING

10 kg (22 lb) gelijkmatig verdeelde belasting NIET overschrijden.

! OPMERKING ! Het kan zijn dat er verdere fijnregeling nodig is nadat de patiënt is geplaatst.

! OPMERKING ! Bij het positioneren van de patiënt moet u erop letten de patiënt niet te hoog in de hoofdsteun te plaatsen. Dit is niet comfortabel voor de patiënt en kan tot artefacten leiden.

WAARSCHUWING ETIKETTEREN & BESCHRIJVINGEN

Ga naar Qfix.com voor een overzicht van symbolen en de bijbehorende betekenissen.

BEOOGD GEBRUIK

De hoofddeun (Head Holder) dient om het hoofd te positioneren en te immobiliseren. Dit hulpmiddel is hoofdzakelijk bestemd voor neuroradiologische interventies. Het kan ook worden gebruikt bij andere interventionele procedures om de beweging van het hoofd van de patiënt te minimaliseren.

De hoofddeun is bestemd voor gebruik door geschoolde technici en artsen in een klinische omgeving.

! OPMERKING ! De federale wetgeving van de Verenigde Staten beperkt dit toestel tot verkoop door of op de order van een arts.

PATIËTENDOELGROEPEN

Patiënten die een algemene medische of chirurgische procedure ondergaan waarbij diagnostische beeldvorming wordt gebruikt.

BEOOGDE GEBRUIKERS

De beoogde gebruiker van de producten is iemand die in aanmerking komt volgens de eisen van het regelgevingsgebied.

KENMERKEN

BESCHRIJVING

Het product is bestemd om de beeldkwaliteit, prestaties en productiviteit van cardiovasculaire röntgenapparatuur aan te vullen en te verhogen. Het product ondersteunt het hoofd van de patiënt om slechte uitrichting met het gesubtraheerde beeld te verminderen en 3D-beelden te verbeteren. Dankzij het eenvoudige ontwerp kan het product gemakkelijk worden geïnstalleerd, afgesteld en verwijderd en kan de gebruiker zich op de behoeften van de patiënt concentreren.

ONDERHOUD

HET REINIGEN VAN HET SYSTEEM

Het hulpmiddel kan met een milde, niet-schurende reinigende of desinfecterende oplossing worden gereinigd. Spuit of giet geen vloeistof op het hulpmiddel. Breng de oplossing op een schone doek aan en neem de buitenkant van het hulpmiddel af om het te reinigen.

HET DESINFECTEREN VAN HET SYSTEEM

De volgende reinigingsmiddelen zijn getest en goedgekeurd voor het reinigen

De volgende reinigingsmiddelen zijn getest en geschikt bevonden voor het reinigen van de buitenkant van het hulpmiddel. Om de buitenkant van het hulpmiddel te desinfecteren, raadpleegt u de specifieke instructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel.

- Water
- 10% Clorox® Bleekwateroplossing
- Isopropylalcohol
- Cidex® 2,4% geactiveerde dialdehydeoplossing
- Water en zeep

Spuit NIET direct op de hoofdsteen.

Laat de hoofdsteen GEEN nacht in water staan.

Gebruik GEEN chloor om de hoofdsteen te reinigen.

Controleer regelmatig of alle bevestigingsmateriaal goed vastzit.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

INSTALLEREN



1




2




3




4

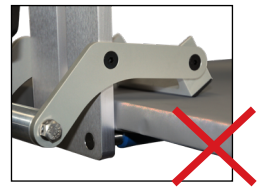

5

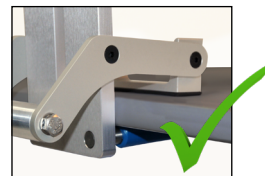


6

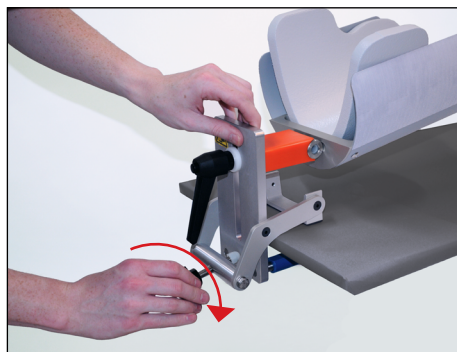


7

BEDIENINGSINSTRUCTIES


OPSTELLEN

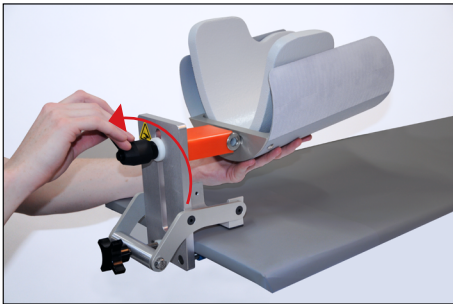


8

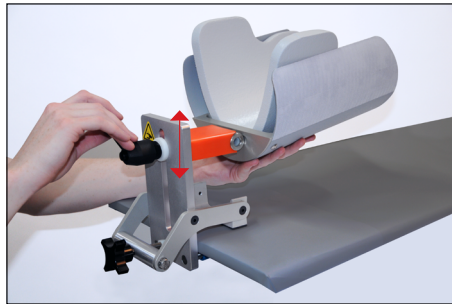

9

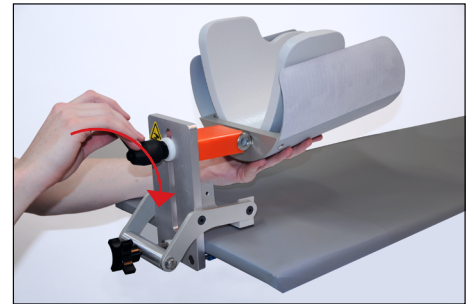

10

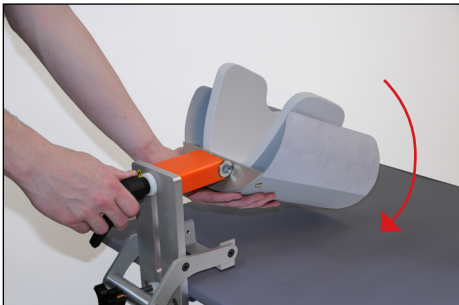

11




12




13




14

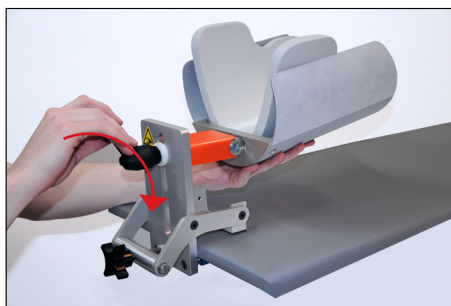


15

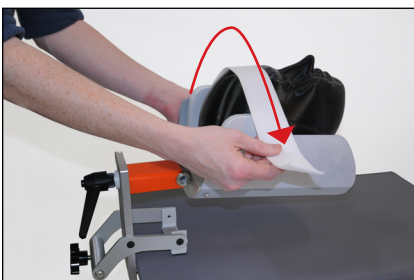

16

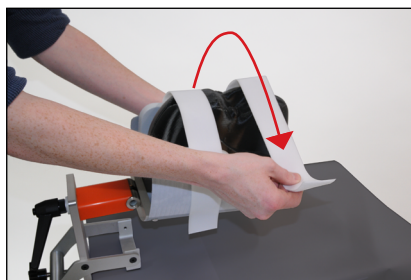


17

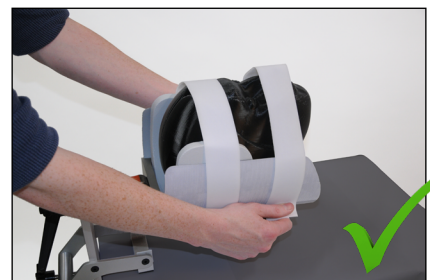

18




19

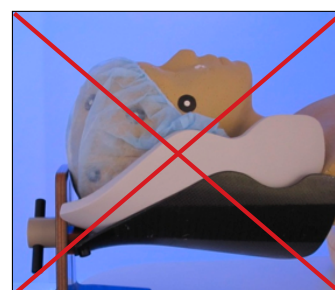


20

BEDIENINGSINSTRUCTIES


VERWIJDEREN

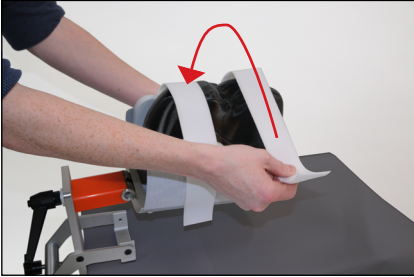


21

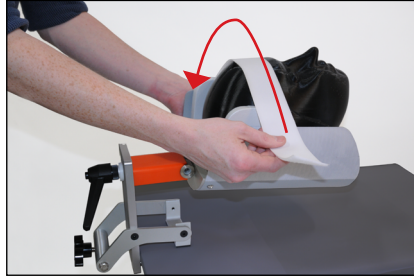

22

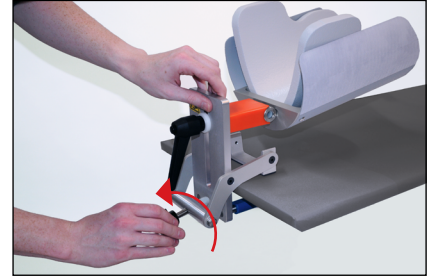

23

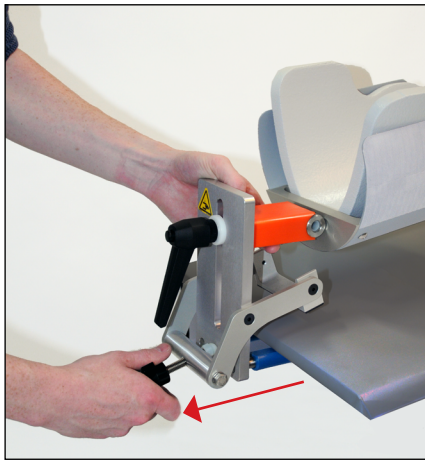

24



25



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com