


PRODUKTVEILEDNING OG BRUKERHÅNDBOK

8002048 og 8002049

DSA-2Q og DSA-2T hodestøtte
(Head Holder)



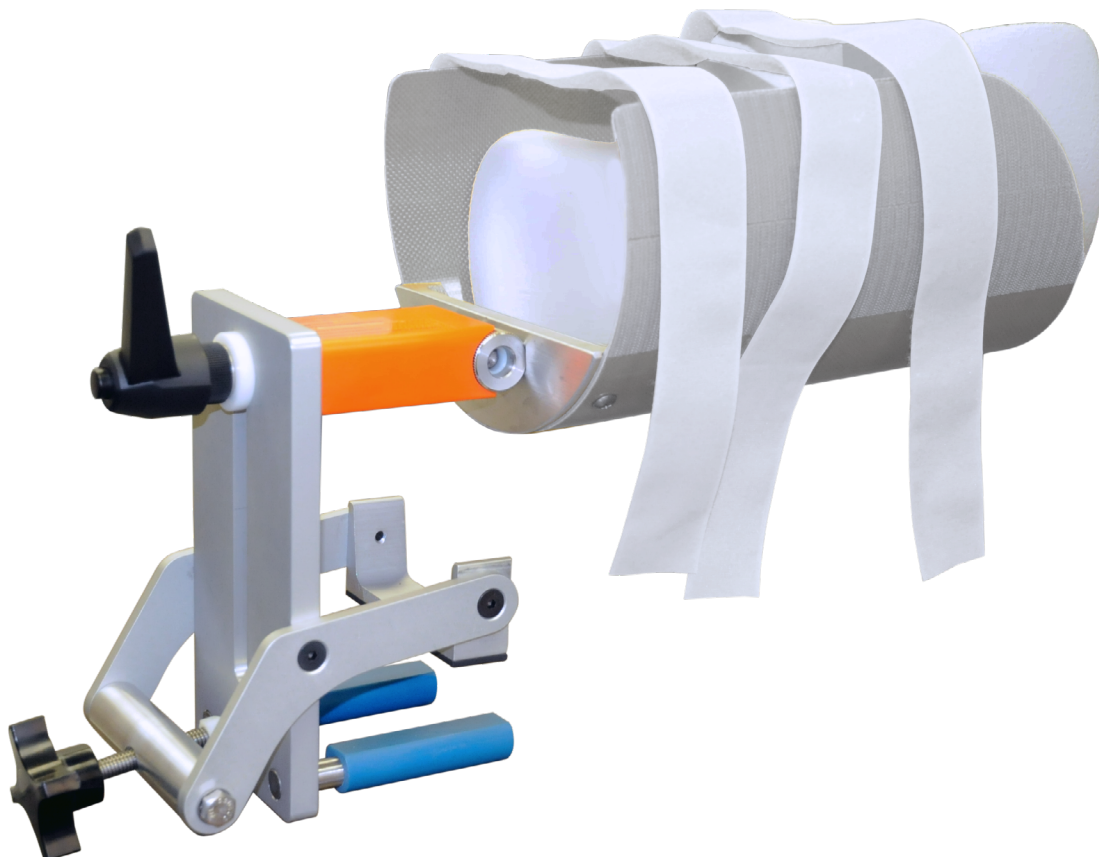

EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Produsert i USA av Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--

Cidex® er et registrert varemerke tilhørende Johnson & Johnson.

Clorox® er et registrert varemerke tilhørende The Clorox Company.

INNHOOLD

GENERELLE FORHOLDSREGLER	4
ADVARSELSMELDINGER	4
ALVORLIGE HENDELSER	4
NORMERT LAST	4
ADVARSEL ETIKETT OG BESKRIVELSE.....	4
TILTENKT BRUK	5
EGENSKAPER.....	6
BESKRIVELSE.....	6
VEDLIKEHOLD	7
RENGJØRE SYSTEMET	7
DESINFISERE SYSTEMET	7
BRUKSANVISNINGER	8
MONTERING.....	8
OPPSETT	9
AVTAKING.....	10

GENERELLE FORHOLDSREGLER

ADVARSELSMELDINGER

! ADVARSEL ! INGEN MODIFIKASJON AV DETTE UTSTYRET ER TILLATT. HVIS NOEN DEL AV DENNE ANORDNINGEN BLIR UTSATT FOR KATASTROFAL BELASTNING, SER UT TIL Å VÆRE SKADET ELLER IKKE FUNGERER SOM DEN SKAL, OPPHØR BRUK AV DEN UMIDDELBART OG KONTAKT QFIX PÅ +1 484 720 6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM

ALVORLIGE HENDELSER

Rapporter alle alvorlige hendelser (f.eks. hendelser som fører til, eller kan føre til død eller alvorlig skade) til både Qfix og den relevante myndigheten i landet.

NORMERT LAST

IKKE overstig 10 kg (22 lb) jevnt fordelt last.

! MERK ! Ytterligere finjustering må kanskje utføres når pasienten er på plass.

! MERK ! Pass på under posisjonering av pasienten at ikke pasienten legges for høyt i hodestøtten. Det vil bli ubehagelig og kan føre til artefakter.

ADVARSEL ETIKETT OG BESKRIVELSE

Du finner en liste over symboler og symboldefinisjoner på Qfix.com.

TILTENKT BRUK

Hodestøtten (Head Holder) er utformet for å posisjonere og immobilisere hodet. Denne anordningen er hovedsakelig tiltenkt for intervensjonsnevreradiologi. Dette gjelder også enhver intervensjonsprosedyre for å minimere pasientens hodebevegelser.

Hodestøtten er beregnet for bruk i et klinisk miljø av opplærte teknikere og klinikere.

! MERK ! Forbundsretten i USA begrenser denne enheten til salg på eller etter en lege.

PASIENTMÅLGRUPPER

Pasienter som gjennomgår generelle medisinske eller kirurgiske prosedyrer som innebærer diagnostisk avbildning.

TILTENKTE BRUKERE

Tiltenkte brukere for produktene er personer som er kvalifisert i henhold til kravene i lokale forskrifter.

EGENSKAPER

BESKRIVELSE

Produktet er utformet for å komplettere og forbedre bildekvaliteten, ytelsen og produktiviteten til kardiovaskulært røntgenutstyr. Produktet støtter pasientens hode og reduserer feiljustering i forhold til det subtraherte bildet og forbedrer 3D-bilder. Produktets enkle utforming gjør at det er lett å installere, justere og ta av, og lar brukeren fokusere på pasientens behov.

VEDLIKEHOLD

RENGJØRE SYSTEMET

Anordningen kan rengjøres med en mild, ikke-skurende rengjørings- eller desinfeksjonsløsning. Ikke spray eller tøm væske på anordningen. For å rengjøre, påfør løsningen på en ren klut og tørk av overflaten.

DESINFISERE SYSTEMET

Følgende rengjøringsmidler har blitt testet og funnet å være egnet for rengjøring av anordningens overflater. For å desinfisere overflaten, se spesifikke anvisninger fra produsenten av rengjøringsmiddelet.

- Vann
- 10 % Clorox® blekemiddelløsning
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktivert dialdehydløsning
- Såpe og vann

IKKE sprut direkte på hodestøtten.

IKKE la hodestøtten være i vann over natten.

IKKE bruk klor for rengjøring av hodestøtten.

Kontroller jevnlig om alle festeanordninger er stramme.

BRUKSANVISNINGER

MONTERING



1




2




3




4

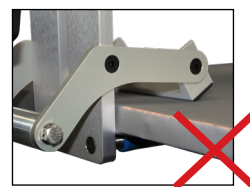

5

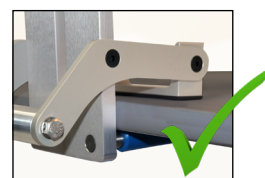


6

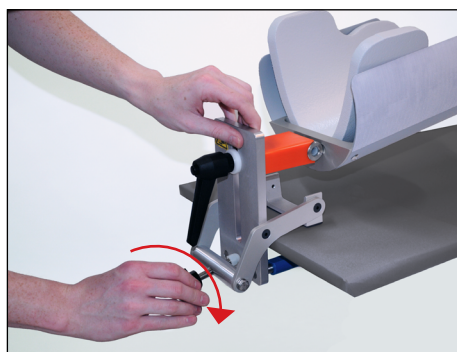


7

BRUKSANVISNINGER


OPPSETT

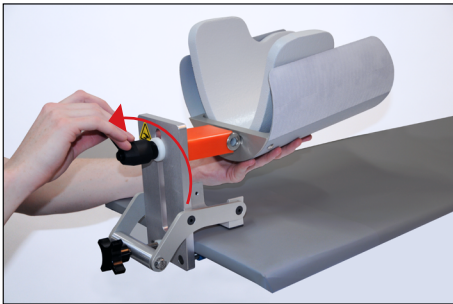


8

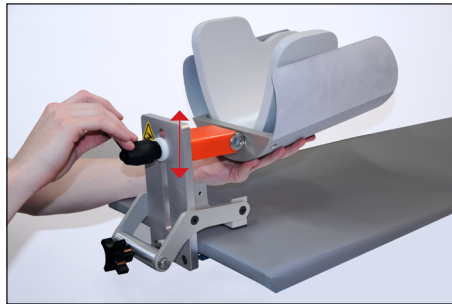

9

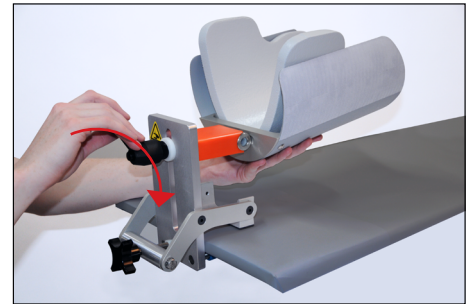

10

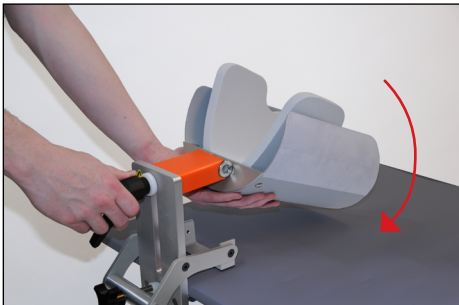

11




12




13




14

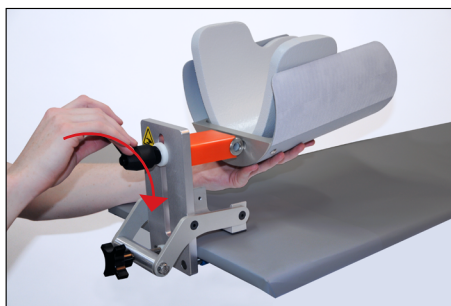


15

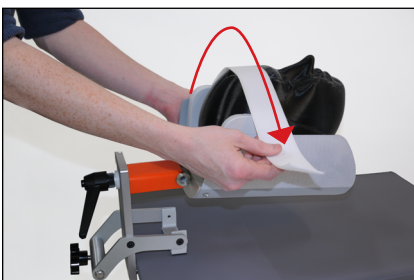

16

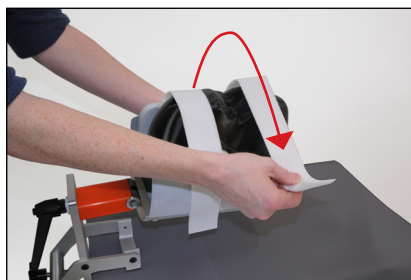


17

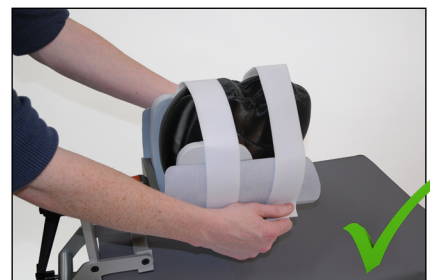

18




19

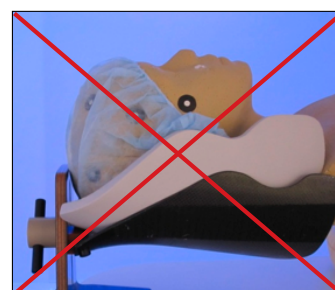

20

BRUKSANVISNINGER


AVTAKING

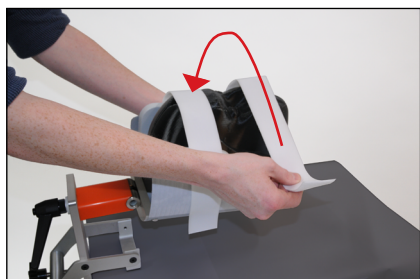


21



22

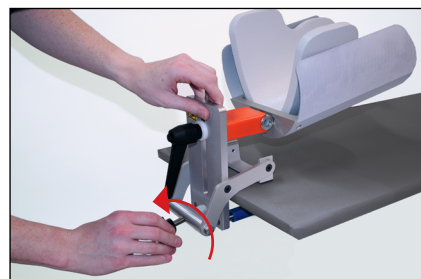

23

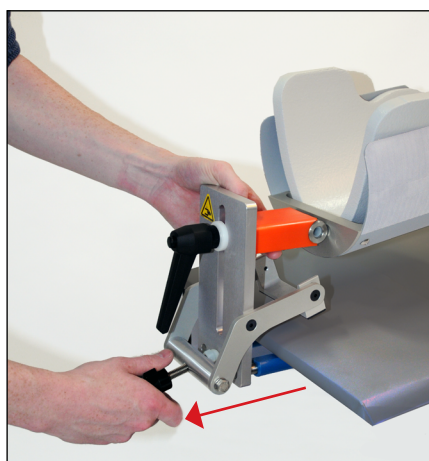

24



25



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004685_NO_E
2020-07