




positioning  
patients for life.®

# GUIA DO PRODUTO E MANUAL DO USUÁRIO

8002048 e 8002049

DSA-2Q e DSA-2T Suporte para a cabeça  
(Head Holder)

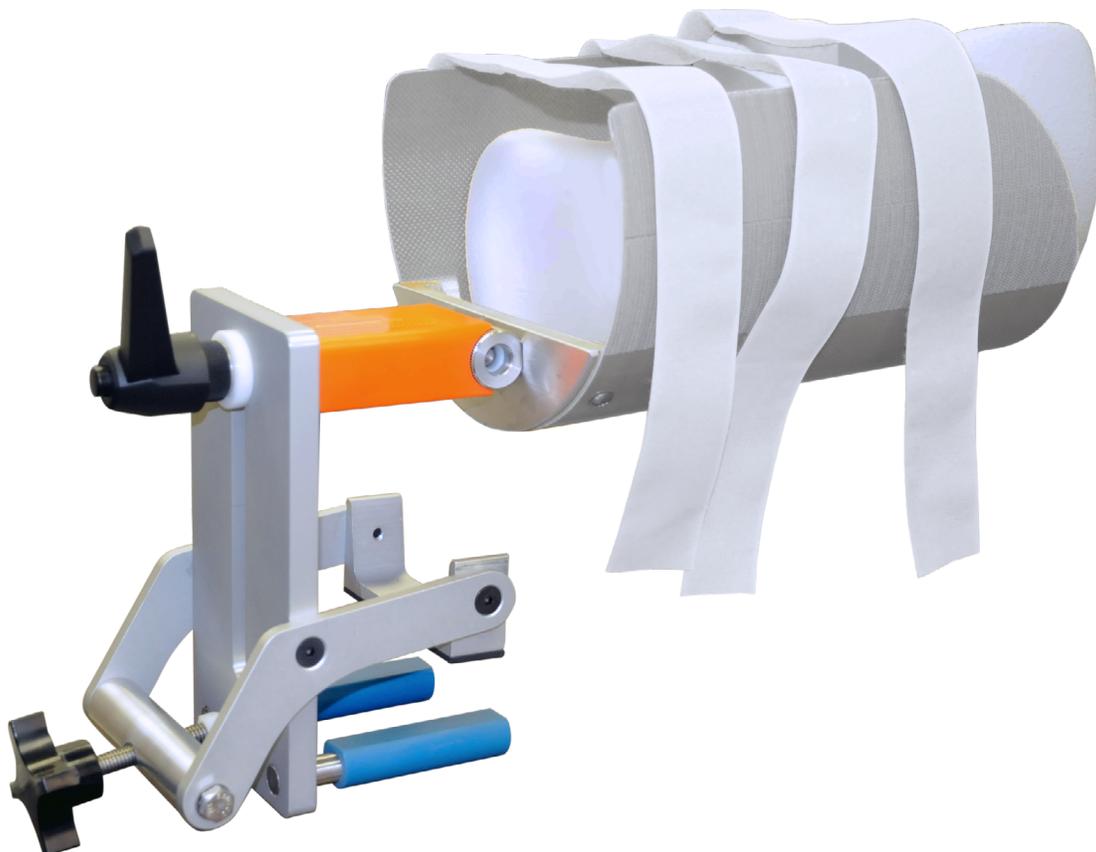



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Fabricado nos EUA por Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---	---

Cidex® é marca registrada da Johnson & Johnson.  
Clorox® é uma marca registrada da The Clorox Company

Registro Anvisa No: 81300160002

# SUMÁRIO

PRECAUÇÕES GERAIS.....	4
AVISOS DE CUIDADO .....	4
INCIDENTES GRAVES.....	4
CARGA NOMINAL.....	4
ETIQUETAS E DESCRIÇÕES DE CUIDADO .....	4
USO PRETENDIDO .....	5
CARACTERÍSTICAS.....	6
DESCRIÇÃO.....	6
MANUTENÇÃO .....	7
LIMPEZA DO DISPOSITIVO.....	7
DESINFECÇÃO DO DISPOSITIVO .....	7
INSTRUÇÕES DE USO.....	8
INSTALLATION.....	8
CONFIGURAÇÃO .....	9
REMOÇÃO .....	10

# PRECAUÇÕES GERAIS

## AVISOS DE CUIDADO

**! CUIDADO ! NÃO É PERMITIDO FAZER NENHUMA MODIFICAÇÃO NESTE DISPOSITIVO. SE QUALQUER PEÇA DESTES DISPOSITIVO RECEBER UMA CARGA CATASTRÓFICA, PARECER ESTAR DANIFICADA OU FUNCIONANDO INADEQUADAMENTE, INTERROMPA O USO IMEDIATAMENTE E ENTRE EM CONTATO COM QFIX PELO TELEFONE +1 484-720-6054 OU PELO E-MAIL TECHSUPPORT@QFIX.COM.**

## INCIDENTES GRAVES

Reporte qualquer incidente grave (por exemplo, incidentes que resultem ou possam resultar em óbito ou lesões graves) à Qfix e à Autoridade Competente do seu país.

## CARGA NOMINAL

NÃO exceder 10 kg (22 lb) de carga uniformemente distribuída.

**! OBSERVAÇÃO !** Pode ser necessário fazer ajustes mais finos depois que o paciente estiver posicionado.

**! OBSERVAÇÃO !** Ao posicionar o paciente, tome cuidado para não colocá-lo em posição alta demais no suporte para a cabeça. Isso será desconfortável e pode causar artefatos.

## ETIQUETAS E DESCRIÇÕES DE CUIDADO

Consulte [Qfix.com](http://Qfix.com) para ver uma lista de símbolos e suas definições.

# USO PRETENDIDO

O suporte para a cabeça (Head Holder) foi projetado para posicionar e imobilizar a cabeça. Este dispositivo foi projetado principalmente para procedimentos intervencionistas de neurorradiologia. Isso se aplica também a qualquer procedimento intervencionista, para reduzir a movimentação da cabeça do paciente.

O suporte de cabeça foi projetado para uso em ambiente clínico, por médicos e técnicos treinados.

**! OBSERVAÇÃO !** As leis federais dos EUA restringem a venda deste dispositivo a médicos ou por ordem de um médico.

## **GRUPO ALVO DE PACIENTES**

Pacientes que realizaram procedimentos médicos gerais ou cirúrgicos envolvendo diagnóstico por imagens.

## **USUÁRIO PRETENDIDO**

O usuário pretendido para os produtos é uma pessoa qualificada de acordo com as exigências da região regulatória.

# CARACTERÍSTICAS

## DESCRIÇÃO

O produto foi projetado para complementar e aumentar a qualidade da imagem do equipamento de raios X cardiovascular, bem como o aprimorar seu desempenho, produtividade e qualidade da imagem. O produto suporta a cabeça do paciente, reduzindo o desalinhamento com a imagem subtraída e melhorando as imagens 3-D. O design simples do produto facilita sua instalação, ajuste e remoção e permite que o usuário se concentre nas necessidades do paciente.

# MANUTENÇÃO

## LIMPEZA DO DISPOSITIVO

O dispositivo pode ser limpo com uma solução de limpeza suave, não abrasiva ou uma solução desinfetante. Para limpar, aplique a solução em um pano limpo e limpe a superfície.

## DESINFECÇÃO DO DISPOSITIVO

Os materiais de limpeza a seguir foram testados e considerados adequados para a limpeza da superfície dos dispositivos. Para desinfetar a superfície, consulte as instruções específicas do fabricante do agente de limpeza.

- Água
- Solução alvejante de Clorox® a 10%
- Álcool isopropílico
- 2,4% de solução de dialdeído ativado Cidex®
- Água e sabão

NÃO borrife diretamente sobre o suporte para a cabeça.

NÃO deixe o suporte para a cabeça na água de um dia para outro.

NÃO use cloro para limpar o suporte para a cabeça.

Verifique periodicamente se todos os parafusos estão apertados.

# INSTRUÇÕES DE USO

## INSTALLATION



1




2




3




4

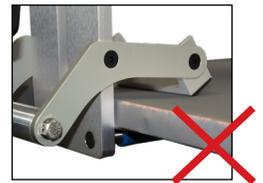

5

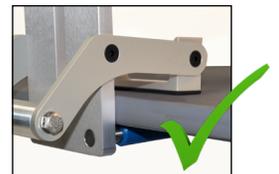


6

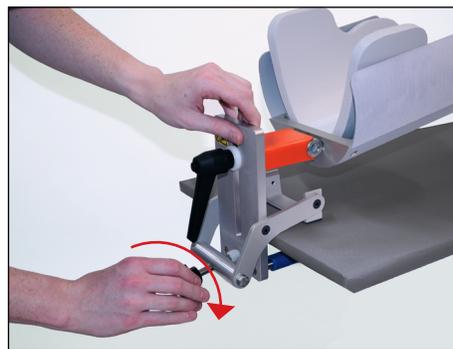


7

# INSTRUÇÕES DE USO

## CONFIGURAÇÃO

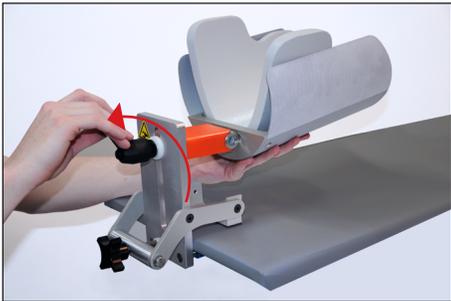

8

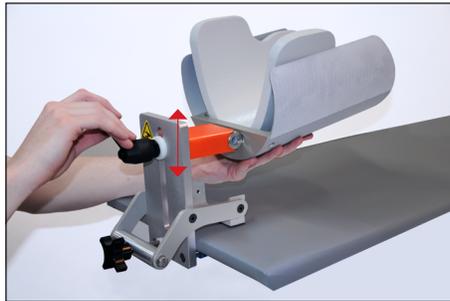

9



10



11



12



13




14




15



16

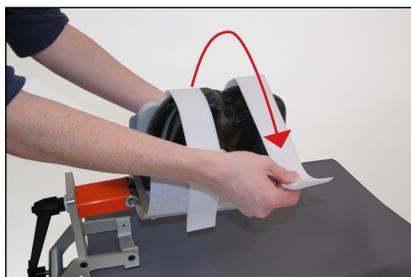

17

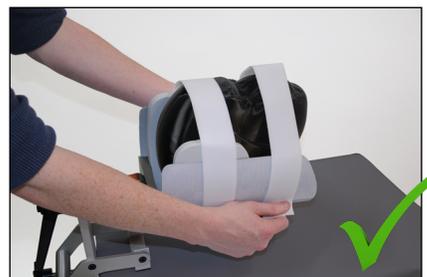

18




19




20

# INSTRUÇÕES DE USO


## REMOÇÃO

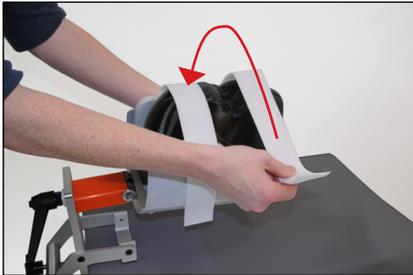

21

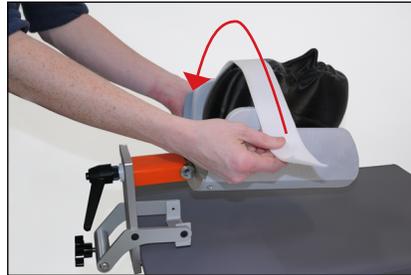

22

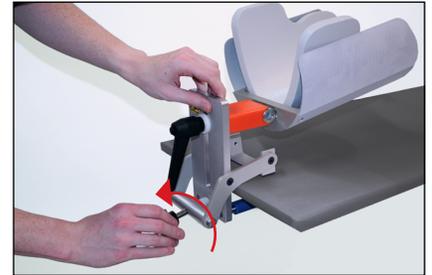

23



24



25





440 Church Road  
Avondale, PA 19311 USA  
[www.Qfix.com](http://www.Qfix.com)

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 [sales@Qfix.com](mailto:sales@Qfix.com)