


GHIDUL PRODUSULUI ȘI MANUALUL UTILIZATORULUI

8002048 și 8002049

Suport pentru cap (Head Holder)
DSA-2Q și DSA-2T



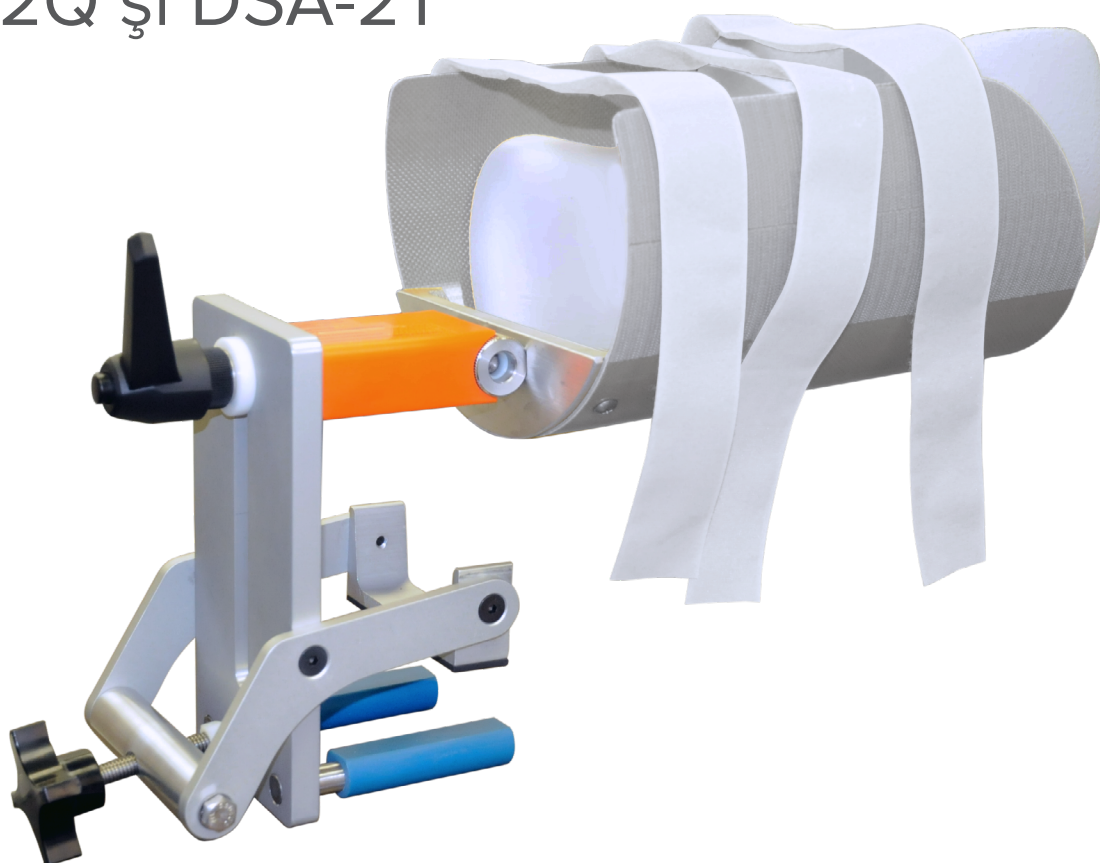

EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Fabricat în SUA de Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--

Cidex® este o marcă comercială înregistrată a Johnson & Johnson.

Clorox® este o marcă comercială înregistrată a The Clorox Company.

CUPRINS

PRECAUȚII GENERALE	4
NOTE DE AVERTIZARE	4
INCIDENTE GRAVE	4
CAPACITATE DE SARCINĂ	4
ETICHETE ȘI DESCRIERI DE AVERTIZARE	4
INDICAȚII DE UTILIZARE	5
CARACTERISTICI	6
DESCRIERE	6
ÎNTREȚINERE	7
CURĂȚAREA SISTEMULUI	7
DEZINFECTAREA SISTEMULUI	7
INSTRUCȚIUNI DE OPERARE	8
INSTALAREA	8
MONTAREA	9
DEMONTAREA	10

PRECAUȚII GENERALE

NOTE DE AVERTIZARE

! AVERTIZARE ! NU ESTE PERMISĂ NICIO MODIFICARE A ACESTUI ECHIPAMENT. DACĂ ORICE PIESĂ A ACESTUI DISPOZITIV ESTE SUPUSĂ UNEI SARCINI ÎN CAZ DE DEZASTRU, PARE SĂ FIE DETERIORATĂ SAU FUNCȚIONEAZĂ NECORESPUNZĂTOR, ÎNTRERUPEȚI IMEDIAT UTILIZAREA ȘI CONTACTAȚI QFIX LA +1 484-720-6054 SAU TECHSUPPORT@QFIX.COM

INCIDENTE GRAVE

Vă rugăm să raportați toate incidentele grave (de exemplu, incidente care au dus la sau au potențialul de a cauza decesul sau vătămarea gravă) atât către Qfix, cât și către autoritatea competentă a țării dumneavoastră.

CAPACITATE DE SARCINĂ

A NU se depăși o sarcină uniform distribuită de 10 kg (22 lb).

! NOTĂ ! Este posibil să fie necesare reglaje mai fine odată ce pacientul este poziționat.

! NOTĂ ! După poziționarea pacientului, aveți grijă să nu așezați pacientul prea ridicat în suportul pentru cap. Aceasta va crea disconfort și poate cauza artefacte.

ETICHETE ȘI DESCRIERI DE AVERTIZARE

Vă rugăm să consultați Qfix.com pentru o listă a simbolurilor și definițiile acestora.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Suportul pentru cap (Head Holder) este conceput pentru poziționarea și imobilizarea capului. Acest dispozitiv este indicat în primul rând pentru proceduri de neuroradiologie intervențională. De asemenea, acesta este adecvat pentru orice proceduri intervenționale în vederea minimizării mișcării capului pacientului.

Suportul pentru cap este indicat pentru a fi utilizat într-un mediu clinic de către tehnicieni și clinicieni instruiți.

! NOTĂ ! Legea federală a Statelor Unite limitează acest dispozitiv la vânzarea acestuia sau la ordinul unui medic.

GRUPURI ȚINĂ DE PACIENȚI

Pacienții supuși procedurilor medicale generale sau intervențiilor chirurgicale ce implică diagnosticarea prin imagistică.

UTILIZATORI ȚINTĂ

Utilizatorul țintă pentru produse este o persoană calificată în conformitate cu cerințele regiunii de reglementare.

CARACTERISTICI

DESCRIERE

Produsul este conceput să îmbunătățească și să completeze calitatea imaginii, performanța și productivitatea echipamentelor de radiografiere cardiovasculară. Produsul susține capul pacientului reducând astfel alinierea incorectă cu imaginea redusă și îmbunătățind imaginile 3-D. Designul simplu al produsului asigură instalarea, reglarea și demontarea facilă și permite utilizatorului să se concentreze pe nevoile pacientului.

ÎNTREȚINERE

CURĂȚAREA SISTEMULUI

Dispozitivul poate fi curățat cu o soluție dezinfectantă sau de curățare ușoară, neabrazivă. Nu pulverizați și nu turnați lichide pe dispozitiv. Pentru curățare, aplicați soluția pe o lavetă curată și ștergeți suprafața.

DEZINFECTAREA SISTEMULUI

Următoarele materiale de curățare au fost testate și s-a dovedit că sunt corespunzătoare pentru curățarea suprafețelor dispozitivului. Pentru a dezinfecta suprafața, consultați instrucțiunile specifice ale producătorului agentului de curățare.

- Apă
- Soluție de albire Clorox® 10%
- Alcool izopropilic
- Soluție activată de dialdehidă 2,4% Cidex®
- Apă și săpun

A NU se pulveriza direct pe suportul pentru cap.

A NU se lăsa suportul pentru cap în apă peste noapte.

A NU se utiliza clor pentru curățarea suportului pentru cap.

Verificați periodic închiderea fermă a tuturor sistemelor de fixare.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

INSTALAREA



1




2




3




4

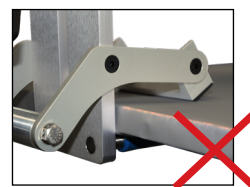

5

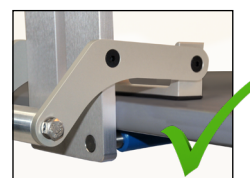


6

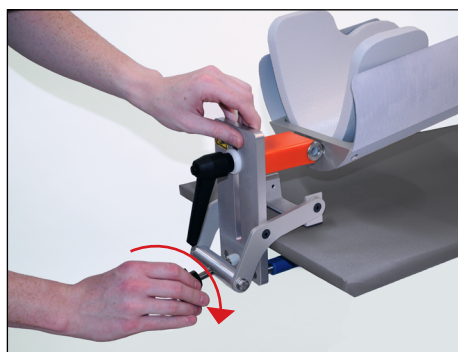


7

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE


MONTAREA

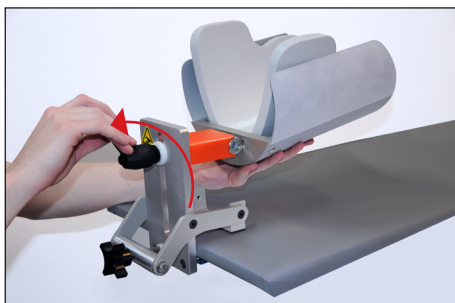

8

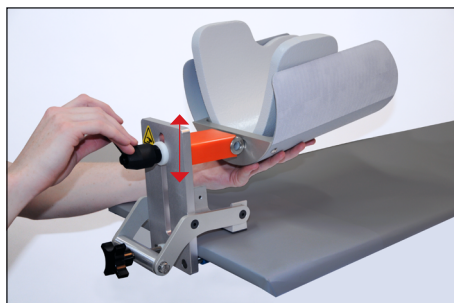

9

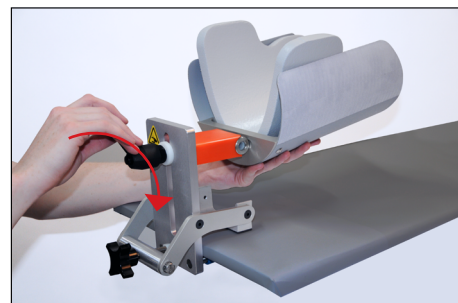

10



11




12




13




14

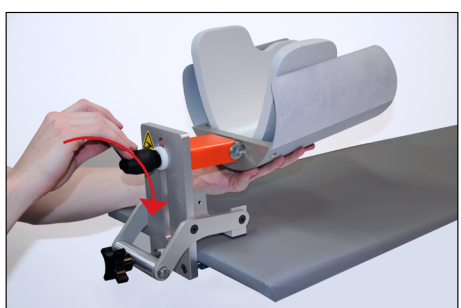


15

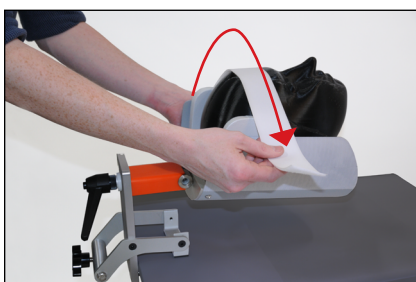

16

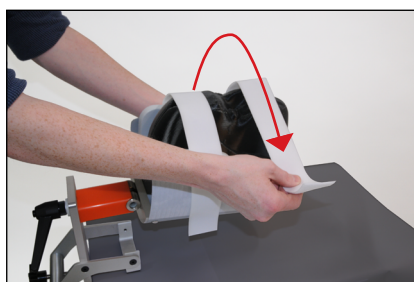


17

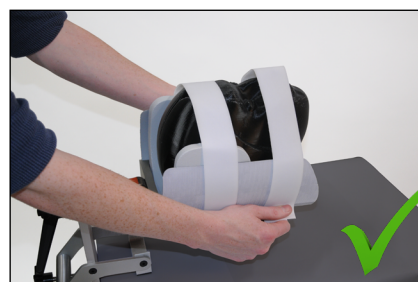

18




19

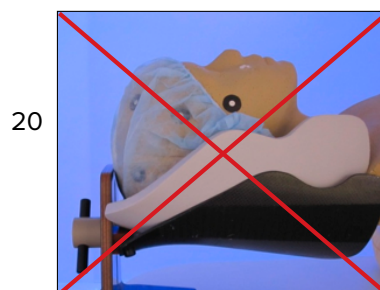


20

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE


DEMONTAREA

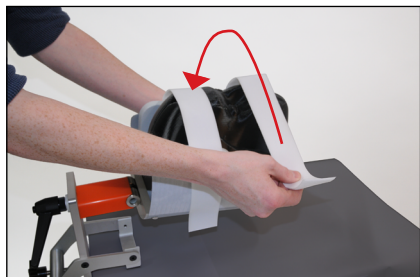


21

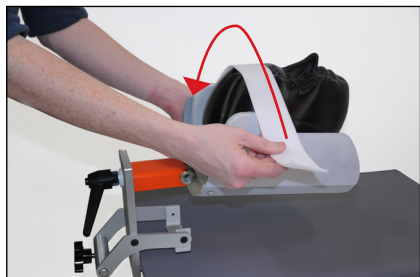

22

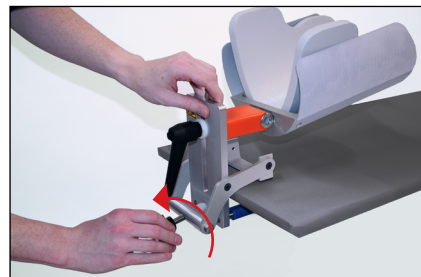

23

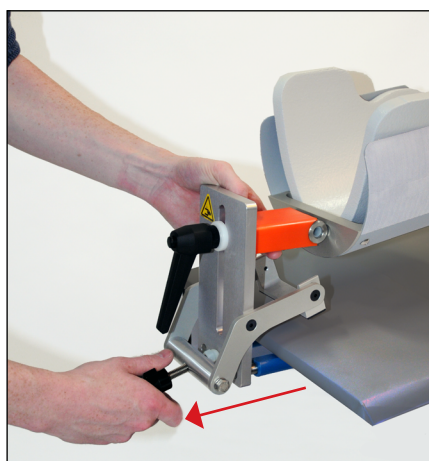

24



25



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585/800.526.5247

+1 610.268.0588/800.831.8174

sales@Qfix.com

2004685_RO_E
2020-07