




positioning
patients for life.®

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

8002048 и 8002049

DSA-2Q и DSA-2T Головодержатель
(Head Holder)

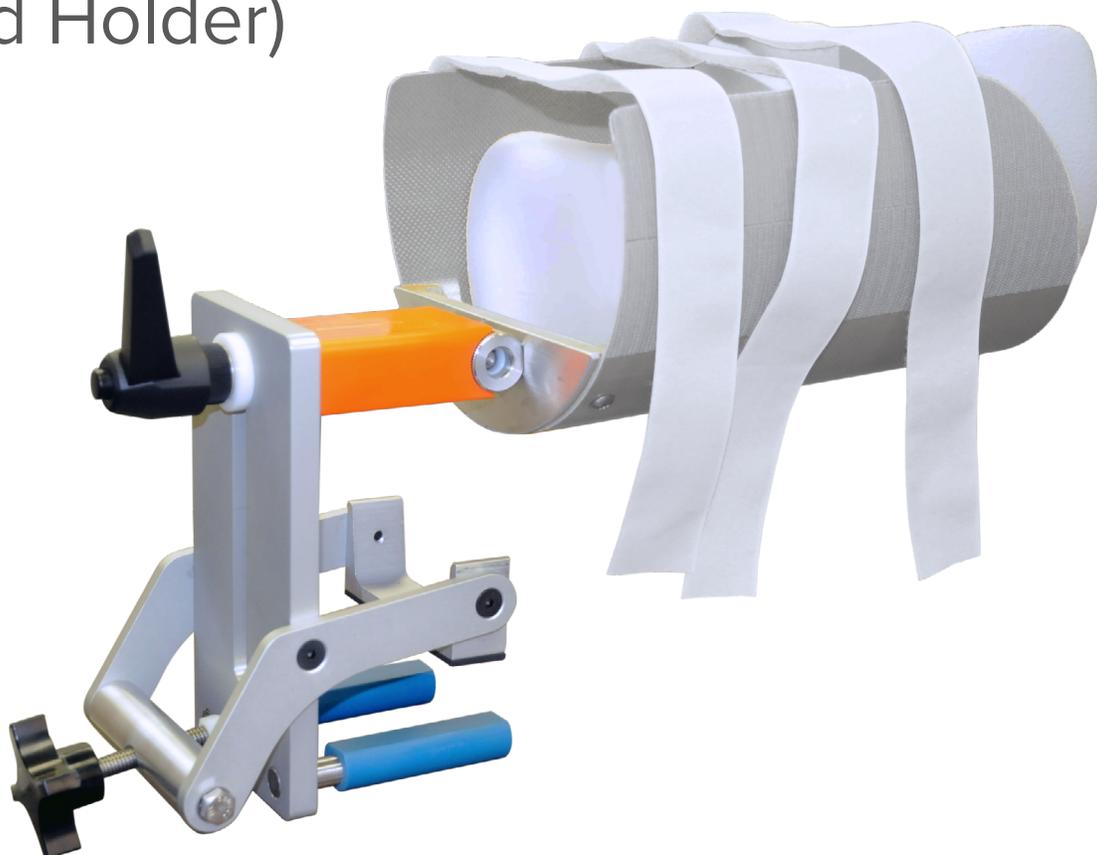



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Изготовлено в США компанией Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--	---

Cidex® является зарегистрированным товарным знаком компании Johnson & Johnson.

Clorox® является зарегистрированной торговой маркой компании The Clorox Company.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.....	4
СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ	4
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	4
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ И ИХ ОПИСАНИЕ.....	4
НАЗНАЧЕНИЕ.....	5
ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ОПИСАНИЕ	6
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
ЧИСТКА СИСТЕМЫ.....	7
ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМЫ.....	7
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.....	8
УСТАНОВКА.....	8
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	9
УДАЛЕНИЕ.....	10

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! КАКИЕ-ЛИБО МОДИФИКАЦИИ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. ЕСЛИ КАКАЯ-ЛИБО ЧАСТЬ ЭТО УСТРОЙСТВА ПОДВЕРГЛАСЬ КРИТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ, ВЫГЛЯДИТ ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЛИ ФУНКЦИОНИРУЕТ НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВОМ И ОБРАТИТЕСЬ В КОМПАНИЮ QFIX ПО ТЕЛЕФОНУ +1 484-720-6054 ИЛИ АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ TECHSUPPORT@QFIX.COM.

СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

В случае возникновения любых серьезных происшествий (например, происшествий, которые привели или могут привести к смерти или серьезным травмам), следует немедленно уведомить компанию Qfix и компетентный орган вашей страны.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

Равномерно распределенная нагрузка НЕ ДОЛЖНА превышать 10 кг (22 фунта).

! ПРИМЕЧАНИЕ ! После размещения пациента может потребоваться более тонкая окончательная регулировка изделия.

! ПРИМЕЧАНИЕ ! При размещении пациента убедитесь в том, что его голова не расположена в головодержателе слишком высоко. Такое положение причинит неудобства пациенту и может привести к появлению артефактов.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ И ИХ ОПИСАНИЕ

Список символов и их значений доступен на сайте Qfix.com.

НАЗНАЧЕНИЕ

Головодержатель (Head Holder) предназначен для фиксации головы в определенном положении. Это устройство предназначено главным образом для применения в ходе нейрорентгенологических процедур. Его также можно применять при любых процедурах вмешательства, требующих максимального ограничения движений головы пациента.

Головодержатель предназначен для применения в условиях медицинского учреждения квалифицированными медтехниками и врачами.

! ПРИМЕЧАНИЕ ! Федеральный закон США разрешает продавать и заказывать устройство только врачам.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ

Пациенты, проходящие общие медицинские или хирургические процедуры, включающие медицинскую визуализацию.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Предполагаемыми пользователями изделия являются лица, аттестованные в соответствии с требованиями регулирующих нормативных актов соответствующего региона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Изделие предназначено для получения более качественного изображения, а также для улучшения функциональных характеристик и производительности сердечнососудистого рентгенографического оборудования. Изделие служит опорой для головы пациента, сокращая расхождения с вычитаемым изображением и повышая качество трехмерных изображений. Простота конструкции изделия облегчает его монтаж, регулировку и демонтаж и позволяет пользователю сосредоточиться на нуждах пациента.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТКА СИСТЕМЫ

Устройство можно чистить мягкодействующим неабразивным моющим или дезинфицирующим раствором. Нанесите раствор на чистую ткань и протрите поверхность ею.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМЫ

В ходе испытаний следующие чистящие материалы были признаны подходящими для чистки поверхностей устройств. При дезинфекции поверхности см. инструкции изготовителя применяемого моющего средства.

- Вода
- 10 %-ный раствор гипохлорита натрия Clorox®
- Изопропиловый спирт
- 2,4 %-ный раствор активированного диальдегида Cidex®
- Вода с мылом

НЕ распыляйте непосредственно на головодержатель.

НЕ оставляйте головодержатель погруженным в воду на всю ночь.

При очистке головодержателя НЕ применяйте хлор.

Периодически проверяйте затяжку всех фиксаторов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСТАНОВКА



1




2



3




4

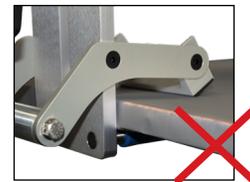

5




6

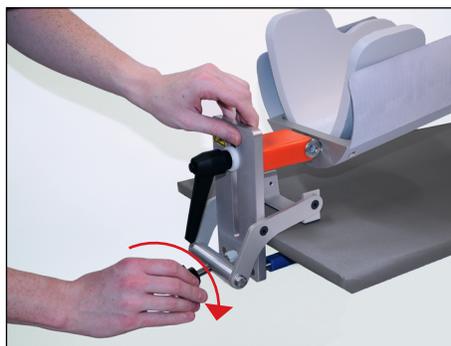

7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

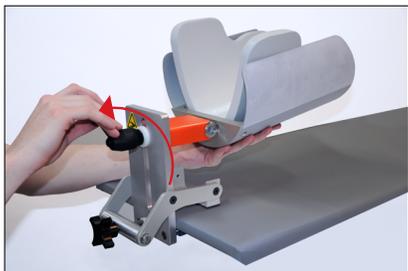

8



9



10



11



12



13




14



15



16

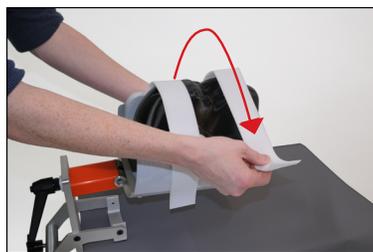

17



18




19



20

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


УДАЛЕНИЕ

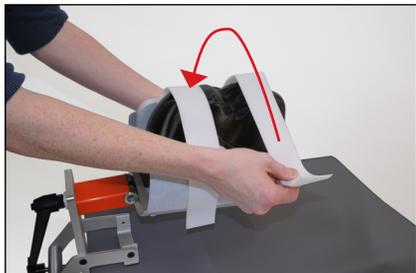

21



22

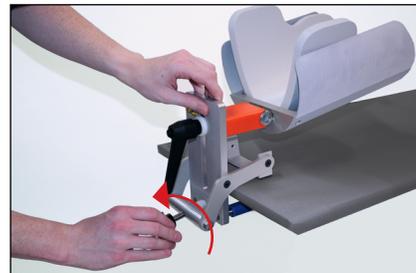

23



24



25



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com