




VODIČ ZA PROIZVOD I PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

8002048 i 8002049

Držač za glavu DSA-2Q i DSA-2T

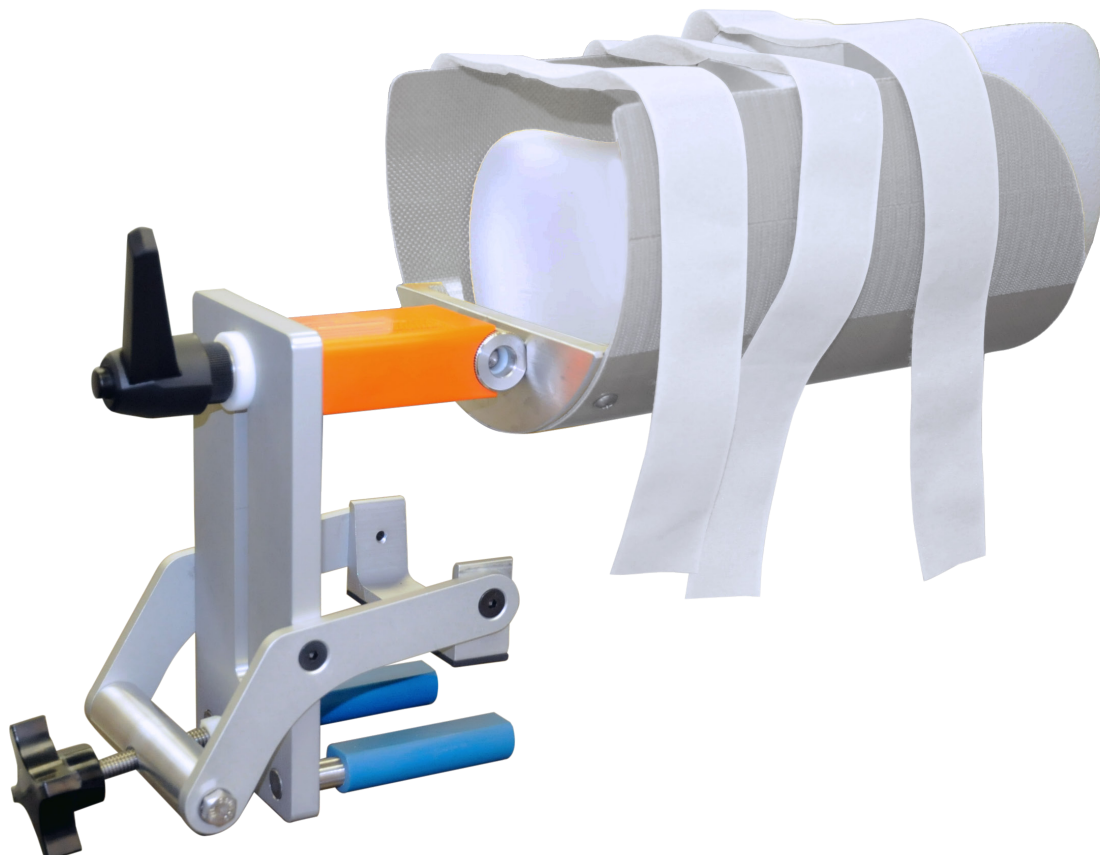



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		U SAD-u proizvela kompanija: Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712-737-8668 www.CQmedical.com
----	-----	---	--	--

Cidex® je registrovani žig kompanije Johnson & Johnson
Clorox® je registrovani žig kompanije The Clorox Company.

SADRŽAJ

OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI.....	4
UPOZORENJA.....	4
OZBILJNI INCIDENTI.....	4
DEKLARISANO OPTEREĆENJE.....	4
OZNAKE UPOZORENJA I NJIHOVI OPISI	4
NAMENA.....	5
FUNKCIJE.....	6
OPIS.....	6
ODRŽAVANJE	7
ČIŠĆENJE SISTEMA	7
DEZINFEKCIJA SISTEMA.....	7
UPUTSTVO ZA UPOTREBU.....	8
INSTALACIJA.....	8
PODEŠAVANJE.....	9
UKLANJANJE	10

OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI

UPOZORENJA

! UPOZORENJE ! NIJE DOZVOLJENA MODIFIKACIJA OVE OPREME. AKO BILO KOJI DEO OVOG UREĐAJA BUDE IZLOŽEN KRITIČNOM OPTEREĆENJU, IZGLEDA OŠTEĆENO ILI NE FUNKCIONIŠE ISPRAVNO, ODMAH PREKINITE UPOTREBU I OBRATITE SE KOMPANIJI CQ MEDICAL NA +1 712-737-8668 ILI INFO@CQMEDICAL.COM.

OZBILJNI INCIDENTI

Prijavite sve ozbiljne incidente (npr. incidente koji dovode ili mogu dovesti do smrti ili teških povreda) kompaniji CQ Medical i nadležnom organu vaše zemlje.

DEKLARISANO OPTEREĆENJE

NEMOJTE da prekoračite 10 kg (22 funti) ravnomerno raspoređenog tereta.

! NAPOMENA ! Kada pacijent bude postavljen, možda će biti potrebno izvršiti dodatna precizna podešavanja.

! NAPOMENA ! Prilikom pozicioniranja pacijenta, vodite računa da pacijent ne bude postavljen previše visoko u držač za glavu. To može izazvati nelagodnost i uzrokovati artefakte.

OZNAKE UPOZORENJA I NJIHOVI OPISI

Spisak simbola i njihovih definicija potražite na veb lokaciji www.CQmedical.com.

NAMENA

Držač glave je dizajniran za pozicioniranje i imobilizaciju glave. Ovaj uređaj je prvenstveno namenjen interventnim neuroradiološkim procedurama. Takođe se može koristiti za bilo koju interventnu proceduru kako bi se ograničilo pomeranje glave pacijenta.

Držač za glavu je namenjen za upotrebu u kliničkom okruženju od strane obučenih tehničara i kliničara.

! NAPOMENA ! Savezni zakon Sjedinjenih Američkih Država ograničava prodaju ovog uređaja isključivo lekarima ili na osnovu naloga lekara.

CILJNE GRUPE PACIJENATA

Pacijenti koji se podvrgavaju opštim medicinskim ili hirurškim procedurama koje uključuju dijagnostičko snimanje.

PREDVIĐENI KORISNICI

Predviđeni korisnik proizvoda je osoba kvalifikovana u skladu sa zahtevima regulatornog regiona.

FUNKCIJE

OPIS

Ovaj proizvod je dizajniran da dopuni i unapredi kvalitet slike kardiovaskularne rendgenske opreme, kao i da poboljša performanse i produktivnost same opreme. Ovaj proizvod pruža podršku glavi pacijenta, smanjujući nepravilno poravnanje sa oduzetom slikom i poboljšavajući kvalitet 3-D prikaza. Jednostavan dizajn proizvoda obezbeđuje laku instalaciju, podešavanje i uklanjanje, što korisniku omogućava da se usredsredi na potrebe pacijenta.

ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE SISTEMA

Uređaj se može očistiti blagim, neabrazivnim rastvorom za čišćenje ili dezinfekciju. Za čišćenje, nanosite rastvor na čistu krpu i obrišite površinu.

DEZINFEKCIJA SISTEMA

Sledeći materijali za čišćenje su testirani i ustanovljeno je da su pogodni za čišćenje površine uređaja. Da biste dezinfikovali površinu uređaja, pogledajte specifična uputstva proizvođača sredstva za čišćenje.

- Voda
- 10% rastvor Clorox® izbeljivača
- Izopropil-alkohol
- Cidex® 2,4% rastvor aktiviranog dialdehida
- Sapun i voda

NEMOJTE prskati direktno na držač glave.

NEMOJTE ostavljati držač za glavu u vodi preko noći.

NEMOJTE da koristite hlor za čišćenje držača glave.

Povremeno proverite da li su svi pričvršćivači dovoljno zategnuti.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

INSTALACIJA



1




2




3




4

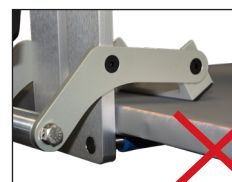

5

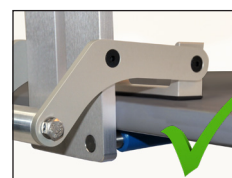


6

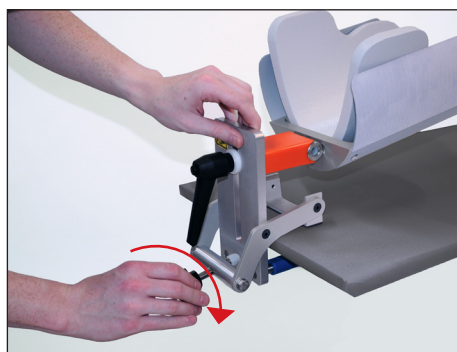


7

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


PODEŠAVANJE

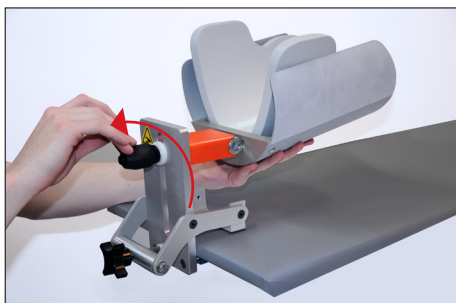

8

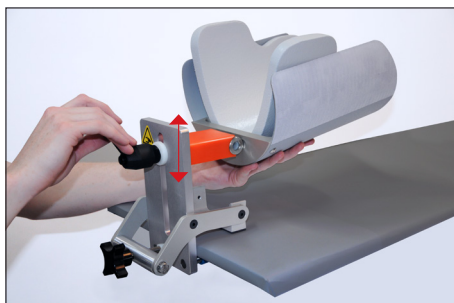

9

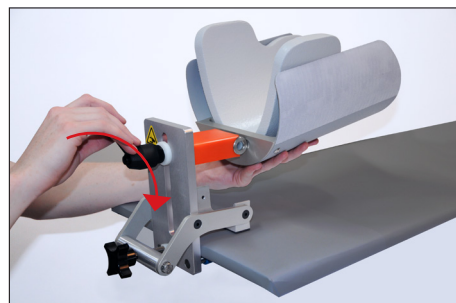

10



11



12




13




14




15

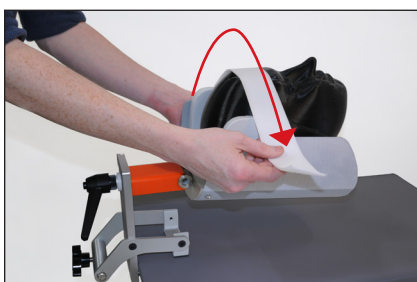

16

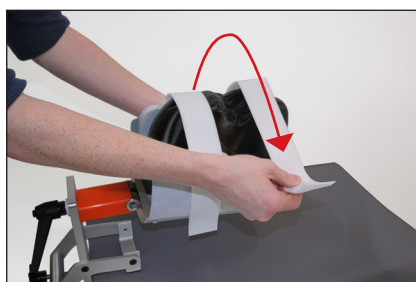

17

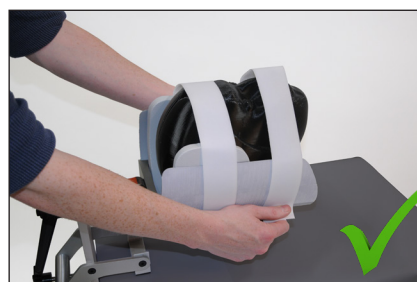

18




19




20

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


UKLANJANJE

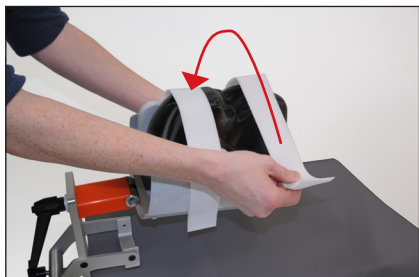


21

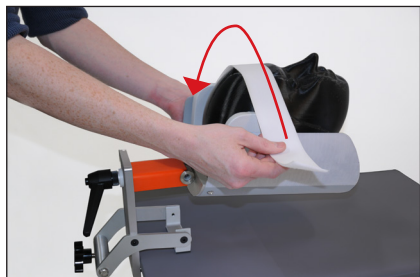

22

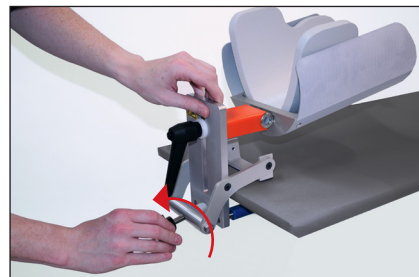

23

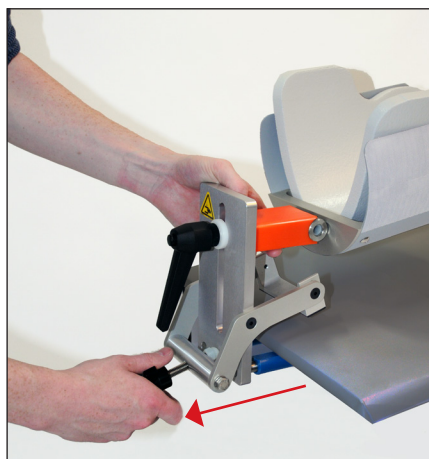

24



25



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.CQmedical.com

☎ +1 712.737.8668 / 800.842.8688
✉ info@CQmedical.com

2004685_SR_0
2024-12