


PRODUKTGUIDE OCH ANVÄNDARHANDBOK

8002048 och 8002049

DSA-2Q och DSA-2T Huvudhållare
(Head Holder)



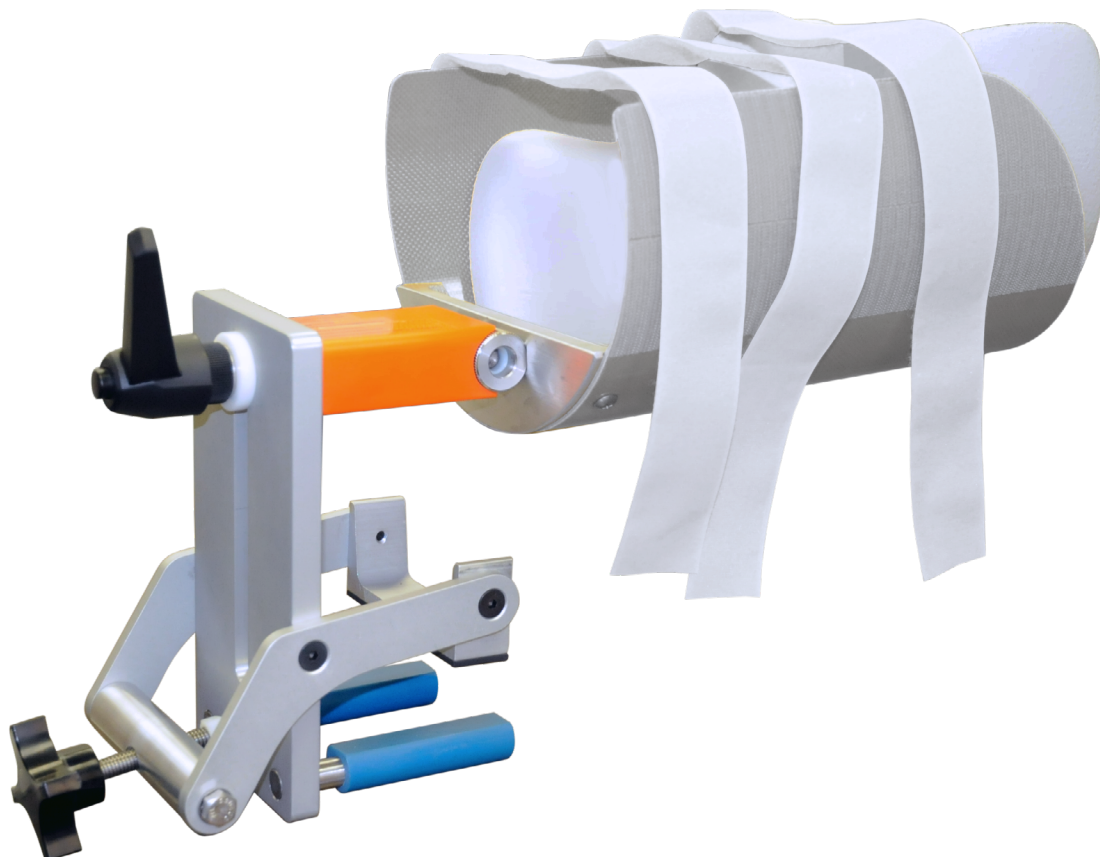

EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Tillverkad i USA av Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---

Cidex® är ett registrerat varumärke som tillhör Johnson & Johnson.

Clorox® är ett registrerat varumärke som tillhör The Clorox Company.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	4
VARNINGSMEDDELANDEN	4
ALLVARLIGA OLYCKOR	4
NOMINELL MAXBELASTNING.....	4
VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR.....	4
AVSEDD ANVÄNDNING	5
EGENSKAPER.....	6
BESKRIVNING	6
UNDERHÅLL	7
RENGÖRA SYSTEMET	7
DESINFICERA SYSTEMET	7
BRUKSANVISNING	8
INSTALLATION.....	8
INSTÄLLNING.....	9
AVLÄGSNANDE.....	10

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNINGSMEDDELANDEN

! VARNING ! INGA MODIFIERINGAR AV DENNA UTRUSTNING ÄR TILLÅTEN. AVBRYT OMEDELBART ANVÄNDNINGEN OCH KONTAKTA QFIX PÅ +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM OM NÅGON DEL AV DENNA ENHET BELASTAS KATASTROFALT, FÖREFALLER SKADAD ELLER FUNGERAR FELAKTIGT.

ALLVARLIGA OLYCKOR

Vänligen rapportera allvarliga olyckor (t.ex. olyckor som orsakar eller har potential att orsaka dödsfall eller allvarlig personskada) både till Qfix och till behörig myndighet i ditt land.

NOMINELL MAXBELASTNING

Får EJ överskrida 10 kg (22 pund) jämnt fördelad belastning.

! OBSERVERA ! Flera finjusteringar kan behöva göras när patienten är på plats.

! OBSERVERA ! Vid positionering av patienten, iaktta speciell försiktighet så att inte patienten placeras för högt i huvudhållaren. Detta kommer att vara obekvämt och kan skapa artefakter.

VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR

Se Qfix.com för en lista med symboler med definitioner.

AVSEDD ANVÄNDNING

Huvudhållaren (Head Holder) är utformad för att hålla och immobilisera huvudet. Denna anordning är primärt avsedd för interventionella procedurer inom neuroradiologi. Den är också tillämplig vid alla interventionella procedurer där patientens huvudrörelse måste minimeras.

Huvudhållaren är avsedd att användas i en klinisk omgivning av utbildade tekniker och kliniker.

! OBSERVERA ! Enligt amerikansk federal lag får denna enhet endast säljas av eller på ordination av läkare.

PATIENTMÅLGRUPPER

Patienter som får allmän medicinsk eller kirurgisk behandling innefattande diagnostisk avbildning.

AVSEDDA ANVÄNDARE

Avsedd användare för produkterna är en person kvalificerad i enlighet med regionens myndighetskrav.

EGENSKAPER

BESKRIVNING

Produkten är utformad för att komplettera och förbättra bildkvaliteten, prestandan samt produktiviteten av kardiovaskulär röntgenutrustning. Produkten stödjer patientens huvud och reducerar subtraktionsbildens felinriktning och förbättrar 3D-bilderna. Produktens enkla design underlättar installation, justering och avlägsnande samt låter användaren fokusera på patientens behov.

UNDERHÅLL

RENGÖRA SYSTEMET

Enheten kan rengöras med en mild, icke-slipande rengörings- eller desinfektionslösning. Rengör genom att applicera lösningen på en ren duk och torka av ytan.

DESINFICERA SYSTEMET

Följande rengöringsmaterial har testats och visats vara lämpliga för rengöring av enhetens ytor. För desinficering av ytan hänvisas till specifika instruktioner från rengöringsmedlets tillverkare.

- Vatten
- 10 % Clorox® blekmedelslösning
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktiverad dialdehydlösning
- Tvål och vatten

Spreja EJ direkt på huvudhållaren.

Lämna EJ huvudhållaren i vatten över natten.

Använd EJ klorin för att rengöra huvudhållaren.

Kontrollera regelbundet att alla fästen sitter fast.

BRUKSANVISNING

INSTALLATION



1




2




3




4

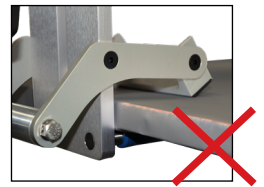

5

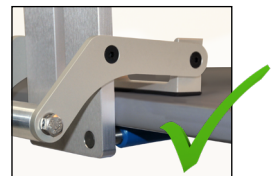


6

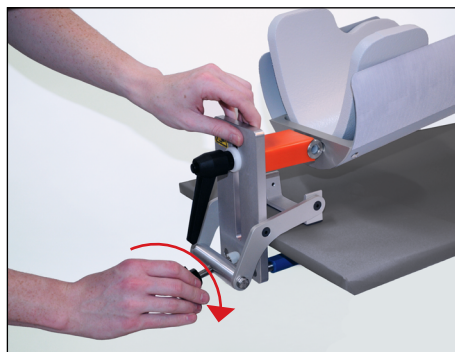


7

BRUKSANVISNING


INSTÄLLNING

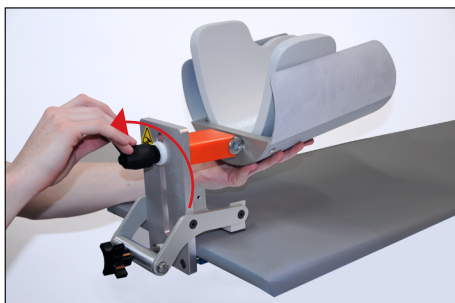

8

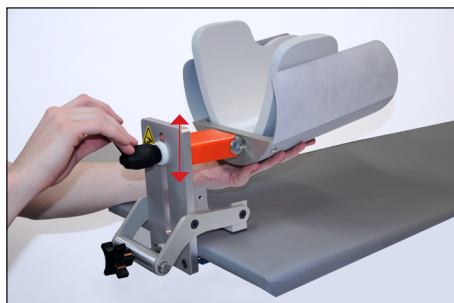

9

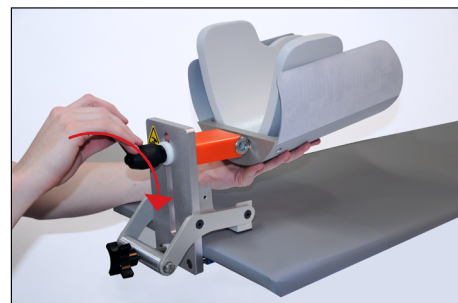

10



11




12




13




14

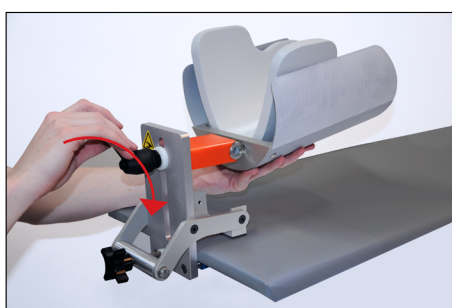


15

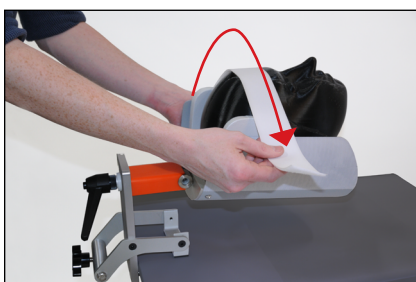

16

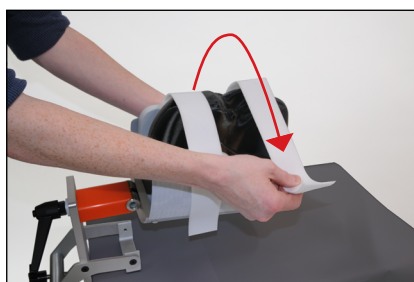


17

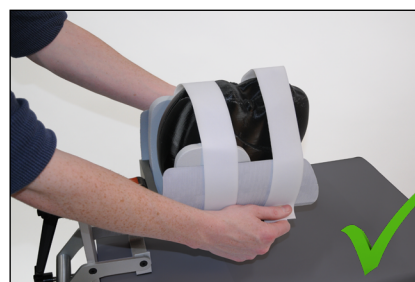

18




19

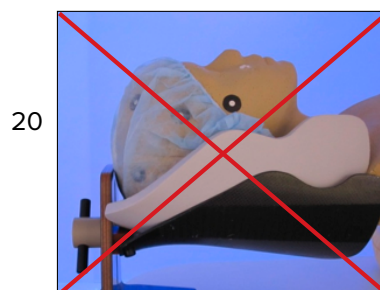


20

BRUKSANVISNING


AVLÄGSNANDE

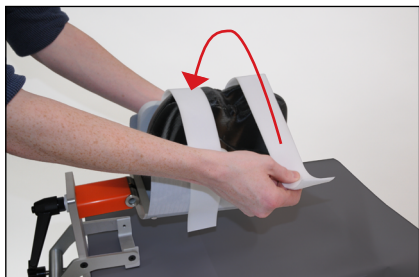


21

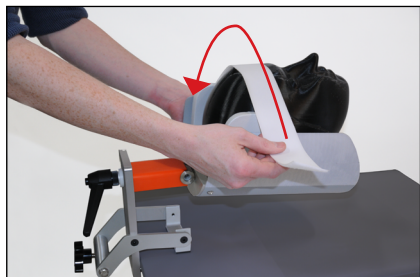

22

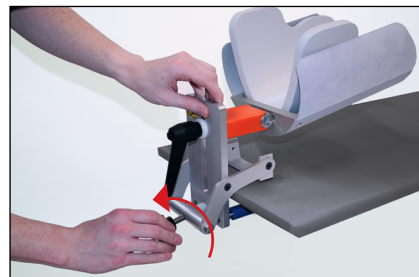

23

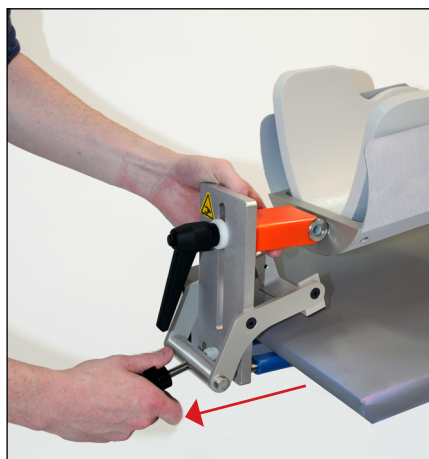

24



25



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com

2004685_SV_E
2020-07