


ÜRÜN KILAVUZU VE KULLANICI EL KİTABI

8002048 ve 8002049

DSA-2Q ve DSA-2T Kafa Tutucu
(Head Holder)



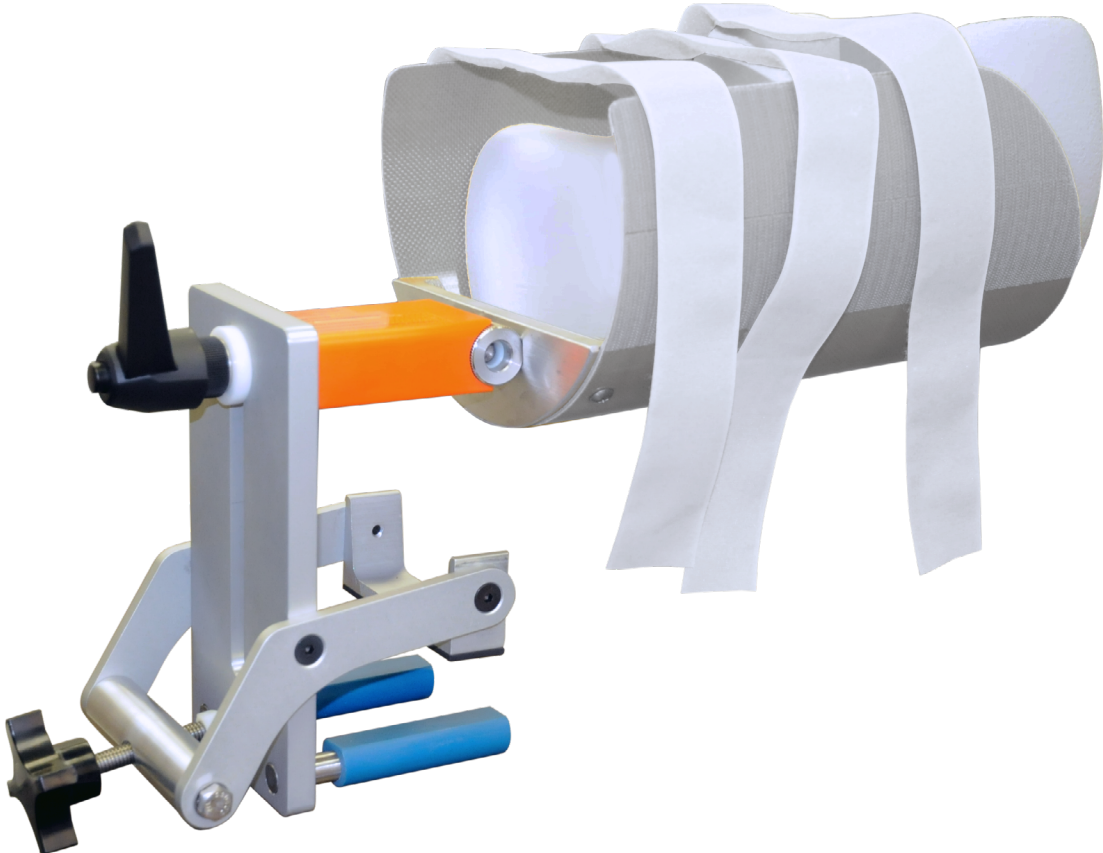

<table><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table>	EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 A.B.D.'de üreten Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
EC	REP			

Cidex®, Johnson & Johnson şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Clorox®, The Clorox Company'nin tescilli ticari markasıdır.

İÇİNDEKİLER

GENEL ÖNLEMLER	4
UYARI İFADELERİ	4
CİDDİ OLAYLAR	4
YÜK DERECELENDİRME	4
UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI	4
KULLANIM AMACI	5
ÖZELLİKLER	6
TANIM	6
BAKIM	7
SİSTEMİN TEMİZLENMESİ	7
SİSTEMİN DEZENFEKTE EDİLMESİ	7
ÇALIŞTIRMA TALİMATI	8
KURULUM	8
AYARLAMA	9
ÇIKARMA	10

GENEL ÖNLEMLER

UYARI İFADELERİ

! UYARI ! BU EKIPMANDA MODİFİKASYON YAPILMASINA İZİN VERİLMEZ. CİHAZIN HERHANGİ BİR KISMI ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE BİR YÜKE MARUZ KALIR, HASARLI GÖRÜNÜR VEYA UYGUN OLMAYAN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIRSA KULLANIMI HEMEN KESİN VE +1 484-720-6054 VEYA TECHSUPPORT@QFIX.COM KANALIYLA QFIX İLE İRTİBAT KURUN.

CİDDİ OLAYLAR

Ciddi olayları lütfen (ör. ölüm ya da ciddi yaralanmaya yol açan veya yol açma potansiyeli bulunan olaylar) hem Qfix firmasına hem de ülkenizde yetkili makama bildirin.

YÜK DERECELENDİRME

10 kg (22 lb) homojen dağıtılmış yük üzerine ÇIKMAYIN.

! NOT ! Daha ince ayarlamaların hasta yerleştikten sonra yapılması gerekebilir.

! NOT ! Hastayı konumlandırırken hastayı Kafa Tutucu içinde fazla yükseğe koymamaya dikkat edin. Bu durum rahatsız olacaktır ve artefaktlara yol açabilir.

UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI

Sembollerin listesi ve tanımları için Qfix.com sitesine bakın.

KULLANIM AMACI

Kafa Tutucu (Head Holder), kafayı konumlandırmak ve hareketsiz hale getirmek üzere tasarlanmıştır. Cihazın temel olarak girişimsel nöroradyoloji işlemlerinde kullanılması amaçlanmıştır. Bu, ayrıca hastanın kafa hareketini minimuma indirmek için herhangi bir girişimsel işlemde geçerlidir.

Kafa Tutucunun klinik bir ortamda eğitimli teknisyenler ve klinisyenler tarafından kullanılması amaçlanmıştır.

! NOT ! Bu cihazın satışı, ABD federal yasalarına göre sadece hekimler tarafından veya onların siparişi üzerine yapılabilir.

HASTA HEDEF GRUPLARI

Diagnostik görüntülemeyi içeren genel tıbbi veya cerrahi prosedürler uygulanmakta olan hastalar.

HEDEF KULLANICILAR

Ürünlerin hedef kullanıcısı, düzenleyici bölgedeki gerekliliklere uygun şekilde vasıflı kişidir.

ÖZELLİKLER

TANIM

Ürün, kardiyovasküler röntgen ekipmanının performansı, üretkenliği ve görüntü kalitesini desteklemek ve arttırmak üzere tasarlanmıştır. Ürün hastanın kafasını destekleyerek subtraksiyon yapılmış görüntüde yanlış hizalanmayı azaltır ve 3 boyutlu görüntülerin kalitesini artırır. Ürünün basit tasarımı kurulum, ayarlama ve çıkarmayı kolay hale getirir ve kullanıcının hastanın gereksinimlerine odaklanmasını mümkün kılar.

BAKIM

SİSTEMİN TEMİZLENMESİ

Cihaz yumuşak, aşındırıcı olmayan bir temizleyici veya dezenfektan solüsyonla temizlenebilir. Temizlemek için solüsyonu temiz bir beze uygulayın ve yüzeyi bezle silin.

SİSTEMİN DEZENFEKTE EDİLMESİ

Aşağıdaki temizlik materyalleri test edilmiş ve cihazların yüzeylerini temizlemek için uygun olduğu tespit edilmiştir. Yüzeyi dezenfekte etmek için temizlik ajanı üreticisinin spesifik talimatına başvurun.

- Su
- %10 Clorox® marka çamaşır suyu solüsyonu
- İzopropil Alkol
- Cidex® marka %2.4 Aktive Dialdehid Solüsyonu
- Sabunlu su

Doğrudan Kafa Tutucuya PÜSKÜRTMEYİN.

Kafa Tutucuyu gece boyunca suda BIRAKMAYIN.

Kafa Tutucuyu temizlemek için klorür KULLANMAYIN.

Tüm tutturucuları sıklık açısından düzenli olarak kontrol edin..

ÇALIŞTIRMA TALİMATI

KURULUM



1




2




3




4

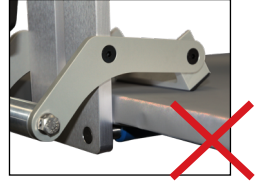

5

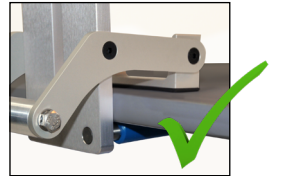

6

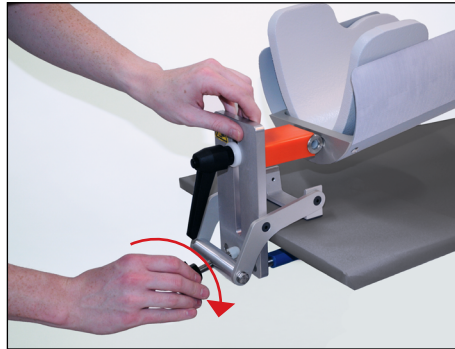


7

ÇALIŞTIRMA TALİMATI


AYARLAMA



8

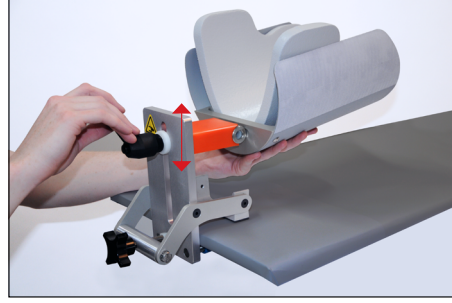

9

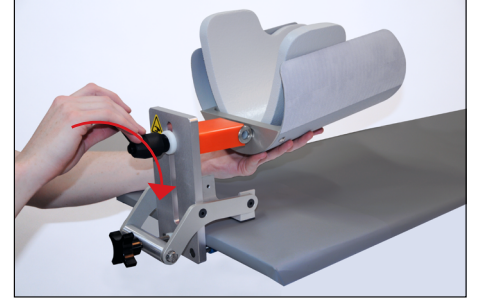


10



11




12

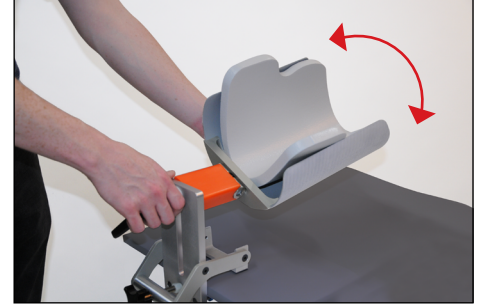


13




14

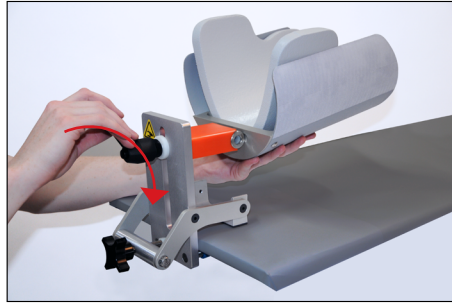


15

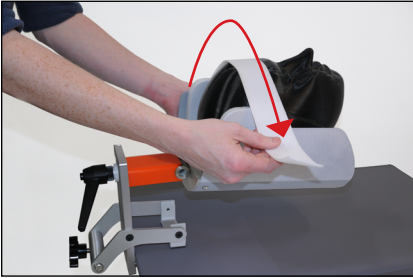

16

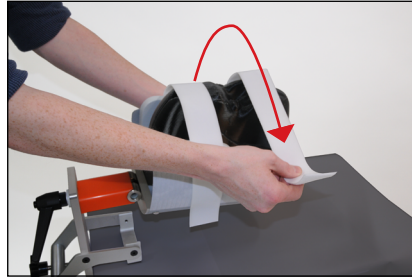

17

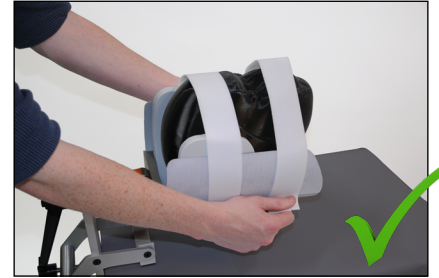

18




19




20

ÇALIŞTIRMA TALİMATI


ÇIKARMA

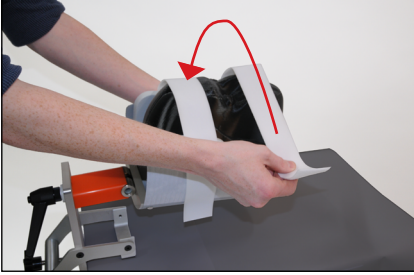


21

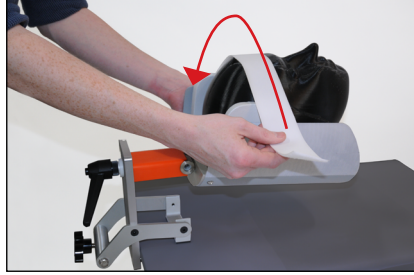

22

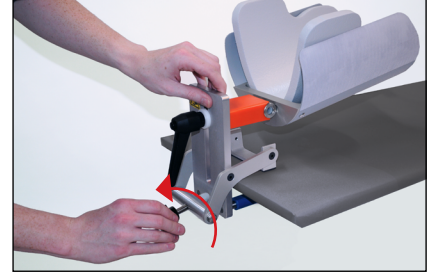

23

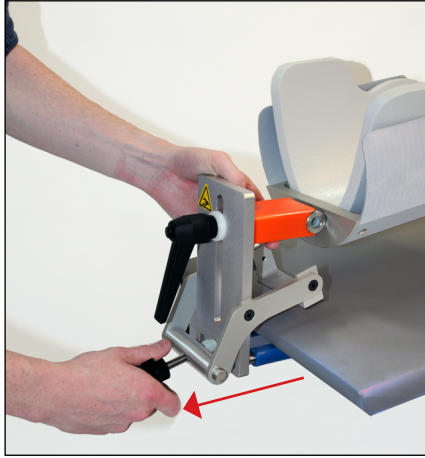

24



25



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004685_TR_E
2020-07