




positioning
patients for life.®

ІНСТРУКЦІЯ З ВИРОБУ ТА ПОСІБНИК СПОЖИВАЧА

8002048 та 8002049

DSA-2Q та DSA-2T Тримач голови
(Head Holder)

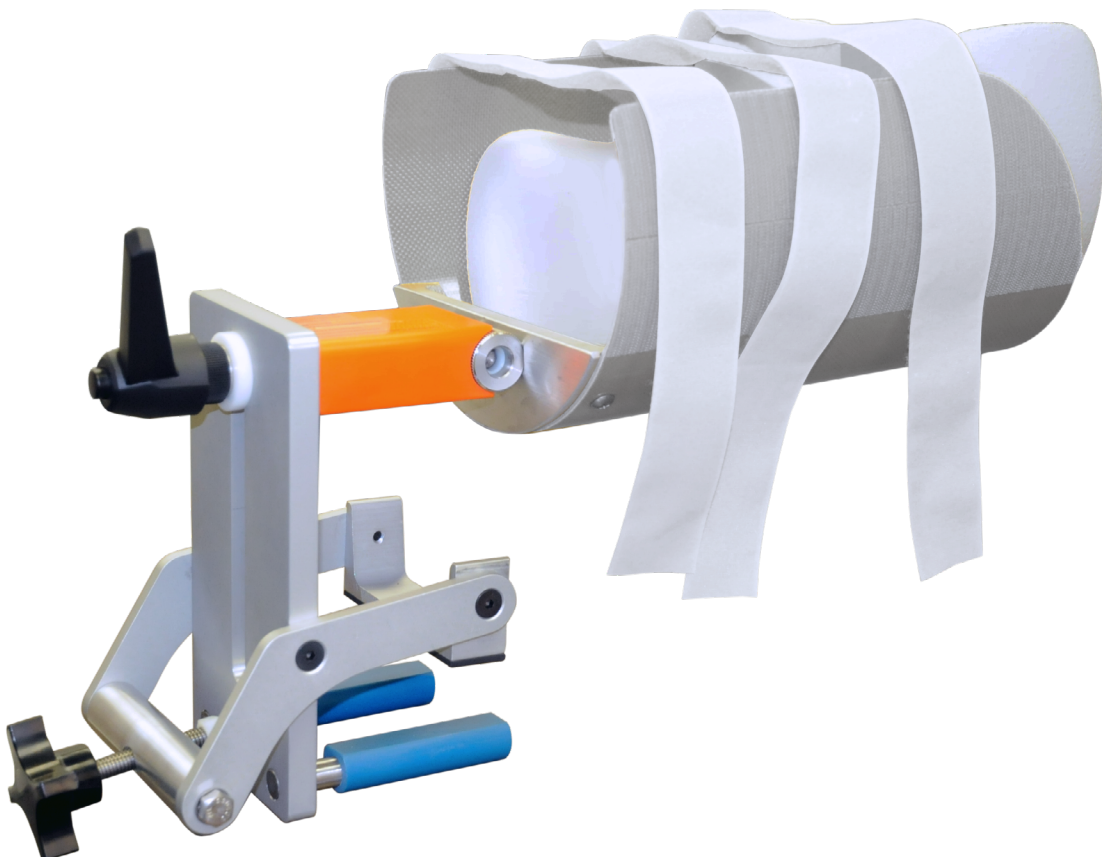



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Зроблене в США компанією Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---

Cidex® є зареєстрованою торговою маркою компанії Johnson & Johnson.

Clorox® є зареєстрованою торговою маркою компанії The Clorox Company.

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.....	4
ПОПЕРЕДЖУЮЧІ ЗАЯВИ.....	4
СЕРЙОЗНІ ІНЦИДЕНТИ.....	4
РОЗРАХУНКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ.....	4
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕТИКЕТКИ & ОПИСУ	4
ПЕРЕДБАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ.....	5
ХАРАКТЕРНІ РИСИ.....	6
ОПИСАННЯ.....	6
ДОГЛЯД.....	7
ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ.....	7
ДЕЗІНФЕКЦІЯ СИСТЕМИ.....	7
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.....	8
МОНТАЖ.....	8
ПРИПАСУВАННЯ.....	9
ЗНЯТТЯ.....	10

ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖУЮЧІ ЗАЯВИ

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ ! НІЯКОЇ МОДИФІКАЦІЇ ЦЬОГО ОБЛАДНАННЯ НЕ ДОЗВОЛЕНО. ЯКЩО БУДЬ-ЯКА ЧАСТИНА ЦЬОГО ПРИСТРОЮ ЗАЗНАЄ КАТАСТРОФІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ, ВИГЛЯДАЄ ПОШКОДЖЕНОЮ АБО ФУНКЦІОНУЄ НЕНАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, НЕГАЙНО ПРИПИНІТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ ТА ЗВЕРНІТЬСЯ В КОМПАНІЮ QFIX ЗА ТЕЛЕФОНОМ +1 484-720-6054 АБО ЗА ЕЛЕКТРОННОЮ АДРЕСОЮ TECHSUPPORT@QFIX.COM.

СЕРІОЗНІ ІНЦИДЕНТИ

Повідомляйте як Qfix, так і компетентний орган вашої країни про будь-які серйозні інциденти (наприклад, про випадки, які призводять або можуть призвести до смерті або серйозної травми).

РОЗРАХУНКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ

НЕ перевищуйте 10 кг (22 фунта) однорідно розподіленого навантаження.

! ПРИМІТКА ! Більш тонкі пристосування можуть знадобитися, коли пацієнт вже знаходиться на своєму місці.

! ПРИМІТКА ! Під час надання пацієнтові потрібного положення зверніть увагу на те, щоб пацієнта не було покладено дуже високо в тримач голови. Це буде незручним і може призвести до артефактів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕТИКЕТКИ & ОПИСУ

На сайті Qfix.com можна знайти список символів та їх значень.

ПЕРЕДБАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Тримач голови (Head Holder) спроектований для надання потрібного положення та іммобілізації голови. Цей пристрій призначений, у першу чергу, для інтервенційних нейрорентгенологічних процедур. Він також придатний для максимального зменшення рухів голови пацієнта під час будь-якої інтервенційної процедури.

Тримач голови призначений для використання підготовленими лаборантами та лікарями в умовах клініки.

! ПРИМІТКА ! США Федеральний закон обмежує цей пристрій для продажу або за вказівкою лікаря.

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ПАЦІЄНТІВ

Пацієнти, які проходять загальні медичні або хірургічні процедури, пов'язані з діагностичною візуалізацією.

ВИЗНАЧЕНІ КОРИСТУВАЧІ

Визначеним користувачем цих продуктів є людина, кваліфікована відповідно до вимог регулюючого регіону.

ХАРАКТЕРНІ РИСИ

ОПИСАННЯ

Даний виріб спроектований, щоб доповнювати та підвищувати якість зображення, експлуатаційні якості і продуктивність кардіоваскулярного рентгенологічного обладнання. Даний виріб підтримує голову пацієнта, що зменшує незбіг осей із зображенням, яке віднімається, а також підвищує якість тривимірних зображень. Проста конструкція виробу забезпечує легкий монтаж, пристосування та зняття і дозволяє споживачеві зосередитися на потребах пацієнта.

ДОГЛЯД

ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ

Даний пристрій можна очищати за допомогою м'якого, неабразивного очисного чи дезінфікуючого розчину. Не обприскуйте пристрій рідинами та не лейте їх на нього. Для проведення очистки намочіть розчином чисту тканину та витріть поверхню.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ СИСТЕМИ

Наступні очисні матеріали протестовані та продемонстрували свою придатність для очистки поверхонь пристрою. Щоб дезінфікувати поверхню, зверніться до спеціальних інструкцій, які надає виробник очисного засобу.

- Вода
- 10% розчин натрію гіпохлориту Clorox®
- Ізопропіловий спирт
- Cidex® 2,4% активований розчин діальдегіду
- Мило та вода

НЕ прискайте безпосередньо на тримач голови!

НЕ залишайте тримач голови у воді на ніч!

НЕ використовуйте хлор для очистки тримача голови!

Періодично перевіряйте, чи затягнуті всі кріпильні деталі.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МОНТАЖ



1




2




3




4

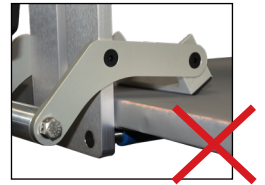

5

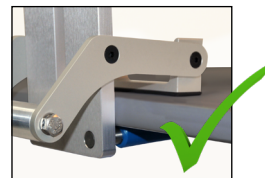


6

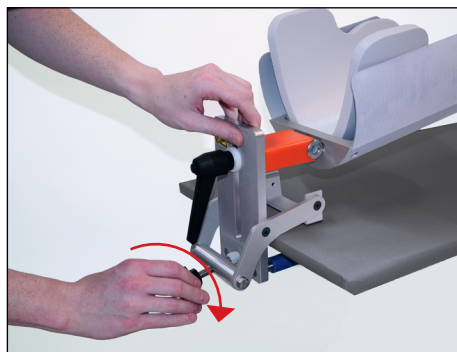


7

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


ПРИПАСУВАННЯ

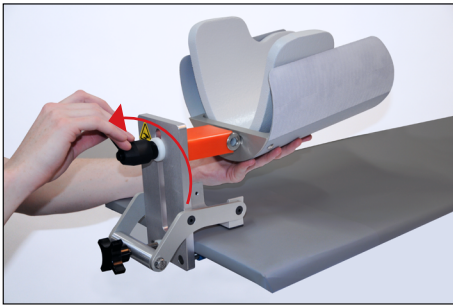

8

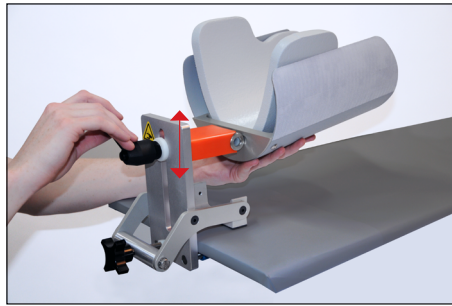

9

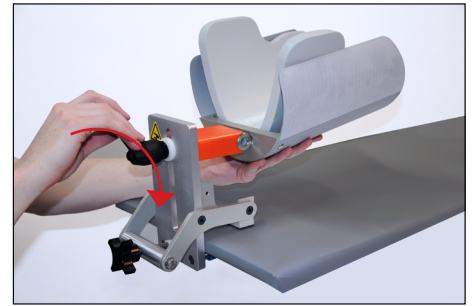


10



11




12

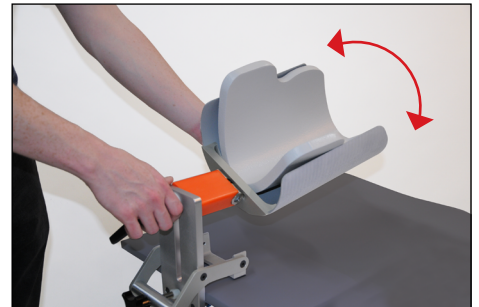


13




14

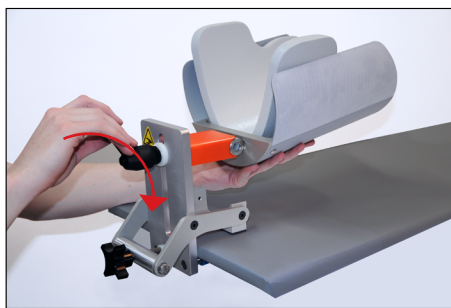


15

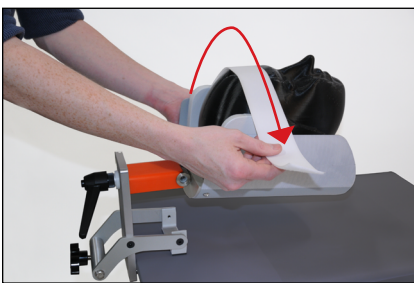

16

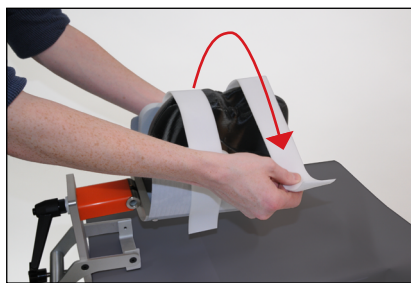


17

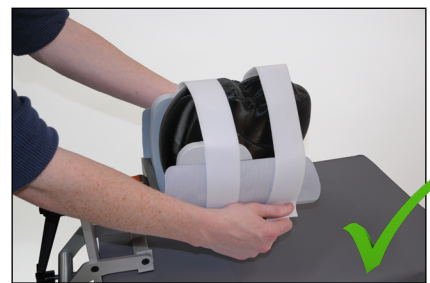

18




19

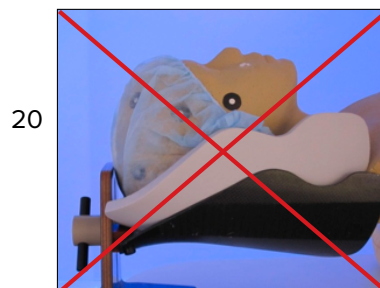


20

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


ЗНЯТТЯ

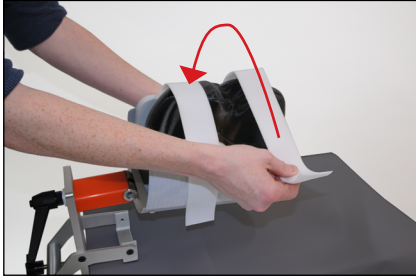


21

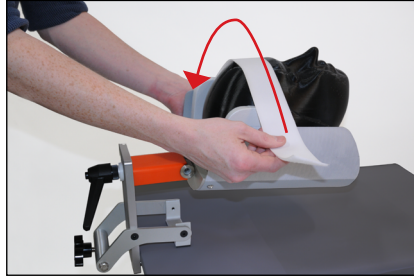

22

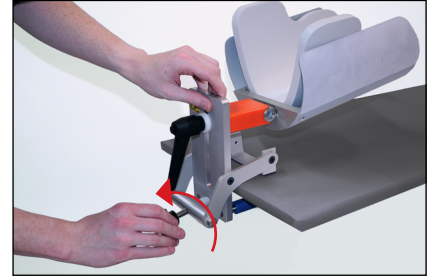

23

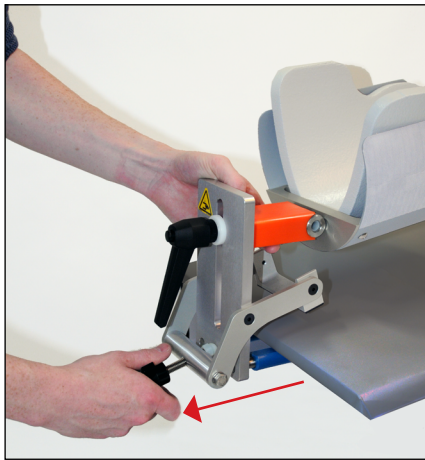

24



25



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com

2004685_UK_E
2020-07