



PRODUKTVEJLEDNING OG BRUGERMANUAL

8002041

8002066

8002067

X-Trans[®] armstøtte (Armboard)



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Fremstillet i USA af Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--

X-Trans® er et registreret varemærke, der tilhører Qfix.

Cidex® er et registreret varemærke, der tilhører virksomheden Johnson & Johnson.

Clorox® er et registreret varemærke, der tilhører Clorox Company.

INDHOLDSFORTEGNELSE

ALMINDELIGE FORHOLDSREGLER	4
ADVARSLER	4
ALVORLIGE HÆNDELSER	4
BELASTNINGSKAPACITET	4
ADVARSELSMÆRKATER OG BESKRIVELSER.....	4
TILSIGTET ANVENDELSE	5
VEDLIGEHOLDELSE	6
RENGØRING AF SYSTEMET	6
DESINFICERING AF SYSTEMET	6
RESERVEDELSLISTE	7
8002065 (A)	7
8002068 (B)	7
BRUGSANVISNING	8
INSTALLATION.....	8
FJERNELSE	10

ALMINDELIGE FORHOLDSREGLER

ADVARSLER

! ADVARSEL ! DET ER IKKE TILLADT AT MODIFICERE DETTE UDSYR. HVIS EN DEL AF UDSYRET KOMMER UD FOR EN MEGET STOR BELASTNING UD OVER BELASTNINGSKAPACITETEN, SER UD TIL AT VÆRE BESKADIGET ELLER FUNGERER FORKERT, SKAL BRUG AF UDSYRET OMGÅENDE INDSTILLES OG QFIX KONTAKTES PÅ +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM

ALVORLIGE HÆNDELSER

Rapportér alle alvorlige hændelser (f.eks. hændelser, der resulterer i eller har potentiale til at resultere i død eller alvorlig personskade) til både Qfix og den kompetente myndighed i dit land.

BELASTNINGSKAPACITET

8002041—Overstig IKKE en ensartet fordelt belastning på 249 kg (550 pund)

8002066—Overstig IKKE en ensartet fordelt belastning på 226 kg (500 pund)

8002067—Overstig IKKE en ensartet fordelt belastning på 226 kg (500 pund)

ADVARSELSMÆRKATER OG BESKRIVELSER

Få en liste over symboler med definitioner på Qfix.com.

TILSIGTET ANVENDELSE

Denne produktgruppe er designet som røntgengenemskinneligt udstyr, der bruges til injektioner og/eller armstøtter. Produkterne er designet til at anvendes med angiografislejer med flad overflade og billeddiagnostiske lejer med flad overflade.

! BEMÆRK ! Ifølge amerikansk lov må dette produkt kun sælges af eller på en læges anvisning.

PATIENTMÅLGRUPPER

Patienter, der gennemgår generelle medicinske eller kirurgiske procedurer, der involverer diagnostisk billeddannelse.

TILSIGTEDE BRUGERE

Den tilsigtede bruger til dette produkt er en person, som er kvalificeret i henhold til de lovgivningsmæssige krav i den respektive region.

VEDLIGEHOELSE

RENGØRING AF SYSTEMET

Udstyret kan rengøres med et mildt, ikke-slibende rengørings- eller desinfektionsmiddel. Rengør udstyret ved at påføre midlet på en ren klud og tørre overfladen af.

DESINFICERING AF SYSTEMET


Følgende rengøringsmaterialer er blevet testet og er egnede til rengøring af overfladerne på enhederne. Se de specifikke anvisninger fra producenten af rengøringsmidlet vedrørende desinfektion af overfladen.

- Vand
- En 10 % Clorox®-blegeopløsning
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktiveret dialdehydmiddel
- Sæbe og vand


Tjek regelmæssigt, at alle sikringer er fastspændte.

RESERVEDELSLISTE

8002065 (A)

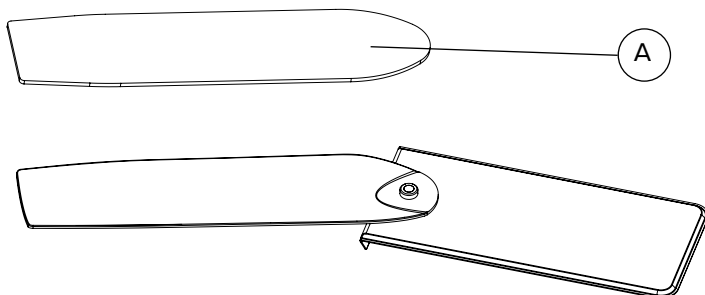


8002068 (B)

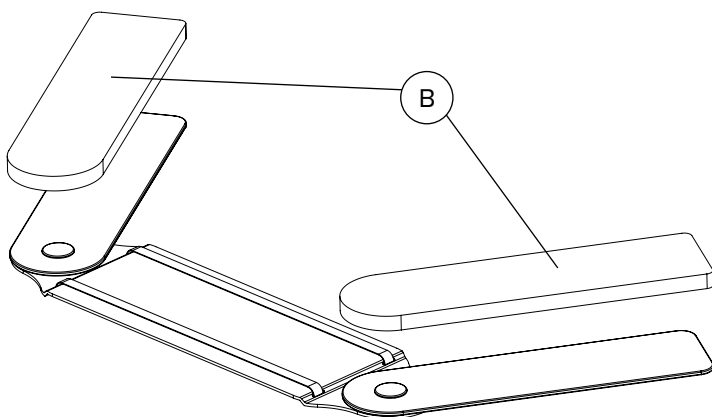


BRUGSANVISNING

INSTALLATION

8002041

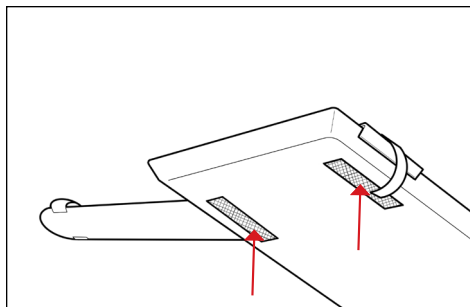

1

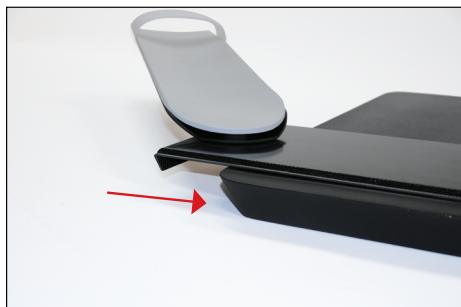


2




3



4

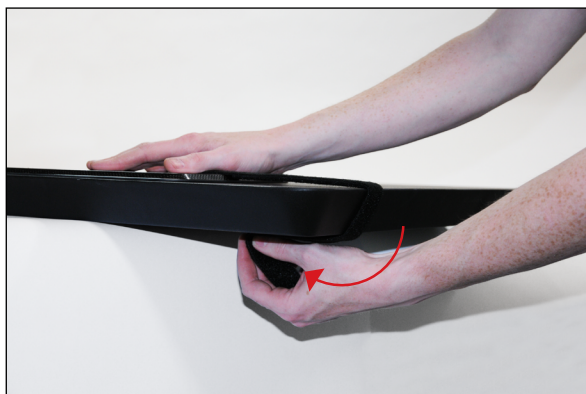

5

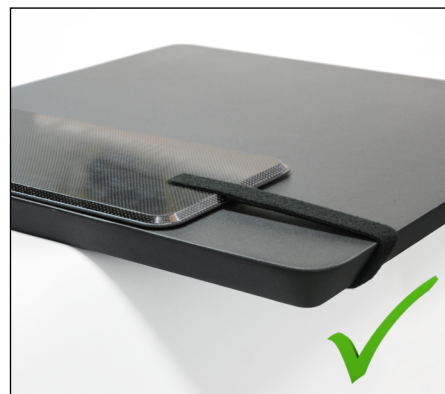

6



7

BRUGSANVISNING

INSTALLATION


8002066 og 8002067



8



9

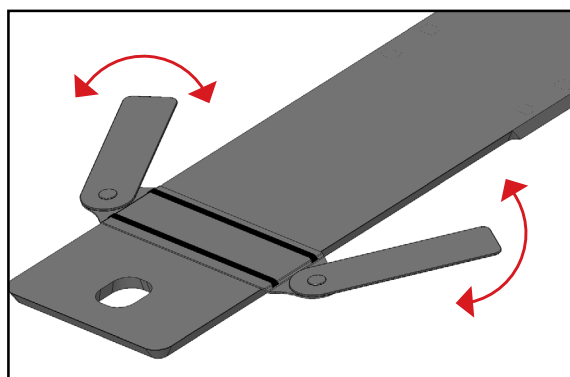


10


BRUGSANVISNING

FJERNELSE


8002041

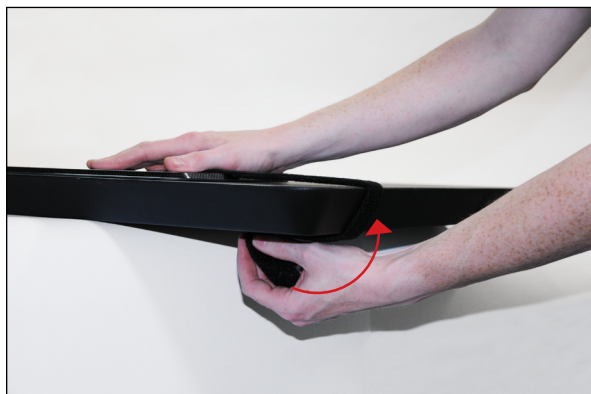

11

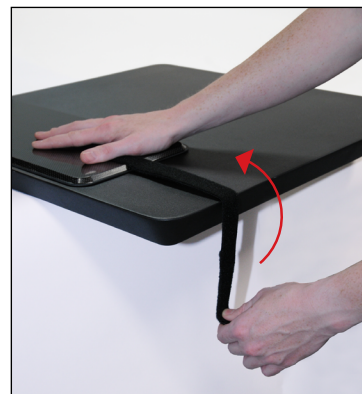

12

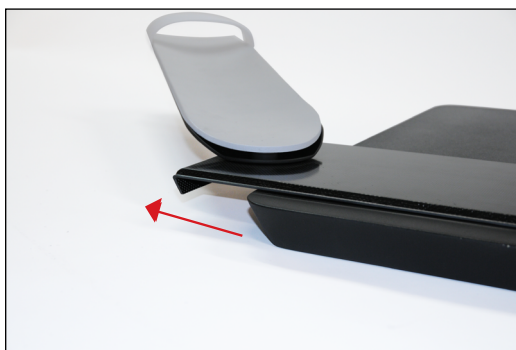

13

BRUGSANVISNING

FJERNELSE

8002066 og 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

☎ +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004706_DA_E
2020-07