



GUÍA DEL PRODUCTO Y MANUAL DEL USUARIO

8002041

8002066

8002067

Placa para el brazo (Armboard) X-Trans®



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	Fabricado en EE. UU. por: Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---

X-Trans® es una marca comercial registrada de Qfix.

Cidex® es una marca comercial registrada de Johnson & Johnson.

Clorox® es una marca comercial registrada de The Clorox Company.

ÍNDICE

PRECAUCIONES GENERALES.....	4
ENUNCIADOS DE ADVERTENCIA	4
INCIDENTES GRAVES.....	4
CAPACIDAD DE CARGA.....	4
ETIQUETAS Y DESCRIPCIONES DE ADVERTENCIAS	4
USO PREVISTO.....	5
MANTENIMIENTO	6
LIMPIEZA DEL SISTEMA.....	6
DESINFECCIÓN DEL SISTEMA.....	6
LISTA DE PIEZAS	7
8002065 (A)	7
8002068 (B)	7
INSTRUCCIONES DE USO.....	8
INSTALACIÓN	8
RETIRADA	10

PRECAUCIONES GENERALES

ENUNCIADOS DE ADVERTENCIA

¡ ADVERTENCIA ! NO SE PERMITE NINGUNA MODIFICACIÓN DE ESTE EQUIPO. SI CUALQUIER PIEZA DE ESTE DISPOSITIVO EXPERIMENTA UNA CARGA CATASTRÓFICA, PARECE DAÑADA O FUNCIONA INADECUADAMENTE, INTERRUMPA SU USO INMEDIATAMENTE Y PÓNGASE EN CONTACTO CON QFIX EN EL +1 484-720-6054 O EN TECHSUPPORT@QFIX.COM.

INCIDENTES GRAVES

Notifique cualquier incidente grave (por ejemplo, incidentes que hayan causado o hayan podido causar lesiones graves o la muerte) tanto a Qfix como al organismo competente de su país.

CAPACIDAD DE CARGA

8002041—NO supere los 249 kg (550 lb) de carga uniformemente distribuida.

8002066—NO supere los 226 kg (500 lb) de carga uniformemente distribuida.

8002067—NO supere los 226 kg (500 lb) de carga uniformemente distribuida.

ETIQUETAS Y DESCRIPCIONES DE ADVERTENCIAS

Vaya a Qfix.com para consultar un listado de los símbolos y sus definiciones.

USO PREVISTO

Esta familia de productos está diseñada como dispositivos radiotransparentes que se utilizan para inyección o como apoyabrazos. Los productos están diseñados para utilizarse en mesas de angiografía o de adquisición de imágenes que tengan una superficie plana.

¡ NOTA ! La ley federal de Estados Unidos permite la venta de este dispositivo únicamente a facultativos o bajo prescripción facultativa.

GRUPOS OBJETIVO DE PACIENTES

Pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos o médicos generales que impliquen la obtención de imágenes de diagnóstico.

USUARIOS PREVISTOS

El usuario previsto de los productos es una persona cualificada de acuerdo con los requisitos de la región reglamentaria.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL SISTEMA

El dispositivo se puede limpiar con una solución limpiadora o desinfectante suave y no abrasiva. Para limpiar, aplique la solución en un paño limpio y frote la superficie.

DESINFECCIÓN DEL SISTEMA


A continuación se enumeran los materiales de limpieza que han sido evaluados y comprobados como adecuados para limpiar las superficies de los dispositivos. Para desinfectar la superficie, consulte las instrucciones específicas del fabricante del producto de limpieza.

- Agua
- Solución blanqueadora Clorox® al 10 %
- Alcohol isopropílico
- Solución de dialdehído activada al 2,4 % Cidex®
- Jabón y agua


Compruebe con regularidad todos los cierres para ver si están apretados.

LISTA DE PIEZAS

8002065 (A)

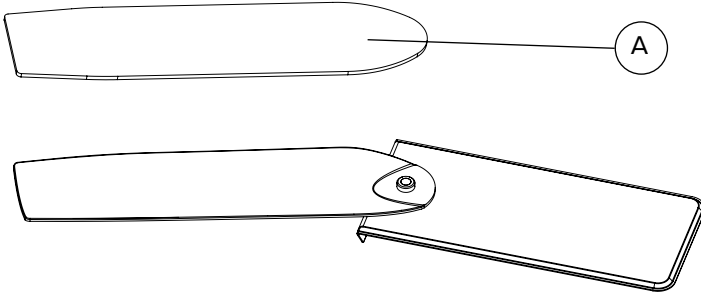


8002068 (B)

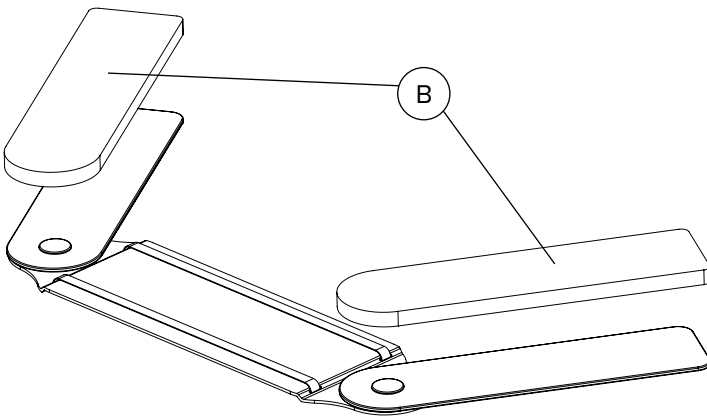


INSTRUCCIONES DE USO

INSTALACIÓN

8002041

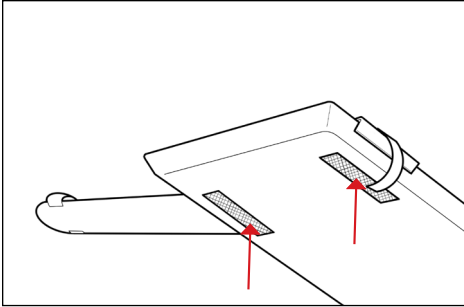

1

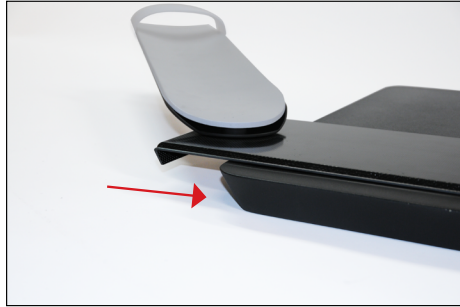

2




3



4



5

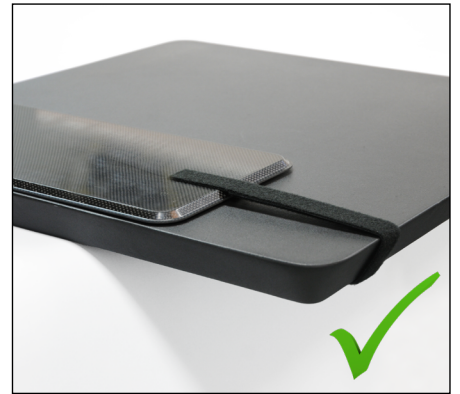

6



7

INSTRUCCIONES DE USO

INSTALACIÓN


8002066 y 8002067



8



9

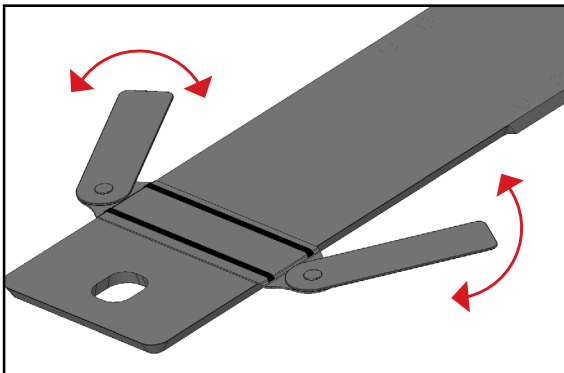


10


INSTRUCCIONES DE USO

RETIRADA


8002041

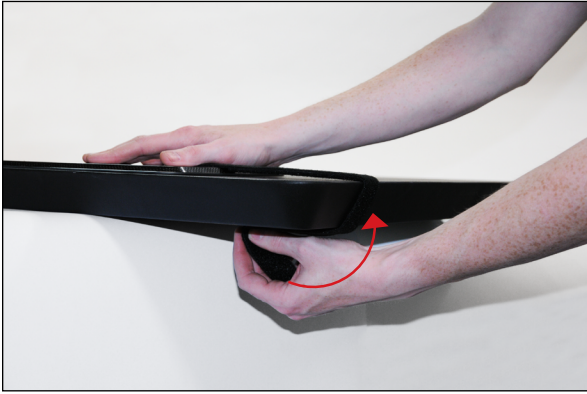

11

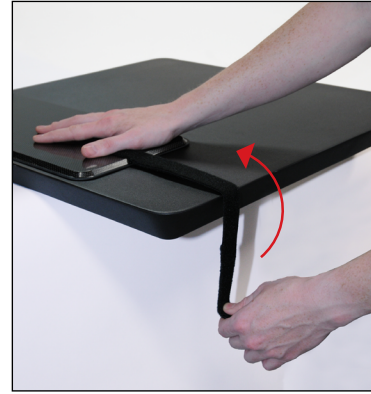

12

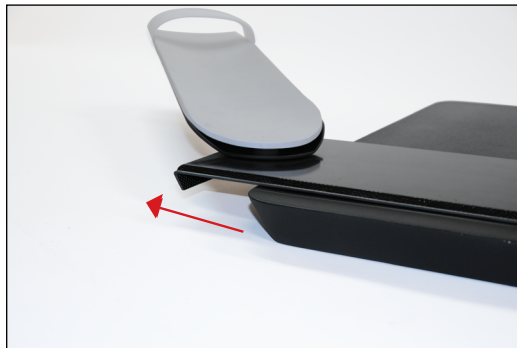

13

INSTRUCCIONES DE USO

RETIRADA

8002066 y 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004706_ES_E
2020-07