



TOOTE- JA KASUTUSJUHEND

8002041

8002066

8002067

Käetugi X-Trans[®] (Armboard)



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Valmistatud USAs, tootja: Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---

X-Trans® on ettevtte Qfix registreeritud kaubamärk.

Cidex® on ettevtte Johnson & Johnson registreeritud kaubamärk.

Clorox® on ettevtte The Clorox Company registreeritud kaubamärk.

SISUKORD

ÜLDISED ETTEVAATUSABINÕUD	4
HOIATUSLAUSED	4
RASKED JUHTUMID	4
NIMIKOORMUS	4
HOIATUSMÄRGID JA KIRJELDUSED	4
KAVANDATUD KASUTUS	5
HOOLDUS	6
SÜSTEEMI PUHASTAMINE	6
SÜSTEEMI DESINFITSEERIMINE	6
OSADE LOEND	7
8002065 (A)	7
8002068 (B)	7
KASUTUSJUHISED	8
PAIGALDAMINE	8
EEMALDAMINE	10

ÜLDISED ETTEVAATUSABINÕUD

HOIATUSLAUSED

!HOIATUS! SEADMESTIKUS EI OLE LUBATUD TEHA MISTAHES MUUDATUSI. KUI SEADME MISTAHES OSA ON KANNATANUD KATASTROOFILIST KOORMUST, NÄIB KAHJUSTATUD VÕI TÖÖTAB MITTENÕUETEKOHASELT, LÕPETAGE VIIVITAMATULT SELLE KASUTAMINE JA VÕTKE ÜHENDUST ETTEVÕTTEGA QFIX TELEFONIL +1 484-720-6054 VÕI MEILIAADRESSIL TECHSUPPORT@QFIX.COM.

RASKED JUHTUMID

Andke teada igasugustest rasketest juhtumitest (nt juhtumitest, mis lõppevad või millel on potentsiaal lõppeda surma või raske vigastusega) nii kaubamärgile Qfix kui ka oma riigi pädevale asutusele.

NIMIKOORMUS

8002041—ÄRGE ületage ühtlaselt jaotatud koormust 249 kg (550 naela)

8002066—ÄRGE ületage ühtlaselt jaotatud koormust 226 kg (500 naela)

8002067—ÄRGE ületage ühtlaselt jaotatud koormust 226 kg (500 naela)

HOIATUSMÄRGID JA KIRJELDUSED

Vt sümbolite ja nende definitisioonide nimekirja lehelt Qfix.com.

KAVANDATUD KASUTUS

Antud tootepere koosneb süstimiseks ja/või käetugedena kasutatavatest röntgenkiirgusele läbipaistvatest seadmetest. Antud tooted on ette nähtud kasutamiseks koos tasapinnaliste angiograafialaudade ja tasapinnaliste piltagnostika laudadega.

! MÄRGE ! Ameerika Ühendriikide föderaalne seadus piirab seda seadet müüa või et arst.

PATSIENTIDE SIHTGRUPID

Patsiendid, kellele tehakse üldiseid meditsiinilisi või kirurgilisi protseduure, mis hõlmavad diagnostilist kuvamist.

ETTENÄHTUD KASUTAJAD

Toodete kasutajaks on ette nähtud vastava piirkonna regulatiivsete nõuete kohaselt kvalifitseeritud isik.

HOOLDUS

SÜSTEEMI PUHASTAMINE

Käetoe (Armboard) puhastamiseks võib kasutada õrnatoimelist mitteabrasiivset puhastus- või desinfitseerimislahust. Puhastamiseks kandke lahus puhtale lapile ja pühkige seadme pinda.

SÜSTEEMI DESINFITSEERIMINE


Käetoe pindade puhastamiseks on testitud ja tunnistatud sobivaks järgmised puhastusmaterjalid. Käetoe pinna desinfitseerimise kohta vt vastavaid puhastusvahendi tootja juhiseid.

- Valgendi Clorox® 10% lahus
- Isopropüülalkohol
- Aktiveeritud dialdehüüdi Cidex® 2,4% lahus
- Seep ja vesi


Kontrollige perioodiliselt kinnitite pingutust.

OSADE LOEND

8002065 (A)

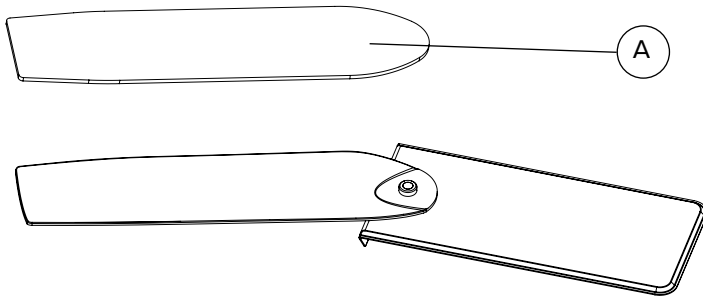


8002068 (B)

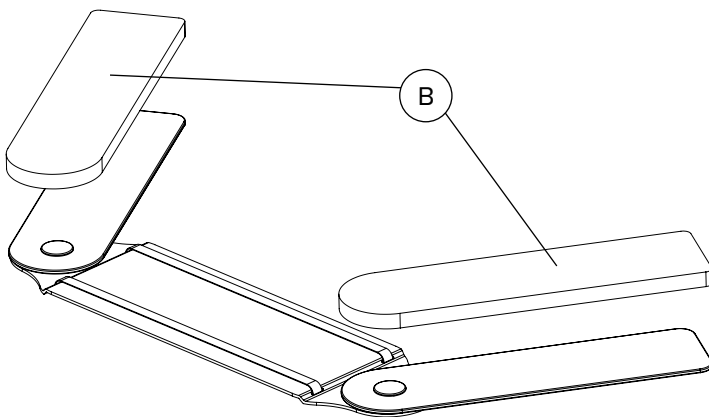


KASUTUSJUHISED

PAIGALDAMINE

8002041

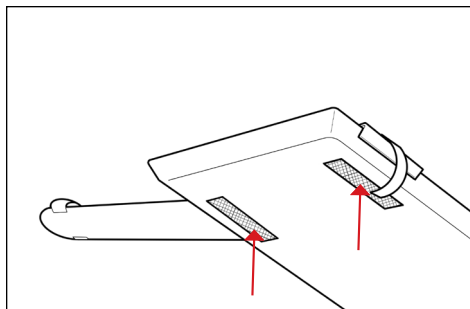

1

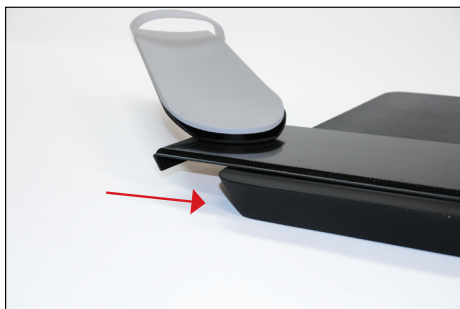

2




3



4



5

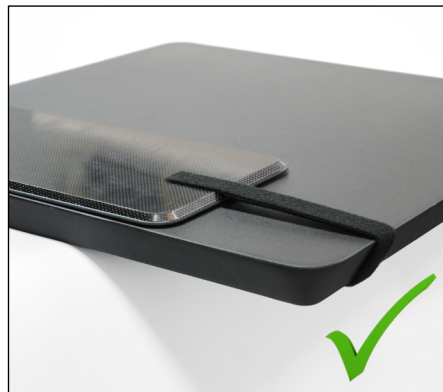

6



7

KASUTUSJUHISED

PAIGALDAMINE


8002066 ja 8002067



8



9

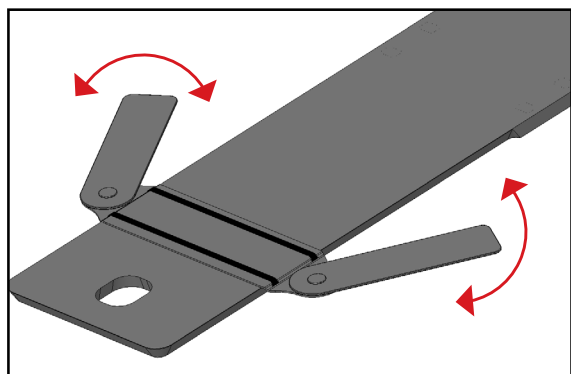


10


KASUTUSJUHISED

EEMALDAMINE


8002041

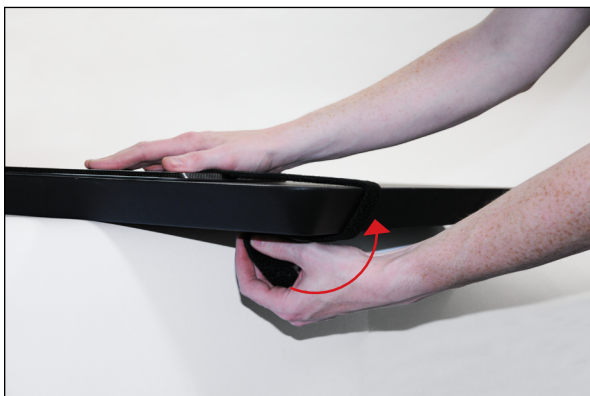

11

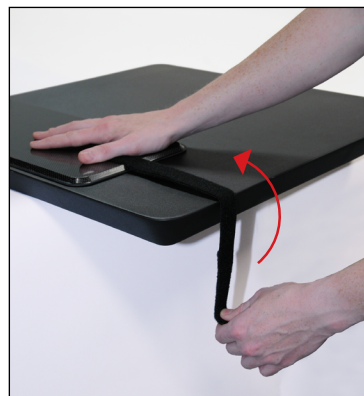

12

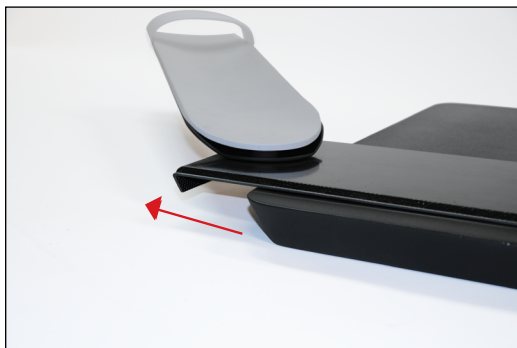

13

KASUTUSJUHISED

EEMALDAMINE

8002066 ja 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com