



positioning
patients for life.®

TUOTEOHJE JA KÄYTTÖOPAS

8002041

8002066

8002067

X-Trans®-käsinojalevy (Armboard)



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Valmistaja USA:ssa Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--	--

X-Trans® on Qfixin rekisteröity tavaramerkki.

Cidex® on Johnson & Johnsonin rekisteröity tavaramerkki.

Clorox® on The Clorox Companyn rekisteröity tavaramerkki.

SISÄLTÖ

YLEISET VAROTOIMET	4
VAROITUSLAUSEKKEET	4
VAKAVAT HAITTATAPAHTUMAT	4
KANTOKYKY	4
VAROITUSTARRAT JA KUVAUKSET	4
KÄYTTÖTARKOITUS	5
YLLÄPITO	6
JÄRJESTELMÄN PUHDISTAMINEN	6
JÄRJESTELMÄN DESINFIOIMINEN	6
OSALUETTELO	7
8002065 (A)	7
8002068 (B)	7
KÄYTTÖOHJEET	8
ASENNUS	8
POISTAMINEN	10

YLEISET VAROTOIMET

VAROITUSLAUSEKKEET

!VAROITUS! TÄTÄ LAITTEISTOA EI SAA MUUNTA A MILLÄÄN TAVALLA. JOS TÄMÄN LAITTEEN MITÄÄN OSAA KUORMITETAAN LIIKAA, SE NÄYTTÄÄ VAURIOITUNEELTA TAI TOIMII VIRHEELLISESTI, LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI JA OTA YHTEYTTÄ QFIXIIN, PUH. +1 484-720-6054 TAI SÄHKÖPOSTITSE OSOITTEESEEN TECHSUPPORT@QFIX.COM.

VAKAVAT HAITTATA PAHTUMAT

Ilmoita kaikista vakavista haittatapahtumista (esim. tapahtumat, joista seuraa tai voi seurata kuolema tai vakava vamma) sekä Qfixille että oman maasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

KANTOKYKY

8002041—249 kg:n (550 paunan) yhtäläisesti jakautunutta kuormaa EI SAA ylittää

8002066—226 kg:n (500 paunan) yhtäläisesti jakautunutta kuormaa EI SAA ylittää

8002067—226 kg:n (500 paunan) yhtäläisesti jakautunutta kuormaa EI SAA ylittää

VAROITUSTARRAT JA KUVAUKSET

Symboliluettelo ja symbolien määritelmät ovat osoitteessa Qfix.com.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä tuoteperhe on suunniteltu injektioissa ja/tai käsinojissa käytettäväksi röntgennegatiivisiksi laitteiksi. Tuotteet on suunniteltu käytettäväksi tasaisten angiografiapöytien ja tasaisten kuvauspöytien kanssa.

! HUOMAUTUS ! Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksellä.

POTILASKOHDERYHMÄT

Potilaat, joille tehdään diagnostista kuvantamista edellyttävä yleislääketieteellinen tai kirurginen toimenpide.

TARCOITETUT KÄYTTÄJÄT

Tuotteiden tarkoitettu käyttäjä on henkilö, jolla on kyseisellä lainkäyttöalueella edellytetty pätevyys.

YLLÄPITO

JÄRJESTELMÄN PUHDISTAMINEN

Laite voidaan puhdistaa miedolla, hankaamattomalla pesu- tai desinfiointiliuoksella. Puhdista kostuttamalla puhtas liina liuokseen ja pyyhkimällä pinta.

JÄRJESTELMÄN DESINFIOIMINEN


Seuraavat pesuaineet on testattu ja niiden on havaittu olevan asianmukaisia laitteiden pintojen puhdistamiseen. Pinnan desinfioinnissa on noudatettava pesuaineen valmistajan erityisohjeita.

- Vesi
- 10 % Clorox®-valkaisuaineliuos
- Isopropyylialkoholi
- Cidex® 2,4 % aktivoitu dialdehydiliuos
- Saippua ja vesi


Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukkoja.

OSALUETTELO

8002065 (A)

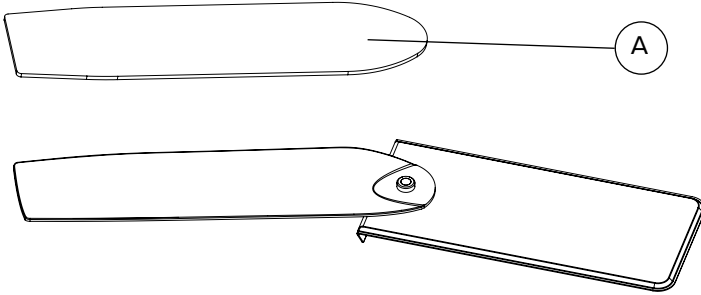


8002068 (B)

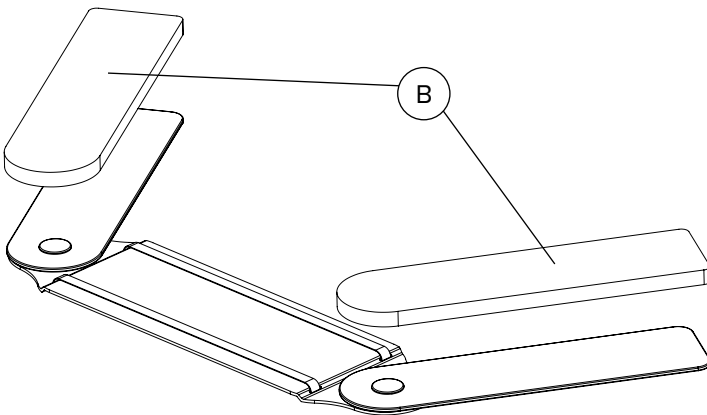


KÄYTTÖOHJEET

ASENNUS

8002041

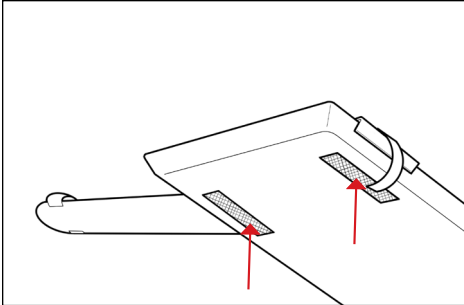

1

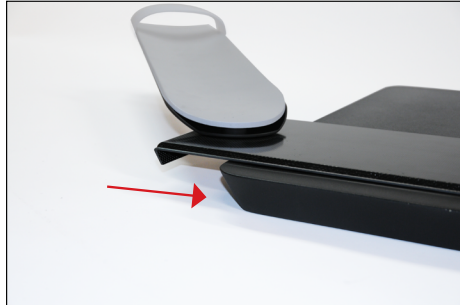

2




3



4



5

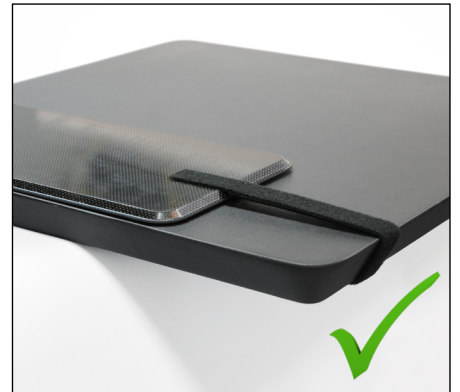

6



7

KÄYTTÖOHJEET

ASENNUS


8002066 ja 8002067



8



9

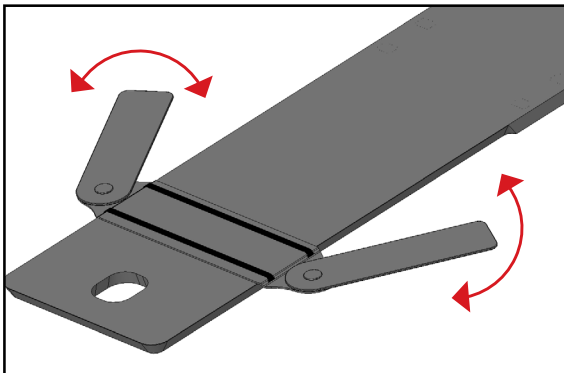


10


KÄYTTÖOHJEET

POISTAMINEN


8002041

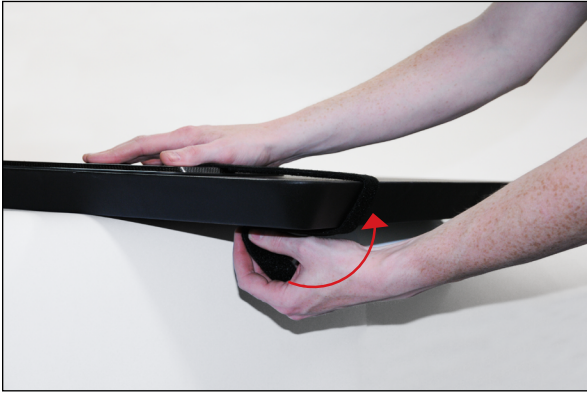

11

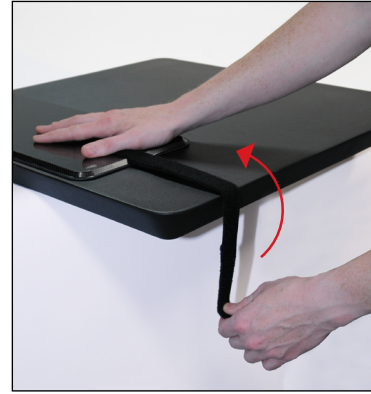

12

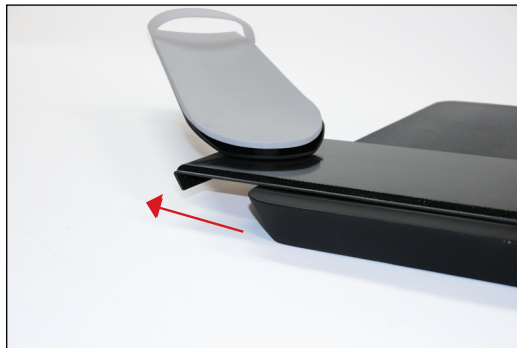

13

KÄYTTÖOHJEET

POISTAMINEN

8002066 ja 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com

2004706_FI_E
2020-07