



VODIČ I UPUTE ZA UPORABU PROIZVODA

8002041

8002066

8002067

X-Trans[®] naslon za ruku (Armboard)



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Proizvelo u SAD-u društvo Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--	---

X-Trans® je registrirani zaštitni znak društva Qfix.

Cidex® je registrirani zaštitni znak društva Johnson & Johnson.

Clorox® je registrirani zaštitni znak društva The Clorox Company.

SADRŽAJ

OPĆE MJERE OPREZA	4
UPOZORAVAJUĆE IZJAVE.....	4
OZBILJAN ŠTETNI DOGAĐAJI.....	4
DOPUŠTENNO OPTEREĆENJE	4
OZNAKE I OPISI UPOZORENJA.....	4
NAMJENA.....	5
ODRŽAVANJE	6
ČIŠĆENJE SUSTAVA	6
DEZINFEKCIJA SUSTAVA.....	6
POPIS DIJELOVA.....	7
8002065 (A).....	7
8002068 (B).....	7
UPUTE ZA UPORABU	8
INSTALACIJA.....	8
UKLANJANJE	10

OPĆE MJERE OPREZA

UPOZORAVAJUĆE IZJAVE

! UPOZORENJE ! NISU DOPUŠTENE IZMJENE OVE OPREME. AKO BILO KOJI DIO OVOG UREĐAJA BUDE IZLOŽEN OPTEREĆENJU U SLUČAJU KATASTROFE, DOIMA SE OŠTEĆENIM ILI NEPRAVILNO RADI, SMJESTA GA PRESTANITE UPOTREBLJAVATI I KONTAKTIRAJTE S DRUŠTVOM QFIX NA BR. TEL. +1 484-720-6054 ILI POŠALJITE PORUKU E-POŠTE NA ADRESU TECHSUPPORT@QFIX.COM.

OZBILJAN ŠTETNI DOGAĐAJI

Sve štetne događaje (npr. štetne događaje koji dovode do ili mogu dovesti do smrti ili teške ozljede) prijavite tvrtki Qfix i nadležnom tijelu u vašoj zemlji.

DOPUŠTENNO OPTEREĆENJE

8002041—NEMOJTE prekoračiti 249 kg (550 funte) ravnomjerno raspoređenog opterećenja.

8002066—NEMOJTE prekoračiti 226 kg (500 funte) ravnomjerno raspoređenog opterećenja.

8002067—NEMOJTE prekoračiti 226 kg (500 funte) ravnomjerno raspoređenog opterećenja.

OZNAKE I OPISI UPOZORENJA

Popis simbola i njihovih definicija potražite na web-mjestu Qfix.com.

NAMJENA

Ova obitelj proizvoda zamišljena je kao radiolucetni uređaji koji se koriste prilikom injekcija i/ili kao naslon za ruke. Proizvodi su namijenjeni uporabi sa stolovima ravne površine za angiografiju i sa stolovima ravne površine za slikovnu dijagnostiku.

! BILJEŠKA ! Savezni zakon SAD-a ograničava prodaju ovog uređaja po narudžbi liječnika ili od strane samog liječnika.

CILJANA SKUPINA PACIJENATA

Pacijenti koji se podvrgavaju općim medicinskim ili kirurškim postupcima koji uključuju dijagnostičko snimanje.

PREDVIĐENI KORISNICI

Predviđeni korisnik proizvoda osoba je kvalificirana u skladu sa zahtjevima regulatornog područja.

ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE SUSTAVA

Uređaji se mogu očistiti blagom, neabrazivnom otopinom za čišćenje ili dezinfekciju. Površinu očistite tako da nanosite otopinu na čistu krpu i obrišite ju.

DEZINFEKCIJA SUSTAVA


Sljedeća su sredstva za čišćenje podvrgnuta ispitivanju te je utvrđeno da se mogu koristiti za čišćenje površina uređaja. Za dezinfekciju površina proučite posebne upute proizvođača sredstva za čišćenje.

- Voda
- 10 %-tna otopina izbjeljivača Clorox®
- Izopropilni alkohol
- 2,4 %-tna otopina aktiviranog dialdehida Cidex®
- Sapun i voda


Povremeno provjerite jesu li sve sponne dobro pritegnute.

POPIS DIJELOVA

8002065 (A)

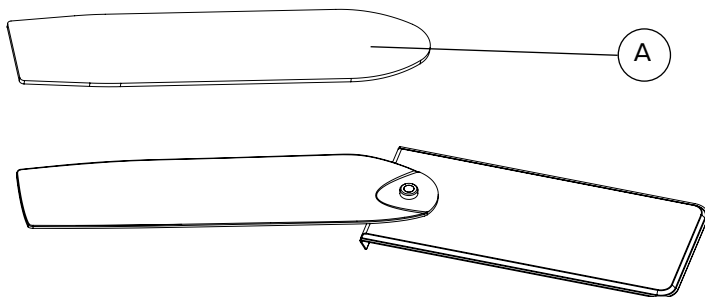


8002068 (B)

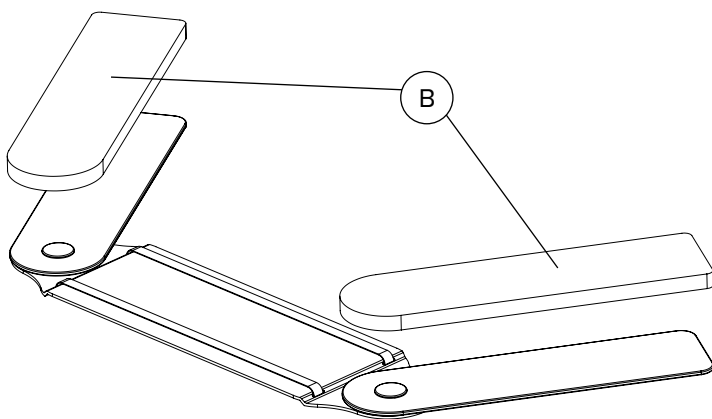


UPUTE ZA UPORABU

INSTALACIJA

8002041

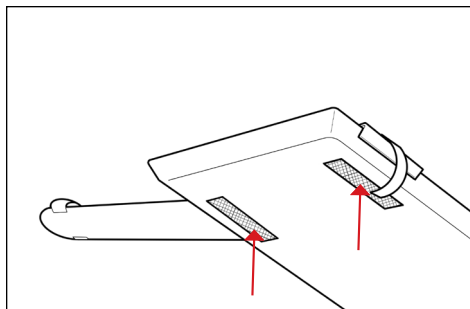

1

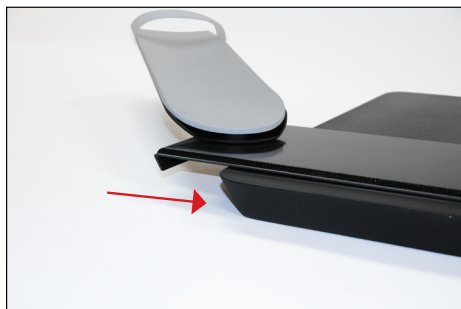


2




3



4

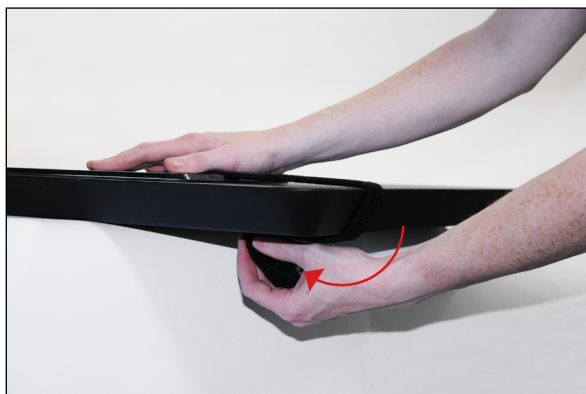

5

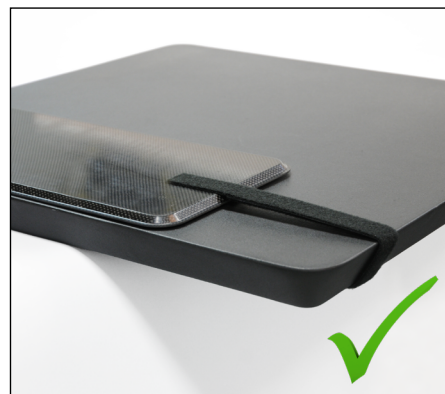

6



7

UPUTE ZA UPORABU

INSTALACIJA


8002066 i 8002067



8



9

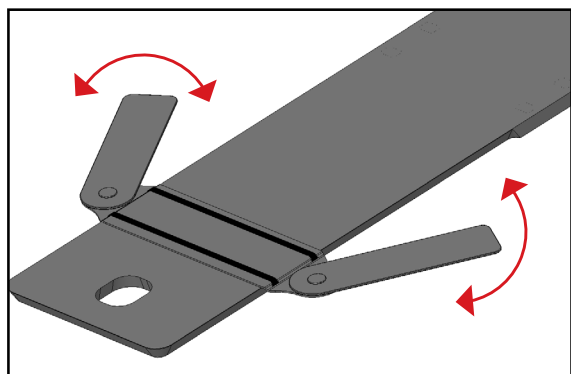


10


UPUTE ZA UPORABU

UKLANJANJE


8002041

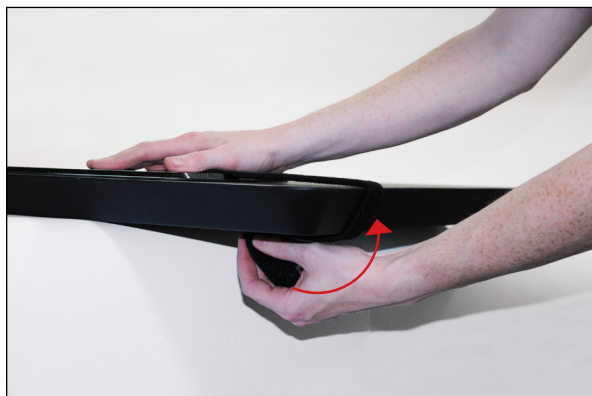

11

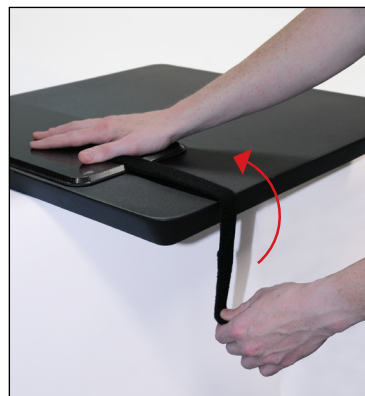

12

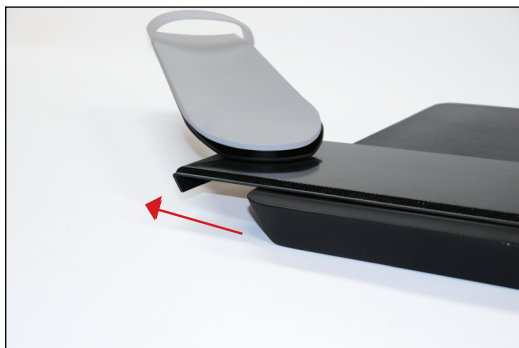

13

UPUTE ZA UPORABU

UKLANJANJE

8002066 i 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004706_HR_E
2020-07