



positioning
patients for life.®

PANDUAN PRODUK DAN MANUAL PENGGUNA

8002041

8002066

8002067

X-Trans® Papan Penyangga Lengan
(Armboard)



EC REP		Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	Dibuat Di As Oleh Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
--	--	--	---

X-Trans® adalah merek terdaftar dari Qfix.

Cidex® adalah merek terdaftar dari Johnson & Johnson.

Clorox® adalah merek terdaftar dari The Clorox Company.

DAFTAR ISI

PENCEGAHAN UMUM.....	4
PERNYATAAN GARANSI	4
KECELAKAAN SERIUS.....	4
PEMERINGKATAN BEBAN	4
PERINGATAN LABEL & DESKRIPSI.....	4
TUJUAN PENGGUNAAN.....	5
PEMELIHARAAN.....	6
DAFTAR KOMPONEN.....	7
8002065 (A).....	7
8002068 (B).....	7
PETUNJUK PENGOPERASIAN.....	8
INSTALASI.....	8
MELEPASKAN ALAT	10

PENCEGAHAN UMUM

PERNYATAAN GARANSI

! PERINGATAN ! TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK MEMODIFIKASI PERALATAN INI. BILA SALAH SATU BAGIAN DARI PERANGKAT MENERIMA KAPASITAS BEBAN KATASTROFIK, TAMPAK RUSAK ATAU TIDAK BERFUNGSI DENGAN BENAR, SEGERA HENTIKAN PENGGUNAAN DAN HUBUNGI QFIX DI +1 484-720-6054 ATAU TECHSUPPORT@QFIX.COM

KECELAKAAN SERIUS

Harap laporkan kecelakaan serius (misal, kecelakaan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kematian atau cedera serius) baik kepada Qfix maupun Pihak Berwenang negara Anda.

PEMERINGKATAN BEBAN

8002041—JANGAN melebihi 249 kg (550 lb) beban yang didistribusikan secara merata

8002066—JANGAN melebihi 226 kg (500 lb) beban yang didistribusikan secara merata

8002067—JANGAN melebihi 226 kg (500 lb) beban yang didistribusikan secara merata

PERINGATAN LABEL & DESKRIPSI

Lihat Qfix.com untuk daftar simbol dan definisinya.

TUJUAN PENGGUNAAN

Kelompok produk ini dirancang sebagai perangkat radiolusen yang digunakan untuk injeksi dan/atau penyangga lengan. Produk-produk ini dirancang untuk digunakan dengan meja Angiografi beralas datar dan meja pencitraan beralas datar.

! CATATAN ! Undang-undang Federal Amerika Serikat membatasi perangkat ini untuk dijual menurut atau atas perintah dokter.

KELOMPOK SASARAN PASIEN

Pasien yang sedang menjalani prosedur pengobatan atau operasi umum yang melibatkan pencitraan diagnostik.

PENGGUNA YANG DITUJU

Pengguna yang dituju untuk produk ini adalah orang yang berkualifikasi berdasarkan persyaratan dari daerah pengendali.

PEMELIHARAAN

Papan Penyangga Lengan (Armboard) ini dapat dibersihkan dengan pembersih ringan, non-abrasif, atau cairan disinfektan. Untuk membersihkan, tuangkan cairan pada kain lap bersih dan seka permukaannya.


Bahan-bahan pembersih berikut telah diuji dan ternyata sesuai untuk membersihkan berbagai permukaan Papan Penyangga Lengan ini. Untuk mendisinfeksi permukaan Papan Penyangga Lengan, lihat petunjuk khusus dari perusahaan bahan pembersih.

- Air
- Cairan Pemutih Clorox® 10%
- Isopropil Alkohol
- Cidex® Larutan Dialdehid Teraktivasi 2,4%
- Sabun dan air


Secara berkala, periksalah kekencangan semua pengancing.

DAFTAR KOMPONEN

8002065 (A)

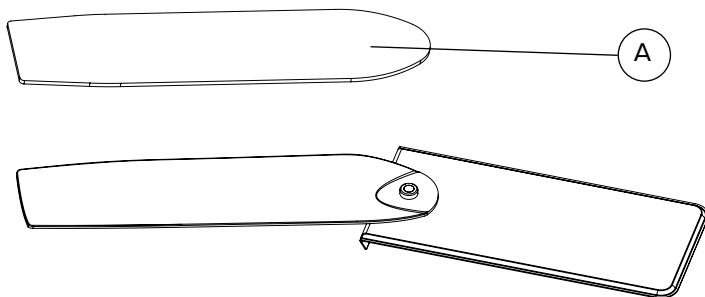


8002068 (B)

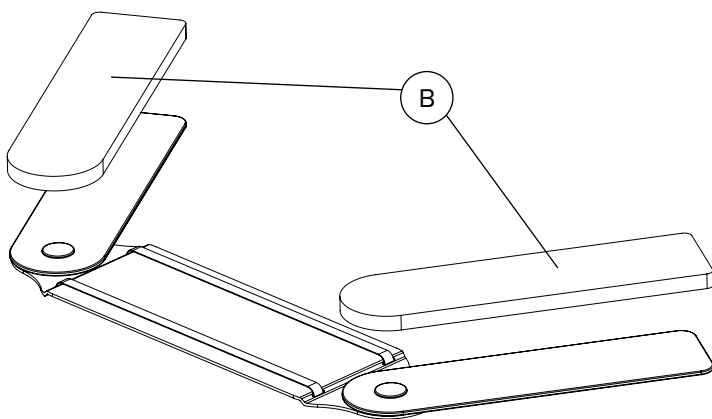


PETUNJUK PENGOPERASIAN

INSTALASI

8002041

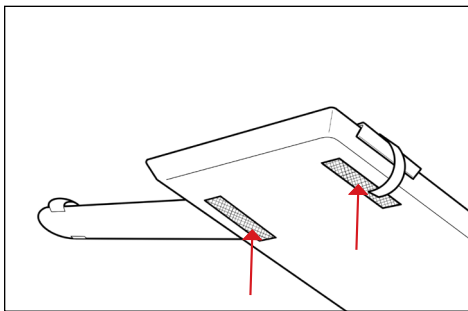


1

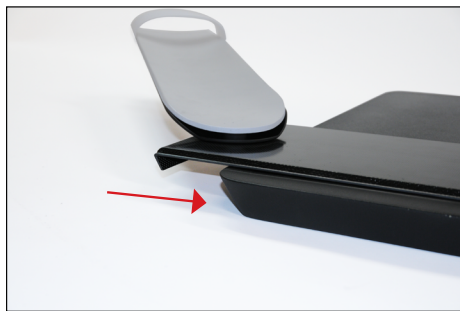

2




3

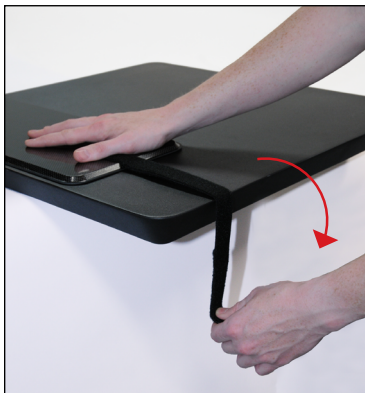

4



5

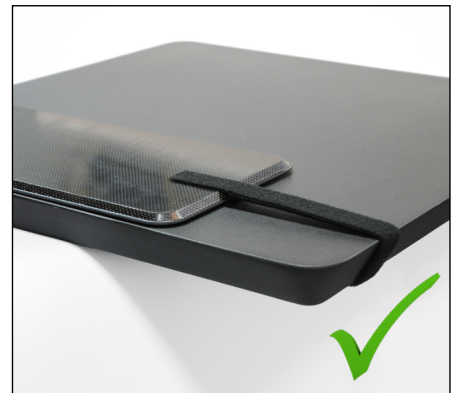

6



7

PETUNJUK PENGOPERASIAN

INSTALASI


8002066 dan 8002067



8



9

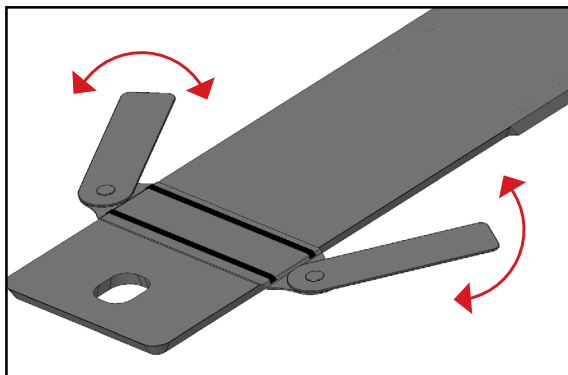


10


PETUNJUK PENGOPERASIAN

MELEPASKAN ALAT


8002041

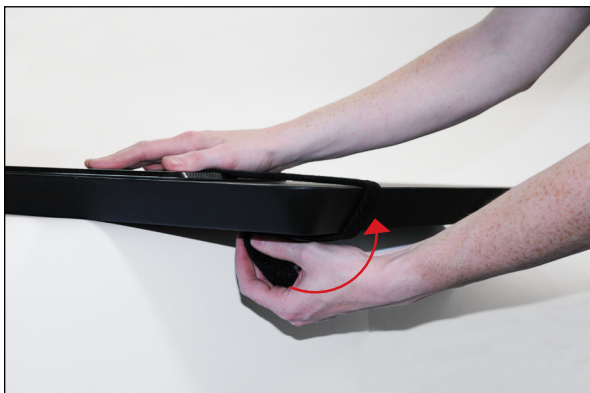

11

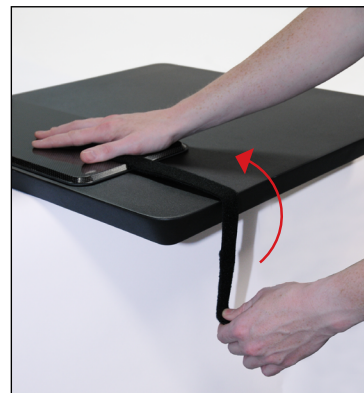

12

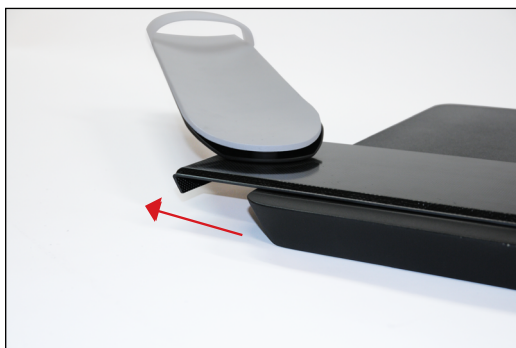

13

PETUNJUK PENGOPERASIAN

MELEPASKAN ALAT

8002066 dan 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com