



GUIDA DEL PRODOTTO E MANUALE D'USO

8002041

8002066

8002067

Asse per braccio X-Trans[®] (Armboard)



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Fabbricato negli USA da Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---	---

X-Trans® è un marchio registrato di Qfix.

Cidex® è un marchio registrato di Johnson & Johnson.

Clorox® è un marchio registrato di The Clorox Company.

SOMMARIO

PRECAUZIONI GENERALI	4
AVVERTENZE	4
INCIDENTI GRAVI.....	4
CARICO NOMINALE	4
ETICHETTE DI AVVERTENZA E DESCRIZIONI.....	4
USO PREVISTO	5
MANUTENZIONE.....	6
PULIZIA DEL SISTEMA.....	6
DISINFEZIONE DEL SISTEMA.....	6
ELENCO DEI COMPONENTI	7
8002065 (A)	7
8002068 (B)	7
ISTRUZIONI PER L'USO	8
INSTALLAZIONE	8
REMOVAL.....	10

PRECAUZIONI GENERALI

AVVERTENZE

! AVVERTENZA ! NON È CONSENTITA ALCUNA MODIFICA DI QUESTA APPARECCHIATURA. SE QUALSIASI PARTE DEL DISPOSITIVO È SOTTOPOSTA A CARICHI ESTREMI, APPARE DANNEGGIATA O FUNZIONA IN MODO ERRATO, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO E CONTATTARE QFIX AL NUMERO +1 484 720 6054 O ALL'INDIRIZZO TECHSUPPORT@QFIX.COM.

INCIDENTI GRAVI

Segnalare eventuali incidenti gravi (ad es. incidenti che comportano o che possono provocare lesioni gravi o mortali) sia a Qfix sia all'autorità competente del proprio paese.

CARICO NOMINALE

8002041—NON superare 249 kg (550 libbre) di carico distribuito uniformemente.

8002066—NON superare 226 kg (500 libbre) di carico distribuito uniformemente.

8002067—NON superare 226 kg (500 libbre) di carico distribuito uniformemente.

ETICHETTE DI AVVERTENZA E DESCRIZIONI

Consultare Qfix.com per un elenco dei simboli e delle relative definizioni.

USO PREVISTO

Questa linea di prodotti è progettata come dispositivi radiotrasparenti utilizzati per le iniezioni e/o come poggiabracchio. I prodotti sono previsti per essere usati con tavoli per angiografia piatti e tavoli per imaging piatti.

! NOTA ! Le leggi federali statunitensi limitano la vendita di questo dispositivo a personale medico o provvisto di prescrizione medica.

KELOMPOK SASARAN PASIEN

Pazienti sottoposti a procedure mediche o chirurgiche generali che comportano diagnostica per immagini.

UTILIZZATORI PREVISTI

L'utilizzatore previsto per i prodotti è una persona qualificata in conformità ai requisiti della regione di regolamentazione.

MANUTENZIONE

PULIZIA DEL SISTEMA

Il dispositivo può essere pulito con una soluzione neutra e non abrasiva oppure con una soluzione disinfettante. Per pulire, applicare la soluzione su un panno pulito e passarlo sulla superficie.

DISINFEZIONE DEL SISTEMA


Le seguenti sostanze detergenti sono state sottoposte a test e ne è stata accertata l'idoneità alla pulizia delle superfici dei dispositivi. Per disinfettare la superficie, consultare le istruzioni specifiche del produttore del detergente.

- Acqua
- Soluzione di candeggina Clorox® al 10%
- Alcol isopropilico
- Soluzione dialdeide attivata Cidex® al 2,4%
- Acqua e sapone


Controllare periodicamente tutti i fermi per verificare che siano ben saldi.

ELENCO DEI COMPONENTI

8002065 (A)

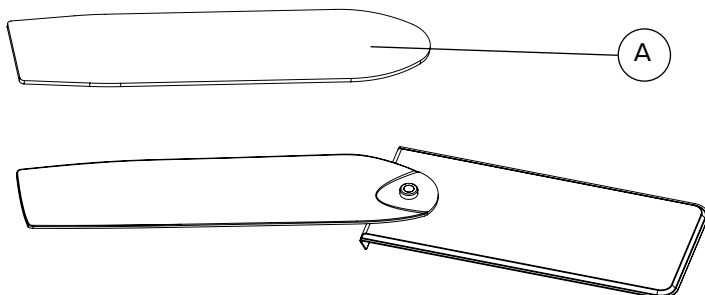


8002068 (B)

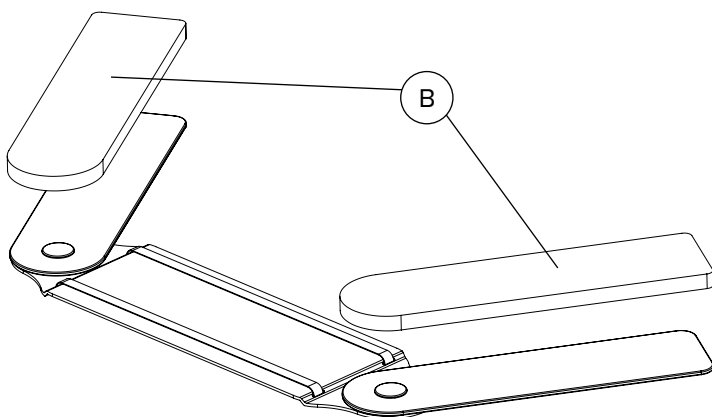


ISTRUZIONI PER L'USO

INSTALLAZIONE

8002041

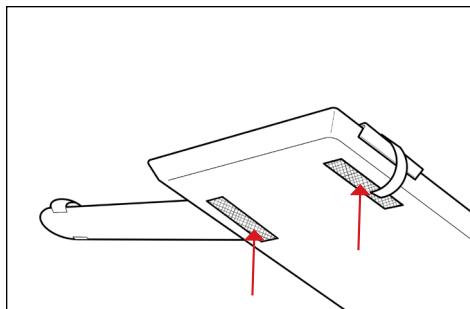

1

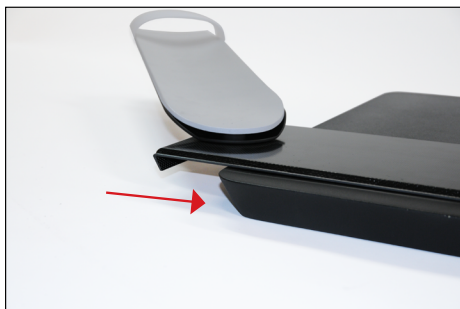

2




3



4



5

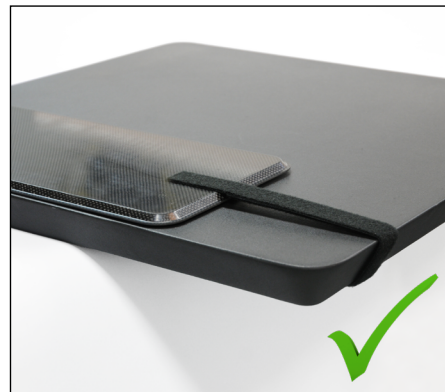

6



7

ISTRUZIONI PER L'USO

INSTALLAZIONE


8002066 e 8002067



8



9

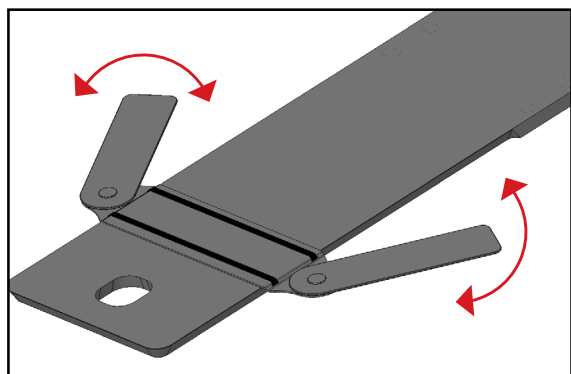


10


ISTRUZIONI PER L'USO

REMOVAL


8002041

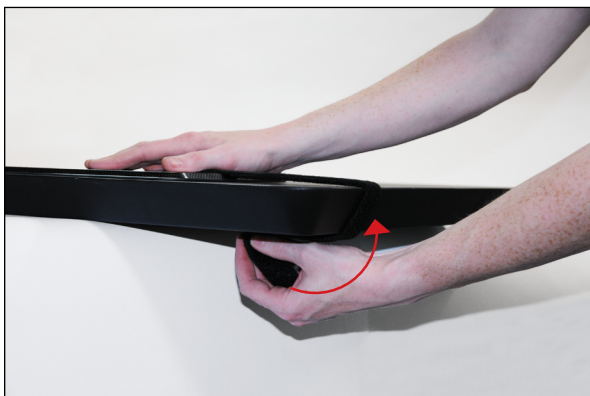

11

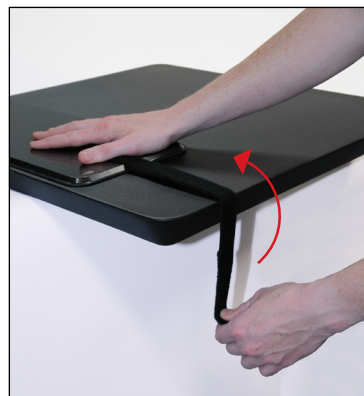

12

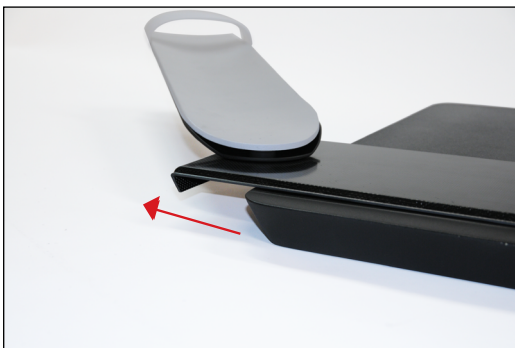

13

ISTRUZIONI PER L'USO

REMOVAL

8002066 e 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004706_IT_E
2020-07