



ӨНІМ НҰСҚАУЛЫҒЫ МЕН ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

8002041

8002066

8002067

X-Trans™ армборды



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 АҚШ-та жасаған өндіруші Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712-737-8668 www.CQmedical.com
----	-----	---	---

X-Trans™ — Qfix компаниясының сауда белгісі.

Cidex® — Johnson & Johnson компаниясының тіркелген сауда белгісі.

Clorox® — The Clorox Company компаниясының тіркелген сауда белгісі.

МАЗМҰНЫ

ЖАЛПЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	4
ЕСКЕРТУ МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ	4
ЕЛЕУЛІ ОҚЫС ОҚИҒАЛАР	4
НОМИНАЛДЫ ЖҮКТЕМЕ	4
ЕСКЕРТУ ЖАПСЫРМАЛАРЫ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ	4
ПАЙДАЛАНУ МАҚСАТЫ	5
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	6
ЖҮЙЕНІ ТАЗАЛАУ	6
ЖҮЙЕНІ ЗАРАРСЫЗДАНДЫРУ	6
БӨЛШЕКТЕР ТІЗІМІ	7
8002065 (A)	7
8002068 (B)	7
ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ	8
ОРНАТУ	8
ШЫҒАРЫП АЛУ	10

ЖАЛПЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ЕСКЕРТУ МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ

! ЕСКЕРТУ ! БҰЛ ЖАБДЫҚҚА ЕШҚАНДАЙ ӨЗГЕРІС ЕНГІЗУГЕ БОЛМАЙДЫ. ЕГЕР ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚАНДАЙ ДА БІР БӨЛІГІНЕ АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙҒА СЕБЕП БОЛАТЫН ЖҮК ТҮССЕ, ОЛ ЗАҚЫМДАЛСА НЕМЕСЕ ДҰРЫС ЖҰМЫС ІСТЕП ТҰРМАСА, ОНЫ ӘРІ ҚАРАЙ ПАЙДАЛАНБАЙ, +1 712-737-8668 НӨМІРІ НЕМЕСЕ [INFO@CQMEDICAL.COM](mailto:info@cqmedical.com) МЕКЕНЖАЙЫ БОЙЫНША CQ MEDICAL КОМПАНИЯСЫНА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.

ЕЛЕУЛІ ОҚЫС ОҚИҒАЛАР

Елеулі оқыс оқиғалар (мысалы, өлімге немесе ауыр жарақаттарға әкеп соқтыратын немесе әкелуі мүмкін оқиғалар) туралы CQ Medical компаниясына да, еліңіздің құзыретті органына да хабарлаңыз.

НОМИНАЛДЫ ЖҮКТЕМЕ

8002041—249 кг (550 фунт) біркелкі үлестірілген жүктемеден асыруға БОЛМАЙДЫ

8002066—226 кг (500 фунт) біркелкі үлестірілген жүктемеден асыруға БОЛМАЙДЫ

8002067—226 кг (500 фунт) біркелкі үлестірілген жүктемеден асыруға БОЛМАЙДЫ

ЕСКЕРТУ ЖАПСЫРМАЛАРЫ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Таңбалардың тізімі мен олардың анықтамаларын www.CQmedical.com сайтынан қараңыз.

ПАЙДАЛАНУ МАҚСАТЫ

Осы өнімдер тобы инъекциялар және/немесе шынтақ таяныштары үшін пайдаланылатын рентген сәулелерін өткізетін құрылғылар ретінде жасалған. Өнімдер үсті тегіс ангиография үстелдері мен үсті тегіс кескіндеу үстелдерімен бірге пайдалануға болатындай етіп жасалған.

! ЕСКЕРТПЕ ! АҚШ федералдық заңына сәйкес, бұл құрылғыны тек дәрігерге немесе оның тапсырысы бойынша сатуға рұқсат етіледі.

МАҚСАТТЫ ЕМДЕЛУШІ ТОПТАРЫ

Диагностикалық визуализацияны қамтитын жалпы медициналық немесе хирургиялық ем-шаралардан өтетін емделушілер.

МАҚСАТТЫ ПАЙДАЛАНУШЫЛАР

Осы өнімдердің мақсатты пайдаланушысы — реттеуші аймақ талаптарына сай білікті тұлға.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ЖҮЙЕНІ ТАЗАЛАУ

Құрылғыны жұмсақ, сызат түсірмейтін тазалау немесе зарарсыздандыру ерітіндісімен тазалау керек. Тазалау үшін ерітіндіні таза шүберекке жағып, бетін сүртіңіз.

ЖҮЙЕНІ ЗАРАРСЫЗДАНДЫРУ


Төмендегі тазалау материалдарына сынақ жүргізіліп, құрылғы бетін тазалауға жарамды деп танылды. Құрылғының бетін зарарсыздандыру үшін тазалағыш ерітінді өндірушісі ұсынған арнайы нұсқауларды қараңыз.

- Су
- 10% Clorox® ағартқыш ерітіндісі
- Изопропил спирті
- Cidex® 2,4% белсендірілген диальдегид ерітіндісі
- Сабын мен су


Бекіткіштердің барлығы мықтап қатайтылғанын жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз.

БӨЛШЕКТЕР ТІЗІМІ

8002065 (A)

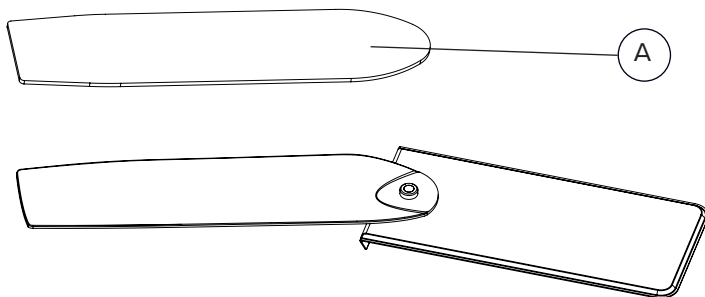


8002068 (B)

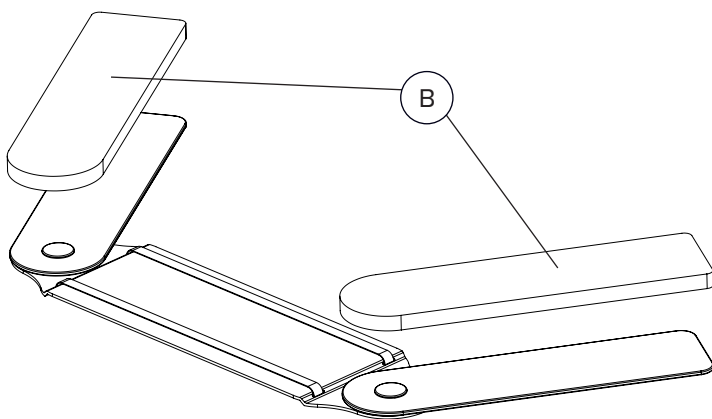


ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

ОРНАТУ

8002041

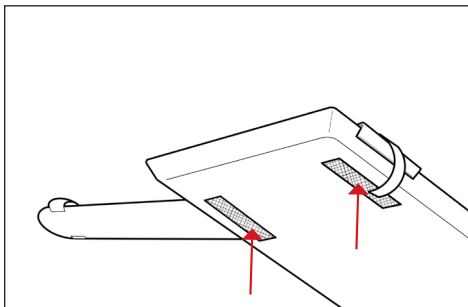

1

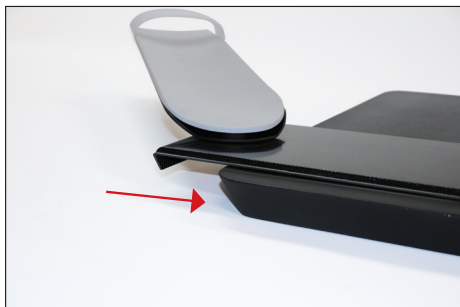

2



3



4



5



6



7

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

ОРНАТУ


8002066 және 8002067



8



9

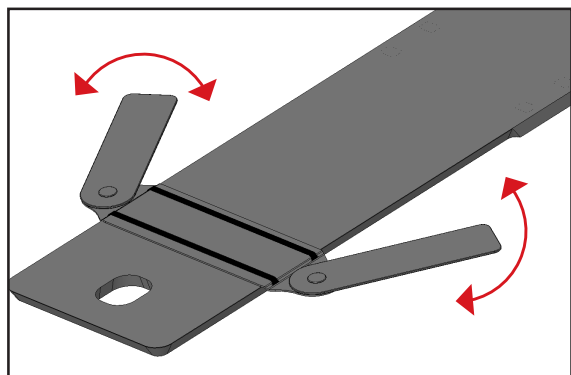


10

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

ШЫҒАРЫП АЛУ


8002041

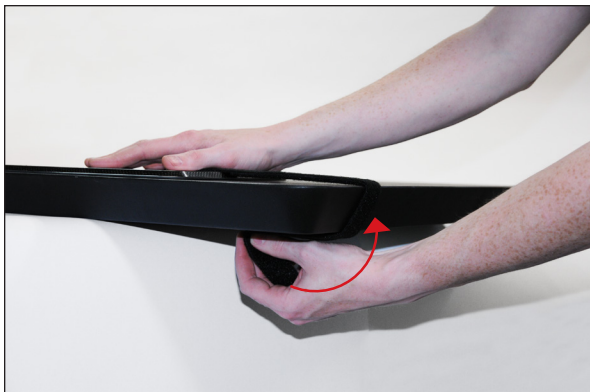

11



12

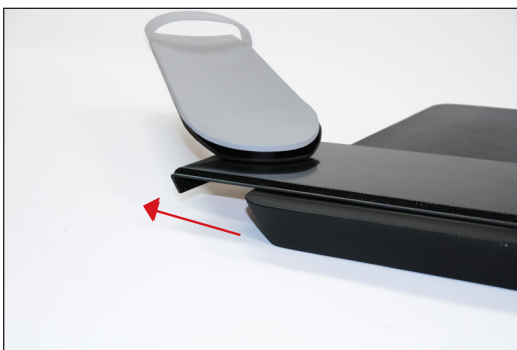

13

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

ШЫҒАРЫП АЛУ

8002066 және 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.CQmedical.com

☎ +1 712.737.8668 / 800.842.8688
✉ info@CQmedical.com

2004706_KK_0
2024-12