



GAMINIO INSTRUKCIJA IR NAUDOTOJO VADOVAS

8002041

8002066

8002067

„X-Trans®“ porankis („Armboard“)



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Pagaminta JAV, gamintojas: Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--

„X-Trans®“ yra „Qfix“ registruotas prekių ženklas.

„Cidex®“ yra „Johnson & Johnson“ registruotas prekių ženklas.

„Clorox®“ yra „The Clorox Company“ registruotas prekių ženklas.

PAKUOTĖS SUDĖTIS

BENDROSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS	4
ĮSPĖJAMOJI INFORMACIJA	4
RIMTI INCIDENTAI	4
VARDINĖ APKROVA	4
ĮSPĖJAMIEJI UŽRAŠAI IR APRAŠYMUOSE	4
NUMATYTOJI PASKIRTIS	5
PRIEŽIŪRA	6
DALIŲ SĄRAŠAS	7
8002065 (A)	7
8002068 (B)	7
NAUDOJIMO NURODYMAI	8
MONTAVIMAS	8
NUĖMIMAS	10

BENDROSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

ISPĖJAMOJI INFORMACIJA

! ISPĖJIMAS ! ŠIOS ĮRANGOS MODIFIKUOTI NEGALIMA. BET KURIĄ ŠIO ĮTAISO DALĮ PAVEIKUS KATASTROFINIO MASTO APKROVAI, ATSIRADUS PAŽEIDIMO POŽYMIŲ AR VEIKIMO SUTRIKIMŲ, IŠKART NUSTOKITE NAUDOTI IR KREIPKITĖS Į „QFIX“ TEL. +1 484-720-6054 ARBA EL. PAŠTU: TECHSUPPORT@QFIX.COM.

RIMTI INCIDENTAI

Apie bet kokius rimtus incidentus (pvz., incidentus, kurių metu ištinka arba gali ištikti mirtis, taip pat patiriama arba galima patirti rimtų sužalojimų) praneškite tiek „Qfix“, tiek kompetentingai savo šalies institucijai.

VARDINĖ APKROVA

8002041—NEGALIMA viršyti 249 kg (550 svar.) tolygiai paskirstytos apkrovos

8002066—NEGALIMA viršyti 226 kg (500 svar.) tolygiai paskirstytos apkrovos

8002067—NEGALIMA viršyti 226 kg (500 svar.) tolygiai paskirstytos apkrovos

ISPĖJAMIEJI UŽRAŠAI IR APRAŠYMUOSE

Qfix.com rasite išvardytus simbolius ir jų aprašus.

NUMATYTOJI PASKIRTIS

Šią gaminių grupę sudaro rentgeno spinduliuotei pralaidūs įtaisai, naudojami injekcijoms ir (arba) rankų atramoms. Gaminiai pritaikyti tvirtinti prie plokščiaviršių angiografijos aparatų stalų ir plokščiaviršių vaizdo įrangos stalų.

! PASTABA ! JAV Federalinis įstatymas apriboja šį prietaiso pardavimą ar gydytojui tvarka.

TIKSLINĖS PACIENTŲ GRUPĖS

Pacientai, kuriems atliekamos bendrosios medicininės arba chirurginės procedūros, įskaitant diagnostinio vaizdavimo tyrimus.

NUMATYTIEJI NAUDOTOJAI

Numatytieji šių gaminių naudotojai – asmenys, turintys atitinkamo regiono norminius reikalavimus atitinkančią kvalifikaciją.

PRIEŽIŪRA

Porankį („Armboard“) galima valyti švelniu, neabrazyviniu valymo ar dezinfekciniu tirpalu. Kai reikia valyti, nušluostykite paviršių tirpalu suvilgyta švaria šluoste.


Porankio paviršiams valyti tinka šios išbandytos valymo medžiagos. Norėdami porankio paviršių dezinfekuoti, vadovaukitės specifiniais valiklio gamintojo nurodymais.

- Vanduo
- 10% „Clorox®“ baliklio tirpalas
- Izopropilo alkoholis
- „Cidex®“ 2,4% aktyvintojo dialdehido tirpalas
- Muilas ir vanduo


Reguliariai tikrinkite visų tvirtinimo detalių priveržimo tvirtumą.

DALIŲ SĄRAŠAS

8002065 (A)

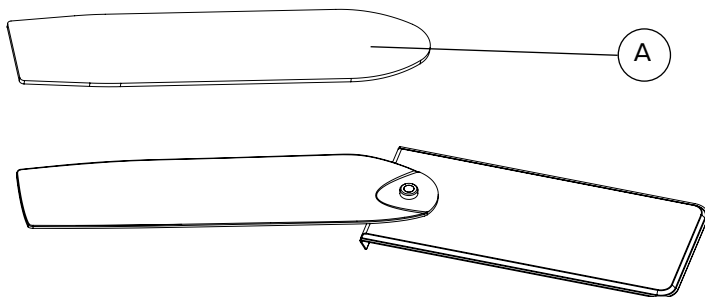


8002068 (B)

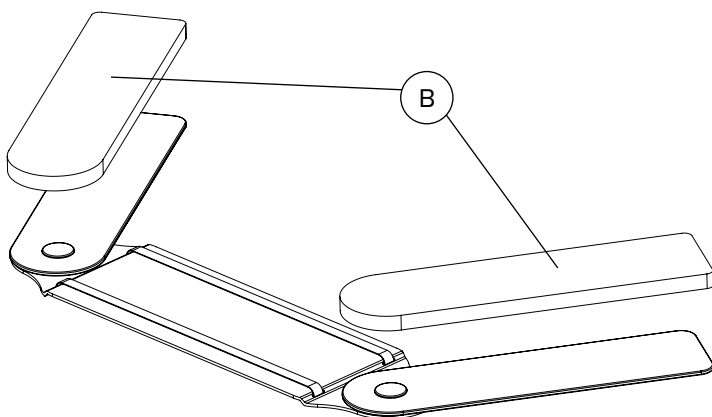


NAUDOJIMO NURODYMAI

MONTAVIMAS

8002041

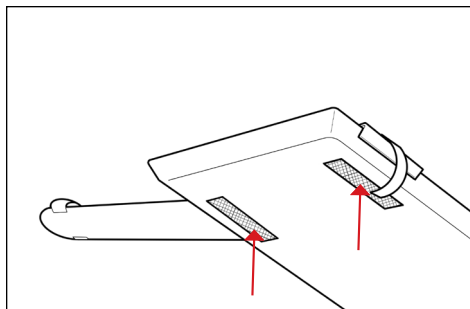

1

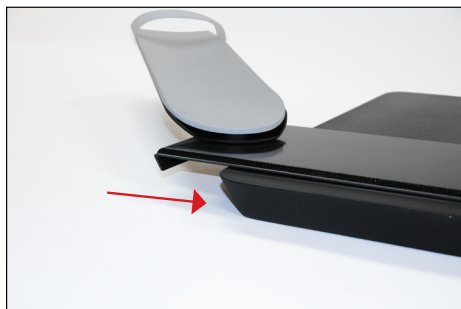


2




3



4

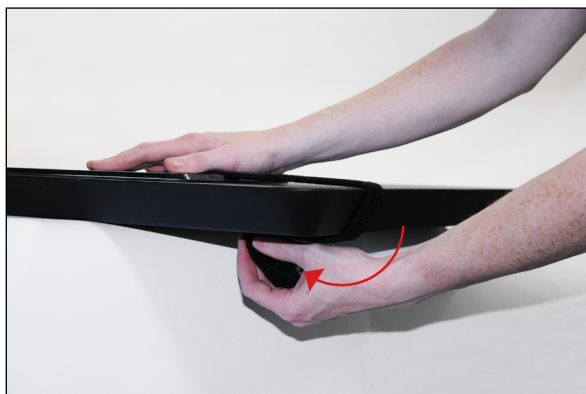

5

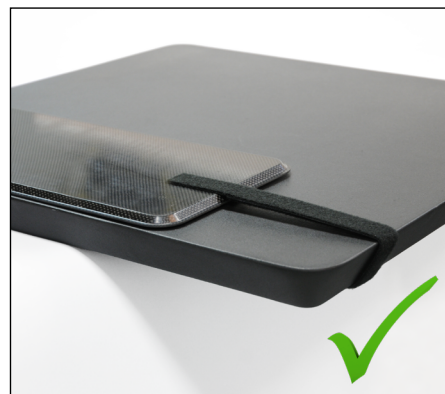

6



7

NAUDOJIMO NURODYMAI

MONTAVIMAS


8002066 ir 8002067



8



9

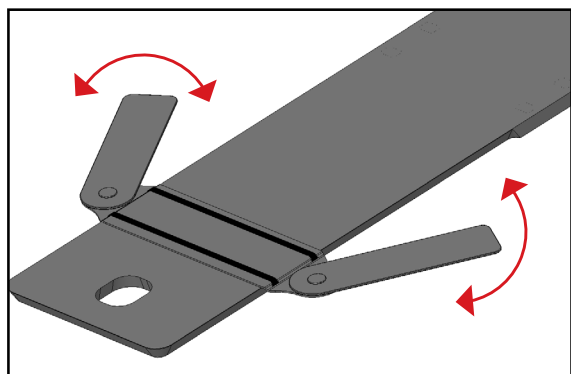


10


NAUDOJIMO NURODYMAI

NUĖMIMAS


8002041

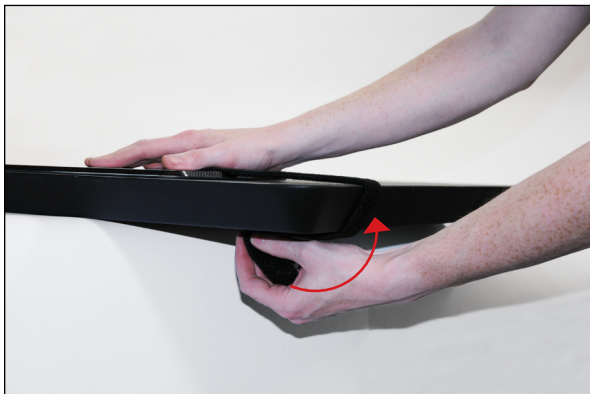

11

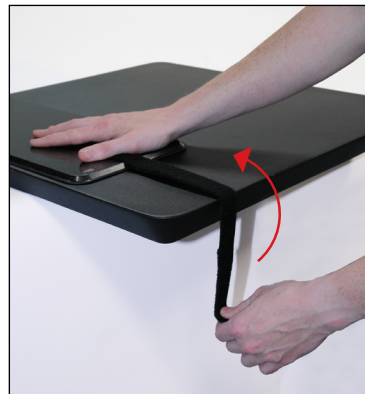

12

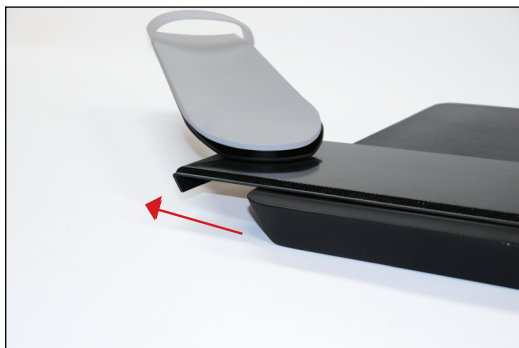

13

NAUDOJIMO NURODYMAI

NUĖMIMAS

8002066 ir 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com