



positioning
patients for life.®

PRODUCTGIDS EN GEBRUIKSAANWIJZING

8002041

8002066

8002067

X-Trans® armplank (Armboard)



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Vervaardigd in de VS door Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--	---

X-Trans® is een gedeponoord handelsmerk van Qfix.

Cidex® is een gedeponoord handelsmerk van Johnson & Johnson.

Clorox® is een gedeponoord handelsmerk van The Clorox Company.

INHOUD

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN.....	4
WAARSCHUWINGSVERKLARINGEN.....	4
ERNSTIGE INCIDENTEN.....	4
NOMINALE BELASTING.....	4
WAARSCHUWING ETIKETTEREN & BESCHRIJVINGEN.....	4
BEOOGD GEBRUIK.....	5
ONDERHOUD	6
HET REINIGEN VAN HET SYSTEEM.....	6
HET DESINFECTEREN VAN HET SYSTEEM	6
STUKLIJST.....	7
8002065 (A).....	7
8002068 (B).....	7
BEDIENINGSINSTRUCTIES.....	8
INSTALLEREN.....	8
VERWIJDEREN.....	10

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN

WAARSCHUWINGSVERKLARINGEN

! WAARSCHUWING ! DEZE APPARATUUR MAG NIET WORDEN GEMODIFICEERD. ALS EEN ONDERDEEL VAN DIT HULPMIDDEL AAN EEN CATASTROFALE BELASTING IS BLOOTGESTELD, BESCHADIGD LIJKT OF NIET NAAR BEHOREN WERKT, STAAK DAN ONMIDDELLIJK HET GEBRUIK EN NEEM CONTACT OP MET QFIX OP +1 484-720-6054 OF TECHSUPPORT@QFIX.COM

ERNSTIGE INCIDENTEN

Meld ernstige incidenten (bijvoorbeeld incidenten die dodelijk of ernstig letsel als gevolg (kunnen) hebben) bij zowel Qfix als de bevoegde autoriteit van uw land.

NOMINALE BELASTING

8002041—249 kg (550 lb) gelijkmatig verdeelde belasting NIET overschrijden

8002066—226 kg (500 lb) gelijkmatig verdeelde belasting NIET overschrijden

8002067—226 kg (500 lb) gelijkmatig verdeelde belasting NIET overschrijden

WAARSCHUWING ETIKETTEREN & BESCHRIJVINGEN

Ga naar Qfix.com voor een overzicht van symbolen en de bijbehorende betekenissen.

BEOOGD GEBRUIK

Deze familie van producten is bestemd voor gebruik als radiolucente hulpmiddelen voor injecties en/of armsteunen. De producten zijn bestemd voor gebruik met tafels met vlak tafelblad voor angiografie en beeldvorming.

! NOTITIE ! De federale wetgeving van de Verenigde Staten beperkt dit toestel tot verkoop door of op de order van een arts.

PATIËNTENDOELGROEPEN

Patiënten die een algemene medische of chirurgische procedure ondergaan waarbij diagnostische beeldvorming wordt gebruikt.

BEOOGDE GEBRUIKERS

De beoogde gebruiker van de producten is iemand die in aanmerking komt volgens de eisen van het regelgevingsgebied.

ONDERHOUD

HET REINIGEN VAN HET SYSTEEM

De armplank (Armboard) kan met een milde, niet-schurende reinigende of desinfecterende oplossing worden gereinigd. Breng de oplossing op een schone doek aan en neem de buitenkant van het hulpmiddel af om het te reinigen.

HET DESINFECTEREN VAN HET SYSTEEM


De volgende reinigingsmiddelen zijn getest en geschikt bevonden voor het reinigen van de buitenkant van de armplank. Om de buitenkant van de armplank te desinfecteren, raadpleegt u de specifieke instructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel.

- Water
- 10% Clorox® Bleekwateroplossing
- isopropylalcohol
- Cidex® 2,4% geactiveerde dialdehydeoplossing
- Water en zeep


Controleer regelmatig of alle bevestigingsmateriaal goed vastzit.

STUKLIJST

8002065 (A)

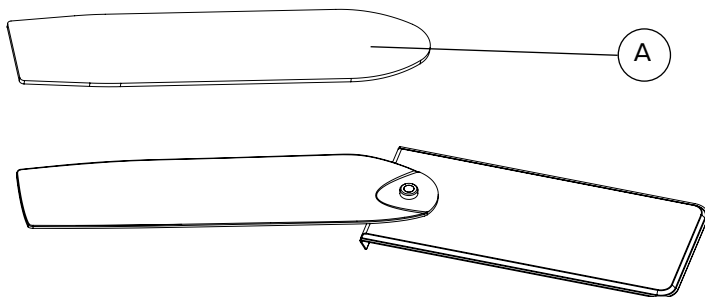


8002068 (B)

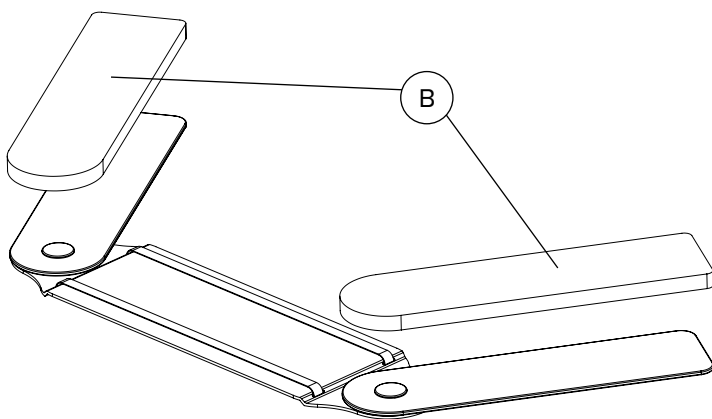


BEDIENINGSINSTRUCTIES

INSTALLEREN

8002041

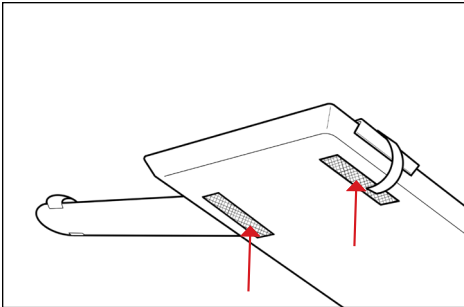

1

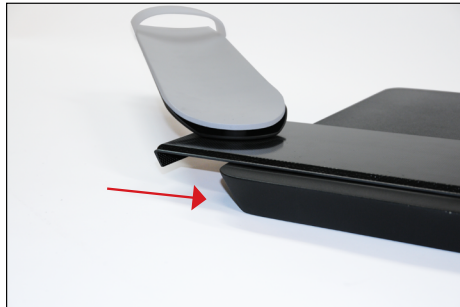

2




3



4



5

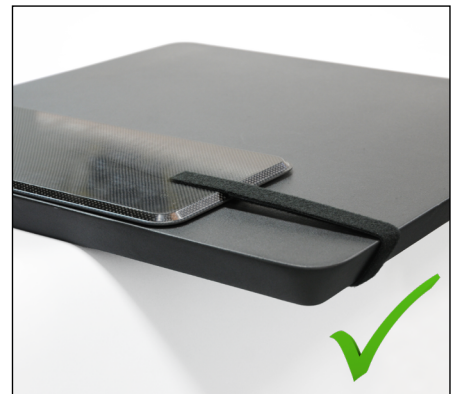

6



7

BEDIENINGSINSTRUCTIES

INSTALLEREN


8002066 en 8002067



8



9

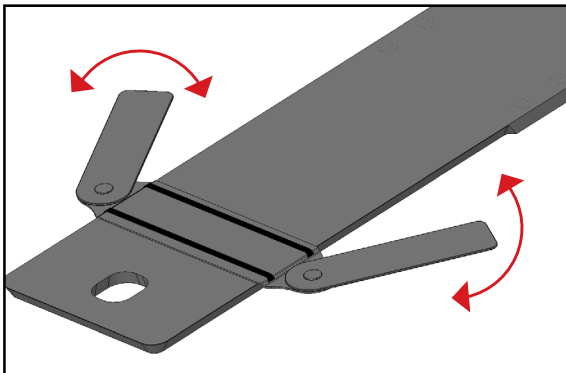


10


BEDIENINGSINSTRUCTIES

VERWIJDEREN


8002041

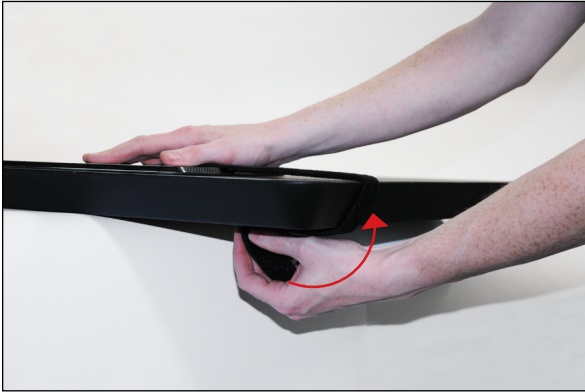

11

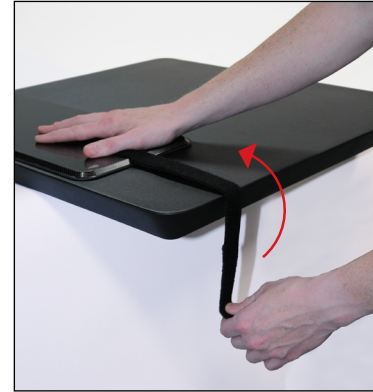

12

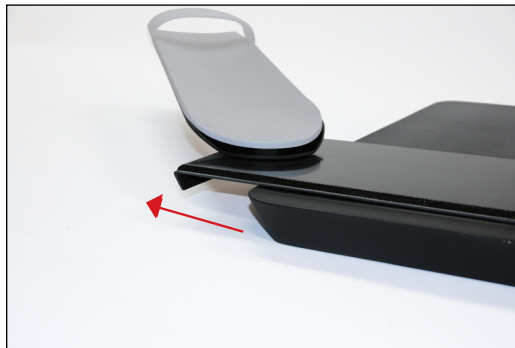

13

BEDIENINGSINSTRUCTIES

VERWIJDEREN

8002066 en 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com

2004706_NL_E
2020-07