



PRODUKTVEILEDNING OG BRUKERHÅNDBOK

8002041

8002066

8002067

X-Trans® armbrett (Armboard)



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Produsert i USA av Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--	--

X-Trans® er et registrert varemerke tilhørende Qfix.

Cidex® er et registrert varemerke tilhørende Johnson & Johnson.

Clorox® er et registrert varemerke tilhørende The Clorox Company.

INNHold

GENERELLE FORHOLDSREGLER	4
ADVARSELSMELDINGER	4
ALVORLIGE HENDELSER	4
NORMERT LAST	4
ADVARSEL ETIKETT OG BESKRIVELSE.....	4
TILTENKT BRUK	5
VEDLIKEHOLD	6
RENGJØRE SYSTEMET	6
DESINFISERE SYSTEMET	6
DELELISTE.....	7
8002065 (A)	7
8002068 (B)	7
BRUKSANVISNINGER	8
MONTERING.....	8
AVTAKING	10

GENERELLE FORHOLDSREGLER

ADVARSELSMELDINGER

! ADVARSEL ! INGEN MODIFIKASJON AV DETTE UTSTYRET ER TILLATT. HVIS NOEN DEL AV DENNE ANORDNINGEN BLIR UTSATT FOR KATASTROFAL BELASTNING, SER UT TIL Å VÆRE SKADET ELLER IKKE FUNGERER SOM DEN SKAL, OPPHØR BRUK AV DEN UMIDDELBART OG KONTAKT QFIX PÅ +1 484 720 6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM

ALVORLIGE HENDELSER

Rapporter alle alvorlige hendelser (f.eks. hendelser som fører til, eller kan føre til død eller alvorlig skade) til både Qfix og den relevante myndigheten i landet.

NORMERT LAST

8002041—Ikke overstig 249 kg (550 lb) jevnt fordelt last

8002066—Ikke overstig 226 kg (500 lb) jevnt fordelt last

8002067—Ikke overstig 226 kg (500 lb) jevnt fordelt last

ADVARSEL ETIKETT OG BESKRIVELSE

Du finner en liste over symboler og symboldefinisjoner på Qfix.com.

TILTENKT BRUK

Denne produktfamilien er utformet som radiolucente anordninger som brukes for injeksjoner og/eller armstøtter. Produktene er utformet for bruk sammen med flate angiografibord og flate avbildningsbord.

! MERK ! Forbundsretten i USA begrenser denne enheten til salg på eller etter en lege.

PASIENTMÅLGRUPPER

Pasienter som gjennomgår generelle medisinske eller kirurgiske prosedyrer som innebærer diagnostisk avbildning.

TILTENKTE BRUKERE

Tiltente brukere for produktene er personer som er kvalifisert i henhold til kravene i lokale forskrifter.

VEDLIKEHOLD

RENGJØRE SYSTEMET

Armbrettet (Armboard) kan rengjøres med en mild, ikke-skurende rengjørings- eller desinfeksjonsløsning. For å rengjøre, påfør løsningen på en ren klut og tørk av overflaten.

DESINFISERE SYSTEMET


Følgende rengjøringsmidler har blitt testet og funnet å være egnet for rengjøring av armbrettets overflater. For å desinfisere overflaten på armbrettet, se spesifikke anvisninger fra produsenten av rengjøringsmiddelet.

- Vann
- 10 % Clorox® blekemiddelløsning
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktivert dialdehydløsning
- Såpe og vann


Kontroller jevnlig om alle festeanordninger er stramme.

DELELISTE

8002065 (A)

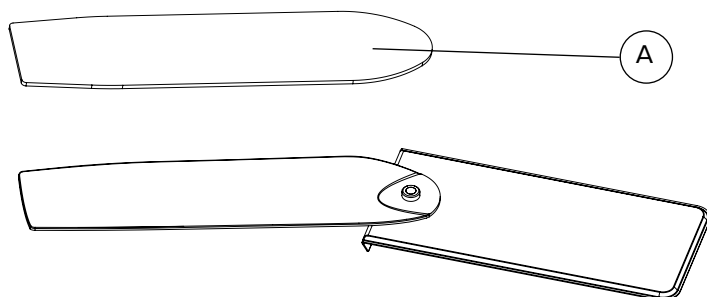


8002068 (B)

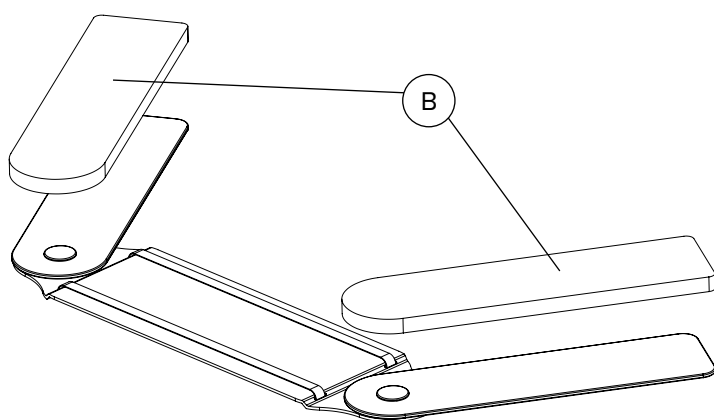


BRUKSANVISNINGER

MONTERING

8002041

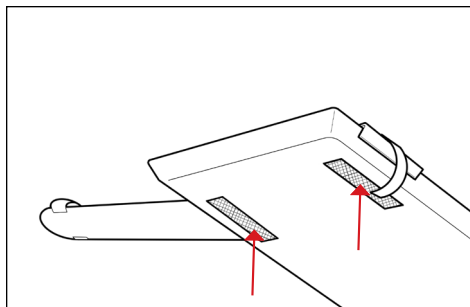

1

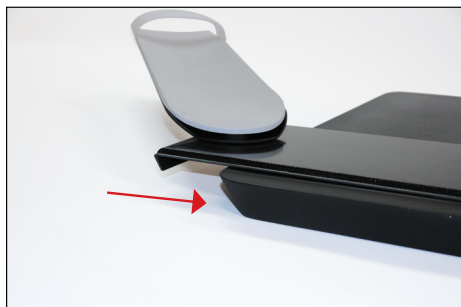


2




3



4

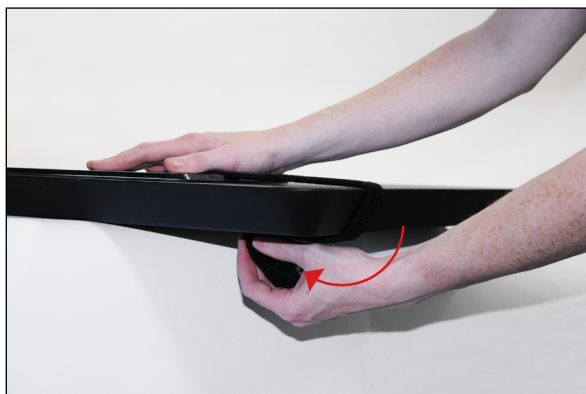

5

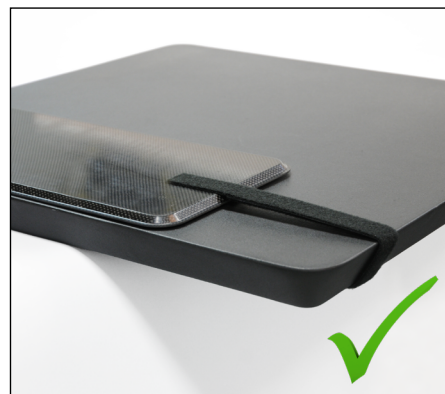

6



7

BRUKSANVISNINGER

MONTERING


8002066 og 8002067



8



9

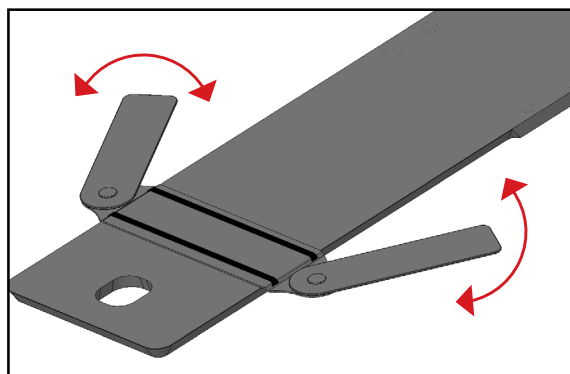


10


BRUKSANVISNINGER

AVTAKING


8002041

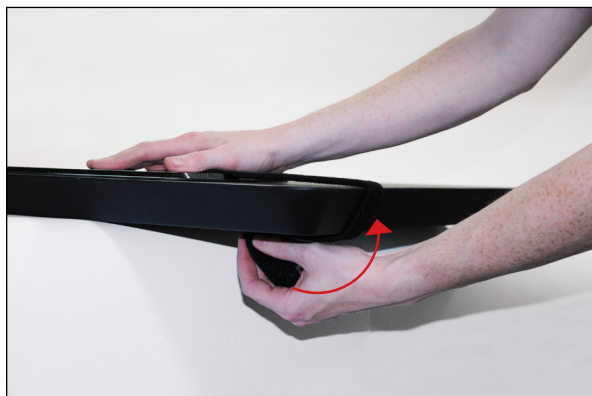

11

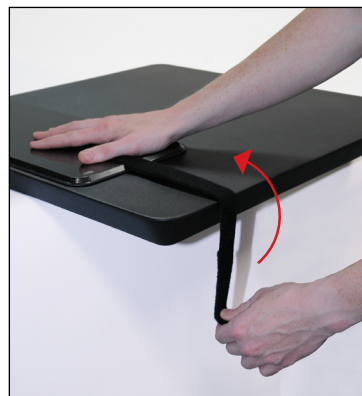

12

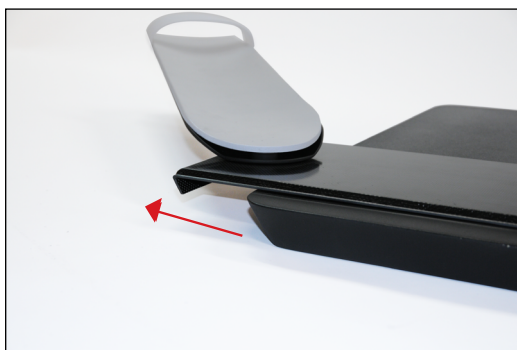

13

BRUKSANVISNINGER

AVTAKING

8002066 og 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com