



OPIS PRODUKTU Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

8002041

8002066

8002067

Podpórka pod ramię X-Trans® (Armboard)



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych przez Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---

X-Trans® to zarejestrowany znak towarowy firmy Qfix.

Cidex® to zarejestrowany znak towarowy firmy Johnson & Johnson.

Clorox® to zarejestrowany znak towarowy firmy The Clorox Company.

SPIIS TREŚCI

OGÓLNE PRZESTROGI.....	4
OSTRZEŻENIA	4
POWAŻNE ZDARZENIA.....	4
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE.....	4
ETYKIETY OSTRZEGAWCZE ORAZ ICH OPISY	4
PRZEZNACZENIE	5
KONSERWACJA.....	6
CZYSZCZENIE SYSTEMU	6
DEZYNFEKCJA SYSTEMU	6
LISTA CZĘŚCI	7
8002065 (A).....	7
8002068 (B).....	7
INSTRUKCJA OBSŁUGI.....	8
MONTAŻ.....	8
ZDEJMOWANIE	10

OGÓLNE PRZESTROGI

OSTRZEŻENIA

! OSTRZEŻENIE ! NIE SĄ DOPUSZCZALNE ŻADNE MODYFIKACJE TEGO SPRZĘTU. JEŚLI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ TEGO WYROBU ZOSTANIE PODDANA NADMIERNEMU OBCIĄŻENIU, WYDAJE SIĘ USZKODZONA LUB DZIAŁA NIEPRAWIDŁOWO, NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ UŻYTKOWANIA I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ QFIX, DZWONIĄC POD NUMER +1 484-720-6054 LUB PISZĄC NA ADRES TECHSUPPORT@QFIX.COM.

POWAŻNE ZDARZENIA

Wszelkie poważne zdarzenia (np. zdarzenia, które spowodowały lub mogły spowodować śmierć bądź poważne obrażenia) należy zgłaszać firmie Qfix oraz właściwemu organowi w danym kraju.

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

8002041—NIE WOLNO przekraczać 249 kg (550 funtów) równomiernie rozłożonego obciążenia

8002066—NIE WOLNO przekraczać 226 kg (500 funtów) równomiernie rozłożonego obciążenia

8002067—NIE WOLNO przekraczać 226 kg (500 funtów) równomiernie rozłożonego obciążenia

ETYKIETY OSTRZEGAWCZE ORAZ ICH OPISY

Spis symboli i odpowiadających im definicji można znaleźć na stronie Qfix.com.

PRZEZNACZENIE

Niniejsza seria produktów służy jako urządzenia radioprzezierne stosowane do zastrzyków i/lub jako podpórki pod ramię. Produkty te są przeznaczone do stosowania ze stołami angiograficznymi o płaskim blacie i stołami o płaskim blacie służącymi do obrazowania.

! UWAGA ! Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż wyrobu wyłącznie lekarzom lub na ich zlecenie.

DOCELOWE GRUPY PACJENTÓW

Pacjenci poddawani procedurom z zakresu medycyny ogólnej i chirurgii, które obejmują zastosowanie obrazowania diagnostycznego.

DOCELOWI UŻYTKOWNICY

Docelowym użytkownikiem produktów jest osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zgodne z przepisami obowiązującymi w danym regionie.

KONSERWACJA

CZYSZCZENIE SYSTEMU

Urządzenie można czyścić łagodnym, nieściernym roztworem czyszczącym lub dezynfekcyjnym. Aby wyczyścić, należy nanieść roztwór na czystą ściereczkę i przetrzeć powierzchnię.

DEZYNFEKCJA SYSTEMU


Materiały czyszczące wymienione poniżej zostały przetestowane i uznane za odpowiednie do czyszczenia powierzchni przyrządu. Sposób dezynfekcji powierzchni opisano w poszczególnych instrukcjach dostarczonych przez producenta środka czyszczącego.

- Woda
- 10% roztwór wybielacza Clorox®
- Alkohol izopropylowy
- Cidex® 2,4% roztwór aktywowanego dialdehydu
- Woda z mydłem


Okresowo sprawdzać wszystkie paski mocujące pod kątem skuteczności zacisku.

LISTA CZĘŚCI

8002065 (A)

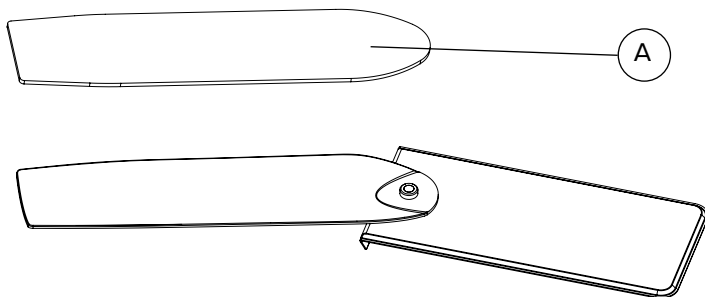


8002068 (B)

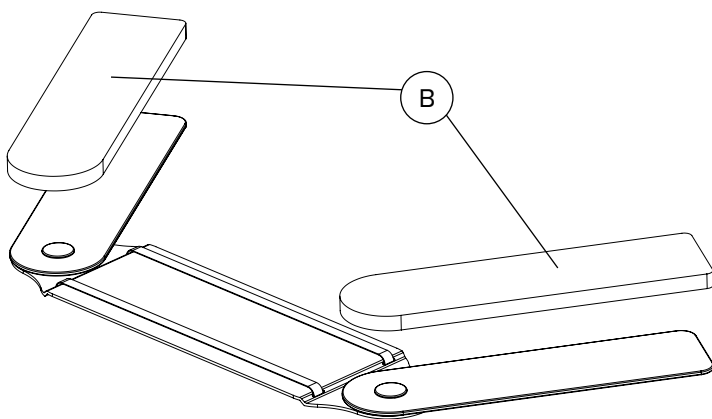


INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONTAŻ

8002041

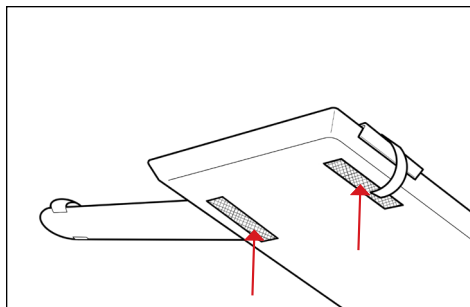

1

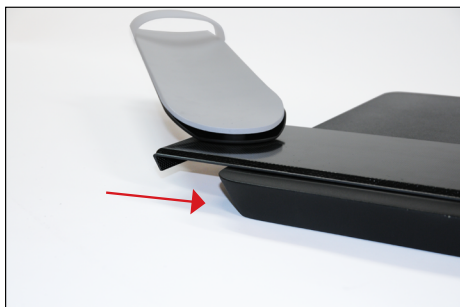

2




3



4



5

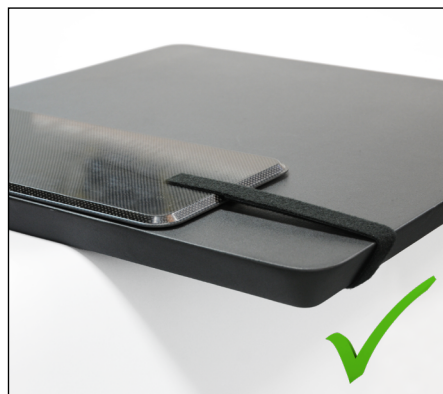

6



7

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONTAŻ


8002066 i 8002067



8



9

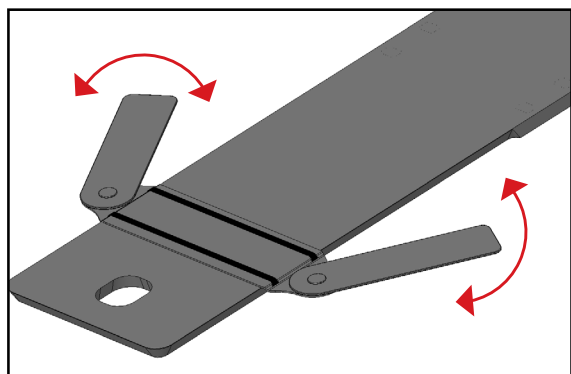


10


INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZDEJMOWANIE


8002041

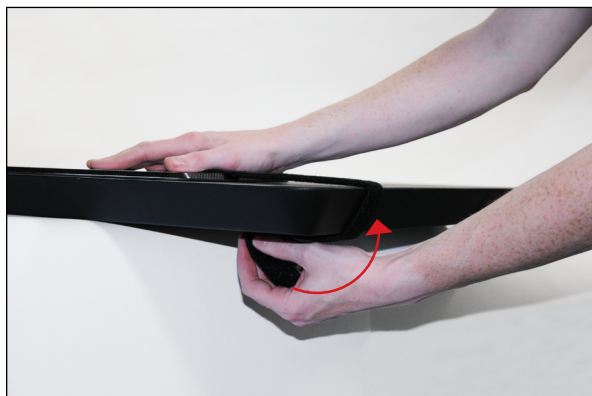

11

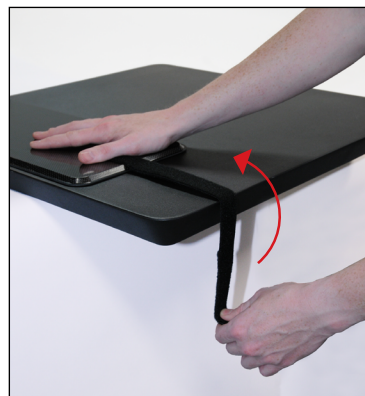

12

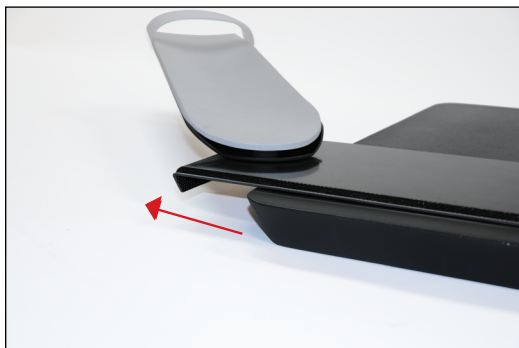

13

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZDEJMOWANIE

8002066 i 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004706_PL_E
2020-07