



GUIA DO PRODUTO E MANUAL DO USUÁRIO

8002041

8002066

8002067

Suporte para braço (Armboard) X-Trans®



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Fabricado nos EUA por Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---	---

X-Trans® é marca registrada da Qfix.

Cidex® é marca registrada da Johnson & Johnson.

Clorox® é uma marca registrada da The Clorox Company

Registro Anvisa No: 81300160002

SUMÁRIO

PRECAUÇÕES GERAIS	4
AVISOS DE CUIDADO	4
INCIDENTES GRAVES.....	4
CARGA NOMINAL.....	4
ETIQUETAS E DESCRIÇÕES DE CUIDADO	4
USO PRETENDIDO	5
MANUTENÇÃO	6
LIMPEZA DO DISPOSITIVO.....	6
DESINFECÇÃO DO DISPOSITIVO	6
LISTA DE PEÇAS.....	7
8002065 (A)	7
8002068 (B)	7
INSTRUÇÕES DE USO.....	8
INSTALAÇÃO	8
REMOÇÃO	10

PRECAUÇÕES GERAIS

AVISOS DE CUIDADO

! CUIDADO ! NÃO É PERMITIDO FAZER NENHUMA MODIFICAÇÃO NESTE DISPOSITIVO. SE QUALQUER PEÇA DESTE DISPOSITIVO RECEBER UMA CARGA CATASTRÓFICA, PARECER ESTAR DANIFICADA OU FUNCIONANDO INADEQUADAMENTE, INTERROMPA O USO IMEDIATAMENTE E ENTRE EM CONTATO COM QFIX PELO TELEFONE +1 484-720-6054 OU PELO E-MAIL TECHSUPPORT@QFIX.COM.

INCIDENTES GRAVES

Reporte qualquer incidente grave (por exemplo, incidentes que resultem ou possam resultar em óbito ou lesões graves) à Qfix e à Autoridade Competente do seu país.

CARGA NOMINAL

8002041—NÃO exceder 249 kg (550 lb) de carga uniformemente distribuída

8002066—NÃO exceder 226 kg (500 lb) de carga uniformemente distribuída

8002067—NÃO exceder 226 kg (500 lb) de carga uniformemente distribuída

ETIQUETAS E DESCRIÇÕES DE CUIDADO

Consulte Qfix.com para ver uma lista de símbolos e suas definições.

USO PRETENDIDO

Esta família de produtos foi projetada como dispositivos radiolucientes usados para injeção e/ou suporte de braço. Os produtos são projetados para uso com mesas planas de angiografia e exames por imagem.

! OBSERVAÇÃO ! As leis federais dos EUA restringem a venda deste dispositivo a médicos ou por ordem de um médico.

GRUPO ALVO DE PACIENTES

Pacientes que realizaram procedimentos médicos gerais ou cirúrgicos envolvendo diagnóstico por imagens.

USUÁRIO PRETENDIDO

O usuário pretendido para os produtos é uma pessoa qualificada de acordo com as exigências da região regulatória.

MANUTENÇÃO

LIMPEZA DO DISPOSITIVO

O dispositivo pode ser limpo com uma solução de limpeza suave, não abrasiva ou uma solução desinfetante. Para limpar, aplique a solução em um pano limpo e limpe a superfície.

DESINFECÇÃO DO DISPOSITIVO


Os materiais de limpeza a seguir foram testados e considerados adequados para a limpeza da superfície dos dispositivos. Para desinfetar a superfície, consulte as instruções específicas do fabricante do agente de limpeza.

- Água
- Solução alvejante de Clorox® a 10%
- Álcool isopropílico
- 2,4% de solução de dialdeído ativado Cidex®
- Água e sabão


Verifique periodicamente se todos os parafusos estão apertados.

LISTA DE PEÇAS

8002065 (A)

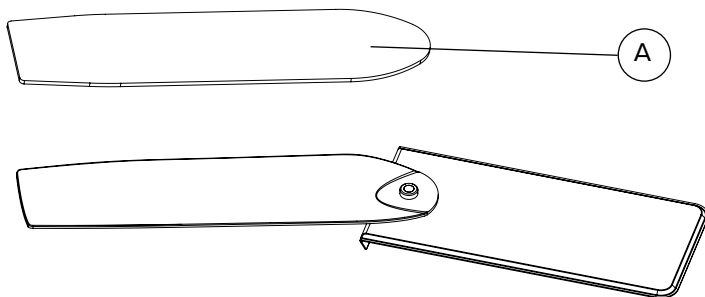


8002068 (B)

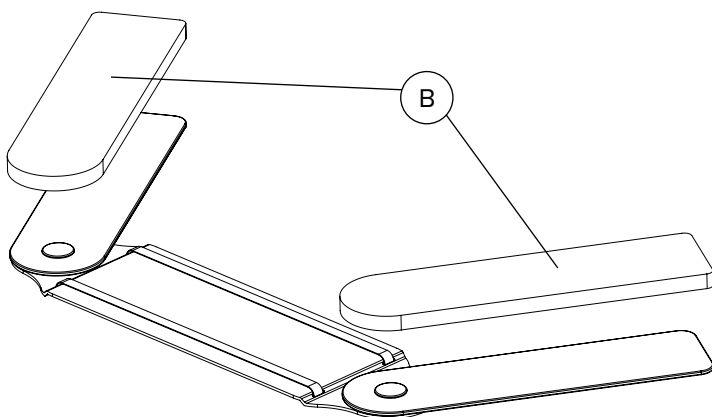


INSTRUÇÕES DE USO

INSTALAÇÃO

8002041

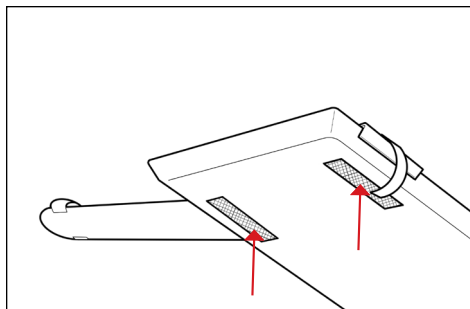

1

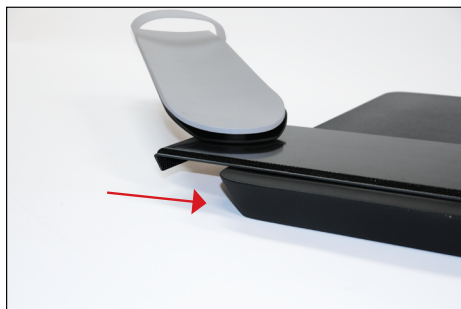


2




3



4

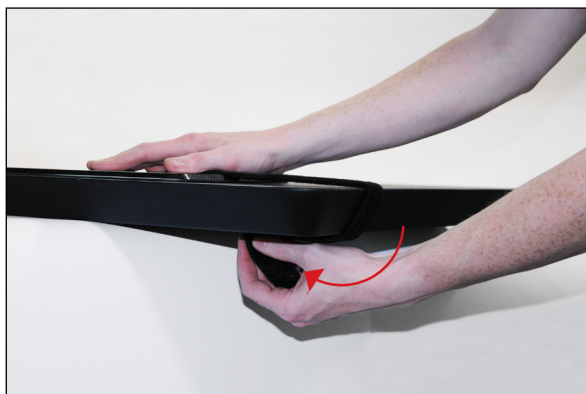

5

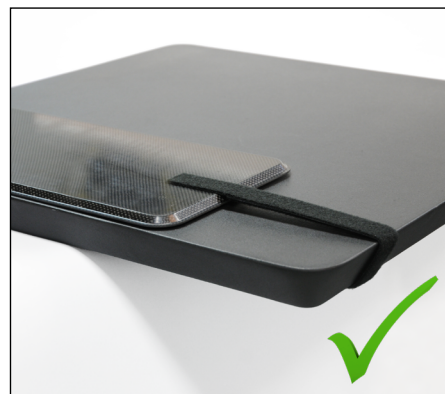

6



7

INSTRUÇÕES DE USO

INSTALAÇÃO


8002066 e 8002067



8



9

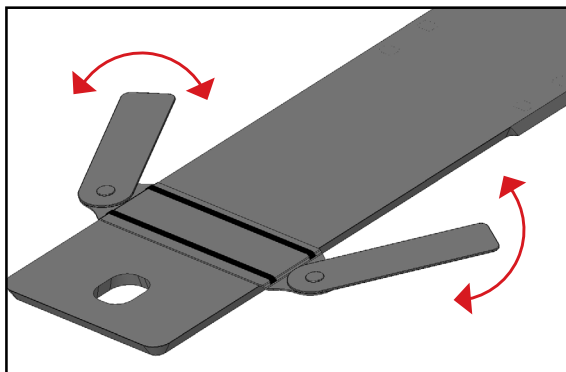


10


INSTRUÇÕES DE USO

REMOÇÃO


8002041

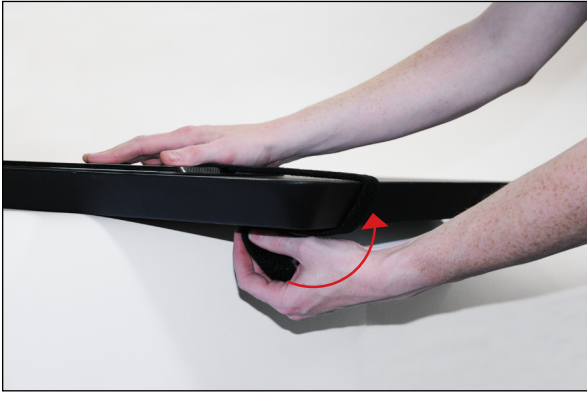

11

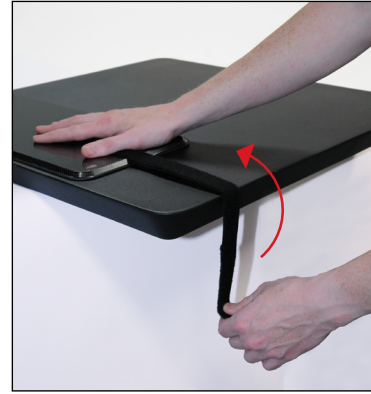

12

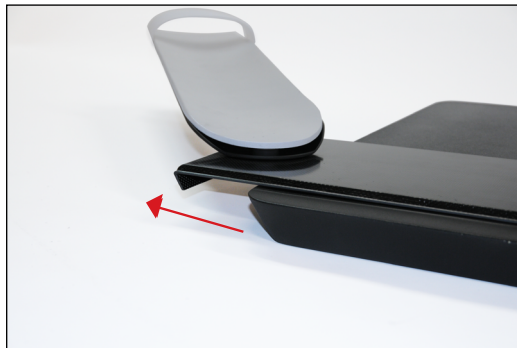

13

INSTRUÇÕES DE USO

REMOÇÃO

8002066 e 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004706_PT-BR-D
2020-07