



GUIA DO PRODUTO E MANUAL DO UTILIZADOR

8002041

8002066

8002067

Apoio de braço (Armboard) X-Trans®



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Fabricado nos EUA por Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---	---

X-Trans® é uma marca comercial registada da Qfix.

Cidex® é uma marca comercial registada da Johnson & Johnson.

Clorox® é uma marca comercial registada de The Clorox Company.

ÍNDICE

PRECAUÇÕES GERAIS	4
AVISOS	4
INCIDENTES GRAVES	4
CAPACIDADE DE CARGA	4
ETIQUETAS DE AVISO E DESCRIÇÕES	4
UTILIZAÇÃO PREVISTA	5
MANUTENÇÃO	6
LIMPEZA DO SISTEMA	6
DESINFECÇÃO DO SISTEMA	6
LISTA DE PEÇAS	7
8002065 (A)	7
8002068 (B)	7
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	8
INSTALAÇÃO	8
REMOÇÃO	10

PRECAUÇÕES GERAIS

AVISOS

! AVISO ! NÃO É PERMITIDA NENHUMA MODIFICAÇÃO DESTE EQUIPAMENTO. SE QUALQUER PARTE DESTE DISPOSITIVO FOR SUBMETIDA A UMA CARGA PREJUDICIAL, PARECER ESTAR DANIFICADA OU FUNCIONAR INADEQUADAMENTE, INTERROMPER IMEDIATAMENTE A UTILIZAÇÃO E ENTRAR EM CONTACTO COM A QFIX, ATRAVÉS DO NÚMERO DE TELEFONE +1 484-720-6054 OU DO E-MAIL TECHSUPPORT@QFIX.COM.

INCIDENTES GRAVES

Comunique quaisquer incidentes graves (por ex., incidentes que resultem em, ou tenham o potencial de resultar em, morte ou lesão grave) à Qfix e à sua Autoridade Competente nacional.

CAPACIDADE DE CARGA

8002041—NÃO exceder os 249 kg (550 lb) de carga uniformemente distribuída

8002066—NÃO exceder os 226 kg (500 lb) de carga uniformemente distribuída

8002067—NÃO exceder os 226 kg (500 lb) de carga uniformemente distribuída

ETIQUETAS DE AVISO E DESCRIÇÕES

Consultar Qfix.com para obter uma listagem dos símbolos e respectivas definições.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Esta família de produtos corresponde a dispositivos radiotransparentes utilizados para injeções e/ou apoio de braços. Os produtos foram concebidos para utilização com mesas de angiografia planas e mesas de imagiologia planas.

! NOTA ! A legislação federal dos Estados Unidos limita a venda deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição médica.

GRUPOS DE PACIENTES ALVO

Pacientes submetidos a procedimentos médicos ou cirúrgicos gerais que envolvam imagiologia de diagnóstico.

UTILIZADORES PREVISTOS

O utilizador previsto para os produtos é uma pessoa qualificada de acordo com os requisitos da região regulamentar.

MANUTENÇÃO

LIMPEZA DO SISTEMA

O dispositivo pode ser limpo com uma solução de limpeza suave e não abrasiva ou com uma solução desinfetante. Para limpar, aplicar solução num pano limpo e passar na superfície.

DESINFECÇÃO DO SISTEMA


Foram testados os materiais de limpeza indicados a seguir e considerados adequados para limpar as superfícies do dispositivo. Para desinfetar a superfície, consultar as instruções específicas do fabricante do agente de limpeza.

- Água
- Solução de lixívia Clorox® a 10%
- Álcool isopropílico
- Solução de dialdeído ativada com Cidex® a 2,4%
- Sabão e água


Verifique periodicamente se todos os atilhos estão bem apertados.

LISTA DE PEÇAS

8002065 (A)

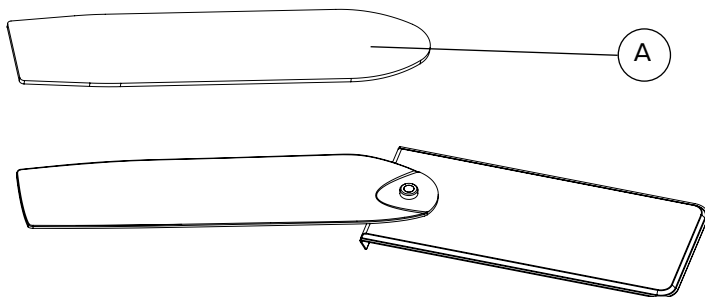


8002068 (B)

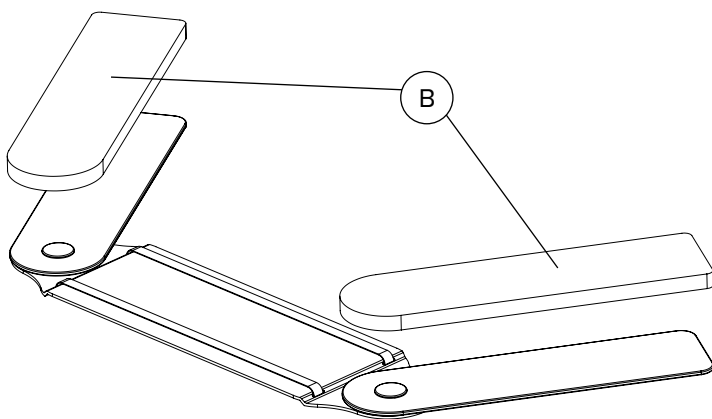


INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

INSTALAÇÃO

8002041

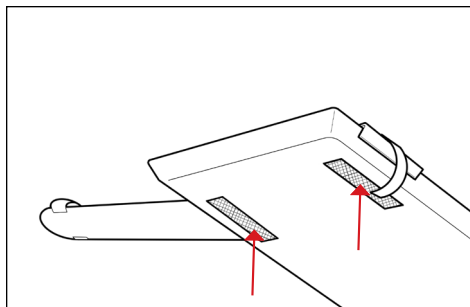

1

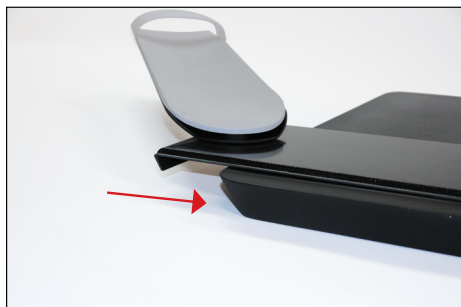


2




3



4

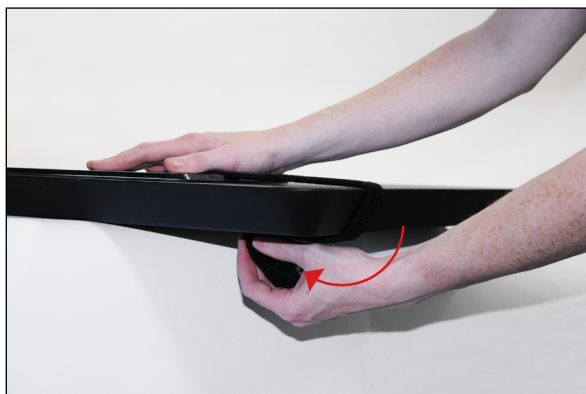

5

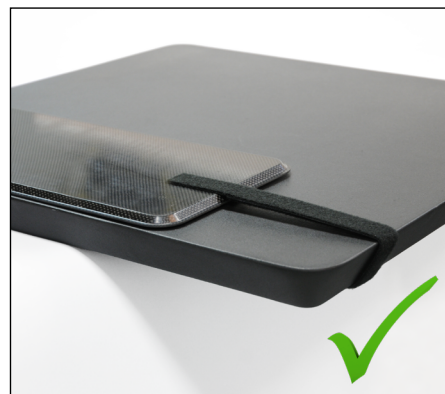

6



7

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

INSTALAÇÃO


8002066 e 8002067



8



9

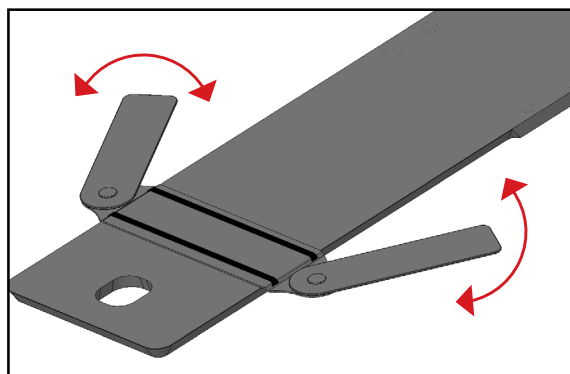


10


INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

REMOÇÃO


8002041

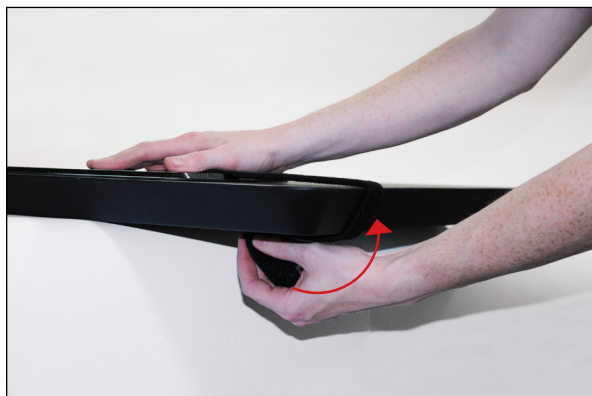

11

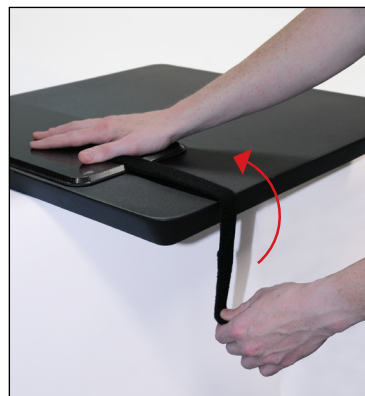

12

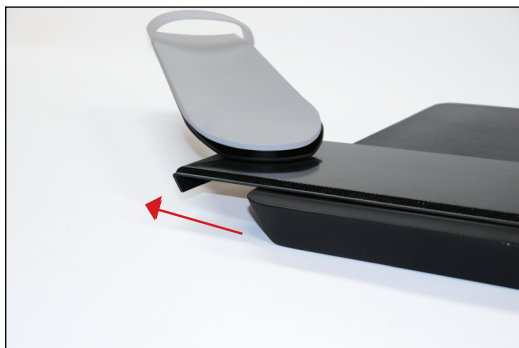

13

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

REMOÇÃO

8002066 e 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004706_PT-EU_E
2020-07