



GHIDUL PRODUSULUI ȘI MANUALUL UTILIZATORULUI

8002041

8002066

8002067

Placă pentru braț (Armboard) X-Trans®



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Fabricat în SUA de Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--	--

X-Trans® este o marcă comercială înregistrată a Qfix.

Cidex® este o marcă comercială înregistrată a Johnson & Johnson.

Clorox® este o marcă comercială înregistrată a The Clorox Company.

CUPRINS

PRECAUȚII GENERALE	4
NOTE DE AVERTIZARE	4
INCIDENTE GRAVE	4
CAPACITATE DE SARCINĂ	4
ETICHETE ȘI DESCRIERI DE AVERTIZARE	4
INDICAȚII DE UTILIZARE	5
ÎNTREȚINERE	6
CURĂȚAREA SISTEMULUI	6
DEZINFECTAREA SISTEMULUI	6
LISTĂ DE PIESE	7
8002065 (A)	7
8002068 (B)	7
INSTRUCȚIUNI DE OPERARE	8
INSTALAREA	8
DEMONTAREA	10

PRECAUȚII GENERALE

NOTE DE AVERTIZARE

! AVERTIZARE ! NU ESTE PERMISĂ NICIO MODIFICARE A ACESTUI ECHIPAMENT. DACĂ ORICE PIESĂ A ACESTUI DISPOZITIV ESTE SUPUSĂ UNEI SARCINI ÎN CAZ DE DEZASTRU, PARE SĂ FIE DETERIORATĂ SAU FUNCȚIONEAZĂ NECORESPUNZĂTOR, ÎNTRERUPEȚI IMEDIAT UTILIZAREA ȘI CONTACTAȚI QFIX LA +1 484-720-6054 SAU TECHSUPPORT@QFIX.COM

INCIDENTE GRAVE

Vă rugăm să raportați toate incidentele grave (de exemplu, incidente care au dus la sau au potențialul de a cauza decesul sau vătămarea gravă) atât către Qfix, cât și către autoritatea competentă a țării dumneavoastră.

CAPACITATE DE SARCINĂ

8002041—A NU se depăși o sarcină uniform distribuită de 249 kg (550 lb)

8002066—A NU se depăși o sarcină uniform distribuită de 226 kg (500 lb)

8002067—A NU se depăși o sarcină uniform distribuită de 226 kg (500 lb)

ETICHETE ȘI DESCRIERI DE AVERTIZARE

Vă rugăm să consultați Qfix.com pentru o listă a simbolurilor și definițiile acestora.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Această familie de produse este concepută drept dispozitive radiotransparente utilizate pentru injecții și/sau susținerea brațului. Produsele sunt concepute pentru a fi utilizate împreună cu mese plate de angiografie și mese plate de imagistică.

! NOTĂ ! Legea federală a Statelor Unite limitează acest dispozitiv la vânzarea acestuia sau la ordinul unui medic.

GRUPURI ȚINĂ DE PACIENȚI

Pacienții supuși procedurilor medicale generale sau intervențiilor chirurgicale ce implică diagnosticarea prin imagistică.

UTILIZATORI ȚINTĂ

Utilizatorul țintă pentru produse este o persoană calificată în conformitate cu cerințele regiunii de reglementare.

ÎNTREȚINERE

CURĂȚAREA SISTEMULUI

Placa pentru braț (Armboard) poate fi curățată cu o soluție dezinfectantă sau de curățare ușoară, neabrazivă. Pentru curățare, aplicați soluția pe o lavetă curată și ștergeți suprafața.

DEZINFECTAREA SISTEMULUI


Următoarele materiale de curățare au fost testate și s-a dovedit că sunt corespunzătoare pentru curățarea suprafețelor plăcii pentru braț. Pentru a dezinfecta suprafața plăcii pentru braț, consultați instrucțiunile specifice ale producătorului agentului de curățare.

- Apă
- Soluție de albire Clorox® 10%
- Alcool izopropilic
- Soluție activată de dialdehidă 2,4% Cidex®
- Apă și săpun


Verificați periodic închiderea fermă a tuturor sistemelor de fixare.

LISTĂ DE PIESE

8002065 (A)

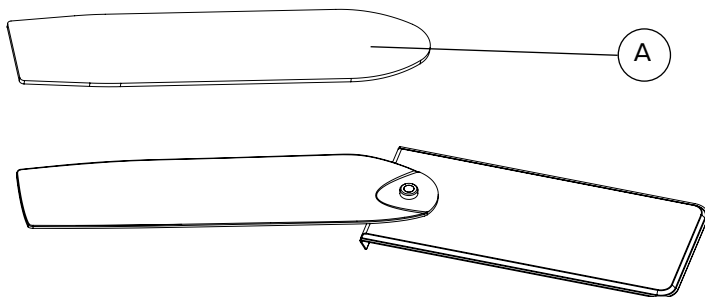


8002068 (B)

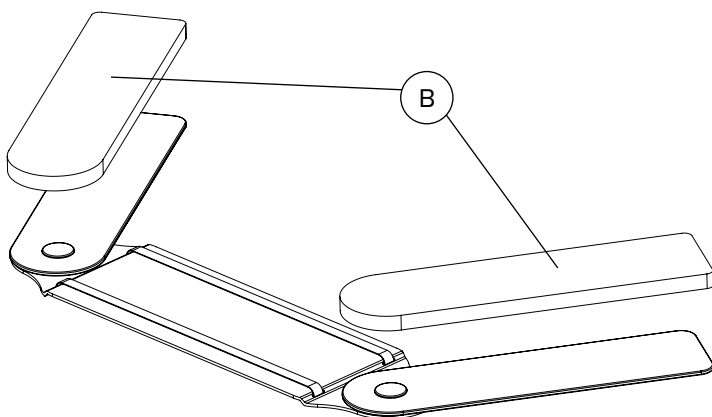


INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

INSTALAREA

8002041

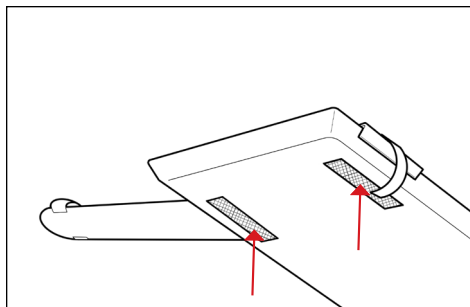

1

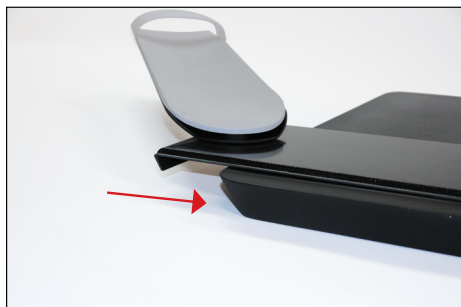


2




3



4

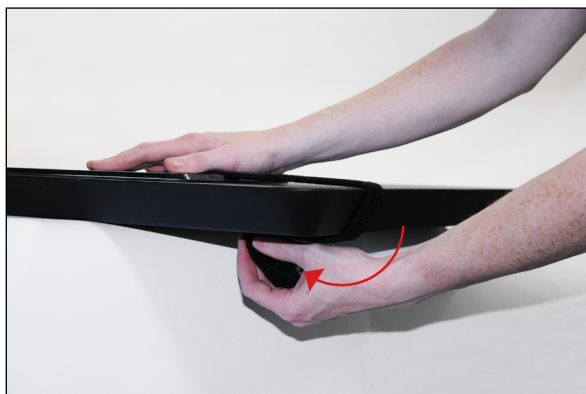

5

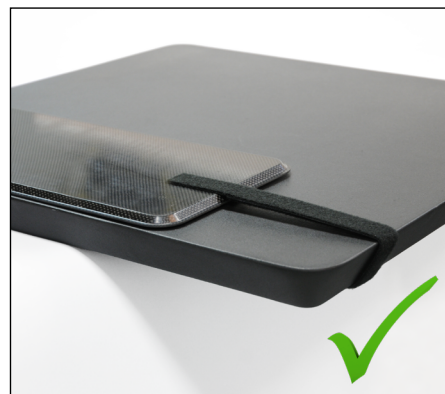

6



7

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

INSTALAREA


8002066 și 8002067



8



9

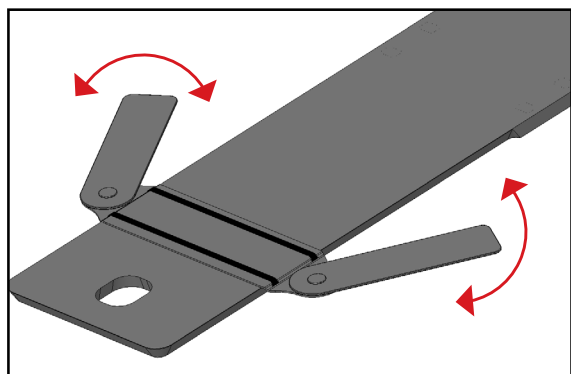


10


INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

DEMONTAREA


8002041

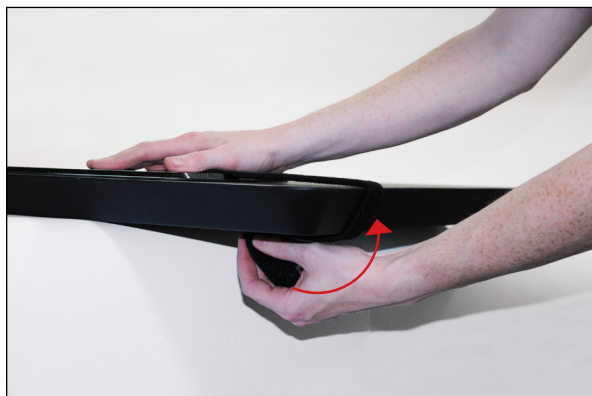

11

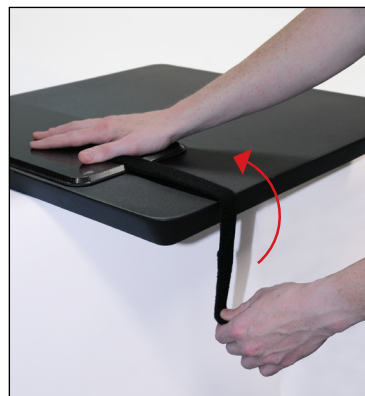

12

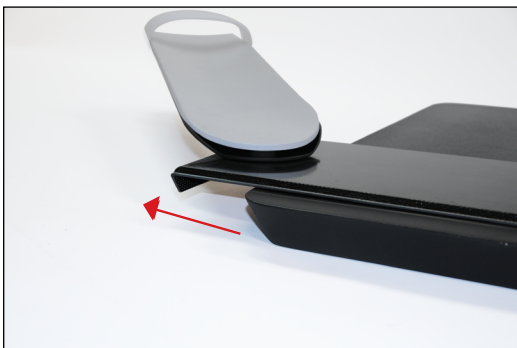

13

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

DEMONTAREA

8002066 și 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585/800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588/800.831.8174

✉ sales@Qfix.com