



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

8002041

8002066

8002067

Подлокотник X-Trans® (Armboard)



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Изготовлено в США компанией Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--	---

X-Trans® является зарегистрированным товарным знаком компании Qfix.

Cidex® является зарегистрированным товарным знаком компании Johnson & Johnson.

Clorox® является зарегистрированной торговой маркой компании The Clorox Company.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.....	4
СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ	4
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	4
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ И ИХ ОПИСАНИЕ.....	4
НАЗНАЧЕНИЕ.....	5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
ЧИСТКА СИСТЕМЫ.....	6
ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМЫ.....	6
СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ.....	7
8002065 (A).....	7
8002068 (B).....	7
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	8
УСТАНОВКА	8
УДАЛЕНИЕ.....	10

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! КАКИЕ-ЛИБО МОДИФИКАЦИИ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. ЕСЛИ КАКАЯ-ЛИБО ЧАСТЬ ЭТО УСТРОЙСТВА ПОДВЕРГЛАСЬ КРИТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ, ВЫГЛЯДИТ ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЛИ ФУНКЦИОНИРУЕТ НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВОМ И ОБРАТИТЕСЬ В КОМПАНИЮ QFIX ПО ТЕЛЕФОНУ +1 484-720-6054 ИЛИ АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ TECHSUPPORT@QFIX.COM.

СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

В случае возникновения любых серьезных происшествий (например, происшествий, которые привели или могут привести к смерти или серьезным травмам), следует немедленно уведомить компанию Qfix и компетентный орган вашей страны.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

8002041—Равномерно распределенная нагрузка НЕ ДОЛЖНА превышать 249 кг (550 фунта)

8002066—Равномерно распределенная нагрузка НЕ ДОЛЖНА превышать 226 кг (500 фунта)

8002067—Равномерно распределенная нагрузка НЕ ДОЛЖНА превышать 226 кг (500 фунта)

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ И ИХ ОПИСАНИЕ

Список символов и их значений доступен на сайте Qfix.com.

НАЗНАЧЕНИЕ

Это семейство изделий содержит рентгенопрозрачные устройства, предназначенные для инъекций и (или) использования в качестве опоры для рук. Эти изделия предназначены для применения с ангиографическими и визуализационными столами с плоским верхом.

! ПРИМЕЧАНИЕ ! Федеральный закон США разрешает продавать и заказывать устройство только врачам.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ

Пациенты, проходящие общие медицинские или хирургические процедуры, включающие медицинскую визуализацию.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Предполагаемыми пользователями изделия являются лица, аттестованные в соответствии с требованиями регулирующих нормативных актов соответствующего региона.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТКА СИСТЕМЫ

Устройство можно чистить мягкодействующим неабразивным моющим или дезинфицирующим раствором. Нанесите раствор на чистую ткань и протрите поверхность ею.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМЫ


В ходе испытаний следующие чистящие материалы были признаны подходящими для чистки поверхностей устройств. При дезинфекции поверхности см. инструкции изготовителя применяемого моющего средства.

- Вода
- 10 %-ный раствор гипохлорита натрия Clorox®
- Изопропиловый спирт
- 2,4 %-ный раствор активированного диальдегида Cidex®
- Вода с мылом


Периодически проверяйте затяжку всех фиксаторов.

СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ

8002065 (A)

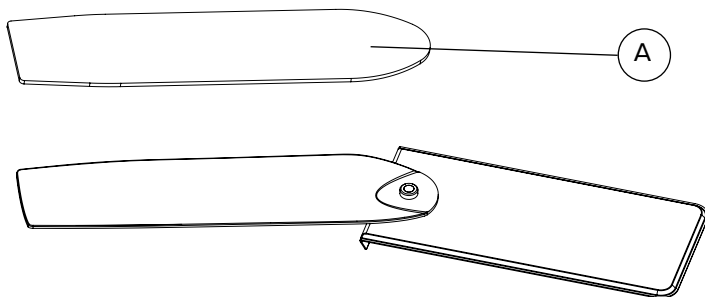


8002068 (B)

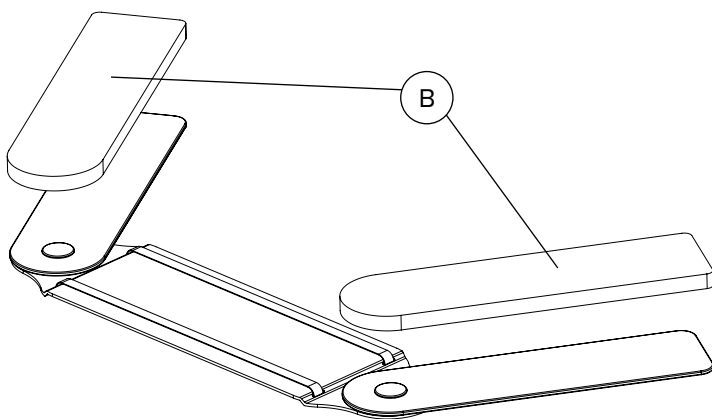


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСТАНОВКА

8002041

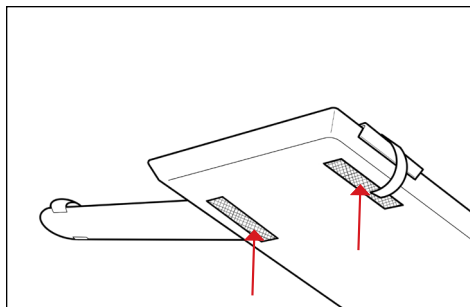

1

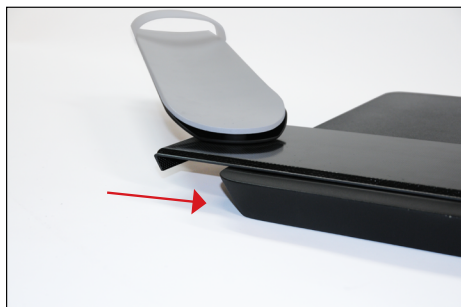

2



3



4



5



6



7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСТАНОВКА


8002066 и 8002067



8



9

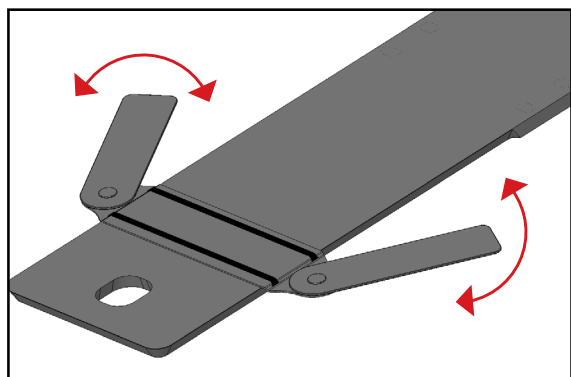


10

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УДАЛЕНИЕ


8002041

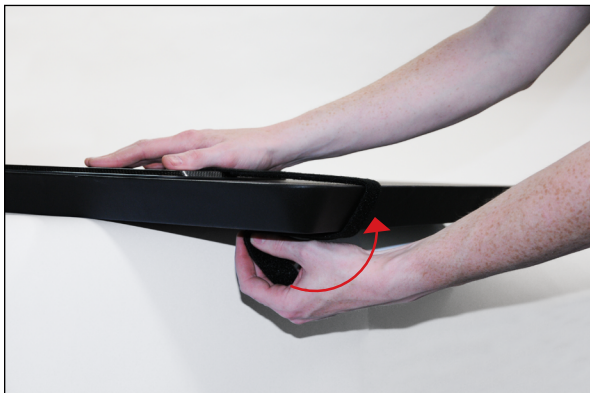

11



12

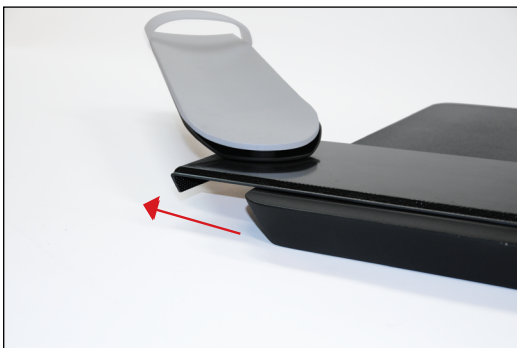

13

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УДАЛЕНИЕ

8002066 и 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

📠 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004706_RU_E
2020-07