



VODIČ ZA PROIZVOD I PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

8002041

8002066

8002067

Držáč za ruke X-Trans™



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		U SAD-u proizvela kompanija: Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712-737-8668 www.CQmedical.com
----	-----	---	---	--

X-Trans™ je žig kompanije Qfix.

Cidex® je registrovani žig kompanije Johnson & Johnson.

Clorox® je registrovani žig kompanije The Clorox Company.

SADRŽAJ

OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI.....	4
UPOZORENJA.....	4
OZBILJNI INCIDENTI.....	4
DEKLARISANO OPTEREĆENJE.....	4
OZNAKE UPOZORENJA I NJIHOVI OPISI	4
NAMENA.....	5
ODRŽAVANJE	6
ČIŠĆENJE SISTEMA	6
DEZINFEKCIJA SISTEMA.....	6
LISTA DELOVA	7
8002065 (A)	7
8002068 (B)	7
UPUTSTVO ZA UPOTREBU.....	8
INSTALACIJA.....	8
UKLANJANJE	10

OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI

UPOZORENJA

! UPOZORENJE ! NIJE DOZVOLJENA MODIFIKACIJA OVE OPREME. AKO BILO KOJI DEO OVOG UREĐAJA BUDE IZLOŽEN KRITIČNOM OPTEREĆENJU, IZGLEDA OŠTEĆENO ILI NE FUNKCIONIŠE ISPRAVNO, ODMAH PREKINITE UPOTREBU I OBRATITE SE KOMPANIJI CQ MEDICAL NA +1 712-737-8668 ILI INFO@CQMEDICAL.COM.

OZBILJNI INCIDENTI

Prijavite sve ozbiljne incidente (npr. incidente koji dovode ili mogu dovesti do smrti ili teških povreda) kompaniji CQ Medical i nadležnom organu vaše zemlje.

DEKLARISANO OPTEREĆENJE

8002041 – NEMOJTE da prekoračite 249 kg (550 funti) ravnomerno raspoređenog tereta

8002066 – NEMOJTE da prekoračite 226 kg (500 funti) ravnomerno raspoređenog tereta

8002067 – NEMOJTE da prekoračite 226 kg (500 funti) ravnomerno raspoređenog tereta

OZNAKE UPOZORENJA I NJIHOVI OPISI

Spisak simbola i njihovih definicija potražite na veb lokaciji www.CQmedical.com.

NAMENA

Ova porodica proizvoda dizajnirana je kao uređaji koji propuštaju rendgenske zrake i koriste se za injekcije i/ili kao nasloni za ruke. Proizvodi su namenjeni za upotrebu sa angiografskim stolovima ravne površine i stolovima za snimanje ravne površine.

! NAPOMENA ! Savezni zakon Sjedinjenih Američkih Država ograničava prodaju ovog uređaja isključivo lekarima ili na osnovu naloga lekara.

CILJNE GRUPE PACIJENATA

Pacijenti koji se podvrgavaju opštim medicinskim ili hirurškim procedurama koje uključuju dijagnostičko snimanje.

PREDVIĐENI KORISNICI

Predviđeni korisnik proizvoda je osoba kvalifikovana u skladu sa zahtevima regulatornog regiona.

ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE SISTEMA

Uređaj se može očistiti blagim, neabrazivnim rastvorom za čišćenje ili dezinfekciju. Za čišćenje, nanosite rastvor na čistu krpu i obrišite površinu.

DEZINFEKCIJA SISTEMA


Sledeći materijali za čišćenje su testirani i ustanovljeno je da su pogodni za čišćenje površine uređaja. Da biste dezinfikovali površinu uređaja, pogledajte specifična uputstva proizvođača sredstva za čišćenje.

- Voda
- 10% rastvor Clorox® izbeljivača
- Izopropil-alkohol
- Cidex® 2,4% rastvor aktiviranog dialdehida
- Sapun i voda


Povremeno proverite da li su svi pričvršćivači dovoljno zategnuti.

LISTA DELOVA

8002065 (A)

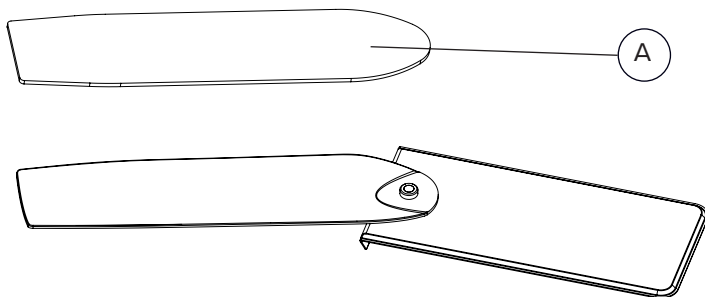


8002068 (B)

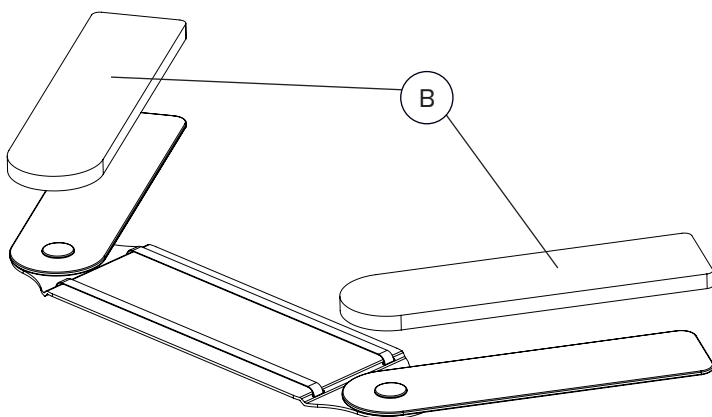


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

INSTALACIJA

8002041

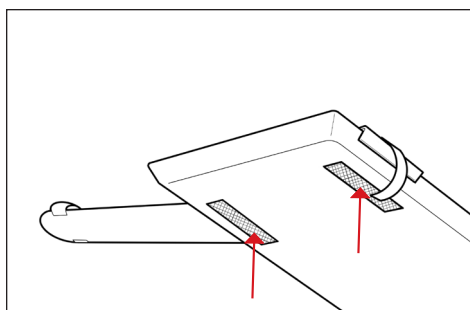

1

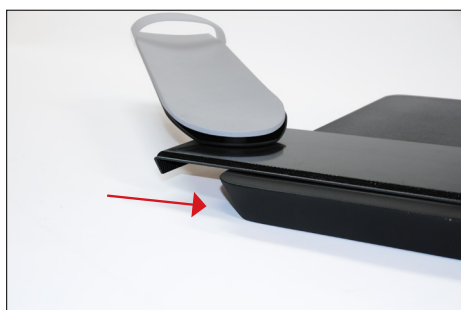


2



3



4

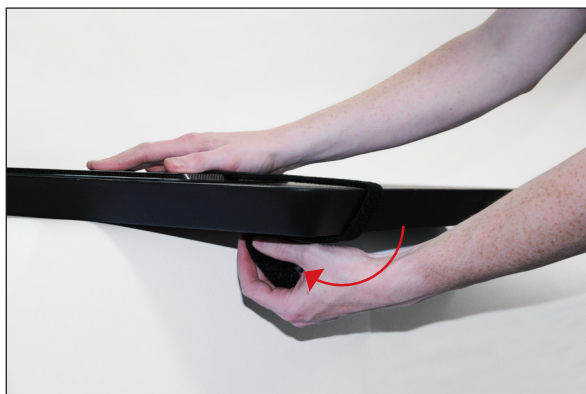

5



6



7

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

INSTALACIJA


8002066 i 8002067



8



9

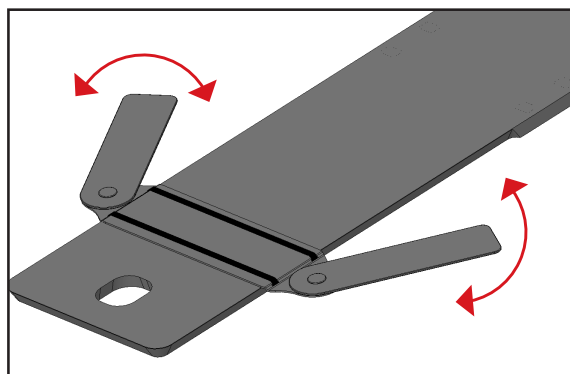


10

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

UKLANJANJE


8002041

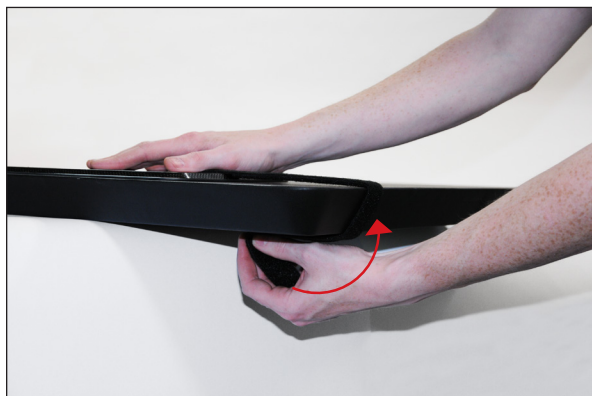

11



12

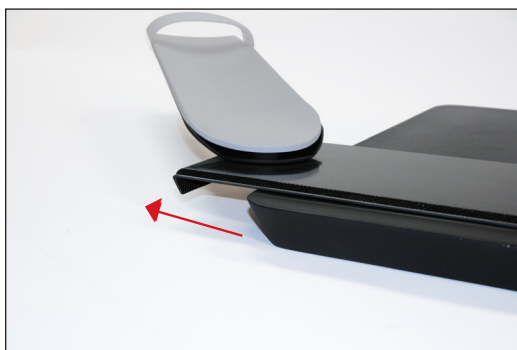

13

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

UKLANJANJE

8002066 i 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.CQmedical.com

☎ +1 712.737.8668 / 800.842.8688
✉ info@CQmedical.com

2004706_SR_0
2024-12