



PRODUKTGUIDE OCH ANVÄNDARHANDBOK

8002041

8002066

8002067

X-Trans® Armstöd (Armboard)



EC REP		Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Tillverkad i USA av Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	--	--	---

X-Trans® är ett registrerat varumärke som tillhör Qfix.

Cidex® är ett registrerat varumärke som tillhör Johnson & Johnson.

Clorox® är ett registrerat varumärke som tillhör The Clorox Company.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	4
VARNINGSMEDDELANDEN	4
ALLVARLIGA OLYCKOR	4
NOMINELL MAXBELASTNING.....	4
VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR.....	4
AVSEDD ANVÄNDNING	5
UNDERHÅLL	6
RENGÖRA SYSTEMET	6
DESINFICERA SYSTEMET.....	6
LISTA ÖVER DELAR.....	7
8002065 (A)	7
8002068 (B)	7
BRUKSANVISNING	8
INSTALLATION.....	8
AVLÄGSNANDE.....	10

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNINGSMEDDELANDEN

! VARNING ! INGA MODIFIERINGAR AV DENNA UTRUSTNING ÄR TILLÅTEN. AVBRYT OMEDELBART ANVÄNDNINGEN OCH KONTAKTA QFIX PÅ +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM OM NÅGON DEL AV DENNA ENHET BELASTAS KATASTROFALT, FÖREFALLER SKADAD ELLER FUNGERAR FELAKTIGT.

ALLVARLIGA OLYCKOR

Vänligen rapportera allvarliga olyckor (t.ex. olyckor som orsakar eller har potential att orsaka dödsfall eller allvarlig personskada) både till Qfix och till behörig myndighet i ditt land.

NOMINELL MAXBELASTNING

8002041—Får EJ överskrida 249 kg (550 pund) jämnt fördelad belastning.

8002066—Får EJ överskrida 226 kg (500 pund) jämnt fördelad belastning.

8002067—Får EJ överskrida 226 kg (500 pund) jämnt fördelad belastning.

VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR

Se Qfix.com för en lista med symboler med definitioner.

AVSEDD ANVÄNDNING

Denna serie av produkter är utformade för att vara röntgengensomskinliga och används för injektioner och/eller som armstöd. Produkterna är konstruerade för att användas med angiografi- och bildtagningsbord som har plana bordsskivor.

! OBSERVERA ! Enligt amerikansk federal lag får denna enhet endast säljas av eller på ordination av läkare.

PATIENTMÅLGRUPPER

Patienter som får allmän medicinsk eller kirurgisk behandling innefattande diagnostisk avbildning.

AVSEDDA ANVÄNDARE

Avsedd användare för produkterna är en person kvalificerad i enlighet med regionens myndighetskrav.

UNDERHÅLL

RENGÖRA SYSTEMET

Enheten kan rengöras med en mild, icke-slipande rengörings- eller desinfektionslösning. Rengör genom att applicera lösningen på en ren duk och torka av ytan.

DESINFICERA SYSTEMET


Följande rengöringsmaterial har testats och visats vara lämpliga för rengöring av enhetens ytor. För desinficering av ytan hänvisas till specifika instruktioner från rengöringsmedlets tillverkare.

- Vatten
- 10 % Clorox® blekmedelslösning
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktiverad dialdehydlösning
- Tvål och vatten


Kontrollera regelbundet att alla fästen sitter fast.

LISTA ÖVER DELAR

8002065 (A)

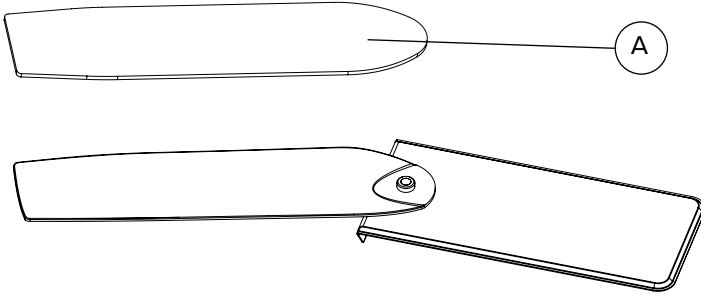


8002068 (B)

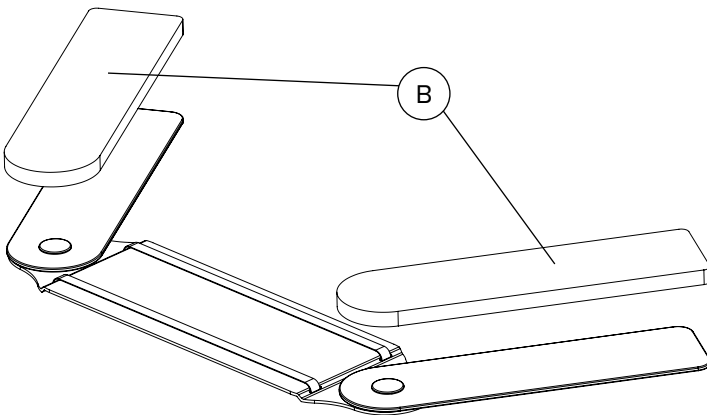


BRUKSANVISNING

INSTALLATION

8002041

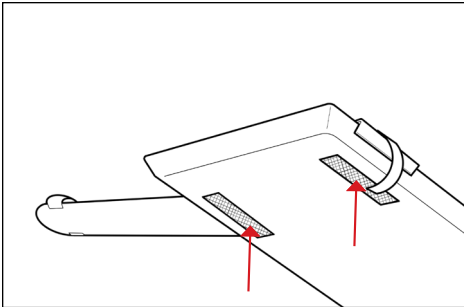

1

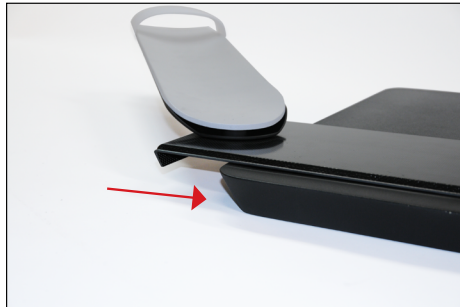

2




3



4



5

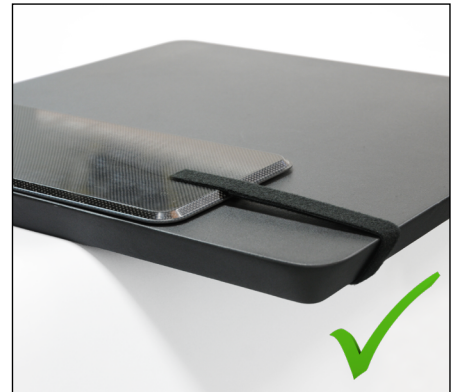

6



7

BRUKSANVISNING

INSTALLATION


8002066 och 8002067



8



9

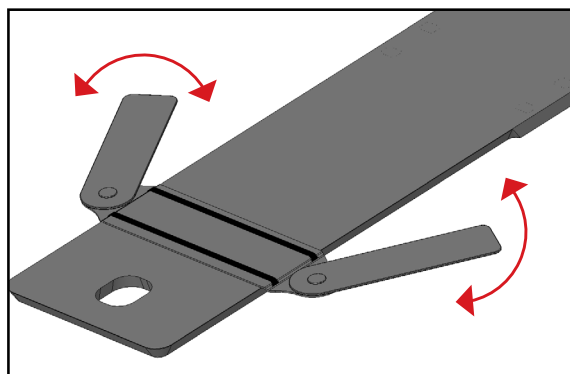


10


BRUKSANVISNING

AVLÄGSNANDE


8002041

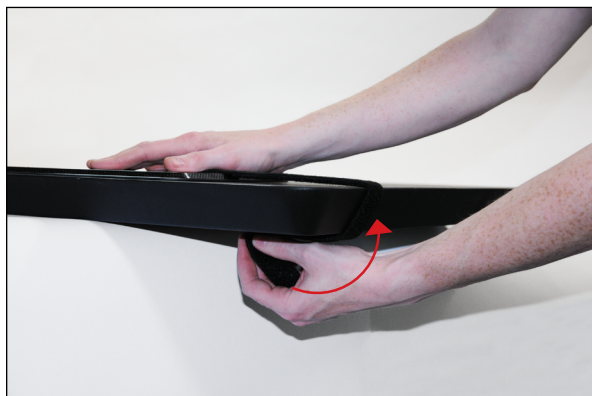

11

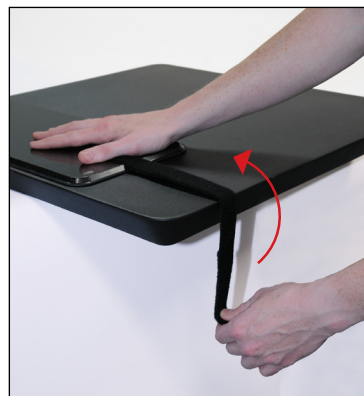

12

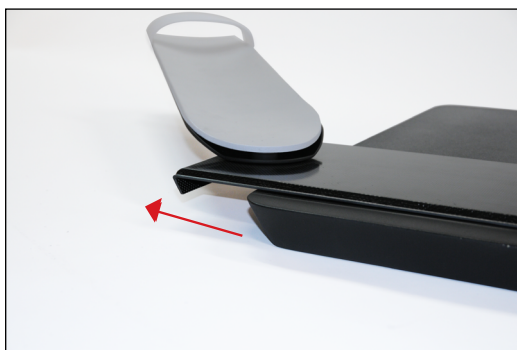

13

BRUKSANVISNING

AVLÄGSNANDE

8002066 och 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com

2004706_SV_E
2020-07