



positioning
patients for life.®

ІНСТРУКЦІЯ З ВИРОБУ ТА ПОСІБНИК СПОЖИВАЧА

8002041

8002066

8002067

X-Trans® підлокітник (Armboard)



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Зроблене в США компанією Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---

X-Trans® є зареєстрованою торговою маркою компанії Qfix.

Cidex® є зареєстрованою торговою маркою компанії Johnson & Johnson.

Clorox® є зареєстрованою торговою маркою компанії The Clorox Company.

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.....	4
ПОПЕРЕДЖУЮЧІ ЗАЯВИ.....	4
СЕРЙОЗНІ ІНЦИДЕНТИ.....	4
РОЗРАХУНКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ	4
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕТИКЕТКИ & ОПИСУ	4
ПЕРЕДБАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ.....	5
ДОГЛЯД.....	6
ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ	6
ДЕЗІНФЕКЦІЯ СИСТЕМИ.....	6
ПЕРЕЛІК ЧАСТИН	7
8002065 (A).....	7
8002068 (B).....	7
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	8
МОНТАЖ	8
ЗНЯТТЯ	10

ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖУЮЧІ ЗАЯВИ

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ ! НІЯКОЇ МОДИФІКАЦІЇ ЦЬОГО ОБЛАДНАННЯ НЕ ДОЗВОЛЕНО. ЯКЩО БУДЬ-ЯКА ЧАСТИНА ЦЬОГО ПРИСТРОЮ ЗАЗНАЄ КАТАСТРОФІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ, ВИГЛЯДАЄ ПОШКОДЖЕНОЮ АБО ФУНКЦІОНУЄ НЕНАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, НЕГАЙНО ПРИПИНІТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ ТА ЗВЕРНІТЬСЯ В КОМПАНІЮ QFIX ЗА ТЕЛЕФОНОМ +1484-720-6054 АБО ЗА ЕЛЕКТРОННОЮ АДРЕСОЮ TECHSUPPORT@QFIX.COM.

СЕРІОЗНІ ІНЦИДЕНТИ

Повідомляйте як Qfix, так і компетентний орган вашої країни про будь-які серйозні інциденти (наприклад, про випадки, які призводять або можуть призвести до смерті або серйозної травми).

РОЗРАХУНКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ

8002041—НЕ перевищуйте 249 кг (550 фунта) однорідно розподіленого навантаження

8002066—НЕ перевищуйте 226 кг (500 фунта) однорідно розподіленого навантаження

8002067—НЕ перевищуйте 226 кг (500 фунта) однорідно розподіленого навантаження

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕТИКЕТКИ & ОПИСУ

На сайті Qfix.com можна знайти список символів та їх значень.

ПЕРЕДБАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Це сімейство виробів спроектоване як прозорі для випромінювання пристрої, що використовуються для ін'єкцій і (або) підлокітників. Дані вироби призначені для використання з плоскими ангиографічними столиками та плоскими столиками для отримання зображень.

! ПРИМІТКА ! США Федеральний закон обмежує цей пристрій для продажу або за вказівкою лікаря.

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ПАЦІЄНТІВ

Пацієнти, які проходять загальні медичні або хірургічні процедури, пов'язані з діагностичною візуалізацією.

ВИЗНАЧЕНІ КОРИСТУВАЧІ

Визначеним користувачем цих продуктів є людина, кваліфікована відповідно до вимог регулюючого регіону.

ДОГЛЯД

ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ

Підлокітник (Armboard) можна очищати за допомогою м'якого, неабразивного очисного чи дезінфікуючого розчину. Для проведення очистки намочіть розчином чисту тканину та витріть поверхню.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ СИСТЕМИ


Наступні очисні матеріали протестовані та продемонстрували свою придатність для очистки поверхонь підлокітника. Щоб дезінфікувати поверхню підлокітника, зверніться до спеціальних інструкцій, які надає виробник очисного засобу.

- Вода
- 10% розчин натрію гіпохлориту Clorox®
- Ізопропіловий спирт
- Cidex® 2,4% активований розчин діальдегіду
- Мило та вода


Періодично перевіряйте, чи затягнуті всі кріпильні деталі.

ПЕРЕЛІК ЧАСТИН

8002065 (A)

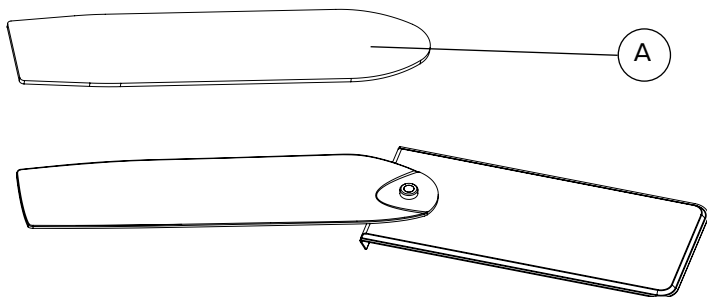


8002068 (B)

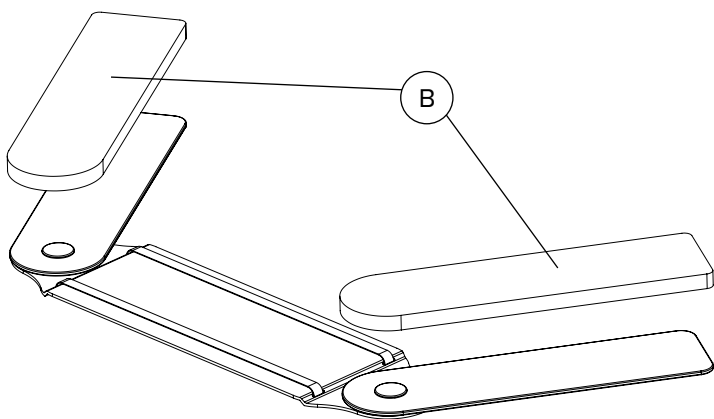


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МОНТАЖ

8002041

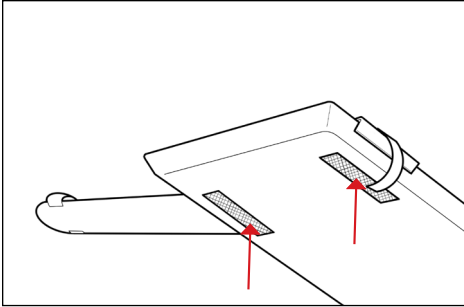

1

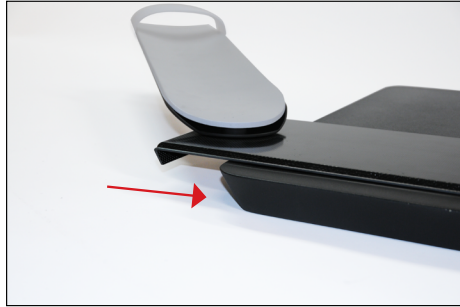

2




3



4



5

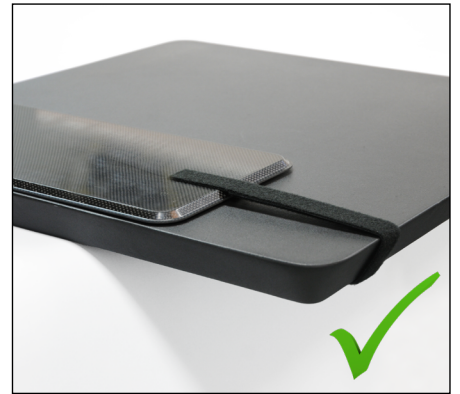

6



7

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МОНТАЖ


8002066 та 8002067



8



9

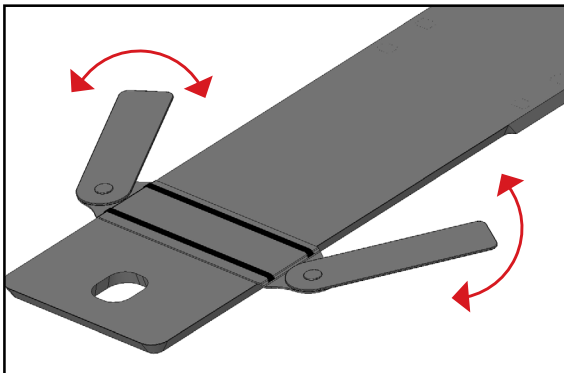


10


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗНЯТТЯ


8002041

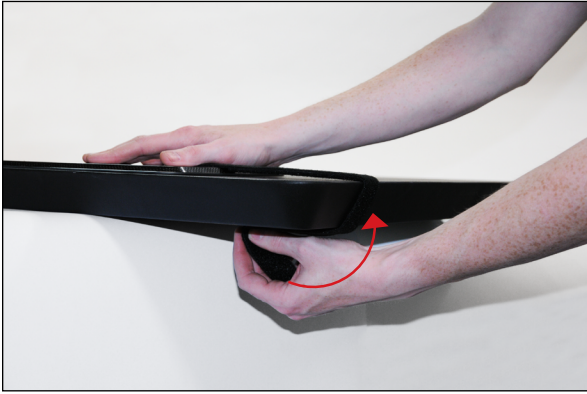

11

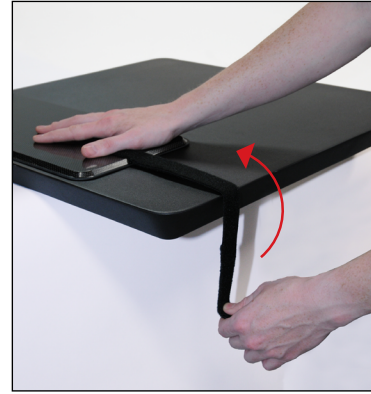

12

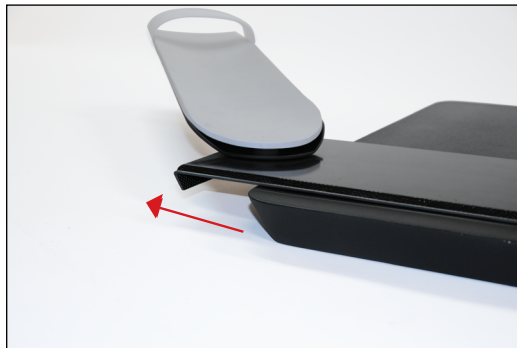

13

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗНЯТТЯ

8002066 та 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com