



positioning
patients for life.®

产品说明和用户手册

8002041

8002066

8002067

X-Trans® 臂护板 (Armboard)



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		美国制造，制造商为 科辅适 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, 美国 +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--	--

产品名称：人体定位袋
医疗器械备案号： 20150038

X-Trans® 是 Qfix 的注册商标。
Cidex® 是 Johnson & Johnson 的注册商标。
Clorox® 是 Clorox 公司的注册商标。

目录

一般性注意事项	4
警告声明	4
严重事件	4
额定载荷	4
警告标签及说明	4
预期用途	5
维护保养	6
系统的清洁	6
系统的消毒	6
部件列表	7
8002065 (A)	7
8002068 (B)	7
操作说明	8
安装	8
拆卸	10

一般性注意事项

警告声明

！警告！不得修改本设备。如本装置的任何部分经受了过大的载荷，出现损坏迹象或功能异常，请立即停止使用并通过 +1 484-720-6054 或 TECHSUPPORT@QFIX.COM 联系QFIX。

严重事件

请向 Qfix 和您所在国家/地区的主管当局报告任何严重事件（例如导致或可能造成死亡或严重伤害的事件）。

额定载荷

8002041—不得超过249千克（550磅）的均布载荷。

8002066—不得超过226千克（500磅）的均布载荷。

8002067—不得超过226千克（500磅）的均布载荷。

警告标签及说明

参见 Qfix.com 了解符号列表及其定义。

预期用途

该系列产品设计为放射线可透装置，用于注射剂和/或扶手。该产品设计与平顶血管摄影台和平顶成像台一起使用。

！注意！美国联邦法律限制此装置只能由医生或凭医嘱销售。

患者目标人群

接受一般医疗或涉及诊断成像的外科手术的患者。

预期用户

产品的预期用户是根据监管区域的要求取得资质的人员。

维护保养

系统的清洁

装置可使用温和的非研磨性清洁或消毒液进行清洁。清洁时，用溶液润湿干净的布块后擦拭设备表面。

系统的消毒


下列清洁材料已经过测试，证明适用于清洁装置的表面。要对表面进行消毒，请参阅清洁剂厂商的特定说明。

- 水
- 10% Clorox® 漂白液
- 异丙醇
- Cidex® 2.4% 活化的二醛溶液
- 肥皂和水


定期检查所有紧固件是否紧固。

部件列表

8002065 (A)

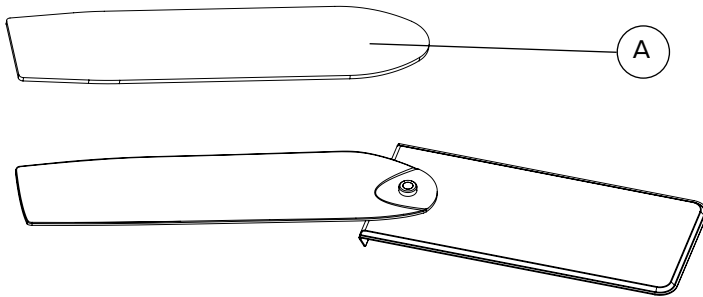


8002068 (B)

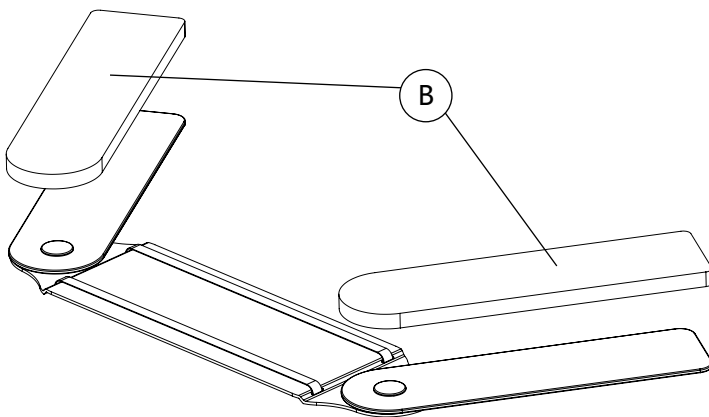


操作说明

安装

8002041

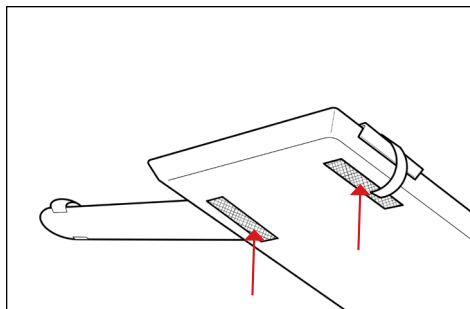

1

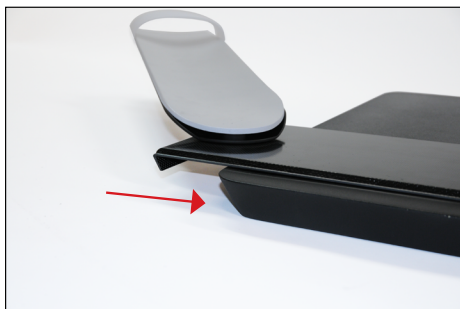

2




3



4



5

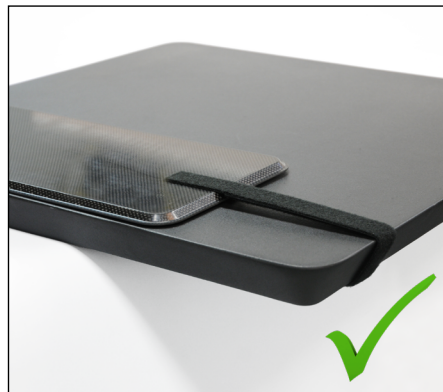

6



7

操作说明

安装


8002066 与 8002067



8



9

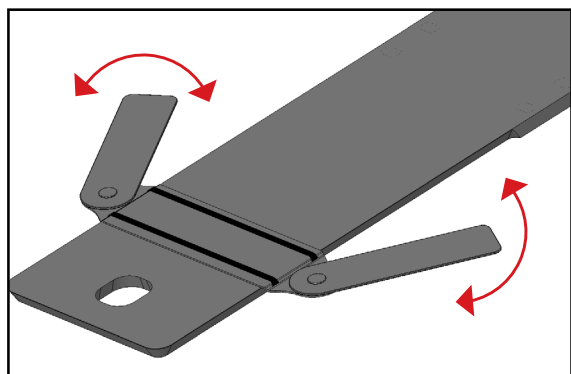


10


操作说明

拆卸


8002041

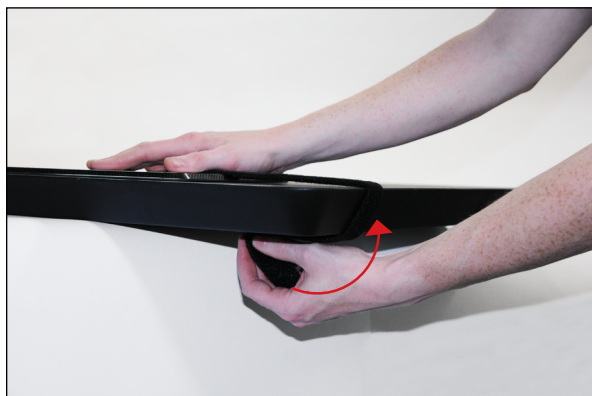

11

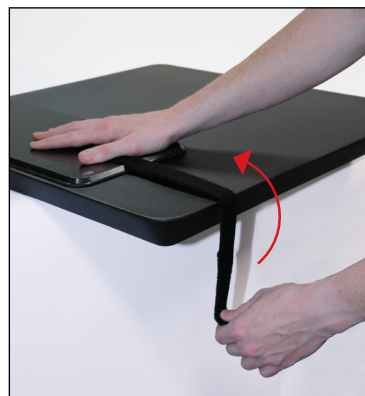

12

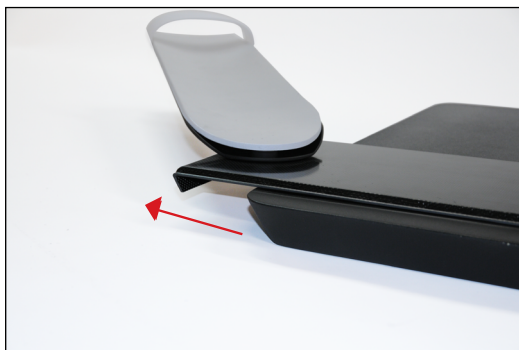

13

操作说明

拆卸

8002066 与 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 美国
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004706_ZH_E
2020-07