


VODIČ I UPUTE ZA UPORABU PROIZVODA

RT-4551KVE kVue™ EDGE™ Couch Top

RT-4551KVCL-V kVue™ Calypso® Couch Top



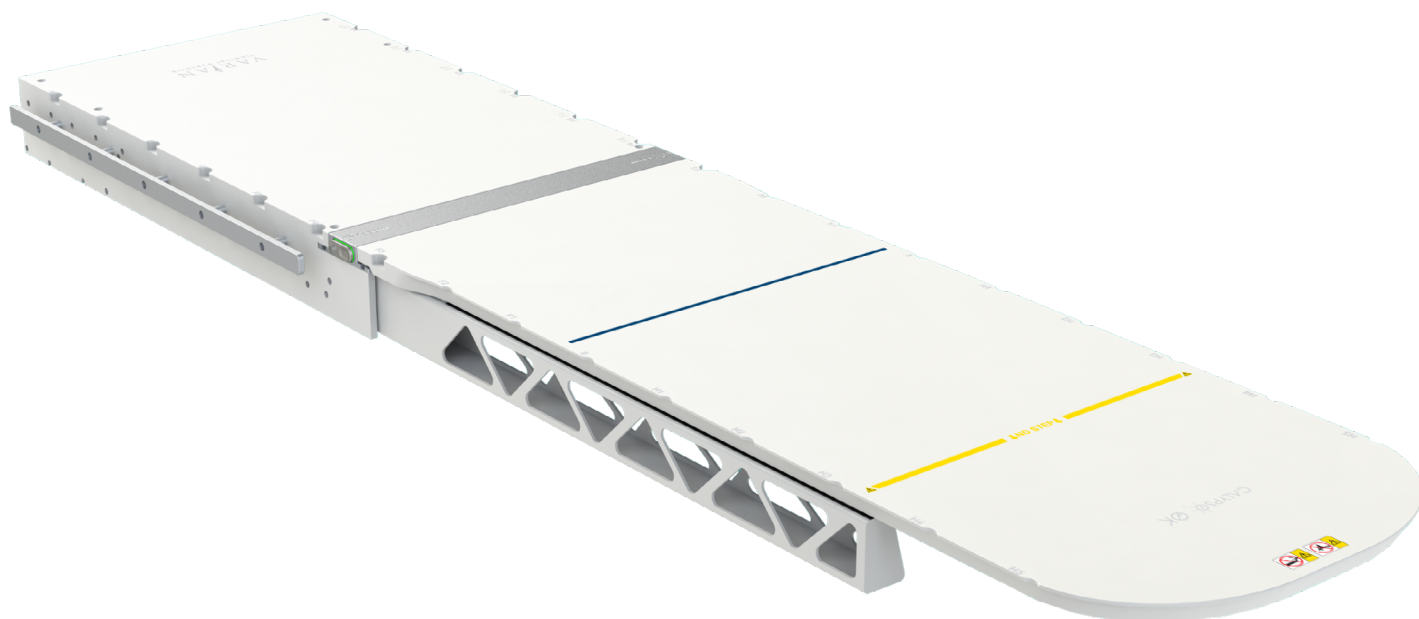

EC REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Proizvelo u SAD-u društvo Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	---	--	---

kVue i OneTouch zaštitni su znakovi društva Qfix.

Exact®, ETR®, Calypso® i Beacon® registrirani su zaštitni znakovi društva Varian Medical Systems.

TrueBeam i EDGE zaštitni su znakovi društva Varian Medical Systems.

Precise® je registrirani zaštitni znak društva Elekta AB.

ZXT i TXT zaštitni su znakovi društva Siemens AG.

Cidex® je registrirani zaštitni znak društva Johnson & Johnson.

Clorox® je registrirani zaštitni znak društva The Clorox Company.

! NAPOMENA ! U ovim se uputama za uporabu pojam „kVue Couch Top“ odnosi na sve ploče stola kVue Couch Top, uključujući kVue Calypso®, kVue EDGE™ i kVue Couch Top.

SADRŽAJ

OPĆE MJERE OPREZA	4
UPOZORENJA.....	4
OZBILJAN ŠTETNI DOGAĐAJI.....	4
OPASNOST OD SUDARA.....	4
OZNAKE I OPISI UPOZORENJA.....	5
NAMJENA.....	7
ZNAČAJKE	8
OPIS.....	8
KOMPATIBILNOST SA SUSTAVOM CALYPSO®	8
NUŽNI PRIBOR	8
SASTAVNI DIJELOVI.....	9
UPUTE ZA UPORABU	12
POSTAVLJANJE.....	12
NAMJEŠTANJE POSTAVKI	13
UKLANJANJE	14
ODRŽAVANJE	15
ČIŠĆENJE SUSTAVA	15
POSTUPAK ČIŠĆENJA I PODMAZIVANJA ZASUNA ONETOUCH LATCH	16
SPECIFIKACIJE.....	17
PLOČA STOLA KVUE EDGE™, KVUE CALYPSO® COUCH TOP SA STANDARDNIM UMETKOM.....	17
RADNI UČINAK.....	18
POPIS DIJELOVA.....	19
KVUE CALYPSO® COUCH TOP.....	19
KVUE EDGE™ COUCH TOP	19

OPĆE MJERE OPREZA

UPOZORENJA

! UPOZORENJE ! NISU DOPUŠTENE IZMJENE OVE OPREME. AKO BILO KOJI DIO OVOG UREĐAJA BUDE IZLOŽEN OPTEREĆENJU U SLUČAJU KATASTROFE, DOIMA SE OŠTEĆENIM ILI NEPRAVILNO RADI, SMJESTA GA PRESTANITE UPOTREBLJAVATI I KONTAKTIRAJTE S DRUŠTVOM QFIX NA BR. TEL. +1 484-720-6054 ILI POŠALJITE PORUKU E-POŠTE NA ADRESU TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! UPOZORENJE ! ONETOUCH JE PRECIZAN MEHANIZAM I NAMIJENJEN JE UPORABI ISKLJUČIVO U KOMBINACIJI S ODOBRENIM UREĐAJIMA QFIX KVUE. NEODOBRENI UREĐAJI KOJI NISU UREĐAJI DRUŠTVA QFIX TE KOJE DRUŠTVO QFIX NIJE POTVRDIO MOŽDA NISU SIGURNI ZA UPORABU TE ĆE SE NJIHOVOM UPORABOM PONIŠTITI JAMSTVO.

OZBILJAN ŠTETNI DOGAĐAJI

Sve štetne događaje (npr. štetne događaje koji dovode do ili mogu dovesti do smrti ili teške ozljede) prijavite tvrtki Qfix i nadležnom tijelu u vašoj zemlji.


OPASNOST OD SUDARA

Pripazite prilikom pomicanja ploče stola kVue Couch Top ili kućišta kako biste spriječili oštećenje opreme ili ozljede pacijenta. Velik broj raznovrsnih pokreta koji se mogu postići uz pomoć postolja ploče stola i uzglavnog terapijskog sklopa mogu dovesti do situacija u kojima se umetak kVue može sudariti s drugim predmetima. Može doći do oštećenja opreme.

OPĆE MJERE OPREZA

OZNAKE I OPISI UPOZORENJA

Popis simbola i njihovih definicija potražite na web-mjestu Qfix.com.

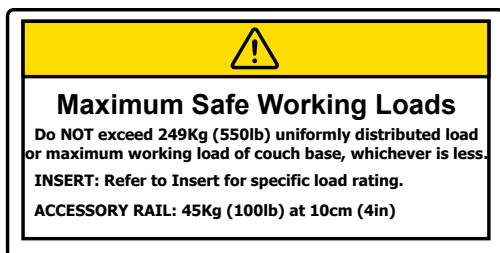


DOPUŠTENOST OPTEREĆENJE

NEMOJTE prekoračiti težinu od 249 kg u pogledu ravnomjerno raspoređenog opterećenja ili maksimalne sigurnosne nosivosti postolja ploče stola, ovisno o tome koja je vrijednost niža.

Dopušteno opterećenje za svaki umetak kVue navedeno je u uputama za umetak kVue.


Dopušteno opterećenje vodilice za pribor iznosi 45 kg na udaljenosti od 10 cm.

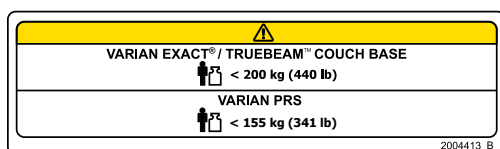

DOPUŠTENOST OPTEREĆENJE

Prilikom uporabe postolja ploče stola uređaja Varian Exact® ili TrueBeam™ NEMOJTE prekoračiti težinu od 200 kg u pogledu ravnomjerno raspoređenog opterećenja ili maksimalne sigurnosne nosivosti postolja ploče stola, ovisno o tome koja je vrijednost niža.

Prilikom uporabe uređaja Varian PRS NEMOJTE prekoračiti težinu od 155 kg u pogledu ravnomjerno raspoređenog opterećenja ili maksimalne sigurnosne nosivosti postolja ploče stola, ovisno o tome koja je vrijednost niža.

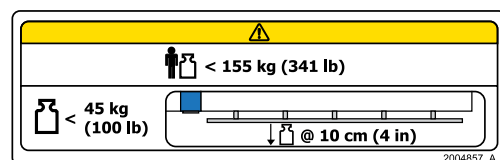

DOPUŠTENOST OPTEREĆENJE (SAMO ZA RT-4551KVE)

NEMOJTE prekoračiti težinu od 155 kg u pogledu ravnomjerno raspoređenog opterećenja ili maksimalne sigurnosne nosivosti postolja ploče stola, ovisno o tome koja je vrijednost niža.

Dopušteno opterećenje za svaki umetak kVue navedeno je u uputama za umetak kVue.

Dopušteno opterećenje vodilice za pribor iznosi 45 kg na udaljenosti od 10 cm.



KOMPATIBILAN SA SUSTAVOM CALYPSO®

Označava dio kompatibilan sa sustavom Calypso® za potrebe uporabe s uređajima kVue Calypso® ili kVue EDGE™.

OPĆE MJERE OPREZA

OZNAKE I OPISI UPOZORENJA




TOČKE PRIGNJEČENJA

Pripazite prilikom pomicanja ploče stola kVue Couch Top kako biste spriječili ozljede pacijenta. Iznimna je pažnja posvećena smanjenju broja točaka prignječenja i drugih opasnosti koje se odnose na ploču stola kVue Couch Top. Uobičajene su točke prignječenja sljedeće:

- između umetka kVue i zasuna One-Touch Latch
- između umetka kVue i potpornih greda
- između ploče stola kVue Couch Top i drugih dijelova opreme u prostoriji za terapiju, uključujući uzglavni terapijski sklop Linac.



ILI

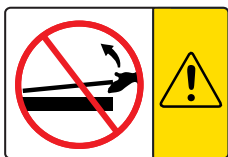

POSTAVLJANJE I UKLANJANJE UMETKA KVUE

! UPOZORENJE ! NIKAD NE PODIŽITE KRAJ UMETKA KVUE.

Spojni se klinovi mogu saviti ili slomiti, zbog čega će ploča stola kVue Couch Top postati neupotrebljiva.

Upute za postavljanje i uklanjanje potražite u priručniku za postavljanje ploče stola kVue Couch Top.

↓ NO STEP ↓


ILI



CRTA „NO STEP“ (ZABRANJENO OSLANJANJE)

Žuta crta na umetku kVue označava završetak potpornih greda. Prostor iza crte izrađen je i ispitan u svrhu podupiranja težine gornjeg dijela torza ili donjeg dijela tijela pacijenta koja ne prelazi vrijednost dopuštenog opterećenja.

Stajanje ili sjedenje na umetku kVue na dijelu iza crte „No Step“ (Zabranjeno oslanjanje) može oštetiti umetka kVue ili dovesti do ozljede.

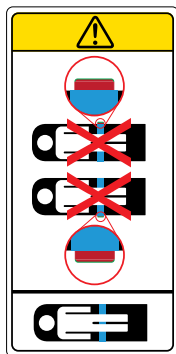

ZASUN ONETOUCH™ LATCH

Pacijenta postavite na ploču stola kVue Couch Top SAMO kad crvena linija tipke zasuna nije vidljiva. Zasun OneTouch Latch ima ugrađen indikator koji omogućava provjeru ispravnosti zaključavanja. Ako je crvena linija tipke zasuna vidljiva, mehanizam za zaključavanje nije aktiviran.

NAMJENA

Ovaj je uređaj namijenjen za imobilizaciju, namještanje i ponovno namještanje pacijenata podvrgnutih radioterapiji.

! NAPOMENA ! Savezni zakon SAD-a ograničava prodaju ovog uređaja po narudžbi liječnika ili od strane samog liječnika

CILJANA SKUPINA PACIJENATA

Pacijenti koji se podvrgavaju radijacijskoj terapiji ili postupcima dijagnostičkog snimanja.

PREDVIĐENI KORISNICI

Predviđeni korisnik proizvoda osoba je kvalificirana u skladu sa zahtjevima regulatornog područja.

ZNAČAJKE

OPIS

Ploča stola kVue Couch Top najsuvremenija je radioterapijska ploča stola optimizirana za najnovija tehnološka postignuća i dizajnirana tako da bude kompatibilna sa sustavom Calypso®. Projektirana je kako bi osigurala precizno i ponovljivo namještanje pacijenata u rasponima manjim od milimetra. kVue Calypso® i kVue EDGE™ inačice su linije proizvoda kVue. Izrađeni su od kompozita naprednih vlakana velike čvrstoće koji uopće ne sadrže metale i nisu provodljivi, što omogućava njihovu uporabu u kombinaciji sa sustavom Calypso®. Oni znatno pridonose svestranosti vaše prostorije za terapiju i omogućuju uporabu većine standardnih indeksiranih uređaja za namještanje.

Ploča stola kVue Couch Top pruža vrhunsku radnu učinkovitost kada se upotrebljava u kombinaciji s metodom kilovoltnog snimanja kao što je CT s konusnim snopom, istodobno smanjujući kožnu dozu za terapijske snopove koji prolaze kroz ploču stola. To u kombinaciji s mogućnošću izmjenjivanja velikog broja umetaka kVue kompatibilnih sa sustavom Calypso® čini kVue Couch Top jednim od najnaprednijih dostupnih rješenja za namještanje pacijenata tijekom IMRT-a i IGRT-a.

KOMPATIBILNOST SA SUSTAVOM CALYPSO®

Sustav Calypso® upotrebljava elektromagnetske signale za otkrivanje položaja implantiranih elektromagnetskih transpondera Beacon® i lokaliziranje ciljnog terapijskog položaja tijekom radioterapije. Vodljivi materijali mogu utjecati na točnost sustava u blizini transpondera Beacon tijekom lokalizacije.


Provedena su iscrpna ispitivanja kako bi se osiguralo da su kVue Calypso®, kVue EDGE™ i sav pribor označen kao kompatibilan sa sustavom Calypso® kompatibilni s pločom stola kVue Couch Top. Prilikom upotrebe sustava Calypso® trebali biste upotrebljavati isključivo pribor kompatibilan sa sustavom Calypso®. Kontaktirajte s društvom Varian kako biste nabavili popis kompatibilnog pribora.

NUŽNI PRIBOR

Umetak kVue (za potrebe uporabe u kombinaciji sa sustavom Calypso® nužan je umetak kompatibilan sa sustavom Calypso®)

ZNAČAJKE

SASTAVNI DIJELOVI

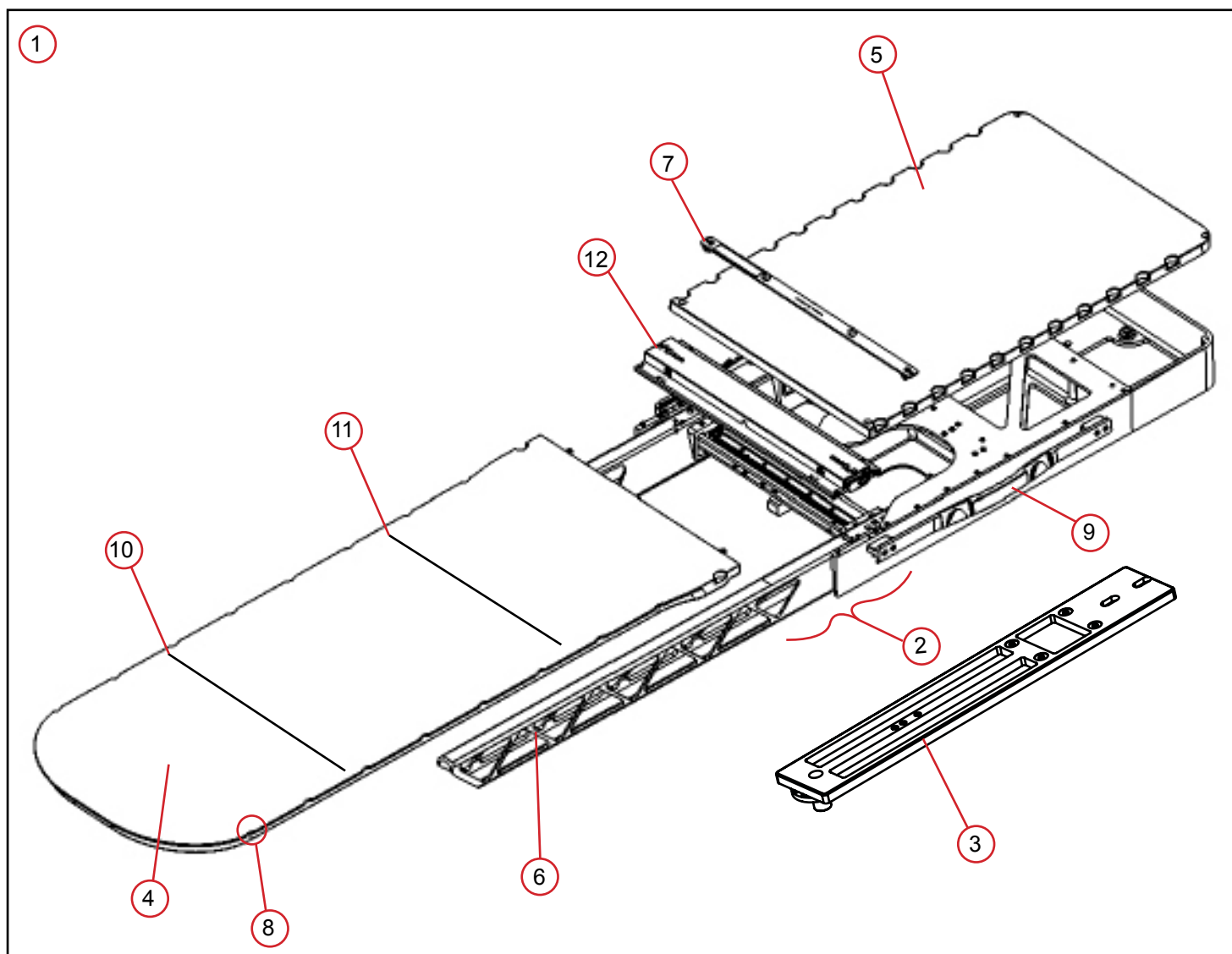

ZNAČAJKE

SASTAVNI DIJELOVI

1. PLOČA STOLA kVUE™ COUCH TOP

kVue Couch Top cjelovit je potporni sustav za pacijente, osim originalnog postolja ploče stola. Sastoji se od okvira podnožja (uključujući i potporne grede), spojne ploče (ako je potrebno) i odgovarajućeg umetka kVue.

2. OKVIR PODNOŽJA

Okvir podnožja dio je ploče stola kVue Couch Top sastavljen od potpornih kamuflažnih greda pokretne vodilice i stražnje ploče. Okvir podnožja također sadrži prihvatne otvore zasuna OneTouch Latch i vodilicu za pribor.

3. SPOJNA PLOČA

Spojna ploča povezuje postolje ploče stola proizvođača linearnog akceleratora i ploču stola kVue Couch Top. Za pričvršćivanje uređaja kVue na postolje ploče stola Varian EDGE™, TrueBeam™ ili Exact® nije potrebna spojna ploča.

4. UMETAK kVUE

Umetak kVue terapijsko je područje površine koja podupire pacijenta. Izrađeno je od kompozitnih materijala niske gustoće te prigušuje fotonski snop od 6 MV za približno 1 % kod AP/PA terapija. Terapijski snop koji prolazi kroz bilo koji uređaj uzrokovat će povećanje kožne doze, što treba uzeti u obzir prilikom planiranja terapije. Za potrebe uporabe u kombinaciji sa sustavom Calypso® nužan je umetak kompatibilan sa sustavom Calypso®.


5. STRAŽNJA PLOČA

Stražnja je ploča površina koja podupire pacijenta smještena povrh postolja ploče stola.

6. POTPORNE KAMUFLAŽNE GREDE POKRETNE VODILICE

Potporne kamuflažne grede pokretne vodilice iznimno su krute kompozitne strukture koje omogućavaju opterećivanje umetka kVue cijelom težinom pacijenta s minimalnim otklonom. Nosač otvorenog profila maksimalno povećava snagu, a smanjuje prigušenje. Potporne grede mogu se pomicati bočno dok se pacijent nalazi ili ne nalazi na ploči stola kVue Couch Top.

Terapijski snop koji prolazi kroz potporne grede uzrokovat će povećanje kožne doze, što treba uzeti u obzir prilikom planiranja terapije. Kad god je moguće, potporne grede trebaju biti postavljene tako da se ne nalaze na putanji terapijskog snopa.

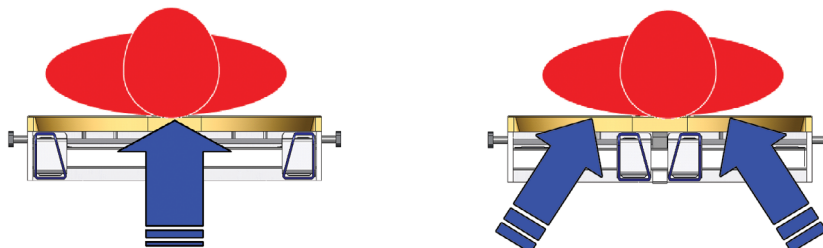

ZNAČAJKE

SASTAVNI DIJELOVI

7. PREČKA ZA ODREĐIVANJE POLOŽAJA

Prečka za određivanje položaja ima dva klina za određivanje položaja (promjera 13 mm, na razmaku od 229 mm) koji pristaju na većinu standardnog industrijskog pribora te omogućavaju točno i opetovano lociranje standardnih uređaja za namještanje na ploči stola kVue Couch Top. Prilikom upotrebe sustava Calypso® upotrebljavajte isključivo pribor kompatibilan sa sustavom Calypso.

8. INDEKSACIJSKI UTORI ZA EXACT®

Indeksacijski utori kompatibilni s uređajem Varian Exact® postavljeni su svakih 140 mm duž ploče stola kVue Couch Top, a omogućavaju točno pozicioniranje prečke za određivanje položaja i ostalog pribora. Brojčana shema utora poklapa s indeksacijom uređaja Varian Exact® te tako omogućava izravan prijenos simuliranih podataka o pozicioniranju na ploču stola kVue Couch Top. (0 označava sjecište na koordinatnoj osi. H1, H2 itd. kreću se u smjeru prema uzglavlju ploče stola kVue Couch Top, a F1, F2 itd. u smjeru prema podnožju.)

9. VODILICA ZA PRIBOR

Vodilica za pribor omogućava spajanje stremena, stalaka za infuziju i drugih standardnih uređaja pomoću uobičajenih stezaljki.

10. CRTA „NO STEP“ (ZABRANJENO OSLANJANJE)

Većina umetaka kVue označena su žutom crtom koja označava završetak potpornih greda. Standardni umetak izrađen je u svrhu podupiranja isključivo težine gornjeg dijela torza ili donjeg dijela tijela pacijenta koja ne prelazi vrijednost dopuštenog opterećenja na dijelu iza crte „No Step“ (Zabranjeno oslanjanje). Stajanje ili sjedenje na umetku kVue na dijelu iza crte „No Step“ (Zabranjeno oslanjanje) može oštetiti umetka kVue ili dovesti do ozljede.


11. DONJA CRTA IZOCENTRA (samo za uređaje kVue EDGE i kVue Calypso Couch Top)

Umetak kVue Calypso® označen je plavom crtom koja predstavlja najudaljeniji proksimalni položaj za izocentar prilikom uporabe sustava Calypso®. Kontaktirajte s predstavnikom društva Varian Medical Systems ili proučite Korisnički priručnik sustava Calypso® kako biste saznali detaljnije informacije o važnosti ove crte.


12. ZASUN ONETOUCH LATCH

Zasun One Touch Latch omogućuje brzo pričvršćivanje i uklanjanje umetaka kVue bez upotrebe alata. Zasun omogućava ponovljivo pozicioniranje umetka kVue uz točnost u rasponu manjem od milimetra te istovremeno daje vizualni znak kao potvrdu ispravnosti zaključavanja. U otključanom je položaju vidljiva crvena linija oko zelene tipke zasuna.

Zaključan položaj

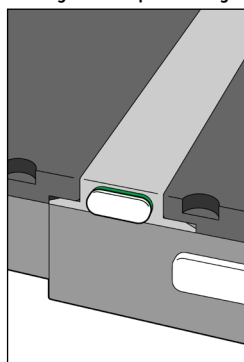

Otključan položaj

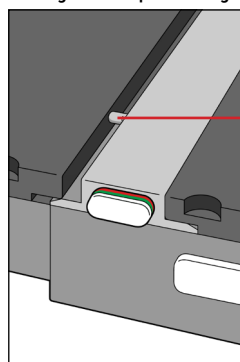

Spojni klin

UPUTE ZA UPORABU

POSTAVLJANJE

POSTAVLJANJE PLOČE STOLA kVue COUCH TOP


kVue Couch Top osmišljen je tako da može montirati na sve vodeće sustave za radioterapiju. Brzim postavljanjem skraćuje se vrijeme tijekom kojeg linearni akcelerator nije u funkciji za vrijeme postavljanja. Konkretno informacije o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje ploče stola kVue Couch Top.

! NAPOMENA ! Kao što je navedeno u priručniku za postavljanje ploče stola kVue Couch Top, konačna visina površine kVue može se razlikovati od one izvornog sustava. Proučite upute originalnog sustava kako biste resetirali sustav na nultu (početnu) vrijednost prije prve uporabe.

POSTAVLJANJE UMETKA kVue

1. Umetak kVue postavite povrh potpornih greda i poravnajte dva spojna klina s prihvatnim otvorima na zasunu OneTouch Latch.
2. Umetak kVue počnite umetati s gornjeg kraja uređaja kVue te ga umetnite izravno u prihvatne otvore.

Začut ćete klik kad umetak kVue čvrsto sjedne na mjesto. Ako je umetak pravilno postavljen, vidljiva će biti SAMO površina zelene tipke.

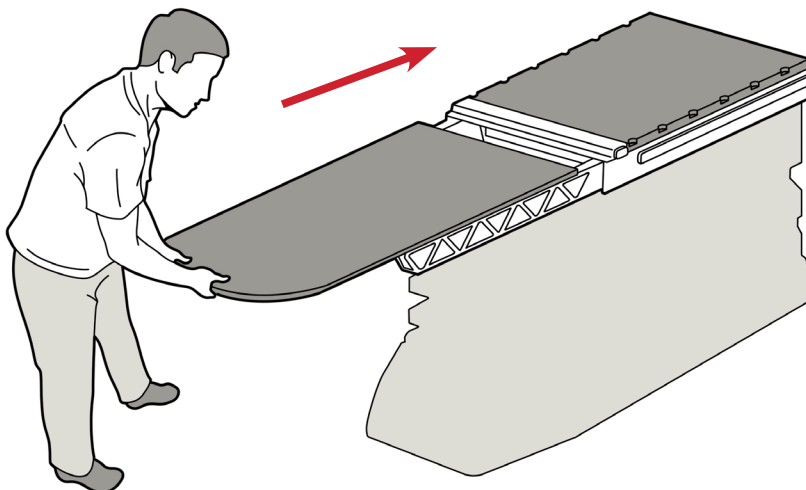


kVue sa standardnim umetkom

UPUTE ZA UPORABU

NAMJEŠTANJE POSTAVKI

POSTAVLJANJE PREČKE ZA ODREĐIVANJE POLOŽAJA

Prečka za određivanje položaja ima dva klina za određivanje položaja koji pristaju na većinu standardnog pribora za namještanje. Prečku za određivanje položaja spojite tako da umetnete odgovarajući kraj prečke u odgovarajući indeksacijski utor kompatibilan s uređajem Varian Exact® tako da sjedne na mjesto. Prilikom upotrebe sustava Calypso® upotrebljavajte isključivo pribor kompatibilan sa sustavom Calypso.

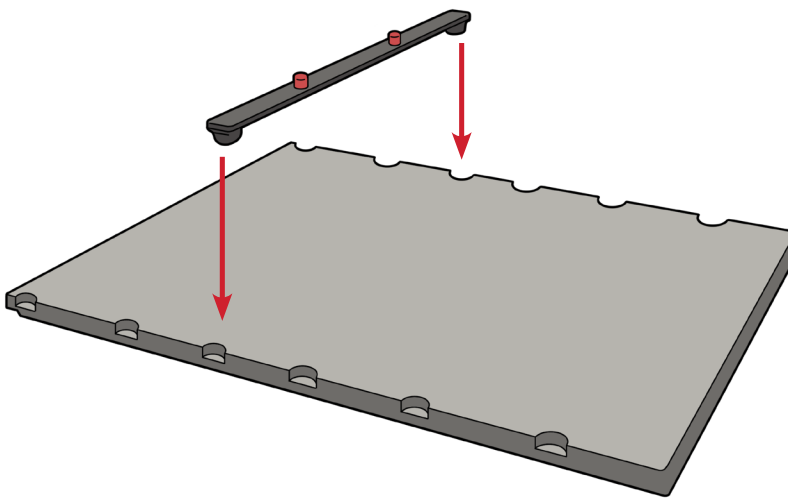

UPUTE ZA UPORABU

UKLANJANJE

UKLANJANJE PREČKE ZA ODREĐIVANJE POLOŽAJA





Povucite bilo koji dio prečke za određivanje položaja.

UKLANJANJE UMETKA KVUE

! UPOZORENJE ! NIKAD NE PODIŽITE KRAJ UMETKA KVUE ! IAKO JE MEHANIZAM VRLO IZDRŽLJIV, SPOJNI KLINOVI SE MOGU SAVITI ILI SLOMITI, ZBOG ČEGA ĆE KVUE POSTATI NEUPOTREBLJIV.

1. Zakrenite ručicu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Povlačite zakrenutu ručicu s jedne strane uređaja kVue sve dok se umetak kVue ne otpusti.
3. Odvojite umetak kVue s uređaja kVue.

! NAPOMENA ! Slike prikazane u nastavku odnose se na standardnu ploču stola kVue Couch Top. Postupak uklanjanja umetka kVue isti je za sve inačice uređaja kVue.

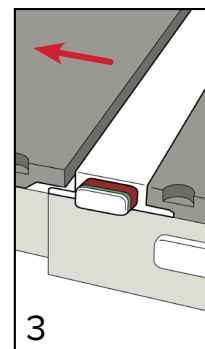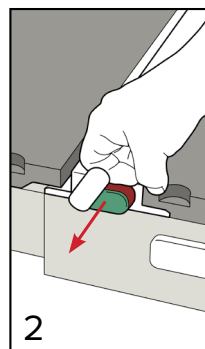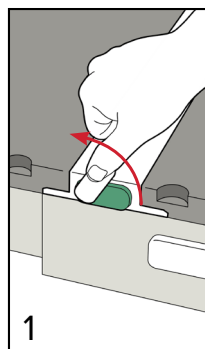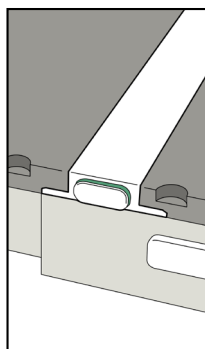

ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE SUSTAVA

Uređaj se može očistiti blagom, neabrazivnom otopinom za čišćenje ili dezinfekciju. Nemojte rasprskivati tekućine po površini ploče stola kVue Couch Top ili ju njima polijevati jer mogu oteći u OneTouch Latch ili mehanizme unutar postolja ploče stola. Površinu očistite tako da nanesite otopinu na čistu krpu i obrišite ju.

Sljedeća su sredstva za čišćenje podvrgnuta ispitivanju te je utvrđeno da se mogu koristiti za čišćenje površine ploče stola kVue Couch Top. Za dezinfekciju površine ploče stola kVue Couch Top proučite posebne upute proizvođača sredstva za čišćenje.

- Voda
- 10 %-tna otopina izbjeljivača Clorox®
- Izopropilni alkohol
- 2,4 %-tna otopina aktiviranog dialdehida Cidex®
- Sapun i voda

NEMOJTE rasprskivati tekućine izravno po površini ploče stola kVue Couch Top ili dopustiti njihovo otjecanje u okvir podnožja.

NEMOJTE stavljati oštre predmete na ploču stola kVue Couch Top.

Ako tjelesne tekućine uđu u okvir podnožja, uklonite vijke koji povezuju stražnju ploču i temeljito očistite područje. Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje na bazi vode na linearnoj nosivoj vodilici. Linearnu nosivu vodilicu nakon čišćenja podmažite fluoropolimernim (PTFE) suhim mazivim filmom.

Zasun One Touch Latch mora se povremeno podmazivati; proučite pripadajuće upute o načinu pravilnog podmazivanja i čišćenja zasuna One Touch Latch.

Rastavljanjem zasuna One Touch Latch poništavate jamstvo za ploču stola kVue Couch Top.

Povremeno provjerite čvrstoću svih spojeva.

ODRŽAVANJE


POSTUPAK ČIŠĆENJA I PODMAZIVANJA ZASUNA ONETOUCH LATCH

Preporučujemo da ovaj postupak izvodite jednom mjesečno.


Popis materijala: fluoropolimerni (PTFE) suhi mazivi film, pamučni štapići za uho i suhe maramice ili papirnati ručnici

! NAPOMENA ! SLIKE PRIKAZANE U NASTAVKU ODOSE SE NA STANDARDNU PLOČU STOLA KVUE COUCH TOP. POSTUPAK ODRŽAVANJA ISTI JE ZA SVAKU PLOČU STOLA KVUE COUCH TOP.


1. Uklonite umetak kVue. (Sl. 1.)
2. Obrišite vlakna i prljavštinu s vanjske strane zasuna. (Sl. 2.)
3. Suhim pamučnim štapićem za uho očistite unutrašnji dio prihvatnih otvora. (Sl. 3.)
4. Nanesite sredstvo za podmazivanje u prihvatne otvore. (Sl. 4.)
5. Suhim pamučnim štapićem za uho očistite vlakna i prljavštinu. (Sl. 3.)
6. Ponovno nanesite sredstvo za podmazivanje u prihvatne otvore. (Sl. 4.)
7. Nanesite sredstvo za podmazivanje u prostor između vrha tipke i kućišta zasuna kako biste podmazali unutarnje dijelove. (Sl. 5.)
8. Ponovno umetnite umetak kVue i izbacite ga povlačenjem zasuna sa suprotne strane. Ponovite 7. korak podmazivanja.
9. Umetnite i izvadite umetak kVue 3 do 4 puta i ponovite postupak podmazivanja ako umetak ne možete izbaciti bez teškoća.
10. Obrišite višak sredstva za podmazivanje s vanjske strane zasuna One Touch Latch.

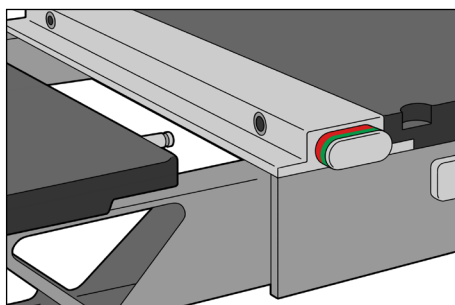


Sl. 1

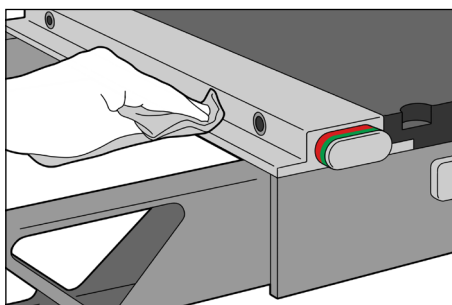


Sl. 2

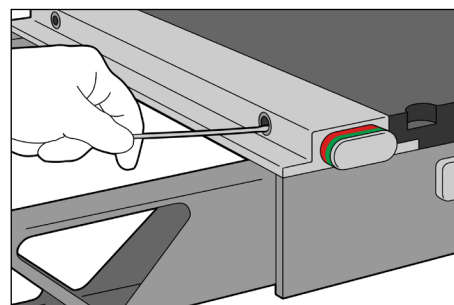

Sl. 3

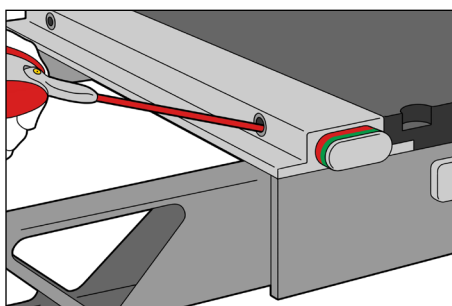


Sl. 4

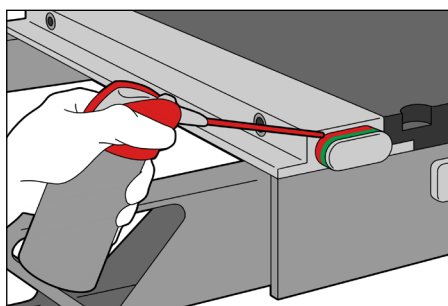

Sl. 5

SPECIFIKACIJE

PLOČA STOLA KVUE EDGE™, KVUE CALYPSO® COUCH TOP SA STANDARDNIM UMETKOM

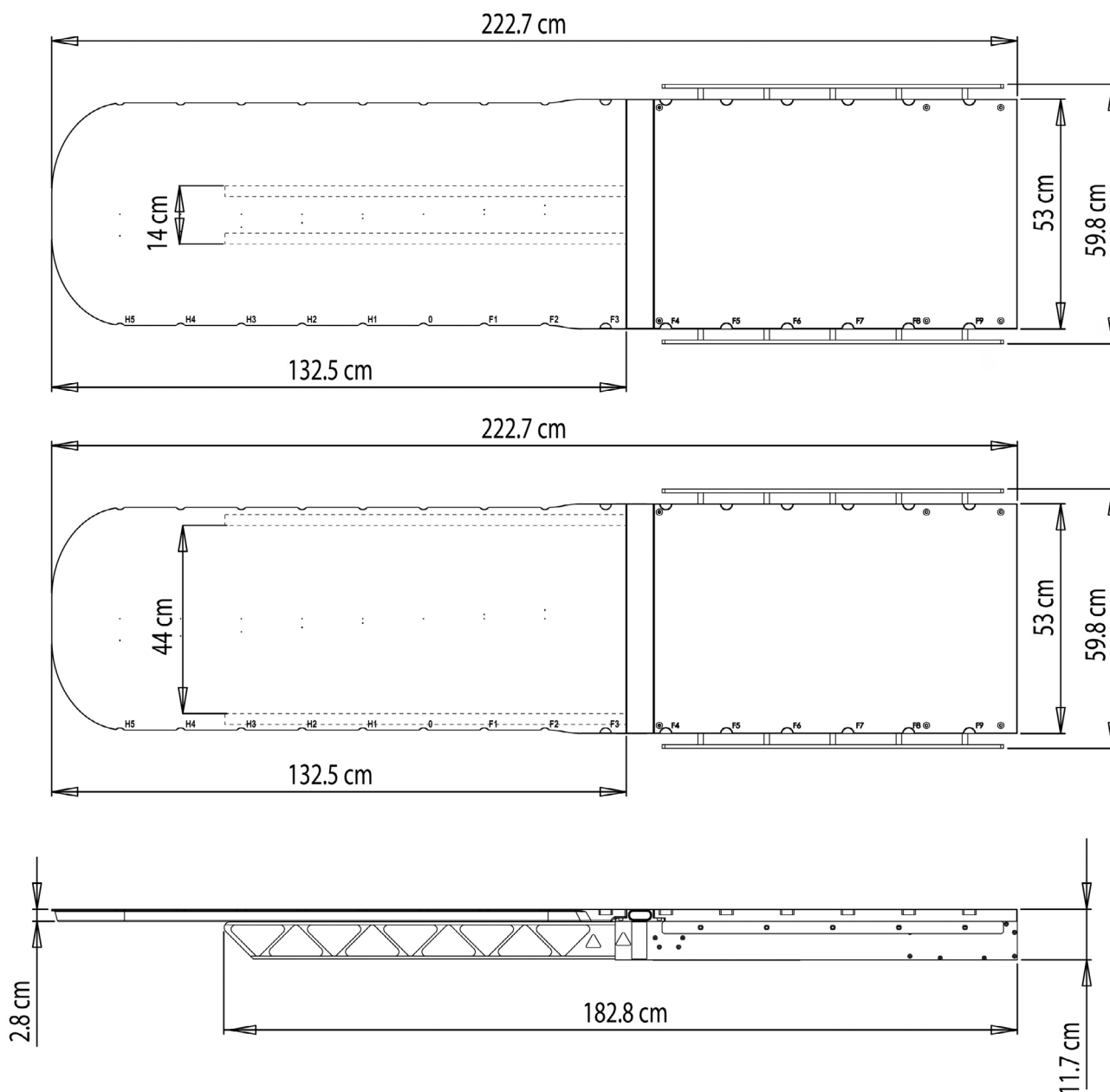

! NAPOMENA ! Specifikacije pojedinačnih umetaka kVue potražite u pripadajućim uputama za uporabu pojedinog umetka kVue.

SPECIFIKACIJE

RADNI UČINAK

OTKLON

Ploča stola kVue Couch Top zadovoljava specifikacijske uvjete u pogledu otklona norme IEC 60976 [2007.], dijela 16.5.2.2. Visina je uvučene ploče stola kVue Couch Top pod opterećenjem od 30 kg raspoređenog na 1 m u okviru 5 mm visine produžene ploče stola kVue Couch Top pod opterećenjem od 135 kg raspoređenog na 2 m duljine uređaja kVue.

DOPUŠTENO OPTEREĆENJE I KAPACITET


Ploča stola kVue Couch Top zadovoljava uvjete u pogledu dopuštenog opterećenja prema normi IEC 60601-2-8, članku 28., a sigurnosna nosivost navedena je u pripadajućim uputama za umetak kVue.

Kapacitet ploče stola kVue Couch Top nikad ne smije premašivati od onaj naveden u specifikacijama proizvođača originalnog postolja ploče stola.

Neki umetci kVue imaju dopušteno opterećenje manje od 249 kg. Pripadajuća dopuštena opterećenja potražite u uputama za uporabu ili oznaci proizvoda umetka kVue.


POPIS DIJELOVA

KVUE CALYPSO® COUCH TOP

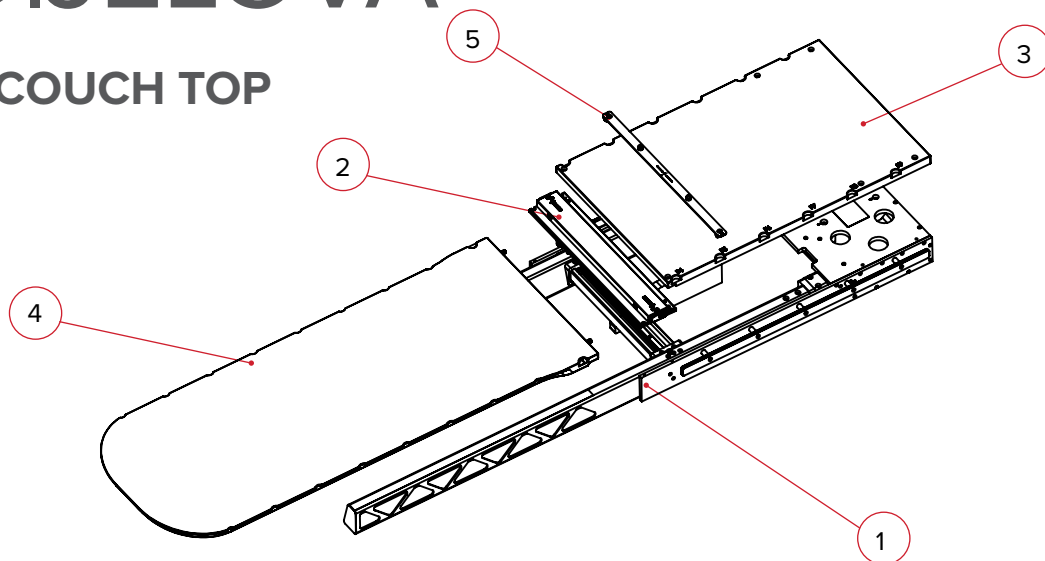

1. RT-4551KVCL-V – okvir podnožja kVue Calypso® Baseframe s indeksiranjem Varian Exact® Indexing
2. RT-4551KV-OTM – zasunski sklop kVue OneTouch™ Latch Assembly
3. RT-4551KV0CL-V – stražnja ploča kVue Calypso® Back Panel s indeksiranjem Varian Exact® Indexing
4. RT-4551KV11 – umetak kVue Calypso® Insert, kompatibilan sa sustavom Varian
5. RT-4551BAR-02 – prečka za određivanje položaja kompatibilna sa sustavom Calypso® Compatible Locating Bar, indeksiranje Varian Exact® Indexing
6. RT-4551BAR-02 -01 – hardverski komplet Varian Hardware Kit (nije prikazan na dijagramu)
7. RT-4551KVPP – komplet s poklopcem za točku prignječenja kVue Pinch Point Cover Kit (nije prikazan na dijagramu)
8. 8002064 – komplet sa zamjenskom gredom kVue Calypso® Replacement Beam Set

KVUE EDGE™ COUCH TOP

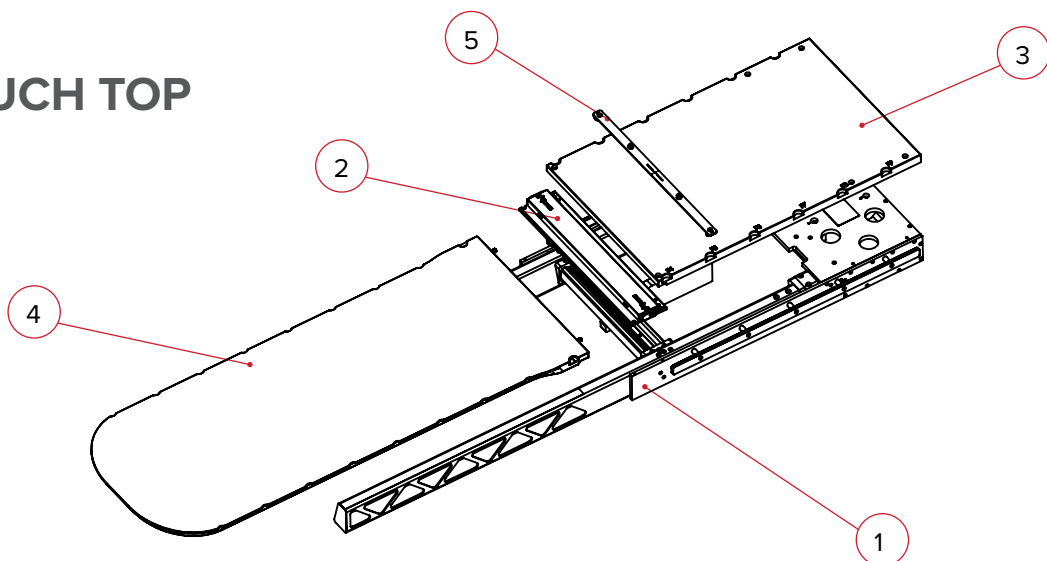

1. RT-4551KVE – okvir podnožja kVue EDGE™
2. RT-4551KV-OTM – zasunski sklop kVue OneTouch™ Latch Assembly
3. RT-4551KV0-E – stražnja ploča kVue EDGE™
4. RT-4551KV12 – umetak kVue EDGE™ Insert
5. RT-4551BAR-02 – prečka za određivanje položaja kompatibilna sa sustavom Calypso® Compatible Locating Bar, indeksiranje Varian Exact® Indexing
6. RT-4551BAR-02 -01 – hardverski komplet Varian Hardware Kit (nije prikazan na dijagramu)
7. RT-4551KVPP – komplet s poklopcem za točku prignječenja kVue Pinch Point Cover Kit (nije prikazan na dijagramu)
8. RT-4551KV-PRS01 – uređaj za poravnanje kVue Alignment Jig, Varian PRS
9. 8002110 – komplet sa zamjenskom gredom kVue EDGE Replacement Beam Set



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com

2004858_HR_D
2020-06