



positioning
patients for life.®

ADDENDUM

RT-4600-02

Encompass™ Standalone Device

Kompatibel mit dem HexaPOD™ evo RT System




ANWEISUNGEN

MONTAGE



1. Installieren Sie die Direkt-Verstelladapter auf dem Encompass Device. Beachten Sie dabei das Montage- und Benutzerhandbuch für die Direkt-Verstelladapter (M034).
2. Installieren Sie die Encompass-Vorrichtung auf dem Elekta iBEAM® evo Couchtop, und stellen Sie sicher, dass die Indexposition B durch die Aussparungen auf beiden Seiten der Vorrichtung zugänglich ist.

! HINWEIS ! Die Encompass-Vorrichtung ist nur mit dem Elekta HexaPOD™ Reference Frame in Position B kompatibel.

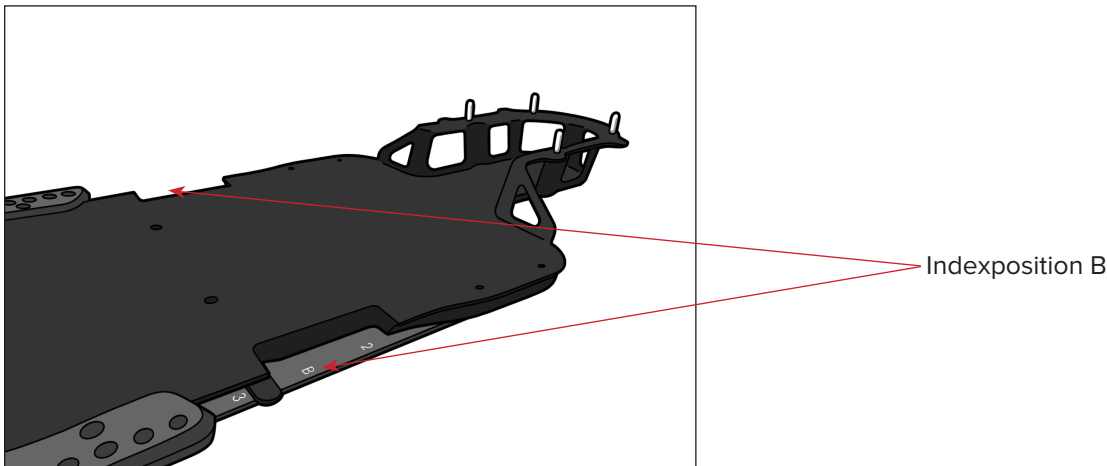

3. Installieren Sie den Elekta HexaPOD Reference Frame gemäß den Anweisungen des Herstellers in Indexposition B auf dem Elekta iBEAM® evo Couchtop.

! HINWEIS ! Stellen Sie sicher, dass keine Interferenz zwischen dem Bezugsrahmen und der Encompass-Vorrichtung auftritt.

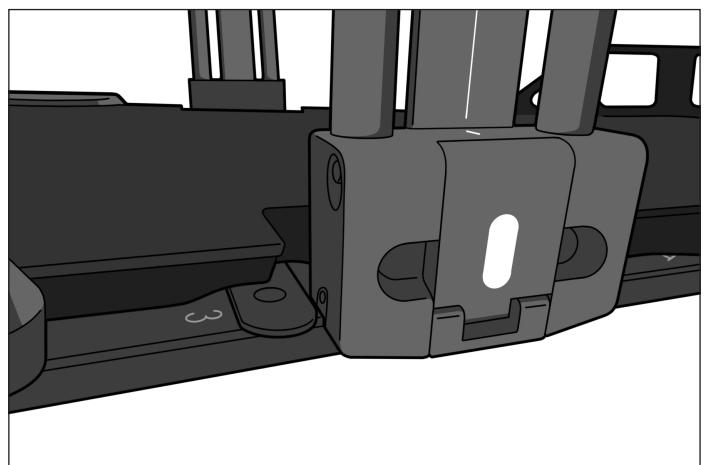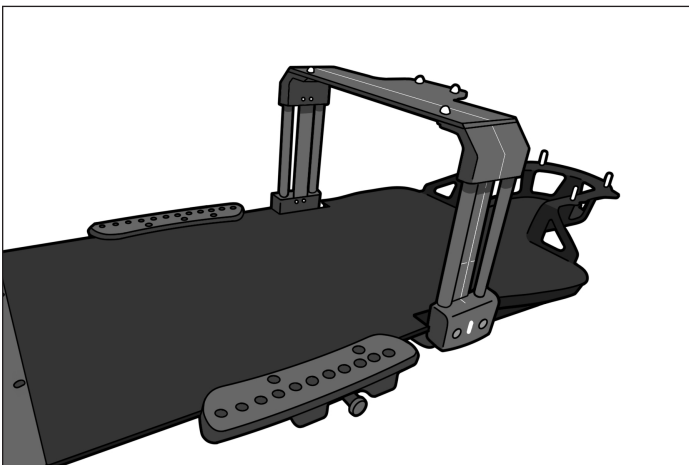

4. Die Bedienungsanleitung sowie die Produktmerkmale, technische Daten, Warnungen, Vorsichtshinweise und andere allgemeine Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung des Encompass™ SRS Immobilization System finden Sie im Produktführer und dem Benutzerhandbuch für Encompass Devices (M158).


TECHNISCHE DATEN

ENCOMPASS™ STANDALONE DEVICE RT-4600-02

Länge: 1358 mm

Gewichtsbegrenzung: 249 kg (550 lb) gleichmäßig verteilte Last bei maximaler freitragender Position, wie auf der Vorrichtung angegeben.

Handhabungsgewicht: 5 kg (11 lb)

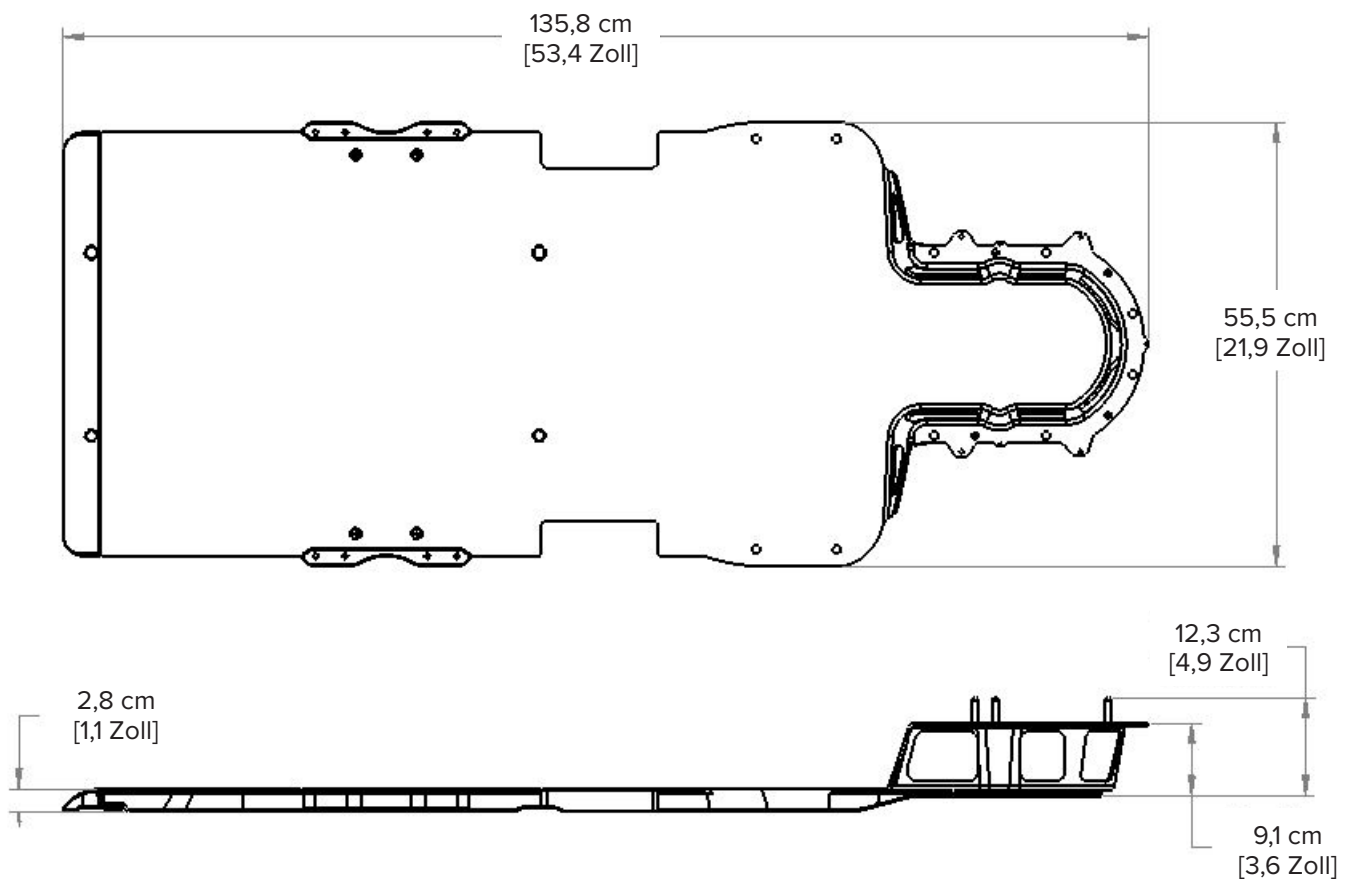

Encompass ist eine Handelsmarke von Qfix.
HexaPOD ist eine Handelsmarke von Elekta.
iBEAM® ist eine eingetragene Marke von Elekta.



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2007719_DE_A
2023-04