

APPENDICE

RT-4600-02

Dispositivo Encompass[™] Standalone

Compatibile con il sistema HexaPOD[™] evo RT




ISTRUZIONI

INSTALLAZIONE

1. Installare gli adattatori per allineamento diretto sul dispositivo Encompass facendo riferimento al Manuale di installazione e d'uso degli adattatori per allineamento diretto (M034).
2. Installare il dispositivo Encompass sul lettino Elekta iBEAM® evo assicurandosi che la posizione di allineamento B sia accessibile attraverso le fessure su ciascun lato del dispositivo.



! NOTA ! Il dispositivo Encompass è compatibile solo con il telaio di riferimento Elekta HexaPOD™ in posizione B.

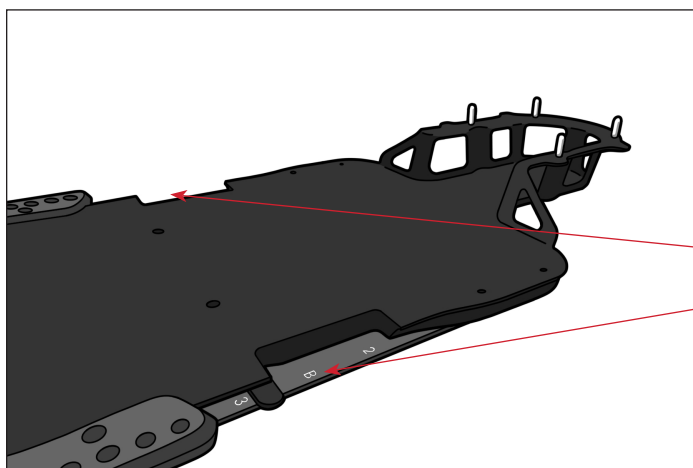

Posizione di allineamento B

3. Installare il telaio di riferimento Elekta HexaPOD nella posizione di allineamento B sul lettino Elekta iBEAM® evo facendo riferimento alle istruzioni del produttore.

! NOTA ! Assicurarsi che non vi siano interferenze tra il telaio di riferimento e il dispositivo Encompass.

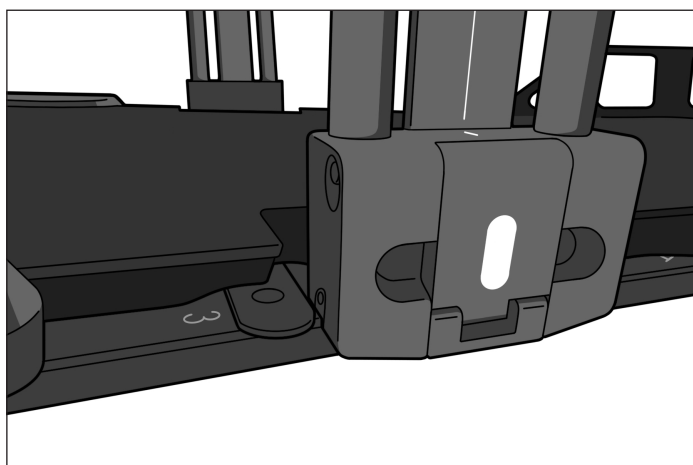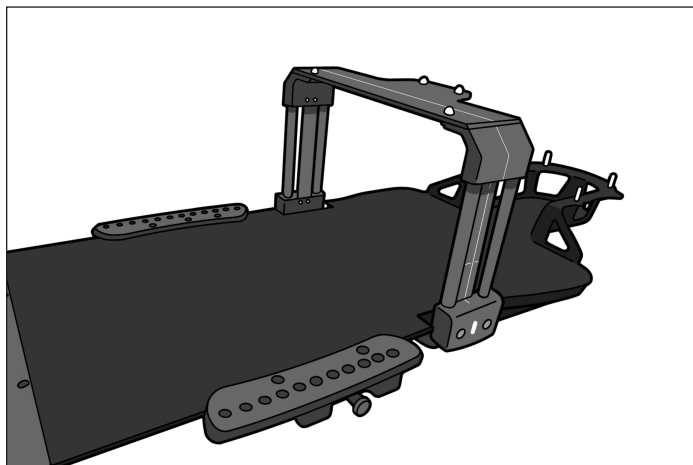

4. Fare riferimento alla Guida del prodotto e al Manuale d'uso dei dispositivi Encompass (M158) per le istruzioni operative, le caratteristiche del prodotto, le specifiche, le avvertenze, le attenzioni e altre precauzioni generali relative all'uso del sistema di immobilizzazione Encompass™ SRS.


SPECIFICHE

DISPOSITIVO ENCOMPASS™ STANDALONE RT-4600-02

Lunghezza: 1358 mm

Limite di carico: 249 kg (550 libbre) di carico distribuito uniformemente alla posizione massima di estensione a sbalzo indicata sul dispositivo.

Peso di movimentazione: 5 kg (11 libbre)

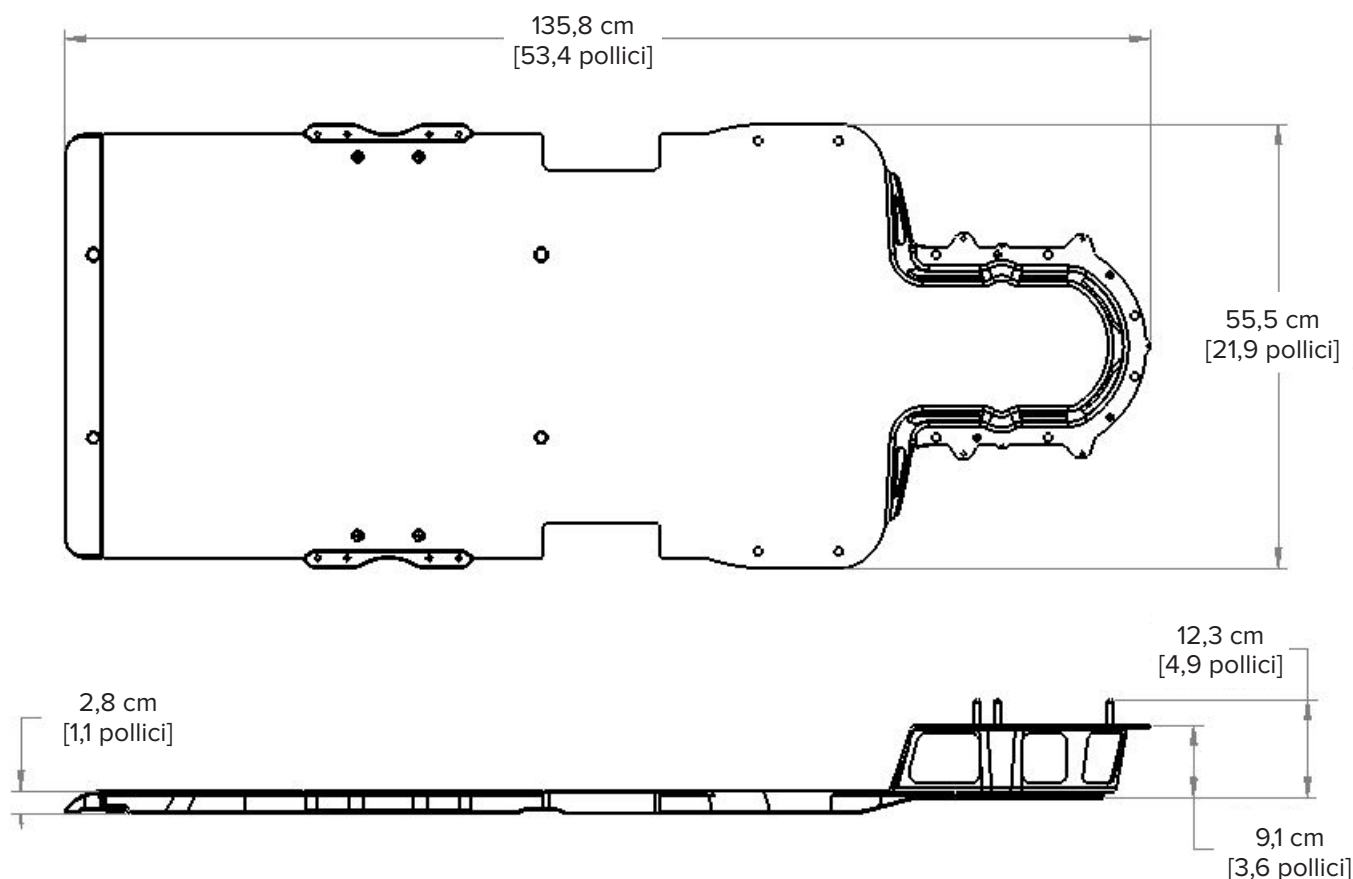

Encompass è un marchio di Qfix.
HexaPOD è un marchio di Eleкта.
iBEAM® è un marchio registrato di Eleкта.



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2007719_IT_A
2023-04