



positioning
patients for life.®

ADDENDUM

RT-4600-02

Encompass™ standalone-hulpmiddel

Compatibel met het HexaPOD™ evo RT System




INSTRUCTIES

INSTALLATIE



1. Installeer de Direct Indexing Adapters op het Encompass-hulpmiddel. Raadpleeg hiervoor de Installatie- en gebruiksaanwijzing voor de Direct Indexing Adapters (M034).
2. Installeer het Encompass-hulpmiddel op het Elekta iBEAM® evo-tafelblad en zorg ervoor dat indexpositie B toegankelijk is via de uitsparingen aan beide zijden van het hulpmiddel.

! OPMERKING ! Het Encompass-hulpmiddel is alleen compatibel met het Elekta HexaPOD™-referentiekader in positie B.

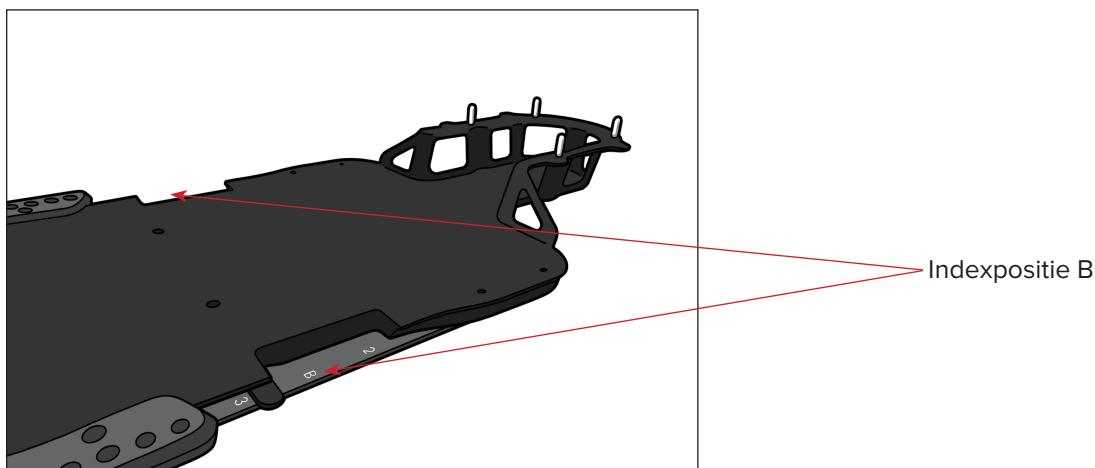

3. Installeer het Elekta HexaPOD-referentiefraam in indexpositie B op het Elekta iBEAM® evo-tafelblad volgens de instructies van de fabrikant.

! OPMERKING ! Zorg ervoor dat er geen sprake is van interferentie tussen het referentiefraam en het Encompass-hulpmiddel.

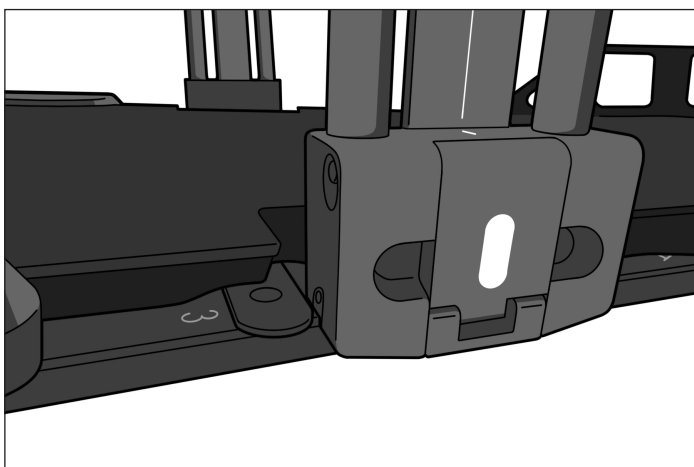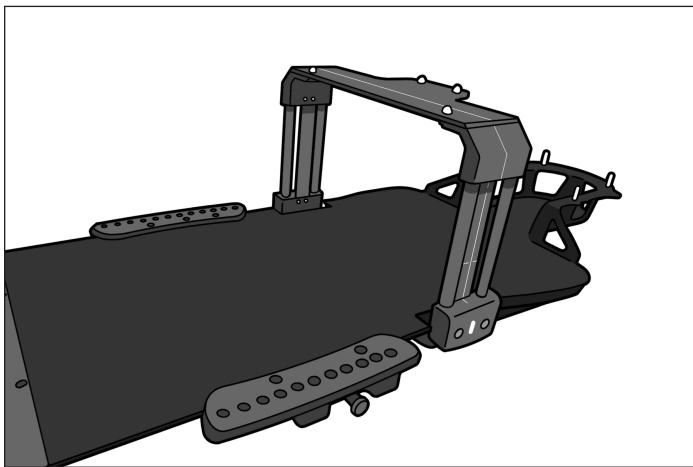

4. Raadpleeg de producthandleiding en gebruiksaanwijzing voor Encompass-hulpmiddelen (M158) voorgebruiksaanwijzing, productkenmerken, specificaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en andere algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van het Encompass™-SRS-immobilisatiesysteem.


SPECIFICATIES

ENCOMPASS™ STANDALONE-HULPMIDDEL RT-4600-02

Lengte: 1358 mm

Gewichtslimiet: 249 kg (550 lb.) ongelijkmatig verdeelde lading bij de maximale kantelhendelpositie die op het hulpmiddel is aangegeven.

Gewicht: 5 kg (11 lb.)

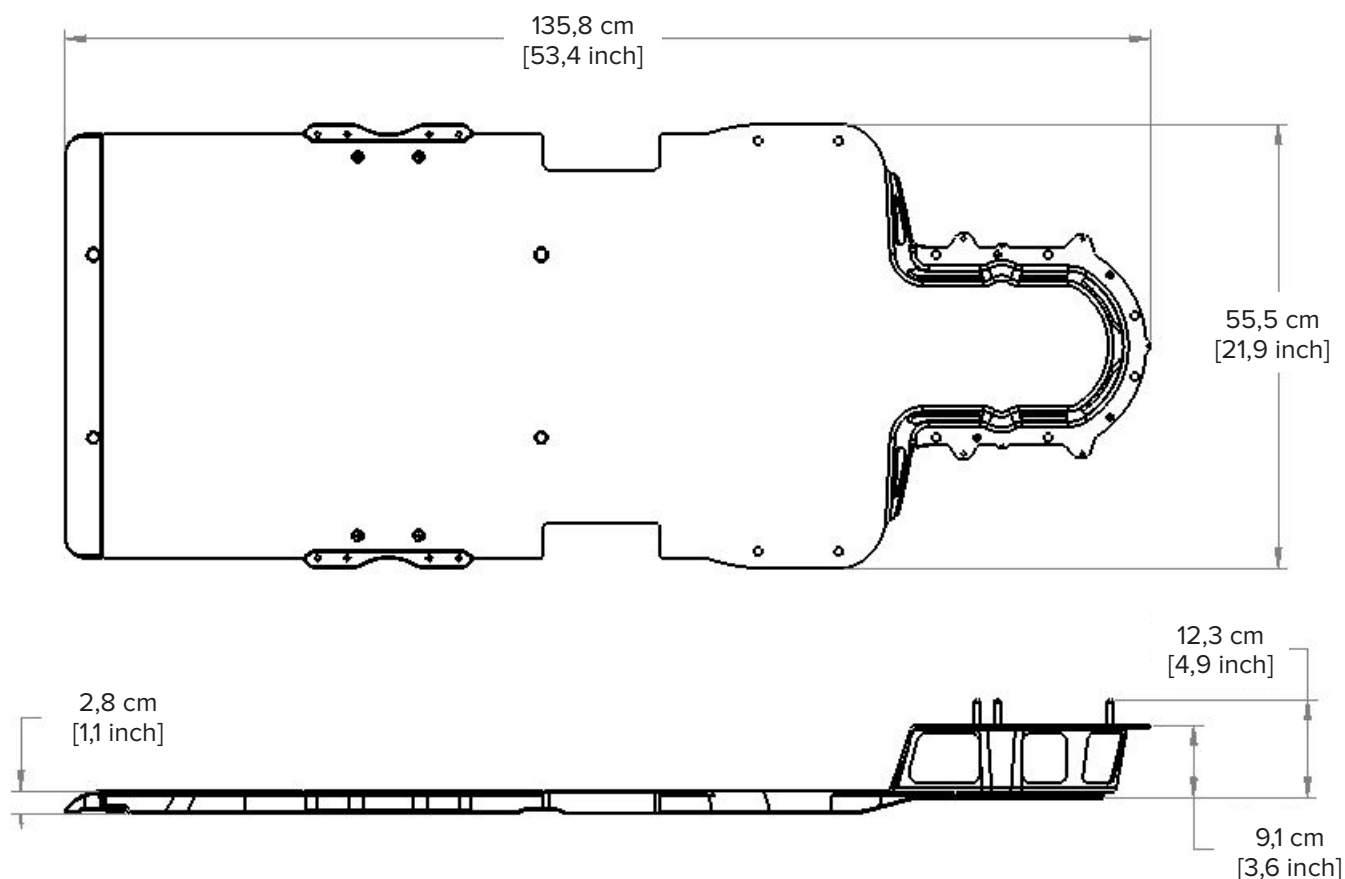

Encompass is een handelsmerk van Qfix.

HexaPOD is een handelsmerk van Elekta.

iBEAM® is een gedeponeerd handelsmerk van Elekta.



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2007719_NL_A
2023-04