

TILLÄGG

RT-4600-02

Separat Encompass[™]-anordning

Kompatibel med HexaPOD[™] evo RT-system




ANVISNINGAR

MONTERING



1. Installera direkta indexeringsadapttrar på Encompass-enheten enligt installations- och användarhandboken för direkta indexeringsadapttrar (M034).
2. Installera Encompass-enheten på Elekta iBEAM® evo/bordet och se till att indexeringsposition B är åtkomlig genom utskärningarna på vardera sida av enheten.

! OBS ! Encompass-enheten är endast kompatibel med Elekta HexaPOD™-referensramen i position B.

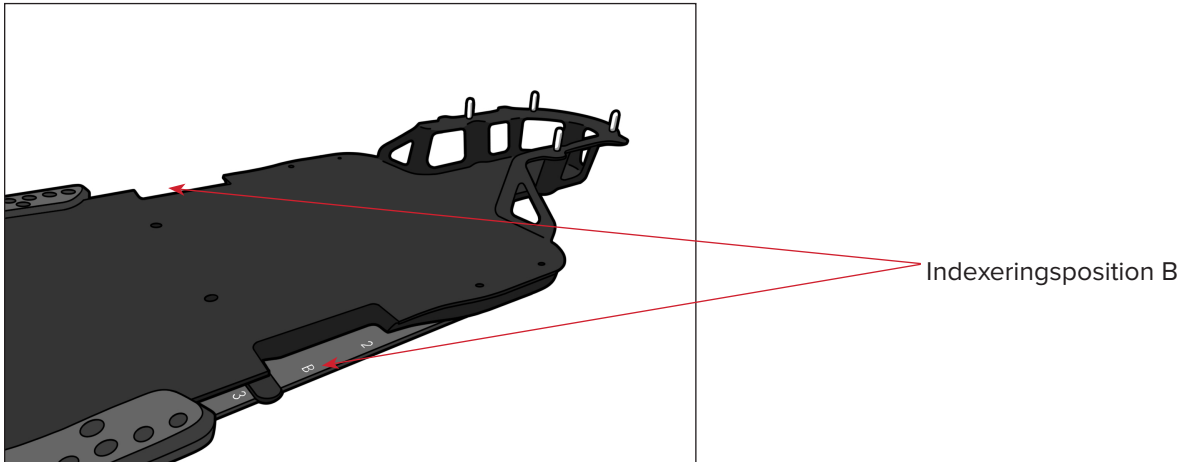

3. Installera Elekta HexaPOD-referensramen i indexeringsposition B på Elekta iBEAM® evo-bordet enligt tillverkarens instruktioner.

! OBS ! Se till att det inte uppstår några störningar mellan referensramen och Encompass-enheten.

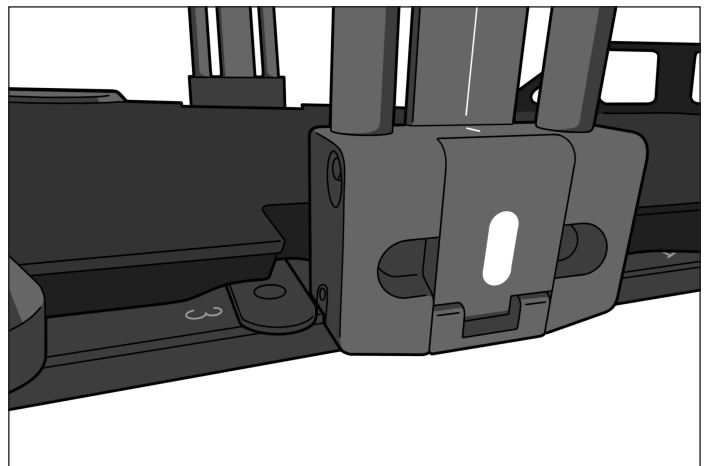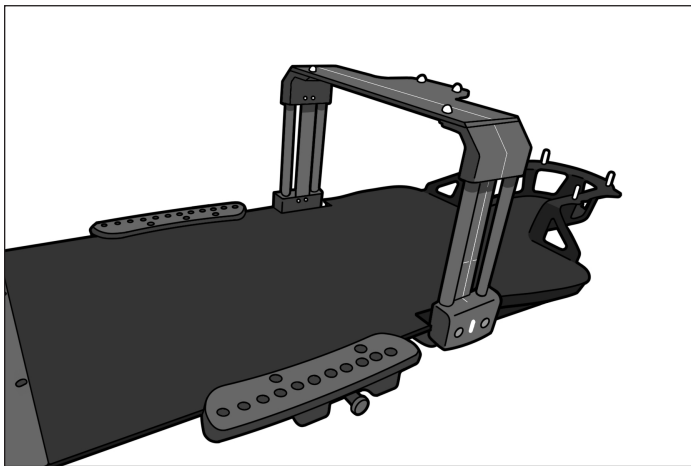

4. Hänvisa till produktguiden och användarhandboken för Encompass-enheter (M158) för anvisningar, produktfunktioner, specifikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och andra allmänna försiktighetsåtgärder i samband med användningen av Encompass™ immobiliseringssystem för stereotaktisk radiokirurgi.


SPECIFIKATIONER

SEPARAT ENCOMPASS™-ANORDNING RT-4600-02

Längd: 1358 mm

Maxvikt: En jämnt fördelad belastning på 249 kg (550 lb) vid enhetens mest utskjutande del som anges på enheten.

Vikt: 5 kg (11 lb)

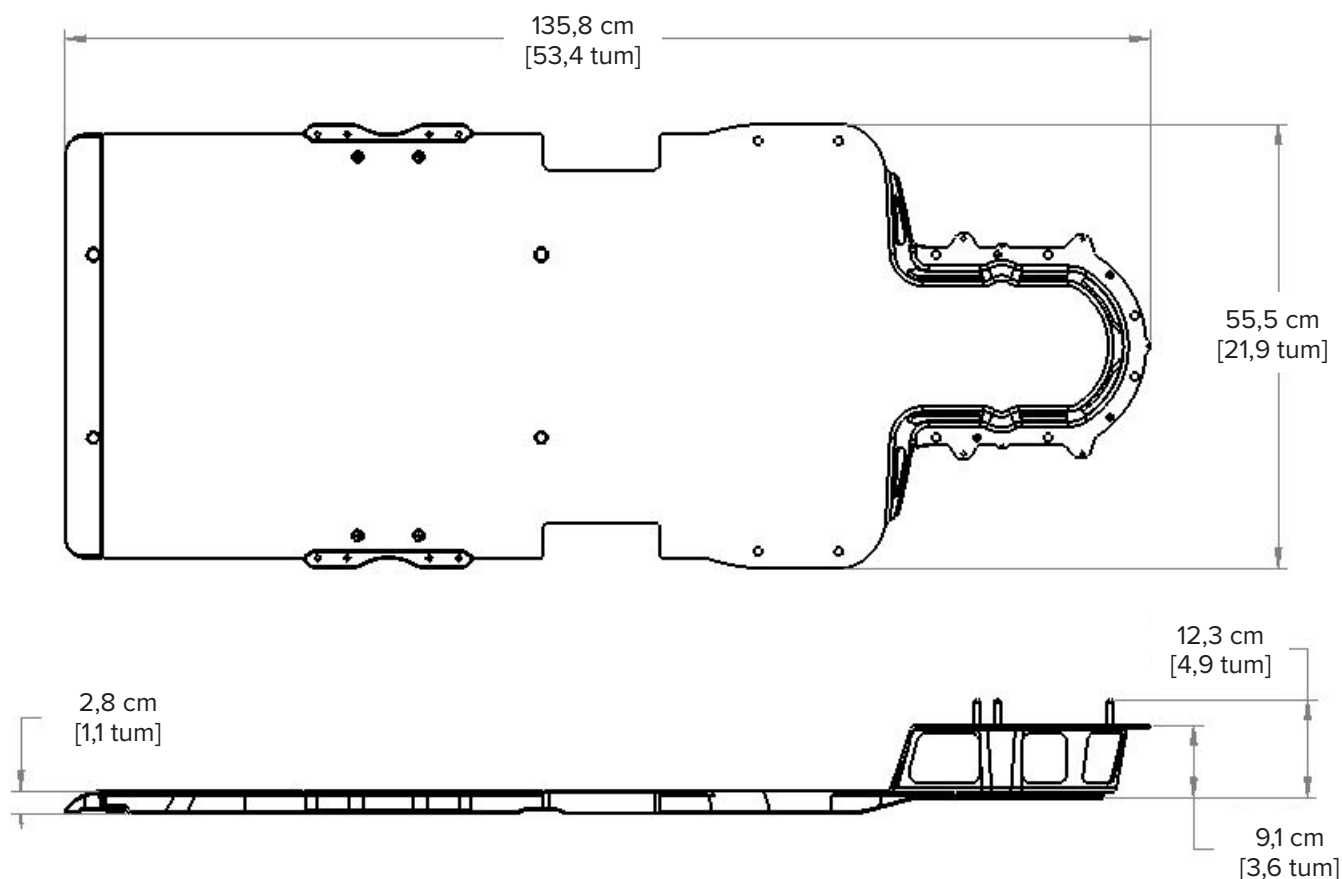

Encompass är ett varumärke som tillhör Qfix.

HexaPOD är ett varumärke som tillhör Elekta.

iBEAM® är ett registrerat varumärke som tillhör Elekta.



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com

2007719_SV_A
2023-04