



positioning
patients for life.®

PRODUCTHANDLEIDING EN GEBRUIKSAANWIJZING

RT-4525TILT-A en RT-4548

ProBoard™-hoofdbord van plat koolstofvezel
Polycarbonaat hoofdbord





EC REP		Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Vervaardigd in de VS door Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	--	--	---

Aquaplast RT en ProBoard zijn handelsmerken van Qfix.

Fibreplast® is een gedeponeerd handelsmerk van Qfix.

MOLDCARE is een handelsmerk van ALCARE CO, LTD.

Cidex® is een gedeponeerd handelsmerk van Johnson & Johnson.

Clorox® is een gedeponeerd handelsmerk van The Clorox Company.

INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN	4
WAARSCHUWINGEN	4
ERNSTIGE INCIDENTEN.....	4
AANVULLENDE WAARSCHUWINGEN.....	4
VERZWAKKING VAN DE BEHANDELINGSBUNDEL	4
MRI-VEILIGHEIDSINFORMATIE	4
WAARSCHUWINGSLABELS EN BESCHRIJVINGEN	4
BEOOGD GEBRUIK.....	5
GEBRUIKSINSTRUCTIES	6
ONDERSTEUNINGSOPSTELLING SILVERMAN EN MOLDCARE.....	6
THERMOPLASTISCHE OPSTELLING	6
ONDERHOUD	7
HET SYSTEEM REINIGEN	7
HET SYSTEEM DESINFECTEREN	7

ALGEMENE VOORZORGS- MAATREGELEN

WAARSCHUWINGEN

! WAARSCHUWING ! AANPASSING VAN DEZE APPARATUUR IS NIET TOEGESTAAN. ALS EEN ONDERDEEL VAN DIT HULPMIDDEL EEN TE GROTE BELASTING ONDERVINDT, BESCHADIGD LIJKT OF NIET GOED FUNCTIONEERT, DIENT U HET HULPMIDDEL NIET LANGER TE GEBRUIKEN EN CONTACT OP TE NEMEN MET QFIX VIA +1 484-720-6054 OF TECHSUPPORT@QFIX.COM.

ERNSTIGE INCIDENTEN

Meld ernstige incidenten (bijvoorbeeld incidenten die dodelijk of ernstig letsel als gevolg (kunnen) hebben) bij zowel Qfix als de bevoegde autoriteit van uw land.

AANVULLENDE WAARSCHUWINGEN

- Bevestig het hoofdbord altijd aan de behandelingstafel voordat u het gebruikt.
- Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan het hoofdbord aan.
- Gebruik het hoofdbord niet als het op enige wijze lijkt te zijn gewijzigd of beschadigd.

VERZWAKKING VAN DE BEHANDELINGSBUNDEL

Het hulpmiddel verzwakt de fotonbundel. Behandeling via het tafelblad verhoogt de algehele verzwakking. Behandeling via een hulpmiddel, zelfs een hulpmiddel dat is gemaakt van koolstofvezel, leidt tot een verhoogde huiddosis. De werkelijke verzwakking op basis van de opstelling moet worden geverifieerd met uw specifieke apparatuur.

MRI-VEILIGHEIDSINFORMATIE

! WAARSCHUWING ! GEBRUIK VAN UITSLUITEND ACCESSOIRES, ONDERDELEN, FIXATIESCHROEVEN EN VERVANGINGSONDERDELEN DIE MRI-VEILIG OF MRI-VEILIG ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN ZIJN, IS NOODZAKELIJK OM DE VEILIGHEID, PRESTATIES EN MRI-COMPATIBILITEIT VAN HET HOOFDBORD TE GARANDEREN EN OM DE TOEPASSELIJKE GARANTIES TE BEHOUDEN.

! WAARSCHUWING ! HET GEBRUIK VAN NIET-GOEDGEKEURDE MRI-ACCESSOIRES KAN LEIDEN TOT:

- LETSEL BIJ DE PATIËNT
- BRANDWONDEN BIJ DE PATIËNT
- SCHADE AAN APPARATUUR

WAARSCHUWINGSLABELS EN BESCHRIJVINGEN

Ga naar Qfix.com voor een lijst met symbolen en de bijbehorende definities.



MRI-VEILIG

Hiermee wordt aangeduid dat een voorwerp geen bekende gevaren vormt door blootstelling aan een MRI-omgeving. Producten die MRI-veilig zijn, bestaan uit materialen die niet-geleidend, niet-metaal en niet-magnetisch zijn.

BEOOGD GEBRUIK

Dit hulpmiddel is bedoeld voor het immobiliseren, positioneren en herpositioneren van patiënten die bestralingstherapie ondergaan.

! OPMERKING ! Krachtens de federale wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika mag dit hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden gekocht.

PATIËTENDOELGROEPEN

Patiënten die bestralingstherapie of diagnostische beeldvormingsprocedures ondergaan.


BEOOGDE GEBRUIKERS

De beoogde gebruiker van de producten is iemand die in aanmerking komt volgens de eisen van het regelgevingsgebied.

GEBRUIKSINSTRUCTIES


ONDERSTEUNINGSOPSTELLING SILVERMAN EN MOLDCARE

1. Plaats het hulpmiddel op het tafelblad met behulp van een schuifstang.
2. Plaats een Silverman-hoofdsteun over de bijbehorende indexpennen (afb. 1).

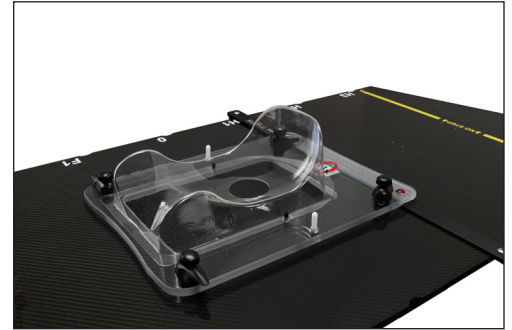

Afb. 1

3. Gebruik een MOLDCARE-kussen (indien gewenst) in combinatie met een Silverman-hoofdsteun om het hoogste niveau van comfort en herhaalbaarheid te bereiken (afb. 2). (Zie de verpakking van de MOLDCARE voor vormingsinstructies)

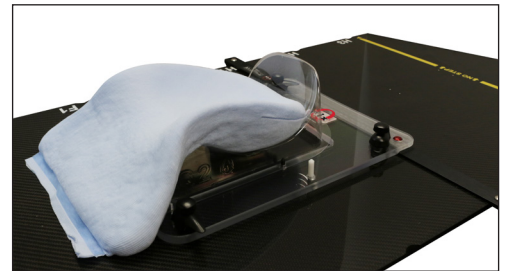

Afb. 2

Gevormde MOLDCARE® op
Silverman-hoofdsteun

THERMOPLASTISCHE OPSTELLING

Het hoofdbord kan worden gebruikt met traditionele of dunne U-Frame-maskers voor eenmalig gebruik


! OPMERKING ! Dankzij de snelontgrendeling met draaivergrendeling kan de patiënt in noodgevallen worden ontgrendeld.

1. Plaats het masker over de patiënt en lijn de 2 pennen op het hoofdeinde uit met de doelgaten in het masker (afb. 3).

! OPMERKING ! Dit kan een nieuw masker of een eerder gevormd masker zijn.


! OPMERKING ! Raadpleeg voor meer informatie over thermoplastische maskers de handleiding van de Aquaplast RT™ en Fibreplast®.

2. Zet het masker vast met behulp van de draaivergrendelingen op het hoofdbord (afb. 4).
3. Draai de draaivergrendelingen los om het masker te verwijderen.

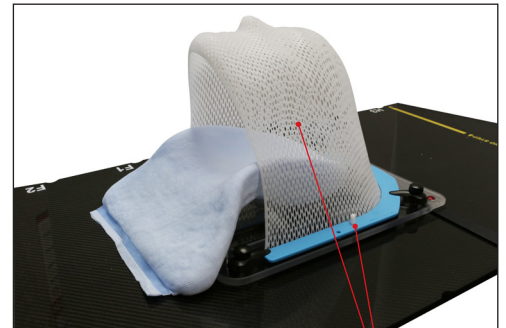

Afb. 3

Doelgaten

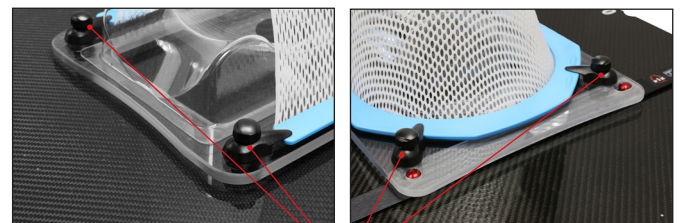

Afb. 4

Borgschroeven

ONDERHOUD

HET SYSTEEM REINIGEN

Het toestel kan worden gereinigd met een mild niet-schurend reinigings- of desinfectiemiddel. Breng om te reinigen de oplossing aan op een schone doek en veeg het oppervlak af.

HET SYSTEEM DESINFECTEREN

De volgende reinigingsmaterialen zijn getest en geschikt bevonden voor het reinigen van de oppervlakken van het hulpmiddel. Voor het desinfecteren van het oppervlak van het hulpmiddel raadpleegt u de specifieke instructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel.

- Oplossing van 10% Clorox®-bleekmiddel
- Isopropylalcohol
- Een met 2,4% Cidex® geactiveerde dialdehydeoplossing
- Zeep en water

Controleer regelmatig of alle bevestigingen goed vastzitten.



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com