

PRODUKTGUIDE OCH ANVÄNDARHANDBOK

RT-4525TILT-A och RT-4548

ProBoard™ huvudbord i kolfiber

Huvudbord i polykarbonat





EC REP		Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	Tillverkad i USA av Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	--	--	---

Aquaplast RT och ProBoard är varumärken som tillhör Qfix.

Fibreplast® är ett registrerat varumärke som tillhör Qfix.

MOLDCARE är ett varumärke som tillhör ALCARE CO, LTD.

Cidex® är ett registrerat varumärke som tillhör Johnson & Johnson.

Clorox® är ett registrerat varumärke som tillhör The Clorox Company.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	4
VARNINGSMEDDELANDEN	4
ALLVARLIGA INCIDENTER.....	4
YTTERLIGARE VARNINGAR	4
ATTENUERING AV BEHANDLINGSSTRÅLE.....	4
INFORMATION OM MRI-SÄKERHET	4
VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR.....	4
AVSEDD ANVÄNDNING	5
ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING.....	6
MONTERING AV SILVERMAN- OCH MOLDCARE-STÖD.....	6
MONTERING AV TERMOPLAST	6
UNDERHÅLL	7
RENGÖRA SYSTEMET	7
DESINFICERA SYSTEMET.....	7

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNINGSMEDDELANDEN

! VARNING ! INGA MODIFIERINGAR AV DENNA UTRUSTNING ÄR TILLÅTEN. AVBRYT OMEDELBART ANVÄNDNINGEN OCH KONTAKTA QFIX PÅ +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM OM NÅGON DEL AV DENNA PRODUKT BELASTAS KATASTROFALT, FÖREFALLER SKADAD ELLER FUNGERAR FELAKTIGT.

ALLVARLIGA INCIDENTER

Vänligen rapportera allvarliga incidenter (t.ex. olyckor som orsakar eller har potential att orsaka dödsfall eller allvarlig personskada) både till Qfix och till behörig myndighet i ditt land.

YTTERLIGARE VARNINGAR

- Fäst alltid huvudbordet på behandlingsbordet före användning.
- Modifiera inte huvudbordet på något sätt.
- Använd inte huvudbordet om det verkar ha modifierats eller är skadat.

ATTENUERING AV BEHANDLINGSSTRÅLE

Enheten attenuerar fotonstrålen. Behandling genom bordet ökar den övergripande dämpningen. Behandling genom valfri enhet, även enheter tillverkade av kolfiber, leder till en ökad huddos. Den faktiska attenueringen baserad på inställningen ska verifieras med den utrustning som används på er vårdenhets.

INFORMATION OM MRI-SÄKERHET

! VARNING ! REKOMMENDERAD ANVÄNDNING AV ENDAST MR-SÄKRA ELLER MR-VILLKORLIGA TILLBEHÖR, KOMPONENTER, FÄSTSKRUVAR OCH RESERVDELAR ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ATT SÄKERSTÄLLA HUVUDBORDETS SÄKERHET, PRESTANDA OCH MRI-KOMPATIBILITET, SAMT FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA TILLÄMPLIGA GARANTIER.

! VARNING ! ANVÄNDNING AV ICKE GODKÄNDA MR-TILLBEHÖR KAN LEDA TILL:

- PATIENTSKADOR
- BRÄNNSKADOR PÅ PATIENTEN
- SKADOR PÅ UTRUSTNINGEN

VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR

Se Qfix.com för en lista med symboler med definitioner.



MR-SÄKER

En produkt som inte utgör någon känd fara vid exponering för MR-miljö. MR-säkra material består av material som inte leder elektrisk ström, inte innehåller metall och som inte är magnetiska.

AVSEDD ANVÄNDNING

Denna enhet är avsedd för immobilisering, positionering och ompositionering av patienter som genomgår strålbehandling.

! OBS ! Enligt amerikansk federal lag får denna enhet endast säljas av eller på ordination av läkare.

PATIENTMÅLGRUPPER

Patienter som får strålbehandling eller diagnostisk avbildning.


AVSEDDA ANVÄNDARE

Avsedd användare för produkterna är en person kvalificerad enligt regionens myndighetskrav.


ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

MONTERING AV SILVERMAN- OCH MOLDCARE-STÖD

1. Placera anordningen på bordsytan med en positioneringsstav.
2. Placera ett Silverman-huvudstöd över motsvarande referensstift (figur 1).
3. Använd en MOLDCARE-kudde (om så önskas) tillsammans med ett Silverman-huvudstöd för att uppnå bästa möjliga komfort och reproducerbarhet (figur 2). (se MOLDCARE-förpackningen för instruktioner om formning)

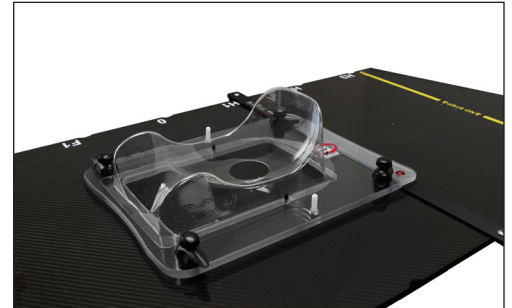

Figur 1

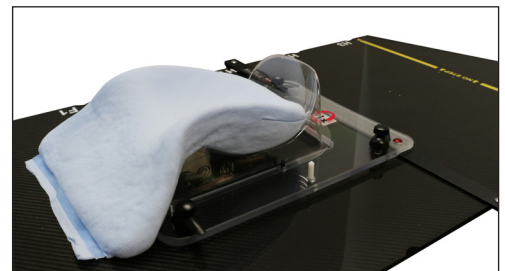

Figur 2

Formad MOLDCARE® på Silverman-huvudstöd

MONTERING AV TERMOPLAST


Huvudbordet kan användas med traditionella eller Slimline U-Frame-masker för engångsbruk

! OBS ! Snabbfrigörande svängbara lås gör det möjligt att frigöra patienten i nödfall.

1. Placera masken över patienten och rikta in de 2 stiften på huvudbågen med mottagarhålen på masken (figur 3).

! OBS ! Detta kan vara en ny mask eller tidigare formad mask.


! OBS ! Hänvisa till Aquaplast RT™- och Fibreplast®-handboken för mer information om termoplastmasker

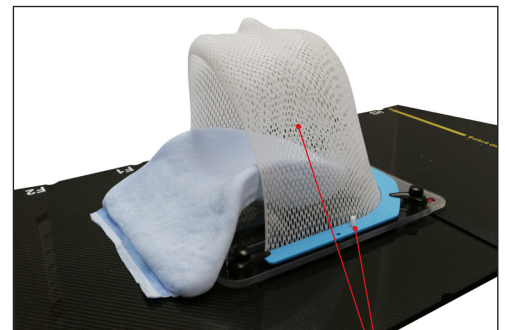

Figur 3

Mottagarhål

2. Fäst masken med de svängbara låsen på huvudbordet (figur 4).
3. Lossa de svängbara låsen för att ta bort masken.

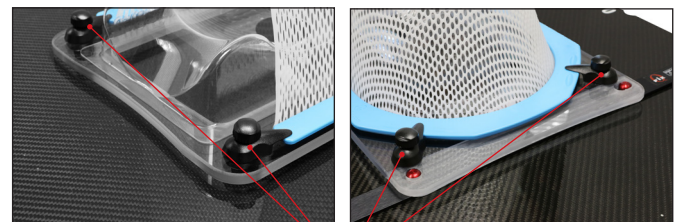

Figur 4

Låsskruvar

UNDERHÅLL

RENGÖRA SYSTEMET

Anordningen kan rengöras med en mild, icke-slipande rengörings- eller desinfektionslösning. Rengör genom att applicera lösningen på en ren duk och torka av ytan.

DESINFICERA SYSTEMET

Följande rengöringsmaterial har testats och visats vara lämpliga för rengöring av ytorna på anordningen. För att desinfektera anordningens yta ska du hänvisa till specifika instruktioner från rengöringsmedlets tillverkare.

- 10 % Clorox® blekmedelslösning
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktiverad dialdehydlösning
- Tvål och vatten

Kontrollera regelbundet att alla fästen sitter ordentligt fast.



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

☎ +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2007854_SV_A
2023-04