

ÜRÜN KILAVUZU VE KULLANICI EL KİTABI

RT-4525TILT-A ve RT-4548

ProBoard™ Düz Karbon Fiber Yatak Başlığı
Polikarbonat Yatak Başlığı





EC REP		Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 A.B.D.'de üreten Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	--	--	--

Aquaplast RT ve ProBoard, Qfix şirketinin ticari markalarıdır.

Fibreplast®, Qfix şirketinin tescilli ticari markasıdır.

MOLDCARE; ALCARE CO, LTD. şirketinin ticari markasıdır.

Cidex®, Johnson & Johnson şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Clorox®, The Clorox Company şirketinin tescilli ticari markasıdır.

İÇİNDEKİLER

GENEL ÖNLEMLER	4
UYARI İFADELERİ	4
CİDDİ OLAYLAR.....	4
EK UYARILAR	4
TEDAVİ İŞİNİN ZAYIFLAMASI.....	4
UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI	4
KULLANIM AMACI.....	5
ÇALIŞTIRMA TALİMATI	6
SILVERMAN VE MOLDCARE DESTEK AYARI	6
TERMOPLASTİK AYARI.....	6
BAKIM.....	7
SİSTEMİN TEMİZLENMESİ	7
SİSTEMİN DEZENFEKTE EDİLMESİ	7

GENEL ÖNLEMLER

UYARI İFADELERİ

! UYARI ! BU EKİPMANDA MODİFİKASYON YAPILMASINA İZİN VERİLMEZ. CİHAZIN HERHANGİ BİR KISMI ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE BİR YÜKE MARUZ KALIR, HASARLI GÖRÜNÜR VEYA UYGUN OLMAYAN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIRSA KULLANIMI HEMEN KESİN VE +1 484-720-6054 VEYA TECHSUPPORT@QFIX.COM KANALIYLA QFIX İLE İRTİBAT KURUN.

CİDDİ OLAYLAR

Ciddi olayları lütfen (ör. ölüm ya da ciddi yaralanmaya yol açan veya yol açma potansiyeli bulunan olaylar) hem Qfix firmasına hem de ülkenizde yetkili makama bildirin.

EK UYARILAR

- Kullanmadan önce, Yatak Başlığını tedavi masasına daima sabitleyin.
- Yatak Başlığında hiçbir şekilde değişiklik yapmayın.
- Herhangi bir şekilde değiştirilmiş ya da hasarlı görünüyorsa Yatak Başlığını kullanmayın.

TEDAVİ İŞİNİN ZAYIFLAMASI

Cihaz, foton ışığını zayıflatır. Hasta yatağının üst kısmından tedavi, genel zayıflamayı artıracaktır. Herhangi bir cihazdan yapılacak tedavi, cihaz karbon fiberden yapılmış olsa dahi, cildin maruz kaldığı dozda bir artışa yol açacaktır. Kurulumu göre fiili zayıflama, kullandığınız ekipmanlara göre teyit edilmelidir. MRI Güvenlik Bilgisi.

! UYARI ! YATAK BAŞLIĞININ GÜVENLİĞİNİ, PERFORMANSINI VE MRI UYUMLULUĞUNU SAĞLAMAK VE İLGİLİ GARANTİLERİ KORUMAK İÇİN YALNIZCA, MR GÜVENLİ VE MR KOŞULLU AKSESUARLARIN, BİLEŞENLERİN, SABİTLEME VİDALARININ VE DEĞİŞİM PARÇALARININ KULLANILMASI GEREKİR.

! UYARI ! ONAYLI OLMAYAN MR AKSESUARLARININ KULLANILMASI HALİNDE AŞAĞIDAKİLER MEYDANA GELEBİLİR:

- HASTADA YARALANAMA
- HASTADA YANIK
- EKİPMANDA HASAR

UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI

Sembollerin listesi ve tanımları için Qfix.com sitesine bakın.



MR GÜVENLİ

Herhangi bir MR ortamına maruz kalma nedeniyle bilinen tehlikeler oluşturmeyen öğeyi belirtir. MR Güvenli öğeler elektriği iletmeyen, metalik olmayan ve manyetik özelliği bulunmayan malzemelerden oluşur.

KULLANIM AMACI

Bu cihazın kullanım amacı, radyasyon tedavisi olan hastaları hareketsiz hale getirmek, konumlandırmak ve yeniden konumlandırmaktır.

! NOT ! Bu cihazın satışı, ABD federal yasalarına göre sadece hekimler tarafından veya onların siparişi üzerine yapılabilir.

HASTA HEDEF GRUPLARI

Radyasyon tedavisi ya da diyagnostik görüntüleme prosedürleri uygulanmakta olan hastalar.


HEDEF KULLANICILAR

Ürünlerin hedef kullanıcısı, düzenleyici bölgedeki gerekliliklere uygun şekilde vasıflı kişidir.

ÇALIŞTIRMA TALİMATI


SILVERMAN VE MOLDCARE DESTEK AYARI

1. Cihazı, yerleştirme çubuğunu kullanarak yatak üst kısmına koyun.
2. İlgili indeksleme pimlerinin üzerine bir Silverman baş desteği koyun (Şekil 1).

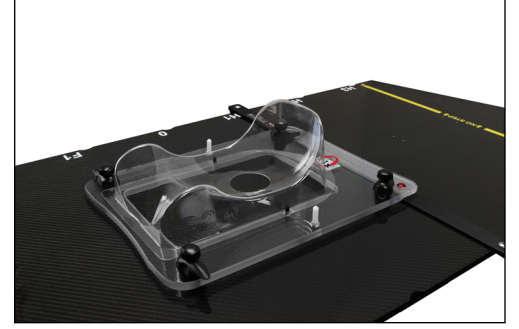

Şekil 1

3. Bir MOLDCARE Minderle (isterseniz) birlikte bir Silverman baş desteği kullanarak, en yüksek düzeyde konforu ve tekrar edilebilirliği elde edin (Şekil 2). (kalıplamayla ilgili yönergeler için, MOLDCARE ambalajına bakın)

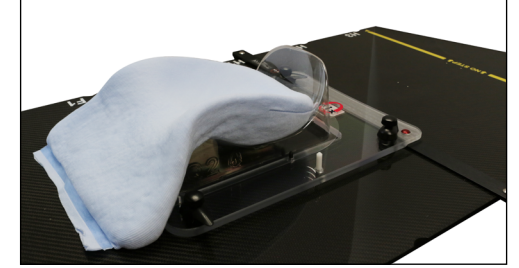

Şekil 2

Silverman Baş Desteği üzerinde, biçimlenmiş MOLDCARE®

TERMOPLASTİK AYARI

Yatak Başlığı, Geleneksel ya da Slimline Tek Kullanımlık U-Frame Maskelerle kullanılabilir


! NOT ! Hızlı açılan döner kilitler, acil durumda hastanın serbest kalmasını sağlar.

1. Maskeyi hastanın üzerine koyun, Yatak Başlığındaki 2 pimi, maskedeki alım delikleriyle hizalayın (Şekil 3).

! NOT ! Bu, yeni bir maske ya da daha önce kalıplanmış bir maske olabilir.


! NOT ! Termoplastik maskelerle ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen Aquaplast RT™ ve Fibreplast® El Kitabına bakın

2. Maskeyi, Yatak Başlığındaki Döner Kilitleri kullanarak sabitleyin (Şekil 4).
3. Maskeyi çıkarmak için, döner kilitleri gevşetin.

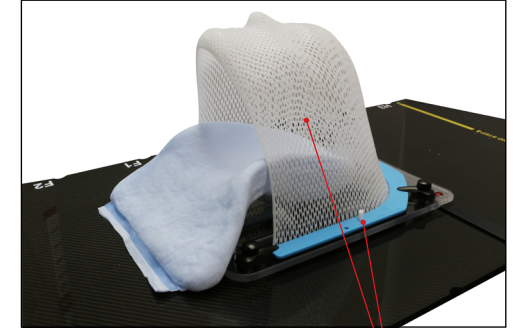

Şekil 3

Alım delikleri

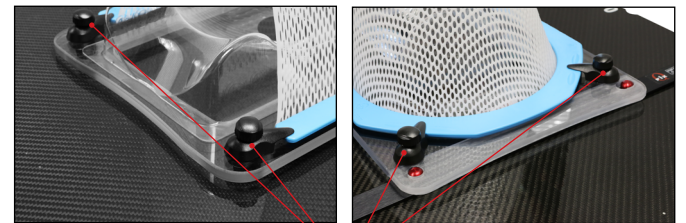

Şekil 4

Kilitleme Vidaları

BAKIM

SİSTEMİN TEMİZLENMESİ

Cihaz yumuşak, aşındırıcı olmayan bir temizleyici veya dezenfektan solüsyonla temizlenebilir. Temizlemek için solüsyonu temiz bir beze uygulayın ve yüzeyi bezle silin.

SİSTEMİN DEZENFEKTE EDİLMESİ

Aşağıdaki temizlik materyalleri test edilmiş ve cihaz yüzeylerini temizlemek için uygun olduğu bulunmuştur. Cihaz yüzeyinin dezenfekte edilmesi için temizlik maddesi üreticisinin özel talimatlarına başvurun.

- %10 Clorox® marka çamaşır suyu solüsyonu
- İzopropil Alkol
- Cidex® marka %2,4 Aktive Dialdehid Solüsyonu
- Sabunlu su

Tüm tutturucuları sıklık açısından düzenli olarak kontrol edin.



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

📠 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2007854_TR_A
2022-05