

ӨНІМ НҰСҚАУЛЫҒЫ МЕН ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

RT-2075-110 және RT-2075-220
RapidHeat™ пеші



МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ	3
ОРНАТУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР	4
ЕСКЕРТУ	4
АЛДЫН АЛА ӨРЕКЕТТЕР	5
КОМПОНЕНТТЕРДІ ТЕКСЕРУ	5
ОРНАТУ АЙМАҒЫ	6
ОРНАТУҒА ДАЙЫНДАУ	7
ЭЛЕКТР СЫМДАРЫН ЖАЛҒАУ	8
КАБЕЛЬДЕРДІ ЖАЛҒАУ	9
СИПАТТАМАЛАРЫ	10
ЕС СӘЙКЕСТІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ	12
ПАЙДАЛАНУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР	13
ЕСКЕРТУ	13
ЕСКЕРТУ ТАҢБАЛАРЫ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ	13
ПЕШТІ АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНУ	14
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	15
ТАЗАЛАУ: ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР	15
ҚЫЗДЫРУ КАМЕРАСЫН ТАЗАЛАУ	15
СЫРТЫН ТАЗАЛАУ	15
ОҢ ЖАҚ ШАМДАРДЫ АУЫСТЫРУ	16
RAPIDHEAT ПЕШІНІҢ САҚТАНДЫРҒЫШЫН АУЫСТЫРУ	16
АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	18
ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕР	18
ЦИФРЛЫҚ ПЕШТІҢ БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ	19
ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ	20
ПЕШТІ ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ	20
ПЕШТІ БАҒДАРЛАМАЛАУ	22
БӨЛШЕКТЕР ТІЗІМІ	25
RT-2075-110	25
RT-2075-220	26

КІРІСПЕ

Бұл Өнім нұсқаулығы мен Пайдаланушы нұсқаулығында осы пешті орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету туралы ақпарат берілген. Бұл нұсқаулықтың мақсаты – техник пен пайдаланушыға RapidHeat™ пешін қауіпсіз, тиімді және ұзақ уақыт пайдалану үшін қажетті барлық шаралар мен сақтық шараларын қолдануға мүмкіндік беру.

Бұл нұсқаулықты тағайындалған операторлар мен мамандандырылған техниктерге анықтама ретінде өнімнің бүкіл өмірлік циклі бойы қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл нұсқаулық жоғалса немесе зақымдалса, тікелей Qfix компаниясынан орнына бір нұсқаулық сұрап алу керек.

Qfix пешін дұрыс пайдаланбау, рұқсат етілмеген қызметкерлер жүргізген өзгерістерден немесе жөндеуден туындаған немесе Qfix компаниясы ұсынбаған және осы үлгімен пайдалануға арналмаған қосалқы бөлшектермен бірге пайдаланылған кез келген залал үшін жауапты емес.

Бұл пеш қолданыстағы ЕЕС директиваларына сай.

ОРНАТУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР

ЕСКЕРТУ

ОРНАТУ ЖӘНЕ ІСКЕ ҚОСУ ӘРЕКЕТТЕРІН БАСТАУ АЛДЫНДА ОСЫ ӨНІМ НҰСҚАУЛЫҒЫ МЕН ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫН МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.

БАРЛЫҚ ОРНАТУ, ҚҰРАСТЫРУ, КӨМЕК КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҰМЫСТАРЫН ӨНІМДІ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ОРНЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ЖЕРГІЛІКТІ ЗАҢДАРҒА СӘЙКЕС БІЛІКТІ МАМАНДАР ЖҮРГІЗУІ КЕРЕК.

ҚАТЕ ОРНАТУ, КӨМЕК КӨРСЕТУ, ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ, ТАЗАЛАУ, БҰРМАЛАУ НЕМЕСЕ ӨЗГЕРТУ САЛДАРЫНАН БҰЙЫМ ДҰРЫС ЖҰМЫС ІСТЕМЕУІ, ЗАҚЫМДАЛУЫ ЖӘНЕ СЫНУЫ МҮМКІН.


ПЕШТІ ТЕК ТЕРМОПЛАСТИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДЫ ҚЫЗДЫРУ ҮШІН ПАЙДАЛАНУ КЕРЕК. ТЕРМОПЛАСТИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДЫ ҚЫЗДЫРУДАН БАСҚА КЕЗ КЕЛГЕН МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ ЖӘНЕ ОЛ ҚАУІПТІ БОЛУЫ ЫҚТИМАЛ. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМОПЛАСТИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДЫҢ ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫН ҚАРАҢЫЗ.

ОРНАТУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР



АЛДЫН АЛА ӨРЕКЕТТЕР

Өнімді алғаннан кейін, орамды және пешті тексеріп, ешқандай бұзылу немесе зақымдану орын алмағанын тексеріңіз. Кез келген зақымдалған немесе жетіспейтін бөлшектер туралы тасымалдаушыға және Qfix компаниясына дереу хабарлаңыз. **Өнім кодын «Ref» және сериялық нөмірін «Ser. No.»** деп көрсетіп, фотосуретті тіркеңіз. Өнім коды мен сериялық нөмірді пештің артындағы ақпарат тақтасынан табуға болады.

! ЕСКЕРТУ ! ПЕШ ТАСЫМАЛДАУ КЕЗІНДЕ ОРНЫНАН ЖЭЫЛЖЫП КЕТУІ МҮМКІН ЖӘНЕ СОНЫҢ САЛДАРЫНАН ПЕШКЕ ЗАҚЫМ КЕЛУІ НЕМЕСЕ АДАМ ЖАРАҚАТТАНУЫ МҮМКІН. ПЕШТІҢ САЛМАҒЫН КӨТЕРЕ АЛАТЫН ҚОЛАЙЛЫ КӨЛІКТІ ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ. ПЕШТІ СҮЙРЕУГЕ, ҚИСАЙТУҒА, ЕҢКЕЙТУГЕ НЕМЕСЕ АУДАРУҒА БОЛМАЙДЫ. ПЕШТІ ЖЕРДЕН ТІКЕЛЕЙ КӨТЕРІП АЛЫП, КӨЛДЕНЕҢ ҚАЛЫПТА ҚОЙЫҢЫЗ.

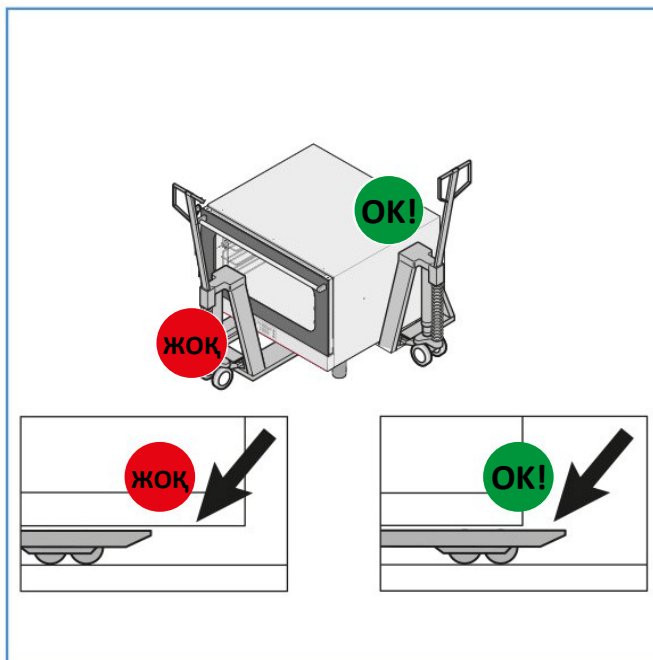

КОМПОНЕНТТЕРДІ ТЕКСЕРУ

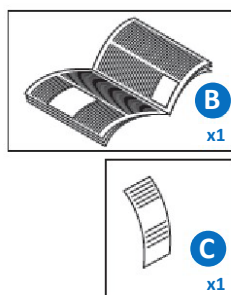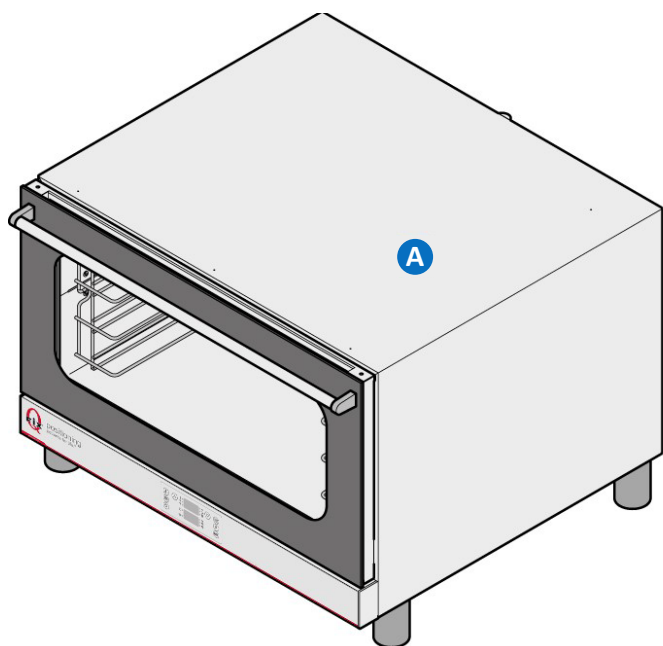

- A** ПЕШ
- B** ОРНАТУ, ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КІТАПШАСЫ
- C** СЫНАҚ ТҮБІРТЕГІ

ОРНАТУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР

ОРНАТУ АЙМАҒЫ

Есіктердің, дәліздердің және өту жолдарының қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін орнату аймағын таза ұстау керек.

Пеш жабық және жақсы желдетілетін жерлерде орнатылуы керек (сыртта емес).

Пешті орналастырмас бұрын, жалпы өлшемдерді және электр розеткасының нақты орындарын тексеріңіз.

Пешті тегіс бетке қою керек. Пештің сырғып кетпейтінін, құламайтынын немесе төңкерілмейтінін тексеріңіз.

Орнату алаңы пештің салмағын көтере алатындай болуы керек. Жалпы салмағын пештің артындағы ақпарат тақтасынан қараңыз.

Пешті техникалық қызмет көрсету үшін пештің артқы жағына оңай қол жеткізуге мүмкіндік беретіндей орналастыру керек.

Пеш розеткаға қосылатын жерге жақын орналасуы керек.

Жұмсарту барысында термопластикті оңай көру үшін пештің іші шамамен көз деңгейінде болғаны жөн. Ұсынылатын орнату биіктігі – 160 см (5,25 фут). Пешті шкафтардың, тот баспайтын болаттан жасалған үстелдердің немесе басқа пештердің үстіне қойғанда, пайдаланушының биіктік талаптарын ескеріңіз.

Пеш корпустың ішіне мықтап орнатуға арналмаған. Пештің айналасында 10 см (4 дюйм) бос орын болуы керек.


Пешті қызудың немесе басқа ыстық сұйықтықтардың жанына қоюға *болмайды*.

Құрылғыны қабырғалар, жиһаздар, экрандар сияқты материалдарға немесе өрт қаупіне байланысты газ баллондары сияқты жанғыш сұйықтықтары бар контейнерлерге жақын қоюға *болмайды*.


Жабдықтардан мынадай қашықтықты сақтаңыз: пештің қабырғаларынан 50 см (20 дюйм), пештің үстіңгі жағынан 50 см (20 дюйм) және пештің артында 70 см (28 дюйм).

Есіктің толық ашылатынына көз жеткізіңіз.

Желдеткіштер мен аэрация саңылаулары ашық және кедергісіз болуы керек.

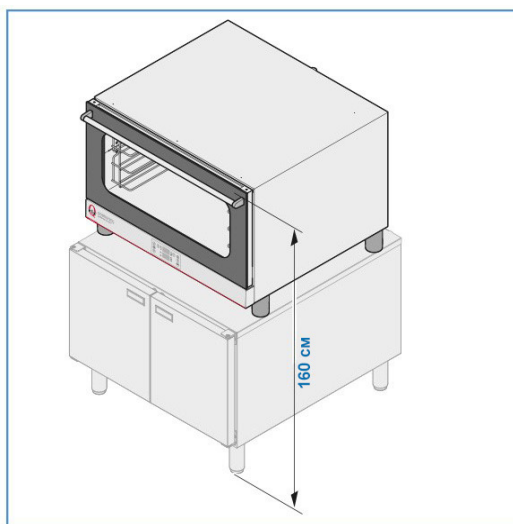

ОРНАТУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР

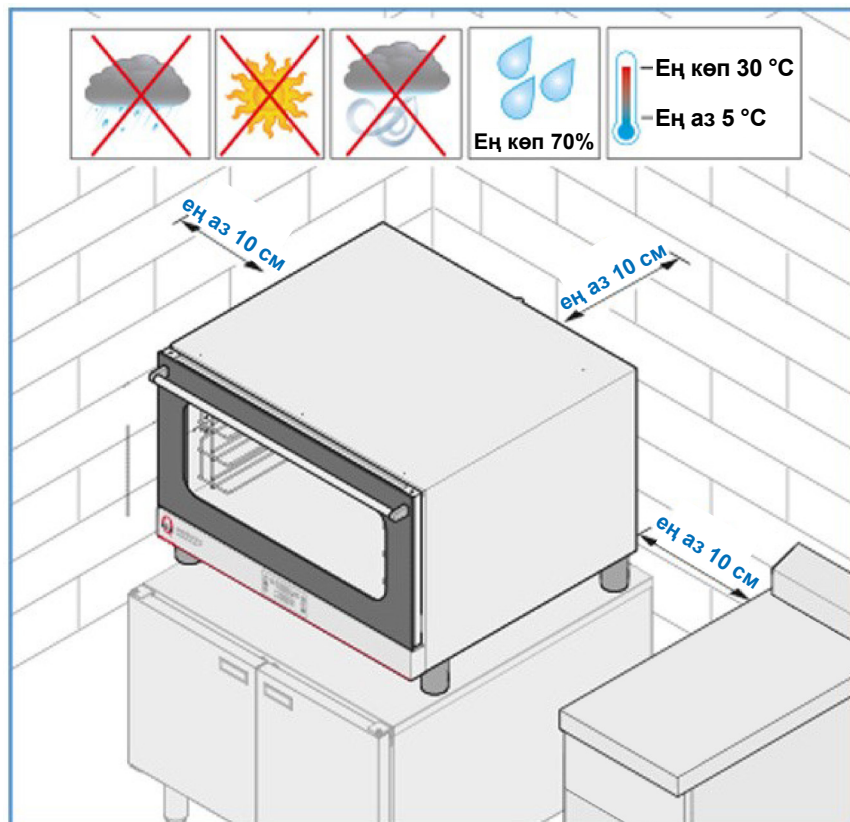

ОРНАТУҒА ДАЙЫНДАУ


Сыртқы орауышты (ағаш жәшік және/немесе картон қорап) алып тастап, жергілікті заңдарға сәйкес кәдеге жаратыңыз.

ҚОРҒАҒЫШ ҮЛДІРДІ АЛЫП ТАСТАУ

Сыртқы қабырғалардан қорғағыш үлдірді алып тастаңыз. (Кескінді қараңыз). **Қорғағыш үлдірді алу үшін губканы, ұстараны немесе өткір заттарды пайдаланбаңыз.**

Пештің ішінен барлық өнім құжаттамасын алып тастаңыз.

Барлық пластик қаптамаларды алып тастаңыз.

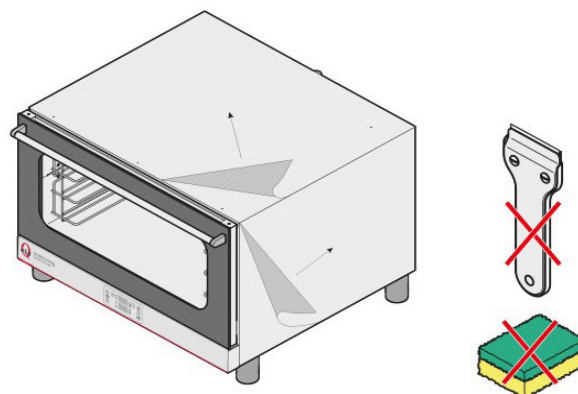

ОРНАТУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР


АЯҚТЫ РЕТТЕУ

Реттелетін аяқтарды пештің астыңғы жағына бұрандамен бекітіңіз.

Пешті аяқтарсыз пайдалануға болмайды.

Аяқтарды алып тастауға БОЛМАЙДЫ. Аяқтар ауа ағынының пешті салқындатуына мүмкіндік береді, ал бұл пештің шамадан тыс қызып кетуіне және компоненттердің зақымдалуына жол бермейді.

Пешті деңгейі жазық, тегіс бетке қою керек. Көлденең, жазық орынды тексеру үшін тегістеу құралын пайдаланыңыз. Қажет болса, көлденең, жазық тепе-теңдікке қол жеткізу үшін аяқтарды қажетінше бұрау немесе бұрап алу арқылы жеке-жеке реттеуге болады.

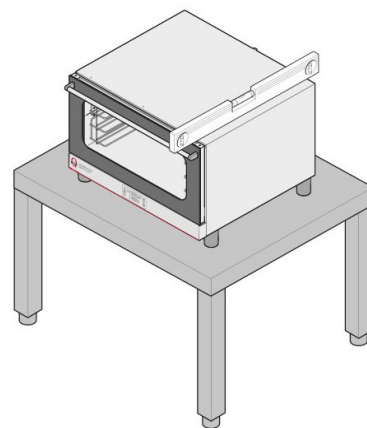

ЭЛЕКТР СЫМДАРЫН ЖАЛҒАУ

! ЕСКЕРТУ ! ЭЛЕКТР РОЗЕТКАСЫНА ҚОСУ ЖҰМЫСЫН БІЛІКТІ ЖӘНЕ РҰҚСАТЫ БАР ТЕХНИК ОРНАТЫЛҒАН ЕЛДЕГІ ҰЛТТЫҚ, ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ ЗАҢДАРҒА СӘЙКЕС ЖҮРГІЗУІ КЕРЕК.

РОЗЕТКАҒА ҚОСПАС БҰРЫН, ЖИІЛІК (ГЦ) ЖӘНЕ КЕРНЕУ (В) ПЕШТІҢ АРТЫНДАҒЫ АҚПАРАТ ТАҚТАСЫНДА КӨРСЕТІЛГЕН ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІНЕ КӨЗ ЖЕТКІЗІҢІЗ.

! ЕСКЕРТУ ! ЕГЕР ПЕШ ТАСЫМАЛДАУДЫ ЖЕҢІЛДЕТУГЕ АРНАЛҒАН АРБАМЕН БІРГЕ КЕЛМЕСЕ, ПЕШТІ АЛДЫМЕН ЭЛЕКТР РОЗЕТКАСЫНА ҚОСЫП, СОДАН KEЙІН ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗІНДЕ ЭЛЕКТР КАБЕЛІ ЗАҚЫМДАНБАУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН ПЕШТІ ЖҰМЫС АЙМАҒЫНДАҒЫ ОРНЫНА ҚОЙҒАН ЖӨН. БҰЛ ПРОЦЕСС ОҢАЙ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗ ЖАЛҒАУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.

КАБЕЛЬДІ ЖӘНЕ БІРФАЗАЛЫ АШАЛАРЫ БАР ПЕШТЕР

3xAWG14 15 A медициналық жабдықпен қолданылатын кабель мен аша бар пештер: ашаны тиісті қуат розеткасына қосу керек. Өнім ашаның әрқашан қол жететіндей етіп орналастырылуы керек.

Тек кабельді ауыстыруға болады. Кабельді ауыстырсаңыз, жерге қосу сымының сары-жасыл екенін ескертіңіз. Кабельді ауыстыру жұмысын білікті, уәкілетті техник орындауы керек.

ОРНАТУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР

КАБЕЛЬДЕРДІ ЖАЛҒАУ

Қуат сымын терминал тақтасына жалғау үшін мына әрекеттерді орындаңыз:

- (A1) Кабель төлкесінің бастарын босатыңыз. Бұрандаларды босатып, пештің артқы жағының төменгі бөлігін ашыңыз.
- (A2) Кабель төлкесі арқылы жаңа кабельді өткізіңіз. Пештің артындағы жапсырмадағы жалғау схемасы бойынша кабель кернеуін терминал жолақтарына жалғаңыз. Кабель мен көпір бұранданы бұрау арқылы мықтап бекітілетіндей етіп, бұрандалардың астына қатайту бағытында мыс көпір мен электр кабелін біріктіру арқылы көрсетілген нәрсені ғана жалғаңыз.
- (A4) Бұрандаларды қатайту арқылы пештің артқы жағының төменгі бөлігін жабыңыз. Кабель төлкесінің басын қатайту арқылы кабельді бекітіңіз.

Қате қосылым терминал тақтасының қызып, атылып кетуіне және электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.

Пешті розеткаға қоспас бұрын барлық қосылымның тығыз екенін тексеріңіз.

PE = сары/жасыл: «ЖЕР» қорғаныш өткізгіші

N = көк: бейтарап өткізгіш

L1, L2, L3 = қоңыр, сұр, қара: ток өткізгіштер

Ток пен жер арасында статикалық разрядтың жоқтығын тексеріңіз. Сыртқы корпус пен қуат розеткасының жерге қосу сымы арасындағы шекті қосқыштың үздіксіздігін тексеріңіз. Бұл әрекеттерді орындау үшін мультитестерді пайдаланған жөн.

ОРНАТУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР

СИПАТТАМАЛАРЫ

Qfix компаниясы таратқан

440 Church Road

Avondale, Pennsylvania 19311 USA

+1 610-268-0585 | sales@Qfix.com

Piron SRL компаниясы өндірген

Via Belladoro, 25

35010 Cadoneghe (Pd) – ITALY

Өнімдер

- 110 B: RT-2075-110
- 220 B: RT-2075-220

АҚПАРАТ ТАҚТАСЫ



Distributed by:
Qfix
440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
+1 610-268-0585 | sales@Qfix.com

Manufactured by:
Piron SRL
Via Belladoro, 25–35010 Cadoneghe
Padova ITALY
+39 049 9624228 | info@piron.it

Ref: RT-2075-110

Art : PF8003D_QF4

Ser. No.: XXXXXXXXXX

Type: —

 2017		
1.6 kW	110V 1N~	60 Hz

50 kg

Салмағы

Қуат
тұтынуы

Қуат

Жиілік

RoHS
MADE IN ITALY



PF8003D QF4

ОРНАТУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР



Distributed by:
Qfix
440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
+1 610-268-0585 | sales@Qfix.com

Manufactured by:
Piron SRL
Via Belladuro, 25-35010 Cadoneghe
Padova ITALY
+39 049 9624228 | info@piron.it

Ref: RT-2075-220

Art : PF8003D_QF5

Ser. No.: XXXXXXXXXX

Type: —

 2017		
1.6 kW	220V 1N~	60 Hz

50 kg

RoHS
MADE IN ITALY



PF8003D QF5

Салмағы

Қуат
тұтынуы

Қуат

Жиілік

Ref (Анықт.):

QFIX қайта тапсырыс беру нөмірі

Art (Арт.):

PIRON модель нөмірі

Ser. No. (Сер. №):

сериялық нөмір, әр өнім үшін әртүрлі

Type (Түрі):

техникалық сипаттамаларына сәйкес өнім моделі

Өндірілген күні, ЖЖЖЖ

Қуат тұтынуы:

пештің номиналды қуаты кВт

Қуат көзі:

ТЕРМИНАЛДЫҢ ҚОСЫЛЫМ ТҮРІ: құрылғының кернеуі В, фазалар мен бейтараптар саны (3N = 3 фаза бейтарапырақ)

Электр желісінің жиілігі:

Гц шамасындағы пештің жиілігі

ОРНАТУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР

ЕС СӘЙКЕСТІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

Мына стандарттарға сәйкес 2014/35/UE төмен кернеу директивасы:

BS EN 60335-2-42 + A1:2008

Тұрмыстық және ұқсас электр құрылғылары – Қауіпсіздік – 2-42 бөлім: Коммерциялық электрлік конвекциялық пештерге, бу пісіргіштерге және бу конвекциялық пештерге қойылатын ерекше талаптар.

BS EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010

Тұрмыстық және ұқсас электр құрылғылары. Қауіпсіздік. Жалпы талаптар.

BS EN 62233:2008

Тұрмыстық аспаптар мен ұқсас аппараттардың электромагниттік өрістерінің адамға әсер етуін өлшеу әдістері.

Мына стандарттарға сәйкес 2014/30/UE электромагниттік үйлесімділік директивасы:

BS EN 55014-1:2006 + A1:2009

Электромагниттік үйлесімділік. Тұрмыстық техникаға, электр құрылғыларына және ұқсас аппараттарға қойылатын талаптар. Шығарындылар.

BS EN 55014-1:1997 + A1:2001 + A2:2008

Электромагниттік үйлесімділік – Тұрмыстық құрылғыларға, электр аспаптарына және ұқсас құрылғыларға қойылатын талаптар – 1 бөлім: Шығарынды – Бір топтағы өнімнің стандарты.

IEC 61000-6-3:2006 + A1:2009 + A2:2009

Электромагниттік үйлесімділік (ЭМУ) – 6-3 бөлім: Жалпы стандарттар – тұрғын үй, коммерциялық және жеңіл өнеркәсіптік орта үшін шығарындылар стандарты.

IEC 61000-4-2:2008

Электромагниттік үйлесімділік (ЭМУ) – 4-2 бөлім: Сынақ және өлшеу әдістері – Электростатикалық разрядқа төзімділік сынағы.

ПАЙДАЛАНУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР

ЕСКЕРТУ

ОСЫ ӨНІМ НҰСҚАУЛЫҒЫ МЕН ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫН МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ. БҰЛ НҰСҚАУЛЫҚТА ПЕШТІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН ҚОЛДАНЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ НҰСҚАУЛАР БЕРІЛГЕН.

НҰСҚАУЛЫҚТЫ ӨРҚАШАН АНЫҚТАМА РЕТІНДЕ САҚТАҢЫЗ.

ҚАТЕ ОРНАТУ, КӨМЕК КӨРСЕТУ, ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ, ТАЗАЛАУ, БҰРМАЛАУ НЕМЕСЕ ӨЗГЕРТУ САЛДАРЫНАН БҰЙЫМ ДҰРЫС ЖҰМЫС ІСТЕМЕУІ, ЗАҚЫМДАЛУЫ ЖӘНЕ СЫНУЫ МҰМКІН.

ЕСКЕРТУ ТАҢБАЛАРЫ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

ҚЫЗДЫРЫЛҒАН/ЫСТЫҚ БЕТТІҢ ҚАУІПТІЛІГІ



! ЕСКЕРТУ ! ЖҰМЫС ІСТЕП ТҰРҒАНДА, ПЕШ ҰСТАҒАНДА ЫСТЫҚ БОЛАДЫ. ПЕШТІ АБАЙЛАП ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ. ЫҚТИМАЛ КҮЙІКТЕРДІ БОЛДЫРМАУ ҮШІН ПЕШ ЖҰМЫСЫ КЕЗІНДЕ ПЕШТІҢ СЫРТҚЫ ЖАҒЫНА ҚОЛ ТИГІЗБЕҢІЗ. КҮЙІП ҚАЛМАУ ҮШІН ҚОЛ ҚОРҒАНЫШЫН ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ ! ПЕШТЕ ҚЫЗДЫРЫЛҒАН МАТЕРИАЛ ЫСТЫҚ БОЛУЫ МҰМКІН. ҚЫЗДЫРЫЛҒАН МАТЕРИАЛМЕН ЖҰМЫС ІСТЕГЕНДЕ, КҮЙІП ҚАЛМАУ ҮШІН САҚ БОЛЫҢЫЗ.

Пешті тек термопластикалық материалды қыздыру үшін пайдалану керек. Термопластикалық материалды қыздырудан басқа кез келген мақсатта пайдалануға тыйым салынады және ол қауіпті болуы ықтимал. *Қолданылатын термопластикалық материалдың Пайдалану нұсқаулығын қараңыз.*

Пеш кәсіби мақсатта пайдалануға арналған және оны тек білікті мамандар пайдалануы керек:

- Пешті балалардың көзінше қараусыз қалдырмаңыз және балалардың пешке қол жеткізе алмауын қамтамасыз етіңіз.
- Пештің жанына жылу көздерін қоюға болмайды.
- Өрт қаупін болдырмау үшін пештің жанына тұтанғыш материалдар немесе тұтанғыш сұйықтықтар қоймаңыз.
- Цифрлық панель опцияларын саусақтармен реттеңіз; басқа заттар пешті зақымдап, кепілдікті жарамсыз етуі мүмкін.

Зақымдалған шыны есік бөліктерін дереу ауыстыру керек (+1 484-720-6054 нөмірі немесе techsupport@Qfix.com мекенжайы бойынша Qfix компаниясына хабарласыңыз).

Пеш ұзақ уақыт бойы (бірнеше күн) пайдаланылмаса, пешті розеткадан ажыратыңыз.

Qfix пешін дұрыс пайдаланбау, рұқсат етілмеген қызметкерлер жүргізген өзгерістерден немесе жөндеуден туындаған немесе Qfix компаниясы ұсынбаған және осы үлгімен пайдалануға арналмаған қосалқы бөлшектермен бірге пайдаланылған кез келген залал үшін жауапты емес.

Бұл пеш қолданыстағы ЕЕС директиваларына сай.

ПАЙДАЛАНУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР

ПЕШТІ АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНУ

Орнатудың осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға және жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес дұрыс орындалғанын тексеріңіз. Пешті іске қоспас бұрын барлық ескертулер мен қауіпсіздік нұсқауларының түсінікті екенін және мұқият орындалатынын тексеріңіз.

Пештің ішінде немесе сыртында пластик материалдар, нұсқаулықтар немесе пластик үлдір жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Барлық орауышты, соның ішінде пештің қабырғаларына жағылған қорғаныш үлдірді алып тастау керек.

Желдеткіштер мен аэрация саңылаулары ашық және кедергісіз болуы керек.

Орнату процесінде шығарылған пештің бөлшектерінің барлығы орнына қайта орнатылғанын тексеріңіз.

СЫНАУ

Алғашқы рет пайдалану алдында үлгі қыздыру циклін орындау арқылы пешті сынап көріңіз. Үлгі қыздыру циклі функционалдық жұмысты тексереді және ақаулардың бар-жоғын көрсетеді. *Үлгіні қыздыру циклі пештің ішіндегі күйдегі пеш сөрелерін қамтуы керек.*

1. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы пешті іске қосыңыз.
2. Бағдарлама индикаторының (P01) жыпылықтауы тоқтағанша күтіңіз.
3. Температураны ең жоғары параметрге орнату үшін КӨБЕЙТУ түймесін басыңыз.
4. Қыздыру уақытын 15-20 минутқа орнату үшін ТАЙМЕР түймесін, одан кейін КӨБЕЙТУ/АЗАЙТУ түймелерін басыңыз.
5. БАСТАУ/ТОҚТАТУ түймесін басыңыз.
6. Алдын ала қыздыру басталып, дисплейде «PrH» жыпылықтайды.
7. Алдын ала қыздыру циклінің соңында пеште PrH READY көрсетіледі.
8. PrH READY дисплейін өшіру үшін БАСТАУ/ТОҚТАТУ түймесін басыңыз.
9. Таймерді іске қосып, кері санақты бастау үшін БАСТАУ/ТОҚТАТУ түймесін басыңыз.

Өндіріс барысында пеш сөрелері май қалдығымен қапталады. 15-20 минуттық қызумен сынау циклі кезінде қалдық «күйіп кетеді». «Күйіп кету» кезеңінде аздап түтіндеу байқалуы мүмкін.

Қыздыру циклі кезінде төменде көрсетілген шарттарды мұқият тексеріңіз:

- ШАМ түймесін басыңыз. Қыздыру камерасының шамы қосулы. 60 секундтан кейін қыздыру камерасының жарығы өшеді.
- Пештің есігі ашылғанда, таймер кідіреді. Пеш есігі жабылған кезде, таймер жұмысын жалғастырады.
- Пештің есігі ашылғанда, пеш қызуды тоқтатады да, қозғалтқыш пен желдеткіштер тоқтайды. Пеш есігі жабылған кезде, пеш, қозғалтқыш және желдеткіштер жұмысын жалғастырады.
- Белгіленген температурада қыздыру температурасының термостатының қыздыру элементтерін өшіреді.
- Қыздыру камерасының желдеткіштері бір бағытта айналады.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Күнделікті техникалық қызмет көрсету үшін тек пайдаланушы жауапты.

ТАЗАЛАУ: ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Тазалау алдында пештен электр қуатын ажыратып, пештің толығымен салқындағанына көз жеткізіңіз.

! ЕСКЕРТУ ! ПЕШТІ ЕШҚАШАН ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ СУ БҮРІККІШТЕРІМЕН ТАЗАЛАУҒА БОЛМАЙДЫ.

Тиісті көз, ауыз және қол қорғанышын пайдалану керек.

Пешті дымқыл шүберекпен жақсылап шаю керек. Ешқашан пеште еріткіштердің немесе жуғыш заттардың қалдықтарын қалдырмаңыз. Қалдықтар мұқият жойылмаса, коррозия пайда болу қаупі туындауы мүмкін.

ҚЫЗДЫРУ КАМЕРАСЫН ТАЗАЛАУ

Тұрақты тазалау санитарлық қыздыру камерасын сақтайды және болат құрамдас бөліктерінің тозуының алдын алады.

Орталықтың тазалау протоколдарын орындаңыз.

Қыздыру камерасының қабырғаларын сабынмен және ыстық сумен тазалап, жақсылап шайыңыз. Пештің қыздыру камерасының қаптамасын тұрақты тазалау абразивті емес жуғыш затпен жүргізілуі керек. Тазалау үшін жоғары қысымды су буы ұштарын немесе бұмен пісіргіштерді пайдаланбаңыз. Қышқыл, абразивті, коррозиялық құм немесе каустикалық сода негізіндегі жуғыш заттарға тыйым салынады.


Қыздыру камерасын 70 °C (158 °F) жоғары қыздыру температурасында жууға қатаң тыйым салынады, себебі ол күйіп қалу қаупін тудырады.

Кір қыртыстарын тазалау үшін пластик қылшықтарды немесе сірке суы мен жылы суға малынған губканы пайдаланыңыз.

Тек Qfix компаниясы ұсынған өнімдерді пайдаланыңыз.

СЫРТЫН ТАЗАЛАУ

Жылы суы бар дымқыл шүберекті немесе тот баспайтын болатты тазалауға жарамды өнімдерді пайдаланыңыз. Қышқыл өнімдерді немесе аммиакты пайдалануға болмайды.

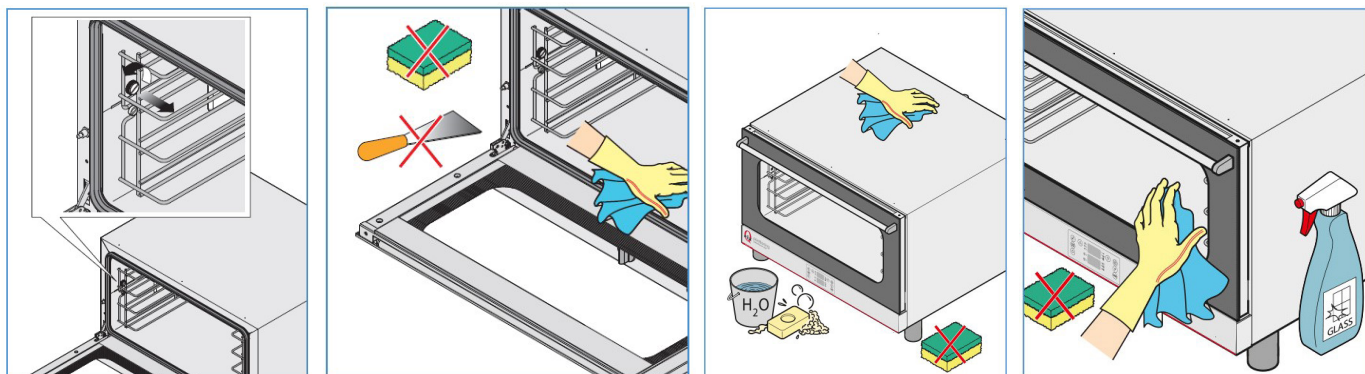


ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ОҢ ЖАҚ ШАМДАРДЫ АУЫСТЫРУ

! ЕСКЕРТУ ! ЭЛЕКТР ТОГЫ СОҚПАУЫ НЕМЕСЕ ЖАРАҚАТТАНЫП ҚАЛМАУ ҮШІН МЫНА ПРОЦЕДУРАНЫ ҚАТАҢ САҚТАҢЫЗ:


- Пештің электр қосылымын ажыратып, пешті суытыңыз.
- Бүйірлік торларды алып тастаңыз.
- «А» әйнегін алып, «В» күйіп кеткен жарық шамын алыңыз да, жаңа шаммен ауыстырыңыз және қайта құрастырыңыз.

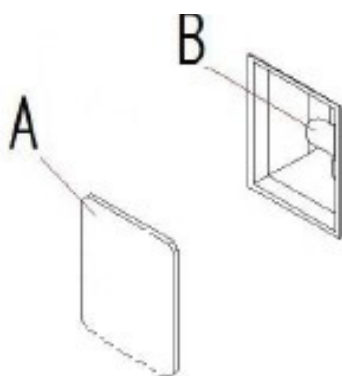

- Бүйірлік торларды пешке қайта құрастырыңыз.

RAPIDHEAT ПЕШІНІҢ САҚТАНДЫРҒЫШЫН АУЫСТЫРУ

1. Төмендегі суретте көрсетілген пештің артқы панеліндегі бұрандаларды алыңыз.

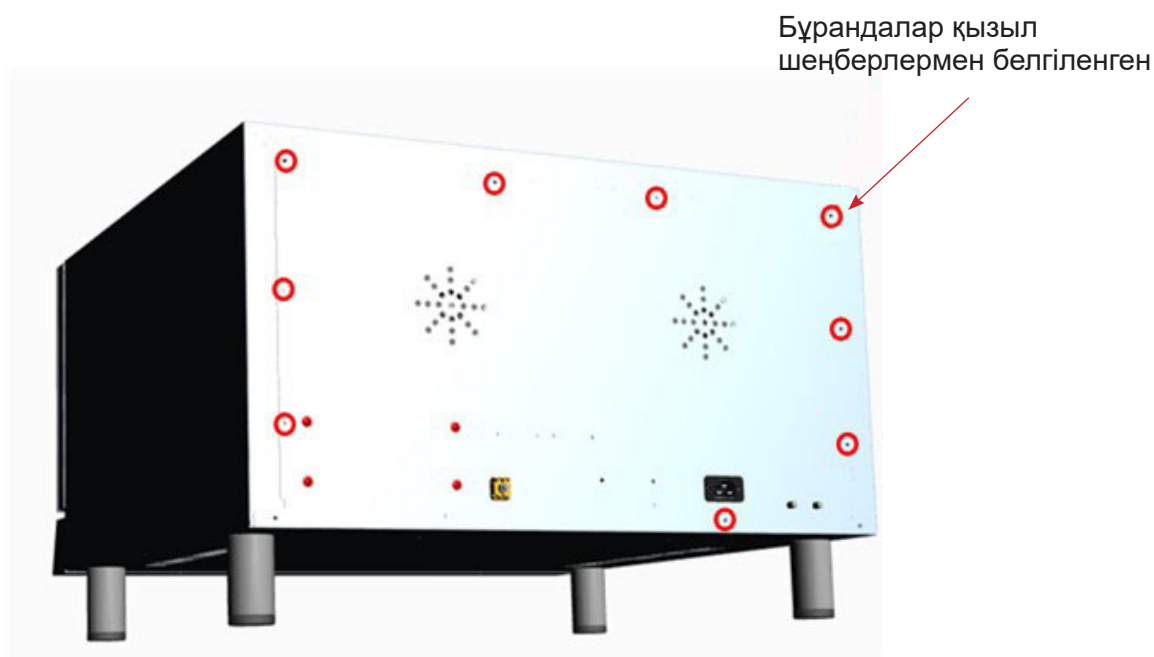


ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

2. Панельді тартып шығарыңыз.

! ЕСКЕРТПЕ ! Панельге жалғанған сымдарды жұлып алмау үшін абай болу керек. Мүмкін болса, панельді тегіс бетке қойып қойыңыз.


3. Сақтандырғыштарды көрсету үшін сақтандырғыш бөлігін тартып шығарыңыз.

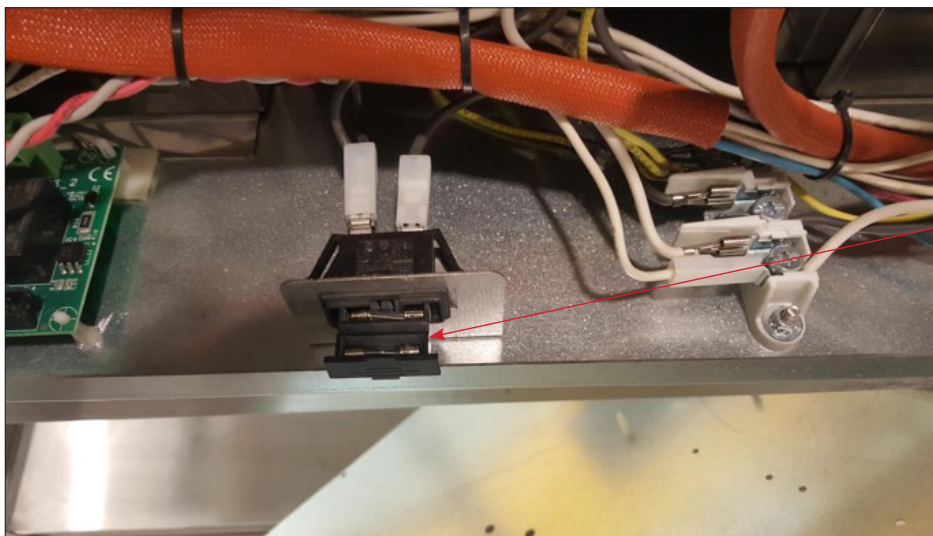

Сақтандырғыш
бөлімі

4. Кірістірілген сақтандырғышты алып тастап, оны қосалқы сақтандырғышпен ауыстырыңыз.
Кірістірілген сақтандырғышты тастаңыз.

5. Артқы панельді орнына салып, бұрандаларды қайта бекітіңіз.

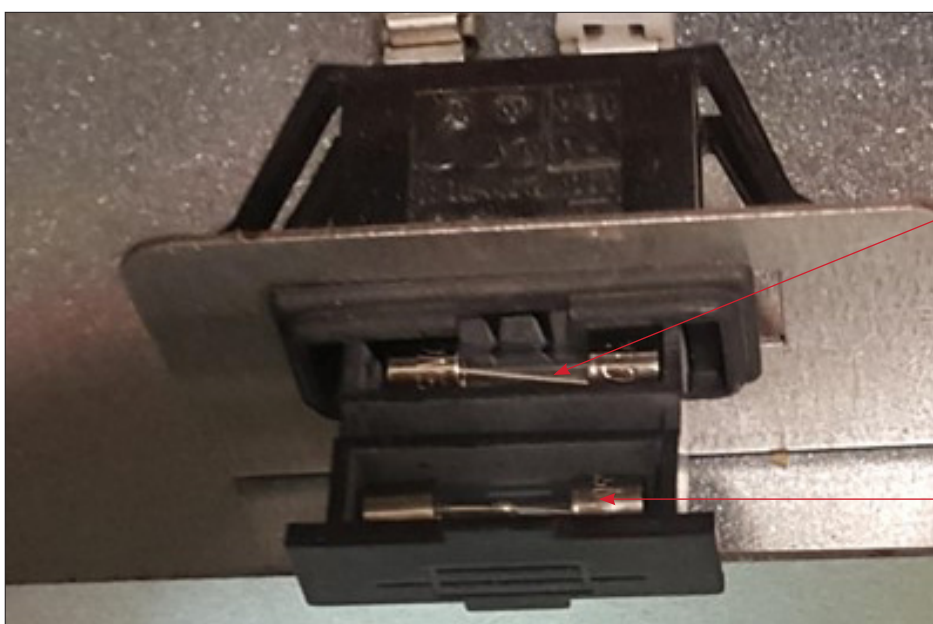

Кірістірілген
сақтандырғыш

Қосалқы
сақтандырғыш

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Пеш зақымдалған болса, оны розеткадан ажыратыңыз.

АҚАУ	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
БАСТАУ кезінде пеш іске қосылмайды	Есік ашық	Есіктің жабылғанын тексеріңіз.
	Микроқосқыш жабық есікті көрсетпейді	Qfix компаниясына хабарласыңыз. Байланыс ақпараты төменде берілген.
Пештің шамы ӨШІРУЛІ	Шам босап қалған	Шамды шам ұстағышына дұрыс орнатыңыз.
	Шам күйіп кеткен	Шамды ауыстырыңыз («Техникалық қызмет көрсету» бөлімін қараңыз).
Камерамен біркелкі қыздырмайды	Желдеткіштер айналу бағытын өзгерте алмайды	Qfix компаниясына хабарласыңыз. Байланыс ақпараты төменде берілген.
	Желдеткіш бұзылған	Qfix компаниясына хабарласыңыз. Байланыс ақпараты төменде берілген.
	Резисторлардың бірінің істен шыққан	Qfix компаниясына хабарласыңыз. Байланыс ақпараты төменде берілген.
Пеш ӨШІРУЛІ	Электр тогының кернеуі үзіліп қалды	Розеткадағы қуатты тексеріңіз.
	Қуат көзіне дұрыс қосылмаған	Қуат розеткасына дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
	Қауіпсіздік термостатының өлшемі	Qfix компаниясына хабарласыңыз. Байланыс ақпараты төменде берілген.
Пеш қосулы кезде желдеткіш тоқтайды	Қауіпсіздік термостатының қозғалтқышы	Пешті өшіріп, қозғалтқыштың термиялық қорғанышы өзін қалпына келтіруін күтіңіз.
	Қозғалтқыш конденсаторы істен шыққан	Qfix компаниясына хабарласыңыз. Байланыс ақпараты төменде берілген.
Цифрлық пештердің қате туралы хабары: ER1 немесе ER2	Компонент бұзылған	Qfix компаниясына хабарласыңыз. Байланыс ақпараты төменде берілген.



Егер ақау жойылмаса, +1 484-720-6054 нөмірі немесе techsupport@Qfix.com мекенжайы бойынша Qfix компаниясына хабарласыңыз. **Өнім кодын «Ref» және сериялық нөмірін «Ser. No.» деп көрсетіңіз.** Өнім коды мен сериялық нөмір туралы ақпарат пештің артқы жағындағы АҚПАРАТ ТАҚТАСЫНДА берілген.

ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕР

Өнімді жөндеу үшін тек рұқсат етілген бөлшектерді пайдаланыңыз. Көмек алу үшін +1 484-720-6054 нөмірі немесе techsupport@Qfix.com мекенжайы бойынша Qfix компаниясына хабарласыңыз.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

ЦИФРЛЫҚ ПЕШТИҢ БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

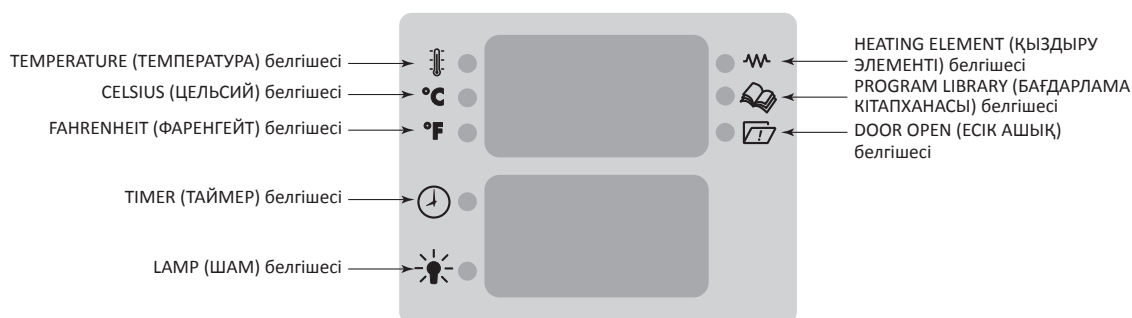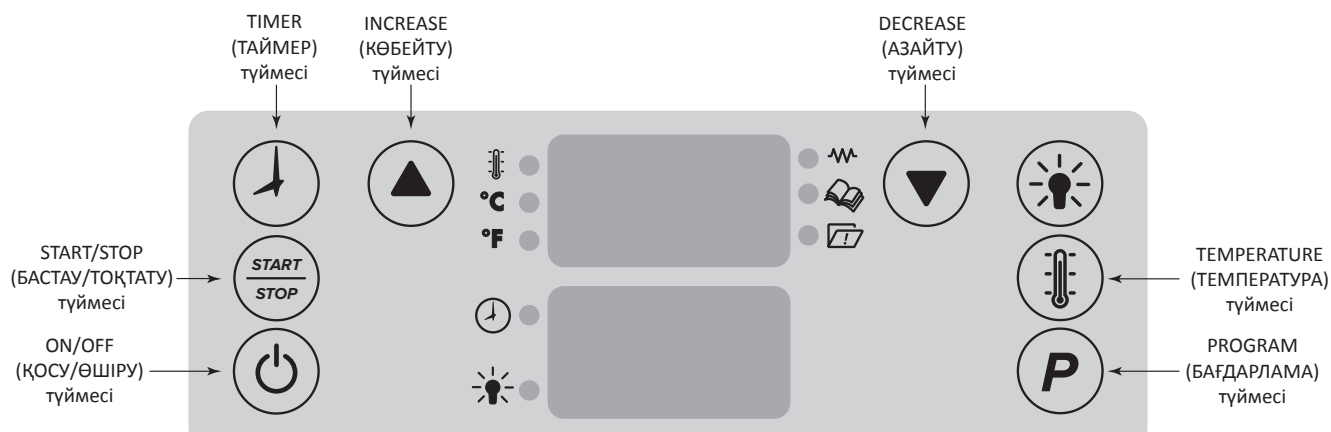

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

ПЕШТІ ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

! ЕСКЕРТПЕ ! Пешті алғаш рет пайдалану алдында, пешті сынау циклін орындау керек. «ПЕШТІ АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНУ» бөлімін қарап, сынақ циклін орындау үшін нұсқауларды орындаңыз.

Әр пайдалану алдында пеш пен кабельдерді тексеріңіз.

! ЕСКЕРТУ ! ҚОЛДАНЫЛАТЫН АРНАЙЫ ТЕРМОПЛАСТИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДЫ ТИІСТІ ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫНАН НЕМЕСЕ ӨНІМ НҰСҚАУЛЫҒЫ МЕН ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫНАН ҚАРАҢЫЗ. ТЕРМОПЛАСТИКТІ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫНДАҒЫ ЕСКЕРТУЛЕР, САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ МЕН ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫНЫҢ БАРЛЫҒЫН ОРЫНДАҢЫЗ.

Пешті қосу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз. Төменде көрсетілгендей ҚОЛМЕН БАСҚАРЫЛАТЫН РЕЖИМ немесе БАҒДАРЛАМА РЕЖИМІ нұсқауларын таңдаңыз.

ҚОЛМЕН БАСҚАРЫЛАТЫН РЕЖИМ

Бағдарлама индикаторы (P01, P02, т.б.) жыпылықтауын тоқтатқанда, қажетті температураны орнату үшін КӨБЕЙТУ немесе АЗАЙТУ түймесін басыңыз.

! ЕСКЕРТПЕ ! ТЕМПЕРАТУРА белгішесінің қасында шам жыпылықтайды.

ТАЙМЕР түймесін басыңыз. ТАЙМЕР белгішесінің қасында шам жыпылықтайды. Қажет қыздыру уақытын орнату үшін КӨБЕЙТУ немесе АЗАЙТУ түймесін басыңыз.

Алдын ала қыздыру циклін бастау үшін БАСТАУ/ТОҚТАТУ түймесін басыңыз. Дисплейде «PrH» белгішесі жыпылықтап, АЛДЫН АЛА ҚЫЗДЫРУ режимін білдіреді. «Алдын ала қыздыру» бөліміне өтіңіз.

! ЕСКЕРТПЕ ! Температура өзгертер алдында, ТЕМПЕРАТУРА белгішесінің қасындағы шам жыпылықтап тұрғанын тексеріңіз. Қыздыру уақытын өзгертер алдында, ТАЙМЕР белгішесінің қасындағы шам жыпылықтап тұрғанын тексеріңіз.

БАҒДАРЛАМА РЕЖИМІ

Пеш жадына өз бағдарламаларыңызды енгізу туралы ақпаратты «ПЕШТІ БАҒДАРЛАМАЛАУ» атты VII бөлімнен қараңыз.

Бағдарлама индикаторы (P01, P02, т.б.) жыпылықтап тұрғанда, қажет бағдарлама таңдалғанша КӨБЕЙТУ немесе АЗАЙТУ түймесін басыңыз.

Алдын ала қыздыру циклін бастау үшін БАСТАУ/ТОҚТАТУ түймесін басыңыз.

! ЕСКЕРТПЕ ! Дисплейде P01 (1-бағдарлама), P02 (2-бағдарлама), т.б. жыпылықтау арқылы соңғы сақталған бағдарлама көрсетіледі. Егер қажет бағдарлама таңдалмай тұрып дисплейдің жыпылықтауы тоқтаса, қажет бағдарлама таңдалғанша «Р» түймесін басып, КӨБЕЙТУ немесе АЗАЙТУ түймесін басыңыз.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

АЛДЫН АЛА ҚЫЗДЫРУ ЦИКЛІ

Алдын ала қыздыру циклінің соңында пеште PrH READY белгішесі есік ашылғанша көрсетіледі.

ЖҰМСARTУ ЦИКЛІ

Пеш алдын ала қыздыру циклін аяқтап, алдын ала белгіленген температураға жеткенде, пеш термопластикалық жұмсарту процесін бастауға дайын болады. Термопластикалық масканы (немесе болюсті) торлы қаптамаға салыңыз. Торлы қаптаманы тасымалдау парағы ретінде пайдаланып, термопластикалық масканы (немесе болюсті) пештің сөресіне қою арқылы пешке салыңыз.

! ЕСКЕРТПЕ ! Маска жақтауының астыңғы жиегін пештің артына қарай орналастырыңыз. Масканың астыңғы жиегі пеш сөресінің артқы жиегіне туралануы керек. Маска басы пештің алдыңғы жағындағы пеш сөресінің алдыңғы жиегіне туралануы керек.

Есікті жауып, БАСТАУ/ТОҚТАТУ түймесін басыңыз. Таймер кері санақты бастайды.

! ЕСКЕРТПЕ ! Жұмсарту циклі кезінде **ТЕМПЕРАТУРА** түймесін бір рет басу арқылы камераның іс жүзіндегі температурасын байқауға болады.

Жұмсарту барысында есік ашылса, таймер кідіреді. Есік жабылғаннан кейін, таймер қайта іске қосылады. Таймерді жұмсарту циклі кезінде қажетті уақытқа жеткенше ТАЙМЕР түймесін, одан кейін КӨБЕЙТУ немесе АЗАЙТУ түймелерін басу арқылы реттеуге болады.

Жұмсарту циклі кезінде температураны орнату нүктесін қажет температураның орнатылған нүктесіне жеткенше КӨБЕЙТУ немесе АЗАЙТУ түймелерін басу арқылы реттеуге болады.

Пештің ішін жарықтандыру үшін ШАМ түймесін басыңыз. Шам 60 секунд жанып тұрады.

Бағдарламаланған қыздыру ұзақтығының соңында пеш үш рет, содан кейін пеш есігі ашылғанша 60 секунд сайын бір рет дыбыстық сигнал береді. Есік жабылғаннан кейін пеш таңдалған температураны сақтайды.

Алдын ала қыздырылғаннан кейін пешпен соңғы әрекеттесуден кейін пеш 2 сағат бойы таңдалған температураны сақтайды.

Пеш температураны сақтау режимінде болғаннан кейін жаңа термопластик масканы (немесе болюсті) жұмсарту үшін есікті ашып, термопластик масканы (немесе болюсті) салыңыз да, есікті жабыңыз және жаңа қыздыру циклін бастау үшін БАСТАУ/ТОҚТАТУ түймесін басыңыз. Уақыт пен температураны қажетінше реттеңіз. Жаңа алдын ала қыздыру циклі қажет болмайды.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

ДИСПЛЕЙ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Дисплей параметрлерін икемдеу үшін КӨБЕЙТУ және АЗАЙТУ түймелерін бірнеше секунд бойы бір уақытта басыңыз.

Мына санаттарды таңдау үшін ТЕМПЕРАТУРА түймесін басыңыз:

- Тіл (Ағылшын, Француз, Неміс, Испан, Италиян тілін таңдаңыз)
- Шығу
- Дисплей (жарықтық деңгейі: 1-7 = төмен-жоғары)
- Бірліктер (Фаренгейт немесе Цельсий опциясын таңдаңыз)
- PpH (зауытта алдын ала орнатылған 1 °C параметрін өзгертуге болмайды)

Қандай да бір параметрлерді өзгерту үшін дисплей таңдалған санатқа жылжып барған кезде ШАМ түймесін басыңыз.

Қажет мәнді таңдау үшін КӨБЕЙТУ және АЗАЙТУ түймелерін пайдаланыңыз.

Жаңа мәндерді сақтау үшін «Р» түймесін басыңыз.

Өзгерістер енгізіліп болғаннан кейін, ШЫҒУ тармағына жылжып барып, шығу үшін «Р» түймесін басыңыз.

ПЕШТІ БАҒДАРЛАМАЛАУ

БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ҚЫЗДЫРУ ЦИКЛДЕРІ АРАСЫНДА АУЫСТЫРУ

Бағдарламаларды қыздыру циклдері арасында ауыстыру үшін жаңа бағдарламаны таңдау алдында пешті өшіру керек. Мысалы, А маскасы 01 (P01) бағдарламасын пайдаланып жұмсарту процесін аяқтағаннан кейін және пеш қызуға техникалық қызмет көрсету режиміне қайтқаннан кейін, пешті ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы өшіру керек. Пешті қосу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қайтадан басыңыз. Жаңадан қалаған бағдарламаны таңдау үшін «ПЕШТІ ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ» атты VI бөлімде егжей-тегжейлі берілген «Бағдарлама режимі» нұсқауларын орындаңыз.

БАҒДАРЛАМАЛАНҒАН ҚЫЗДЫРУ

Жадта тоқсан тоғыз (99) бағдарламаны сақтауға болады.

! ЕСКЕРТПЕ ! Жаңасын жасау немесе бар бағдарламаларды жаңарту үшін пешті қосу керек, бірақ қыздыру/жұмсарту циклінің ортасында қосуға болмайды.

Жаңа термопластикалық материалды жұмсарту процесін бағдарламалау үшін:

Пештің қуаты қосулы екенін тексеріңіз. «Р» түймесін басыңыз, сонда БАҒДАРЛАМА КІТАПХАНАСЫ белгішесінің жанындағы шам жанады. Қолданыстағы бағдарламалар БАҒДАРЛАМА КІТАПХАНАСЫ белгішесінің жанындағы ҚЫЗЫЛ ЖШД шамымен көрсетіледі. ЖАСЫЛ ЖШД шамы бос орынды көрсетеді. КӨБЕЙТУ немесе АЗАЙТУ түймелерін пайдаланып, жасыл ЖШД пайда болғанша бағдарламалар арасында жылжыңыз. Бағдарлама нөмірі жыпылықтауды тоқтатқанда, жаңа бағдарламаны икемделген параметрлермен орнатуға болады.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

Параметрлерді орнату үшін:

1. Температура

КӨБЕЙТУ/АЗАЙТУ түймесін бір рет басыңыз, сонда ТЕМПЕРАТУРА белгішесі жанындағы шам жыпылықтайды. Қажет температура таңдалғанша КӨБЕЙТУ/АЗАЙТУ түймелерін баса беріңіз. Температураны жасыл ЖШД шамы ТЕМПЕРАТУРА белгішесі жанып тұрғанда ғана таңдауға болады. Температура ауқымы – 60 °C-80 °C (140 °F-176 °F).

2. Қыздыру уақыты

ТАЙМЕР түймесін басыңыз. ТАЙМЕР белгішесінің қасында жасыл ЖШД жыпылықтайды. Қыздыру уақытын орнату үшін КӨБЕЙТУ немесе АЗАЙТУ түймесін басыңыз. Уақытты жасыл ЖШД шамы ТАЙМЕР белгішесі жанып тұрғанда ғана таңдауға болады. Уақыт 0-ден («N») 97 минутқа дейін, содан кейін шексіздікке дейін минуттармен өлшенеді.

3. Бағдарламаны есте сақтау

«Р» түймесін 4 секунд басыңыз. Есте сақтау дыбыстық сигналмен және бағдарлама нөмірімен расталады. Дисплейде «NEN» белгішесі көрсетіледі.

Бұрыннан бар бағдарламаны жаңа бағдарлама етіп өзгерту үшін:

«Р» түймесін бір рет басу арқылы өзгертілетін бағдарламаны таңдаңыз. БАҒДАРЛАМА КІТАПХАНАСЫ белгішесінің жанындағы шам жанады. Дисплейде бағдарлама индикаторы (мысалы, P01) жыпылықтайды. Бағдарлама индикаторы әлі жыпылықтап тұрғанда, КӨБЕЙТУ немесе АЗАЙТУ түймелері арқылы қажет қыздыру бағдарламасын таңдаңыз. Бағдарлама индикаторы жыпылықтауын тоқтатқанда, дисплейде таңдалған бағдарлама үшін алдын ала сақталған мәндер пайда болады.

«Параметрлерді орнату» бөлімінде көрсетілгендей, жоғарыдағы нұсқауларды орындаңыз. Температура және қыздыру уақыты қажет параметрлерге орнатылғаннан кейін, «Р» түймесін 4 секунд бойы басыңыз. Есте сақтау дыбыстық сигналмен және бағдарлама нөмірімен расталады. Дисплейде «NEN» белгішесі көрсетіледі.

ШАМ түймесі

Пештің есігі ашылғанда, шам ҚОСЫЛАДЫ.

Пештің есігі жабылғанда, шам ӨШЕДІ.

ШАМ түймесі басылғанда, шам 60 секунд бойы жанады.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

ПЕШ ЕСІГІ

Пештің есігі ашылғанда, ТАЙМЕР КІДІРЕДІ. ЕСІК АШЫҚ қызыл ЖШД шамы жанады. Есік жабық болғанда, ЕСІКТІ АШУ жасыл ЖШД шамы жанады. Шам өшірулі.

ҚУАТТЫҢ ҮЗІЛУІ

Қыздыру циклі кезінде электр қуаты өшіп қалса, пеш ӨШІРУЛІ күйіне өтеді.

СИГНАЛДАР ЖӘНЕ ДАБЫЛДАР

Дисплейде дабылдар пайда болады.

Үздіксіз дыбыстық сигнал аномалия туралы ескертеді. Дыбыстық сигналды БАСТАУ/ТОҚТАТУ түймесін басу арқылы тоқтатуға болады.

ER1 Камералық зонд дабылы

- Камералық зонд ақаулығы
- Пеш өшеді, бірақ шам жанып тұрады

ER2 Пештің қауіпсіздік термостатының дабылы

- Пештің қыздыру функциясы дұрыс жұмыс істемейді
- Пеш өшеді

ER4 Түйменің бұзылуы

- Функция түймесінің ақауы

БӨЛШЕКТЕР ТІЗІМІ

RT-2075-110

Бөлшек нөмірі	Сипаттамасы
3002143	Front panel PF8003D Qfix
3002144	Kit spare part gasket
3002145	Kit spare part led lamp 5w 120v g9
3002146	Kit spare part motor 110-120v 50/60hz 80w ul
3002147	Kit spare part heating element ø186 700w 1GIK3R279 110v
3002148	Kit spare part control board
3002149	Kit spare part chamber temperature probe
3002150	Kit spare part fan
3002151	Kit spare part power board el. 824/524 micr. M023, 110v
3002152	Kit spare part thermostat manual reset TY62R 150c
3002153	Kit spare part door micro switch
3002174	External glass for 110V and 220V ovens
3002413	110V Oven Fuse Time Lag 250 VAC 5x20 mm Glass FST 5 x 20 Series
3002263	110V Oven Power Cord
3002265	Rapid Heat Oven door with old style hinge
3002266	Rapid Heat Oven door with new style hinge

БӨЛШЕКТЕР ТІЗІМІ

RT-2075-220

Бөлшек нөмірі	Сипаттамасы
3002143	Front panel PF8003D Qfix
3002144	Kit spare part gasket
3002154	Kit spare part lamp 5w 230v g9
3002155	Kit spare part motor 200-240v 50/60hz 80w ul
3002156	Kit spare part heating element ø186 700w 1GIK3R279 230v
3002148	Kit spare part control board
3002149	Kit spare part chamber temperature probe
3002150	Kit spare part fan
3002157	Kit spare part power board el. 824/524 micr. M023, 220v
3002152	Kit spare part thermostat manual reset TY62R 150c
3002153	Kit spare part door micro switch
3002174	External glass for 110V and 220V ovens
3002251	220V Oven Fuse–Cylinder Time-Lag 8 A 250 VAC 5x20 mm Ceramic Cartridge
3002264	220V Oven Power Cord
3002265	Rapid Heat Oven door with old style hinge
3002266	Rapid Heat Oven door with new style hinge



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com

RapidHeat – Qfix компаниясының
сауда белгісі.

2007856_KK_A
2023-07